


Termometru digital Model GF-MT502



VĂ RUGĂM SĂ CITIȚI CU ATENȚIE ÎNAINTE DE UTILIZARE Termometrul digital oferă o citire rapidă și extrem de precisă a temperaturii dumneavoastră. Vă rugăm să citiți instrucțiunile cu atenție. Acestea sunt editate pentru a vă familiariza cu caracteristicile noului dumneavoastră termometru, astfel încât să vă puteți bucura de funcțiile sale și de ani de performanță fiabilă. Dacă termometrul este utilizat de un copil, supravegherea adulților este obligatorie. Acest termometru este fabricat conform sistemului EN12470-2:200 ASTM și respectă cerințele IEC 60601-1:1998+A1+A2, IEC 60601-1-1-2:2001.

DESCRIEREA PRODUSULUI

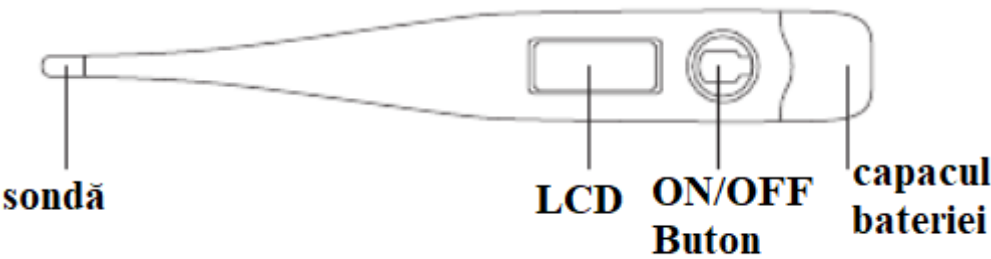

SPECIFICAȚII TEHNICE

Categorie	Informații
Interval	32°C - 42,9°C (90°F - 109,9°F) / °C/°F ales de fabricant
Precizie	±0,1°C, 35,5°C - 42°C (±0,2°F, 95,9°F - 107,6°F)
	±0,2°C sub 35,5°C sau peste 42°C (±0,4°F sub 95,9°F sau peste 107,6°F)
	La temperatura camerei de 25°C (77,0°F)
Afișaj	Afișaj cu cristale lichide, 3 1/2 cifre
Memorie	Pentru stocarea ultimei valori măsurate
Baterie	O baterie buton de 1,55V DC (dimensiune SRA41/UCC 392 sau LR41)

Categorie	Informații
Consum de energie	0,15 miliwati în modul de măsurare
Durata de viață a bateriei	Aproximativ 200 de ore
Dimensiuni	12,3 x 1,7 x 0,9 cm (L x W x H)
Greutate	Aproximativ 10 grame inclusiv baterie
Mediu de utilizare	Temperatură: 10°C - 35°C (50°F - 95°F)
	Umiditate relativă: 25%RH - 80%RH
Condiții de stocare și transport	Temperatură: -25°C - 55°C (-13°F - 131°F)
	Umiditate relativă: 25%RH - 80%RH
Alarmă (Mod Beep)	Aproximativ 10 secunde sunet când temperatura maximă este atinsă

CUM SĂ ÎL UTILIZEZI?

1. Ștergeți sau înmuiați sonda în alcool etilic pentru dezinfectare.
2. Apăsăți butonul Pornit/Oprit. Ecranul LCD va afișa timp de 2 secunde și veți auzi simultan un semnal sonor. Ultima temperatură testată va fi afișată timp de aproximativ 2 secunde. Apoi, ecranul LCD va afișa temperatura de autotest de 37°C (98,6°F). După aceea, va apărea simbolul Lo°C (Lo°F).
3. Poziționați sonda în gură, rect, axilă etc.
4. După ce înregistrarea temperaturii s-a terminat, simbolul gradului °C (°F) de pe ecranul LCD va înceta să clipească și veți auzi semnale sonore timp de aproximativ 10 secunde. Temperatura testată este afișată pe ecranul LCD.

Când ecranul LCD nu mai clipește, dacă sonda este încă în gură, rect sau axilă, temperatura poate crește, așa că, după ce auziți semnalele sonore, este recomandat să o scoateți după 1-2 minute. După testare, dacă temperatura testată este <32°C sau 90.0, ecranul LCD afișează Lo°C (Lo°F); dacă temperatura testată este foarte ridicată, ecranul LCD afișează H°C (sau Hi°F). Consultați imediat un medic. După măsurarea temperaturii, dacă temperatura testată este <37.8°C sau 100.0°F, semnalele sonore sunt ?Bi--Bi--Bi--Bi--Bi-; dacă temperatura testată este >=37.8°C sau 100.0°F, semnalele sonore a căror frecvență este mult mai mare sunt Bi-Bi-Bi----- Bi-Bi-Bi-----Bi-Bi-Bi.

5. Termometrul se va opri automat în aproximativ 10 minute pentru economisirea energiei. Cu toate acestea, pentru a prelungi durata de viață a bateriei, se recomandă apăsarea butonului Pornit/Oprit pentru a opri termometrul odată ce testul este finalizat.
6. Cu termometrul oprit, apăsați și mențineți apăsat butonul Pornit/Oprit timp de 3-4 secunde, până când termometrul pornește și indicatorii scalei de temperatură se schimbă de la °C la °F. Temperatura anterioară citită în memorie este ștearsă atunci când scala de temperatură este modificată.
7. Vă rugăm să aruncați bateria uzată și termometrul în conformitate cu legislația în vigoare.

Notă: La pasul 2, dacă temperatura camerei este mai mare de 32°C (90°F), ecranul LCD va afișa temperatura camerei în loc de Lo°C (sau Lo°F). Notă: Utilizarea capacului sondei poate duce la o discrepanță de 0,1°C (0,2°F) față de temperatura reală.

Utilizare orală

Puneți sonda în oricare dintre pozițiile marcate cu „√”, așa cum se arată în imaginea din dreapta, timp de aproximativ 1 minut. Pentru a asigura acuratețea, vă rugăm să țineți gura aproape timp de 5 minute înainte de a măsura temperatura. Temperatura normală obținută prin această metodă este de 35,7°C-37,3°C (96,3-99,2°F).

Utilizare rectală

Lubrifiați sonda cu vaselină pentru o introducere mai ușoară. Introduceți ușor sonda aproximativ un centimetru (mai puțin de 1/2 inch) în rectul pacientului și țineți brațul ferm lipit de corp timp de aproximativ 1,5 minute; temperatura normală prin această metodă este de 35,2°C-36,7°C (95,4°F-98,1°F).

Utilizare axilară

Din punct de vedere medical, această metodă va oferi întotdeauna o citire inexactă, ștergeți axila cu un prosop uscat. Plasați sonda în axilă și țineți brațul ferm lipit de corp timp de aproximativ 1,5 minute. Temperatura normală prin această metodă este de 35,2°C-36,7°C (95,4°F-98,1°F).

CURĂȚARE ȘI DEZINFECȚIE

1. Curățați termometrul ștergându-l cu o cârpă uscată și sterilizați sonda cu alcool etilic.
2. Nu lăsați termometrul să intre în contact cu niciun diluant chimic.

Notă: Nu este complet impermeabil. Nu înmuiați ecranul LCD în apă, doar sonda este impermeabilă.

Nu scăpați termometrul. Nu este rezistent la șocuri. Nu îndoiți termometrul. Nu fierbeți sonda. Nu depozitați termometrul în lumina directă a soarelui. Nu încercați să dezamblați termometrul, cu excepția cazului în care înlocuiți bateria. Înseamnă tensiune continuă (CC). Înseamnă tip B.

ÎNLOCUIREA BATERIEI

1. Când apare simbolul „” în colțul din dreapta jos al ecranului LCD, bateria este descărcată și trebuie înlocuită.
2. Trageți capacul bateriei cu mâna în direcția indicată mai jos.
3. Trageți ușor placa de circuit cu camera bateriei pe o distanță de aproximativ 1 cm. ,
4. Folosiți un obiect ascuțit, cum ar fi un pix, pentru a scoate bateria descărcată. Aruncați bateria descărcată, departe de copii.
5. Introduceți o baterie nouă de 1,55 V CC, de mărimea unui buton, tip Sr41, UCC392OR LR41 sau echivalentă, în camera bateriei cu borna pozitivă.
6. Acoperiți bateria.