



**(R0) Cântar pentru copii**  
**Instrucțiuni de utilizare**



## Stimată clientă, stimate client,

Ne bucurăm că ați ales un produs din gama noastră. Marca noastră simbolizează produse de calitate superioară, testate în detaliu, din domeniile căldură, terapie, tensiune/diagnosticare, greutate, masaj și aer.

Vă rugăm să citiți cu atenție aceste instrucțiuni de utilizare, să le păstrați pentru consultarea ulterioară, să le puneți la dispoziție și altor utilizatori și să respectați indicațiile.

Cu deosebită considerație,  
Echipa dumneavoastră Beurer

# ! Indicații importante

## 1. Atenție

- Feriți cântarul de șocuri, umiditate, praf, substanțe chimice, variații puternice de temperatură și surse de căldură prea apropiate (sobe, radiatoare).
- Reparațiile pot fi efectuate numai de către Serviciul Clienți Beurer sau de către comercianții autorizați.
- Toate cântarele corespund directivei CE 2004/108 + completările ulterioare. Dacă mai aveți întrebări referitoare la utilizarea aparatelor noastre, vă rugăm adresați-vă comerciantului dumneavoastră sau serviciului pentru clienți Beurer.
- Curățarea: Cântarul poate fi curățat cu o cârpă umezită, pe care puteți aplica, la nevoie, puțin detergent de vase. Nu scufundați niciodată cântarul în apă. Nu spălați niciodată cântarul sub jet de apă.
- Depozitarea: Nu așezați obiecte pe cântar când nu îl utilizați.
- Exactitatea cântarului poate fi afectată de câmpuri magnetice puternice (de ex. plită cu inducție, telefoane mobile).
- Sarcina admisă a cântarului este de max. 20 kg (44 lb, 704 oz). În cazul măsurării greutateii, rezultatele sunt afișate în unități de măsurare de 5 g (0,02 lb, 0,20 oz).
- Cântarul nu este conceput pentru utilizarea în scopuri comerciale.
- Înlăturați elementul de siguranță pentru transport eventual existent.
- Așezați cântarul pe o podea stabilă netedă; o suprafață stabilă este premisa pentru o măsurare corectă.


## 2. Utilizare

### 2.1 Baterie

Pentru cântar sunt necesare 2 baterii alcaline micro AA de 1,5 V. Acestea trebuie introduse înainte de punerea în funcțiune a cântarului pentru copii în compartimentul de baterii de pe partea de jos a cântarului, conform polarizării. Dacă pe afișaj apare „Lo” sau apare simbolul de baterie, trebuie schimbate bateriile existente.

Bateriile consumate nu se elimină la gunoierul menajer. Eliminați-le apelând la comerciantul dumneavoastră de electrice sau prin intermediul unui punct de colectare specializat, deoarece această obligație este prevăzută de lege.

Notă: Bateriile/acumulatoarele care conțin substanțe toxice prezintă aceste simboluri: Pb = bateria conține plumb, Cd = bateria conține cadmiu, Hg = bateria conține mercur.

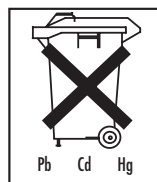

## 2.2 Cântărirea

Greutatea este afișată în intervale de 5 g începând cu o greutate minimă de 50 g.

Apăsăți tasta „” pentru a porni cântarul.

Imediat ce a apărut „0.000 kg” pe ecran, cântarul este pregătit pentru măsurare.

Așezați acum bebelușul pe suprafața de cântărire. Acționați cu mare grijă, nu scăpați bebelușul și țineți cont de capul acestuia.

Cântarul pentru copii dispune de o funcție „HOLD” (AUTO HOLD și MECHANICAL HOLD). Funcția AUTO HOLD fixează greutatea bebelușului imediat ce acesta este suficient de liniștit pentru a înregistra o valoare exactă de măsurare. Dacă bebelușul se mișcă mult, nu se poate determina greutatea. Încercați din acest motiv să liniștiți bebelușul care dă din picioare pentru a obține astfel o măsurare rapidă. Nu atingeți însă bebelușul, pentru a nu influența măsurarea greutății.

Imediat ce greutatea bebelușului este fixată, afișajul „HOLD” nu mai luminează intermitent și greutatea este afișată timp de 20 de secunde. Cântarul se oprește în mod automat.

Dacă bebelușul dă foarte tare din picioare, puteți alege funcția MECHANICAL HOLD apăsând tasta „HOLD”. În decurs a 3 secunde, afișajul „HOLD” nu mai luminează intermitent și greutatea este afișată pentru 20 de secunde.

Dacă nu doriți să lăsați bebelușul direct pe suprafața cântarului, ci de exemplu, pe un prosop, trebuie să așezați prosopul pe cântar înainte de pornire. În cazul în care prosopul și alte obiecte pe care doriți să le utilizați la cântărire sunt mai grele de 50 g, puteți utiliza, de asemenea, funcția TARA. După ce ați apăsât tasta TARA, pe ecran se afișează „Tare”. Pentru a reseta cântarul la 0.000 g, acționați tasta TARA, după ce „HOLD” nu mai luminează intermitent.

În starea de livrare, cântarul este reglat la unitatea de măsură „kg”. Cu tasta „kg/lb/oz” puteți comuta de fiecare dată la unitățile de măsură Kilogramm „kg”, livră „lb” și uncie „oz”

## 2.3 Eliminarea deșeurilor

Vă rugăm să eliminați aparatul conform prevederilor Directivei WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment) privind deșeurile de echipamente electrice și electronice. În caz de întrebări suplimentare, adresați-vă autoritățile locale însărcinate cu eliminarea deșeurilor.



