


# BREATHALYZER ALCOESCAN AL8800 BT

AL8800 BT — это элегантный и компактный алкотестер, который может подключаться к приложению для смартфона через Bluetooth BLE, что позволяет управлять данными и обмениваться ими по SMS, социальным сетям и электронной почте. Кроме того, его можно использовать без подключения к смартфону в автономном режиме, что удобно и полезно для личной проверки. Усовершенствованная функция проверки качества «Система самодиагностики (SDS)» в приложении позволит проверить качество датчика алкотестера и обеспечит точный и надежный результат теста.


## Компоненты

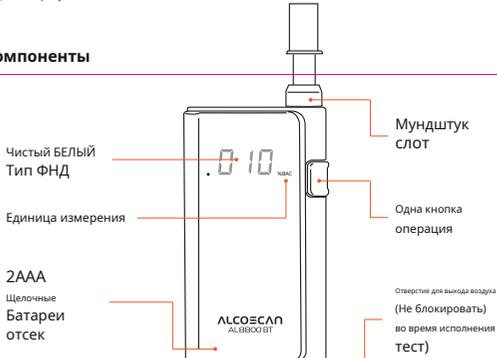

## Содержание

Алкотестер, чехол на молнии, мундштук (5 шт.), Батареи AAA (2 шт.), внешняя коробка и руководство пользователя.

## Как использовать: БЕЗ сопряжения с приложением iSOBER.

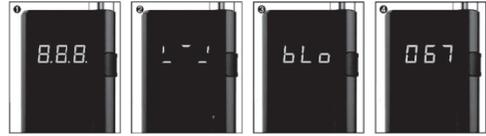

1. Нажмите кнопку питания.

\* Если вы будете продолжать нажимать кнопку питания, после калибровки будет отображаться ряд результатов тестирования, которые будут переключаться между экранами.

\* например: **000.005** - 6 раз проверено после калибровки

2. Разогревайтесь, пока не увидите знак «bLo (дуть)».

3. Дуйте через мундштук в устройство в течение 4 секунд.

4. Результат будет отображаться в течение 10 секунд и автоматически выключится.

\* Пассивная тестовая операция:

Нажмите кнопку питания один раз в состоянии «bLo (обдувание)», после чего на дисплее отобразится результат P (пройден) или F (не пройден) в зависимости от заданного предельного значения.

## Как использовать: с помощью сопряжения с приложением iSOBER.

1. Скачайте приложение iSOBER из App Store или Google Play и войдите в систему.

2. Включите режим Bluetooth на вашем мобильном устройстве для сопряжения с устройством AL8800 BT.

3. Включите устройство AL8800 BT и убедитесь, что на дисплее отображается «APP».

4. Нажмите кнопку тестирования в приложении, после чего устройство перейдет в режим готовности к продоху, отобразив сообщение «bLo (продухайте)».

5. Выдувайте воздух через мундштук в устройство в течение 4 секунд, следуя инструкциям в приложении.

6. Если включен режим камеры, камера вашего мобильного устройства сделает снимок во время обдувания.


\* Если вы хотите проверить результаты теста на алкоголь, режим камеры окажется полезным.

7. Приложение предоставит вам такую информацию, как результат теста, дата и время теста, модель устройства, состояние датчиков, местоположение по GPS.

8. Кроме того, пользователь может оставить комментарии о тестировании, а также делиться ими через SMS, электронную почту и социальные сети.

9. Пока на дисплее устройства не отобразится «APP», пользователь может выполнять тесты подряд, используя приложение iSOBER.

## Как заменить батарейки

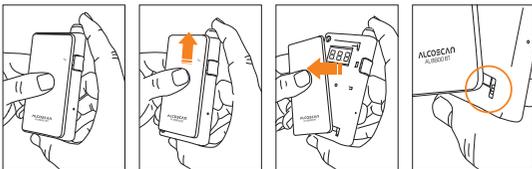

1. Удалите заднюю крышку и внутреннюю крышку устройства прочно.
2. Поднимите старую батарейку.
3. Затем вставьте новую батарейку вставьте батарейки.
4. Установите переднюю крышку на место, обратный порядок разборки.  
\* Сначала приподнимите маленький язычок к основному корпусу.

## Осторожность

a. Пожалуйста, подождите не менее 20 минут после еды или питья, прежде чем проводить тестирование. Остатки алкоголя во рту или даже избыток слюны могут помешать проведению анализа.

Сведа относится опознавательный для рта на спиртовой основе или аналогичные средства.


b. Не вдуйте дым, слюну или другие загрязнения в мундштук, так как это может повредить датчик.

c. Не используйте AL8800 BT в качестве средства для управления транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.

d. Хранить в недоступном для детей месте, вдали от экстремальных температур.

e. Пожалуйста, не используйте марганцевые батарейки. Используйте ТОЛЬКО щелочные батарейки.

## Предупреждающая дисплей

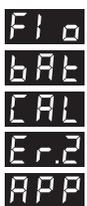

Образец выдыхаемого воздуха оказался недостаточно концентрированным для проведения измерений. После автоматического прогрева, пожалуйста, обдувайте образцы сильным и равномерным потоком воздуха.

Уровень заряда батареи низкий. Пожалуйста, замените батареи.

Если вы проведете более 1000 тестов или 12 месяцев, на дисплее AL8800 BT отобразится надпись «CAL». Нажмите кнопку питания один раз, после чего устройство начнет прогрев перед проведением теста.

Ошибка датчика – обратитесь в авторизованный сервисный центр.

AL8800 BT сопряжен по Bluetooth с приложением iSOBER. Он выключится через 5 минут.

## Спецификация

Тип датчика	датчик топливного элемента	
Батарея	Щелочные батарейки типа AAA, 2 шт.	
Масса	83 г (включая батарейки)	
Размер (мм)	97,5 (высота) x 53,8 (ширина) x 18 (толщина)	
Указание Результат теста	Отображать	0,00 ~ 5,00 г/л
		0,00 ~ 5,00 ‰
		0,00 ~ 0,50 ‰BAC
		0,00 ~ 2,50 мг/л,
		. 000 ~ .500 ‰ от концентрации алкоголя в крови (2) 000 ~ 500 знака после запятой) мг/100 мл
Время разминки	5 сек ~ 120 сек	
Время для анализа	В течение 5 секунд (при 0,050% BAC, 24°C)	
Точность	±10% (при 0,050% BAC)	
Рабочая/температура хранения	5°C ~ 40°C / 0°C ~ 50°C	
Мундштук	MP11000	
Интервал калибровки	Каждые 1000 тестов или каждые 12 месяцев (в зависимости от того, что наступит раньше).	
Сертификат	CE RED, FCC, Bluetooth SIG	
	BLE 4.2	
Дополнительная функция	Напоминание о калибровке	
	Совместимо с мобильным приложением iSOBER	

## Гарантия

Производитель гарантирует отсутствие дефектов изготовления или материалов в изделии (за исключением повторной калибровки: повторная калибровка не покрывается гарантией) при нормальной эксплуатации в течение ДВЕНАДЦАТИ (12) месяцев с даты покупки. Обязательства производителя по данной гарантии ограничиваются заменой, регулировкой или ремонтом устройства при условии возврата вместе с подтверждением покупки. Данная гарантия аннулируется, если устройство было повреждено или подверглось несанкционированному вмешательству.

## Перекалибровка и обслуживание

Пожалуйста, свяжитесь с местным дистрибутором.