


INTENDED USE

Ophthalmic Microsurgical Knives are used during ophthalmic surgery operations in order to make precise incisions, which are among the preconditions for application in delicate ophthalmic surgical interventions.

FURTHER INFORMATION

1. Construction

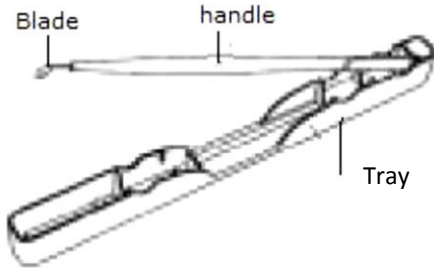

2. Materials

- Blade : Stainless steel
- Handle : Polycarbonate
- Tray : Polycarbonate

3. Packaging

Each Ophthalmic knife is individually packed in a pouch to ensure sterility. These products are sold in boxes.












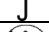
WARNINGS / PRECAUTIONS FOR SAFE HANDLING

- Read, follow and keep these Instructions for Use.
- See the intended use and use the product only in accordance with it.
- Store any new products in a dry, clean and safe place.
- Avoid high temperature, high humidity, direct sunlight, soaking and preserve at room temperature.
- Do not preserve at a place with chemical products and gas occurrence.
- Preserve package material at a non-break and non-pinhole status
- It is necessary to confirm the use period on each package and box
- By confirming the use period on each package and box, dispose the products whose use period is expired.
- Prior to each use, inspect the product for: loose, bent, broken, cracked, worn, or fractured components.
- If product is damaged or defective, do not use it and set it aside. Avoid contact of the delicate blades at tips with hard surfaces or other instruments.

CONTRAINDICATIONS - PROHIBITIONS

- Re-use is prohibited.
- Re-sterilization is prohibited.
- Do not use it after expiry date.
- Do not use it if product's aseptic condition is considered spoiled by broken package.

SYMBOLS AND EXPLANATIONS

	CE marking and notified-body No.		Manufactured by
	Manufacture date		Expiry date
	Sterilization by ethylene oxide		Do not re-use
	Do not re-sterilize		Lot Number
	Keep away from sunlight		Product should be kept dry
	Caution! Refer to accompanying document		Do not use if the package is damaged

APPLICABLE MODELS: 62xxx



SIDAPHARM P.C.

21, Stageiriti & 24, Em.Fili str., Thessaloniki GR-54352, Greece, European Union
 T: +30 2310906660 F: +30 2310989846 info@sidapharm.gr




ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ

Τα Οφθαλμολογικά Μικρομαχαιρίδια χρησιμοποιούνται στις οφθαλμολογικές χειρουργικές επεμβάσεις για τη δημιουργία τομών ακριβείας, οι οποίες είναι προαπαιτούμενες για εφαρμογή σε περίτεχνες οφθαλμολογικές χειρουργικές παρεμβάσεις.

ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

1. Κατασκευή

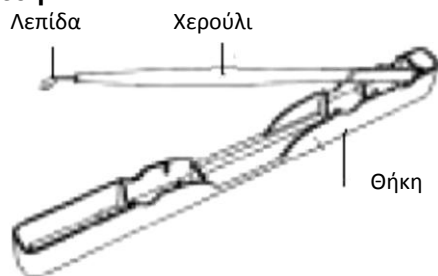

2. Υλικά

Λεπίδα : Ανοξειδωτο ασάλι
Χερούλι : Πολυκαρβονικό
Θήκη : Πολυκαρβονικό

3. Συσκευασία

Κάθε οφθαλμολογικό μαχαιρίδιο τοποθετείται σε ατομική συσκευασία για να διασφαλιστεί η αποστείρωση. Αυτά τα προϊόντα πωλούνται σε κουτιά.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ / ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΗ ΧΕΙΡΙΣΜΟ

- Διαβάστε, ακολουθήστε και διατηρήστε αυτές τις Οδηγίες Χρήσης.
- Δείτε την προβλεπόμενη χρήση και χρησιμοποιήστε το προϊόν μόνο σύμφωνα με αυτήν.
- Αποθηκεύστε κάθε νέο προϊόν σε ξηρό, καθαρό και ασφαλές μέρος.
- Αποφύγετε τις υψηλές θερμοκρασίες, την υψηλή υγρασία, την έκθεση σε απευθείας ηλιακό φως και το μούσκεμα. Διατηρήστε το σε θερμοκρασία δωματίου.
- Μην το διατηρείτε σε μέρος με χημικά προϊόντα και έκλυση αερίων.
- Διατηρήστε το υλικό συσκευασίας χωρίς φθορές και οπές.
- Απαραιτήτως να επιβεβαιώνετε για κάθε συσκευασία και κουτί ότι δεν έχει παρέλθει η ημερομηνία χρήσης.
- Αφού επιβεβαιώσετε την ημερομηνία χρήσης σε κάθε συσκευασία και κουτί, απορρίψτε τα είδη που έχουν λήξει.
- Πριν από κάθε χρήση, ελέγξτε το προϊόν για την ύπαρξη χαλαρότητας, καμπύλης, σπασίματος, ρηγμάτωσης, φθοράς ή σπασμένων μερών.
- Εάν το προϊόν είναι κατεστραμμένο ή ελαττωματικό, παραμερίστε το και μην το χρησιμοποιήσετε. Αποφύγετε την επαφή των λεπτεπίλεπτων λεπίδων με σκληρές επιφάνειες ή άλλα εργαλεία.

ΑΝΤΕΝΔΕΙΞΕΙΣ - ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ

- Απαγορεύεται η επαναχρησιμοποίηση
- Απαγορεύεται η επανααποστείρωση
- Μην το χρησιμοποιείτε μετά το πέρας της ημερομηνίας λήξης
- Μην το χρησιμοποιείτε εάν κρίνετε ότι οι συνθήκες αποστείρωσης του προϊόντος έχουν πειραχθεί από καταστροφή της συσκευασίας.

ΣΥΜΒΟΛΑ ΚΑΙ ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ

	Σήμανση CE και αριθμός Κοινοποιημένου Οργανισμού		Για μία χρήση		Κατασκευαστής
	Αποστείρωση με αιθυλενοξειδίο		Μην επαναποστειώνετε		Αριθμός παρτίδας
	Κρατήστε μακριά από ηλιακό φως		Διατηρήστε στεγνό το προϊόν		Ημερομηνία κατασκευής
	Προσοχή! Ανατρέξτε στο συνοδευτικό έγγραφο		Μην χρησιμοποιείτε εάν η συσκευασία είναι κατεστραμμένη		Ημερομηνία λήξης

ΕΦΑΡΜΟΖΟΜΕΝΟΙ ΚΩΔ. ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ: 62xxx



SIDAPHARM I.K.E.

Σταγειρίτη 21 & Εμμ.Φίλη 24, Θεσσαλονίκη 543 52

T: 2310 906660 F: 2310 989846 info@sidapharm.gr

CE
0653