

Instrucțiuni de utilizare

1. Congelatorul trebuie conectat de un electrician autorizat sau de către compania care a vândut congelatorul! Instalarea incorectă poate deteriora congelatorul.
2. Așezați congelatorul pe o podea plată, care poate suporta greutatea congelatorului.
3. Instalația electrică ar trebui să fie împământată.
4. Nu utilizați cabluri prelungitoare, ci conectați congelatorul direct la o instalație fixă. Dacă congelatorul este conectat la un cablu prelungitor lung, există riscul ca cablul să se încălzească.
5. Congelatorul trebuie așezat într-un loc uscat și nu trebuie supus apei de pe dulap. Dacă apa pătrunde în piesele electrice, aceasta poate provoca scurtcircuitarea.
6. În caz de nereguli funcționale sau electrice, vă rugăm să contactați un inginer de service autorizat. Nu
7. puneți sticle care conțin acid carbonic sau produse inflamabile în congelator.

Eliminarea și casarea congelatorului: Scoateți încuietoarea, astfel încât să nu existe riscul blocării copiilor în congelator în timp ce se joacă.

Conexiune electrica

Mașina respectă directivele actuale ale UE. Tensiune joasă 2006/95 / CEE

Compatibilitate electromagnetică 2004/108 / CEE

Mașina trebuie să beneficieze de o protecție suplimentară în conformitate cu Regulamentul privind alimentarea cu energie electrică pentru a proteja utilizatorul împotriva șocurilor electrice periculoase în caz de defecțiuni.

Dacă comutatorul este pentru o priză cu trei pini, ar trebui să se utilizeze o priză cu trei pini, iar conductorul cu izolație galben / verde ar trebui să fie conectat la terminalul Pământ.

Sistemul de răcire

Vaporizatorul este încorporat în peretele containerului interior. Aceasta va fi - 50 ° C, deci există riscul de mușcătură de îngheț dacă este atins. Utilizați întotdeauna mănuși termice atunci când atingeți conținutul congelatorului.

Condensatorul este plasat în interiorul dulapului. Aceasta înseamnă că exteriorul dulapului se încălzește când funcționează. Avantajul unui dulap fierbinte este că va fi întotdeauna uscat.

Avantajul congelării cutiilor este că doar o cantitate minimă de căldură intră atunci când sunt deschise și închise.

Termostat cu afișaj digital. Odată ce congelatorul este răcit, temperatura setată și temperatura afișată vor fi aceleași.

Instalarea congelatorului

1. Conectați mufa de la unitate la alimentare. Dacă conexiunea electrică (mufa) trebuie schimbată, lăsați întotdeauna un electrician autorizat să instaleze congelatorul (citiți instrucțiunile de utilizare).
2. Congelatorul ar trebui să fie amplasat într-un loc uscat și răcoros, în afara razelor solare directe. Congelatorul dă se încălzește foarte mult atunci când funcționează. Dacă temperatura ambiantă este prea ridicată, există riscul ca congelatorul să nu funcționeze corect. Se recomandă ventilarea camerei, astfel încât temperatura camerei să nu depășească cel mult 30 ° Celsius. Clasa N.
3. Așezați congelatorul pe un substrat solid și plat. Acest lucru va elimina orice vibrație și zgomot iritant. Congelatorul ar trebui să fie plasat cu cel puțin 10 cm liber în lateral, cel puțin 15 cm liber în spate și cel puțin 100 cm liber până la tavan.

Instalarea trebuie fuzionată cu o siguranță de 16 A.

Înainte de punerea în funcțiune

Curățați congelatorul atât în interior, cât și în exterior, folosind o cârpă umedă, scoasă. Uscați cu o cârpă uscată.

Mirosul din piesele de plastic din congelator va dispărea odată ce congelatorul a fost răcit.

Procedură de pornire

Introduceți fișa în priză. Congelatorul ar trebui să funcționeze cel puțin 1 oră înainte de schimbarea termostatului. (Stabilizarea sistemului de răcire).

Prudență!

Nu puneți sticle sau cutii care conțin acid carbonic sau agenți chimici în congelator.

Nu puneți lichide inflamabile precum etanolul, benzina sau alcoolul în congelator. Pericol de explozie!

Nu trebuie așezate sticle sau cutii în congelator, deoarece acestea ar putea exploda și ar putea răni personalul. Folosiți întotdeauna

mănuși termice atunci când funcționați congelatorul, pentru a reduce riscul de mușcături de îngheț.

În cazul unor lucrări de reparații sau de acțiuni corective în instalația din camera mașinilor, ștecherul trebuie întotdeauna demontat! Lucrările de reparații în instalație trebuie efectuate de un electrician autorizat!

PANOU DE CONTROL (Controler Dixell XR30CX)

A STABILIT

Pentru a afișa punctul de setare țintă; în modul de programare selectează un parametru sau confirmă o operație.

(DEF) 

Pentru a porni o decongelare manuală

(SUS) 

Pentru a vedea max. temperatura stocată; în programare modul navighează prin codurile parametrilor sau mărește valoarea afișată.

(JOS) Pentru a vedea temperatura minimă stocată; în modul de programare parcurge codurile parametrilor sau scade valoarea afișată.



Pentru a opri instrumentul, dacă este pornit F = oFF.



NEFOLOSIT

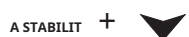


figura 1


COMBINAȚII CHEIE:



Pentru a bloca și debloca tastatura.



Pentru a intra în modul de programare.

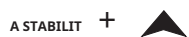

Pentru a reveni la afișajul temperaturii camerei.

UTILIZAREA LED-urilor

Fiecare funcție LED este descrisă în tabelul următor

LED	MOD	FUNCȚIE
	PE	Compresor activat
	Intermitent	Activat întârziere ciclu anti-scurt Activat
	PE	Decongelare activat
	PE	Se produce o alarmă Ciclul
	PE	continuu rulează Economisirea
	PE	de energie activată
° C / ° F	PE	Unitate de masura
° C / ° F	Intermitent	Faza de programare

CUM SE VEDE TEMPERATURA MIN

1. Apăsați și eliberați fișierul  cheie.
2. Va fi afișat mesajul „Lo” urmat de temperatura minimă înregistrată. Prin apăsarea
3. butonului  tasta din nou sau așteptând 5s, afișajul normal va fi restabilit.

CUM SE VEDE TEMPERATURA MAXIMĂ

1. Apăsați și eliberați fișierul  cheie.
2. Va fi afișat mesajul „Bună” urmat de temperatura maximă înregistrată. Prin
3. apăsarea butonului  tasta din nou sau așteptând 5s, afișajul normal va fi restabilit.

CUM SE RESETĂ TEMPERATURA MAXIMĂ ȘI MIN ÎNREGISTRATĂ

1. Țineți apăsat tasta SET mai mult de 3 secunde, în timp ce valoarea max. sau se afișează temperatura minimă. (mesajul rSt va fi afișat)
2. Pentru a confirma operațiunea, mesajul „rSt” începe să clipească și temperatura normală va fi afișată.

FUNCTII PRINCIPALE

CUM SĂ VEZI SETPOINTUL



1. Apăsați și eliberați imediat **A STABILIT** tasta: afișajul va afișa valoarea Set point;
2. Împingeți și eliberați imediat dispozitivul **A STABILIT** tasta sau așteptați 5 secunde pentru a afișa din nou valoarea sondei.

CUM SE SCHIMBĂ SETPOINTUL

1. Apăsați tasta SET timp de mai mult de 2 secunde pentru a modifica valoarea punctului de setare;
2. Va fi afișată valoarea punctului de setare și valoarea „° C” sau „° F” LED-ul începe să clipească;
3. Pentru a schimba valoarea Set, apăsați săgețile ▲ sau ▼ în termen de 10 secunde.
4. Pentru a memora noua valoare setată, apăsați din nou tasta SET sau așteptați 10 secunde.

CUM SĂ ÎNCEPEȚI O DEGELARE MANUALĂ



Împingeți **DEF** pentru mai mult de 2 secunde și va începe o decongelare manuală.

CUM SE SCHIMBĂ O VALOARE A PARAMETRULUI

Pentru a modifica valoarea parametrului operați după cum urmează:



1. Accesați modul de programare apăsând pe **Setați și coborâți key** pentru 3s (the „° C” sau „° F” LED-ul începe să clipească).
2. Selectați parametrul dorit.
3. Apăsați tasta "**A STABILIT**" pentru a afișa valoarea acestuia.
4. Folosiți "**SUS**" sau "**JOS**" pentru a-i schimba valoarea.
5. Apăsați "**A STABILIT**" pentru a stoca noua valoare și a trece la următorul parametru. **A iese:** presa **SET + UP** sau așteptați 15s fără să apăsați o tastă.

NOTĂ: valoarea setată este stocată chiar și atunci când procedura este închisă așteptând expirarea timpului de expirare.

MENIUL ASCUNS

Meniul ascuns include toți parametrii instrumentului.

6.6.1 CUM SE ACCESĂ LA MENIUL ASCUNS



1. Intrați în modul de programare apăsând Set + (butonul „° C” ▼ tasta pentru 3s sau „° F” LED-ul începe să clipească).
2. Eliberați tastele, apoi apăsați din nou Set + (butonul „° C” ▼ tastele pentru mai mult de 7 secunde. Eticheta Pr2 va fi afișată imediat urmată de parametrul HY.
ACUM ESTI IN MENIUL ASCUNS.

3. Selectați parametrul dorit.

4. Apăsați tasta **"A STABILIT"** Pentru a-i afișa valoarea.

5. Folosiți ▲ sau ▼ pentru a-i modifica valoarea.

6. Apăsați **"A STABILIT"** pentru a stoca noua valoare și a trece la următorul parametru. **A iesi:** presa **SET + ▲** sau așteptați 15s fără să apăsați o tastă.

NOTA 1: dacă niciun parametru nu este prezent în Pr1, după 3 secunde se afișează mesajul „noP”. Păstrează cheile apăsat până se afișează mesajul Pr2.

NOTA 2: valoarea setată este stocată chiar și atunci când procedura este închisă așteptând expirarea timpului de expirare.

6.6.2 CUM SE MUTĂ UN PARAMETRU DE LA MENIUL ASCUNS LA PRIMUL NIVEL ȘI VICEVERSA.

Fiecare parametru prezent în MENIUL ASCUNS poate fi eliminat sau pus în „PRIMUL NIVEL” (nivel utilizator) apăsând **„SET” + ▼**

În HIDDEN MENU când un parametru este prezent în primul nivel, punctul zecimal este activat.

CUM SE BLOCĂ TASTATURA



1. Țineți apăsat mai mult de 3 s ▲ și ▼ chei.

2. **„POF”** mesajul va fi afișat și tastatura va fi blocată. În acest moment va fi posibil să se vadă doar valoarea setată sau temperatura MAX o Min stocată

3. Dacă o tastă este apăsată mai mult de 3 secunde, va fi afișat mesajul „POF”.

Pentru a debloca tastatura

Țineți apăsat împreună mai mult de 3 secunde ▲ și ▼ tastele, până când va fi afișat mesajul „Pon”.

CICLUL CONTINU



Când dezghețarea nu este în desfășurare, aceasta poate fi activată ținând apăsat butonul timp de ▲ tasta apăsată. aproximativ 3 secunde.

Compresorul funcționează pentru a menține **„CcS”** set point pentru timpul setat prin **„Cct”** parametru. Ciclul poate fi încheiat înainte de sfârșitul timpului stabilit folosind aceeași tastă de activare „▲” timp de 3 secunde.

FUNCȚIA PORNIT / OPRIT

Cu **„OnF = oFF”**, împingând **PORNIT / OPRIT**, instrumentul este oprit. **„OFF”** mesajul este afișat. În această configurație, regulamentul este dezactivat. Pentru a porni instrumentul, apăsați din nou tasta ON / OFF.

AVERTISMENT: Sarcinile conectate la contactele normal închise ale releelor sunt întotdeauna furnizate și sub tensiune, chiar dacă instrumentul este în modul stand-by.