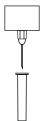


100
buc./pics.

STERILE EO CE 0344

32G 0,23mm
4mmAc stilou insulină
Insulin pen needle

iDiab

Ac stilou insulină
Insulin pen needle100
buc./pics.4mm
32G 0,23mm

RO ATENȚIONARE!

ACELE PENTRU STILOU TREBUIE FOLOSITE DOAR O SINGURĂ DATĂ ȘI DEPOZITATE ÎNTR-UN RECIPIENT PENTRU
OBIECTE ASCUȚITE.

EN REMEMBER!

PEN NEEDLES SHOULD BE USED ONLY ONCE AND DISPOSED OF IN A SHARPS CONTAINER.

Weigao Medical International Co., Ltd.
No.1 Weigao Road High-Tech Industrial Development
Zone 264210 Weihai, Shandong Province
PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINAMedNet EC-Rep GmbH
Borkstrasse 10, 48163 Muenster, Germany

LOT 211105

2021 11

2026 10

(01) 2 6970349 77395 9
(10) ABC123
(17) 040104

STERILE EO CE 0344

Caracteristici:

- ace pentru utilizarea împreună cu stilourile (pen) pentru injectarea subcutanată a insulinei;
- vârful acului trifazat și siliconizat, care reduce la minim trauma locală datorată înțepării;
- pereții acului sunt ultrasubțiri și asigură un flux optim al insulinei reducând astfel timpul de injectare;
- nu conține Latex, PVC, DEHP;
- sterilizare EO.

Acele pentru insulină sunt compatibile cu următoarele modele
de stilouri pentru administrarea insulinei:Novo Nordisk: NovoPen® 3, NovoPen® 4, NovoPen® 5, NovoPen®
Junior, NovoRapid® FlexPen®;


Lilly: Humapen® luxura, Humapen® luxura Hd;

Owen Mumford: Autopen® 24, Autopen® classic 2;

Sanofi: Aventis Lantus, Optipen® Pro, TactiPen®;

BD: Puregon pen®

STERILE EO CE 0344

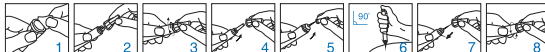100
buc./pics.

RO

Cum se utilizează acele pentru stilou:

- pacienții trebuie să-și amintească să schimbe locurile de injectare, conform recomandărilor aplicabile pentru administrarea insulinei;
- acele pentru stilou sunt sterile și de unică folosință. Sterilitatea este garantată dacă sigiliul acului este integru.

ATENȚIONARE!

ACELE PENTRU STILOU TREBUIE FOLOSITE DOAR O SINGURĂ DATĂ ȘI
DEPOZITATE ÎNTR-UN RECIPIENT PENTRU OBIECTE ASCUȚITE.

Reutilizarea poate:

- provoacă lipohipertrofie;
- taci sau îndoi vârful, provocând sângerare, vânătăi sau cicatrici;
- crește riscul de rupere a acului în piele;
- crește riscul de infectare deoarece acul nu mai este steril.

EN

How to use pen needles:

- patients should remember to rotate injections sites, according to applicable insulin delivery recommendations;
- pen needles are sterile and for single use only. Sterility is guaranteed if the needle seal is unbroken.

REMEMBER!

PEN NEEDLES SHOULD BE USED ONLY ONCE AND DISPOSED OF IN A
SHARPS CONTAINER.

Re-use can:

- cause lipohypertrophy;
- dull or bend up the tip, causing bleeding, bruising or scarring;
- increase the risk of needle breaking off in the skin;
- increase the risk of infection because the needle is no longer sterile.

iDiab

Ac stilou insulină
Insulin pen needle

RO

De unică folosință.
Utilizați imediat după deschiderea ambalajului.
Steril, non toxic, nu conține latex.
NU REUTILIZAȚI.

EN

Single use.
Use immediately after opening.
Sterile, non toxic, latex free.
DON'T REUSE.4mm
32G 0,23mm100
buc./pics.

STERILE EO CE 0344

Characteristics:

- needles for use with the pen for subcutaneous insulin injection;
- fine three-facet grinding and siliconizing of needle minimizes tissue trauma;
- extra thin wall allows for a larger inner diameter and an optimized insulin flow and reduce injection time;
- integrated plunger backstop;
- latex, PVC and DEHP free;
- EO sterilization.

Insulin needles are compatible with the following pen models
for insulin administration:Novo Nordisk: NovoPen® 3, NovoPen® 4, NovoPen® 5, NovoPen®
Junior, NovoRapid® FlexPen®;

Lilly: Humapen® luxura, Humapen® luxura Hd;

Owen Mumford: Autopen® 24, Autopen® classic 2;

Sanofi: Aventis Lantus, Optipen® Pro, TactiPen®;

BD: Puregon pen®

STERILE EO CE 0344

100
buc./pics.