



METODE SPECIFICE ÎN FUNCȚIE DE BOALĂ

ALMAG-02

TULBURĂRI MENTALE ȘI COMPORTAMENTALE

Distonia neurocirculatorie de tip hipertensiv

Emițători: OI, LIG.

Emițătorii sunt plasați: OI pe regiunea lombară cu captarea rinichilor și a glandelor suprarenale, LIG pe zona „gulerului”.

Cursul tratamentului este de 10-12 ședințe.

Există 1 procedură pe sesiune.

Primele trei zile:

- **Programul nr.1;**

- Tip câmp magnetic:

OI – alergare de sus în jos;

LIG – rulează de la stânga la dreapta;

- Inductie - 8 mT;
- Frecventa - 3 Hz;
- Timp de expunere - 10 min.

Următoarele 7-9 zile

Există 1 procedură pe sesiune.


- **Programul nr.2;**


- Tip câmp magnetic:

OI – alergare de sus în jos;

LIG - rulează de la stânga la dreapta;

- Inductie - 10 mT;
- Frecventa - 10 Hz;
- Timp de expunere - 20 min

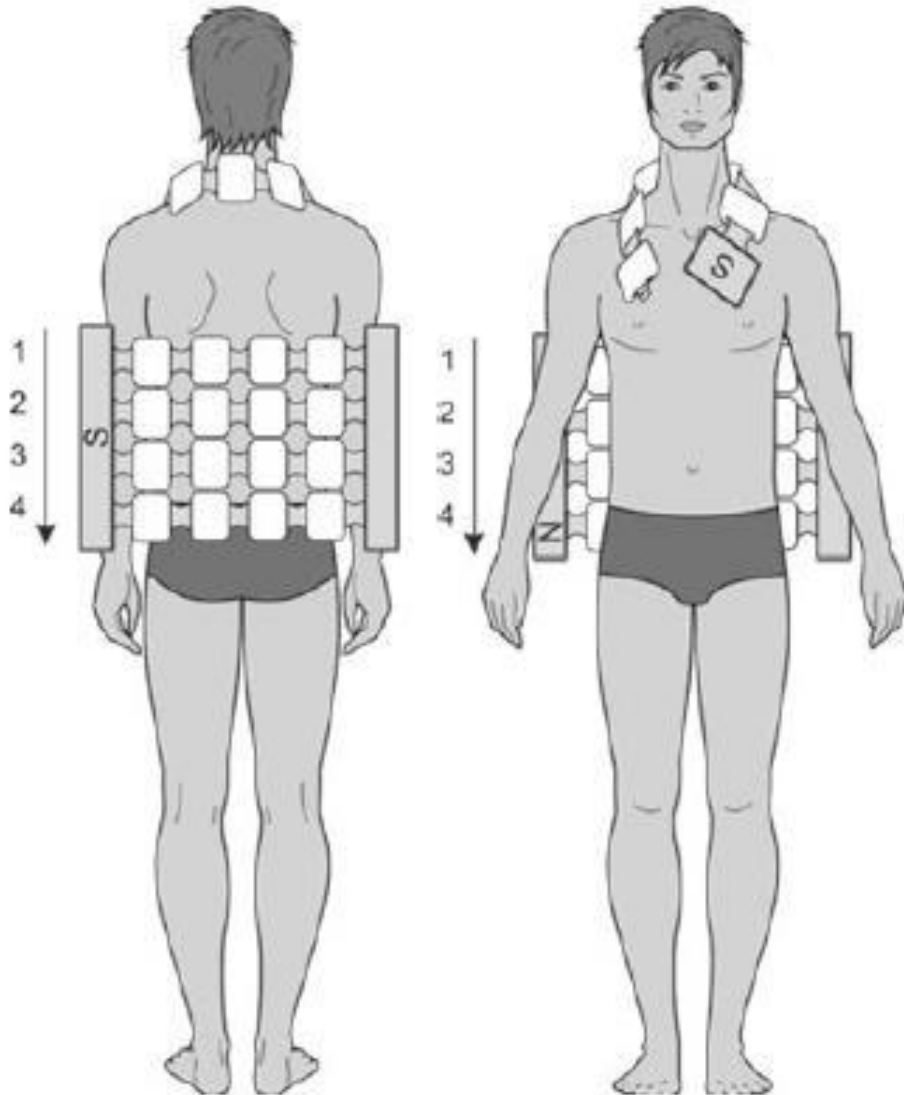

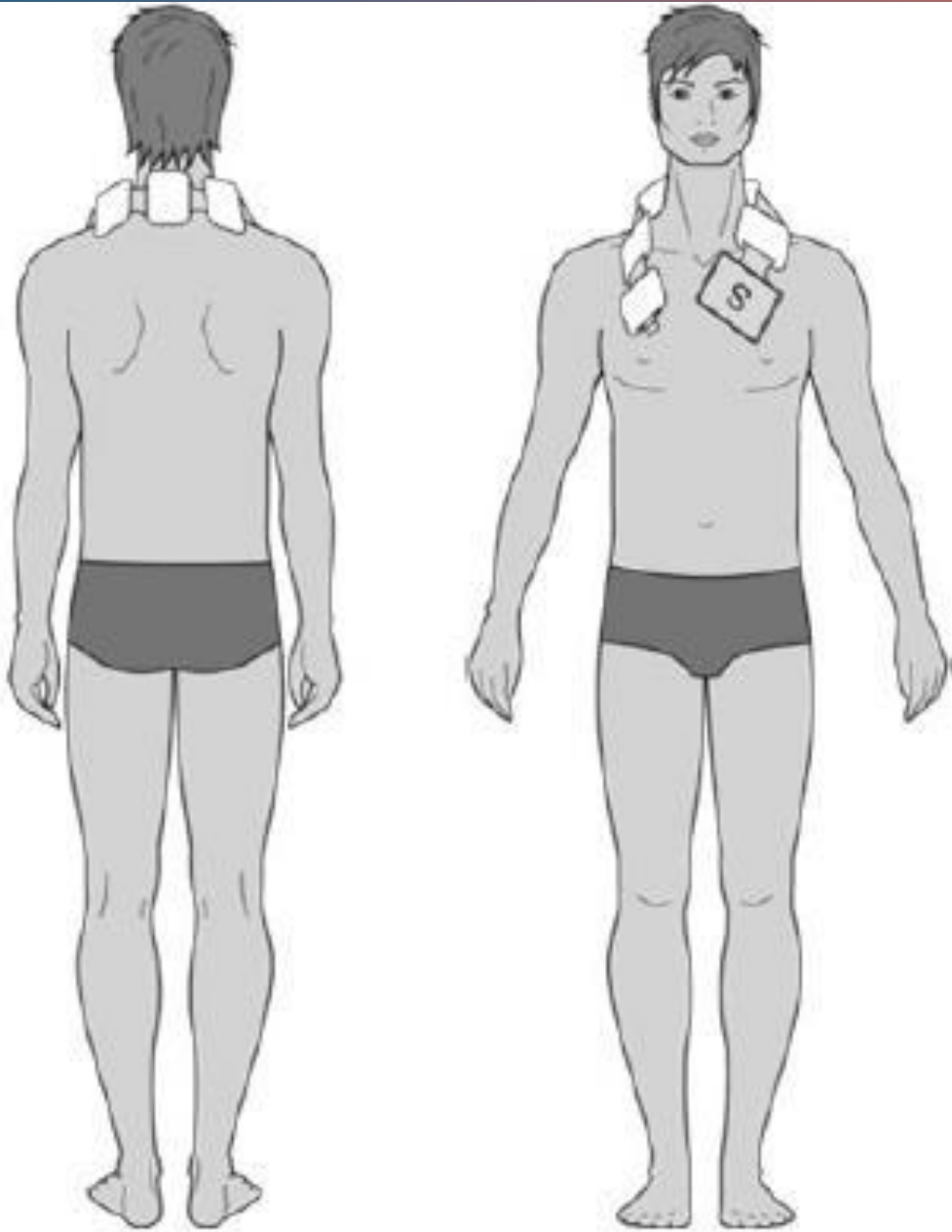


Migrenă

Cursul tratamentului este de 10-12 ședințe.
O sesiune constă dintr-o procedură.

Emitători: LIG.

Emitătorii sunt plasați: LIG în zona „gulerului”.

- **Programul nr.3;**
- Tip câmp magnetic:
LIG - rulează de la stânga la dreapta;
- Inductie - 10 mT;
- Frecventa - 12 Hz;
- Timp de expunere - 10 min.

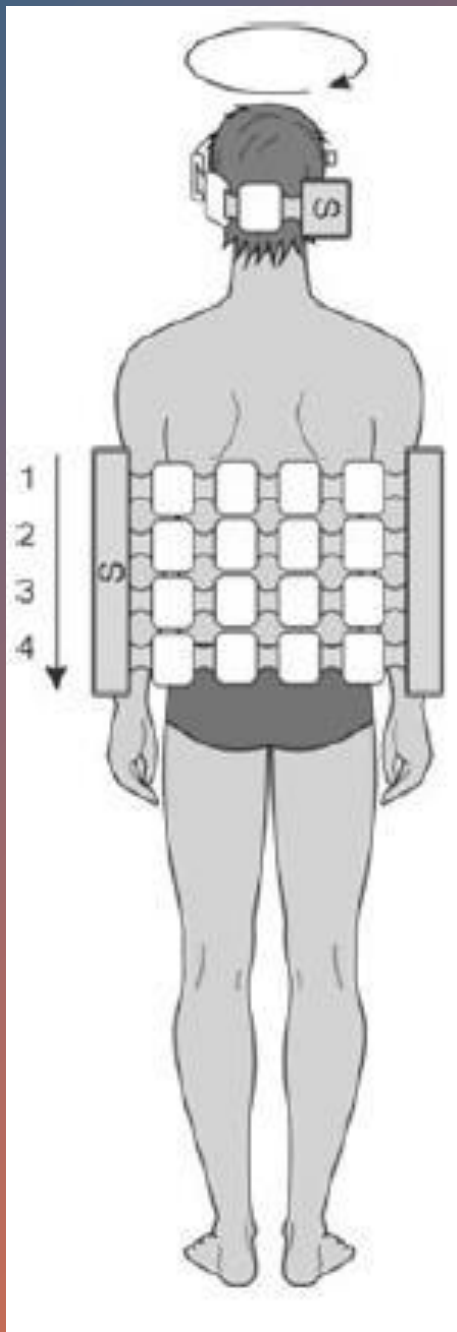

Atacuri ischemice cerebrale tranzitorii și sindroame asociate

Timp posibil pentru începerea tratamentului: 3-6 săptămâni după atacul ischemic tranzitoriu (AIT) și mai târziu în perioada de recuperare și reziduală.
Per curs: minim 15 sesiuni.

Există o singură procedură pe sesiune.

Emitători: OI, LIG.

Emitătorii sunt plasați: OI pe regiunea lombară, LIG - întoarce capul.

- **Programul nr.4;**
- Tip câmp magnetic:
OI – alergare de sus în jos;
LIG – rotație dreapta;
- inducție: OI - 20 mT, LIG -10 mT;
- frecvență: 100 Hz;
- timp de expunere: 20 min

LEZIUNI ALE RĂDĂCINILOR NERVOASE INDIVIDUALE ȘI ALE PLEXURILOR EXTREMITĂȚILOR SUPERIOARE ȘI INFERIOARE

Boli ale nervilor radiali, mediani, ulnari

Per curs: 10-15 sesiuni.

Există o singură procedură pe sesiune.

Emitători: OI, LIG.

Emitătorii sunt plasați:

OI - pe coloana cervicotoracică, LIG - pe proiecția nervului afectat.

Primele cinci zile:


Programul nr.5;

- Tip câmp magnetic:
OI – alergare de sus în jos;
LIG – rulează de jos în sus;
- Inducție: OI - 10 mT,
LIG - 20 mT;
- Frecvență: 100 Hz
- Timp de expunere: 10 min.

Următoarele 5-10 proceduri:


Programul nr.6;

- Tip câmp magnetic:
OI – alergare de sus în jos;
LIG – rulează de jos în sus;
- Inducție: OI - 10 mT, LIG – 25 mT;
- Frecvență: 12 Hz
- Timp de expunere: 10 min

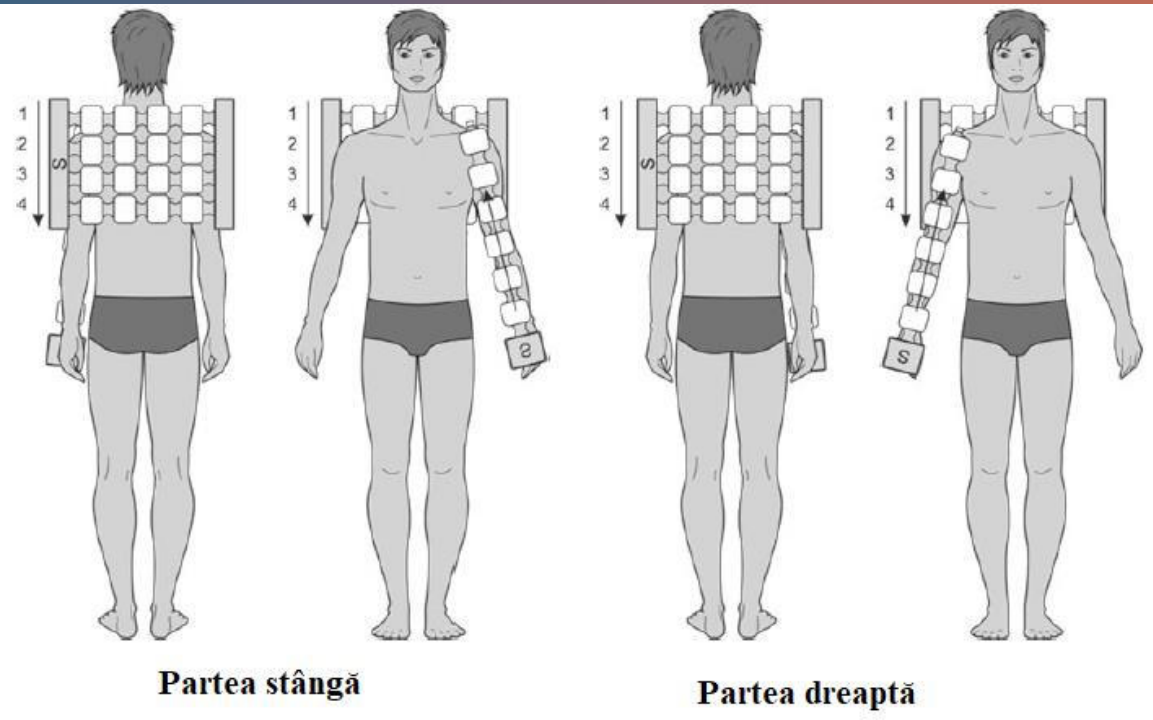

Atenție!

*Metodele din această secțiune sunt utilizate în tratamentul unor boli similare în cazul **neuropatiei alcoolice**.*

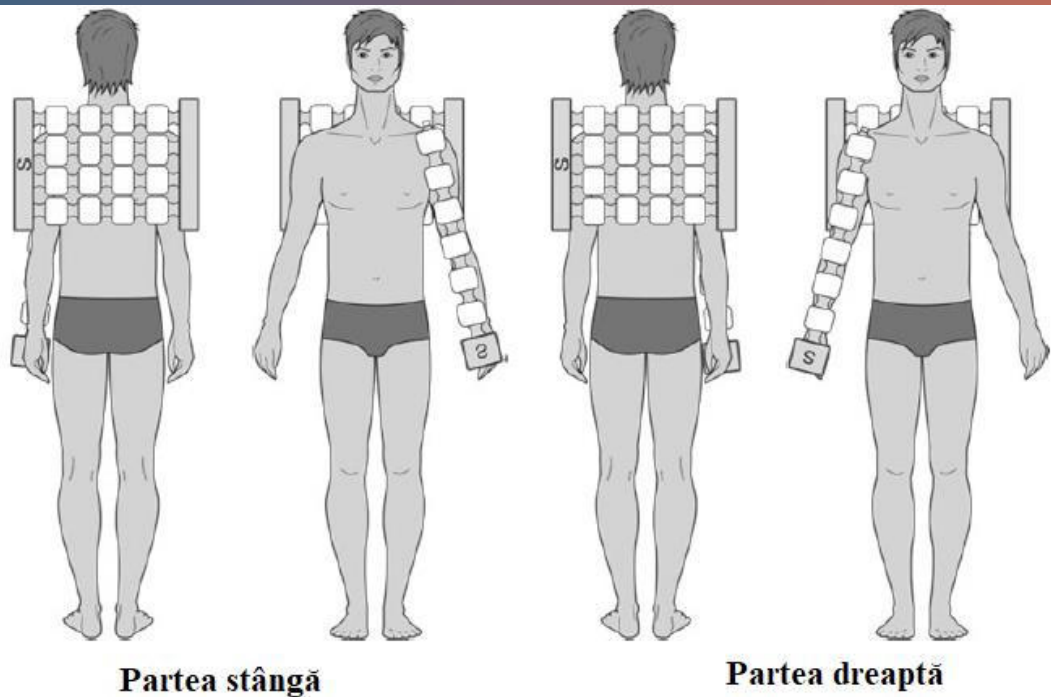

Dezvoltarea parezei nervului corespunzător

Per curs: 15 sesiuni.

Există o singură procedură pe sesiune.

Emitători: OI, LIG.

Emitătorii sunt plasați: OI – pe coloana cervicotoracică, LIG - pe proiectia nervului afectat.

- **Programul nr.7;**
- Tip câmp magnetic:
OI – nemișcat;
LIG - nemișcat;
- Inducție: OI - 6 mT, LIG - 6 mT;
- Frecvență: 10 Hz;
- Timp de expunere: 20 min

Boli ale nervilor femural, sciatic, tibial și peronier


Per curs: 10-15 sesiuni.

Există o singură procedură pe sesiune.

Emițători: OI, LIG.

Emițătorii sunt plasați:

OI este plasat pe coloana vertebrală lombosacrală, LIG sunt plasate pe proiecția nervului afectat.

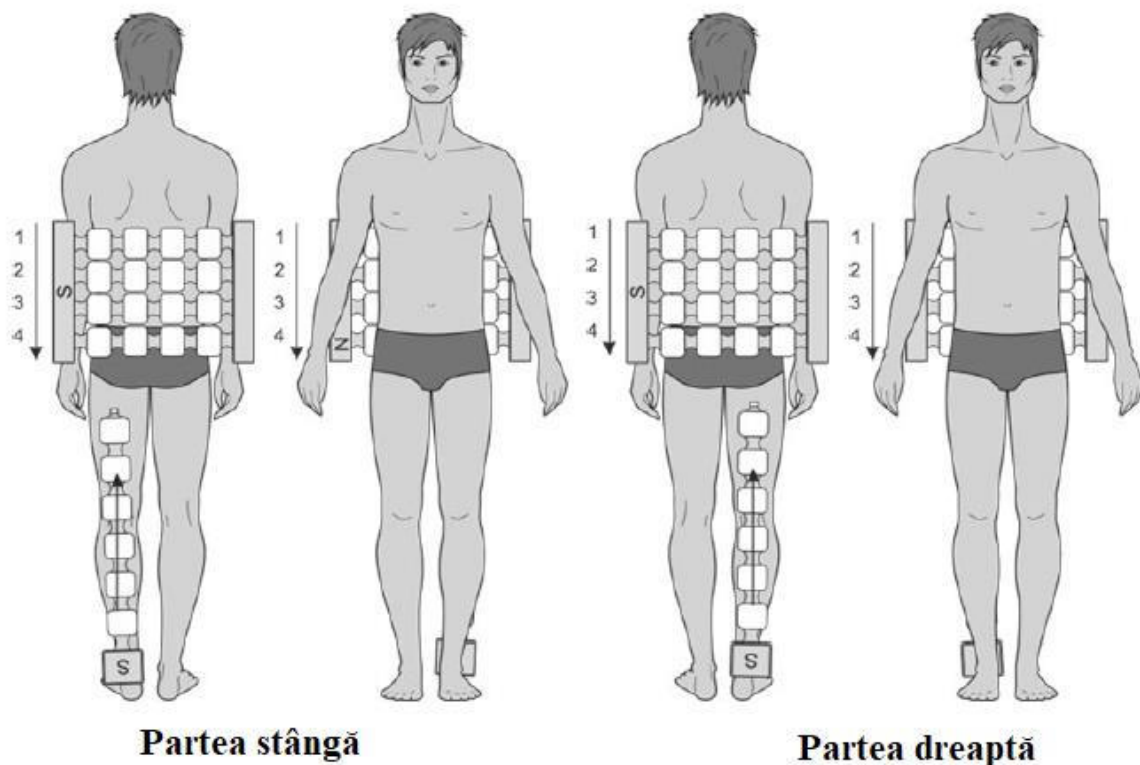



Primele cinci zile:

Programul nr.5;

- Tip câmp magnetic:
OI – alergare de sus în jos;
LIG – rulează de jos în sus;
- Inductie: OI - 10 mT,
LIG - 20 mT;
- Frecvență: 100 Hz;
- Timp de expunere: 10 min.

Următoarele 5-10 proceduri:

- **Programul nr.6;**
- Tip câmp magnetic:
OI – alergare de sus în jos;
LIG – rulează de jos în sus;
- Inductie: OI - 10 mT, LIG - 25 mT;
- Frecvență: 12 Hz;
- Timp de expunere: 10 min.

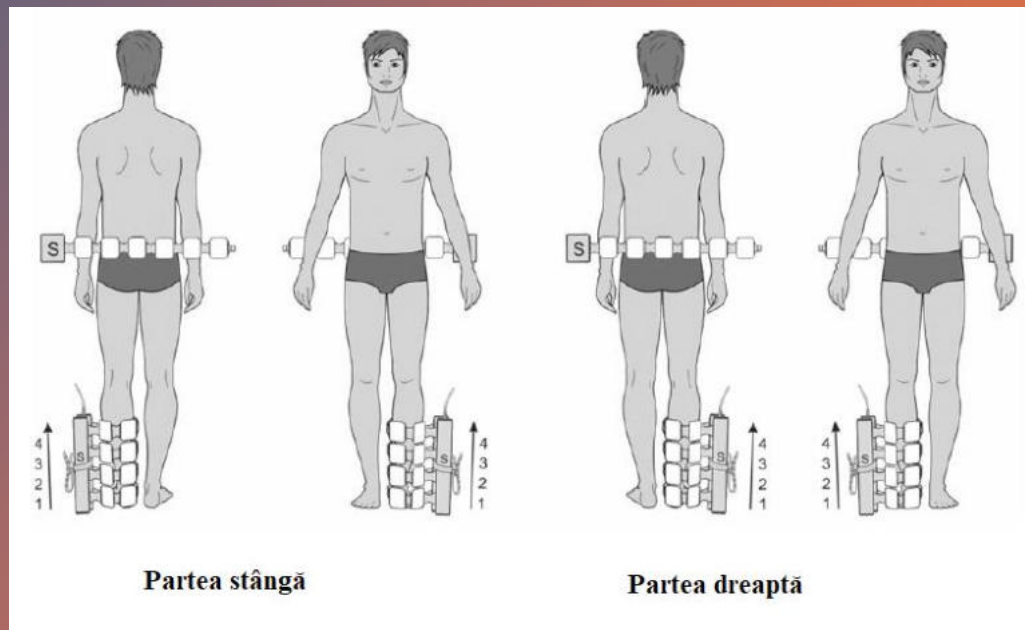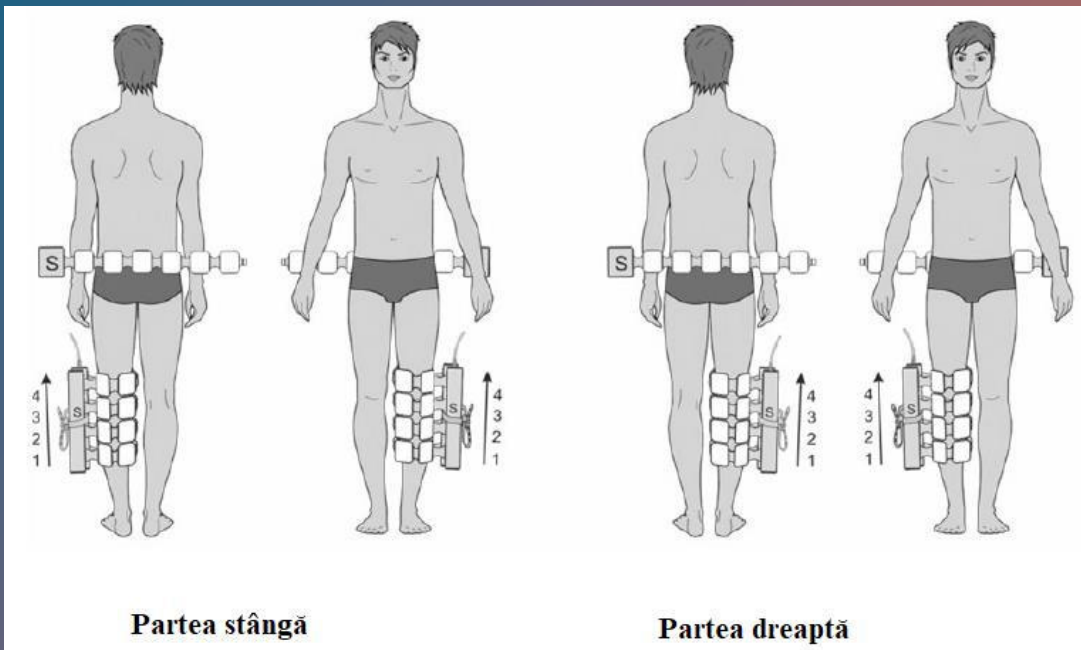

Polineuropatia diabetică

Cursul este format din 15-20 de sesiuni.

Cursuri repetate – după trei luni, 3 cursuri pe an.

Există 2 proceduri într-o sesiune.

Emitători: OI, LIG.

Prima procedură

Emitătorii sunt plasați: LIG este plasat pe regiunea lombo-sacrală, OI este înfășurată în jurul tibiei, inclusiv articulația genunchiului membrului afectat.

- **Programul nr. 8;**

- Tip câmp magnetic:

OI - rulează de jos în sus,

LIG - nemișcat;

- Inducție: OI -20 mT; LIG-6mT;

- Frecvență: 10 Hz;

- Timp de expunere: 10 min.

a 2-a procedură

Emitătorii sunt plasați: LIG este plasat pe zona lombo-sacrală, OI este înfășurată în jurul piciorului membrului afectat.

- **Programul nr.8;**

- Tip câmp magnetic:

OI - rulează de jos în sus,

LIG - nemișcat;

- Inducție: OI -20 mT; LIG-6 mT;

- Frecvență: 10 Hz;

- Timp de expunere: 10 min.

Atenție! În niciun caz nu trebuie să încetați să luați medicamente care scad zahărul și dieta în timp ce urmați un tratament cu câmp magnetic!

Neuropatie postherpetică

Per curs: 15-20 de proceduri, repetați cursul după o lună.

Există 2 proceduri într-o sesiune.

Emitători: OI.

1- a procedură

Emitătorii sunt plasați: OI pe coloană.

- **Programul nr.9;**
- Tip câmp magnetic:

OI – rulează de jos în sus;

- Inductie: 20 mT;
- Frecventa: 100 Hz
- Timp de expunere: 15 min.


a 2-a procedură

Emitătorii sunt plasați: OI pe zona nervilor intercostali afectați.

- **Programul nr.10**
- Tip câmp magnetic:

OI - nemișcat,

- Inductie: 6 mT;
- Frecventa: 16 Hz;
- Timp de expunere: 15 min.

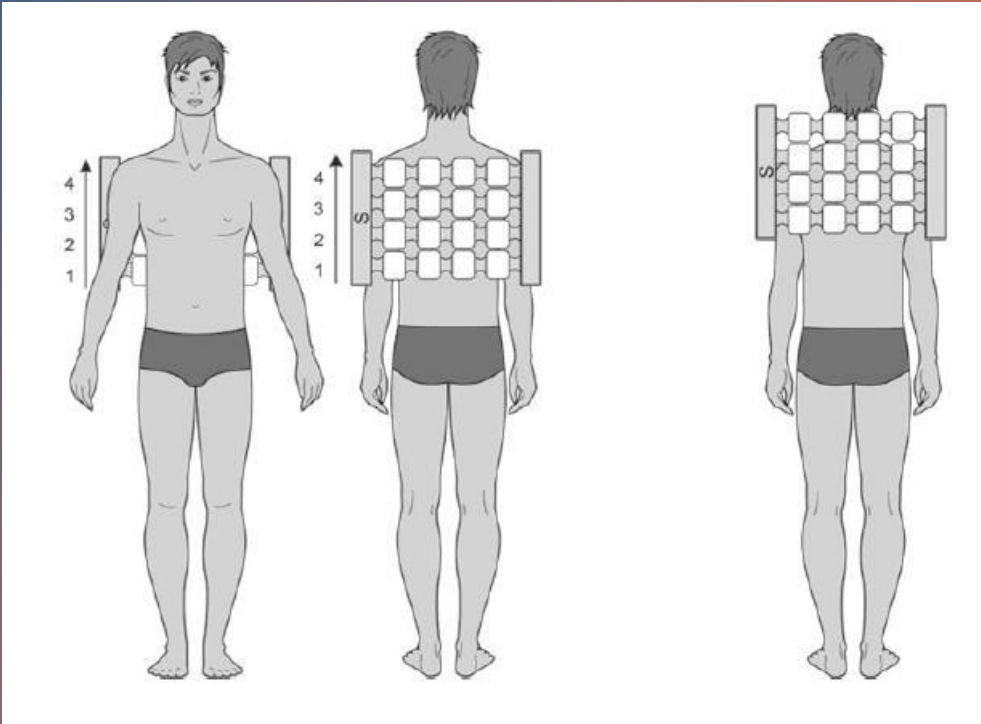

Sindromul Raynaud (sindromul degetului mort)

Cursul constă din 15 sesiuni, cu un curs repetat în două luni.

Există 2 proceduri într-o sesiune.

Emițători: OI

1a procedură


Emițătorii sunt plasați: OI - pe zona gâtului și a gulerului.


- **Programul nr.11;**
- Tip câmp magnetic: MF – staționar;
- Inducție: 6 mT;
- Frecvență: 16 Hz;
- Timp de expunere: 10 min.

a 2-a procedură

Emițătoarele sunt plasate: OI - învelesc membrul afectat, captând mâna.

- **Programul nr.12;**
- Tip câmp magnetic:
- OI – rulează de jos în sus;
- Inducție: 25mT;
- Frecvență: 75 Hz;
- Timp de expunere: 10 min.

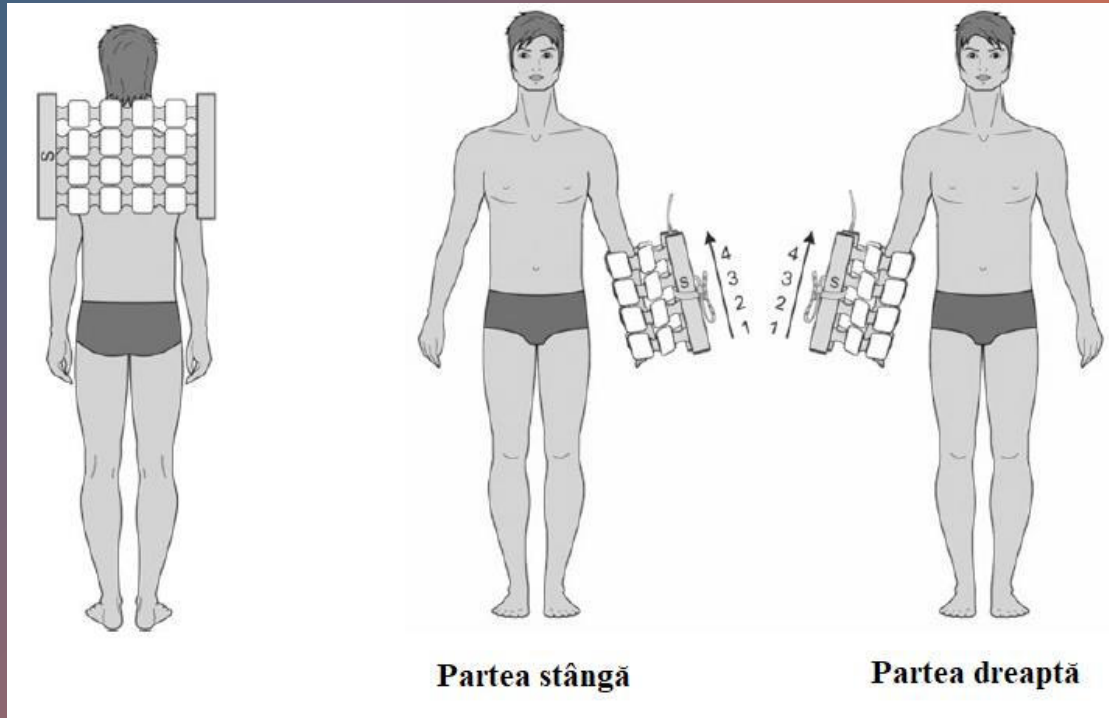

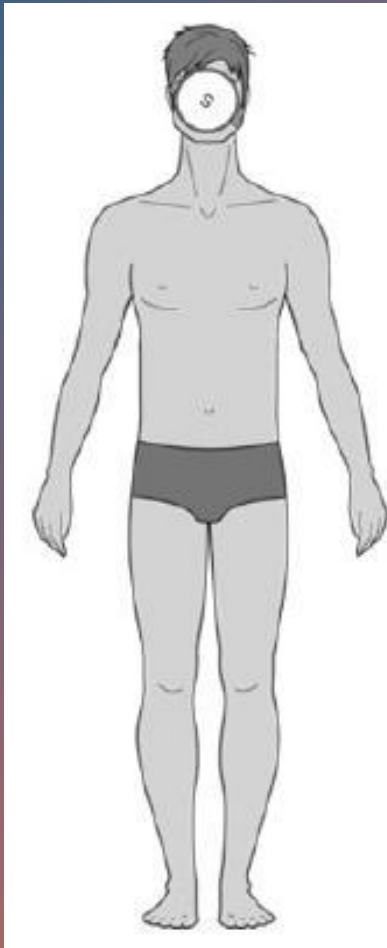

BOLI ALE URECHII, GÂTULUI ȘI NASULUI
Sinuzita maxilară cronică (sinuzită), sinuzită
cronică a sinusurilor frontale (sinuzită frontală)
în afara exacerbarii

Eustachita acută și cronică (salpingootită) în
stadiul de subsidență a procesului acut și în faza
de remisie

Sinuzita

Curs – 10 sesiuni.


Există 1 procedură pe sesiune.

Emițători: LI.

Emițătorii sunt plasați: LI - pe nas, captând zona de proiecție a sinusurilor maxilare.

- **Programul nr.51;**
- Tip câmp magnetic:
LI - nemișcat;
- Inductie: 20 mT;
- Frecvență: 50 Hz;
- Timp de expunere: 7 min.

Atentie! Procesele purulente sau inflamația cu scurgere afectată a conținutului sinusal sunt o contraindicație pentru kinetoterapie!

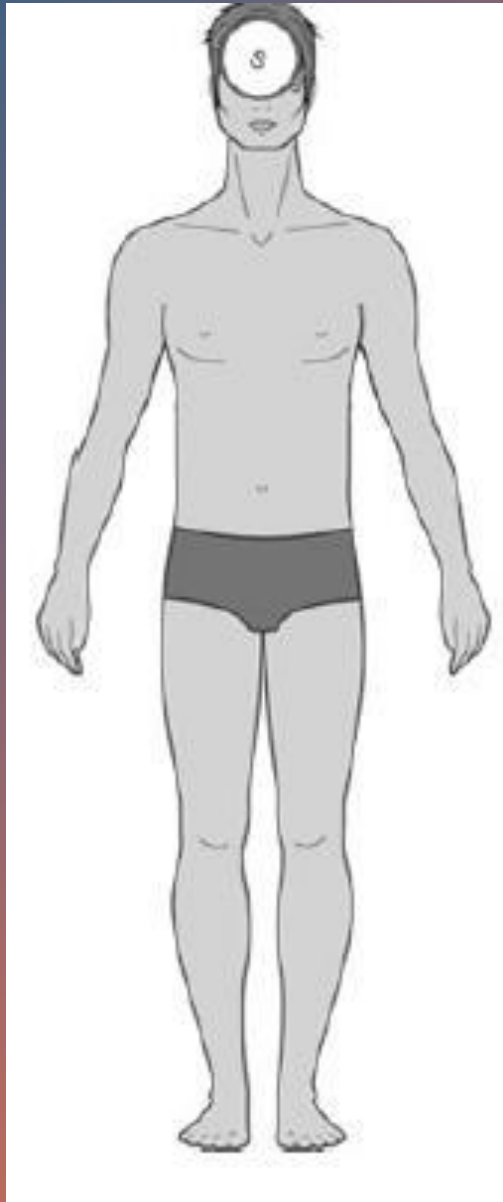

Frontita

Curs – 10 sesiuni.

Există 1 procedură pe sesiune.

Emitători: LI.

Emitătorii sunt plasați: LI - pe zona de proiecție a sinusului frontal.

- **Programul nr. 52;**
- Tip câmp magnetic:
LI - nemișcat;
- Inducție: 20 mT;
- Frecvență: 50 Hz;
- Timp de expunere: 10 min



Exemplu de amplasare a
emitorului

Eustachita acută și cronică (salpingootită) în stadiul de subsidență a procesului acut și în faza de remisie

Curs – 10 sesiuni. În cazul eustachitei cronice, cursurile de tratament pot fi repetate după 30 de zile.

Există 1 procedură pe sesiune.

Emițători: LI.

Emițătorii sunt plasați: LI - pe zona urechii, captând procesul mastoid.

- **Programul Nr.53;**
- Tip câmp magnetic:
LI - nemișcat;
- Inductie: 20 mT;
- Frecventa: 10 Hz;
- Timp de expunere: 10 min.

Pierderea auzului senzorineural


Curs – 8-10 sesiuni. În fiecare zi sau în două zile

Există 1 procedură pe sesiune.

Emițători: LI.

Emițătorii sunt plasați: LI - pe zona urechii afectate.

- **Programul nr. 52;**
- Tip câmp magnetic:
LI - nemișcat;
- Inductie: 20 mT;
- Frecventa: 50 Hz;
- Timp de expunere: 10 min.

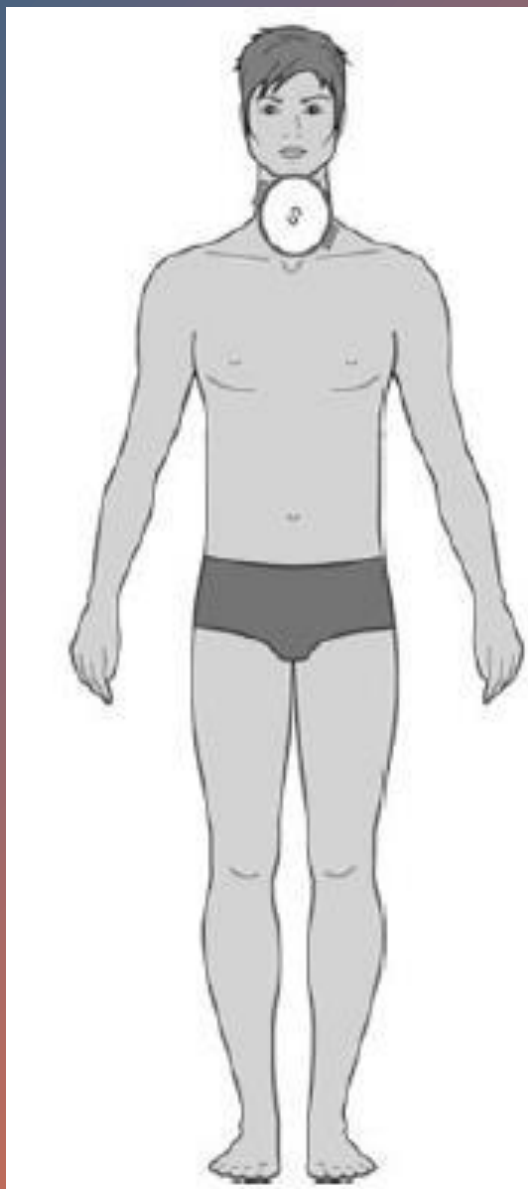

Laringită cronică


Curs – 8-10 sesiuni.

Există 1 procedură pe sesiune.

Emitători: LI.

Emitătorii sunt plasați: LI - pe zona laringelui.

- **Programul Nr.54;**
- Tip câmp magnetic:
LI - nemișcat;
- Inductie: 20 mT;
- Frecventa: 5 Hz;
- Timp de expunere: 10 min.

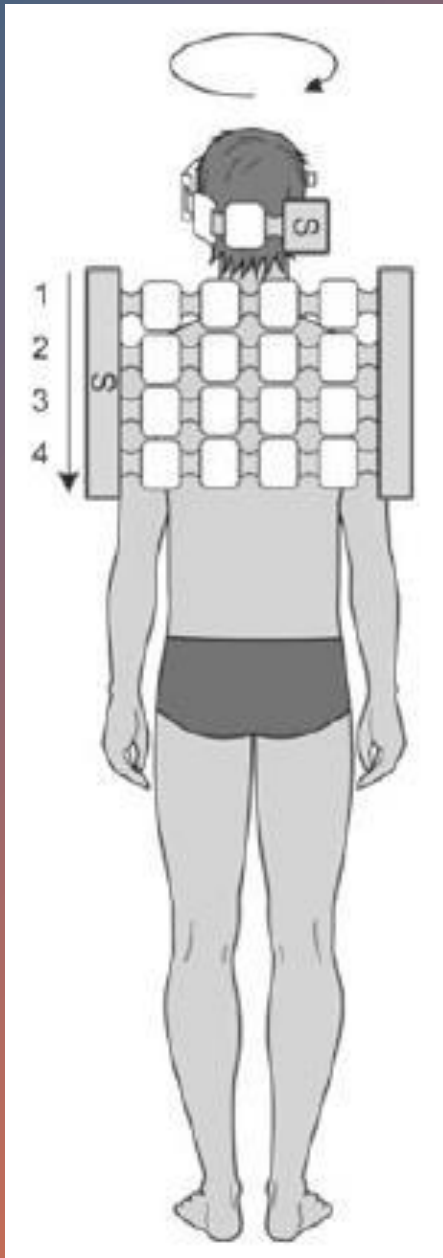

BOLI ALE SISTEMULUI CIRCULATOR

Hipertensiune arterială


Cursul constă din 15 sesiuni, cu un curs repetat în două sau trei luni.

Există 1 procedură pe sesiune.

Emitători: OI, LIG.

Emitătorii sunt plasați: OI - pe coloana cervico-toracală, LIG-om este înfășurat în jurul capului.

- **Programul nr.13;**
- Tip câmp magnetic:
OI – alergare de sus în jos;
LIG - rulare in rotatie dreapta;
- Inductie:
OI – 20 mT;
LIG – 10 mT;
- Frecventa: 100 Hz;
- Timp de expunere: 10 min.

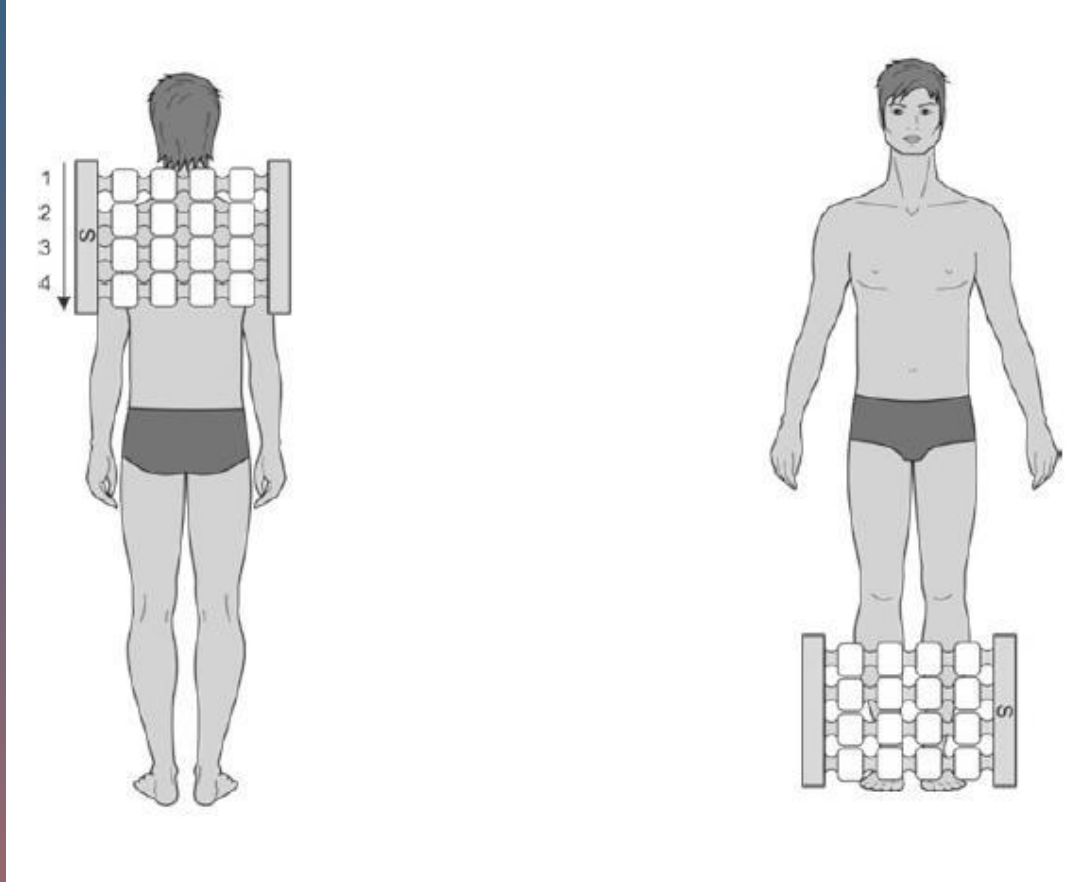

Angina pectorală stabilă I-II FC

În boala cardiacă ischemică, scopul intervenției este reducerea activității sistemului simpatoadrenal și intensificarea proceselor inhibitorii în sistemul nervos central, urmată de scăderea influențelor simpatice asupra inimii și spasmului vaselor coronare sau extinderea rezistivului. vasele din masa musculară a picioarelor inferioare (sarcina asupra mușchiului inimii este redusă, inima este „descărcată”).

Cursul constă din 15 sesiuni, cu un curs repetat în două sau trei luni.

Există 2 proceduri într-o sesiune.

Emițători: OI.

1-a procedură

Emițătorii sunt plasați: OI – pe coloana cervicotoracică.

- **Programul nr.14;**
- Tip câmp magnetic:

OI – alergare de sus în jos;

- Inductie: 20mT;
- Frecventa: 100 Hz;
- Timp de expunere: 10 min.


a 2-a procedură

Emițătorii sunt plasați: OI acoperă tibie.

- **Programul nr.15;**
- Tip câmp magnetic:

OI – nemișcat;

- Inductie: 6 mT;
- Frecventa: 16 Hz;
- Timp de expunere: 15 min.

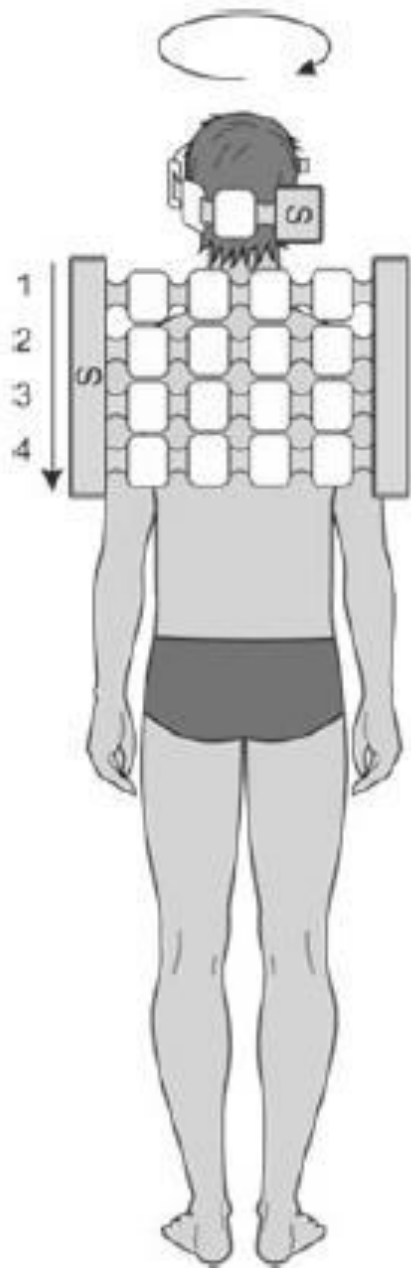

Accident vascular cerebral

Momentul începerii tratamentului: nu mai devreme de 6 săptămâni după atacul ischemic și mai târziu, în timpul perioadei de recuperare și reziduală (reziduală).


Cursul constă din 15 sesiuni.

Există 1 procedură pe sesiune.

Emitători: OI, LIG.

Emitătorii sunt plasați: OI - pe coloana cervico-toracală, LIG-om este înfășurat în jurul capului.

- **Programul nr.4;**
- Tip câmp magnetic:
OI – alergare de sus în jos;
LIG - rulare în rotație dreaptă;
- Inducție: OI – 20 mT, LIG – 10 mT;
- Frecvență: 100 Hz;
- Timp de expunere: 20 min

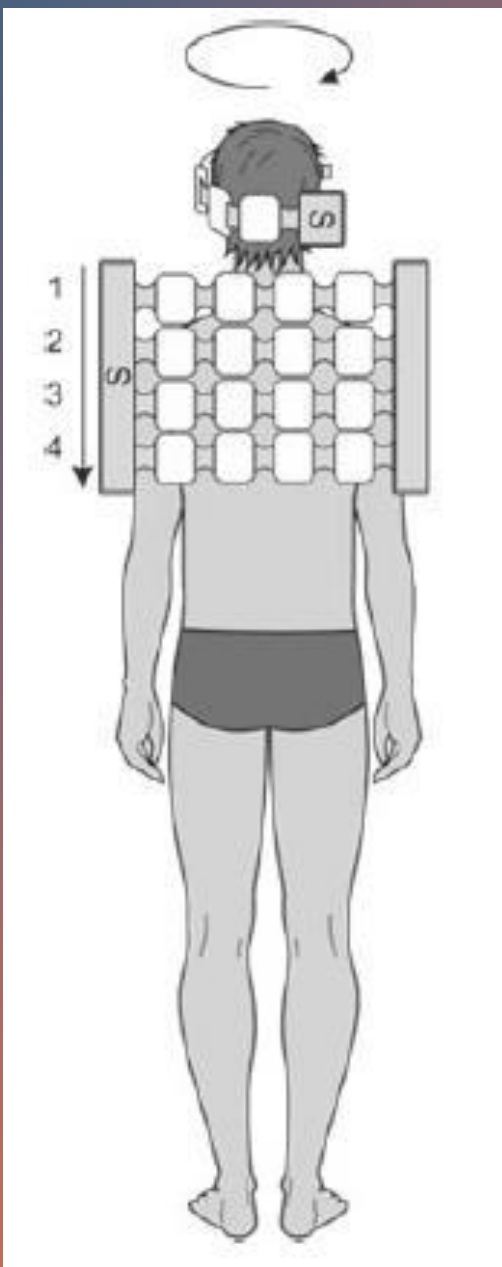

Consecințele bolilor cerebrovasculare



Cursul este format din 10-12 sesiuni.

Există 1 procedură pe sesiune.

Emițători: OI, LIG.

Emițătorii sunt plasați: OI - pe coloana cervico-toracală, LIG-om este înfășurat în jurul capului.

- **Programul nr. 16;**
- Tip câmp magnetic:
OI – alergare de sus în jos;
LIG - rulare in rotatie dreapta;
- Inductie: 10 mT;
- Frecvență: OI - 100 Hz, LIG - 10 Hz;
- Timp de expunere: 20 min.

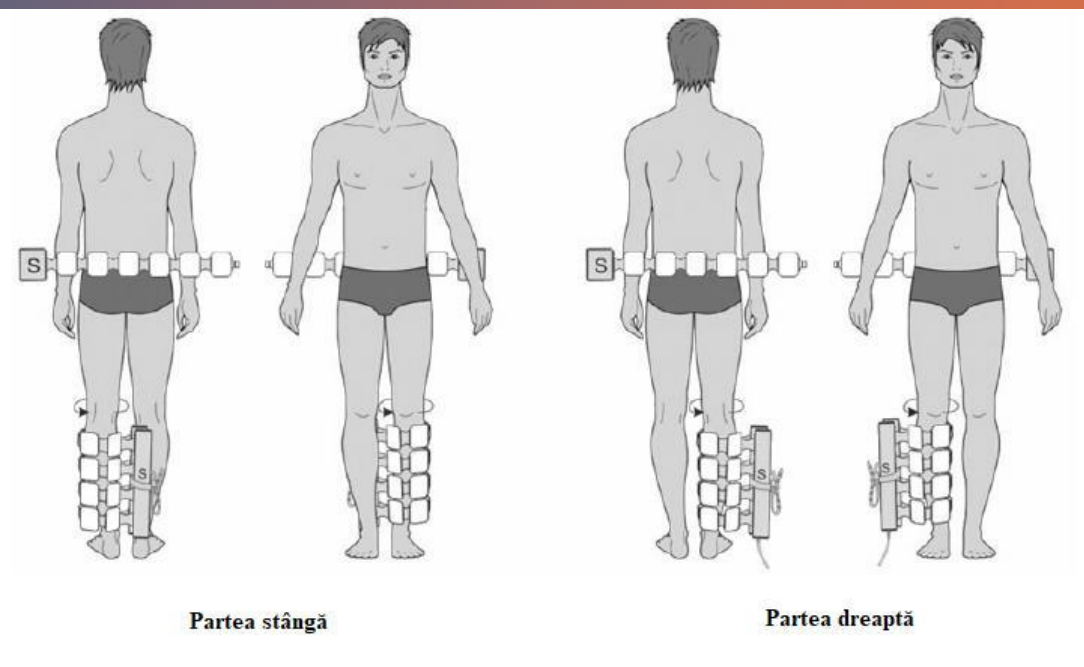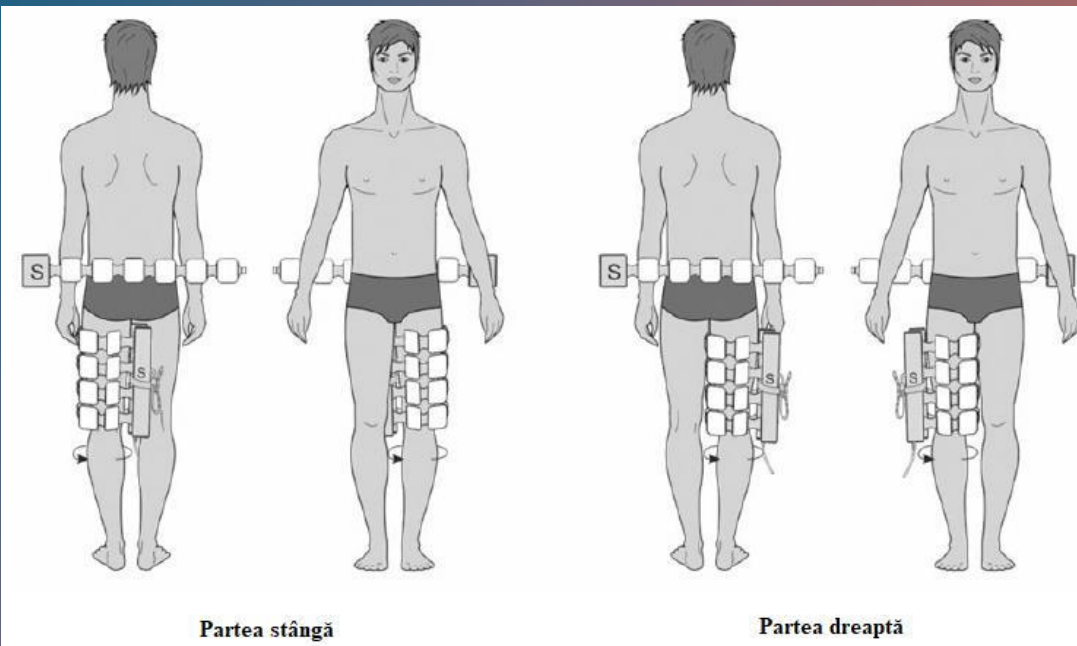

Boala vasculară aterosclerotică, endarterită deformantă sau obliterantă

Cursul constă din 15 sesiuni, cu un curs repetat în 2-3 luni.

Există 2 proceduri într-o sesiune.

Emițători: OI, LIG.

1 a procedură


Emițătorii sunt plasați: OI înfășurare în jurul coapsei, LIG - pe zona de proiecție a nodurilor simpatice lombare.

- **Programul nr. 17;**
- Tip câmp magnetic:
OI – alergare de la dreapta la stânga;
LIG - nemișcat,
- Inductie: OI - 20 mT, LIG - 6 mT;
- Frecvență: OI - 10 Hz, LIG - 16 Hz;
- Timp de expunere: 10 min.

a 2-a procedură

Emițătorii sunt plasați: OI înfășurați în jurul tibiei, LIG - pe zona de proiecție a nodurilor simpatice lombare.

- **Programul nr.17;**
- Tip câmp magnetic:
OI – alergare de la dreapta la stânga;
LIG - nemișcat,
- Inductie: OI - 20 mT,
LIG – 6 mT;
- Frecvență: OI - 10 Hz, LIG - 16 Hz;
- Timp de expunere: 10 min.

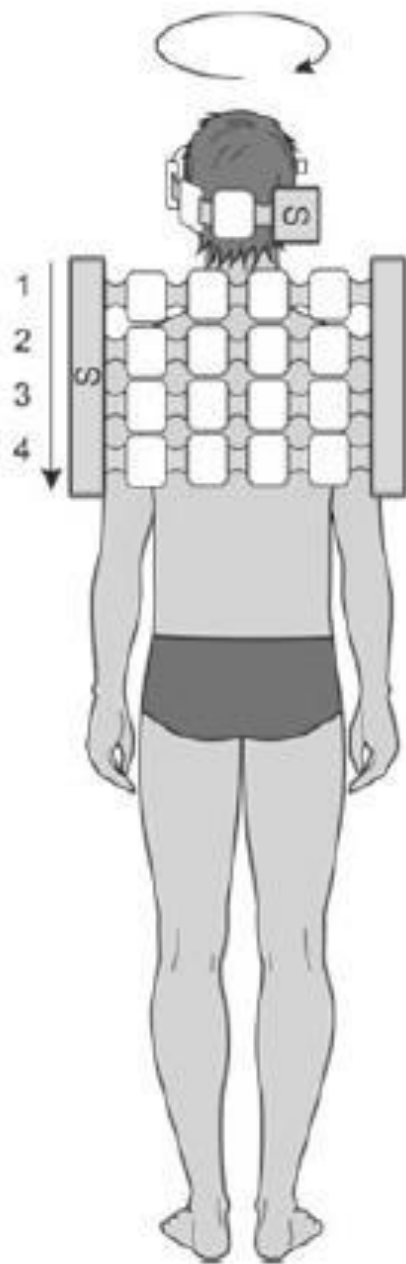

Encefalopatie aterosclerotică (discirculatorie).



Cursul constă în 10-12 ședințe zilnic sau o dată la două zile.

Există 1 procedură pe sesiune.

Emițători: OI, LIG.

Emițătorii sunt plasați: OI-ul pe coloana cervico-toracală, LIG-ul este înfășurat în jurul capului.

- **Programul nr.16;**
- Tip câmp magnetic:
OI – alergare de sus în jos;
LIG - rulare în rotație dreaptă;
- Inducție: 10 mT;
- Frecvență: OI - 100 Hz, LIG - 10 Hz;
- Timp de expunere: 20 min.

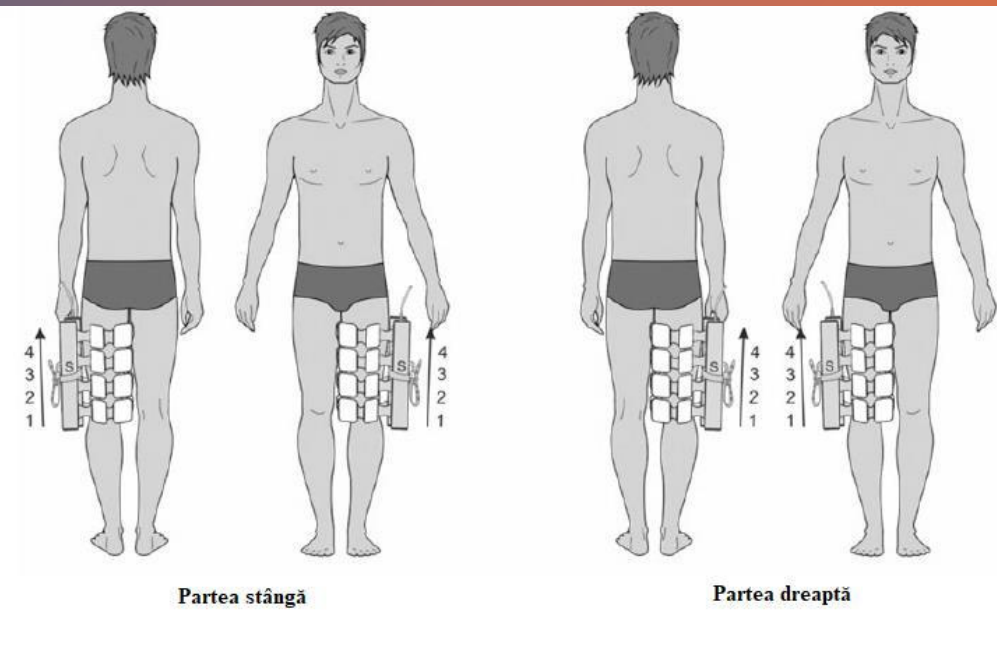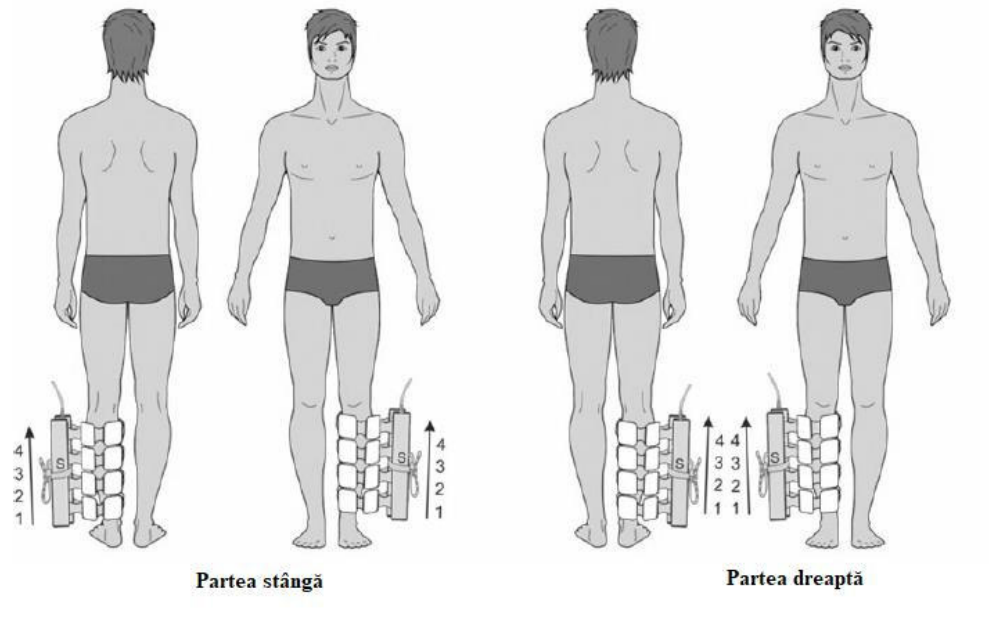

Vene varicoase

Cursul constă din 15 sesiuni. Repetați cursul în 2-3 luni
Există 2 proceduri într-o sesiune.

Emitători: OI.

1a procedură

Emitătorii sunt plasați: OI este înfășurat în jurul tibiei membrului afectat.

- **Programul nr.18;**
- Tip câmp magnetic:
OI – rulează de jos în sus;
- Inductie: 20mT; Frecventa: 100 Hz;
- Timp de expunere: 10 min.

a 2-a procedură

Emitătorii sunt plasați: OI este înfășurat în jurul coapsei membrului afectat.

- **Programul nr.18;**
- Tip câmp magnetic:
OI – rulează de jos în sus;
- Inductie: 20mT;
- Frecventa: 100 Hz;
- Timp de expunere: 10 min.

Tromboflebită venoasă profundă a piciorului


Înainte de procedură, este posibil să aplicați gelul „Lioton”, „Gepalpan”, „Dolobene” pe pielea din zona procedurii. Apoi procedura va fi de natura magnetoforezei (asemănătoare cu binecunoscuta electroforeză) a ingredientului activ, în acest caz heparină.

Cursul constă din 15 sesiuni, cu un curs repetat în 2-3 luni.

Există 1 procedură pe sesiune.

Emițători: OI.

Emițătorii sunt plasați: OI este înfășurat în jurul tibiei membrului afectat.

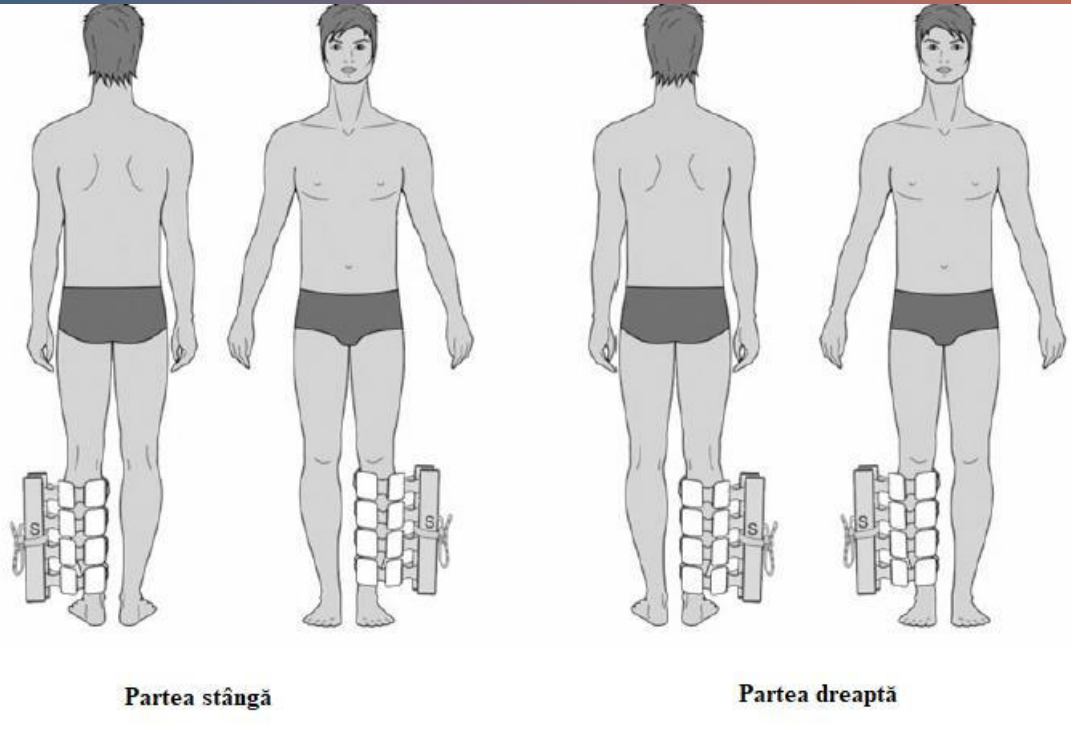

- **Programul nr. 35;**
- Tip câmp magnetic:
OI – nemișcat;
- Inducție: 6 mT;
- Frecvență: 16 Hz;
- Timp de expunere: 20 min.

Tromboflebita cronică însoțită de tulburări trofice

În timpul sedintei defectul ulcer se acopera cu un pansament steril sau cu un pansament cu un medicament care accelerează vindecarea defectului ulcer. Cursul este format din 10 sesiuni. Se repetă cursul după 30 de zile, următorul curs după 2-3 luni.

Există 2 proceduri într-o sesiune.

Emitători: OI, LI.

1a procedură

Emitătorii sunt plasați: OI este înfășurat în jurul tibiei, LI este pe zona defectului ulcerativ

- **Programul Nr.55;**
- Tip câmp magnetic:

OI - nemișcat,

LI - nemișcat;

- Inducție: 6 mT;
- Frecvență: 16 Hz;
- Timp de expunere: 10 min.

a 2-a procedură


Emitătorii sunt plasați: OI este înfășurat în jurul coapsei, LI este pe zona defectului ulcerului



- **Programul Nr.55;**
- Tip câmp magnetic:

OI - nemișcat,

LI - nemișcat;

- Inducție: 6 mT;
- Frecvență: 16 Hz;
- Timp de expunere: 10 min.

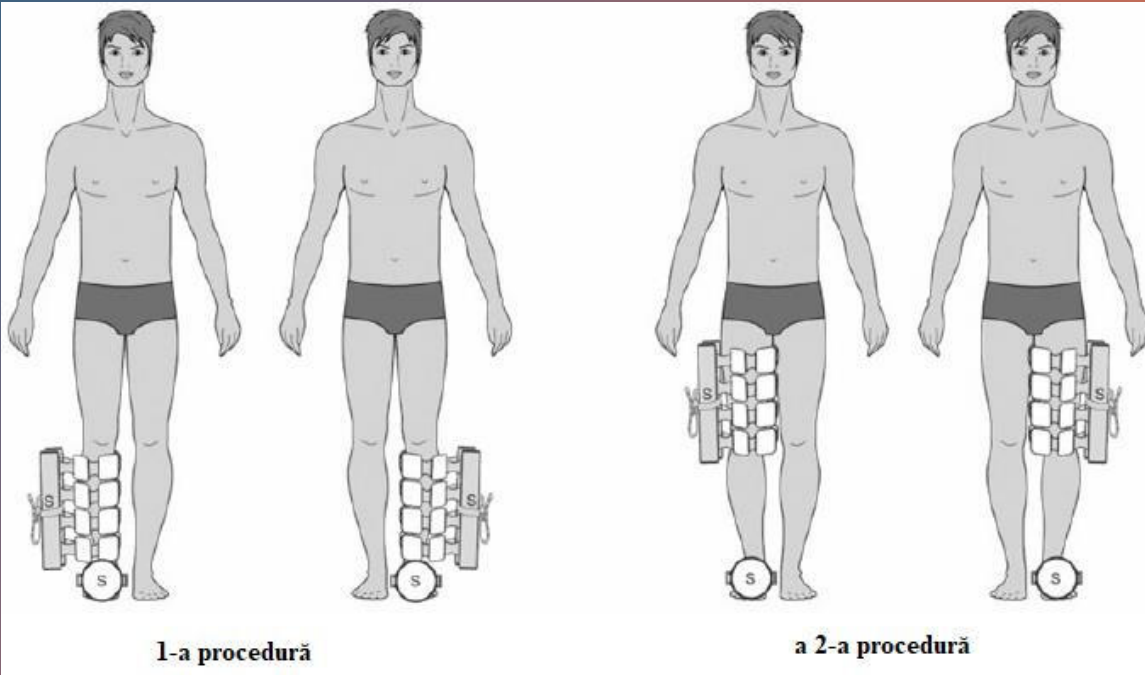

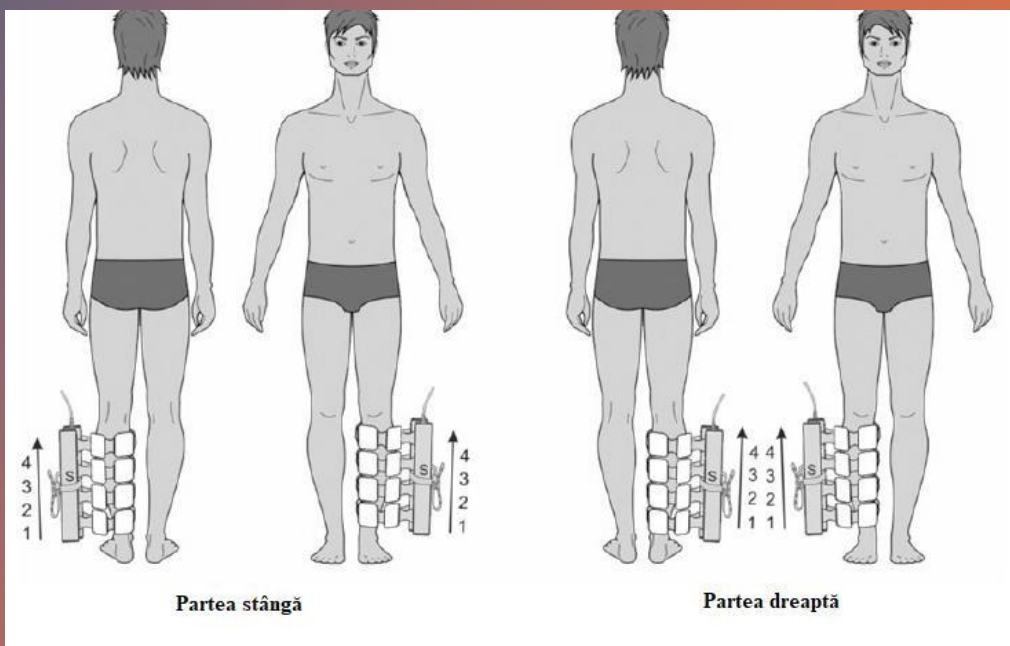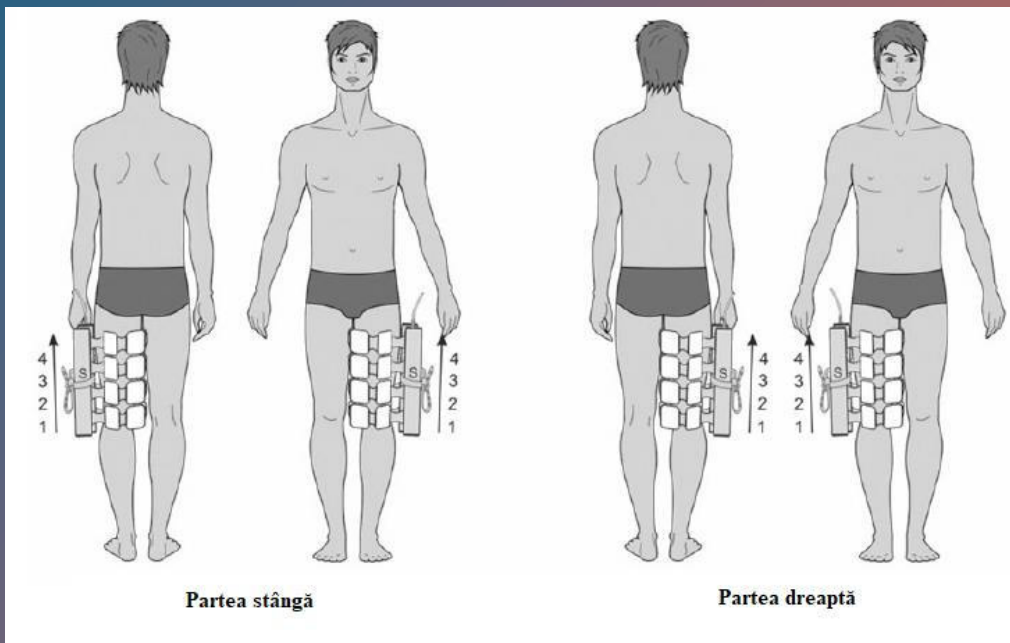

Limfedemul cronic (edem limfatic)

Cursul constă din 15 sesiuni. Se repetă cursul după 30 de zile, următorul curs după 2-3 luni.

Există 2 proceduri într-o sesiune.

Emitători: OI.

1a procedură


Emitătorii sunt plasați: OI este înfășurat în jurul coapsei membrului afectat.

- **Programul nr. 19;**
- Tip câmp magnetic:
OI – rulează de jos în sus;
- Inductie: 20 mT;
- Frecventa: 50 Hz;
- Timp de expunere: 15 min.

a 2-a procedură

Emitătorii sunt plasați: OI este înfășurat în jurul tibiei membrului afectat.

- **Programul nr.19;**
- Tip câmp magnetic:
OI – rulează de jos în sus;
- Inductie: 20 mT;
- Frecventa: 50Hz;
- Timp de expunere: 15 min.

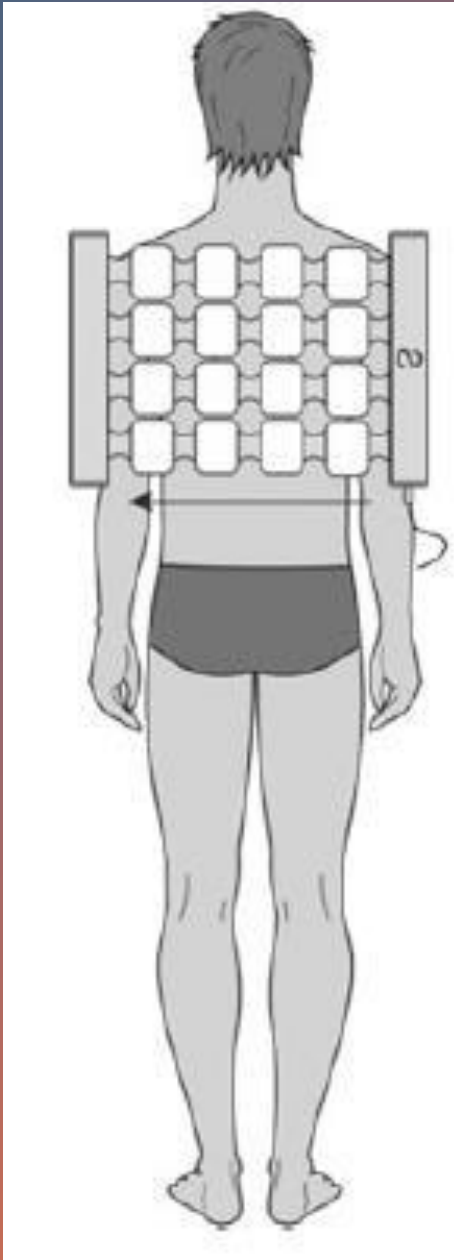

BOLI RESPIRATORII

Pneumonie virală

Pneumonie bacteriană

Bronșita cronică în afara stadiului acut


Cursul constă din 15 sesiuni.

Există 1 procedură pe sesiune.

Emițători: OI.

Emițătorii sunt plasați: OI pe proiecția rădăcinii plămânilor.

- **Programul nr.20;**
- Tip câmp magnetic:
OI – alergare de la dreapta la stânga;
- Inducție: 20 mT;
- Frecvență: 100 Hz;
- Timp de expunere: 20 min.

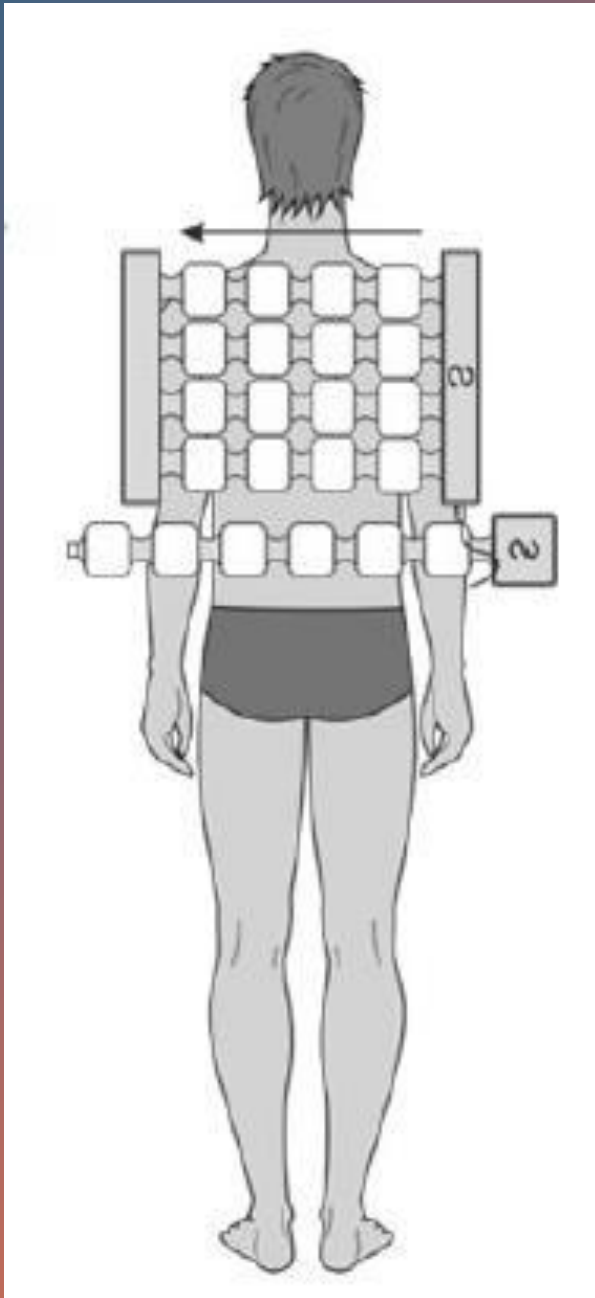

Astmul bronșic și BPOC


Cursul constă din 15 sesiuni. Următorul curs este în 2-3 luni.

Există 1 procedură pe sesiune.

Emitători: OI, LIG.

Emitătorii sunt plasați: OI pe proiecția rădăcinii plămânilor,
LIG pe proiecția glandelor suprarenale.

- **Programul nr.21;**
- Tip câmp magnetic:
OI – alergare de la dreapta la stânga;
LIG - nemișcat;
- Inducție: OI - 20 mT, LIG - 6 mT;
- Frecvență: OI – 100 Hz, LIG -16 Hz;
- Timp de expunere: 30 min.

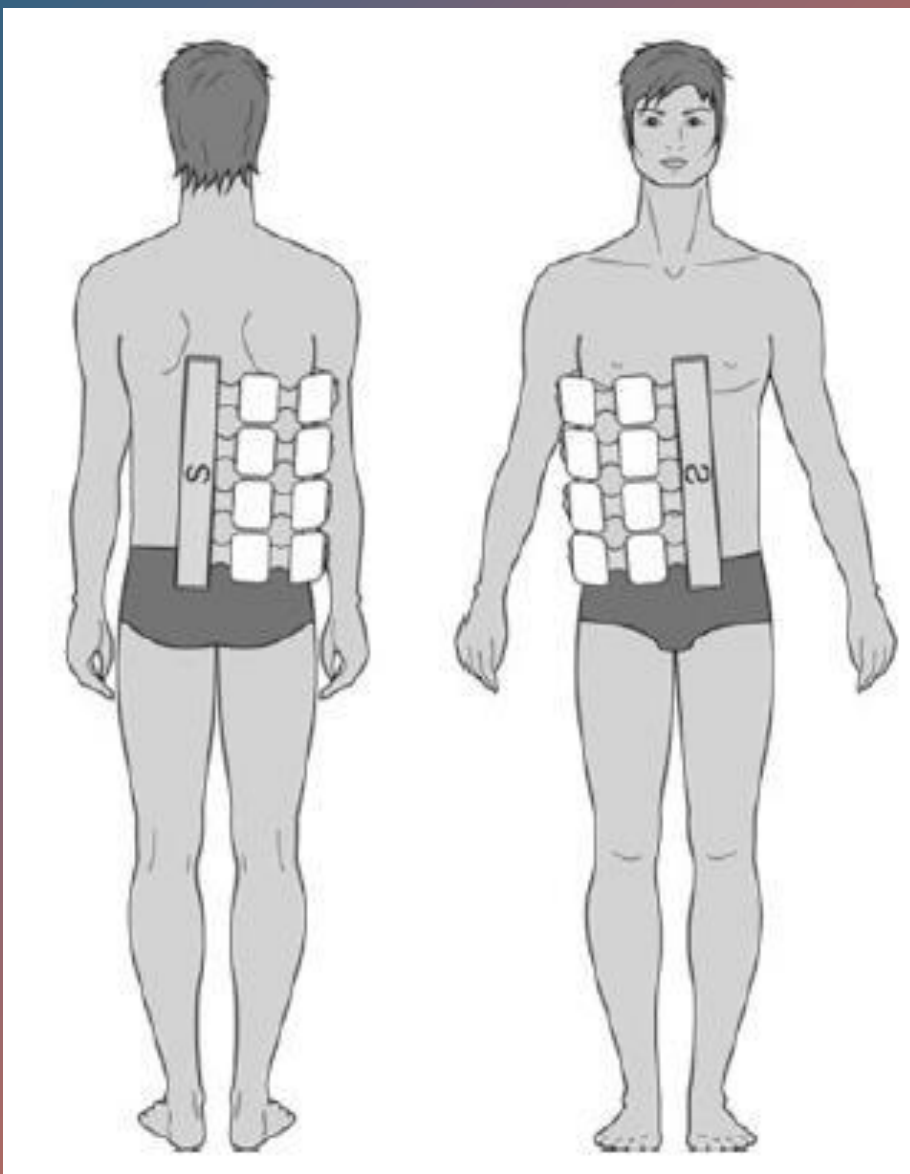

Pleurezie exudativă (după îndepărtarea lichidului din cavitatea pleurală, la trei zile după toracenteză)

Cursul constă din 15 sesiuni.

Există 1 procedură pe sesiune.

Emițători: OI.

Primele 3 sesiuni


Emițătorii sunt așezați: pacientul stă întins pe partea sănătoasă, sursa de radiații este direcționată din spate spre piept spre zona afectată.

- **Programul nr.22;**
 - Tip câmp magnetic:
- OI – nemișcat;
- Inducție: 6 mT;
 - Frecvență: 3 Hz;
 - Timp de expunere: 30 min.

De la a 4-a sesiune până la sfârșitul cursului

Emițătorii sunt așezați: pacientul stă întins pe partea sănătoasă, sursa de radiații este direcționată din spate spre piept spre zona afectată.

- **Programul nr.23;**
 - Tip câmp magnetic
- OI – nemișcat;
- Inducție: 6 mT;
 - Frecvență: 16 Hz;
 - Timp de expunere: 30 min.

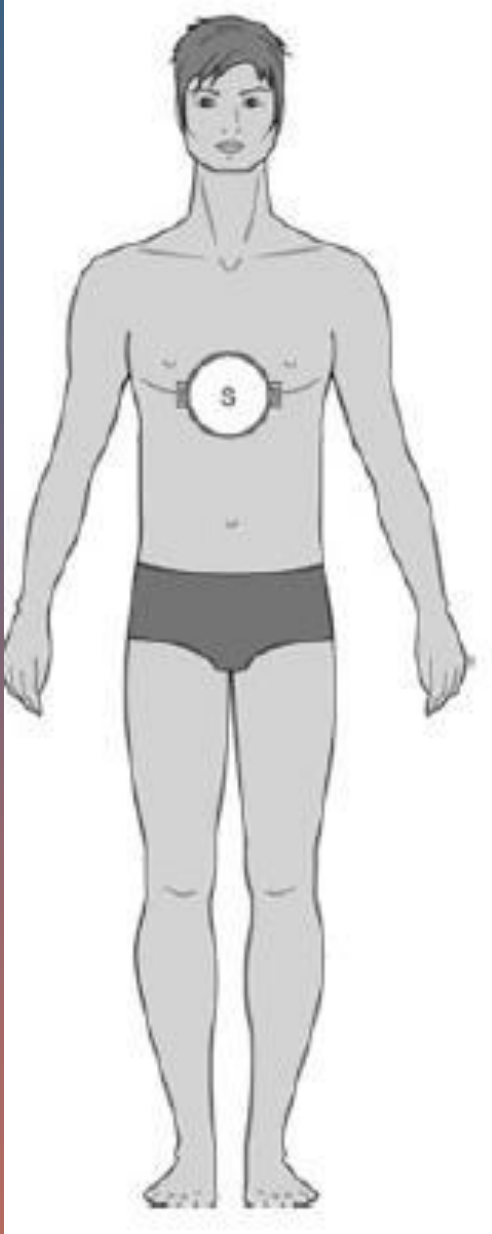

BOLI ALE SISTEMULUI DIGESTIV

Esofagită de reflux (boală de reflux gastroesofagian ușoară până la moderată)

Cursul constă din 15 sesiuni. Următorul curs este în 2-3 luni.
Există 1 procedură pe sesiune.

Emitători: LI.

Emitătorii sunt plasați: Sus pe regiunea epigastrică, acoperind treimea inferioară a sternului.

- **Programul nr. 56;**
- Tip câmp magnetic:
LI - nemișcat;
- Inducție: 30 mT;
- Frecvență: 50 Hz;
- Timp de expunere: 15 min.

Ulcer gastric și ulcer duodenal


Cursul este format din 10-12 sesiuni. Următorul curs este în 2-3 luni.


Există 1 procedură pe sesiune.

Emitători: OI, LI.

Emitătorii sunt plasați: OI pe coloana toracică și lombară, LI pe regiunea epigastrică.

- **Programul nr. 57;**
- Tip câmp magnetic:
OI - rulează de sus în jos,
LI - nemișcat;
- Inducție: OI - 20 mT, LI - 30 mT;
- Frecvență: OI – 100 Hz, LI – 16 Hz;
- Timp de expunere: 15 min.

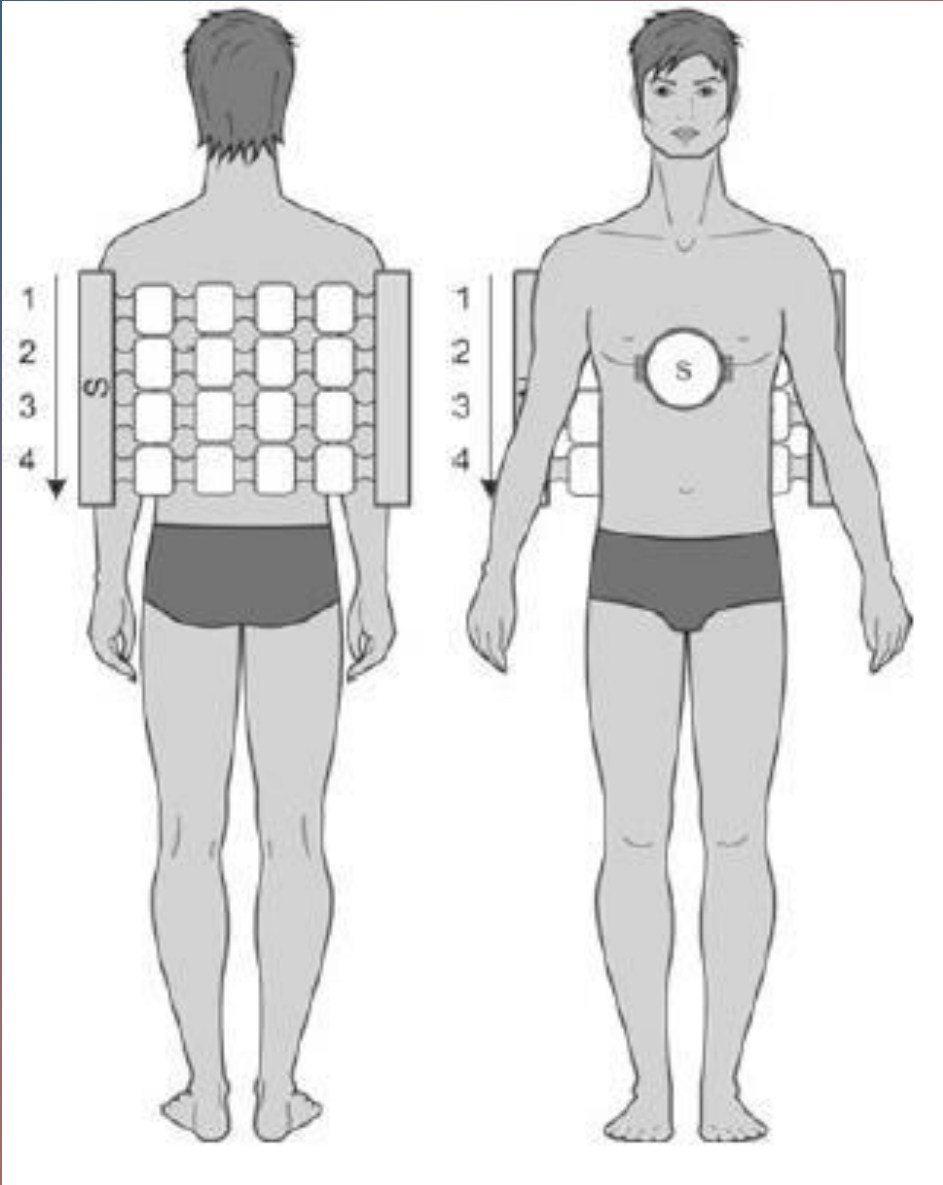

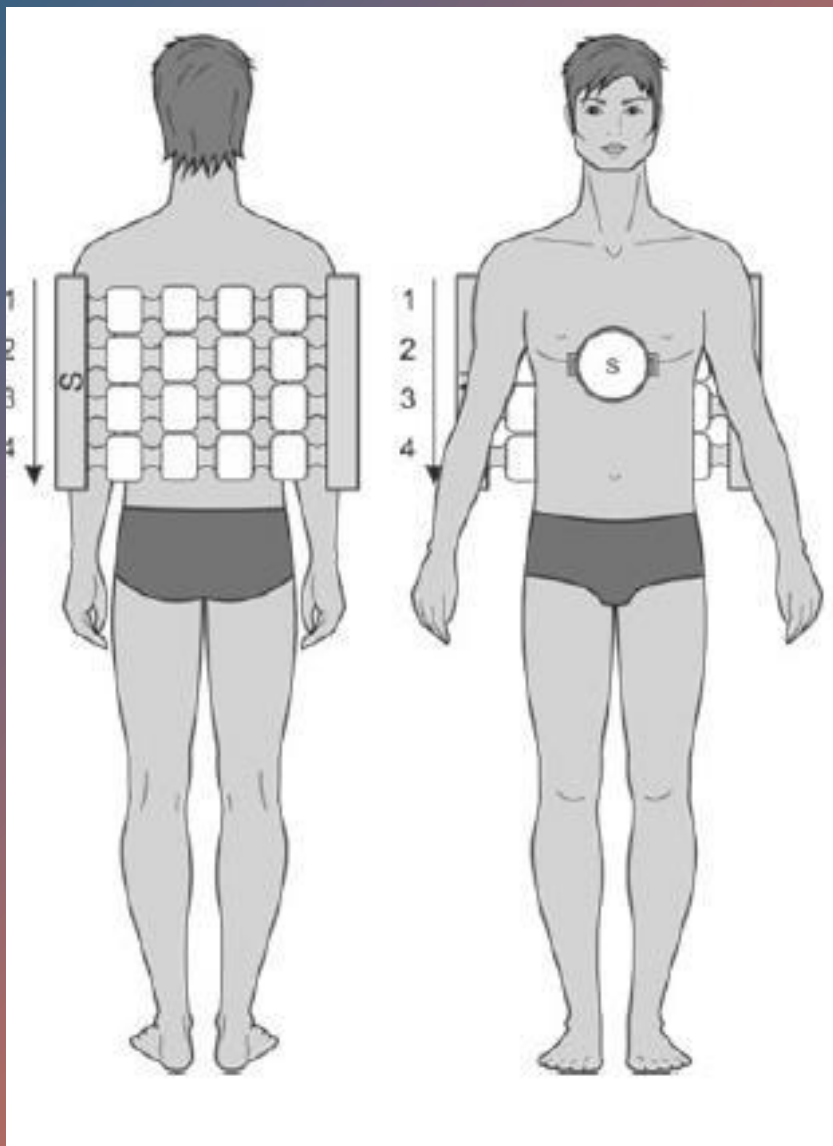

Gastrita si duodenita

Cursul este format din 15-20 de sesiuni.


Următorul curs este în 2-3 luni.

Există 1 procedură pe sesiune.

Emitători: OI, LI.

Emitătorii sunt plasați: OI pe coloana toracică și lombară, LI pe regiunea epigastrică.

- **Programul nr. 58;**
- Tip câmp magnetic:
OI - rulează de sus în jos,
LI - nemișcat;
- Inductie: OI - 20 mT, LI - 30 mT;
- Frecventa: OI – 100 Hz, LI – 16 Hz;
- Timp de expunere: 10 min.

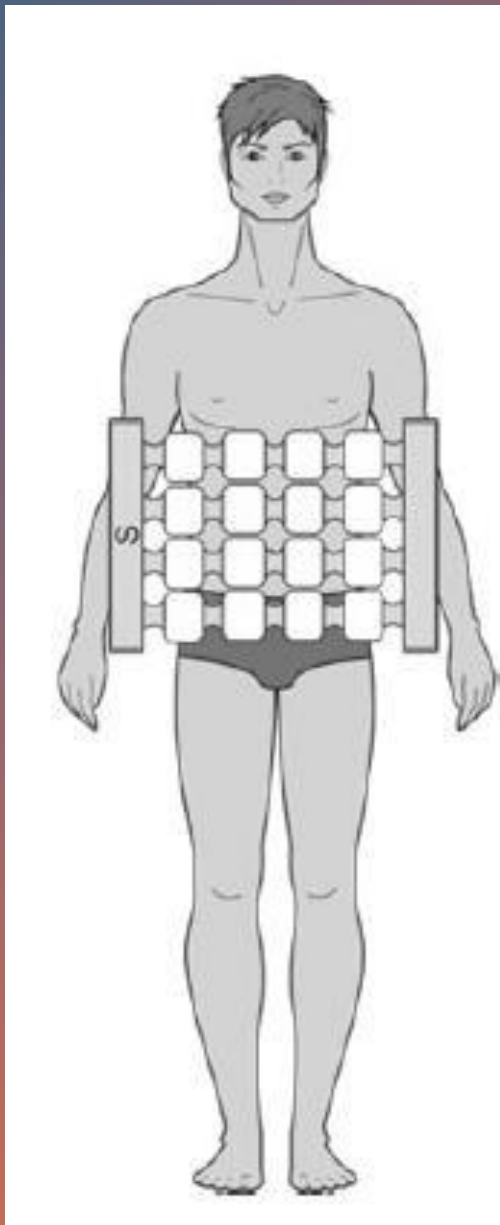

Sindromul intestinului iritabil fără diaree


Cursul este format din 10 sesiuni.

Există 1 procedură pe sesiune.

Emitători: OI.

Emitătorii sunt plasați: OI pe stomac.

- **Programul nr.24;**
- Tip câmp magnetic:
OI – nemișcat;
- Inductie: 6 mT;
- Frecventa: 16 Hz;
- Timp de expunere: 20 min.

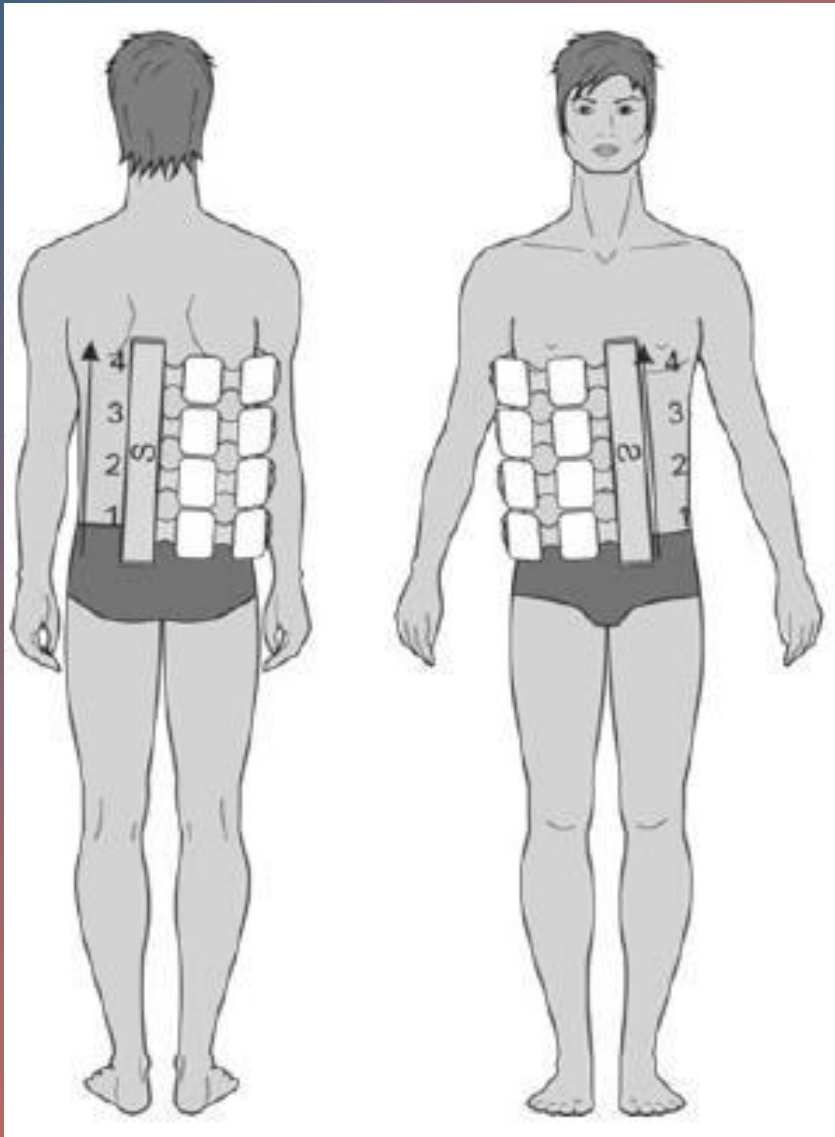

Boala alcoolică a ficatului

Tratamentul este contraindicat dacă consumul de alcool continuă!


Cursul este format din 10 sesiuni.

Există 1 procedură pe sesiune.

Emitători: OI.

Emitătorii sunt plasați: OI din spate pe zona de proiecție a ficatului.

- **Programul nr.25;**
- Tip câmp magnetic:
OI – rulează de jos în sus;
- Inducție: 25 mT;
- Frecvență: 75 Hz;
- Timp de expunere: 15 min.

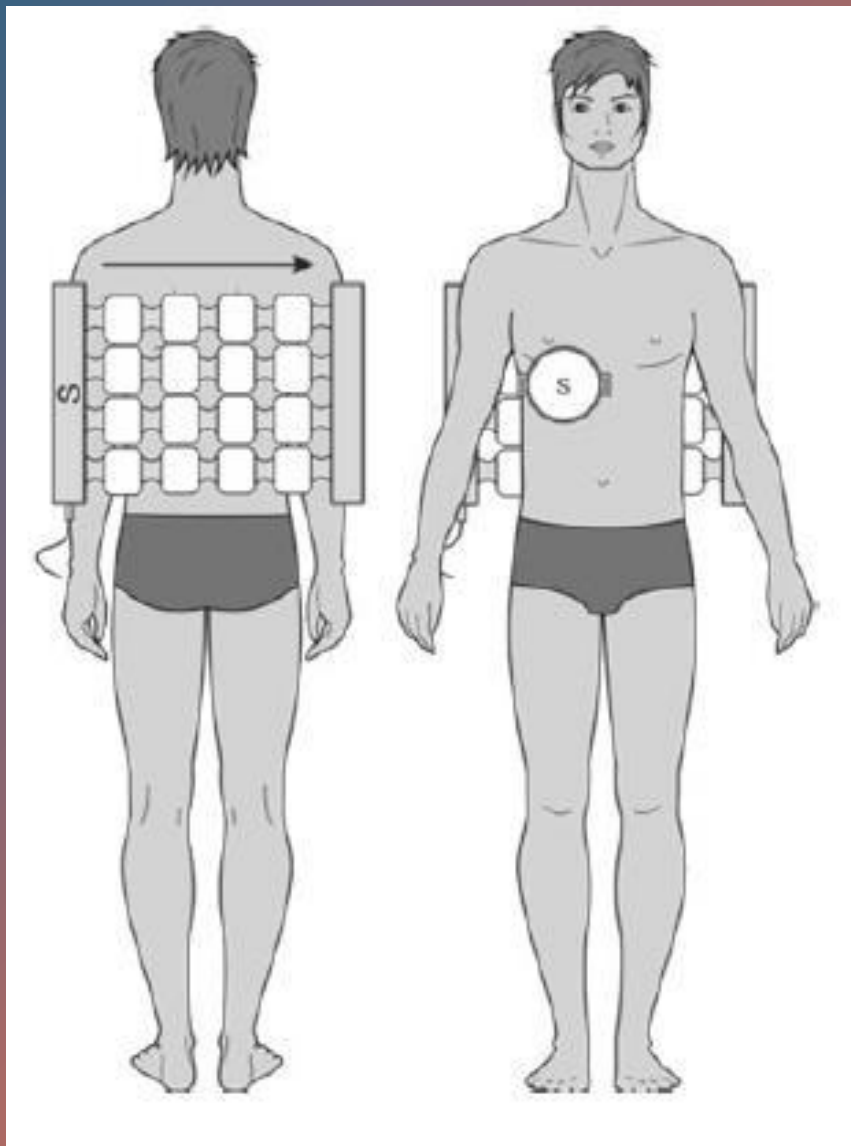

Hepatită cronică

Leziuni hepatice toxice, nespecificate


Cursul este format din 10 sesiuni.

Există 1 procedură pe sesiune.

Emitători: OI, LI.

Emitătorii sunt plasați: OI pe spate (zona de lucru a emițătorului este pe zona de proiecție a ficatului), LI pe zona vezicii biliare.

- **Programul nr. 59;**
- Tip câmp magnetic:
OI – alergare de la stânga la dreapta;
LI - nemișcat;
- Inductie: OI-20 mT, LI-35 mT;
- Frecventa: OI-100 Hz, LI – 50 Hz;
- Timp de expunere: 15 min.

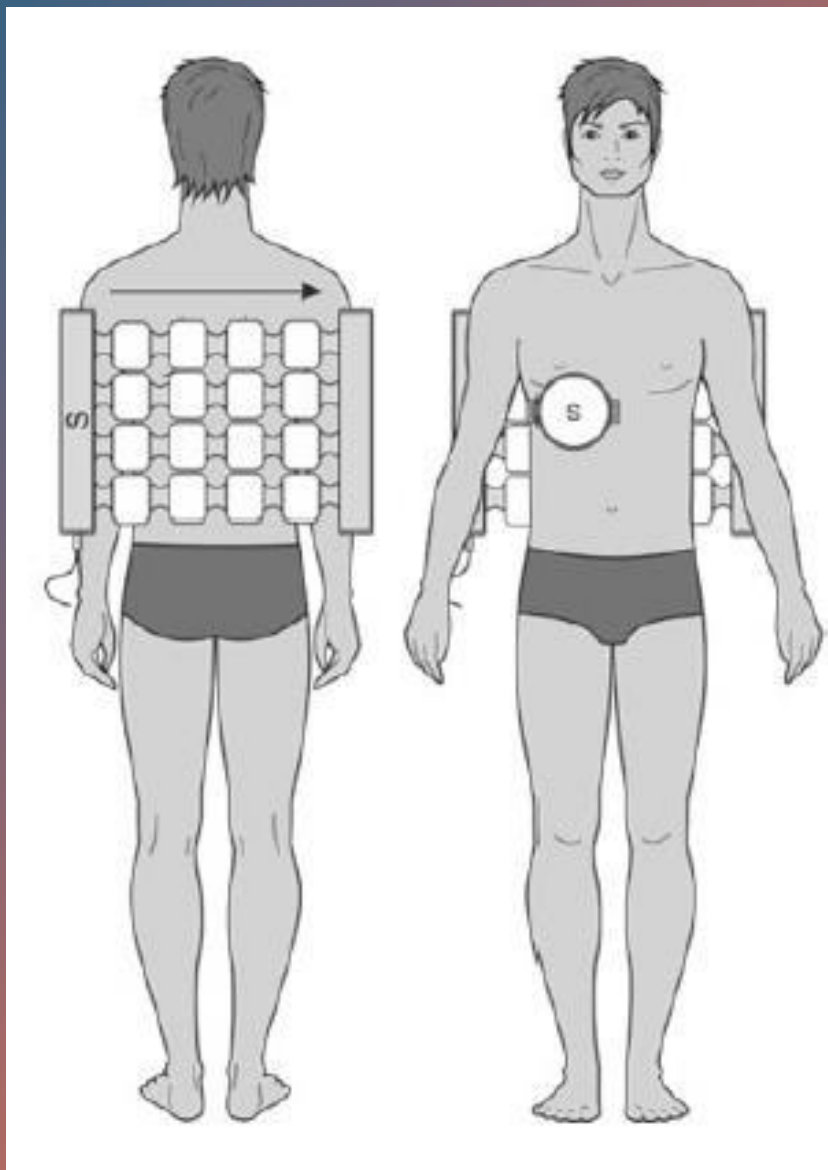

Colecistita

Tratamentul cu dispozitivul începe în perioada de diminuare a exacerbării sau în perioada de non-atac în scopul prevenirii.

Cursul este format din 10-12 sesiuni.

Există 1 procedură pe sesiune.

Emițători: OI, LI.

Primele 3 sesiuni

Emițătorii sunt plasați: OI pe zona coloanei toracice și lombare, LI pe zona vezicii biliare.

- **Programul Nr.60;**

- Tip câmp magnetic:

OI – alergare de la stânga la dreapta;

LI - nemișcat;

- Inductie: 10 mT;
- Frecventa: 100 Hz;
- Timp de expunere: 15 min.

De la a 4-a sesiune până la sfârșitul cursului

Emițătorii sunt plasați: OI pe zona coloanei toracice și lombare, LI pe zona vezicii biliare.


- **Programul Nr.61;**

- Tip câmp magnetic:

OI - alergând de la stânga la dreapta,

LI - nemișcat;

- Inductie: 10 mT;
- Frecventa: 10 Hz;
- Timp de expunere: 15 min.

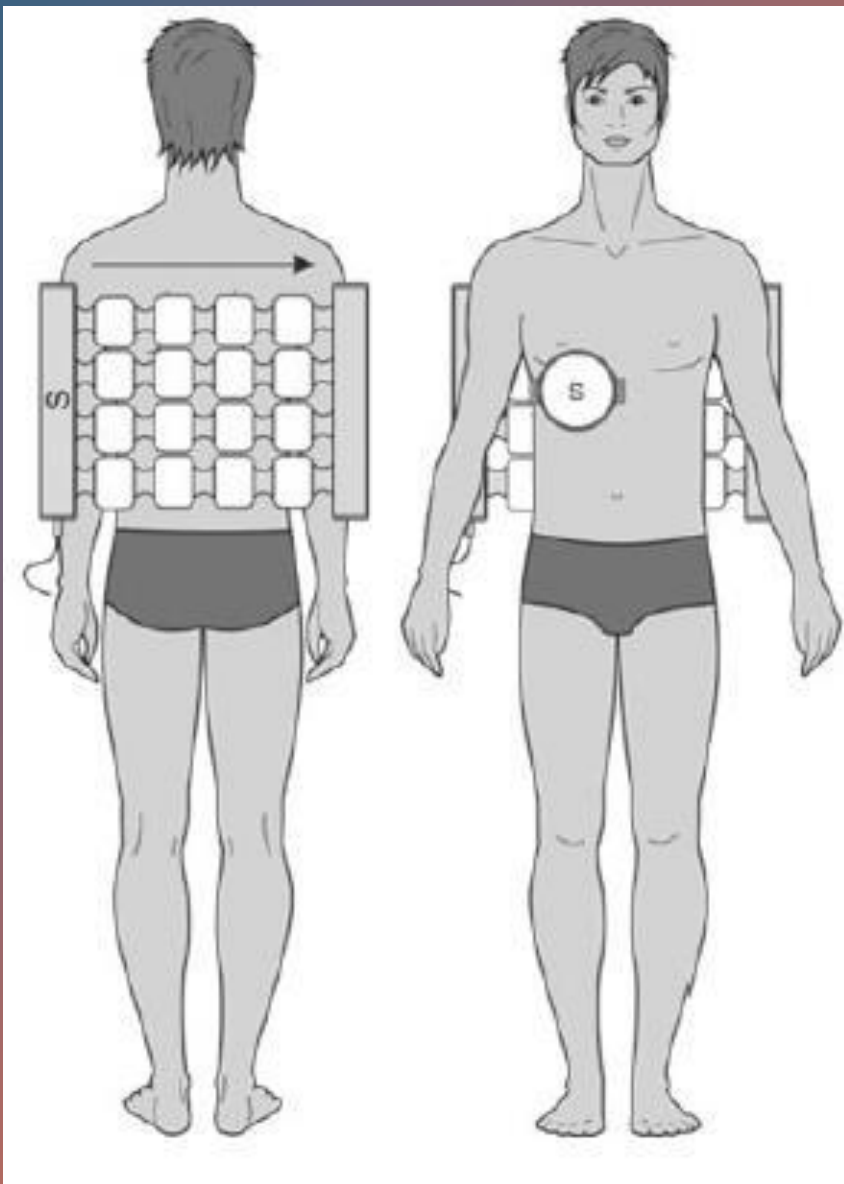

Dischinezia căilor biliare

Tratamentul cu dispozitivul începe în perioada de diminuare a exacerbării sau în perioada de non-atac în scopul prevenirii.


Cursul este format din 10-12 sesiuni.

Există 1 procedură pe sesiune.

Emitători: OI, LI.

Emitătorii sunt plasați: OI pe zona coloanei toracice și lombare, LI pe zona vezicii biliare.

- **Programul Nr.61;**
- Tip câmp magnetic:
OI - alergând de la stânga la dreapta,
LI - nemișcat;
- Inductie: 10 mT;
- Frecventa: 10 Hz;
- Timp de expunere: 15 min.

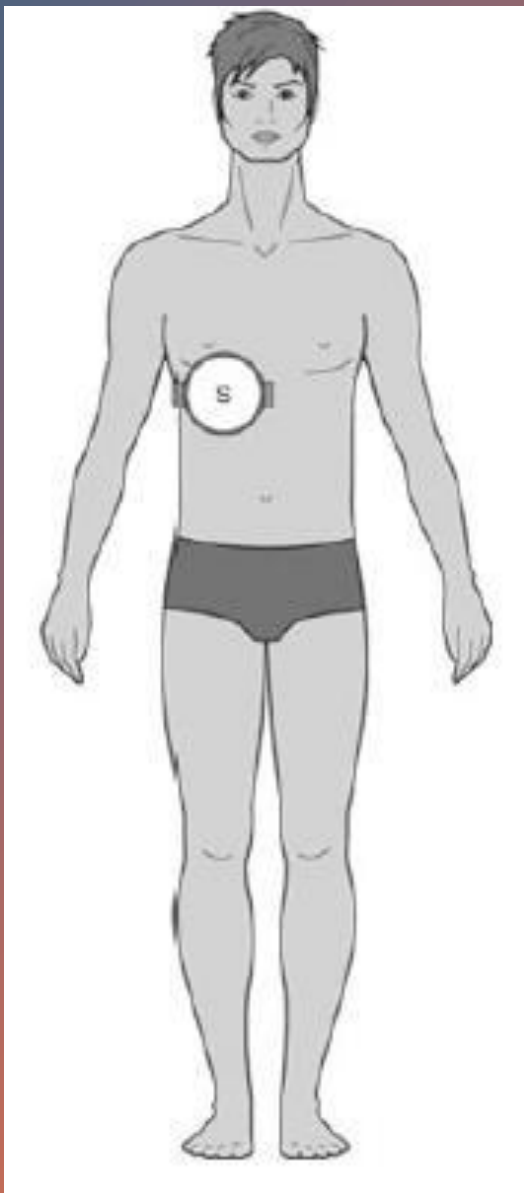

Dischinezia hipomotorie a vezicii biliare (colecistopatie fără calculi biliari!)


Cursul este format din 10 sesiuni.

Există 1 procedură pe sesiune.

Emitători: LI.

Emitătorii sunt plasați: LI pe zona de proiecție a vezicii biliare.

- **Programul Nr.62;**
- Tip câmp magnetic:
LI - nemișcat;
- Inducție: 10 mT;
- Frecvență: 45 Hz;
- Timp de expunere: 15 min.

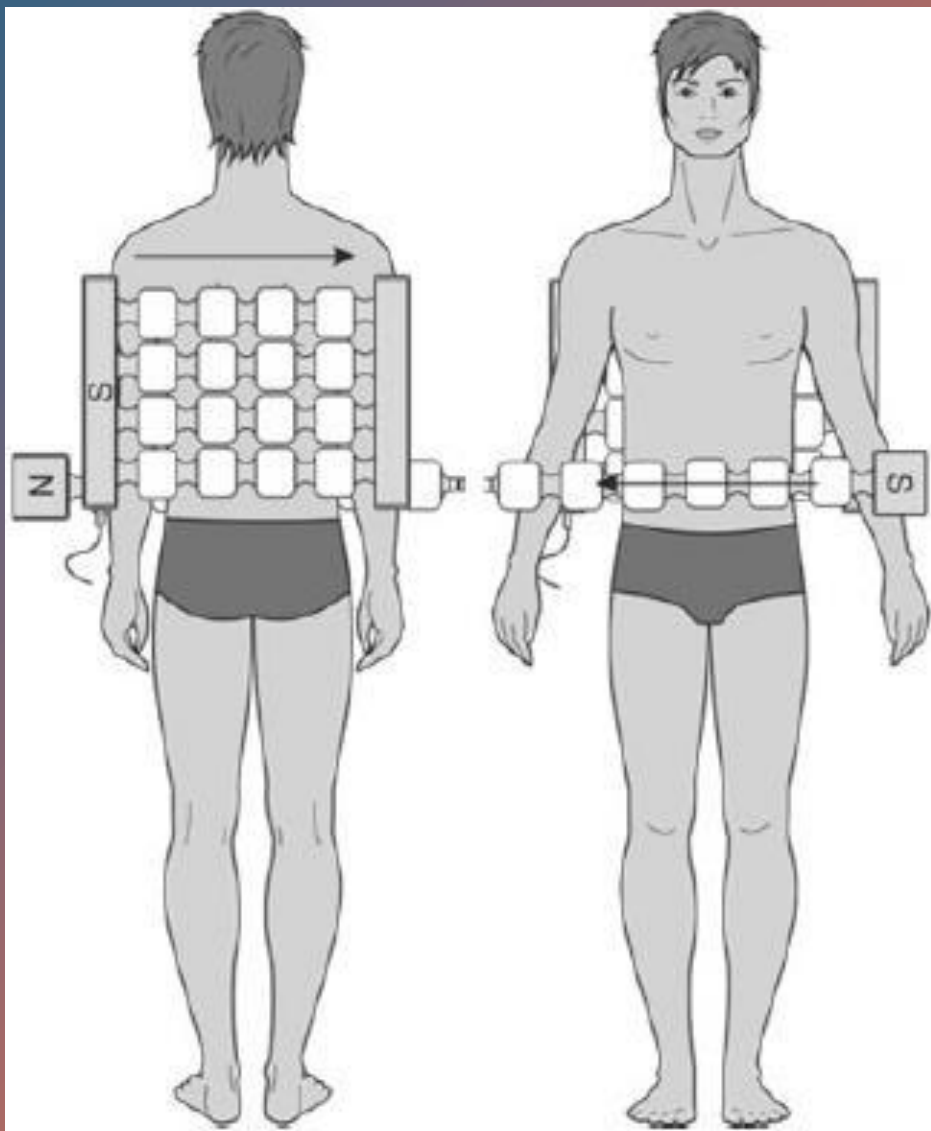

Pancreatită cronică


Cursul este format din 10 sesiuni.

Există 1 procedură pe sesiune.

Emitători: OI, LIG.

Emitătorii sunt plasați: OI pe zona coloanei vertebrale toracice și lombare, LIG - pe zona de proiecție a pancreasului, pe peretele abdominal.

- **Programul nr. 26;**
- Tip câmp magnetic:
OI - alergând de la stânga la dreapta,
LIG – rulează de la stânga la dreapta;
- Inductie: 2 mT;
- Frecventa: 5 Hz;
- Timp de expunere: 8 min.

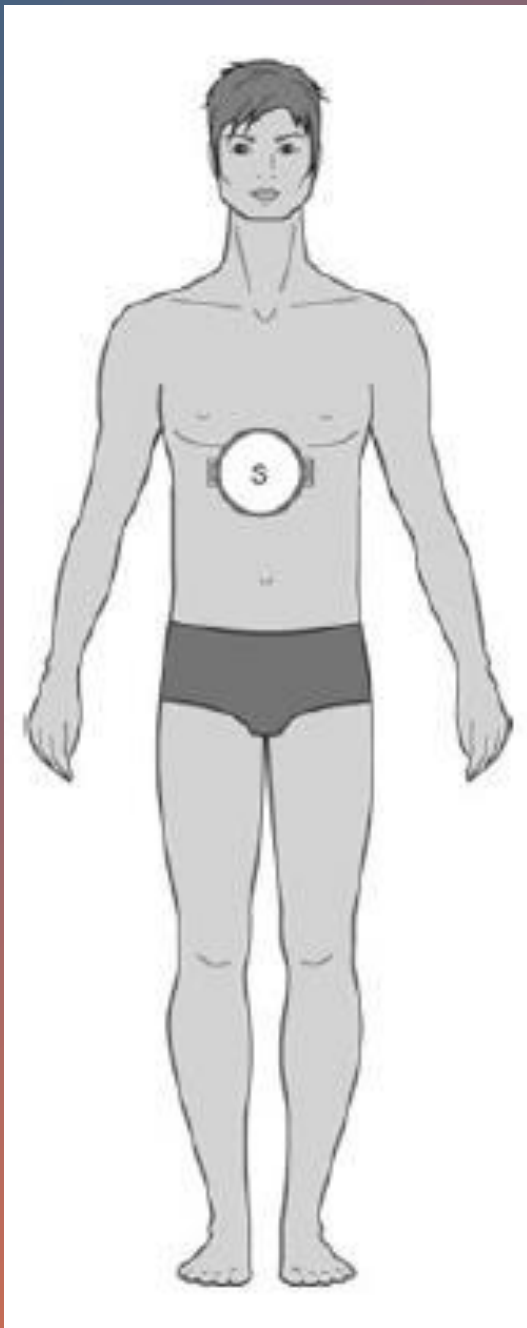

Sindromul Chirurgiei la stomac


Cursul este format din 10-12 sesiuni.

Există 1 procedură pe sesiune.

Emitători: LI.

Emitătorii sunt plasați: LI - pe zona de proiecție a epigastriului și cicatricea postoperatorie.

- **Programul Nr.63;**
- Tip câmp magnetic:
LI - nemișcat;
- Inductie: 30 mT;
- Frecventa: 100 Hz;
- Timp de expunere: 15 min.

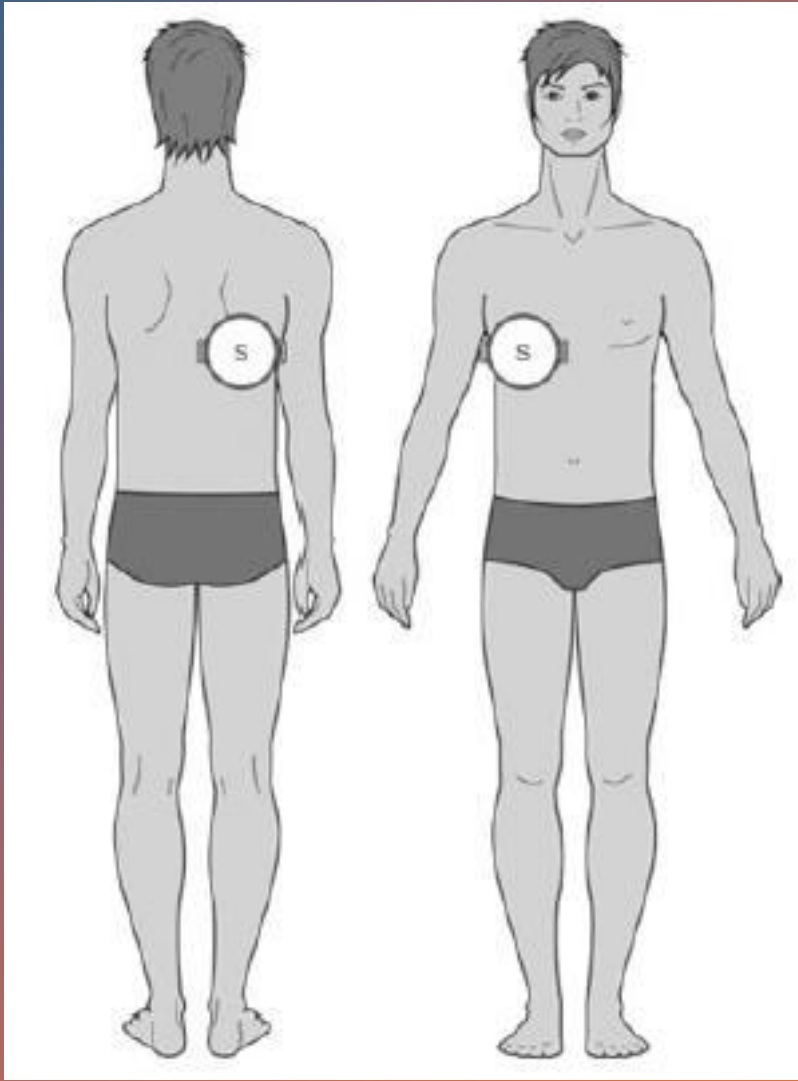

Sindromul postcolecistectomie


Cursul este format din 10-12 sesiuni.

Există 1 procedură pe sesiune.

Emitători: 2 LI.

Emitătorii sunt plasați: LI – pe zona de proiecție a ficatului și segmentat din spate.

- **Programul Nr.64;**
- Tip câmp magnetic:
LI - nemișcat;
- Inductie: 35 mT;
- Frecventa: 50 Hz;
- Timp de expunere: 12 min.

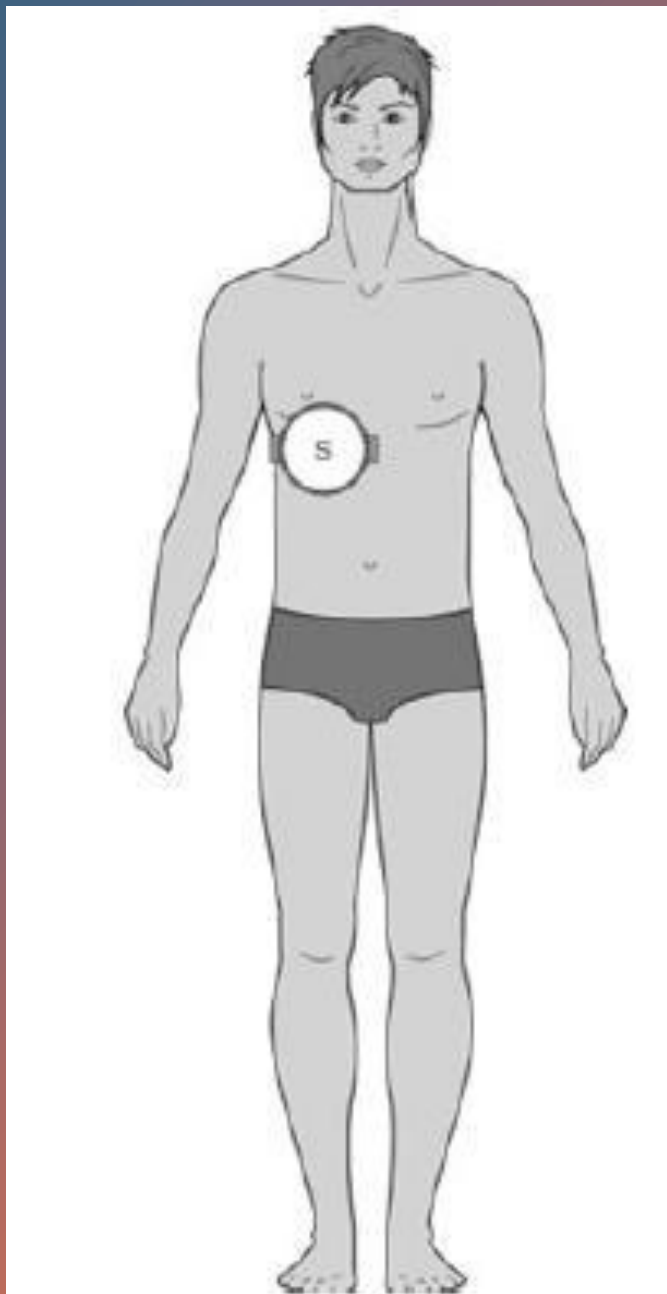

BOLI ALE PIELII ȘI ȚESUTULUI SUBCUTANAT

Cicatrici cheloide

Atentie! Pentru a preveni formarea cicatricilor cheloide, aceeași tehnică este utilizată pentru tratarea rănilor postoperatorii și posttraumatice.


Cursul este format din 10-12 sesiuni.

Există 1 procedură pe sesiune.

Emițători: LI.

Emițătorii sunt plasați: LI - pe zona cicatricei.

- **Programul Nr.65;**
- Tip câmp magnetic:
LI - nemișcat;
- Inductie: 35 mT;
- Frecventa: 50 Hz;
- Timp de expunere: 20 min.

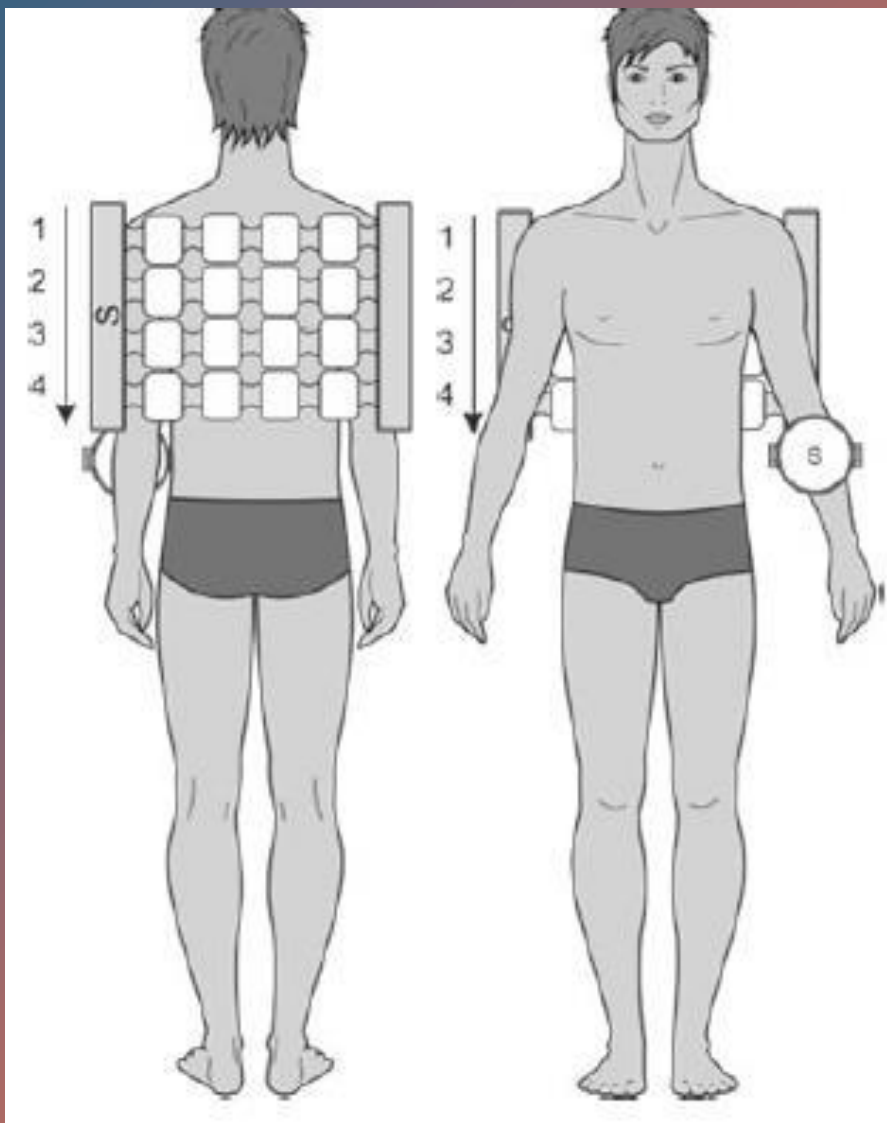

Lichenul plan

Cursul este format din 10-12 sesiuni.

Există 1 procedură pe sesiune.

Emitători: OI, LI.

Emitătorii sunt plasați: OI pe secțiunea coloanei vertebrale corespunzătoare zonei erupției cutanate și LI pe zona erupției.

- **Programul Nr.66;**
- Tip câmp magnetic:
OI - rulează de sus în jos,
LI - nemișcat;
- Inducție: I – 10 mT, LI – 20 mT; Frecvență:
OI – 100 Hz, LI – 50 Hz;
- Timp de expunere: 10 min.

Neurodermatită limitată, mâncărimi ale pielii, urticarie, eczeme, neurodermatită, prurit, dermatită atopică


Cursul este format din 10-12 sesiuni.

Există 1 procedură pe sesiune.

Emițători: OI, LI.

Emițătorii sunt plasați: OI pe secțiunea coloanei vertebrale corespunzătoare zonei erupției cutanate și LI pe zona erupției.

- **Programul nr. 67;**
- Tip câmp magnetic:
OI – alergare de sus în jos;
LI - nemișcat;
- Inducție: 20 mT;
- Frecvență: OI – 100 Hz, LI – 50 Hz;
- Timp de expunere: 10 min.

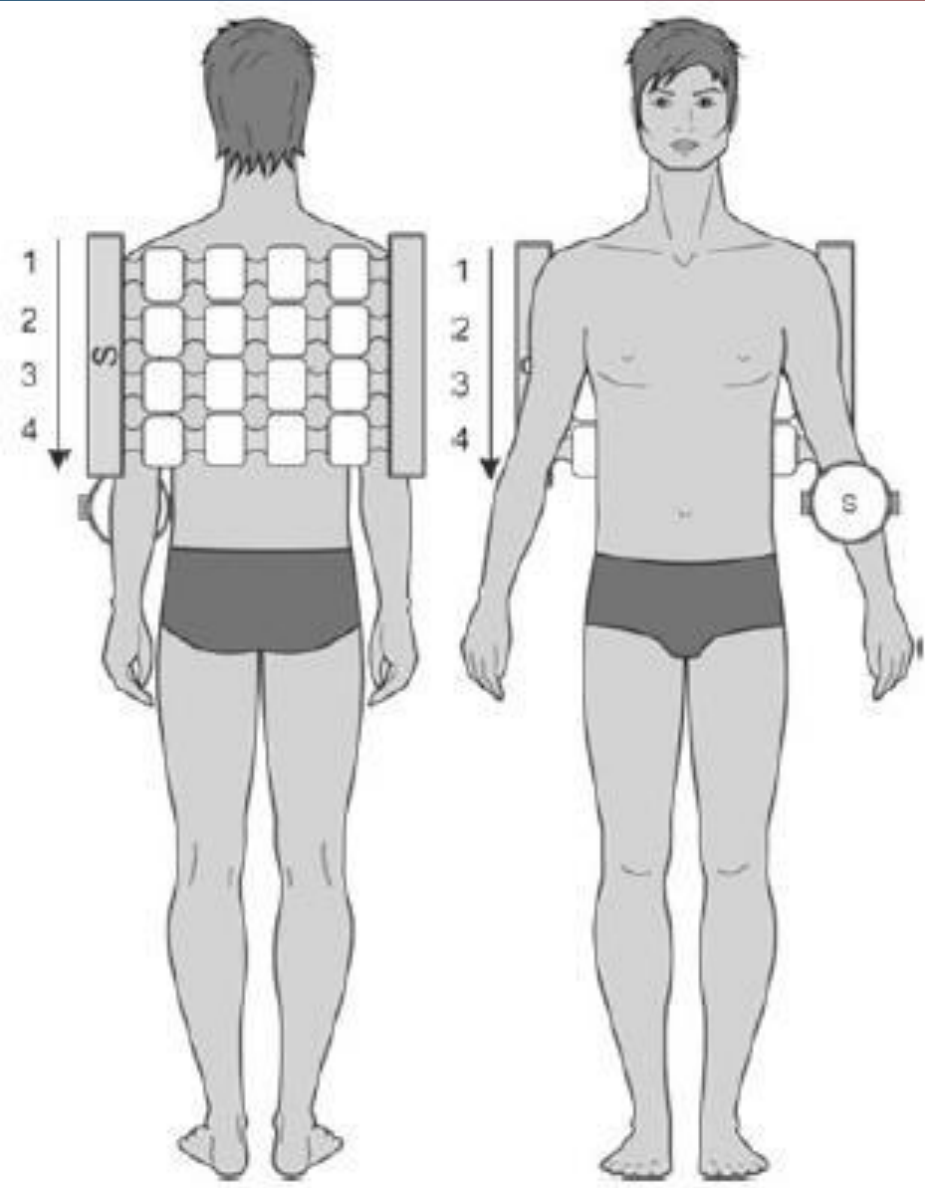

Psoriazis


Cursul constă din 15 sesiuni.


Există 1 procedură pe sesiune.

Emitători: OI, LI.

Emitătorii sunt plasați: OI pe secțiunea coloanei vertebrale corespunzătoare zonei de afectare focală și LI pe zona de afectare focală.

- **Programul Nr.66;**
- Tip câmp magnetic:
OI – rulează de jos în sus;
LI - nemișcat;
- Inducție: I – 10 mT, LI – 20 mT;
- Frecvență: OI – 100 Hz, LI – 50 Hz;
- Timp de expunere: 10 min.

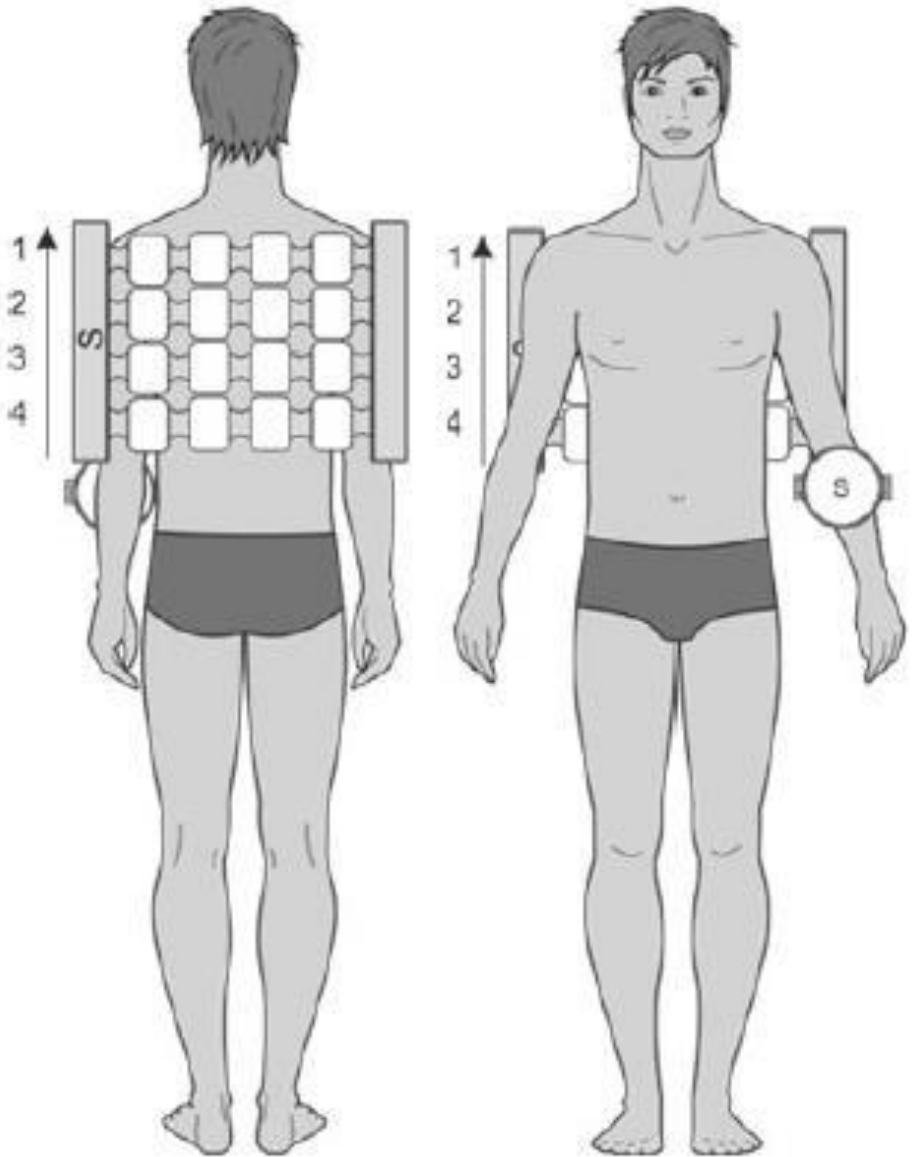

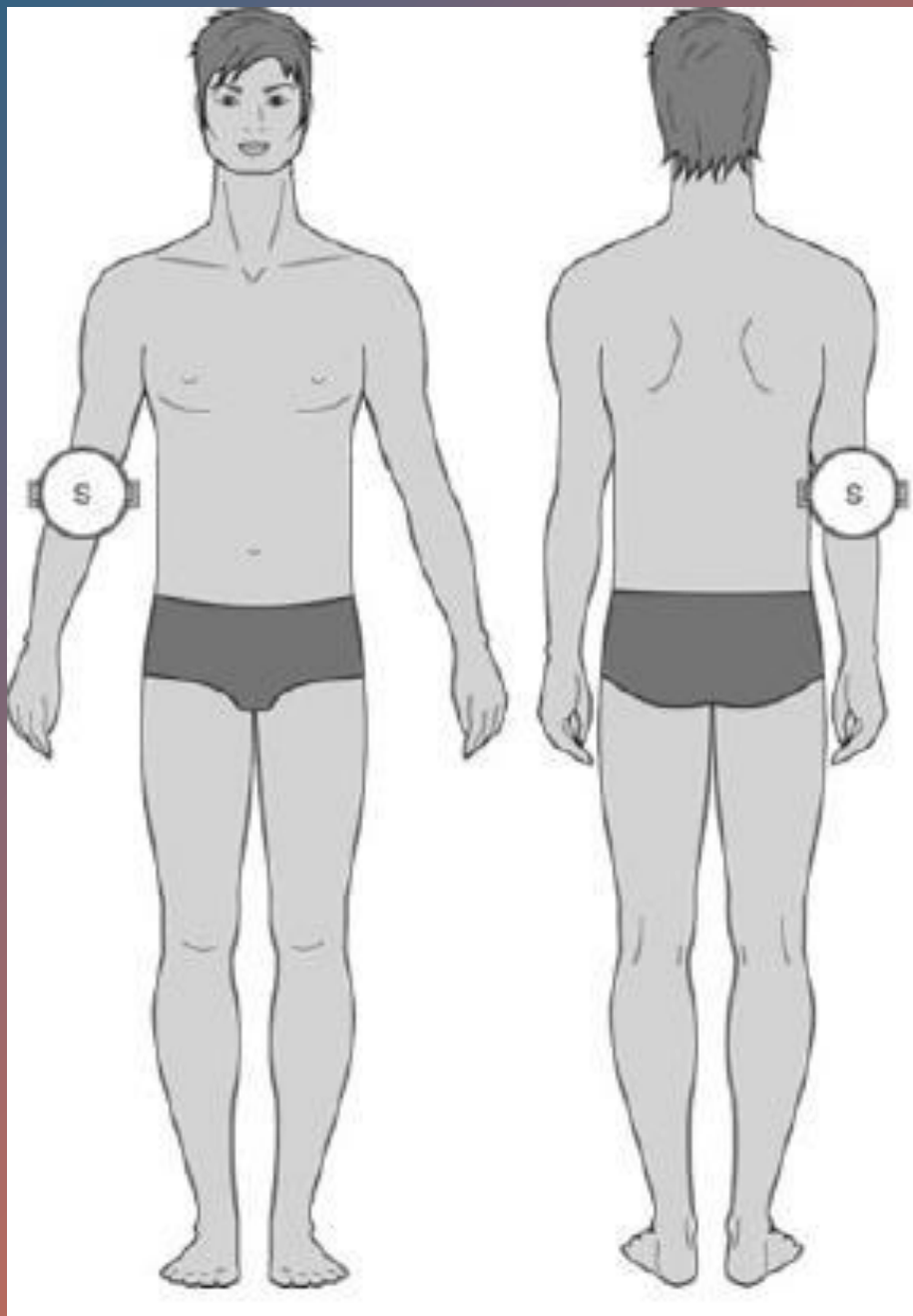

Un caz de artropatie psoriazică

Cursul constă din 15 sesiuni.

Există 1 procedură pe sesiune.

Emitători: LI.

Emitătorii sunt plasați: articulația afectată este plasată între cele 2 LI.

- **Programul nr. 52;**
- Tip câmp magnetic:
LI - nemișcat;
- Inducție: LI – 20 mT;
- Frecvență: LI – 50 Hz;
- Timp de expunere: 10 min.

Hidradenita

Cursul este format din 15-20 de sesiuni.

Există 1 procedură pe sesiune.

Emitători: LI.

Primele 3 sesiuni


Emitătorii sunt plasați: LI pe zona deschiderii cu polaritatea „S” către corp.

- **Programul Nr.68;**
- Tip câmp magnetic:
LI - nemișcat;
- Inductie: LI - 20 mT;
- Frecventa: LI – 50 Hz;
- Timp de expunere: 20 min.

De la a 4-a sesiune până la sfârșitul cursului

Emitătorii sunt plasați: LI pe zona deschiderii cu polaritatea „N” spre corp.

- **Programul Nr.68;**
- Tip câmp magnetic:
LI - nemișcat;
- Inductie: LI – 20 mT,
- Frecventa: LI – 50 Hz;
- Timp de expunere: 20 min.

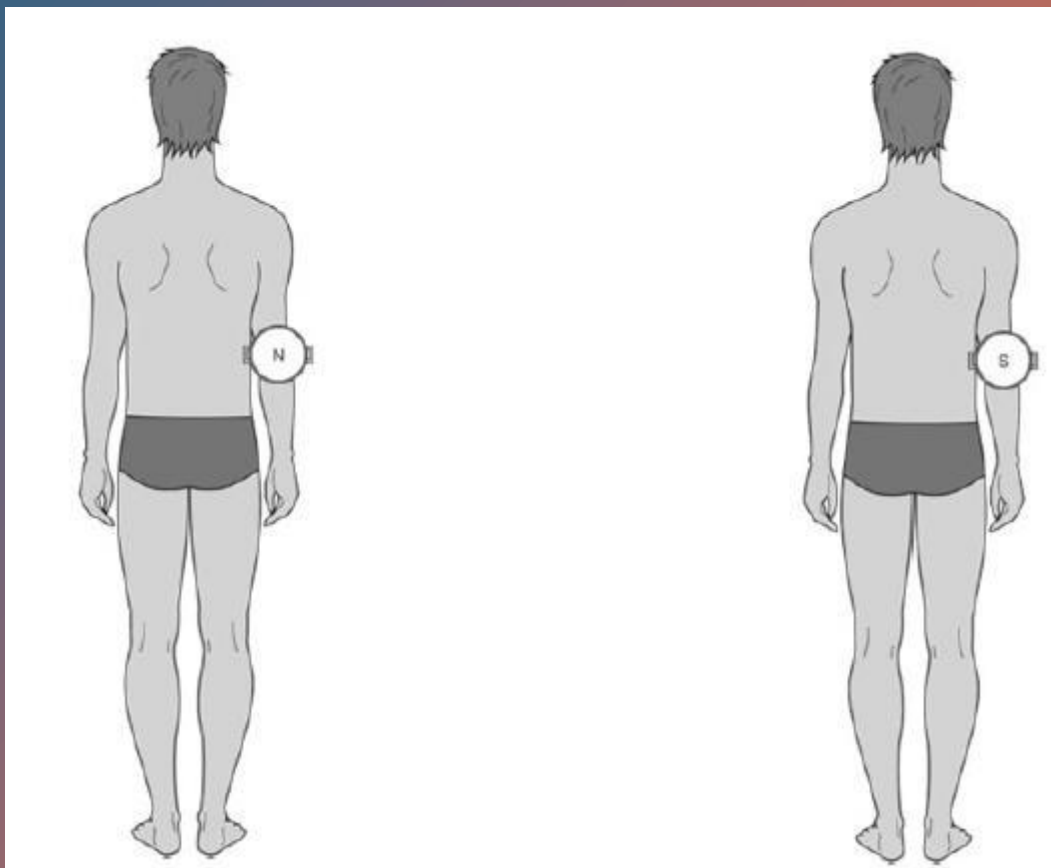

BOLI ALE SISTEMULUI MUSCULO-SCHELETIC ȘI ALE ȚESUTULUI CONJUNCTIV

Artrita guta

Cursul constă din 15 sesiuni.

Datorită faptului că bolile sunt cronice, în scopul metafilaxiei, este necesar să se efectueze cursuri repetate de terapie magnetică pulsată de 2-3 ori pe an.

Există 1 procedură pe sesiune.

Emitători: LI.

Primele 3 sesiuni

Emitătorii sunt plasați: LI pe articulația afectată cu polaritatea „S” către corp.

- **Programul Nr.69;**
- Tip câmp magnetic:

LI - nemișcat;

- Inducție: LI - 10 mT;
- Frecvență: LI - 100 Hz;
- Timp de expunere: 10 min.


De la a 4-a sesiune până la sfârșitul cursului


Emitătorii sunt plasați: LI pe articulația afectată cu polaritatea „N” către corp.

- **Programul Nr.70;**
- Tip câmp magnetic:

LI - nemișcat;

- Inducție: LI - 15 mT;
- Frecvență: LI - 10 Hz;
- Timp de expunere: 20 min.

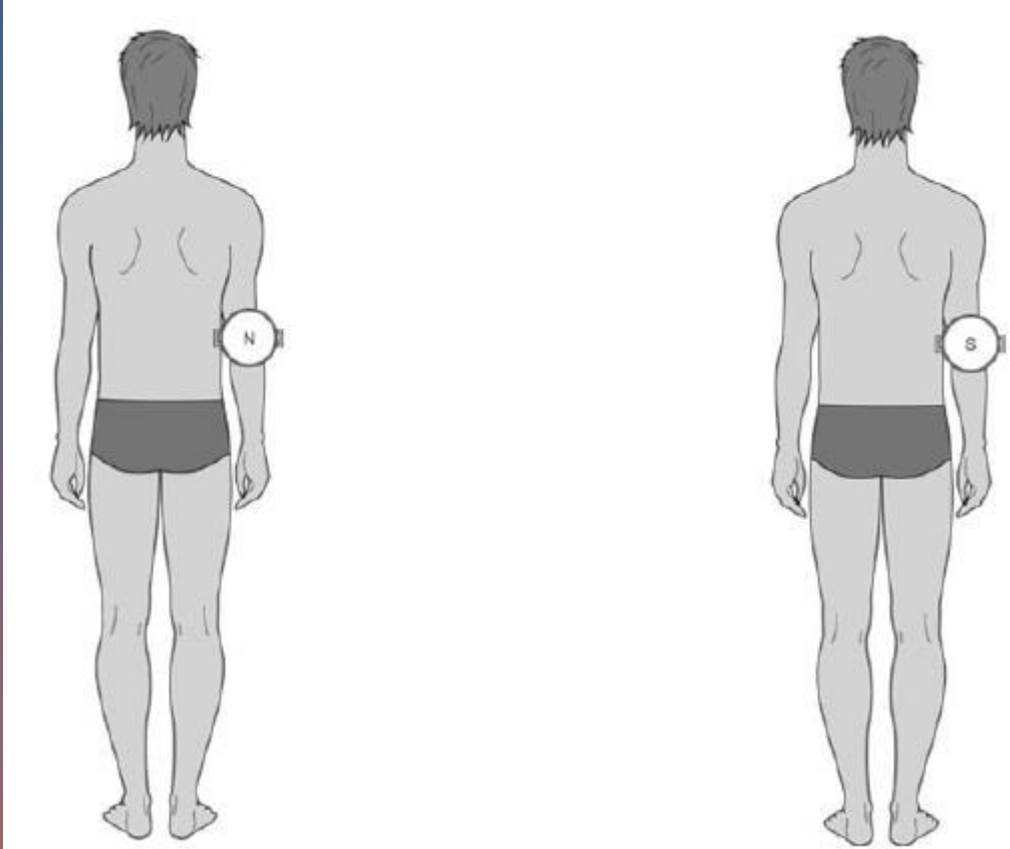

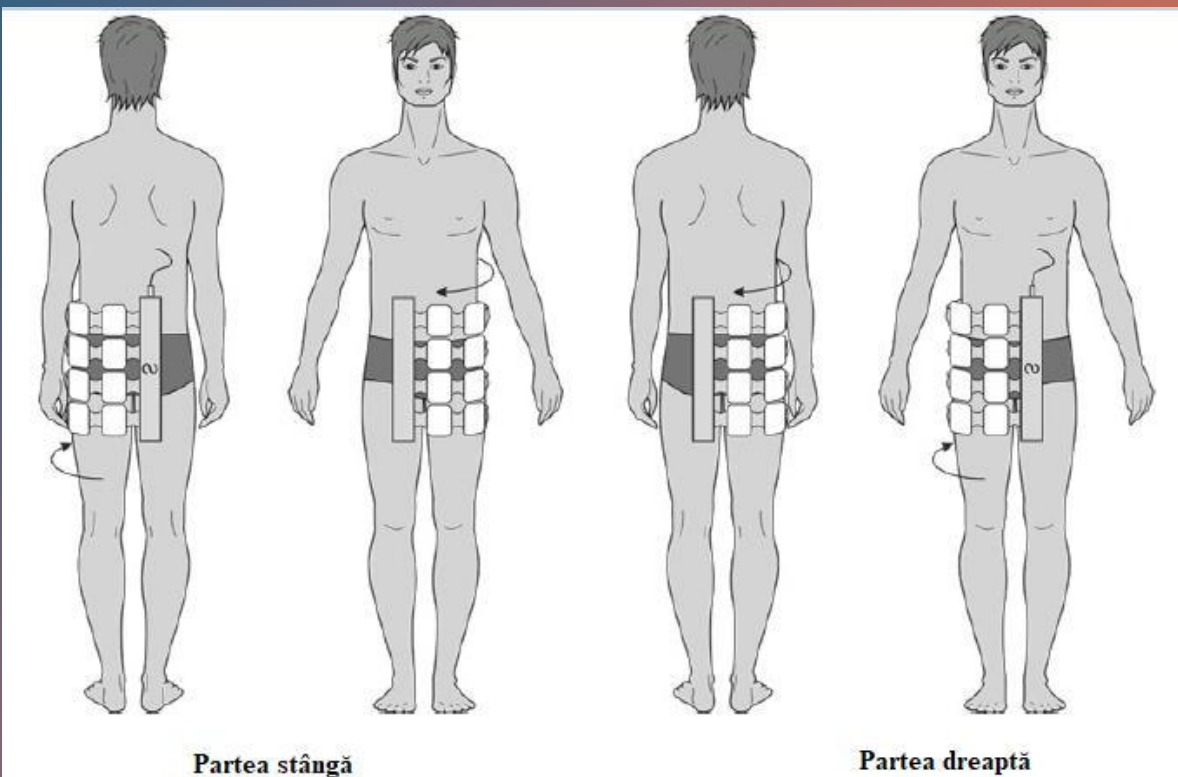

Coxartroza

Cursul constă din 15 sesiuni.

Datorită faptului că bolile sunt cronice, în scopul metafilaxiei, este necesar să se efectueze cursuri repetate de terapie magnetică pulsată de 2-3 ori pe an.

Există 1 procedură pe sesiune.

Emitători: OI.

Primele 5 sesiuni

Emitătorii sunt plasați: OI-ul se înfășoară în jurul articulației afectate.

- **Programul nr.27;**
- Tip câmp magnetic:

OI – alergare de la stânga la dreapta;

- Inductie: 15 mT;
- Frecventa: 100 Hz;
- Timp de expunere: 15 min.

De la sesiunea 6 până la sfârșitul cursului

Emitătorii sunt plasați: OI-ul se înfășoară în jurul articulației afectate.

- **Programul nr.28;**
- Tip câmp magnetic:

OI – alergare de la stânga la dreapta;

- Inductie: 10 mT;
- Frecventa: 25 Hz;
- Timp de expunere: 20 min.

Gonartroza

Cursul constă din 15 sesiuni.

Datorită faptului că bolile sunt cronice, în scopul metafilaxiei, este necesar să se efectueze cursuri repetate de terapie magnetică pulsată de 2-3 ori pe an.

Există 1 procedură pe sesiune.

Emițători: OI.

Primele 5 sesiuni

Emițătorii sunt plasați: OI-ul se înfășoară în jurul articulației afectate.

- **Programul nr.29;**
- Tip câmp magnetic:

OI – alergare de la stânga la dreapta;

- Inductie: 10 mT;
- Frecventa: 100 Hz;
- Timp de expunere: 15 min.


De la sesiunea 6 până la sfârșitul cursului


Emițătorii sunt plasați: OI-ul se înfășoară în jurul articulației afectate.

- **Programul Nr.30;**
- Tip câmp magnetic

OI – alergare de la stânga la dreapta;

- Inductie: 20 mT;
- Frecventa: 10 Hz;
- Timp de expunere: 20 min.

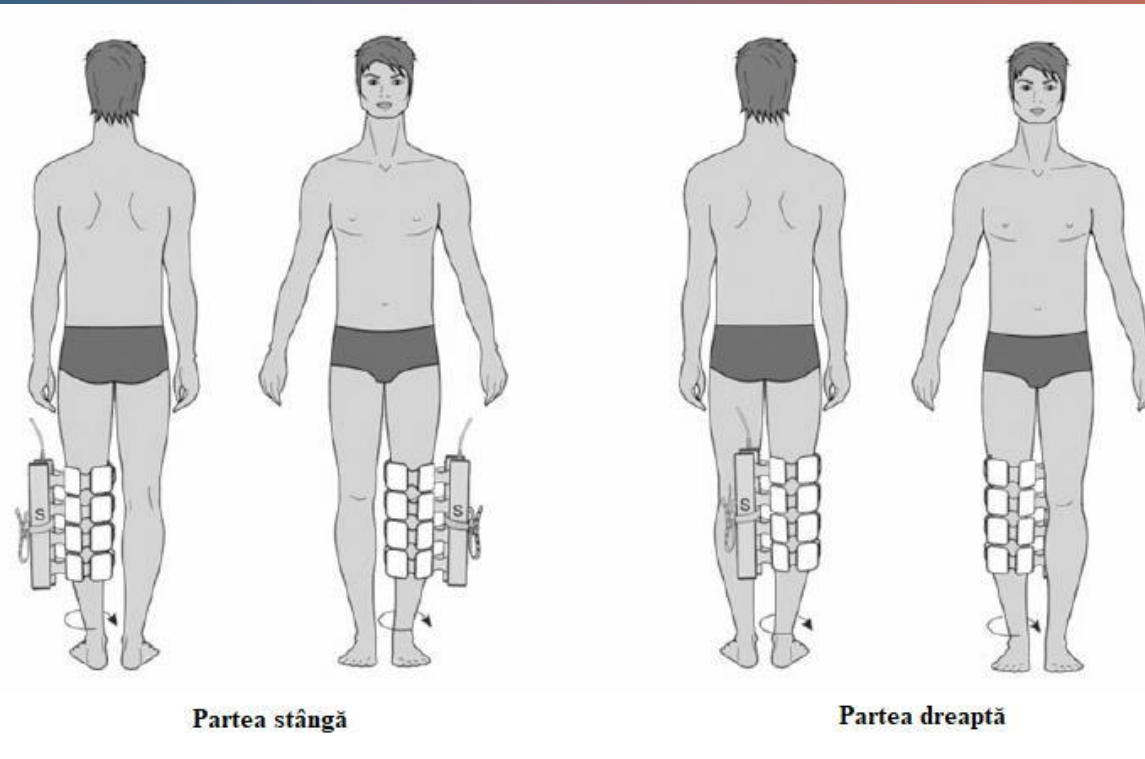

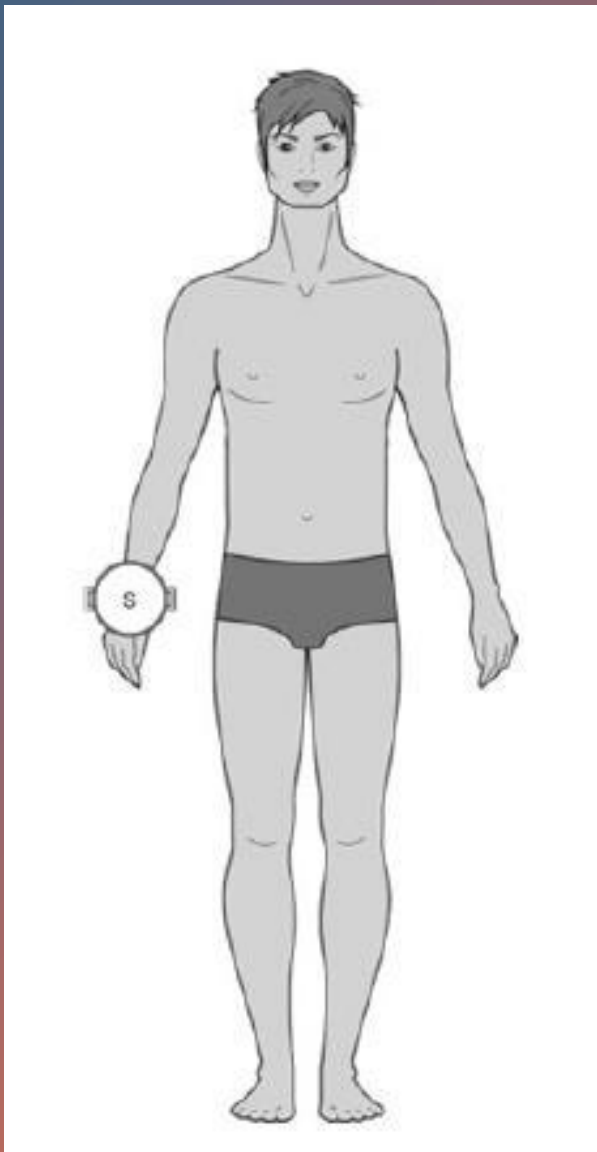

Artroza primei articulații carpometacarpiane

Cursul constă din 15 sesiuni.

Datorită faptului că bolile sunt cronice, în scopul metafilaxiei, este necesar să se efectueze cursuri repetate de terapie magnetică pulsată de 2-3 ori pe an.

Există 1 procedură pe sesiune.

Emițători: LI.

Primele 3 sesiuni


Emițătorii sunt plasați: LI pe articulația afectată cu polaritatea „N” către corp.

- **Programul Nr.71;**
- Tip câmp magnetic:
LI - nemișcat;
- Inducție: LI - 8 mT;
- Frecvență: LI -100 Hz;
- Timp de expunere: 15 min.

De la a 4-a sesiune până la sfârșitul cursului

Emițătorii sunt plasați: LI pe articulația afectată cu polaritatea „N” către corp.

- **Programul Nr.72;**
- Tip câmp magnetic:
LI - nemișcat;
- Inducție: LI - 15 mT;
- Frecvență: LI -10 Hz;
- Timp de expunere: 20 min.

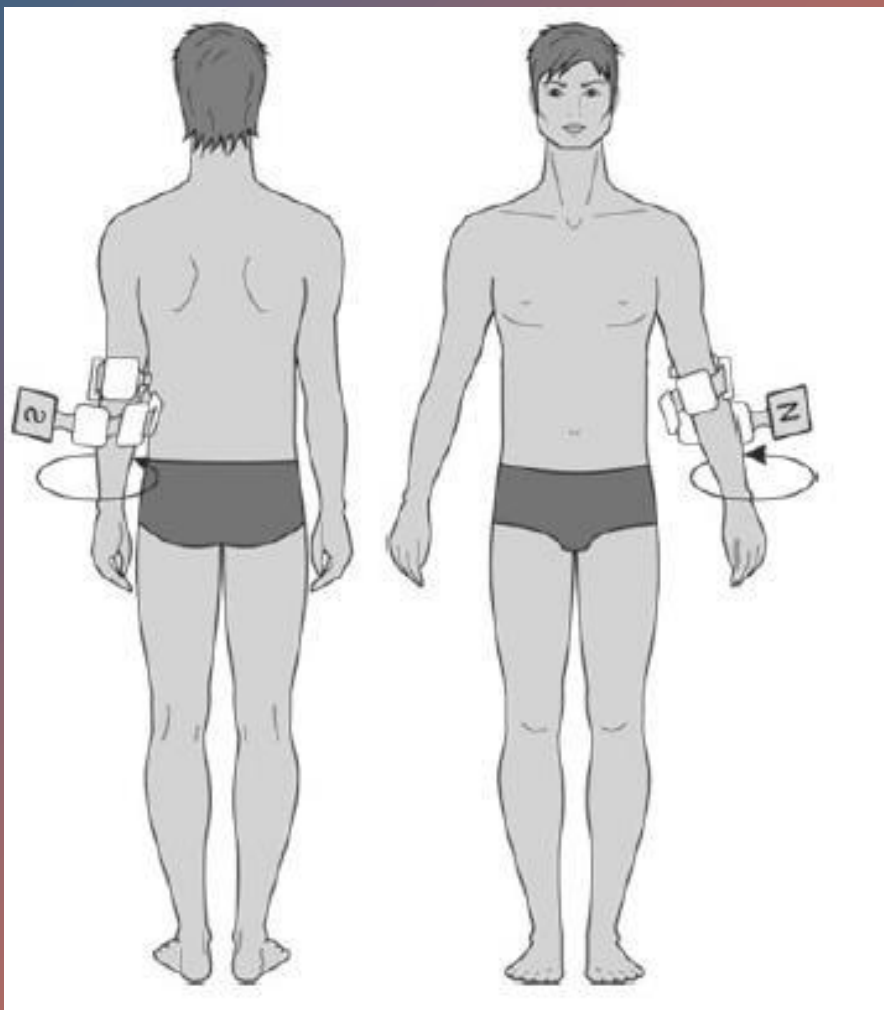

Epicondilita externă („cotul de tenis”) și internă („cotul jucătorului de golf”)

Cursul este format din 15-20 de sesiuni.

Există 1 procedură pe sesiune.

Emitători: LIG.

Emitătorii sunt plasați: LIG-ul este înfășurat în jurul cotului afectat.

- **Programul Nr.31;**
- Tip câmp magnetic:
LIG - rulare în rotație dreaptă;
- Inducție: 20 mT;
- Frecvență: 100 Hz;
- Timp de expunere: 15 min.

Periartrita umărului

Cursul este format din 10 sesiuni.

Există 1 procedură pe sesiune.

Emitători: OI, LI.

Emitătorii sunt plasați: OI pe coloana cervicotoracică cu deplasare către articulația afectată, LI pe articulația afectată.


- **Programul Nr.73;**

- Tip câmp magnetic:

OI - rulează de sus în jos

LI - nemișcat;

- Inducție: OI - 20 mT, LI – 30 mT;
- Frecvență: OI - 100 Hz, LI - 10 Hz;
- Timp de expunere: 15 min.

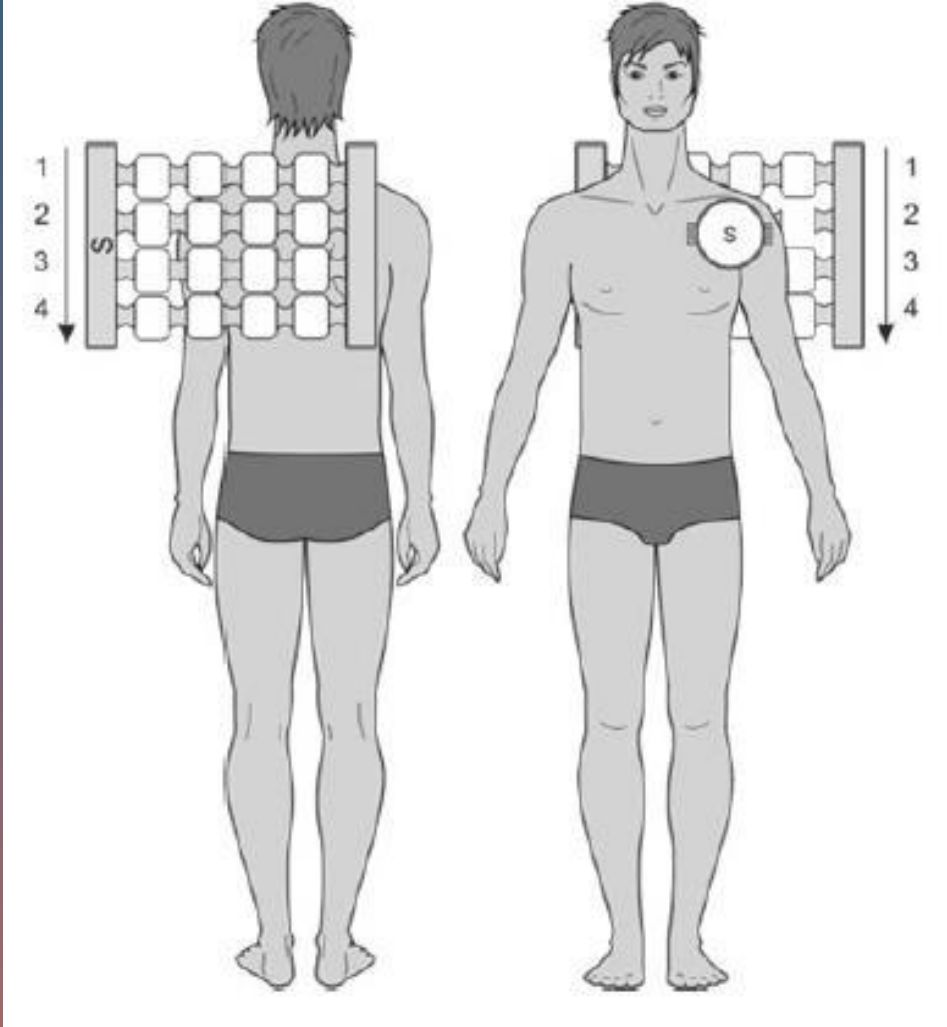

Atrofie osoasă acută trofoneurotică (sindromul Sudeck)

Cursul este format din 10 sesiuni.

Sesiunea include 3 proceduri.

Emitători: OI.

1a procedură

Emitătorii sunt plasați: OI-ul pe zona gâtului și a gulerului.

- **Programul nr.32;**
- Tip câmp magnetic:

OI – alergare de sus în jos;

- Inducție: 20 mT;
- Frecvență: 100 Hz;
- Timp de expunere: 7 min.

a 2-a procedură

Emitătorii sunt plasați: OI se înfășoară în jurul umărului.

- **Programul nr.32;**
- Tip câmp magnetic:

OI – rulează de jos în sus;

- Inducție: 20 mT;
- Frecvență: 100 Hz;
- Timp de expunere: 7 min.




a 3-a procedură

Emitătorii sunt plasați: OI se înfășoară în jurul antebrațului și mâinii.


- **Programul nr.32;**
- Tip câmp magnetic:

OI – rulează de jos în sus;

- Inducție: 20 mT;
- Frecvență: 100 Hz;
- Timp de expunere: 7 min.

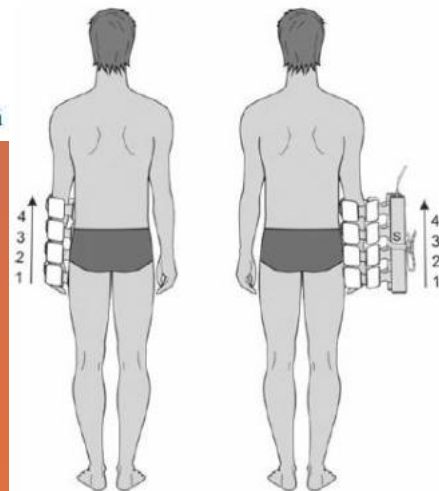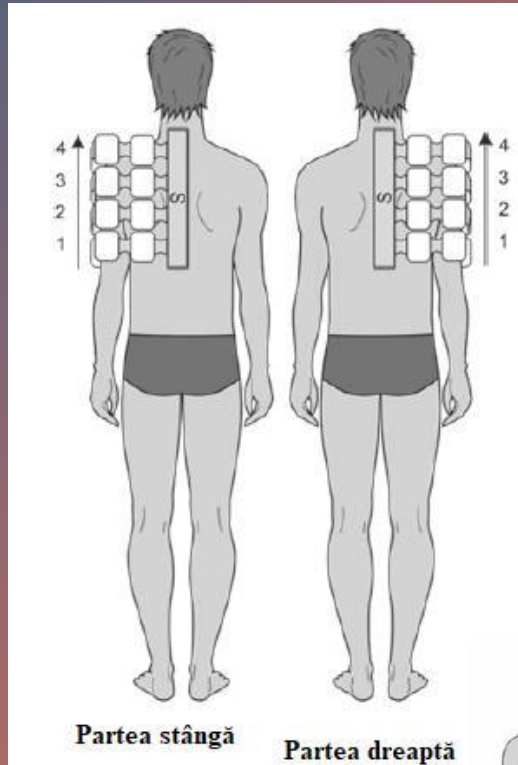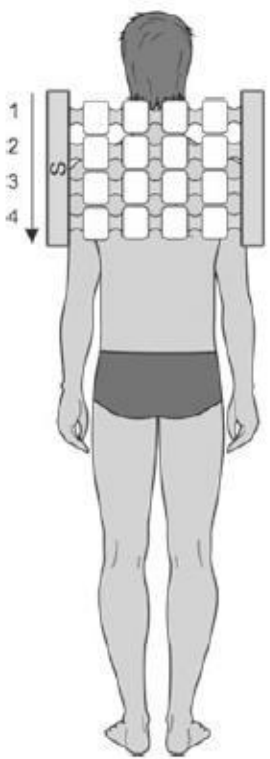

- **Notă:** Aceasta este o complicație severă a unei fracturi a razei în locația tipică (treimea inferioară a antebrăului). Chiar și cu imobilizarea în timp util și corectă, după îndepărtarea acesteia, pacientul prezintă dureri în braț pentru o lungă perioadă de timp, umflare persistentă a degetelor, mâinii și treimii inferioare a antebrăului, degete „sticloase”, reci la atingere și dezvoltă contractură în încheietura mâinii, articulațiile metacarpofalangiene și interfalangiene, pe radiografii - osteoporoză petetică a oaselor mâinii. Baza patologiei, care fără tratament va duce inevitabil la invaliditatea pacientului, este o încălcare gravă a microcirculației în brațul afectat, cu o oprire completă a fluxului sanguin în parte a capilarelor și extinderea lor pasivă, o schimbare a acidului. -echilibrul bazei spre acidoza, ceea ce duce la proliferarea activă a fibroblastelor și sinteza tropocolagenului. Rezultatul procesului este degenerarea cicatricială rapidă a țesutului foarte diferențiat al aparatului de alunecare al mâinii și imobilizarea acestuia.
Particularitatea tratamentului patologiei este că utilizarea căldurii în toate formele este exclusă categoric (sfatul de a-ți „aburi mâna” este o greșală de neiertat în astfel de cazuri!)
- Nici măcar nu poți mișca forțat degetele afectate cu un sănătos. mână. Câmpul magnetic ca factor terapeutic în aceste cazuri afectează proprietățile reologice ale sângelui, are efecte analgezice, antiinflamatoare, stimulative trofice, antiedematoase, normalizează microcirculația și fluxul sanguin venos. Spre deosebire de influențele electromagnetice de altă natură (SW, UHF, UHF, inductotermie), MP nu are un efect termic, care este fundamental important în acest caz. Mai mult, utilizarea sa poate fi începută foarte devreme, imediat după ce tencuiala s-a „întărit”. S-a demonstrat că în astfel de cazuri, după utilizarea MP, umflarea a dispărut și funcția mâinii a fost restabilită la astfel de pacienți cu 2-3 săptămâni mai devreme.

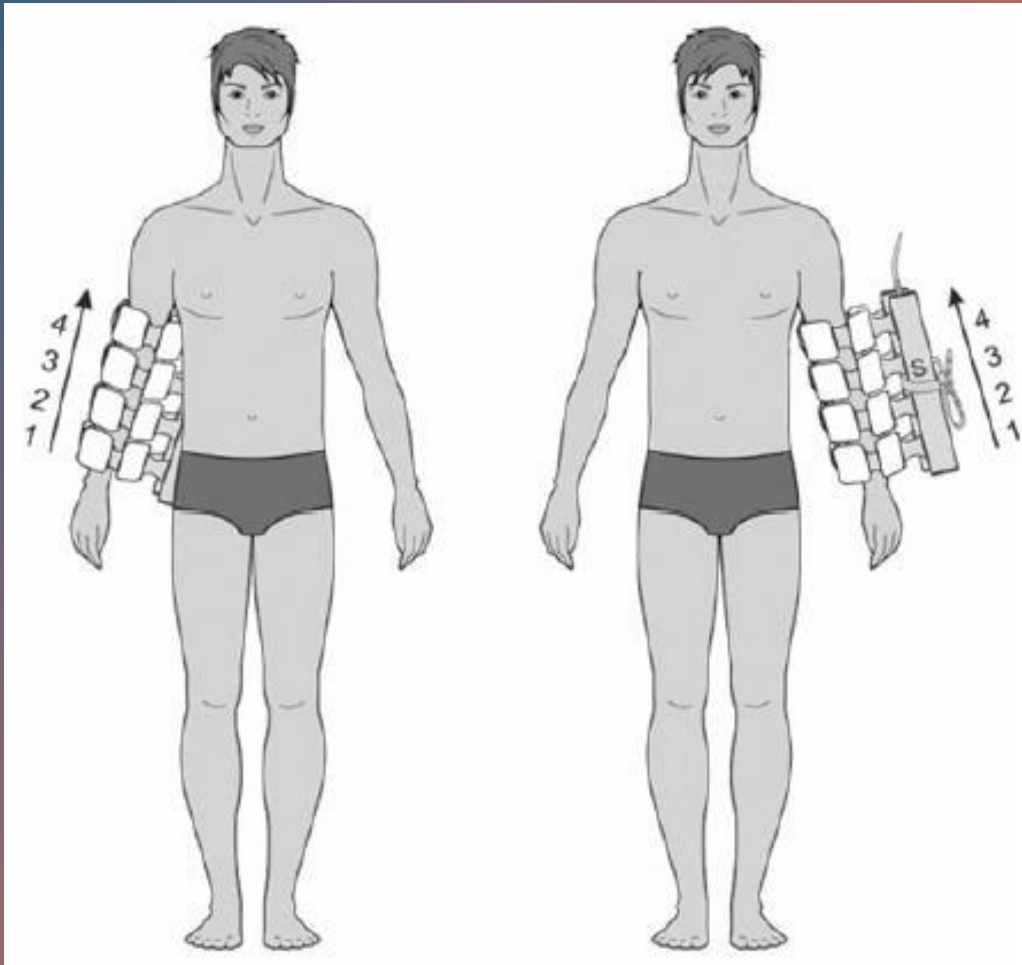

Paratenonită (tendovaginită crepitantă a antebrăului)

Cursul constă din 15 sesiuni.


Există 1 procedură pe sesiune.

Emitători: OI.

Emitătorii sunt plasați:

Membrul afectat este învelit în OI.

- **Programul Nr.33;**
- Tip câmp magnetic:
OI – rulează de jos în sus;
- Inducție: 25 mT;
- Frecvență: 75 Hz;
- Timp de expunere: 20 min.

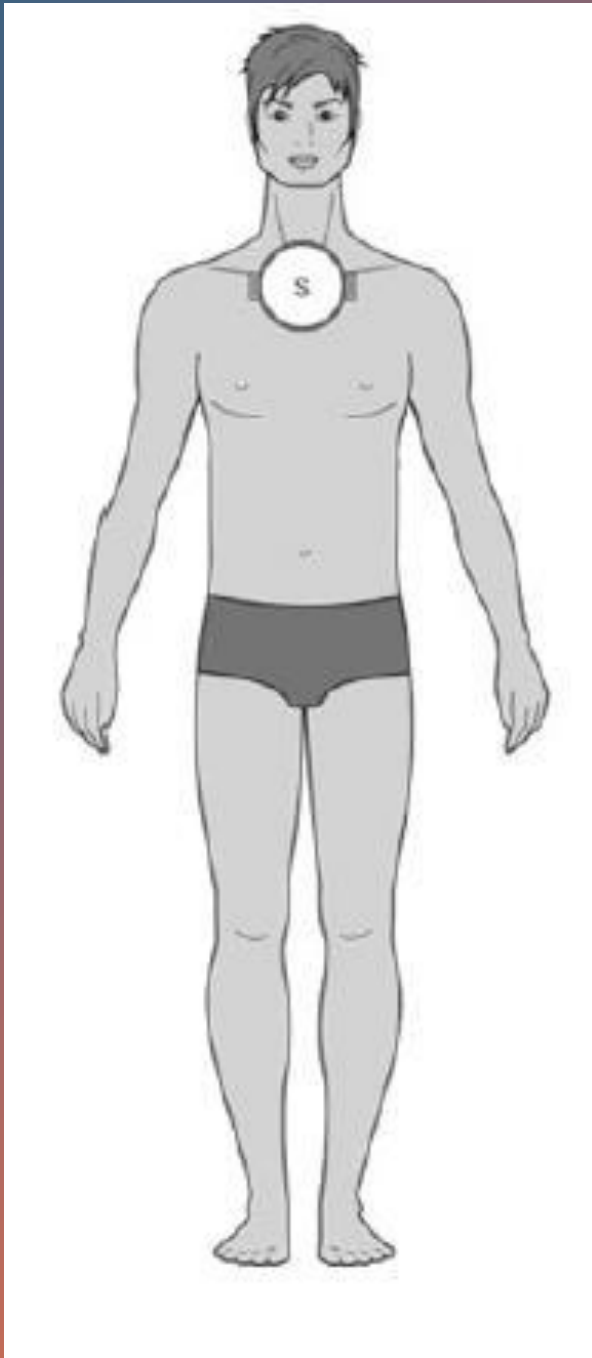

Sindromul Tietze (inflamație aseptică a cartilajelor costale în zona în care coasta se atașează de stern, cel mai adesea coastele II-IV cu îngroșare dureroasă)

Cursul constă din 15 sesiuni.

Există 1 procedură pe sesiune.

Emitători: LI.

Emitătorii sunt plasați: LI pe zona afectată.

- **Programul Nr.74;**
- Tip câmp magnetic:
LI - nemișcat;
- Inducție: 35 mT;
- Frecvență: 50 Hz;
- Timp de expunere: 15 min.

Osteocondropatii (boala Kohler, boala Kienbock, boala Perthes, boala Schlatter, boala Koenig).


Cursul este format din 10 sesiuni.

Există 1 procedură pe sesiune.

Emițători: OI.

Emițătorii sunt plasați: OI-ul pe zona afectată (acoperit sau învelit în funcție de zona afectată).

- **Programul nr. 34;**
- Tip câmp magnetic:
OI – alergare de la dreapta la stânga;
- Inductie: 15 mT;
- Frecventa: 100 Hz;
- Timp de expunere: 15 min.

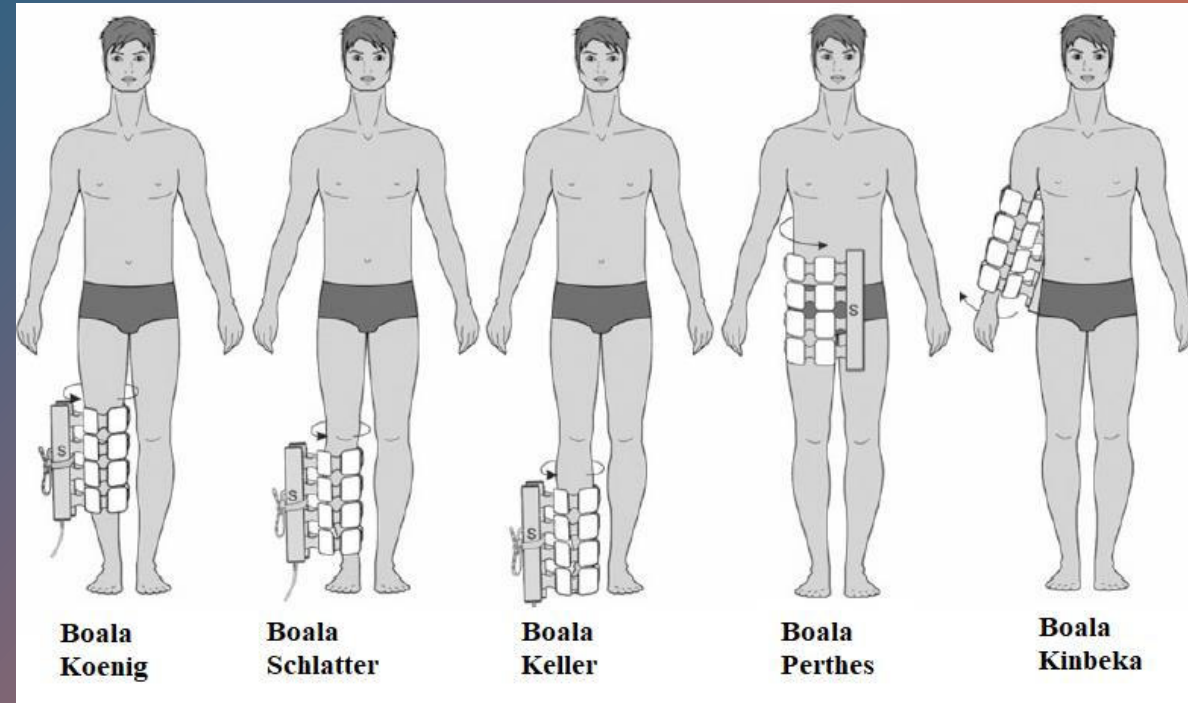


Spondilita anchilozantă (boala lui Bechterew)

În aceste cazuri, terapia magnetică este eficientă în stadiile incipiente (I-II) ale bolii. Dacă procesul este foarte activ (VSH, teste reumatismale), nu se efectuează magnetoterapia.

Cursul constă din 20 de sesiuni.

Există 2 proceduri într-o sesiune.

Emițători: OI.

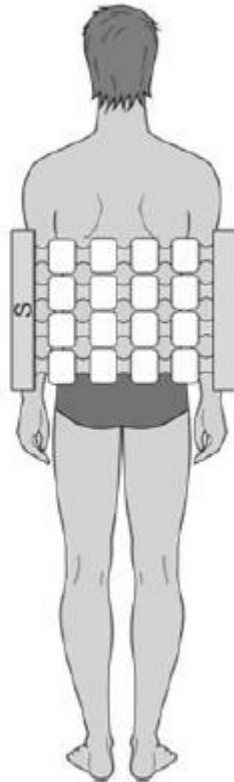

1a procedură

Emițătorii sunt plasați: OI pe coloana cervicotoracică.

- **Programul nr.11;**
- Tip câmp magnetic:

OI – nemișcat;

- Inductie: 6 mT;
- Frecventa: 16 Hz;
- Timp de expunere: 10 min.


a 2-a procedură

Emițătorii sunt plasați: OI pe coloana lombosacrală.

- **Programul nr.11;**
- Tip câmp magnetic:

OI – nemișcat;

- Inductie: 6 mT;
- Frecventa: 16 Hz;
- Timp de expunere: 10 min.

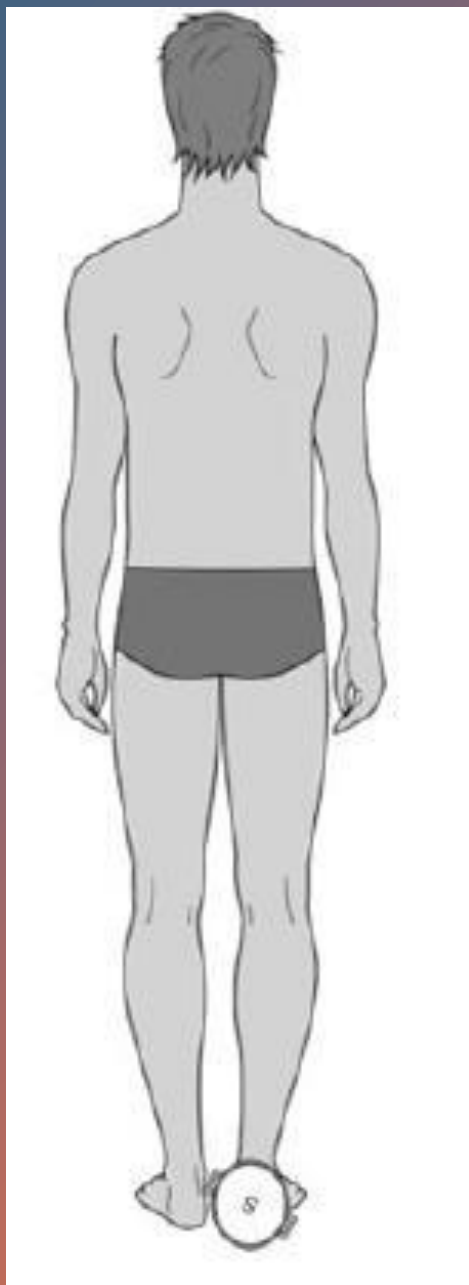

Periostoza călcâială (fasciita plantară), pinten calcanean


Cursul este format din 15-20 de sesiuni.

Există 1 procedură pe sesiune.

Emitători: LI.

Emitătorii sunt plasați: 1 pe călcâiul afectat sau 2 LI pe părțile laterale ale osului călcâiului afectat.

- **Programul nr. 76;**
- Tip câmp magnetic:
LI - nemișcat;
- Inductie: 30 mT;
- Frecventa: 10 Hz;
- Timp de expunere: 20 min.

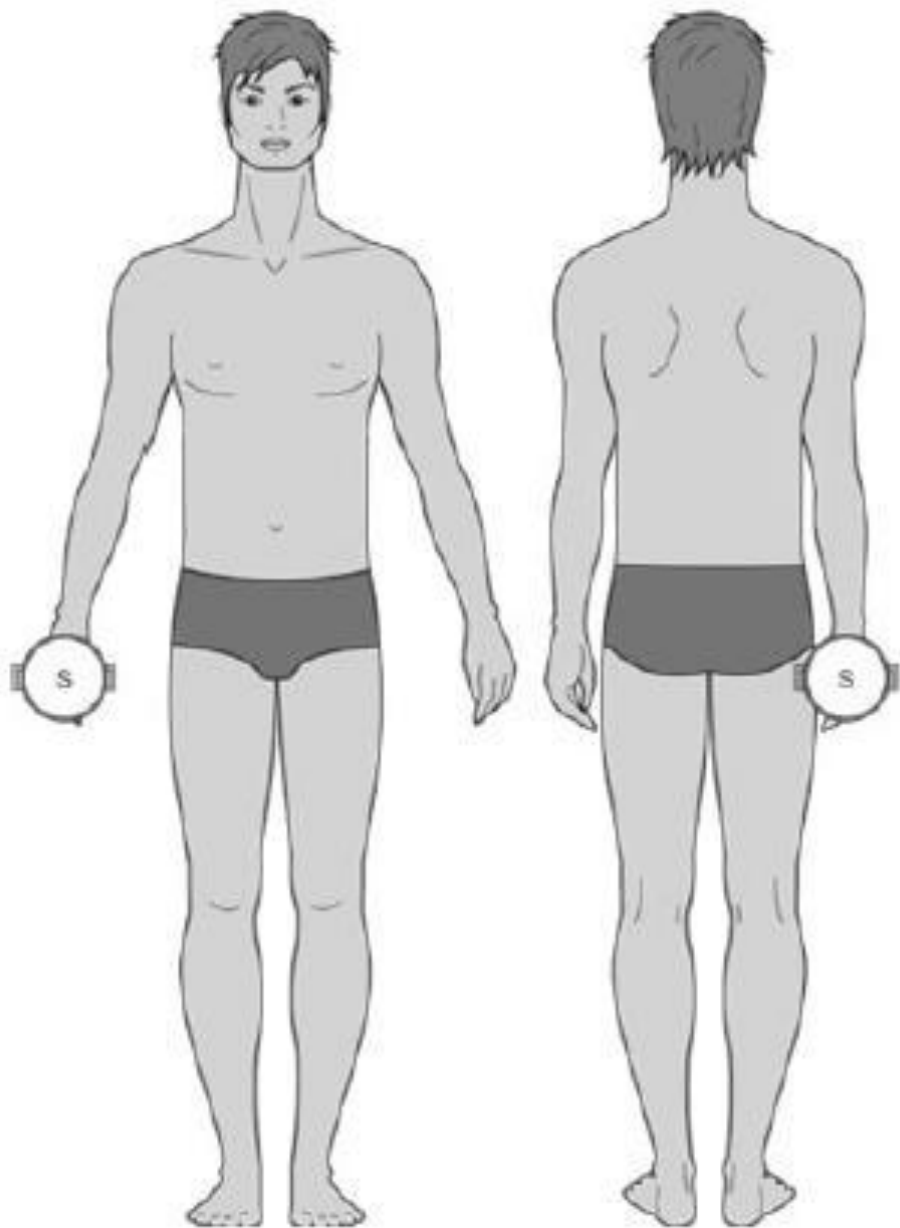

Contractura articulară (contractura lui Dupuytren)

Cursul este format din 15-20 de sesiuni.

Există 1 procedură pe sesiune.

Emitători: 2 LI.

Emitătoarele sunt plasate: 2 LI pe părțile laterale ale mâinii afectate.

- **Programul nr. 65;**
- Tip câmp magnetic:
LI - nemișcat;
- Inductie: 35 mT;
- Frecventa: 50 Hz;
- Timp de expunere: 20 min.


Artrita reumatoida (stadiul exudativ)

Cursul este format din 15-20 de sesiuni.

O sedinta include 2 sau 3 proceduri, in functie de numarul de articulatii afectate.

Emițători: OI, LIG.

Emițătorii sunt plasați: OI este pe zona de proiecție a glandelor suprarenale, iar LIG este înfășurat în jurul articulației afectate.

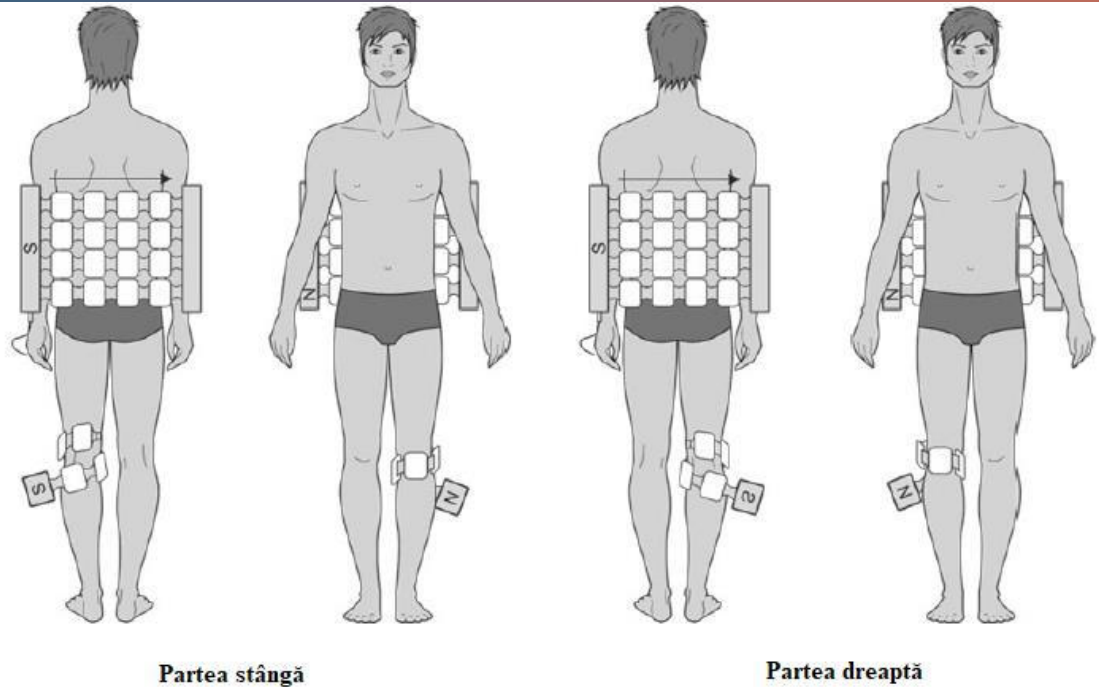


1a procedură

- **Programul nr.36;**
- Tip câmp magnetic:
OI - rulează în rotație dreaptă,
LIG - nemișcat;
- Inductie: OI - 10 mT, LIG - 6 mT;
- Frecvență: OI - 100 Hz, LIG - 16Hz;
- Timp de expunere: 10 min.

A doua procedură și a treia procedură (dacă numărul articulațiilor afectate

mai mult de 2)

- **Programul Nr.36;**
- Tip câmp magnetic:
OI - alergare în dextrorotație nii,
LIG - nemișcat;
- Inductie: OI - 10 mT, LIG - 6 mT;
- Frecvență: OI - 100 Hz, LIG - 16 Hz;
- Timp de expunere: 10 min.

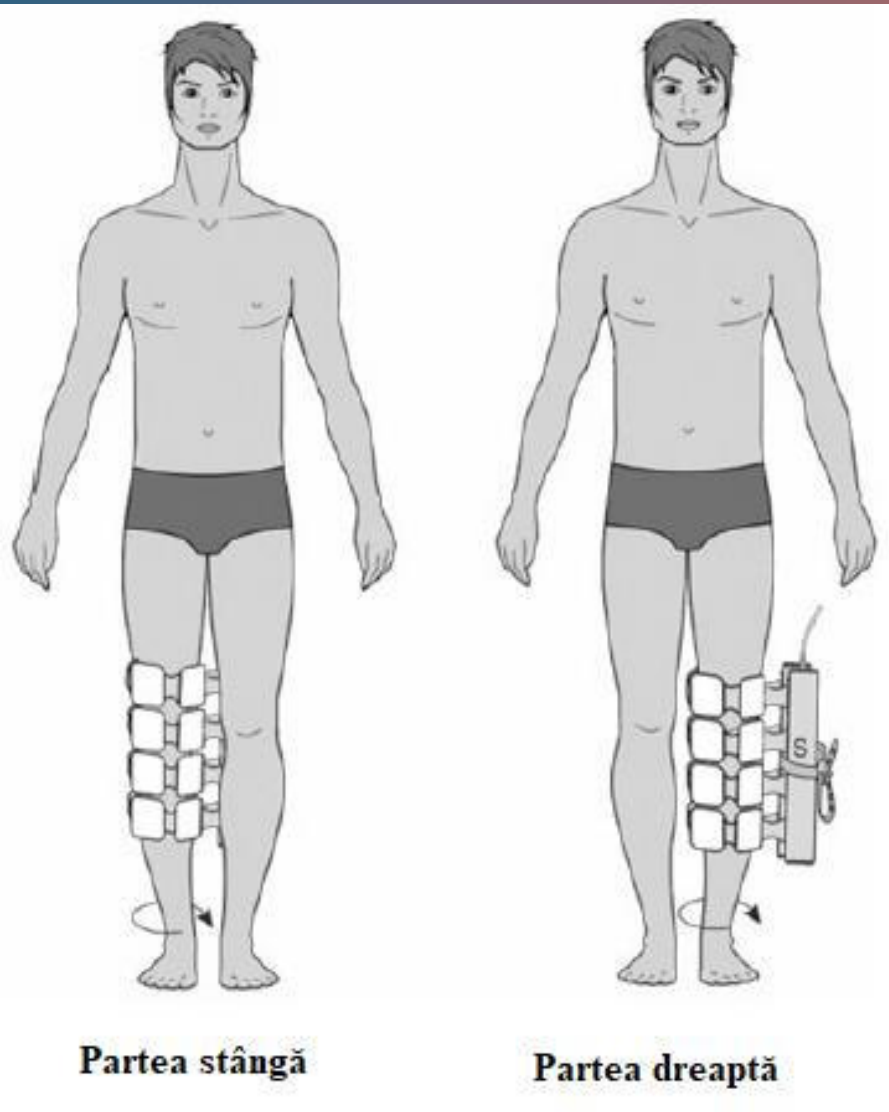

Osteoartrita

Cursul constă din 15 sesiuni.

Există 1 procedură pe sesiune.

Emițători: OI.


Emițătorii sunt plasați: OI-ul se înfășoară în jurul articulației afectate.

În caz de sindrom sever și sinovite

- **Programul nr. 37;**
- Tip câmp magnetic:
OI - rulare in rotatie dreapta;
- Inductie: 10 mT;
- Frecventa: 100 Hz;
- Timp de expunere: 10 min.

Fara lichid sinovial

- **Programul Nr.38;**
- Tip câmp magnetic:
OI - rulare in rotatie dreapta;
- Inductie: 25 mT;
- Frecventa: 10 Hz;
- Timp de expunere: 15 min.

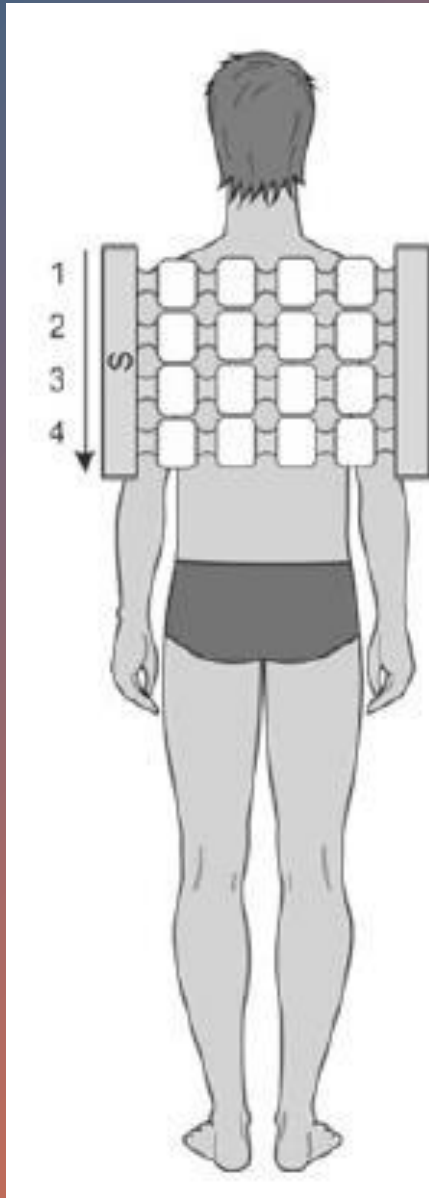

Osteocondroza coloanei vertebrale

Cursul este format din 12-15 sesiuni.

Există 1 procedură pe sesiune.

Emitători: OI.

Emitătorii sunt plasați: OI pe partea afectată a coloanei vertebrale.

Primele 3 sesiuni

- **Programul Nr.39;**
- Tip câmp magnetic:
OI – alergare de sus în jos;
- Inductie: 10 mT;
- Frecventa: 3 Hz;
- Timp de expunere: 20 min.

De la a 4-a sesiune până la sfârșitul cursului

- **Programu Nr.40;**
- Tip câmp magnetic:
OI – alergare de sus în jos;
- Inductie: 15 mT;
- Frecventa: 10 Hz;
- Timp de expunere: 20 min.

Sindromul simpatic cervical posterior

Durere de natură arsură, lacrimală, strângătoare în ceafă, baza gâtului, peretele toracic anterior, umăr și regiuni interscapulare sau în zone care coincid cu topografia trunchiului simpatic. Durerea se intensifică noaptea, în special dimineața, și poate apărea pe fondul unor tulburări senzoriale, cum ar fi „jachetă pe jumătate”

cu mâneci scurte.” Cel mai adesea, sindromul se dezvoltă pe fondul osteocondrozei cervicale.

Cursul constă din 15 sesiuni.

Există 2 proceduri într-o sesiune.

Emițători: OI.

1a procedură

Emițătorii sunt plasați: OI pe coloana cervicotoracică.

- **Programul Nr.41;**
- Tip câmp magnetic:

OI – alergare de sus în jos;

- Inductie: 2 mT;
- Frecventa: 100 Hz;
- Timp de expunere: 10 min.


a 2-a procedură


Emițătorii sunt plasați: OI-ul este înfășurat în jurul membrului dureros.

- **Programul Nr.42;**
- Tip câmp magnetic:

OI - rulare în rotație dreaptă;

- Inductie: 20 mT;
- Frecventa: 100 Hz;
- Timp de expunere: 10 min.

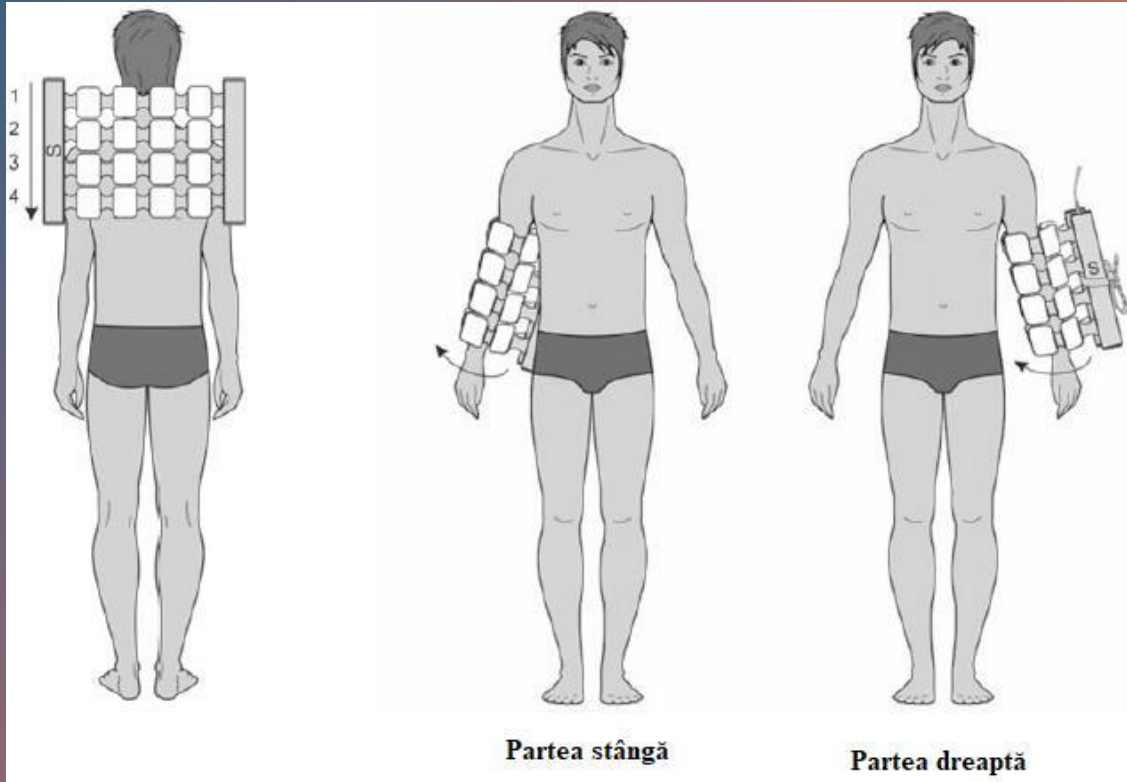

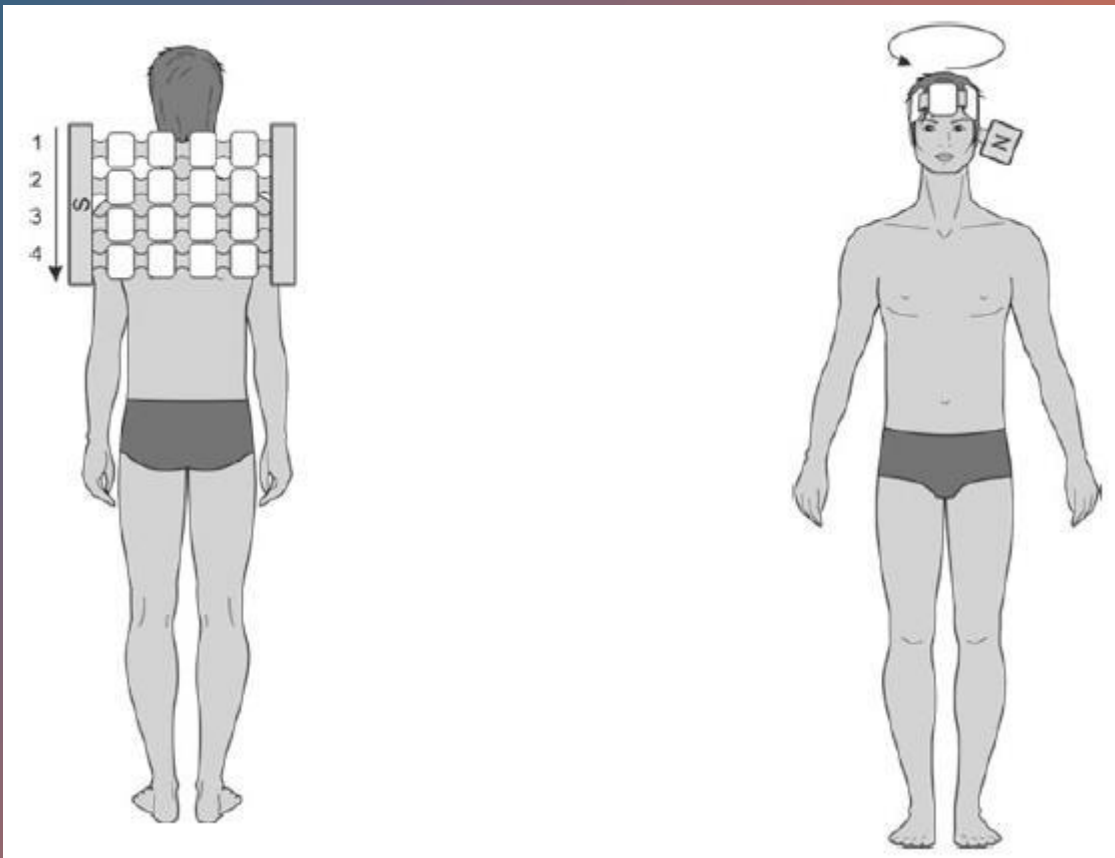

Sindromul vertebrobazilar (sindromul de compresie reflex al arterei vertebrale)

O combinație frecventă de simptome cerebrale și vegetativ-iritante care apar din iritația plexului simpatic al arterei vertebrale, deformarea peretelui acestuia sau modificări ale lumenului (hernie de disc, spondilită deformatoare, tensiune în mușchii gâtului în sindroamele musculo-tonice). , etc.)

Cursul constă din 15 sesiuni. Repetați cursul în 1,5-2 luni.

Există 2 proceduri într-o sesiune.

Emițători: OI, LIG.

Primele cinci sesiuni

1a procedură


Emițătorii sunt plasați: OI pe coloana cervicotoracică.

- **Programul Nr.43;**
- Tip câmp magnetic:
OI – alergare de sus în jos;
- Inducție: 10 mT;
- Frecvență: 100 Hz;
- Timp de expunere: 20 min.

a 2-a procedură

Emițătoarele sunt plasate: LIG-ul întorc capetele.

- **Programul Nr.44;**
- Tip câmp magnetic:
LIG - rulare în rotație dreaptă;
- Inducție: 10 mT,
- Frecvență: 12 Hz;
- Timp de expunere: 10 min.

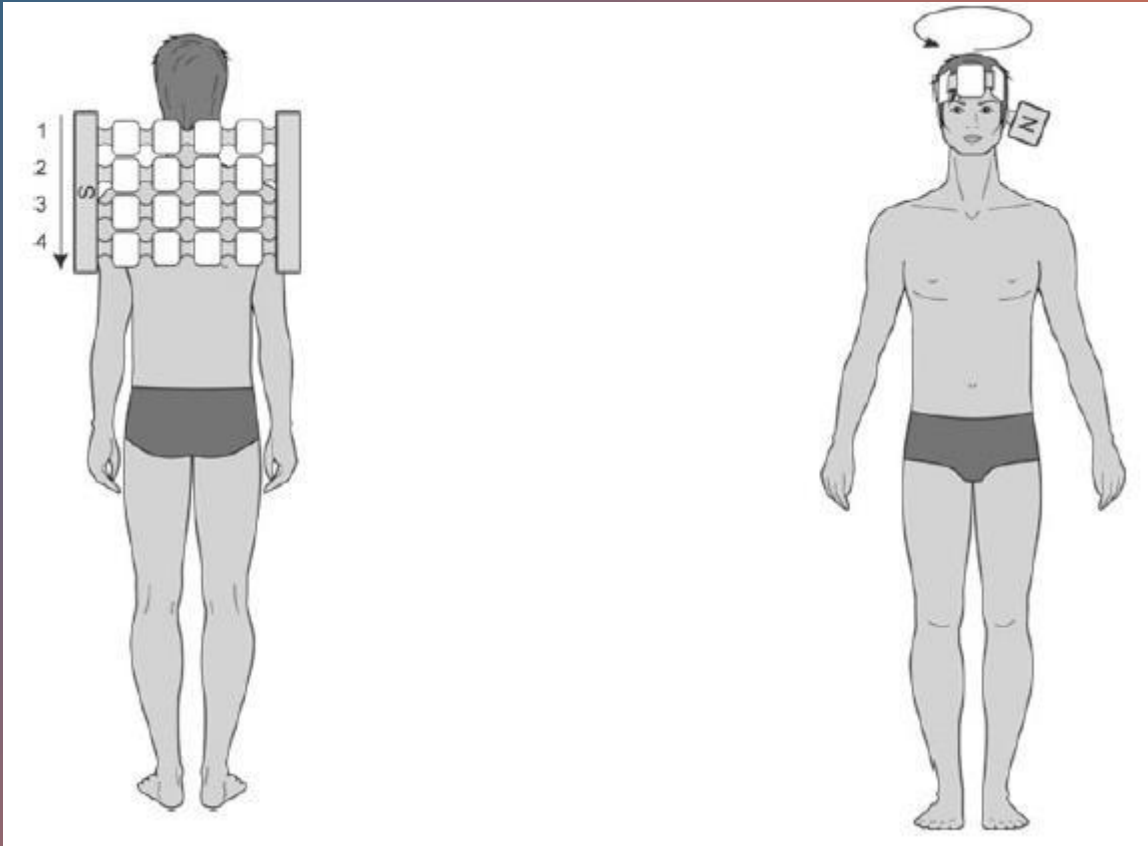

De la a șasea sesiune până la sfârșitul cursului 1a procedură


Emițătorii sunt plasați: OI pe coloana cervicotoracică.

- **Programul Nr.45;**
- Tip câmp magnetic:
OI – alergare de sus în jos;
- Inductie: 25 mT;
- Frecventa: 10 Hz;
- Timp de expunere: 20 min.

a 2-a procedură

Emițătoarele sunt plasate: LIG-ul întorc capetele.

- **Programul Nr.46;**
- Tip câmp magnetic:
LIG - rulare in rotatie dreapta;
- Inductie: 15 mT;
- Frecventa: 12 Hz;
- Timp de expunere: 10 min.

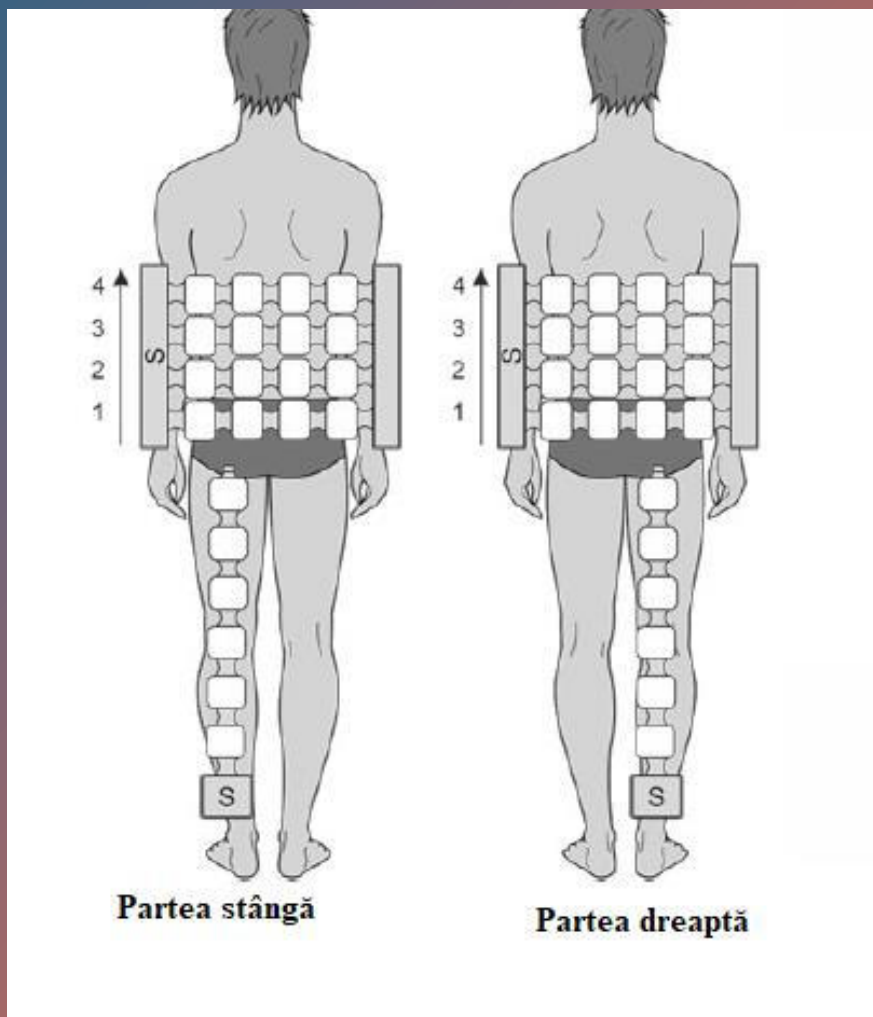

Sindromul de mielopatie vertebrogenă

Dezvoltarea pe fondul osteocondrozei lombare, slăbiciune și amorteală la nivelul membrelor inferioare, atrofie (de obicei unilaterală) a mușchilor gambei, steppage („picior plesnit”), tulburări trofice, incontinență urinară periodică și claudicație intermitentă uneori.

Cursul constă din 15 sesiuni.

Repetăți cursul în 1,5-2 luni.

Există 1 procedură într-o sesiune.

Emitători: OI, LIG.

Emitătorii sunt plasați: OI pe coloana vertebrală lombosacrală, LIG pe coapsă și picior inferior.

- **Programul nr. 47;**
- Tip câmp magnetic:
OI – rulează de jos în sus;
LIG - rulează de jos în sus;
- Inductie: 20 mT;
- Frecvența: 100 Hz;
- Timp de expunere: 15 min.

În caz de pareză

Cursul constă din 15 sesiuni. Repetați cursul în 1,5-2 luni.
Sesiunea include 3 proceduri. Emițători: OI.

1a procedură.

Emițătorii sunt plasați: OI-ul pe coloana vertebrală lombosacrală.

- **Programul nr. 10;**
- Tipul câmpului magnetic:
OI – nemișcat;
- Inductie: 6 mT;
- Frecvență: 16 Hz;
- Timp de expunere: 15 min.

a 2-a procedură


Emițătorii sunt plasați: OI-ul este înfășurat în jurul coapsei membrului rănit.


- **Programul nr. 10;**
- Tipul câmpului magnetic:
OI – nemișcat;
- Inductie: 6 mT;
- Frecvență: 16 Hz;
- Timp de expunere: 15 min.

a 3-a procedură

Emițătorii sunt plasați: OI-ul este înfășurat în jurul tibiei membrului rănit.

- **Programul nr. 10;**
- Tipul câmpului magnetic:
OI – nemișcat;
- Inductie: 6 mT;
- Frecvență: 16 Hz;
- Timp de expunere: 15 min.

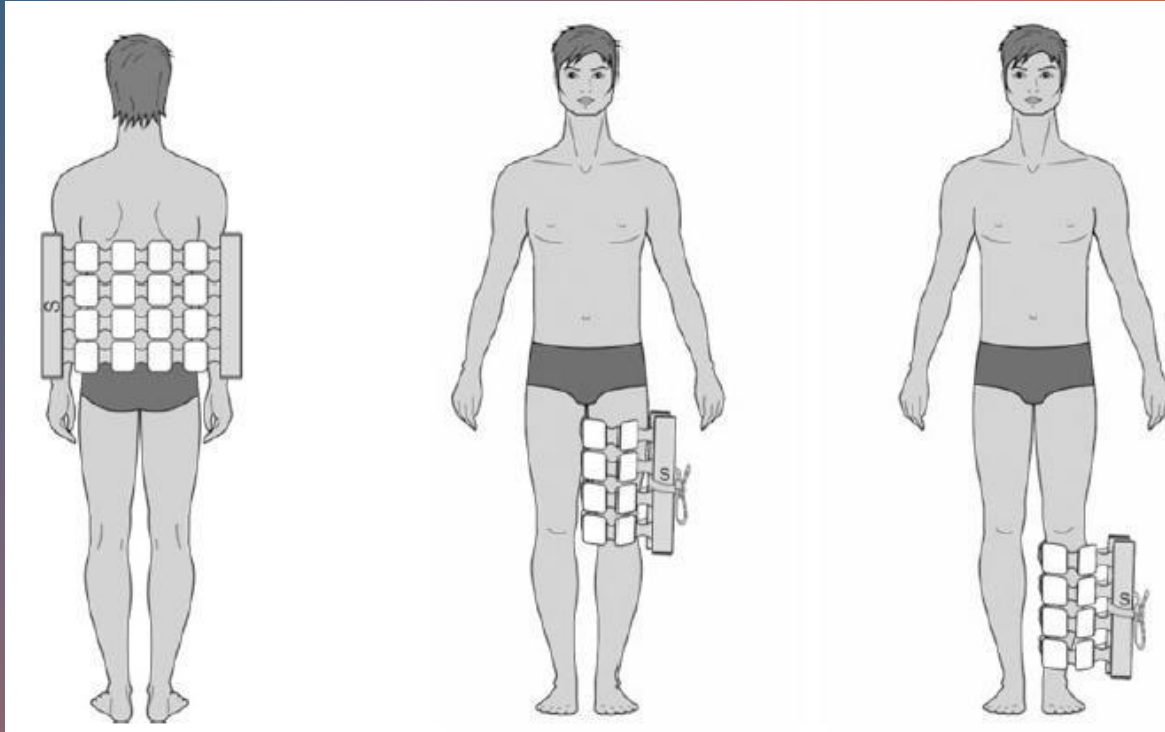

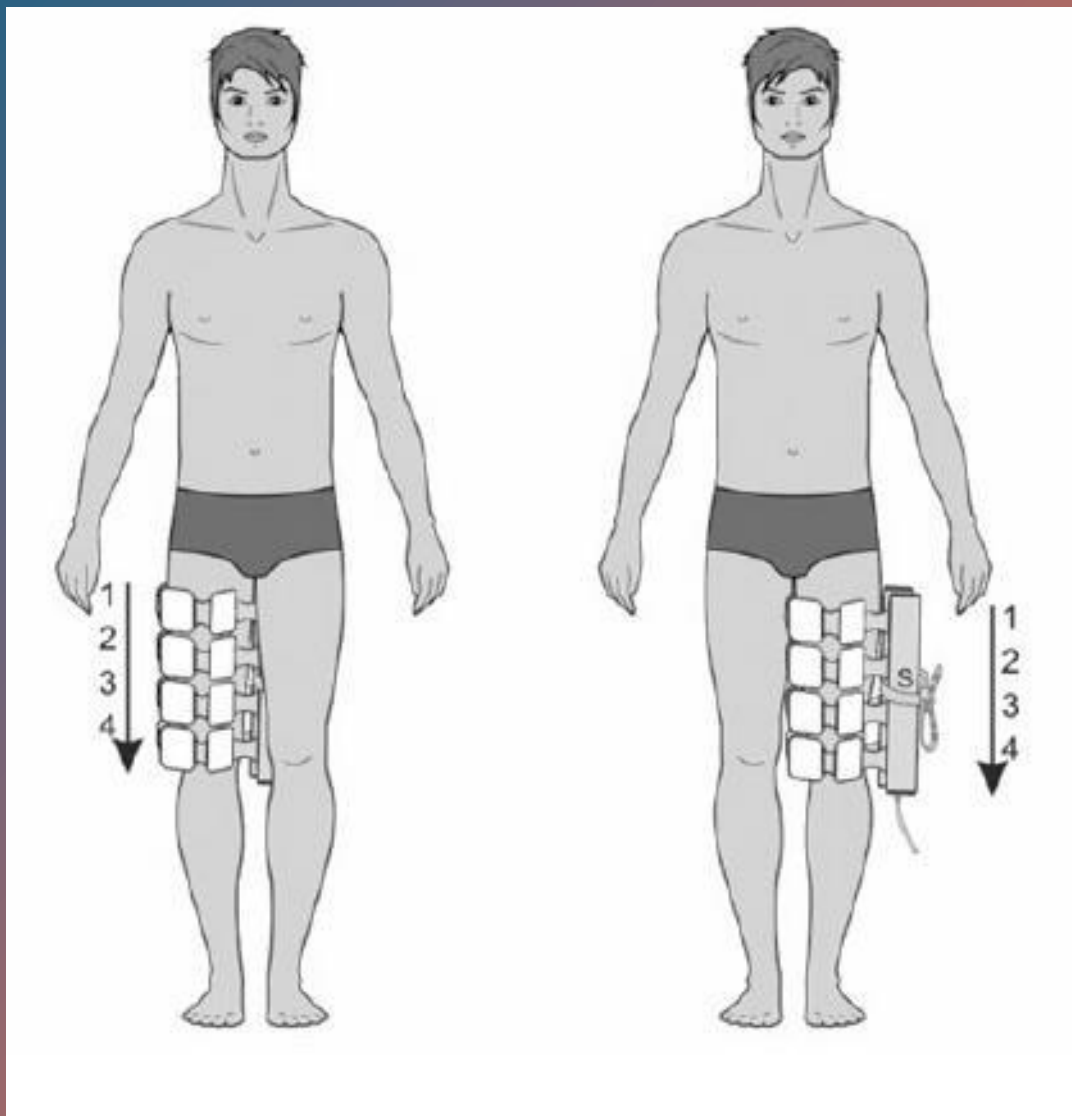

Osteoporoza cu fractura patologica si fara fractura patologica

Cursul constă din 15 sesiuni. Repetați cursul în 1,5-2 luni.


Există 1 procedură pe sesiune.

Emitători: OI.

Emitătoarele sunt plasate: OI înfășoară membrul deteriorate

Programul nr. 48;

- Tip câmp magnetic:
OI – alergare de sus în jos;
- Inducție: 10 mT;
- Frecvență: 8 Hz;
- Timp de expunere: 20 min.

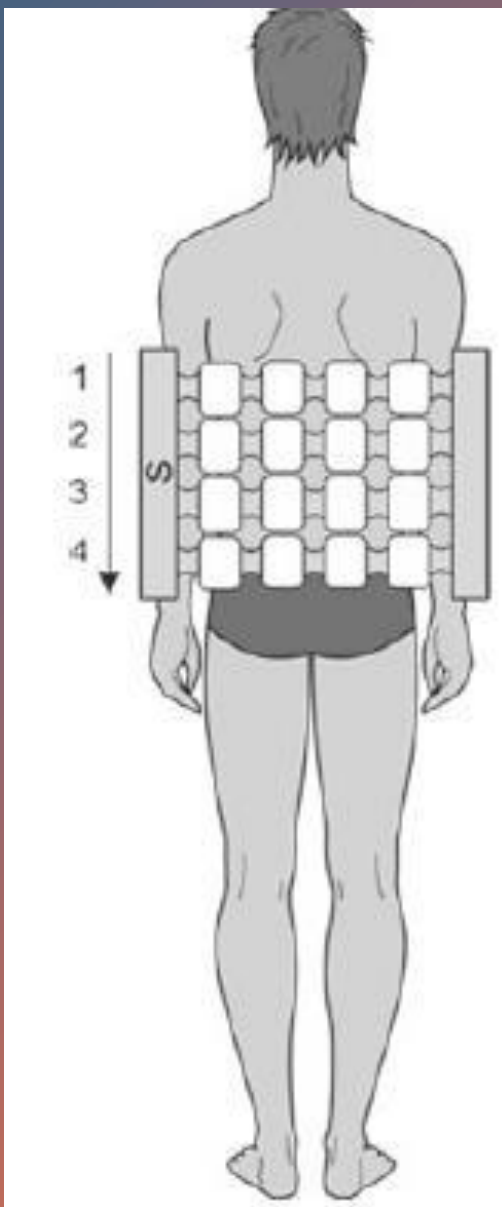

BOLI ALE SISTEMULUI GENITO-URINAR

Nefrită tubulointerstițială cronică (leziuni tubulointerstițiale și tubulare cauzate de medicamente și metale grele)


Cursul este format din 10-15 sesiuni.

Există 1 procedură pe sesiune.

Emitători: OI.

Emitătorii sunt plasați: OI pe zona rinichilor

- **Programul Nr.49;**
- Tip câmp magnetic:
OI – alergare de sus în jos;
- Inducție: 25 mT;
- Frecvență: 75 Hz;
- Timp de expunere: 15 min.

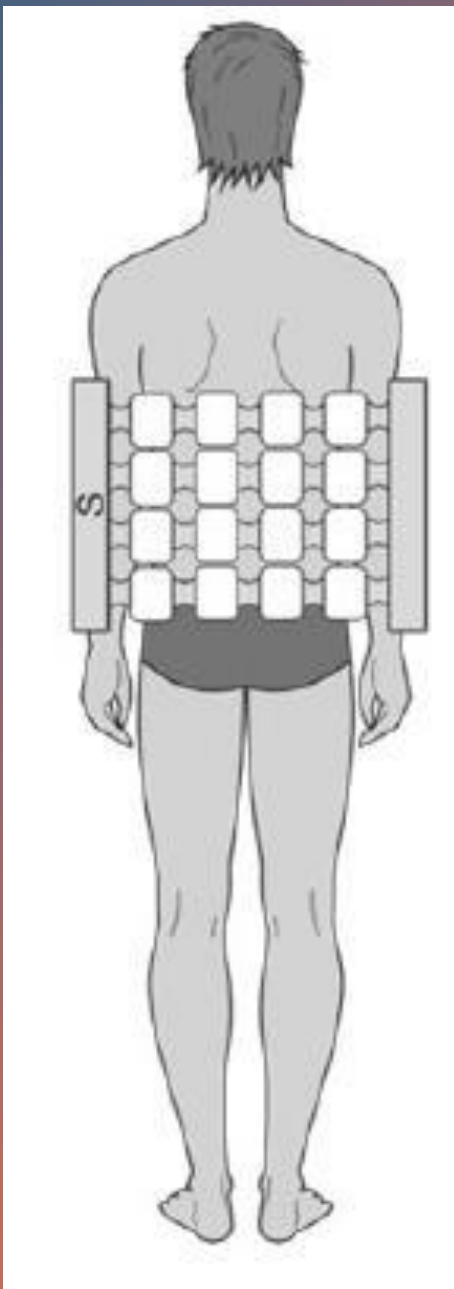

În faza de remisie


Cursul este format din 10-15 sesiuni.

Există 1 procedură pe sesiune.

Emitători: OI.

Emitătorii sunt plasați: OI pe zona rinichilor.

- **Programul nr.15;**
- Tip câmp magnetic:
OI – nemișcat;
- Inductie: 6 mT;
- Frecventa: 16 Hz;
- Timp de expunere: 15 min.

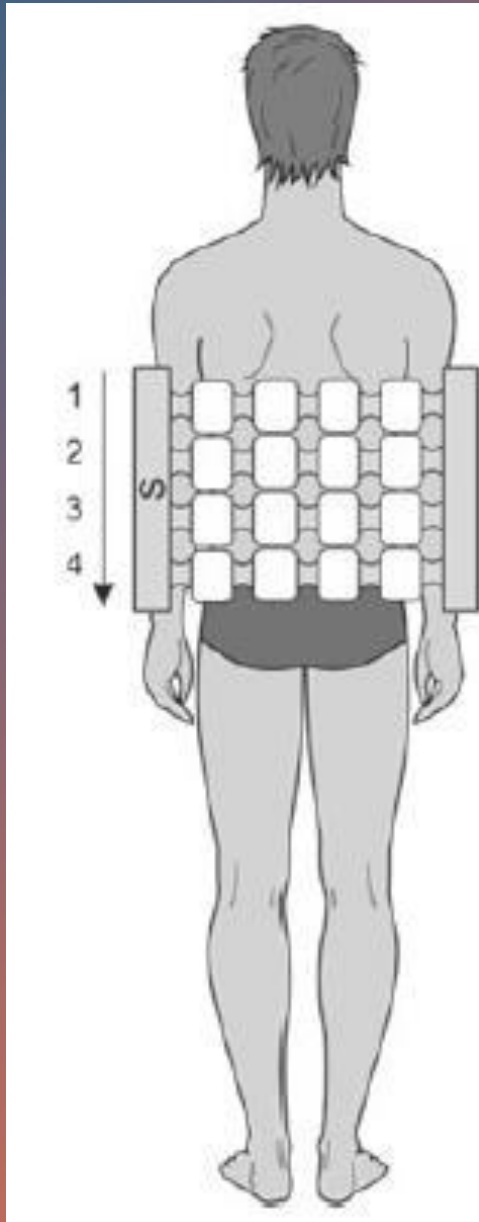

Pietre la rinichi și ureter


Cursul constă din 12 sesiuni.

Există 1 procedură pe sesiune.

Emitători: OI.

Emitătorii sunt plasați: OI pe zona rinichilor.

- **Programul Nr.49;**
- Tip câmp magnetic:
OI – alergare de sus în jos;
- Inductie: 25 mT;
- Frecventa: 75 Hz;
- Timp de expunere: 15 min.

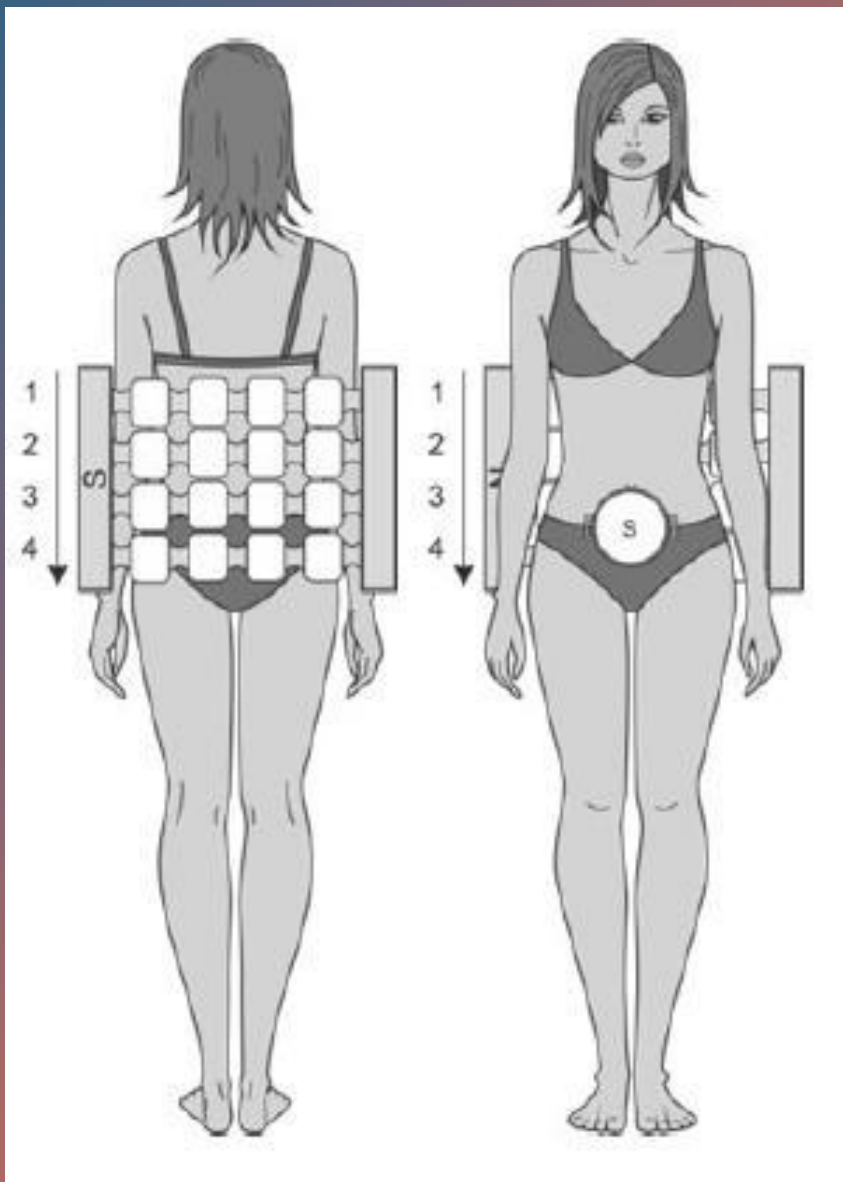

Cistita


Cursul constă din 12 sesiuni.

Există 1 procedură pe sesiune.

Emitători: OI, LI.

Emitătorii sunt plasați: OI pe zona rinichilor, pe zona de proiecție a vezicii urinare.

- **Programul Nr.77;**
- Tip câmp magnetic:
OI - rulează de sus în jos,
LI - nemișcat;
- Inducție: I – 15 mT, LI – 25 mT;
- Frecvență: OI – 100 Hz. LI – 50;
- Timp de expunere: 20 min.

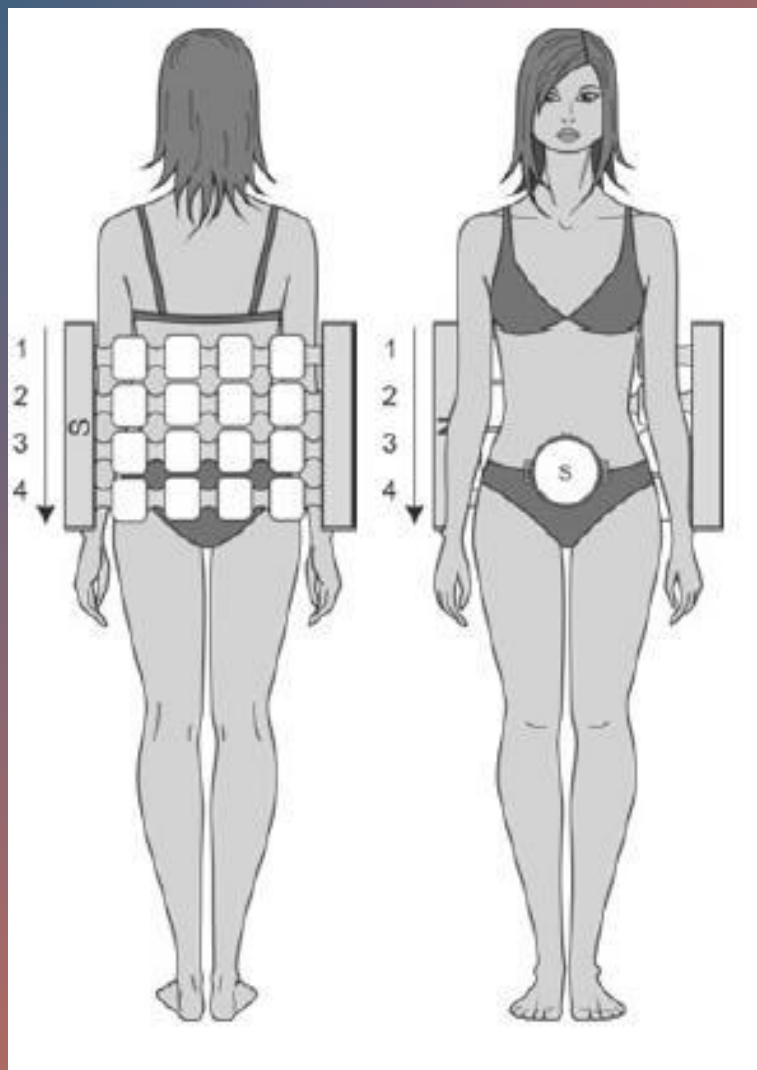

Salpingita si ooforita


Cursul este format din 10-12 sesiuni.

Există 1 procedură pe sesiune.

Emițători: OI, LI.

Emițătorii sunt plasați: OI pe zona rinichilor, pe regiunea lombosacrală, LI pe zona de proiecție a ovarelor.

- **Programul Nr.78;**
- Tip câmp magnetic:
OI - rulează de sus în jos,
LI - nemișcat;
- Inducție: I – 25 mT, LI – 20 mT;
- Frecvență: OI – 100 Hz, LI – 50;
- Timp de expunere: 20 min.

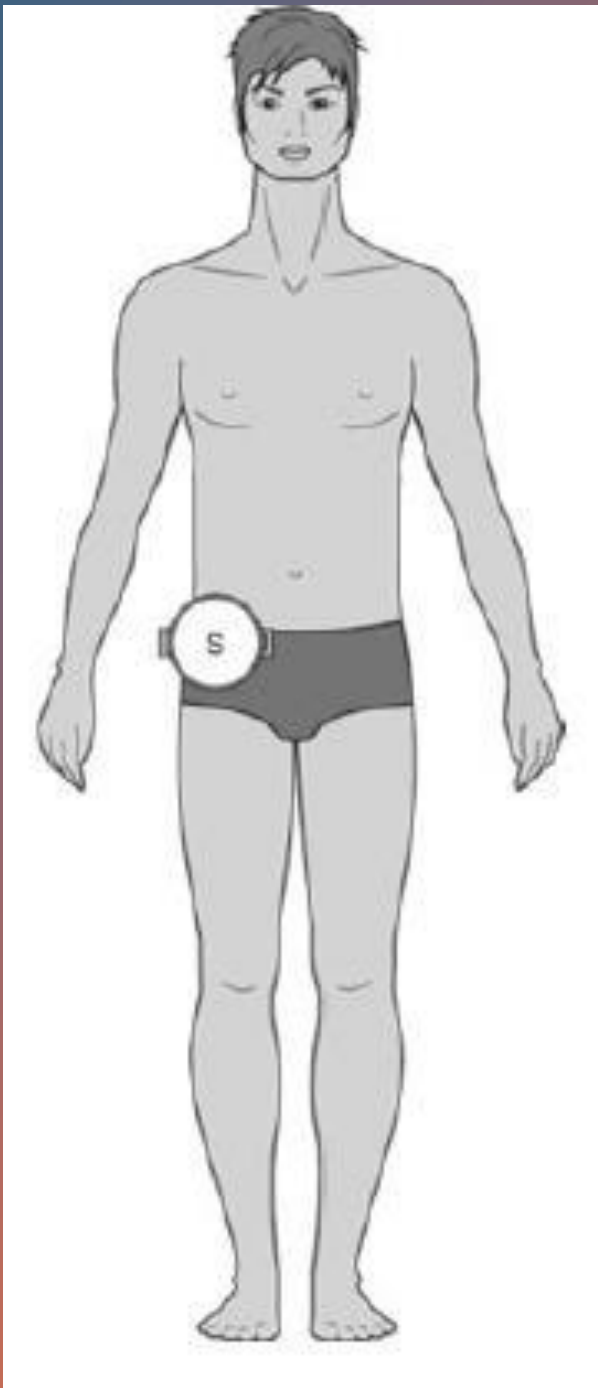

TRAUME

Plăgi (după tratament chirurgical)


Cursul este format din 15-20 de sesiuni.

Există 1 procedură pe sesiune.

Emitători: LI.

Emitătoarele sunt plasate: LI pe rană (peste pansament)

- **Programul Nr.68;**
- Tip câmp magnetic:
LI - nemișcat;
- Inductie: 20 mT;
- Frecventa: 50;
- Timp de expunere: 20 min.

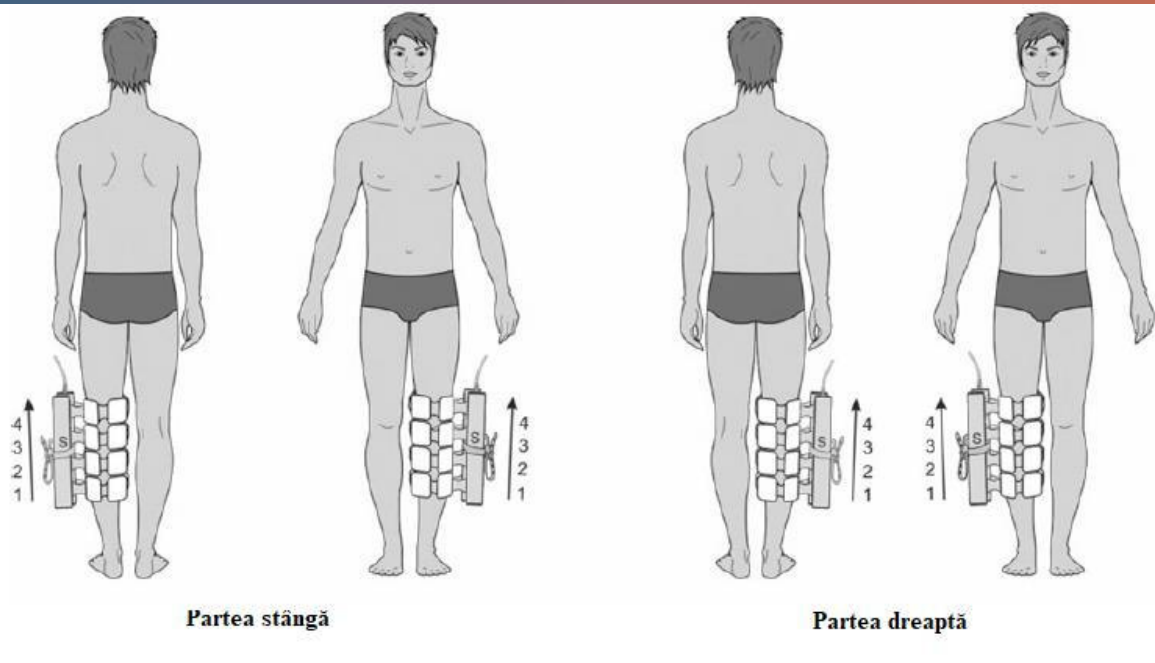

Bursita, inclusiv dupa tratament chirurgical (in a 3-a zi dupa operatie)

Cursul este format din 10-15 sesiuni.

Există 1 procedură pe sesiune.

Emitători: OI.

Emitătorii sunt plasați: OI-ul se înfășoară în jurul articulației deteriorate.

- **Programul nr.18;**
- Tip câmp magnetic:
OI – rulează de jos în sus;
- Inducție: 20 mT;
- Frecvență: 100 Hz;
- Timp de expunere: 10 min.



Descrierea metodelor de tratare a traumei (vânătaie, luxație articulară)


Cursul este format din 10 sesiuni.

Există 1 procedură pe sesiune.

Emitători: OI.

Emitătorii sunt plasați: OI-ul se înfășoară în jurul articulației deteriorate.

- **Programul Nr.50;**
- Tip câmp magnetic:
OI – rulează de jos în sus;
- Inductie: 20 mT;
- Frecventa: 100 Hz;
- Timp de expunere: 20 min.

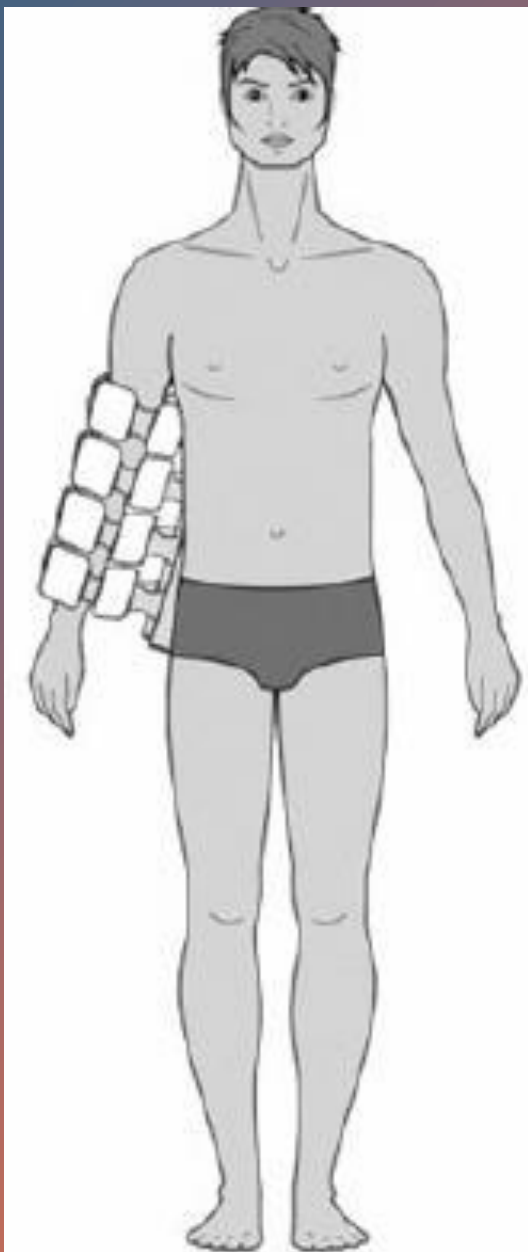

TRAUME ALE COTULUI ȘI ANTEBRĂȚULUI

Dislocarea, întinderea și suprasolicitarea aparatului capsular-ligamentar al articulației cotului

Luxația capului radial

Ruptura traumatică a ligamentului colateral radial

Întinderea și întinderea aparatului ligamentar capsular al articulației cotului

Terapia magnetică pulsată începe la 3-5 zile după leziune.


Cursul este format din 10 sesiuni.

Există 1 procedură pe sesiune.

Emițători: OI.

Emițătorii sunt plasați: OI-ul se înfășoară în jurul articulației deteriorate.

- **Programul Nr.23;**
- Tip câmp magnetic:
OI – nemișcat;
- Inductie: 6 mT;
- Frecventa: 16 Hz;
- Timp de expunere: 30 min.

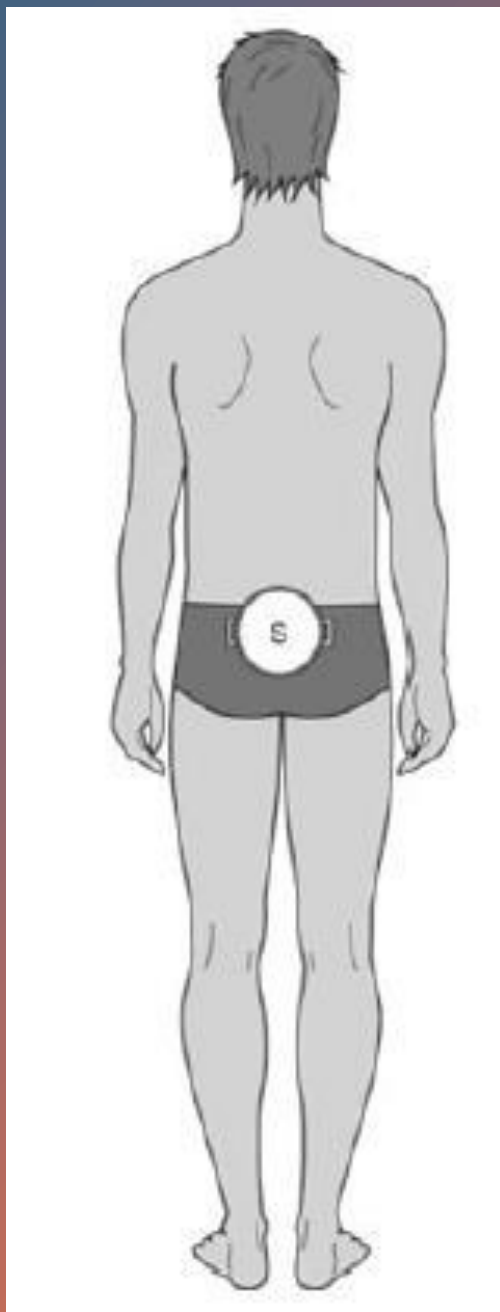

TRAUME ALE ZONEI COCCISULUI, SOLDULUI ȘI COAPSEI

Coccigodinie traumatică


Cursul este format din 10-15 sesiuni.

Există 1 procedură pe sesiune.

Emitători: LI.

Emitătorii sunt plasați: LI pe zona coccisului.

- **Programul Nr.65;**
- Tip câmp magnetic:
LI - nemișcat;
- Inductie: 35 mT;
- Frecventa: 50 Hz;
- Timp de expunere: 20 min.

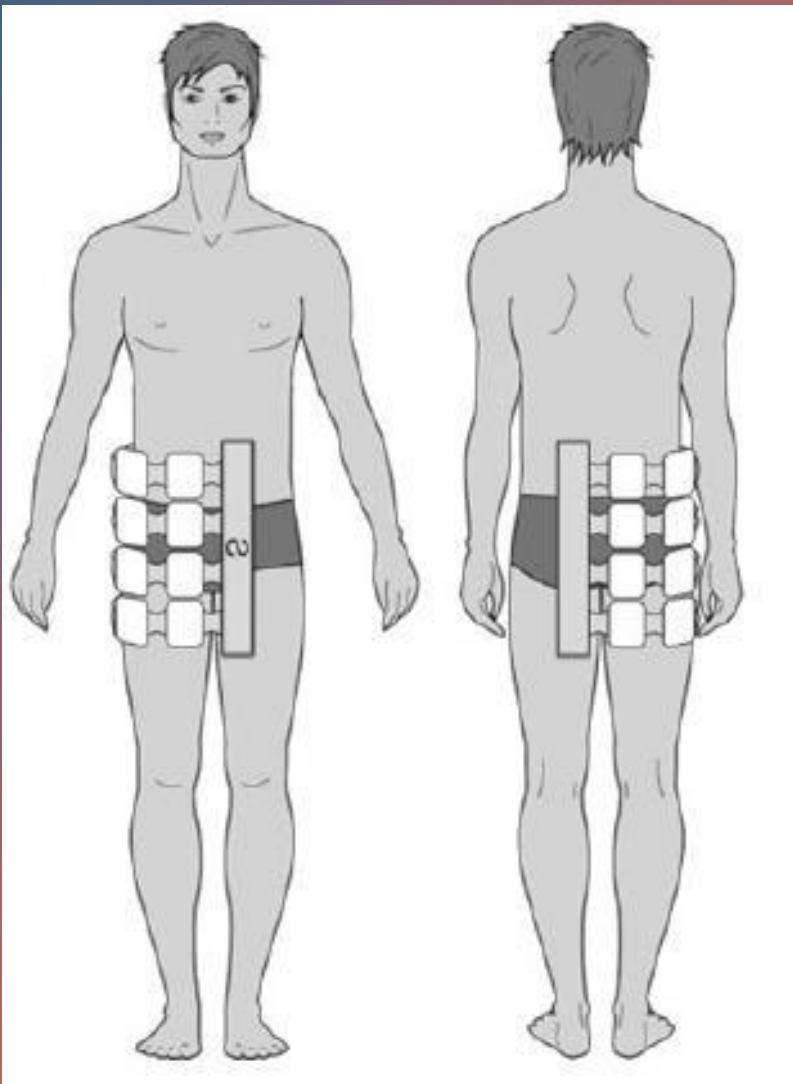

Contuzie articulației șoldului


Cursul este format din 10-15 sesiuni.

Există 1 procedură pe sesiune.

Emitători: OI.

Emitătorii sunt plasați: OI pe articulația șoldului lezată.

- **Programul nr.23;**
- Tip câmp magnetic:
OI – nemișcat;
- Inductie: 6 mT;
- Frecventa: 16 Hz;
- Timp de expunere: 30 min.

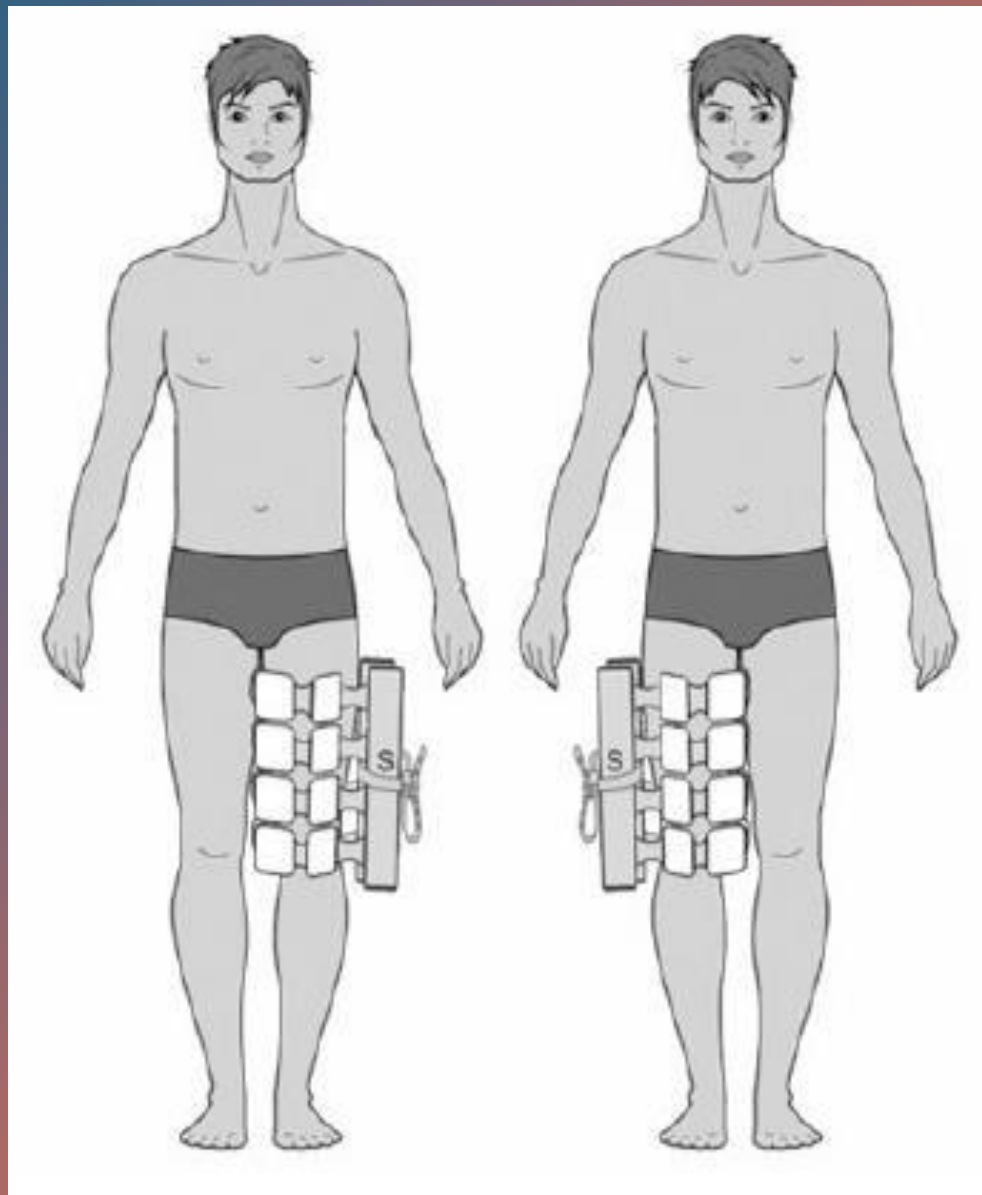

Contuzie de șold


Cursul este format din 10-15 sesiuni.

Există 1 procedură pe sesiune.

Emitători: OI.

Emitătorii sunt plasați: OI-ul este înfășurat în jurul șoldului rănit.

- **Programul nr.23;**
- Tip câmp magnetic:
OI – nemișcat;
- Inductie: 6 mT;
- Frecventa: 16 Hz;
- Timp de expunere: 30 min.

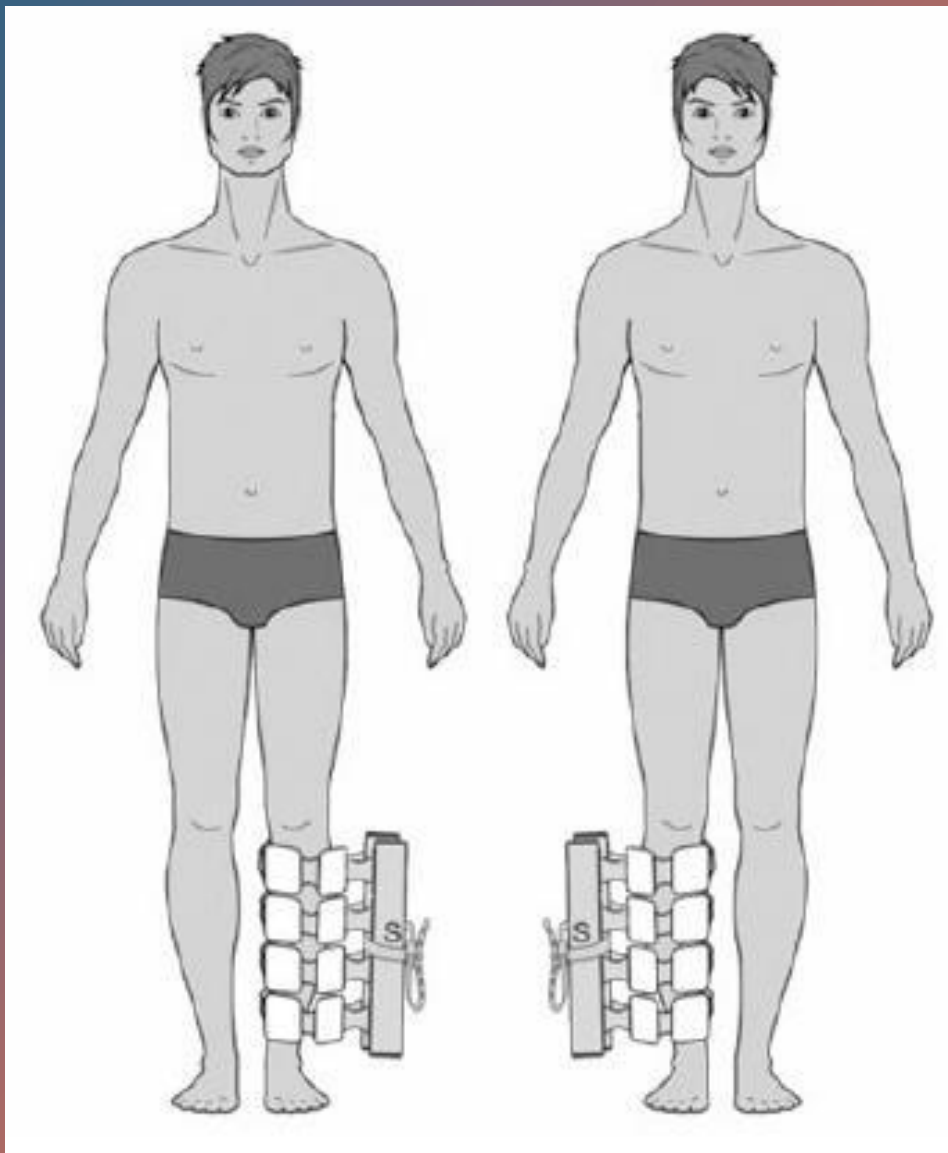

TRAUME LA GENUNCHI ȘI TIBIE

Contuzie a unei alte părți specificate și nespecificate a piciorului Leziuni superficiale multiple ale piciorului


Cursul este format din 10-15 sesiuni.

Există 1 procedură pe sesiune.

Emitători: OI.

Emitătorii sunt plasați: OI-ul se înfășoară în jurul tibiei rănite.

- **Programul nr.23;**
- Tip câmp magnetic:
OI – nemișcat;
- Inductie: 6 mT;
- Frecventa: 16 Hz;
- Timp de expunere: 30 min.

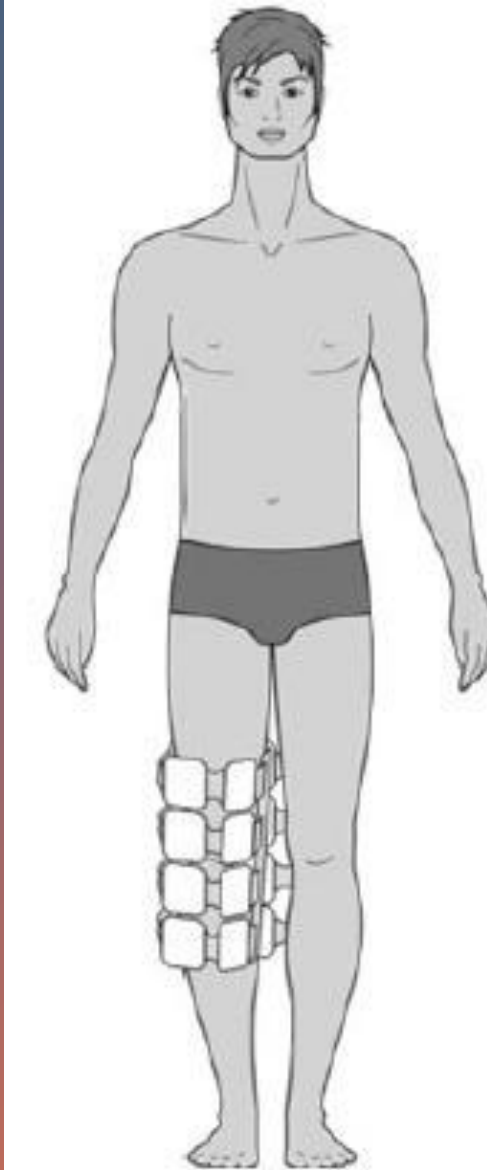

Luxația articulației genunchiului

Terapia magnetică pulsată începe în a 3-a-5-a zi.
după producerea leziunii.


Cursul este format din 10-15 sesiuni.

Există 1 procedură pe sesiune.

Emițători: OI.

Emițătorii sunt plasați: OI-ul se înfășoară în jurul
articulației genunchiului rănit.

- **Programul nr.23;**
- Tip câmp magnetic:
OI – nemișcat;
- Inducție: 6 mT;
- Frecvență: 16 Hz;
- Timp de expunere: 30 min.

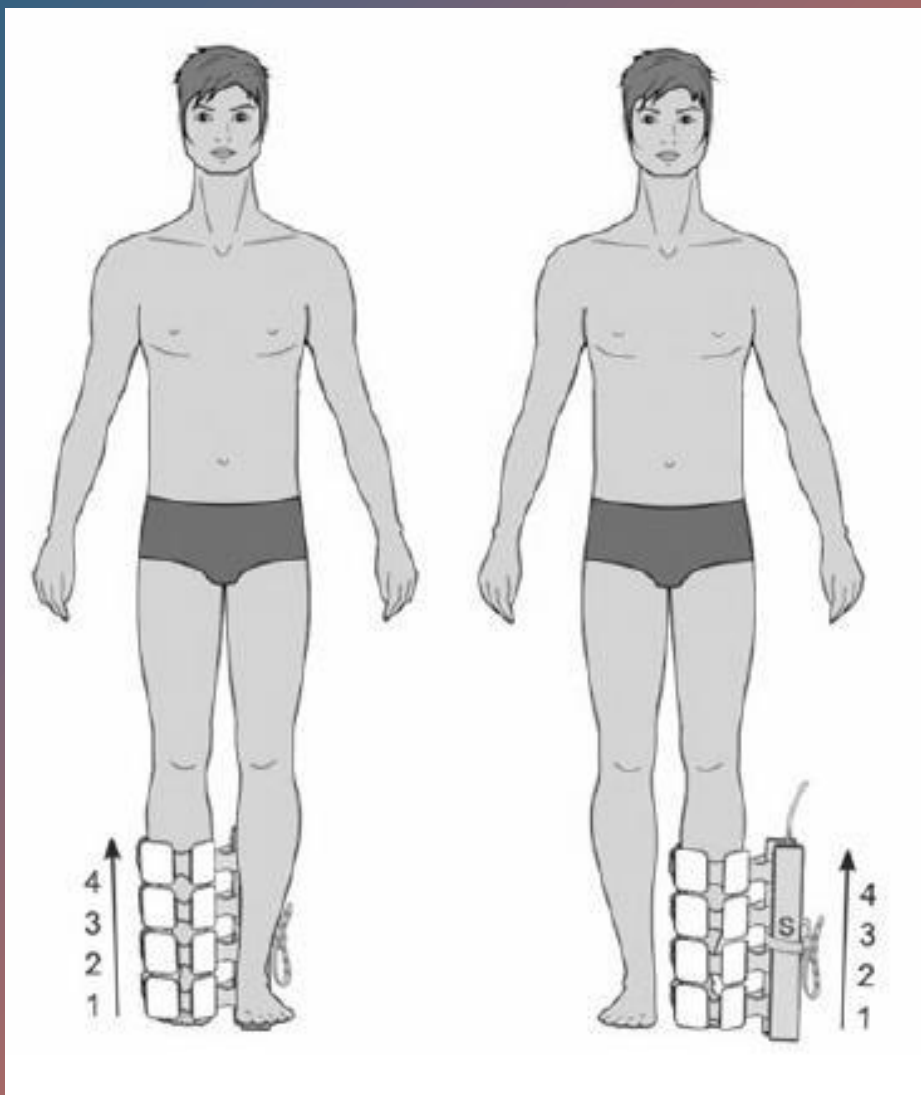

TRAUME LA GLEZNE ȘI PICIOARE

Entorsă gleznei (72 de ore după accidentare)


Cursul este format din 10 sesiuni.

Există 1 procedură pe sesiune.

Emitători: OI.

Emitătorii sunt plasați: OI-ul se înfășoară în jurul articulației deteriorate.

- **Programul nr.50;**
- Tip câmp magnetic:
OI – rulează de jos în sus;
- Inductie: 20 mT;
- Frecventa: 100 Hz;
- Timp de expunere: 20 min.

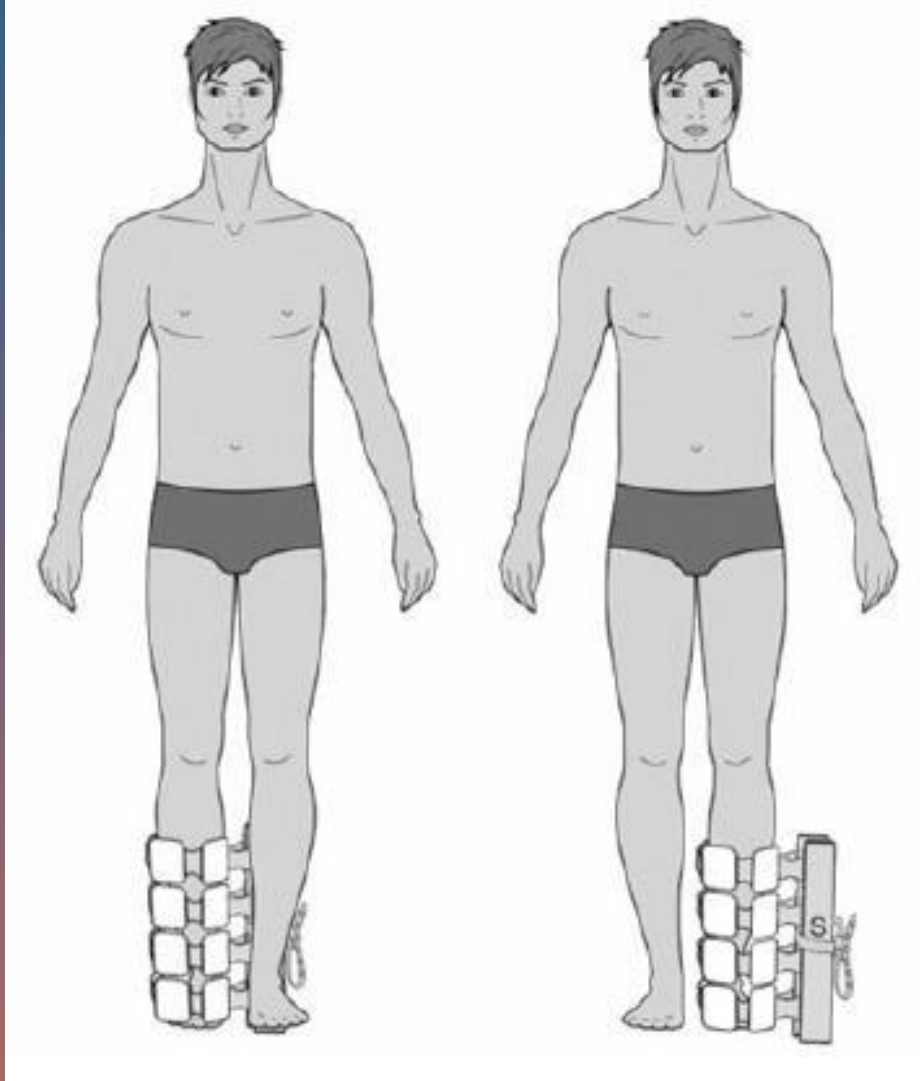

Entorsa gleznei


Cursul este format din 10-15 sesiuni.

Există 1 procedură pe sesiune.

Emitători: OI.

Emitătorii sunt plasați: OI-ul se înfășoară în jurul articulației gleznei lezate.

- **Programul nr.23;**
- Tip câmp magnetic:
OI – nemișcat;
- Inductie: 6 mT;
- Frecventa: 16 Hz;
- Timp de expunere: 30 min.

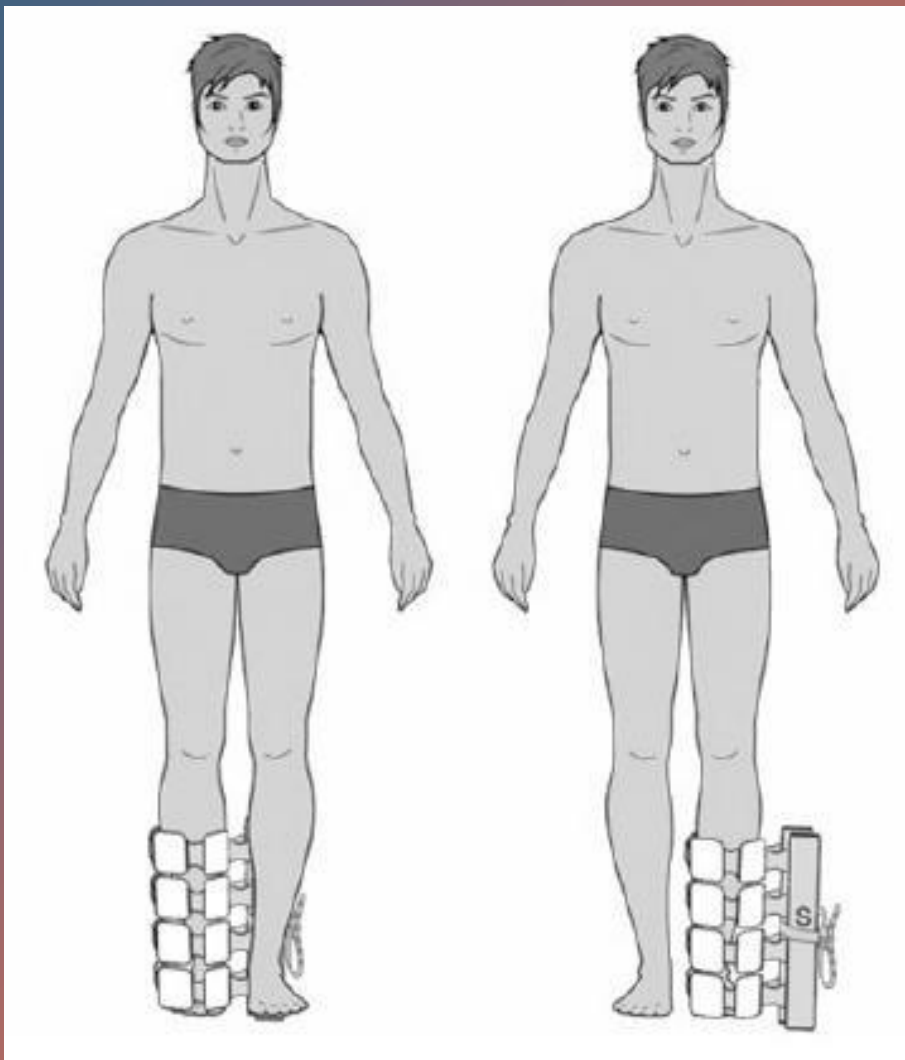

Vânătași ale degetelor de la picior fără / cu deteriorarea plăcii unghiei

Cursul este format din 10-15 sesiuni.

Există 1 procedură pe sesiune.

Emitători: OI.

Emitătorii sunt plasați: OI-ul se înfășoară în jurul piciorului rănit.

- **Programul nr.23;**
- Tip câmp magnetic:
OI – nemișcat;
- Inducție: 6 mT;
- Frecvență: 16 Hz;
- Timp de expunere: 30 min.

LEZIUNI SUPERFICIALE MULTIPLE ALE GLEZNEI ȘI PICIORULUI

Entorsa gleznei


Cursul este format din 10-15 sesiuni.


Există 1 procedură pe sesiune.

Emitători: OI.

Emitătorii sunt plasați: OI-ul se înfășoară în jurul articulației gleznei lezate și a piciorului accidentat.

- **Programul nr.23;**
- Tip câmp magnetic:
OI – nemișcat;
- Inductie: 6 mT;
- Frecvența: 16 Hz;
- Timp de expunere: 30 min.

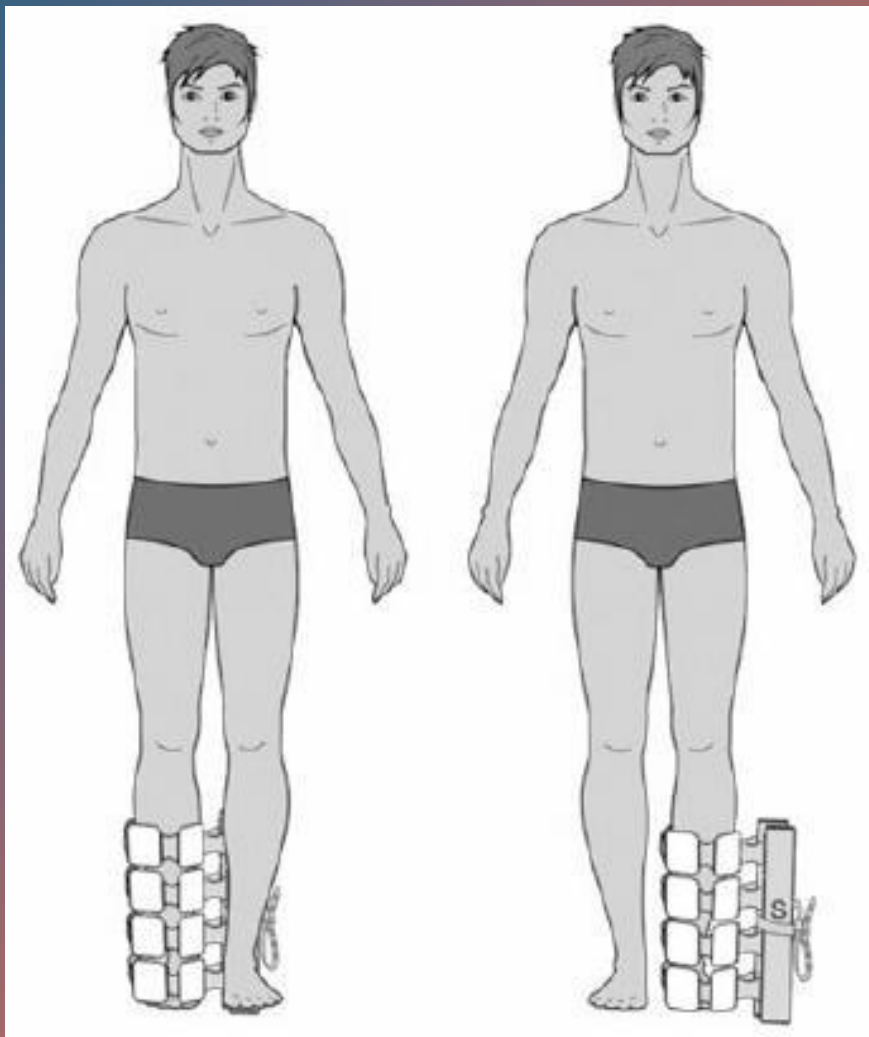

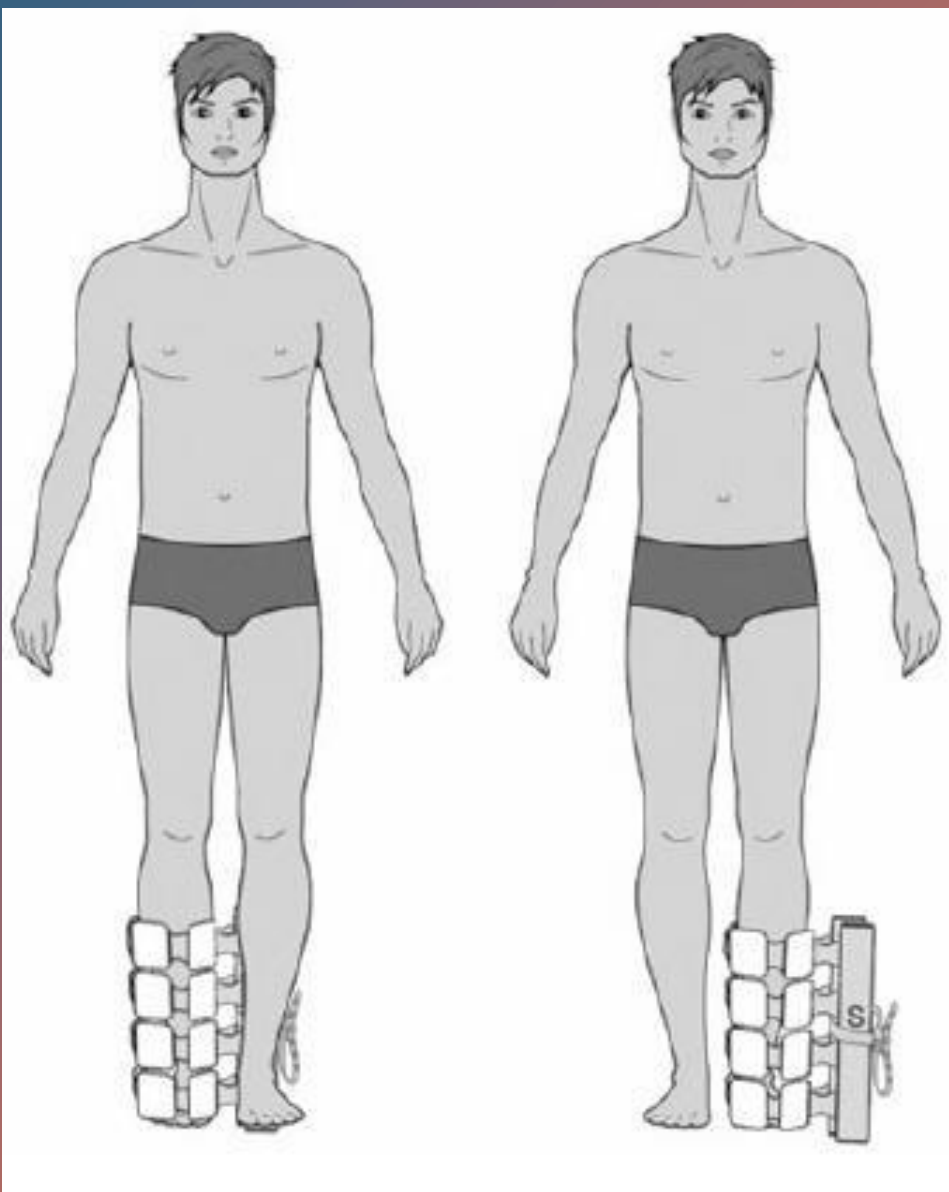

Ruptura ligamentelor la nivelul gleznei și piciorului

Magnetoterapia se efectuează după imobilizare prin gips.


Cursul este format din 10-15 sesiuni.

Există 1 procedură pe sesiune.

Emitători: OI.

Emitătorii sunt plasați: OI se înfășoară în jurul tibiei rănite, articulației gleznei și piciorului.

- **Programul Nr.23;**
- Tip câmp magnetic:
OI – nemișcat;
- Inducție: 6 mT;
- Frecvență: 16 Hz;
- Timp de expunere: 30 min.

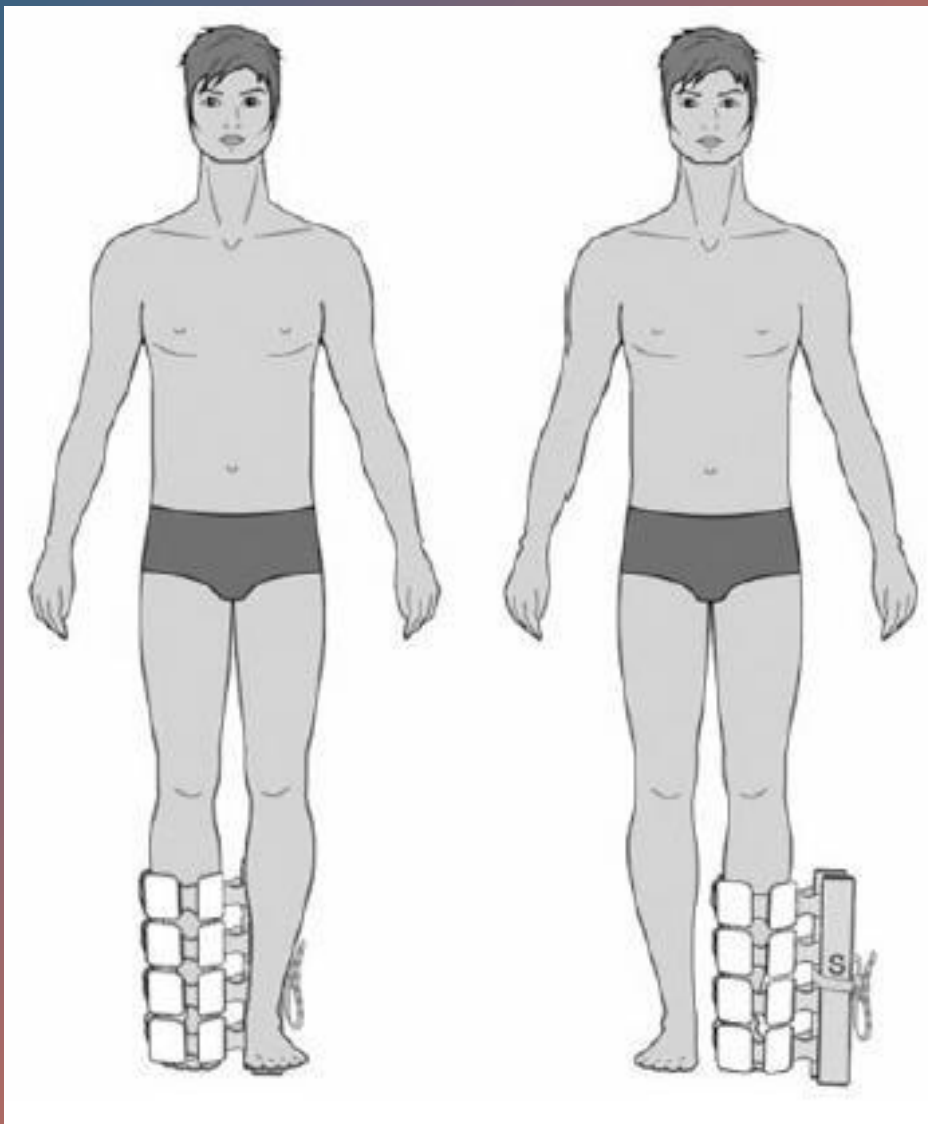

Întinderea și încordarea aparatului ligamentar capsular al articulațiilor degetului (degetelor) piciorului


Cursul este format din 10-15 sesiuni.

Există 1 procedură pe sesiune.

Emitători: OI.

Emitătoarele sunt plasate: OI
înfășurați piciorul rănit.

- **Programul nr.23;**
- Tip câmp magnetic
OI - nemișcat
- Inductie: 6 mT;
- Frecventa: 16 Hz;
- Timp de expunere: 30 min.

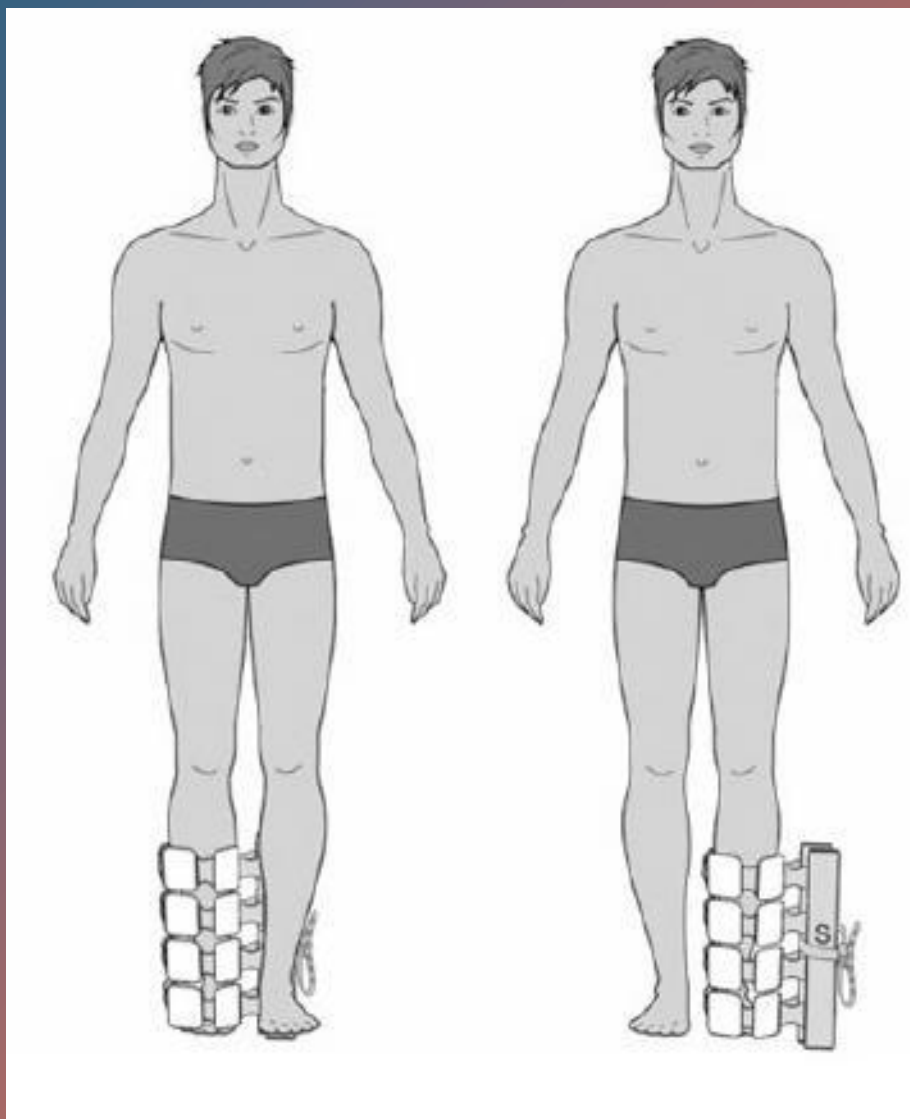

Leziuni nervoase la nivelul gleznei și piciorului
Traumatism al nervului plantar extern [lateral].
Leziune a nervului plantar [medial] intern


Cursul este format din 10-15 sesiuni.

Există 1 procedură pe sesiune.

Emitători: OI.

Emitătorii sunt plasați: OI se înfășoară în jurul articulației gleznei și piciorului membrului rănit.

- **Programul nr.23;**
- Tip câmp magnetic:
OI – nemișcat;
- Inductie: 6 mT;
- Frecvență: 16 Hz;
- Timp de expunere: 30 min.

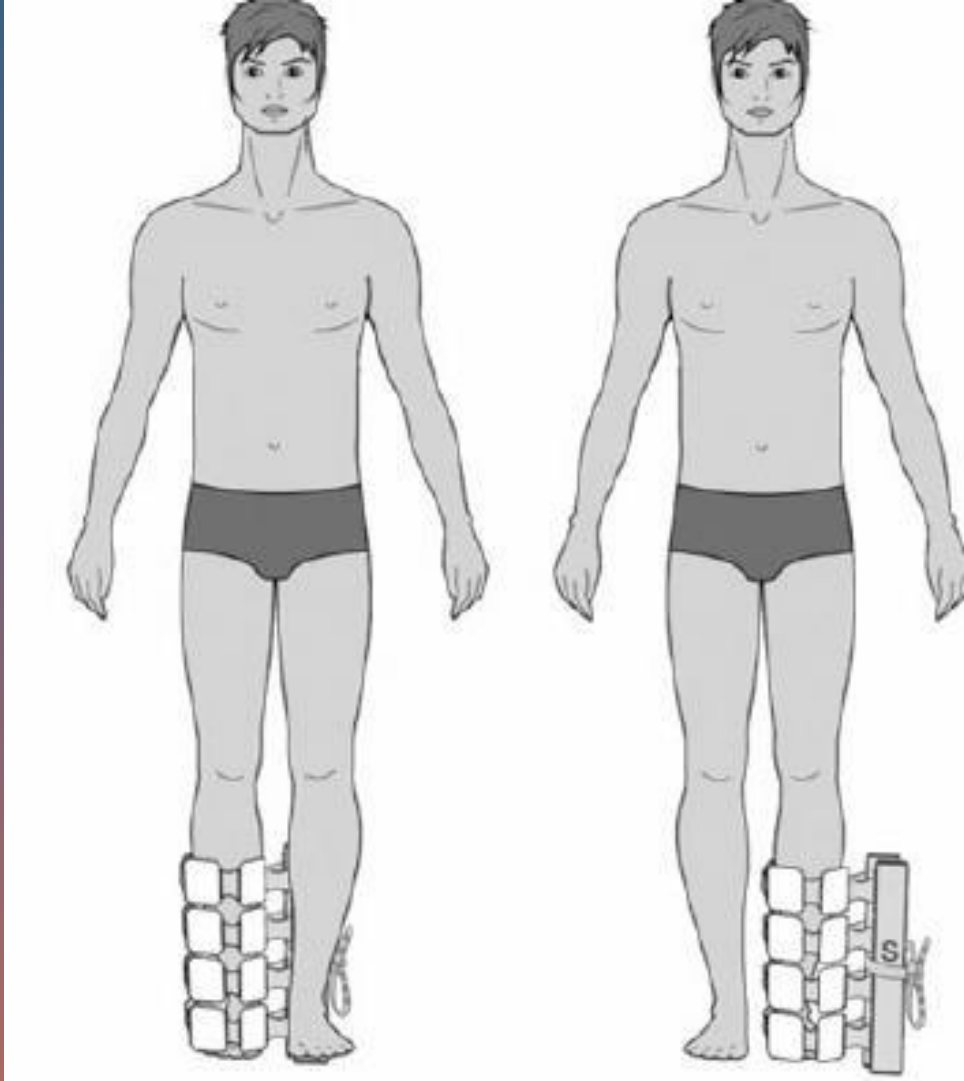

Leziune profundă a nervului peronier la nivelul gleznei și piciorului

Traume ale nervilor multipli la nivelul gleznei și piciorului

Leziune a extensorului lung al degetului și a tendonului acestuia la nivelul gleznei și piciorului


Cursul este format din 10-15 sesiuni.

Există 1 procedură pe sesiune.

Emitători: OI.

Emitătorii sunt plasați: OI se înfășoară în jurul tibiei, articulației gleznei și piciorului membrului rănit.

- **Programul Nr.23;**
- Tip câmp magnetic:
OI – nemișcat;
- Inducție: 6 mT,
- Frecvență: 16 Hz;
- Timp de expunere: 30 min.

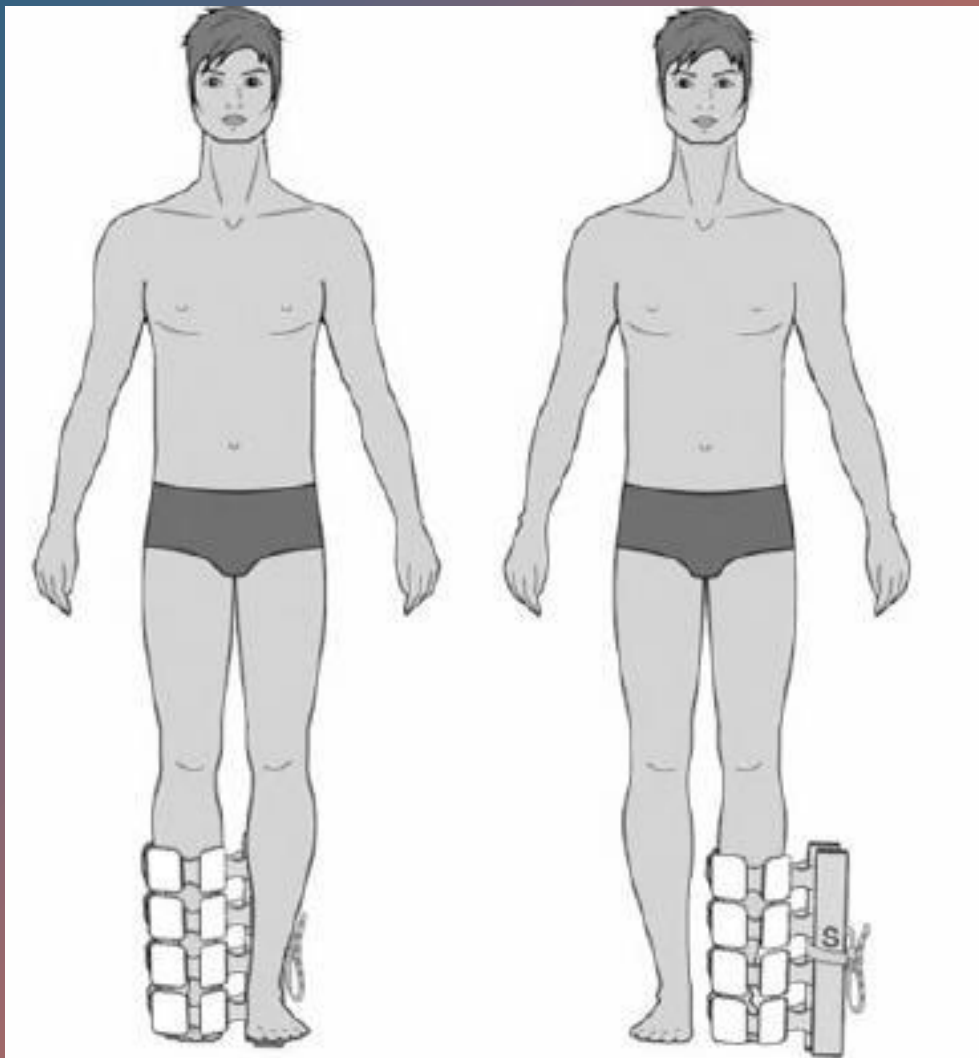

Leziuni ale mai multor mușchi și tendoane la nivelul gleznei și piciorului

Leziuni ale altor mușchi și tendoane la nivelul gleznei și piciorului


Cursul este format din 10-15 sesiuni.

Există 1 procedură pe sesiune.

Emitători: OI.

Emitătorii sunt plasați: OI se înfășoară în jurul tibiei, articulației gleznei și piciorului membrului rănit.

- **Programul nr.23;**
- Tip câmp magnetic:
OI – nemișcat;
- Inducție: 6 mT;
- Frecvență: 16 Hz;
- Timp de expunere: 30 min.

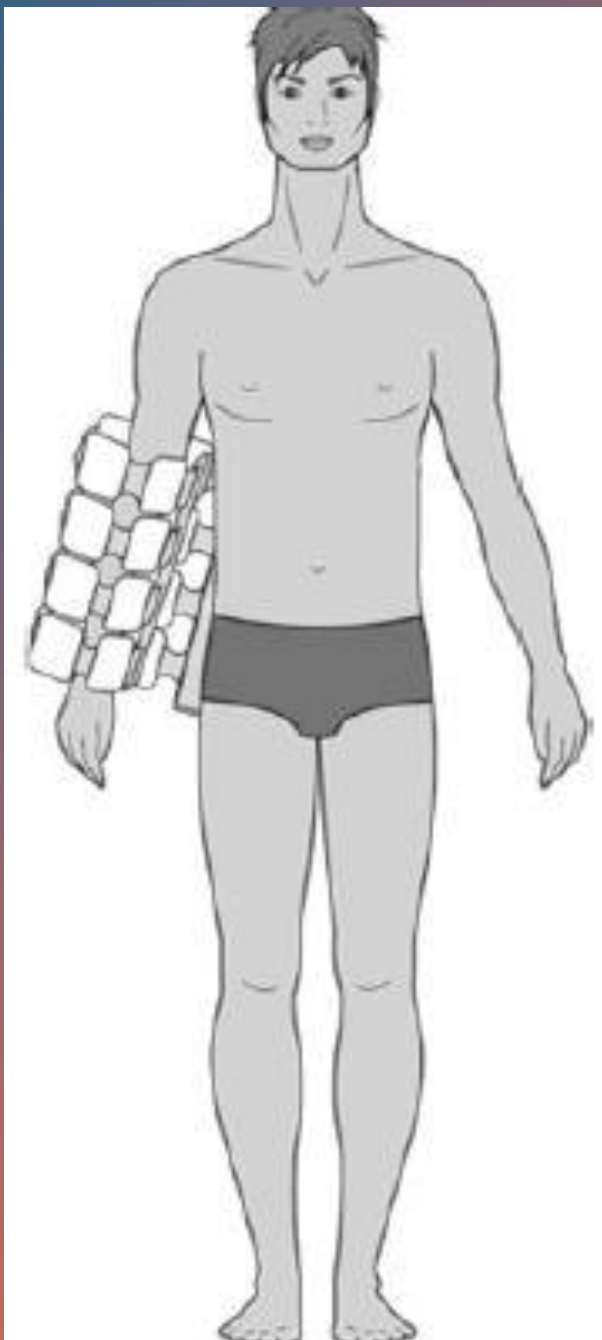

Leziuni nervoase la nivelul antebrățului

Leziunea nervului ulnar la nivelul antebrățului

Terapia magnetică pulsată începe la 2-3 zile după leziune.


Cursul este format din 10-15 sesiuni.

Există 1 procedură pe sesiune.

Emitători: OI.

Emitătorii sunt plasați: OI este înfășurat în jurul articulației cotului și antebrățului membrului rănit.

- **Programul nr.23;**
- Tip câmp magnetic:
OI – nemișcat;
- Inducție: 6 mT;
- Frecvență: 16 Hz;
- Timp de expunere: 30 min.

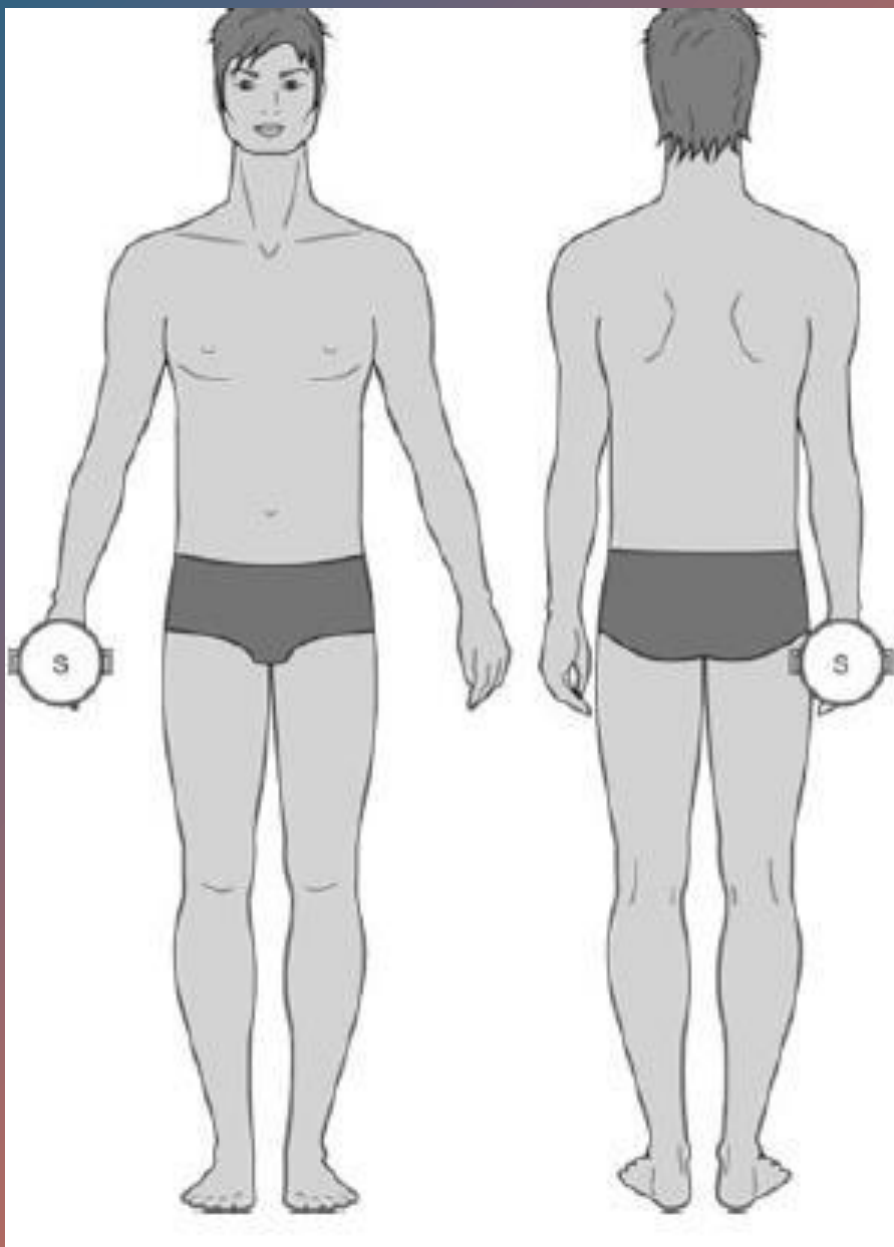

LEZIUNI LA ÎNCHEIETURA MÂINII ȘI LA MÂINI

Vânătăi la degetul (degetele) mâinii cu / fără deteriorarea plăcii unghiei

Cursul este format din 10-15 sesiuni.

Există 1 procedură pe sesiune.

Emițători: LI.

Emițătorii sunt plasați: LI peste zona leziunii traumatiche sau zona de umflare a membrului rănit (mâna rănită este plasată între două inductori LI).

- **Programul Nr.79;**
- Tip câmp magnetic:
LI - nemișcat;
- Inducție: 6 mT;
- Frecvență: 16 Hz;
- Timp de expunere: 30 min.

LEZIUNI CARE IMPLICĂ MAI MULTE ZONE ALE CORPULUI


Leziuni superficiale în mai multe zone ale membrului (membrelor) superioare / inferioare

Cursul este format din 10-15 sesiuni.


Există 1 procedură pe sesiune.

Emitători: OI.

Emitătorii sunt plasați: OI-ul este înfășurat în jurul membrului rănit.

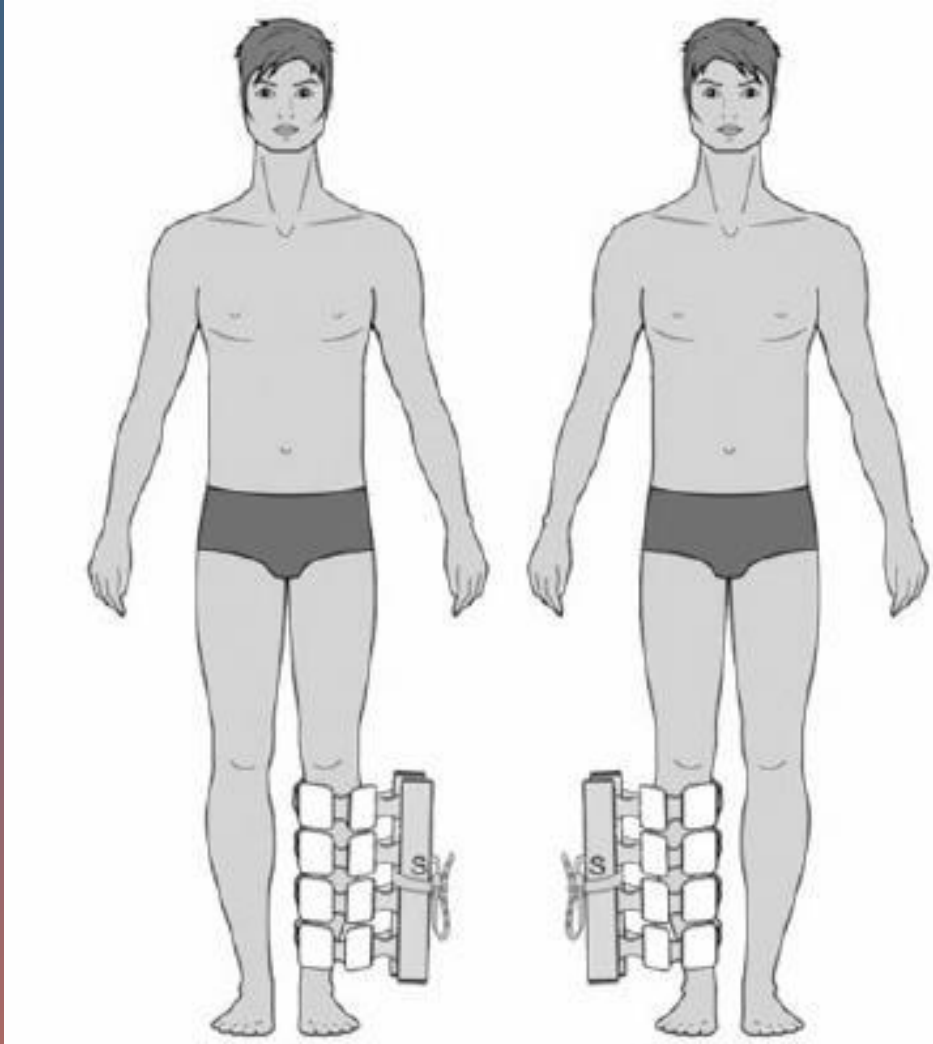

- **Programul nr.23;**
- Tip câmp magnetic:
OI – nemișcat;
- Inducție: 6 mT;
- Frecvență: 16 Hz;
- Timp de expunere: 30 min.

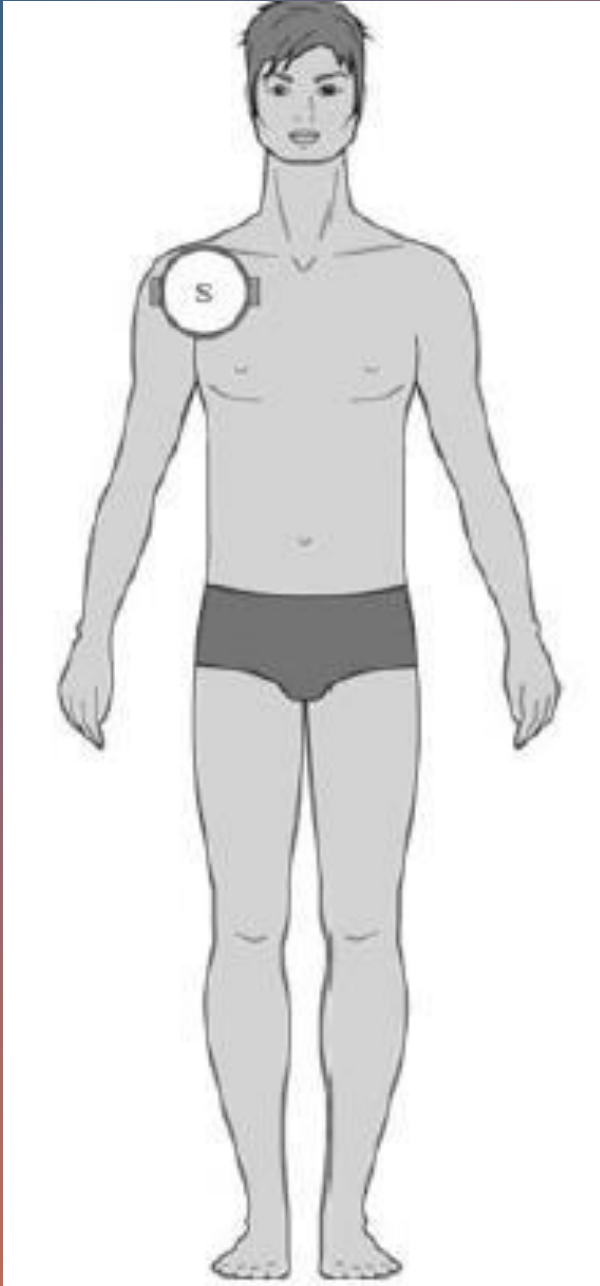

Hematom posttraumatic (2-3 zile după leziune)

Cursul este format din 10-15 sesiuni.

Există 1 procedură pe sesiune.

Emitători: LI.

Emitătorii sunt plasați: LI pe hematumul membrului lezat.

- **Programul Nr.79;**
- Tip câmp magnetic:
LI - nemișcat
- Inductie: 6 mT;
- Frecventa: 16 Hz;
- Timp de expunere: 30 min.