


100  
buc./pics.

STERILE EO 0344

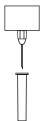

**EN** Single use.  
Sterile, non toxic, latex free.  
Use immediately after opening.  
**DONT REUSE.**

**RO** De unic folosință.  
Steril, non toxic, nu conține latex.  
Utilizați imediat după deschiderea ambalajului.  
**NU REUTILIZAȚI.**

32G 0,23mm  
4 mmAc stilou insulină  
Insulin pen needle

iDiab

iDiab

Ac stilou insulină  
Insulin pen needle100  
buc./pics.4 mm  
32G 0,23mm

## Caracteristici:

- ace pentru utilizarea împreună cu stilourile (pen) pentru injectarea subcutanată a insulinei;
- vârful acului trifazetat siliconizat, care reduce la minimum trauma locală datorată înțepării;
- pereții acului sunt ultra-subțiri și asigură un flux optim al insulinei reducând astfel timpul de injecție;
- nu conține Latex, PVC, DEHP;
- sterilizare EO.

4 mm  
32G 0,23mm

## Acele pentru insulină sunt compatibile cu următoarele modele de stilouri pentru administrarea insulinei:

**Novo Nordisk:** NovoPen® 3, NovoPen® 4, NovoPen® 5, NovoPen® Junior, NovoRapid® FlexPen®;


**Lilly:** HumaPen® luxura, HumaPen® luxura Hd;

**Owen Mumford:** Autopen® 24, Autopen® classic 2;

**Sanofi:** Aventis Lantus, Optipen® Pro, TactiPen®;

**BD:** Puregon pen®

STERILE EO 0344

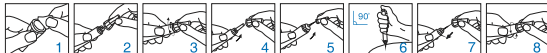100  
buc./pics.

RO

## Cum se utilizează acele pentru stilou:

- pacienții trebuie să-și amintească să schimbe locurile de injecție, conform recomandărilor aplicabile pentru administrarea insulinei;
- acele pentru stilou sunt sterile și de unică folosință. Sterilitatea este garantată dacă sigiliul acului este integru.

## ATENȚIONARE!

ACELE PENTRU STILOU TREBUIE FOLOSITE DOAR O SINGURĂ DATĂ ȘI DEPOZITATE ÎNTR-UN RECIPIENT PENTRU OBIECTE ASCUȚITE.

## Reutilizarea poate:

- provoacă lipohipertrofie;
- taci sau îndoi vârful, provocând sângerare, vânătăi sau cicatrici;
- crește riscul de rupere a acului în piele;
- crește riscul de infectare deoarece acul nu mai este steril.

EN

## How to use pen needles:

- patients should remember to rotate injections sites, according to applicable insulin delivery recommendations;

- pen needles are sterile and for single use only. Sterility is guaranteed if the needle seal is unbroken.

## REMEMBER!

PEN NEEDLES SHOULD BE USED ONLY ONCE AND DISPOSED OF IN A SHARPS CONTAINER.

## Re-use can:

- cause lipohypertrophy;
- dull or bend up the tip, causing bleeding, bruising or scarring;
- increase the risk of needle breaking off in the skin;
- increase the risk of injection because the needle is no longer sterile.

iDiab

Ac stilou insulină  
Insulin pen needle4 mm  
32G 0,23mm

RO

De unică folosință.  
Utilizați imediat după deschiderea ambalajului.  
Steril, non toxic, nu conține latex.  
**NU REUTILIZAȚI.**

EN

Single use.  
Use immediately after opening.  
Sterile, non toxic, latex free.  
**DONT REUSE.**

STERILE EO 0344

100  
buc./pics.

## Characteristics:

- needles for use with the pen for subcutaneous insulin injection;
- fine three-facet grinding and siliconizing of needle minimizes tissue trauma;
- extra thin wall allows for a larger inner diameter and an optimized insulin flow and reduce injection time;
- integrated plunger backstop;
- latex, PVC and DEHP free;
- EO sterilization.

## Insulin needles are compatible with the following pen models for insulin administration:

**Novo Nordisk:** NovoPen® 3, NovoPen® 4, NovoPen® 5, NovoPen® Junior, NovoRapid® FlexPen®;

**Lilly:** HumaPen® luxura, HumaPen® luxura Hd;

**Owen Mumford:** Autopen® 24, Autopen® classic 2;

**Sanofi:** Aventis Lantus, Optipen® Pro, TactiPen®;

**BD:** Puregon pen®

STERILE EO 0344

4 mm  
32G 0,23mm100  
buc./pics.