



ULT U100

RO Instrucțiuni de utilizare

Avertizare

Deoarece aparatul conține un agent frigorific inflamabil, este esențial să vă asigurați că conductele de agent frigorific nu sunt deteriorate.

Cantitatea și tipul de agent frigorific utilizat în aparatul dumneavoastră sunt indicate pe plăcuța cu date tehnice.

Standardul EN378 specifică că încăperea în care instalați aparatul dumneavoastră trebuie să aibă un volum de 1 m³ la 8 g de agent frigorific hidrocarburic utilizat în aparate. Acest lucru este pentru a evita formarea de amestecuri inflamabile de gaz/aer în încăperea în care este amplasat aparatul în cazul unei scurgeri în circuitul agentului frigorific.

AVERTIZARE: Păstrați orificiile de ventilație în interior dulapului aparatului sau în structura încorporată fără obstacole

AVERTIZARE: Nu folosiți altelemecanic dispozitivesau alte mijloace de accelerare a procesului de dezghețare decât cele recomandate de producător

AVERTIZARE: Nu deteriorați agentul frigorific sistem

AVERTIZARE: Nu folosiaplicatie electrica strămoșiîn interiorul compartimentului frigorific, cu excepția cazului în care sunt de tip recomandat de producător

AVERTIZARE: Nu expuneți aparatul la ploaie și asigurați-vă că nu stropiți cu apă atunci când curățați podeaua

AVERTIZARE: Acest aparat nu este destinat pentru utilizare de către persoane (inclusiv copii) cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse sau fără experiență și cunoștințe.

marginea, cu excepția cazului în care au primit supraveghere sau instrucțiuni privind utilizarea aparatului de către o persoană responsabilă pentru siguranța lor. Copiii trebuie supravegheați pentru a se asigura că nu se joacă cu aparatul

AVERTISMENT: Dacă un stilou USB nu este compatibil este utilizată unitatea poate provoca o resetare a controlerului

AVERTIZARE: Nu depozitați explozivi, cum ar fi ca cutii de aerosoli cu combustibili inflamabili în unitate.

AVERTIZARE: Pericol de incendiu sau explozie dacă se utilizează agent frigorific inflamabil. A se repara numai de personal instruit.



RĂZBOINING: Margini ascuțite pe dulap, compot apărea compartimentul presor, evaporator, capac de ventilație și pe echipamentul intern. Vă rugăm să fiți conștient pentru a evita rănirea.


AVERTIZARE: Condensatorul de pe spatele lui aparatul va avea în unele cazuri o suprafață fierbinte. Vă rugăm să fiți conștient pentru a evita rănirea.

- Păstrați întotdeauna cheile într-un loc separat și la îndemâna copiilor
- Înainte de întreținerea sau curățarea aparatului, deconectați aparatul de la rețea sau deconectați alimentarea cu energie electrică.
- Dacă cablul de alimentare este deteriorat, acesta trebuie înlocuit de către producător, agentul său de service sau persoane calificate similare pentru a evita un pericol.
- **Relevant pentru Australia:** Cablul de alimentare prevăzut cu un ștecher este conform cu AS / NZS 3112.
- Vă rugăm să rețineți că modificările aduse aplicației ance construction va anula toată garanția și răspunderea pentru produs
- Acest dispozitiv este destinat utilizării exclusiv pentru produse medicale.
- Dacă instrucțiunile sunt pierdute, vă rugăm să contactați furnizorul dvs. al aparatului pentru a primi o nouă instrucțiune de utilizare.
- Dacă este nevoie de service pentru acest dispozitiv, vă rugăm să rețineți că folosiți numai personal de service cu educație în manipularea dispozitivelor medicale.

Cuprins

Avertizare	2
Faceți cunoștință cu congelatorul dvs.	4
Despachetarea aparatului.	5
Înainte de a porni aparatul	6
Conexiune electrică.	7
Sistem de rezervă a bateriei la pornire	8
Instalare și punere în funcțiune	9
Sarcina maximă pe raft	10
Apărătoare de ventilație.	10
Amenajarea interioară	11
Ușă reversibilă	12
Controlor. Funcționare și funcționare	20
Dezghețare, curățare și întreținere.	23
Localizarea defecțiunilor	25
Garanție, piese de schimb și service	26
Eliminare	27

Cunoaște-ți congelatorul:

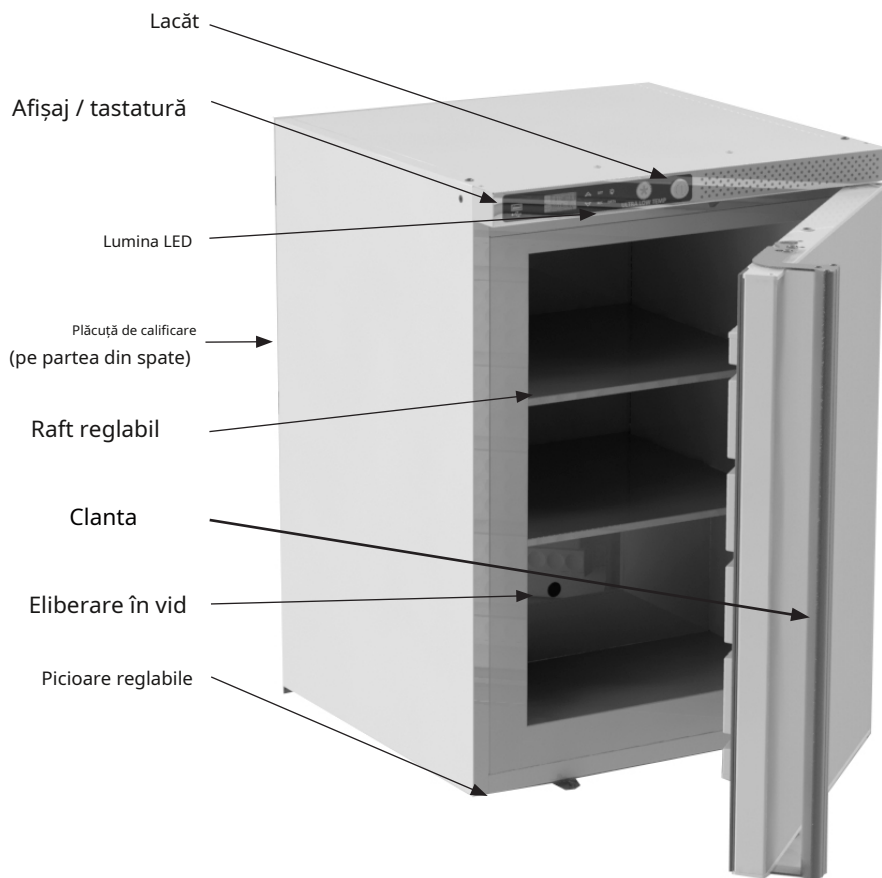

smochin. 1

Despachetarea aparatului


Aparatul este livrat într-o cutie din lemn reutilizabilă.




1. Pachet reutilizabil din lemn



2. Taiăți benzile strapex sau vedeți pagina următoare dacă sunt sigilate cu cleme de plast

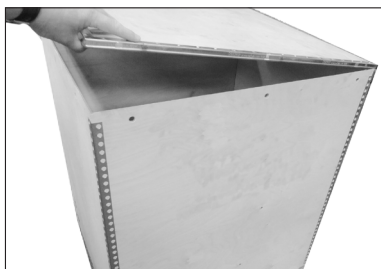

3. Scoateți partea superioară

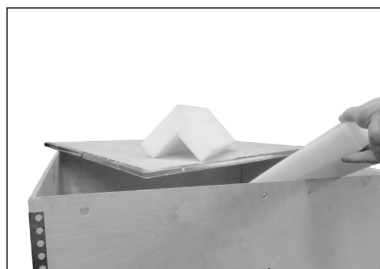

4. Îndepărtați incrustațiile superioare de spumă



5. Scoateți cutia și ridicați aparatul



Înainte de a porni aparatul

Înainte de a utiliza noul dumneavoastră aparat, vă rugăm să citiți cu atenție următoarele instrucțiuni, deoarece acestea conțin informații importante despre siguranță, instalare, operare și întreținere. Păstrați instrucțiunile pentru referințe viitoare.

La primire, verificați dacă aparatul nu a fost deteriorat în timpul transportului. Daunele transportate trebuie raportate distribuitorului local înainte ca aparatul să fie pus în funcțiune.

Curățați interiorul dulapului conform instrucțiunilor de curățare.

Dacă în timpul transportului aparatul a fost așezat sau a fost depozitat într-un mediu rece (mai rece de + 5 ° C), acesta trebuie lăsat să se stabilizeze în poziție verticală timp de cel puțin o oră înainte de a fi pornit.

Notă: Dacă aparatul urmează să fie așezat, ușa trebuie să fie orientată în sus, iar aparatul trebuie să fie închis în ambalajul original.

Conexiune electrica

Cablajele și conexiunile în sistemele de alimentare cu energie electrică trebuie să aibă toate codurile electrice aplicabile (locale și naționale). Consultați aceste coduri lungimi și dimensiuni înainte de instalarea dulapului.

Acest dispozitiv este în conformitate cu directivele UE relevante, inclusiv Directiva de joasă tensiune 2006/95 CEE, și Directiva privind compatibilitatea electromagnetică 2004/108/EC

Priza ar trebui să fie liber accesibilă.

Conectați aparatul numai la curent alternativ de 220/240 V / 50 Hz printr-o priză cu împământare instalată corect.


Priza trebuie asigurată cu o siguranță de 10 A sau 13 A

Dacă aparatul urmează să fie exploatat într-o țară non-europeană, verificați pe plăcuța de identificare dacă tensiunea și tipul de curent indicat corespund valorilor rețelei dvs. de alimentare.

Datele privind tensiunea și puterea / curentul absorbit sunt date pe plăcuta cu date tehnice.

Cablul de alimentare poate fi înlocuit numai de către un tehnician.


Plăcuța cu date tehnice oferă diverse informații tehnice, precum și tipul și numărul de serie.

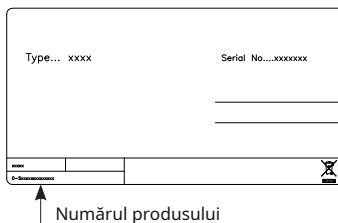

smochin. 3

Sistem de rezervă a bateriei la pornire

Acest aparat este echipat cu un sistem de rezervă a bateriei. Vă rugăm să activați bateria de rezervă înainte de plasarea finală (vezi fig. 2)

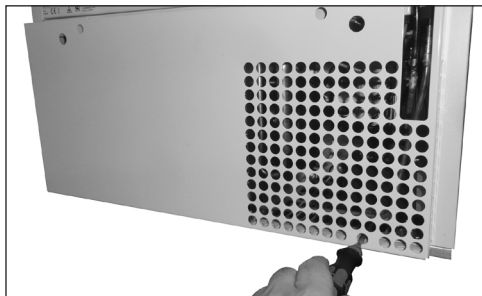

Folosiți un pix sau o șurubelniță pentru a împinge butonul prin orificiul de mai sus de pe partea din spate a aparatului. Aceasta va porni sistemul de rezervă a bateriei.

Apoi vă rugăm să verificați dacă imaginea de rezervă a bateriei apare în colțul din stânga jos al afișajului frontal.

Aceasta arată că bateria de rezervă este activată.



NOTĂ!

Sistemul de rezervă a bateriei nu alimentează sistemul de răcire cu energie.

La prima pornire a aparatului este necesar să porniți sistemul de rezervă a bateriei.

NOTĂ!

Bateria de rezervă trebuie schimbată la fiecare trei ani pentru a asigura 50 de ore de rezervă. Vă rugăm să introduceți această modificare în programul de întreținere pentru fiecare trei ani.


Funcția de rezervă a bateriei

Sistemul de rezervă a bateriei alimentează controlerul și tastatura cu energie în caz de pană de curent. Acest lucru face posibilă supravegherea temperaturilor din unitate în timpul căderii de curent. Sistemul de rezervă a bateriei face posibilă supravegherea temperaturilor timp de 50 de ore. După o pană de curent și la prima pornire, bateria trebuie reîncărcată. Pentru a recăpăta capacitatea maximă, bateria se va reîncărca timp de 10 zile

Instalare și pornire

Aparatul văzut de sus

Dacă aparatul este amplasat lângă un perete, trebuie să existe spațiu suficient pentru ca ușa acestuia să fie deschisă suficient de larg pentru a permite tragerea raftului (fig. 4)

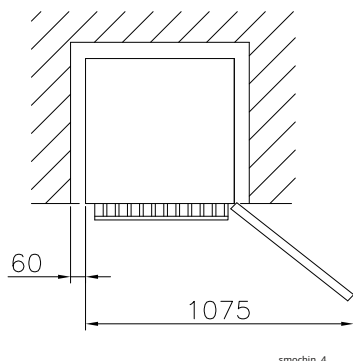

Ventilare

Este important ca aparatul să fie bine ventilat și ca aerul să poată circula liber deasupra, dedesubt și în jurul lui.

Figurile (fig. 4-6) ilustrează modul în care este asigurată circulația necesară a aerului în jurul aparatului.

Unul langa altul



În aranjamentele unul lângă altul, trebuie să existe cel puțin 60 mm între fiecare unitate pe fiecare parte a dulapurilor, pentru a se asigura că ușile pot fi deschise liber (vezi fig. 6)

Configurare

Este important ca aparatul să fie absolut nivelat. Poate fi nivelat prin înșurubarea picioarelor reglabile ale aparatului în sus sau în jos.

Utilizați o nivelă cu bulă de aer pentru a verifica dacă aparatul este absolut nivelat în lateral.

Dacă aparatul este așezat pe o suprafață moale, de exemplu, podea sau un covor, trebuie să verificați din nou dacă aparatul este încă la nivel după o perioadă de timp, deoarece suprafața de dedesubt poate cedează sub greutatea aparatului.

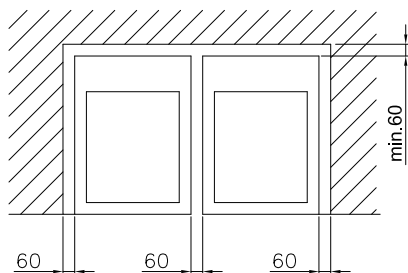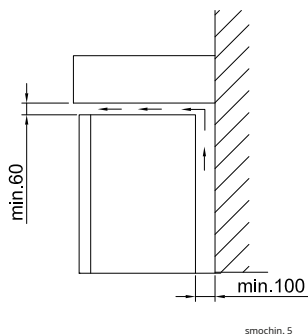

Sarcina maximă pe raft

Rafturile din oțel inoxidabil sunt proiectate să suporte greutatea de max. 15 kg fiecare.




Apărătoare de ventilație

Cele două apărătoare de ventilație sunt montate înainte de a muta aparatul în poziția sa finală. Funcția de protecție este de a asigura un minim absolut de ventilație, dacă aparatul este împins prea aproape de un perete.

Rețineți că indicația noastră este un spațiu liber de minim 100 mm în spatele aparatului pentru a asigura un flux suficient de aer.



1. Localizați orificiul din stânga Ø15 mm din capacul motorului de pe spatele aparatului. Împingeți un dispozitiv de protecție în gaură

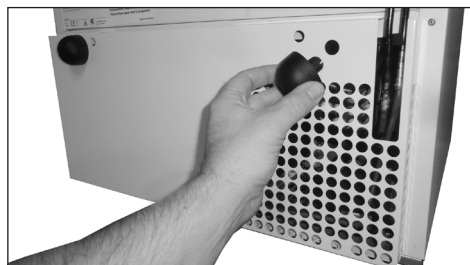

2. Apoi localizați orificiul identic din partea dreaptă a capacului motorului și împingeți ultima protecție în această gaură.

Amenajare interioara

Raft din oțel inoxidabil

Rafturile sunt demontabile, iar poziția pe înălțime este reglabila.

Demontarea


Raftul este demontabil fără a folosi unelte:



Ridicați pentru a elibera toate cârligele și trageți raftul într-o parte. Apoi înclinați raftul în sus în partea liberă și ridicați-l

Remontare în noua poziție de înălțime

Raftul este remontat urmând câțiva pași simpli:

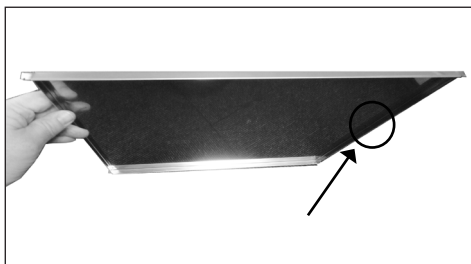


1. Cârligele raftului sunt cele mai mici în marginea din spate.

Asigurați-vă că direcția raftului este corectă, asigurându-vă că „jumătate de lună” mică perforată este plasată în partea dreaptă



2. Așezați o parte a cârligelor raftului în noua poziție de înălțime

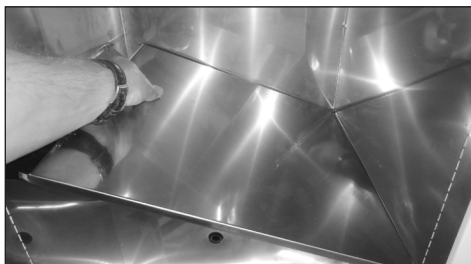

Apăsați ușor cârligele în găuri



Nivelați raftul și glisați cârligele în partea opusă a găurii. Apăsați în jos pentru a vă asigura că toate cârligele au căzut la locul lor

Ușă reversibilă



1. Pentru o schimbare din partea balamalei, opriți alimentarea principală și așezați aparatul pe o masă. Protejați partea superioară de zgârieturi.




2. Slăbiți și scoateți șuruburile superioare vizibile (folosește cheia Allen de 3 mm + unealta Torx 20)



3. Deschideți ușa pentru a avea acces.




4. Scoateți cele trei șuruburi de sub panoul superior (folosește cheia Allen de 3 mm)

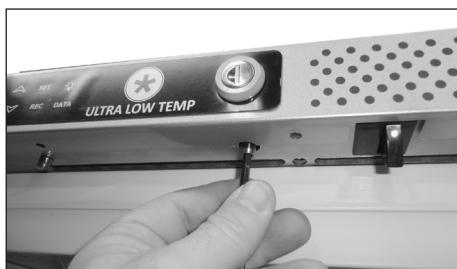


5. Scoateți știftul de blocare (utilizați cheia hexagonală de 4 mm)



6. Trageți cu atenție panoul superior...

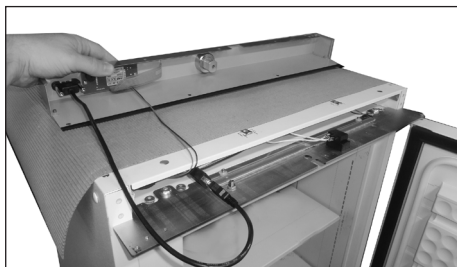


7... și puneți-l cu susul în jos pe blatul dulapului

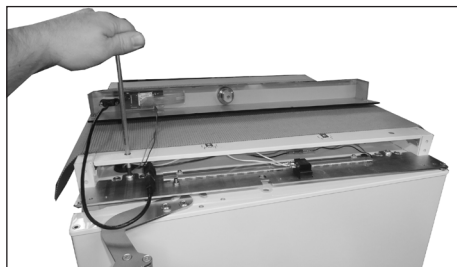

8. Slăbiți 2 * șuruburi M8 aprox. 5 mm (utilizați cheia hexagonală de 5 mm)




9. Slăbiți piulița pivot (utilizați o cheie de 10 mm)

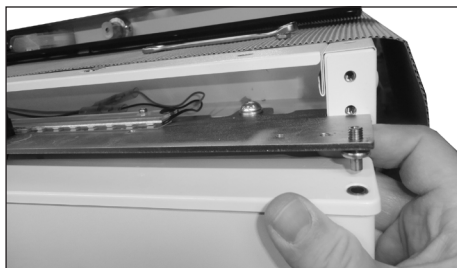


10. Ridicați suportul superior/pivotul. Trageți ușa și ridicați-o de pe pivotul inferior



11. Eliberare prin pivotul superior
(utilizați cheia hexagonală de 2,5 mm dacă este necesar)

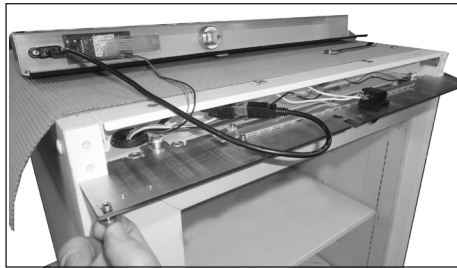


12. Remontați pivotul în noua parte a balamalei

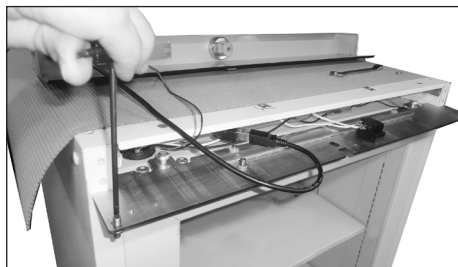


13. Strângeți pivotul (cheie hexagonală de 2,5 mm)



14. Strângeți piulița pivotului

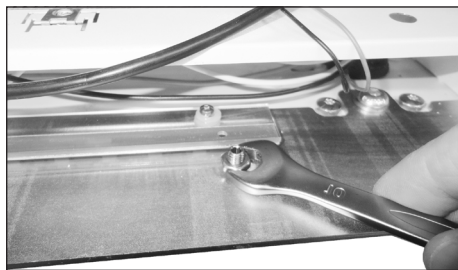

15. Demontați piulița de fixare și știftul de blocare a mânerului superior

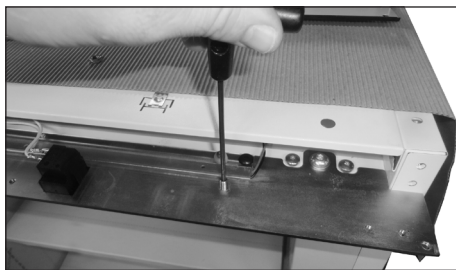

16. Remontați știftul de blocare a mânerului superior în partea opusă. Strângeți din nou piulița de fixare




17. Mergeți în jos și scoateți șaiba din nylon cu pivotul ușii




18. Scoateți cele două picioare din față




19. Scoateți placa inferioară a știftului de blocare a mânerului slăbind două șuruburi (utilizați cheia hexagonală de 4 mm)

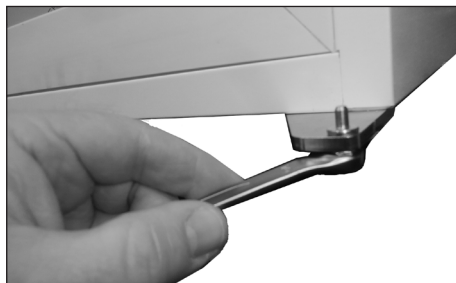

20. Slăbiți piulița pivotului inferioară

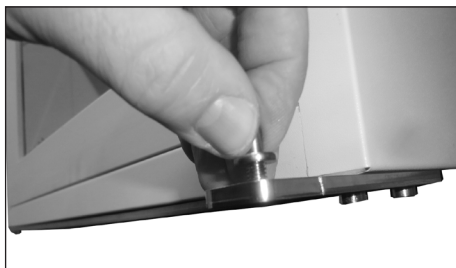

21. Slăbiți prin pivotul inferior

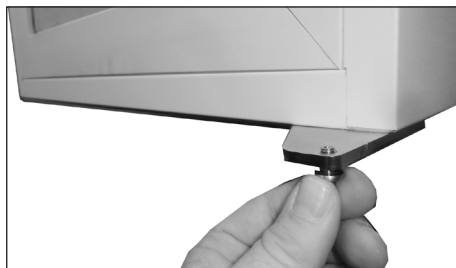


22. Remontați pivotul ușii pentru utilizare pe partea nouă a balamalei




23. Strângeți pivotul




24. Remontați și strângeți piulița pivot

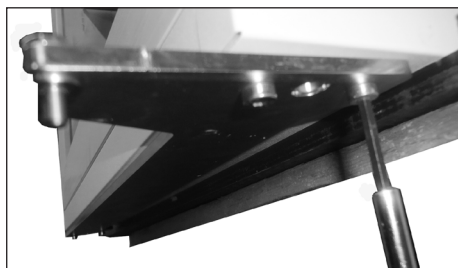

25. Slăbiți șuruburile suportului de jos al ușii dintr-o parte (utilizați cheia hexagonală de 4 mm)

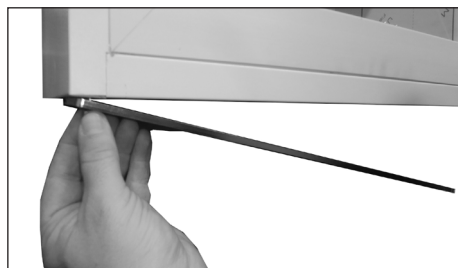

26. Slăbiți șuruburile din partea opusă și rotiți suportul inferior al ușii

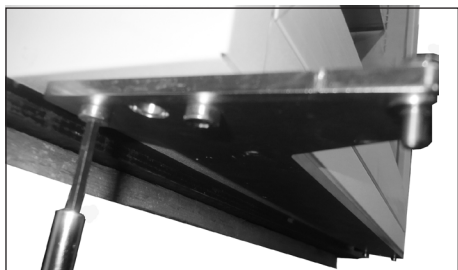

27. Apoi remontați și strângeți șuruburile pe ambele părți



28. Repoziționați șaiba din nylon cu pivotul ușii




29. Remontați placa de blocare a mânerului de jos în partea opusă strângând din nou cele două șuruburi (utilizați cheia hexagonală de 4 mm)



30. Remontați și strângeți cele două picioare din față



31. Mergeți la fundul actual al ușii și demontați două șuruburi din închiderea ușii (utilizați instrumentul Torx 20)

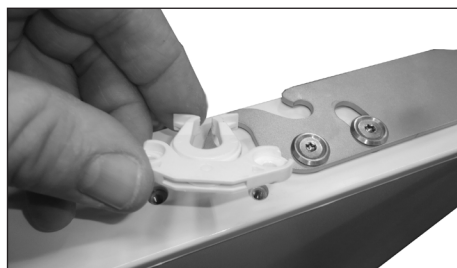


32. Scoateți închiderea ușii și păstrați-l gata pentru montare în partea inferioară a ușii „nouă”.




33. Remontați cele două șuruburi fără închiderea ușii



34. Rotiți ușa

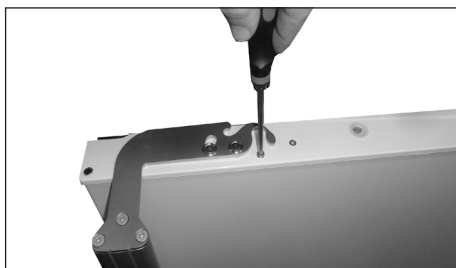

35. Deșurubați cele două șuruburi de închidere a ușii din acest capăt de jos nou al ușii (utilizați unealta Torx 20)

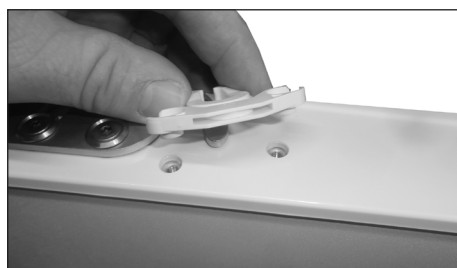

36. Așezați închiderea ușii în orificiile goale pentru filet



37. Remontați cele două șuruburi și închiderea ușii este fixată



38. Relocați ușa de pe dulap în noua parte a balamalei



39. Strângeți cele două șuruburi M8 din suportul superior



40. Împingeți cu grijă panoul superior înapoi în poziție



41. Remontați cele trei șuruburi în sus în panoul superior...



42. rețineți și rețineți că șurubul din apropierea pivotului ușii de sus este montat în orificiul nr.2 spre interior, pentru a asigura spațiu suficient între șurub și capacul ușii în timpul montării



43. Remontați știftul de blocare



44. Remontați cele patru șuruburi superioare



45. Operațiunea de refacere a ușii este acum încheiată

Controlor. Funcționare și funcționare

Interfața cu utilizatorul



LED-uri

Fiecare funcție LED este descrisă în tabelul următor.

LED	MODĂ	Funcție
	PE	Compresor activat
	Intermitent	Întârziere anti-ciclu scurt activată
	PE	Are loc o alarmă
	PE	Înregistrare activată
	PE	Bateria este complet încărcată
	Intermitent	Bateria este în curs de încărcare
	Intermitent	Problemă de încărcare sau defecțiune a bateriei
°C/°F	PE	Unitate de masura
°C/°F	Intermitent	Faza de programare

Butoane

A STABILIT	Pentru a afișa punctul de referință țintă; în modul programare selectează un parametru sau confirmă o operație.
	Pentru a intra în meniul de acces rapid În modul de programare parcurge codurile parametrilor sau mărește valoarea afișată. (JOS); n modul de programare
	eun modul de programare parcurge codurile parametrilor sau scade valoarea afisata. Apăsăți-l timp de 3 secunde pentru a începe o dezghețare manuală
DATE	Exportați datele de pe butonul
	Pentru a stinge lumina din ușă (doar modelele cu lumina in usa)
REC	Activare și dezactivare jurnal de la buton (protejat cu parolă)

Cum să vedeți și să modificați valoarea de referință

Cum să: Vezi punctul de referință

1. Apăsăți și eliberați imediat tasta SET: afișajul va afișa valoarea Set point.
2. Apăsăți și eliberați imediat tasta SET sau așteptați 60 de secunde pentru a afișa temperatura din unitate

Cum să: Schimbați punctul de referință

1. Apăsăți tasta SET mai mult de 2 secunde pentru a modifica valoarea punctului de referință.
2. Va fi afișată valoarea punctului de referință și LED-ul „° C” va începe să clipească.
Pentru a modifica valoarea setată, apăsăți săgețile SUS sau JOS în 60 de secunde.
4. Pentru a salva noua valoare a punctului de referință, apăsăți din nou tasta SET și așteptați 3 secunde.

NOTĂ: Pentru a ieși fără a modifica valoarea de referință, apăsăți tasta SET sau așteptați 60 de secunde.

Setările ceasului și resetarea alarmei RTC RESET

Apăsați tasta SUS o dată pentru a accesa meniul.

2. Afișajul arată H0, apoi apăsați SET.

3. Apar parametrii pentru setarea orei și datei. Pentru a seta parametrul, apăsați SET, apăsați butonul SUS sau JOS pentru a schimba parametrul. Confirmați apăsând SET.

Parametrii orei și datei: Hur:

oră

: În: minute

Udy: zi lucrătoare

ziua întâlnirii

:Pe: luna

da: an

A iese: presa SET + UP tastele timp de aproximativ 10 sec. sau așteptați 60 de secunde.

Cum să exportați date și alarme pe USB

1. Introduceți USB cheie

2. Apăsați butonul DATE tasta mai mult de 3 sec.

3. Controllerul începe să încarce date în USB

4. La final va fi afișat următorul mesaj:

A. "Sfârșit,, Dacă totul este în regulă

b. "Err,, Dacă exportul nu a avut loc.

Alarme

Controlerul memorează ultimele 100 de alarme apărute, împreună cu ora de începere și de sfârșit. Este posibil să exportați alarmele așa cum este descris în capitolul anterior.

Alarmă activă

Controlerul va afișa alarma activă alternată cu temperatura din interiorul unității.

Semnale de alarma

Mesaj	Cauză
„P1”	Eșecul sondei de reglare TR3
„HA1”	TR3 Alarmă înaltă
„LA1”	TR3 Alarmă scăzută
„EA”	Alarmă ușă deschisă
„CA”	Alarmă gravă

Mesajul de alarmă este afișat până când starea de alarmă este recuperată.

Toate mesajele de alarmă sunt afișate alternativ cu temperatura din unitate. Cu excepția „P1” care clipește.

Dezghețare, curățare și întreținere

Dezghețare:

Articolele depozitate în congelator și umiditatea aerului din jur provoacă treptat formarea de îngheț și gheață în interiorul congelatorului. Un strat subțire de îngheț sau gheață nu afectează performanța congelatorului, dar cu cât stratul este mai gros, cu atât este mai mare consumul de energie.

Nu folosiți niciodată aparate electrice sau unelte ascuțite, deoarece acestea pot deteriora interiorul aparatului.

Dezghetare rapida:

Cantități mici de îngheț pot fi îndepărtate folosind o racletă de plastic.

Dezghețarea trebuie efectuată în mod regulat pentru a preveni formarea gheții.

Forma de gheață depinde de utilizarea congelatorului. Cu cât se deschide mai multe uși zilnic - cu atât mai multă dezghețare manuală.

prin deschidere / închide la 24 de ore	Sfatuit lunar dezghetare manuala
<5	1-2
<10	2-4
<15	4-6



Este important să curățați supapa de eliberare a vidului fără gheață ca parte a procesului de dezghețare manuală.

Dezghețare completă:

Când stratul de îngheț și gheață depășește 4-5 mm congelatorul trebuie dezghețat complet. Se recomandă ca dezghețarea să fie efectuată atunci când nu există articole depozitate în congelator.

Procedați după cum urmează:

1. Deconectați sursa de alimentare.
2. Puneți un vas cu apă fierbinte (dar nu clocotită) în congelator, închideți ușa și așteptați cca. Cu 30 de minute înainte de a îndepărta înghețul liber cu racleta de plastic.

Pentru a preveni deteriorarea podelei prin apă în timpul dezghețării, este recomandabil să acoperiți podeaua în jurul congelatorului pentru a vă proteja împotriva gheții și a stropilor. Când toată gheața și gheața s-au topit, curățați interiorul aparatului folosind apă cu un detergent blând, fără parfum. Uscați congelatorul cu o cârpă moale.

4. Puneți articolele în congelator când temperatura necesară a fost atinsă.

Curatenie si mentenanta

Înainte de curățare, deconectați sursa de alimentare și îndepărtați toate fittingurile slăbite.

Aparatul este cel mai bine curățat folosind apă caldă (max. 65 ° C) cu puțin detergent blând, fără parfum. Nu utilizați niciodată agenți de curățare care curățează. Utilizați o cârpă moale. Clătiți cu apă curată și uscați bine. Este important să împiedicați intrarea apei în panoul de control.

Benzile de etanșare din jurul ușii trebuie curățate în mod regulat pentru a preveni decolorarea



și prelungeste durata de viață. Folosiți apă curată. După curățarea benzii de etanșare, verificați dacă aceasta continuă să asigure o etanșare etanșă.

Se recomandă curățarea sârmei și a condensatoarelor tubulare din spatele aparatului.

Condensatorul, compresorul și compartimentul compresorului trebuie de asemenea menținute fără praf și murdărie. Curățați-l în mod regulat cu un aspirator.

OBS: Dacă aparatul nu va fi folosit pentru o perioadă lungă de timp, opriți-l, deconectați sursa de alimentare, goliți-l, curățați interiorul și lăsați ușa deschisă pentru a permite circulația aerului și a preveni mirosurile.

Depistarea defecțiunilor

Vina	Cauza posibila	Remediu
Ecranul tastaturii nu este aprins.	Pana de curent; siguranța este arsă; aparatul nu este conectat corect, curentul este întrerupt.	Verificați dacă alimentarea este conectată. Resetați siguranța
Temperatura în congelator prea sus	Grila de ventilație este blocată. Ușa nu este închisă corect. Cantitatea de articole introduse în congelator la un moment dat este mai mare decât capacitatea aparatului. Strat gros de îngheț și gheață. Setarea temperaturii este prea mare	Asigurați circulația nestingherită a aerului Închideți ușa și așteptați câteva ore Așteptați câteva ore Dezghețați congelatorul. Reduceți setarea temperaturii.
Temperatura în congelator prea jos.	Setarea temperaturii este prea scăzută	Ridicați setarea temperaturii
Vibrații sau deranj-ceva zgomot	Aparatul nu este la nivel.	Nivelați aparatul (Pentru modelul cu picioare reglabile: utilizați o nivelă cu bulă de aer)
Compresorul funcționează continuu.	Setarea temperaturii este prea scăzută. Temperatura camerei prea mare.	Ridicați setarea temperaturii. Asigurați o ventilație adecvată
Afișajul sau jurnalul de alarmă arată eroarea „RTC”.	Data și ora nu sunt setate.	Vă rugăm să setați data și ora

Garantie, piese de schimb si service

Renunțare la garanție

Defecțiuni și daune cauzate direct sau indirect de operare incorectă, utilizare greșită, întreținere insuficientă, construcție, instalare sau conexiune incorectă la rețea. Incendiu, accident, fulger, variații de tensiune sau alte interferențe electrice, inclusiv siguranțe defecte sau defecțiuni la instalațiile de rețea.

Reparațiile efectuate de alții decât centrele de service autorizate și orice alte defecțiuni și daune pe care producătorul le poate dovedi sunt cauzate din alte motive decât defecțiunile de fabricație sau materiale nu sunt acoperite de garanție.


Vă rugăm să rețineți că modificările aduse construcției aparatului sau modificările echipamentelor componente ale aparatului vor anula garanția și răspunderea pentru produs, iar aparatul nu poate fi utilizat în mod legal. Aprobarea menționată pe plăcuța de identificare va fi, de asemenea, invalidată.

Daunele de transport descoperite de cumpărător sunt în primul rând o chestiune care trebuie soluționată între cumpărător și distribuitor, adică distribuitorul trebuie să se asigure că astfel de reclamații sunt soluționate spre satisfacția cumpărătorului.

Înainte de a apela la asistență tehnică, vă rugăm să verificați dacă puteți remedia singur defecțiunea. Dacă cererea dumneavoastră de asistență este nejustificată, de exemplu dacă aparatul a eșuat ca urmare a unei siguranțe arsurii sau a unei funcționări incorecte, vi se vor percepe costurile suportate de apelul dumneavoastră pentru asistență tehnică.

Piese de schimb

Când comandați piese de schimb, vă rugăm să precizați tipul, seria și numerele de produs ale aparatului dumneavoastră. Aceste informații sunt date pe plăcuța cu date tehnice. Plăcuța cu date tehnice conține diverse informații tehnice, inclusiv tipul produsului și numerele de serie.

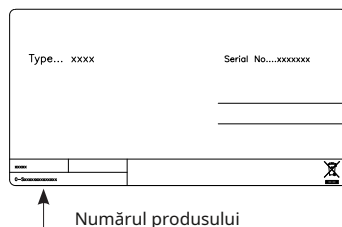

Eliminare

Informații pentru utilizatori cu privire la colectarea și eliminarea echipamentelor vechi și a bateriilor uzate



Aceste simboluri de pe produse, ambalaje și/sau documentele însoțitoare înseamnă că produsele electrice și electronice și bateriile uzate nu trebuie amestecate cu deșeurile menajere generale. Pentru tratarea, recuperarea și reciclarea corespunzătoare a produselor vechi și a bateriilor uzate, vă rugăm să le duceți la punctele de colectare aplicabile, în conformitate cu legislația națională și cu Directivele 2002/96/CE și 2006/66/EC.

Aruncând aceste produse și baterii în mod corect, veți contribui la economisirea resurselor valoroase și la prevenirea oricăror efecte negative potențiale asupra sănătății umane și asupra mediului care altfel ar putea apărea din manipularea necorespunzătoare a deșeurilor.

Pentru mai multe informații despre colectarea și reciclarea produselor și bateriilor vechi, vă rugăm să contactați municipalitatea locală, serviciul de eliminare a deșeurilor sau punctul de vânzare de unde ați achiziționat articolele.

Se pot aplica sancțiuni pentru eliminarea incorectă a acestor deșeuri, în conformitate cu legislația națională.



Pentru utilizatorii de afaceri din Uniunea Europeană.

Dacă doriți să aruncați echipamentele electrice și electronice, vă rugăm să contactați dealerul sau furnizorul pentru mai multe informații.

Informații privind eliminarea în alte țări din afara Uniunii Europene

Aceste simboluri sunt valabile numai în Uniunea Europeană. Dacă doriți să aruncați acest produs, vă rugăm să contactați autoritățile locale sau dealerul și să solicitați metoda corectă de eliminare.

Notă pentru simbolul bateriei:



Acest simbol poate fi utilizat în combinație cu un simbol chimic. În acest caz, respectă cerințele stabilite de directivă pentru substanța chimică implicată.

Ne rezervăm dreptul de a modifica specificațiile fără notificare prealabilă.

Data revizuirii: 09-12-2015
Desen nr.: 80.60.234 rev 01