

# VICRYL® (Полиглактин 910)

Синтетический рассасывающийся  
многофиламентный шовный материал



**ETHICON**  
Johnson & Johnson SURGICAL TECHNOLOGIES

# VICRYL®

## (Полиглактин 910 с покрытием из Полилактина 370 и стеарата кальция)

VICRYL® – синтетический рассасывающийся шовный материал, широко применяющийся для аппроксимации мягких тканей и наложения лигатур, включая офтальмологические операции.

Многофиламентная нить обладает хорошими манипуляционными свойствами и надежно фиксирует узлы.



### Профиль рассасывания

Процесс рассасывания происходит путем гидролиза. Благодаря реакции гидролиза, у нити VICRYL® в течение срока имплантации в ране уменьшается показатель прочности на разрыв. Дает возможность комфортно работать даже в условиях ограниченного доступа.

Дни имплантации	Остаточная прочность (для нитей 6/0 и больше)
14 суток	75%
21 суток	50%
28 суток	25%

Рассасывание VICRYL® обычно происходит между 56 и 70 сутками.  
Хирургические иглы

Хирургические иглы преимущественно изготовлены из специального сплава ETHALLOY\*, который обеспечивает на 40% большую устойчивость к деформации, по сравнению с обычной хирургической сталью<sup>2</sup>.

Многие иглы имеют продольные насечки на корпусе, что обеспечивает надежную фиксацию иглы в иглодержателе и дает возможность работать даже в ограниченном доступе.

\* Эталлой

# J371H

**Product Name**  
 COATED VICRYL® (polyglactin 910) Suture

Quick View	
Product Category	Wound Closure

Device image

**1** **J371H**

(4.0 metric)  
**36" (90 cm)**

Coated  
**VICRYL\***  
 (Polyglactin 910) Suture  
 VIOLET BRAIDED

**CTX**  
 48 mm 1/2c  
 Taper

3 DOZEN

LOT

EXP

**ETHICON**

Disclaimer: Needle sizes displayed on the Ethicon Product Center may vary depending on computer/tablet/smartphone screen ratios.


Additional Specifications	
Description	1 COATED VICRYL VIOLET 1X36" CTX
Brand	COATED VICRYL
Suture Size	1
Length	36in
Color	VIOLET
Control	NO
Material/Composition	POLYGLACT* 910
Category	Wound Closure
Needle Image	
QTY/BX	36
Absorbability	ABSORBABLE
Absorption Rate	56-70 DAYS
Directionality	UNIDIRECTIONAL
Pledget	NO
Pledget Size	NA
Needle Name	CTX
Needle Color	SILVER
Needle Length (mm)	48mm
Strands Per Pack	1
Pack Strand/Length	1 x 36in
Needle Point Type	 (TAPER POINT)


Alternative Products

# J324H

**Product Name**  
VICRYL™

Quick View	
Product Category	Wound Closure
Product Group	Sutures Résorbables

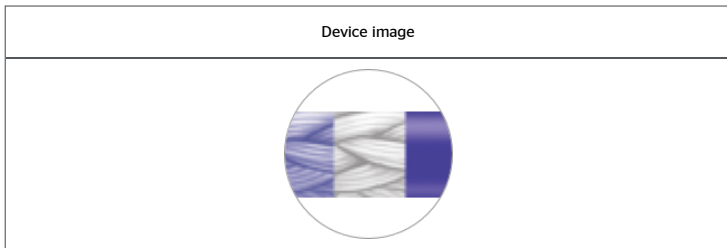

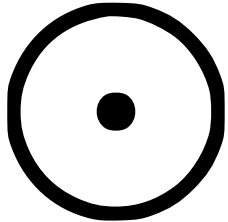Additional Specifications	
Description	VICRYL™ 70 cm USP 0
Brand	VICRYL™
Suture Size	0
Length	70 cm
Color	Violet
Material/Composition	Polyglactine 910 enduit de polyglactine 370, stéarate de calcium
Category	Wound Closure
Quantity / Box	36
Suture Construction	Tressé
Absorbability	Résorbable
Pledget	Non
Needle Name	MH
Suture Color	ARGENTÉ
Needle Point Type	 (TAPERPOINT)

© Johnson & Johnson Medical N.V., Belgium 2020.

This site is published by Johnson & Johnson Medical N.V., Belgium which is solely responsible for its contents and is intended for EMEA audiences only.

This site is intended for Healthcare Professionals. If you are a patient, it is important that you discuss information about the benefits and risks of products with your doctor.

Last updated March 26, 2020. The third-party trademarks used herein are trademarks of their respective owners. Data and usage fees may apply. See your carrier for more information.

[News](#)

[Careers](#)

[Contact us](#)

[Johnson & Johnson Institute](#)

[Legal notice/terms and conditions](#)

[Privacy policy](#)

[Cookie Policy](#)

[Cookie Settings](#)

**J&J Customer Connect**

# PROLENE® (Полипропилен)

Синтетический нерассасывающийся  
монофиламентный шовный материал



**ETHICON**  
Johnson & Johnson SURGICAL TECHNOLOGIES

# PROLENE® (Полипропилен)



- Игла EVERPOINT® – новый качественный уровень игл для сердечно-сосудистой хирургии. Сплав EVERPOINT® с сочетанием со специальной геометрией и силиконовым покрытием обеспечивает значительно большую остроту иглы, прочность, устойчивость к деформации даже в самых сложных хирургических ситуациях<sup>1</sup>.
- Игла BV-175\* – решение для коронарной хирургии. Диаметр иглы на 24% меньше аналогов, что обеспечивает минимальное отверстие прокола, снижение травмы артерии и риска кровотечения<sup>3</sup>.
- Игла СС\*\* для кальцинированных сосудов. Колющая игла имеет режущие микрограницы на кончике, что обеспечивает легкий прокол кальцификата или твердой стенки сосуда, не травмируя стенку сосуда при дальнейшем проведении иглы<sup>3</sup>.

## Нерассасывающийся

Обеспечивает постоянную прочность на разрыв в тканях.

## Гладкий

Обеспечивает легкое скольжение через ткань, не травмируя ее. Гладкая поверхность нити препятствует контаминации бактериями.

## Контролируемое линейное натяжение нити

Нить имеет «систему раннего оповещения». Перед разрывом шовный материал перестает растягиваться, информируя хирурга о чрезмерном усилии.

## Пластичность узла

Нить Prolene® обеспечивает минимальный диаметр узла за счет своих пластических свойств.

## Инновационные иглы

Нить Prolene® имеет наиболее полную линейку современных высокотехнологичных игл:

- Игла HEMO-SEAL<sup>§</sup>. Соединение иглы и нити HEMO-SEAL значительно снижает риск кровотечения в местах прокола. Это особенно актуально при работе на сосудах с большим давлением, а также при использовании сосудистых протезов<sup>4</sup>.
- Игла VISI BLACK<sup>†</sup>. Черный цвет иглы препятствует бликованию иглы и способствует ее лучшей видимости в операционном поле.
- Игла PRIME<sup>‡</sup>. Специальная форма сечения режущих и обратнорежущих игл, при которой значительно снижается площадь режущих граней, обеспечивает косметический эффект кожного шва.
- Иглы ETHIGUARD<sup>††</sup>. Специальный зауженный кончик тупоконечных игл позволяет избежать прокола хирургической перчатки. При этом кончик иглы достаточно острый, чтобы легко проходить через мышечные и паренхиматозные ткани с минимальной травмой.

\* БиВи-175

\*\* СиСи















§ ГЕМО-СИЛ

† Визи Блэк

‡ Прайм

†† Этигард








## КОЛЮЩАЯ ИГЛА, 3/8 ОКРУЖНОСТИ

Длина и описание иглы	Длина нити, см	Толщина нити					Кол-во в коробке
		6/0 (M0,7)	7/0 (M0,5)	8/0 (M0,4)	9/0 (M0,3)	10/0 (M0,2)	
⊙ <b>BV75-3</b> (3,8 мм) 	13					W2790 ■	12
⊙ <b>BV130-4</b> (5,0 мм) 	13				W2780 ■		12
⊙ <b>BV100-4</b> (5,1 мм) 	13				W2783 ■	W2794 ■	12
⊙ <b>BV100-4</b> (5,1 мм) 	45				F1891 ■		12
⊙ <b>BV130-5 MP</b> (6,5 мм) 	13			W2775 ■			12
⊙ <b>BV130-5 MP</b> (6,5 мм) 	10			NP0137 ■			36
	45			W2777 ■			12
	60			F1890 ■			36
⊙ <b>BV130-5 EVERPOINT</b> (6,5 мм) 	45			EP8730H ■			36
	60			EP8732H ■			36
⊙ <b>BV175-6</b> (8 мм) 	60		8735H ■	8741H ■			36
⊙ <b>BV175-6 VB</b> (8 мм) <b>VISI Black</b> 	60		8335H ■	8841H ■			36
⊙ <b>BV175-6 EVERPOINT</b> (8 мм) 	60		EP8735H ■	EP8741H ■			36
⊙ <b>BV175-7 MP</b> (8 мм) 	60		8766H ■				36
⊙ <b>BV175-7 EVERPOINT</b> (8 мм) 	60		EP8766H ■				36
⊙ <b>BV175-8 MP</b> (9,3 мм) 	60		W8702 ■				12
⊙ <b>BV175-8 EVERPOINT</b> (9 мм) 	60		EP8747H ■				36
⊙ <b>BV175-8 MP</b> (9,3 мм) прямая упаковка	4x60		W8702S ■				12

■ - синяя нить

\*соединение нити и иглы HEMO-SEAL

## КОЛЮЩАЯ ИГЛА, 3/8 ОКРУЖНОСТИ

Длина и описание иглы	Длина нити, см	Толщина нити				Кол-во в коробке
		5/0 (M1)	6/0 (M0,7)	7/0 (M0,5)	8/0 (M0,4)	
Ⓜ <b>CC175-6 VB</b> (8 мм) <b>VISI Black</b> 	60				W8101 ■	12
Ⓜ <b>CC175-8 EVERPOINT</b> (9,3 мм) 	60				EP7972H ■	36
Ⓜ <b>EVERPOINT CC</b> (9,3 мм) 	60		EP8807H ■			36
Ⓜ <b>CC</b> (9,3 мм) 	60				EH7972E ■	24
		W8662* ■		W8704 ■		12
	75			EH7236H ■		36
Ⓜ <b>CC175-8 MP</b> (9,3 мм) 	60		W8807 ■		W8703 ■	12
	75		F1832 ■			36
Ⓜ <b>CC-11 MP</b> (11 мм) 	60		W8802 ■	W8801 ■		12
Ⓜ <b>CC-1 MP</b> (13 мм) 	60		W8707 ■	W8813 ■		12
	75	W8721 ■	W8814 ■			12

■ - синяя нить


\*соединение нити и иглы HEMO-SEAL



# W8770G

**Product Name**  
 PROLENE Polypropylene Suture

Quick View	
Product Category	Ethicon Wound Closure

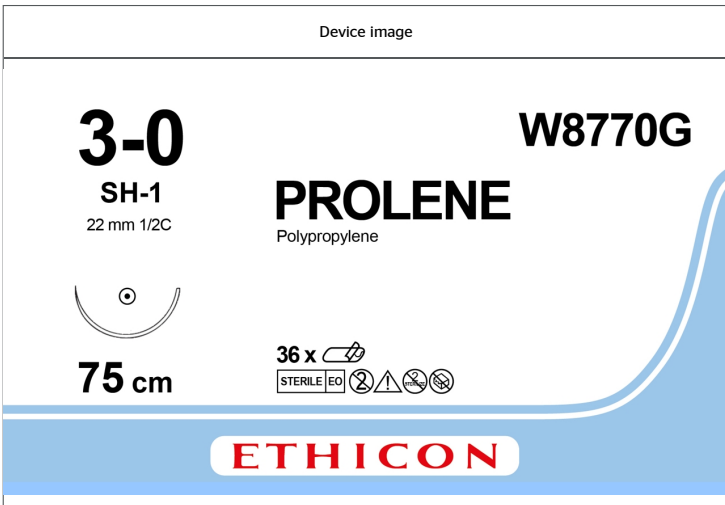

Additional Specifications	
Description	PROLENE
Brand	PROLENE
Size	3-0
Suture Size	3-0
Length	75cm
Color	Blue
Material/Composition	POLYPROPYLENE
Category	Ethicon Wound Closure
Needle Image	
Quantity / Box	12
Absorbability	NON ABSORBABLE
Directionality	UNIDIRECTIONAL
Pledget	FALSE
Needle Name	SH-1
Suture Color	Silver
Needle Length (mm)	22mm
Strands Per Pack	1
Needle Point Type	 (TAPERPOINT)

**DISCLAIMER**

Before using any medical device, review all relevant package inserts with particular attention to the indications, contraindications, warnings and precautions, and steps for use of the device(s). We are committed to providing you with the most recent and accurate product information and will update this site on an as needed basis.