

INTERVENȚIA DE URGENȚĂ

1



Pacientul reacționează?

2




Sunați la serviciile de urgență!

3



Pregătiți AED.

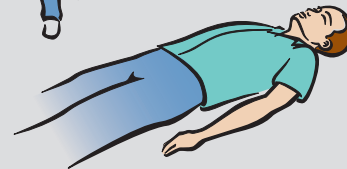

4




Puneți AED pe sol.
Deschideți capacul.

5




Îndepărtați îmbrăcămintea.
Descoperiți toracele.

6

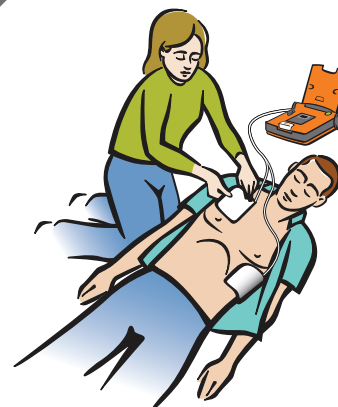

Atașați electrozii.

7

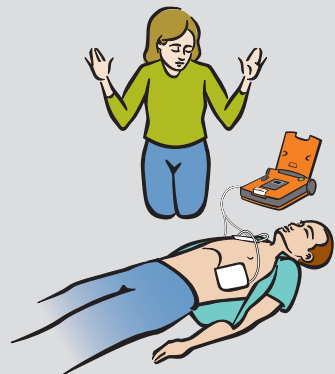


Nu atingeți pacientul.

8




Dacă este necesar, AED va
furniza șocul automat.

9

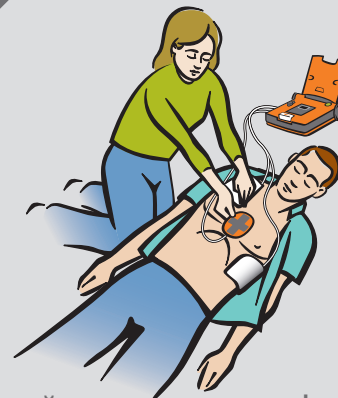

Dacă este prezent, plasați
dispozitivul de resuscitare
cardio-pulmonară (CPR).

10

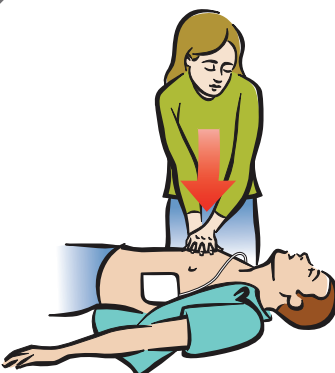

Urmați mesajele AED.
Efectuați compresii.

11



Dacă primiți instrucțiuni,
faceți respirație.

AED automat



Cardiac Science și logo-ul Shielded heart sunt
mărci comerciale ale Cardiac Science Corporation.

Copyright © 2012 Toate drepturile rezervate.

N7 W22025 Johnson Drive, Waukesha, WI 53186 USA
www.cardiacscience.com



MDSS GmbH
Schiffgraben 41
D-30175 Hannover
Germany



70-01092-44 A

