

Combinezon Medical de Protecție TIP 3-B/4-B

Descrierea produsului:

Combinezon de protecție laminat medical de unică folosință, fabricat din spunbond laminat, densitatea 60gr/m², cu bandă de protecție pe toată lungimea cusăturilor. Este prevăzut cu glugă, fermoar cu clapetă protectoare și bandă adezivă; și botoșei - parte integrată a combinezonului, adițional, o pereche de baltile laminate, elastic la glugă, mâneci, gleeze și în talie. Oferă o barieră eficientă împotriva fluidelor (impermeabil).

Instrucțiuni de utilizare:


Echipamentul se îmbracă peste haina de lucru. Se deschide fermoarul, se îmbracă începând cu picioarele, apoi se introduc mâinile în mânecile combinezonului și se aranjează corect terminațiile elastice, se poziționează gluga pe cap și, la final, se închide fermoarul și se fixează clapeta protectoare cu bandă adezivă.

Instrucțiuni de dezechipare:

Dezechiparea combinezonului se va efectua în zona desemnată, departe de poluare și pericole; se recomandă ajutorul unei alte persoane, evitând contaminarea pielii și a hainelor. Se îndepărtează cu grijă clapeta autoadezivă a fermoarului, se desface fermoarul și se scoate gluga costumului, asigurându-vă că mânușile nu ating interiorul costumului; ulterior, se scoate costumul definitiv. Se vor îndepărta mânușile în conformitate cu instrucțiunile producătorului și cu procedurile de siguranță. Se va arunca combinezonul într-un recipient adecvat pentru deșuri.


Instrucțiuni de depozitare:

Depozitarea se realizează în ambalajul original. A se păstra la temperatura cuprinsă între 0 °C și +20 °C; într-un loc uscat și curat, ferit de umiditate; departe de lumina directă a soarelui, de orice flacără, picături de apă și vapori de solvenți.

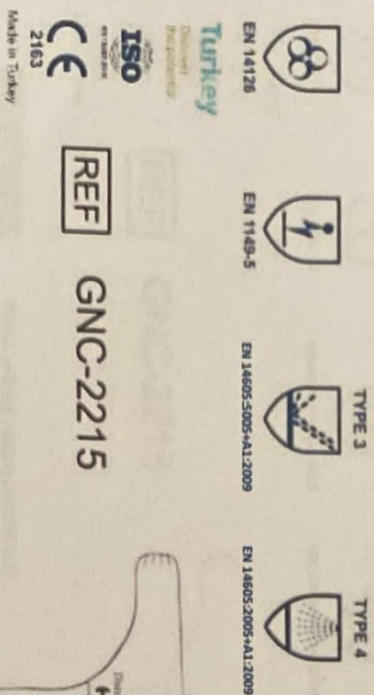


Reprezentant autorizat:

"Artbutic" SRL
Republica Moldova, MD-2023
mun. Chișinău, str. Uzinelor 8/1
E-mail: vivartoffice@gmail.com
Tel: +37369500084
+37369500057

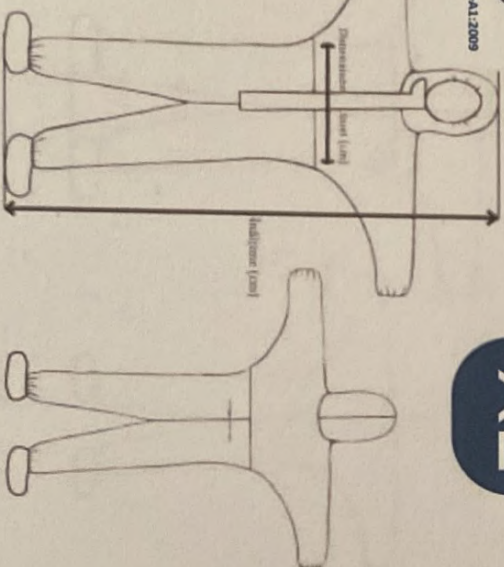

Număr de înregistrare: DM000305284

Mărime	Înălțimea (cm)	Dimensiune bust (cm)
L	172-176	130-136
XL	176-182	136-140
2XL	182-188	140-144
3XL	188-194	144-148

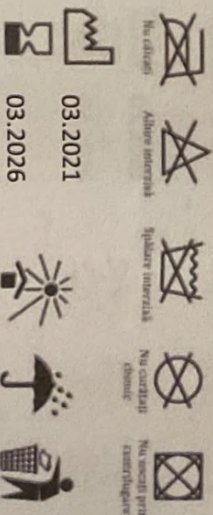

GENC TAAHHÜT GİYİM TEKSTİL
İNSAAT SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
Merkez: Refahiye Mah. 2/1, Sk. Solim Apt. Zemin Kat No:9/2
Tel: 0414 215 62 22 - Fax: 0414 217 16 36 Haliye/ŞURFA
Şube: General Ali Rıza Gürhan Cad. Merkez 15 Merkez No:2/21
Tel: 0212 482 1 50 - 5 50 0000 - Fax: 0212 482 7 53 Merkez/İSTANBUL
Tic. Sic. No: 273306 Şirket Sic. No: 273306 Şirket Sic. No: 273306
Mak: muhasabe@gencgiyim.com.tr - gencgiyim@icodul.com - www.gencgiyim.com.tr
Mersis No: 0833056322500011-Ş. Urfa Tic. Odası: 11430

GENC TAAHHÜT GİYİM TEKSTİL
İNSAAT SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
Adres: General Ali Rıza Gürhan Caddesi Merkez 15
Merkez No: 2/21 40080 Merkez İstanbul Turkey
Tel: +902124827150
e-mail: info@gencgiyim.com.tr

Protective Medical Coverall TYPE 3-B/4-B

Product description:

Disposable medical laminate protective coverall, made of laminated spunbond, density 60 gr / m², with protective tape along the entire length of the seams. It is provided with a hood; zipper with protective flap and adhesive tape; and protective shoes - an integral part of the coverall, additional, a pair of protective shoes with protective tape along the entire length of the seams; elastic at the hood, sleeves, ankles and waist. Provides an effective barrier against fluids (waterproof).

Instructions for use:

The equipment is worn over the work coat. The zipper opens, and the coverall is dressed starting with the feet, then the hands are inserted into the sleeves of the coverall, the elastic ends are arranged correctly, the hood is positioned on the head and, at the end, the zipper is closed and the protective flap is fixed with adhesive tape.

Undressing instructions:

The coverall will be undressed in the designated area, away from pollution and dangers; the help of another person is recommended, avoiding contamination of skin and clothing. Carefully remove the self-adhesive flap for the zipper, unzip the coverall and remove the hood making sure the gloves do not touch the inside of the coverall; then the coverall is totally removed. The gloves should be removed according to the manufacturer's instructions and with safety procedures. Dispose of the coverall in a suitable waste container.

Storage instructions:

Storage is done in the original packaging. Store at a temperature between 0 ° C and + 20 ° C; in a dry and clean place, away from moisture; away from direct sunlight, any flame, water droplets and solvent vapors.



EN 14126




EN 1149-5



EN 14605-5:2005+A1:2009



EN 14605-2:2005+A1:2009

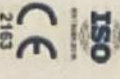

2163



GNC-2215

Made in Turkey




GENC TAHHÜT GİYİM TEKSTİL
İNŞAAT SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

Address: General Ati Rıza gıyım caddeşi merkezi 8
mahallesi no: 2/21 34098 merkezi İstanbul Turkey
Tel: +902124627150
E-mail: info@gencgiyim.com.tr


Authorized representative:

"ARTBUTIC" LLC
Uzinelor 8/1 str. Chişinău MD-
2023 Republic of Moldova,
E-mail: viviantoffice@gmail.com
Tel.: +37369500084
+37369500057

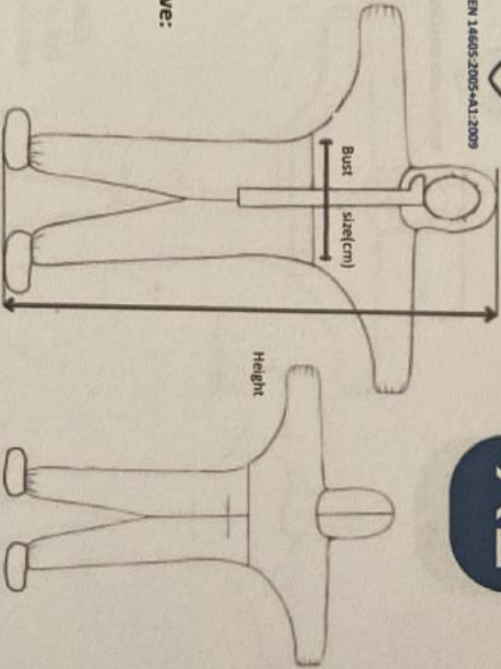

XL

Size	Height (cm)	Bust size(cm)
L	172-176	130-136
XL	176-182	136-140
2XL	182-188	140-144
3XL	188-194	144-148

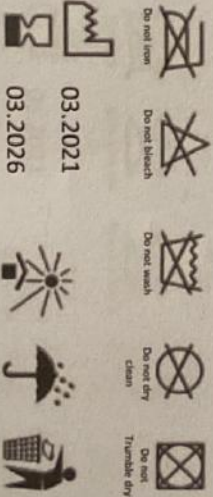

03.2021
03.2026

GENC TAHHÜT GİYİM TEKSTİL
İNŞAAT SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
Merkez: Refahiye Mah. 1. Sok. Selim Apt. Zemin Kat No:9/2
Tel: 0414 215 50 27 - Faks: 0414 217 15 36 Haliçliye/ŞURFA
Şube: General Ati Rıza Gıyım Cad. Merkez No:2/21
Tel: 0212 462 71 50 - Faks: 0212 462 71 53 Merkez/İSTANBUL
E-posta: info@gencgiyim.com.tr - www.gencgiyim.com.tr
Mik. muhasebe@gencgiyim.com.tr - Mik. muhasebe@krm.com.tr
Mersis No: 030300322500011-Ş.Ürta Tic. Odası: 11430

Combinezon Medical de Protecție TIP 3-B/4-B

Descrierea produsului:

Combinezon de protecție laminat medical de unică folosință, fabricat din spunbond laminat, densitatea 60gr/m², cu bandă de protecție pe toată lungimea cusurilor. Este prevăzut cu glugă, fermoar cu clapetă protectoare și bandă adezivă; și botosai - parte integrată a combinezonului, adițional, o pereche de babilie laminate, elastic la glugă, mâneci, gleeze și în talie. Oferă o barieră eficientă împotriva fluidelor (impermeabil).

Instrucțiuni de utilizare:


Echipamentul se îmbracă peste haina de lucru. Se deschide fermoarul, se îmbracă începând cu picioarele, apoi se introduc mâinile în mânecile combinezonului și se aranjează corect terminațiile elastice, se poziționează gluga pe cap și, la final, se închide fermoarul și se fixează clapeta protectoare cu bandă adezivă.

Instrucțiuni de dezachipare:

Dezechiparea combinezonului se va efectua în zona desemnată, departe de poluare și pericole; se recomandă ajutorul unei alte persoane, evitând contaminarea pielii și a hainelor. Se îndepărtează cu grijă clapeta autoadezivă a fermoarului, se desface fermoarul și se scoate gluga costumului, asigurându-vă că mânușile nu ating interiorul costumului; ulterior, se scoate costumul definitiv. Se vor îndepărta mânușile în conformitate cu instrucțiunile producătorului și cu procedurile de siguranță. Se va arunca combinezonul într-un recipient adecvat pentru deșeur.

Instrucțiuni de depozitare:

Depozitarea se realizează în ambalajul original. A se păstra la temperatura cuprinsă între 0 °C și +20 °C; într-un loc uscat și curat, ferit de umiditate; departe de lumina directă a soarelui, de orice flăcără, picături de apă și vapori de solvenți.

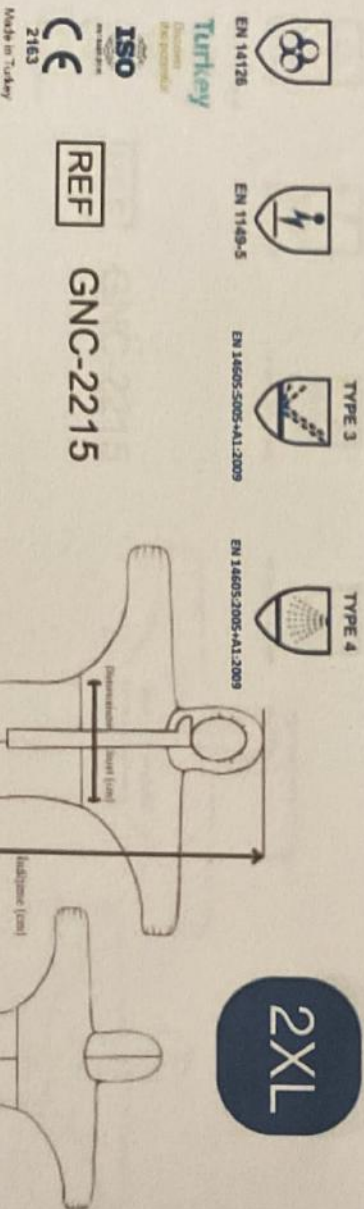


Număr de înregistrare: DM000305285

Mărimă	Înălțimea (cm)	Dimensiune bust (cm)
L	172-176	130-136
XL	176-182	136-140
2XL	182-188	140-144
3XL	188-194	144-148

GENC TAHHÜT GİYİM TEKSTİL
İNŞAAT SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
Adres: General Ali Paşa Garısı cad. no: 8/1
mukel no: 2/21 34098 merkezi İstanbul Turkey
Tel: +902124627130
e-mail: info@gencgiyim.com.tr

Reprezentant autorizat:
"Artbutic" SRL
Republica Moldova, MD-2023
mun. Chișinău, str. Uzinelor 8/1
E-mail: viviatroflice@gmail.com
Tel.: +37369500084
+37369500057

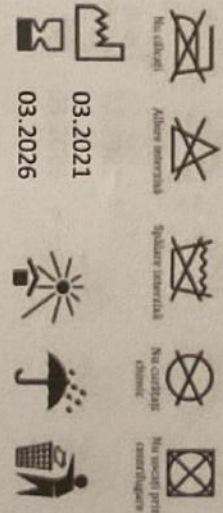

GENC TAHHÜT GİYİM TEKSTİL
İNŞAAT SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
Merkez: Fethiye Cad. No: 21, Sk. Solim Apt. Zemin Kat No: 9/2
Tel: 0414 215 62 72 Fax: 0414 217 16 26 Hattıye/ŞURFA
Sube: General Ali Paşa Garısı Cad. No: 8/1 Mukel No: 2/21 34098 Merkez/İSTANBUL
Tel: 0212 462 7130 - 51 30 00 00 0212 462 7130 0212 462 7130
E-mail: info@gencgiyim.com.tr
Mersis No: 0833003025000111-Ş. Urfa Tic. Odası: 11430

Combinezon Medical de Protecție TIP 3-B/4-B

Descrierea produsului:

Combinezon de protecție laminat medical de unică folosință, fabricat din spunbond laminat, densitatea 60gr/m², cu bandă de protecție pe toată lungimea cusăturilor. Este prevăzut cu glugă, fermoar cu clapetă protectoare și bandă adezivă, și botosei - parte integrală a combinezonului, adițional, o pereche de babilie laminate; elastic la glugă, mâneci, glezne și în talie. Oferă o barieră eficientă împotriva fluidelor (impermeabil).

Instrucțiuni de utilizare:

Echipamentul se îmbracă peste haina de lucru. Se deschide fermoarul, se îmbracă începând cu picioarele, apoi se introduc mâinile în mânecile combinezonului și se aranjează corect terminațiile elastice, se poziționează gluga pe cap și, la final, se închide fermoarul și se fixează clapeta protectoare cu bandă adezivă.

Instrucțiuni de dezechipare:

Dezechiparea combinezonului se va efectua în zona desemnată, departe de poluare și pericole; se recomandă ajutorul unei alte persoane, evitând contaminarea pielii și a hainelor. Se îndepărtează cu grijă clapeta autoadezivă a fermoarului, asigurându-vă că mânușile nu ating interiorul costumului; ulterior, se scoate costumul definitiv. Se vor îndepărta mânușile în conformitate cu instrucțiunile producătorului și cu procedurile de siguranță. Se va arunca combinezonul într-un recipient adecvat pentru deșeur.

Instrucțiuni de depozitare:

Depozitarea se realizează în ambalajul original. A se păstra la temperatura cuprinsă între 0 °C și +20 °C; într-un loc uscat și curat, ferit de umiditate; departe de lumina directă a soarelui, de orice flacără, picături de apă și vapori de solvenți.



EN 14126



EN 1149-5



TYPE 3



TYPE 4

EN 14605:2005+A1:2009

EN 14605:2005+A1:2009

Turkey

ISO

2163

CE

REF

GNC-2215


Made in Turkey

GENC Giyim

GENC TAHHÜT GİYİM TEKSTİL
İNSAAT SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
Adres: General Ali Rıza Apartmanı Kat: 8/1
Merkez No: 3211 3028 Merkez İstanbul Turkey
Tel: +90212427150
E-mail: info@gencgiyim.com.tr

Reprezentant autorizat:


"Artbuc" SRL
Republica Moldova, MD-2023
mun. Chișinău, str. Uzinelor 8/1
E-mail: vivartoffice@gmail.com
Tel: +37369500084
+37369500057

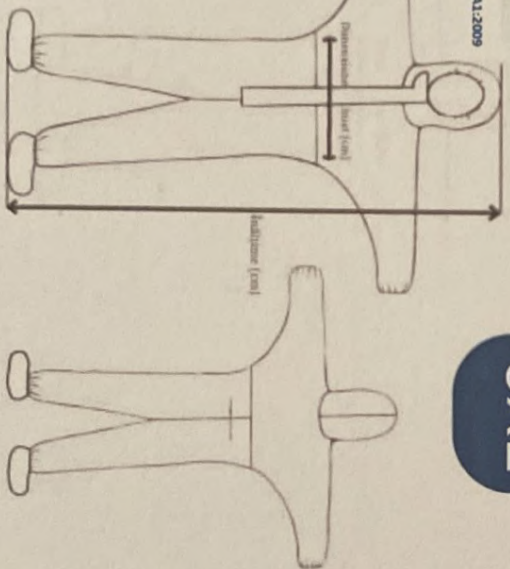

3XL

Număr de înregistrare: DM000305286

Mărime	Înălțimea (cm)	Dimensiune bust (cm)
L	172-176	130-136
XL	176-182	136-140
2XL	182-188	140-144
3XL	188-194	144-148

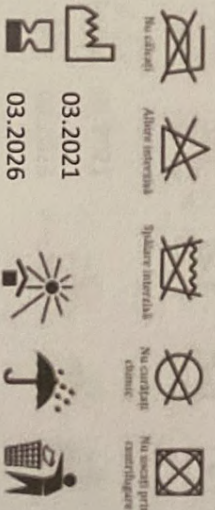

GENC TAHHÜT GİYİM TEKSTİL
İNSAAT SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
Merkez: Refahiyah Mah. 28. Sk. Selim Apt. Zemin Kat No:9/2
Tel: 0414 215 52 22 - Fax: 0414 215 52 25 Haliye/SURFA
Şube: General Ali Rıza Apartmanı Kat: 8/1 Merkez İş Merkezi No:2/21
Tel: 0212 462 11 50 - 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00
Topkurum Mah. No: 993 158 3225
Mail: muhasebe@gencgiyim.com.tr - info@gencgiyim.com.tr - www.gencgiyim.com.tr
Mersis No: 3393066322500011-Ş. Urfa Tic. Odası: 11430

Protective Medical Coverall TYPE 3-B/4-B

Product description:

Disposable medical laminate protective coverall, made of laminated spunbond, density 60 gr / m², with protective tape along the entire length of the seams. It is provided with a hood, zipper with protective flap and adhesive tape; and protective shoes - an integral part of the coverall, additional, a pair of protective shoes with protective tape along the entire length of the seams; elastic at the hood, sleeves, ankles and waist. Provides an effective barrier against fluids (waterproof).

Instructions for use:



The equipment is worn over the work coat. The zipper opens, and the coverall is dressed starting with the feet, then the hands are inserted into the sleeves of the coverall, the elastic ends are arranged correctly, the hood is positioned on the head and, at the end, the zipper is closed and the protective flap is fixed with adhesive tape.

Undressing instructions:

The coverall will be undressed in the designated area, away from pollution and dangers; the help of another person is recommended, avoiding contamination of skin and clothing. Carefully remove the self-adhesive flap for the zipper, unzip the coverall and remove the hood making sure the gloves do not touch the inside of the coverall; then the coverall is totally removed. The gloves should be removed according to the manufacturer's instructions and with safety procedures. Dispose of the coverall in a suitable waste container.

Storage instructions:

Storage is done in the original packaging. Store at a temperature between 0 ° C and + 20 ° C; in a dry and clean place, away from moisture; away from direct sunlight, any flame, water droplets and solvent vapors.

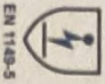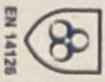

TYPE 3

TYPE 4



GNC-2215


Made in Turkey



GENC TAHHÜT GİYİM TEKSTİL
İNŞAAT SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
Adres: General Atilla Güran cadde merkezi
by merkezi no: 2/21 34090 merkezi İstanbul
Turkey Tel: +902124627150
e-mail: info@gencgiyim.com.tr

Authorized representative:


"ARTBUTIC" LLC
Uzinelor 8/1 str. Chişinău MD-
2023 Republic of Moldova,
E-mail: vivartoffice@gmail.com
Tel.: +37369500084
+37369500057

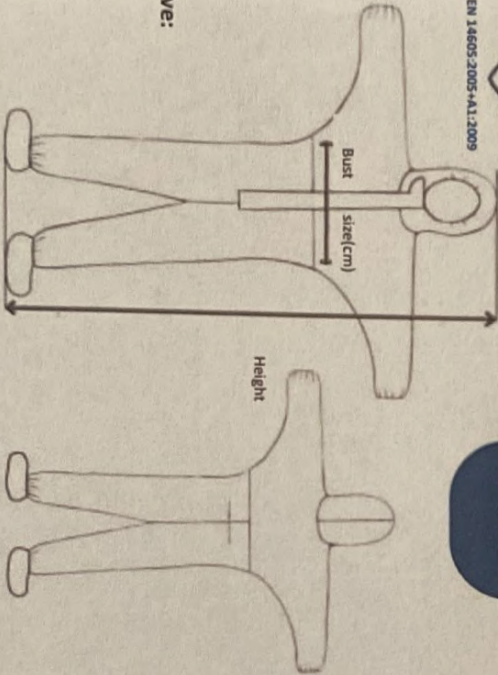

3XL

Registration number: DM000305286

Size	Height (cm)	Bust size(cm)
L	172-176	130-136
XL	176-182	136-140
2XL	182-188	140-144
3XL	188-194	144-148

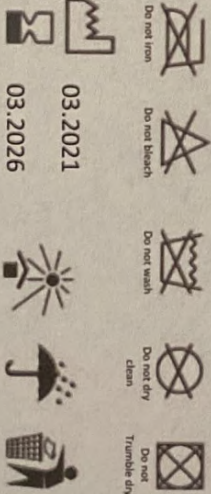

03.2021
03.2026

GENC TAHHÜT GİYİM TEKSTİL
İNŞAAT SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
Merkez: Republic Mh 2/1 Sk. Selim Apt. Zemin Kat No:9/2
Tel: 0414 215 02 22 - Fax: 0414 217 35 35 Halkıyev Ş. URFA
Şube: General Atilla Güran Cad. Merkezi No:2/21
Tel: 0212 462 71 50 - Fax: 0212 462 71 53 Merkezi/İSTANBUL
Tic. Sic. No: 27090 V.D.: 393 058 3225
Mail: muhasebe@gencgiyim.com.tr; gencgiyim@hotmail.com - www.gencgiyim.com.tr
Mersis No: 0393056322500011-Ş. Urfa Tic. Odası: 11430