


Instrucțiuni de utilizare pentru Lansator de lanțete și lanțete

Ver. 1.0 2018/5

AST-1000-151

Dispozitivul de înțepare vă permite să colectați sângele capilar de la vârful degetelor (și alte locuri alternative) ușor și practic fără durere.

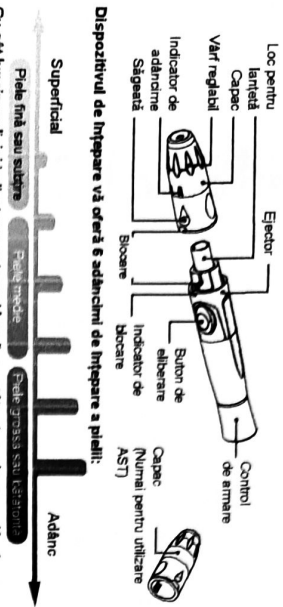

Dispozitivul de înțepare vă oferă 6 adâncimi de înțepare a pielii:

Superficial

Piele fină sau subțire


Cu cât lungimea liniei indicatoriare este mai lungă, cu atât este mai mare adâncimea de înțepare.

ATENȚIE


Pentru a reduce șansa de infecție:

- ▶ Nu împărtășiți niciodată cu altcineva dispozitivul de înțepare.
- ▶ Utilizați întotdeauna o lanțetă nouă, sterilă. Lanțetele sunt de unică folosință.
- ▶ Evitați urmele de sân, murdărie învârsu pe lanțete și dispozitivul de înțepare.
- ▶ Lanțeta utilizată poate fi potencialul bioperticulosă. Anunțați-o în conformitate cu reglementările locale.

Configurarea dispozitivului de înțepare

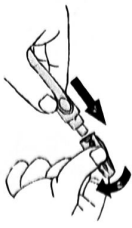

1. Rotiți și scoateți capacul dispozitivului de înțepare.

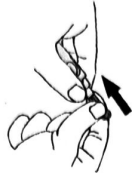

2. Introduceți o lanțetă în suportul pentru lanțete și împingeți-o ferm.



3. Rotiți discul de protecție al lanțetei.



4. Înlocuiți și răsuflați capacul pentru a închide blocarea, așa cum se arată în imagine, pînă cînd auziți clicul. Când blocarea este închisă corect, indicatorul de blocare se alină în extrema dreaptă.



5. Ținînd capacul, selectați adîncimea de înțepare prin rotirea vîrfului reglabil în ambele direcții, astfel încît săgeata de pe capac să indice adîncimea dorită.



6. Trageți capătul de armare înapoi pînă auziți un clic. Veți vedea o schimbare de culoare în rîndul butonului de eliberare. ▶ Dacă nu faceți clic, probabil dispozitivul a fost închis cînd a fost introdusă lanțeta.

NOTĂ

- Înainte de a colecta picătura de sînge:**
- ▶ Spălați-vă și uscați-vă mîinile înainte de a începe.
 - ▶ Selectați vârful de înțepare de la vârful degetului.
 - ▶ Frecați locul de înțepare timp de aproximativ 20 secunde înainte de frecare.
 - ▶ Curățați locul de înțepare folosînd tampon de bumbac umezită cu 70% alcool și lăsați-l să se usuce la aer.



7. Înțeparea degetului

Apăsați ferm vîrfurile dispozitivului de înțepare pe partea inferioară a degetului. Apăsați butonul de eliberare pentru a vă înțepa degetul, apoi un clic indică faptul că înțepătura este completă.



8. Îndepărtarea dispozitivului de înțepare.

După înțepare, îndepărtați cu un tampon de bumbac prima picătură de sînge. Ștergeți ușor zona înțepată pentru a obține o altă picătură de sînge. Aveți grijă să nu mîșcăriți picătura de sînge. Aplicați sângele pe banda de testare.



9. Îndepărtați lanțeta răsucînd mai întâi capacul. Așezați cu grijă lanțeta utilizată pînă plasarea discului de protecție pe o suprafață tare și împingînd vîrfurile din expus.



10. Găsiți electrozii pentru a scoate lanțeta utilizată. Anunțați lanțeta în conformitate cu reglementările locale. ▶ Pentru colectarea probelor de sînge din altă părți decît din deget, utilizați dispozitivul fără capac.



Alte zone alternative de testare (AST)

NOTĂ

Această opțiune nu este valabilă pentru toate dispozitivele. Consultați Utilizarea intenționată din Manualul utilizatorului pentru confirmare.

Testarea pe alte locuri decît vîrfurile degetului este menționată ca test alternativ (AST). Citiți secțiunea Testarea alternativă în Manualul dvs. de utilizare înainte de a efectua AST.

Înlocuiți capacul dispozitivului de lansare cu capacul transparent pentru testarea alternativă a localității. Trageți dispozitivul de măsurare înapoi până cînd se aude un clic.

Atunci cînd înțepați antebrațul, brațul sau mîna superioară, evitați să lovii zonele cu venele evidente pentru a preveni sîngerarea excesivă.

Curățare

Lanțeta este de unică folosință și este destinată exclusiv unei singure utilizări. Dispozitivul de rănire este reutilizabil.

Pentru a curăța dispozitivul de înțepare, utilizați un săpun și apă ușoară pentru a șterge dispozitivul de înțepare. NU dațiți aparatului sub apă. Dezinfecțaiți capacul pleștindu-l în alcool 70% timp de 10 minute și lășindu-l să se usuce la aer. Nu ștergeți în mașina de spălat vase și nu utilizați dezinfectanți.

Informații simbol

Simbol	Referență
	Nu verificați focul pentru utilizarea țigărilor.
	Curățați instrumentele de utilizare.
	Utilizați conform termenilor furnizați pentru utilizarea intenționată.
	Producător
	Reprezentare autorizată în Comunitatea Europeană
	Soluții pentru înțepare (numai pentru utilizarea intenționată)
	Avertisment (numai pentru utilizarea intenționată)
	Cealalt locului
	Conformitatea cu standardul RoHS

Medi Technology Corporation
2009 West Tower Way, Napa, CA, 94558
MediTech GmbH
Hendrichs 17, 49131 Uthmanneby, Germany

Model: Lansator seriă TD50H
Model: Lansator seriă TD50L
Model: Lansator seriă TD50M
Model: Lansator seriă TD50N

CE 0123