

ULTRASONIC NEBULIZER WH-2000

Instrucțiune

DESCRIERE GENERALA

Nebulizatorul cu ultrasunete este un alt produs nou din seria nebulizatoare cu ultrasunete fabricat de fabrica noastră. Produsul are un design rezonabil, bun ca ceață, flexibilitate ridicată, dimensiuni mici și portabilitate excelentă. Este chiar mai potrivit pentru uz spitalicesc și familial. Este foarte convenabil de utilizat, pacienții se pot vindeca bine și pot calma durerile.

Nebulizatorul cu ultrasunete este proiectat pentru tratarea diferitelor tipuri de boli ale tractului respirator, cum ar fi traheita, astmul, faringita, rinita și infecțiile pulmonare, precum și protecția sănătății familiei. Poate fi folosit și pentru umidificarea interioară.

OPERARE

1. Rotiți butonul temporizatorului de pe panou în „poziția oprit și butonul pentru volumul de ceață în poziția „min”.
2. Întoarceți clemele de pe pedestalul paharului și scoateți capacul paharului și pedestalul, apoi adăugați apă distilată în rezervor de apă până când ajunge la marcajul pârgheiei de apă.
3. Instalați pedestalul paharului medicinal pe jgheab de apă și asigurați-vă că poziția fixă este corectă. Cupa medicinală trebuie plasată în interiorul pedestalului, apoi adăugați medicamentul apos adecvat în cană. Acoperiți paharul și întoarceți clemele pentru a o fixa.
4. Conectați burduful, precum și duza de pulverizare sau mască cu evacuarea de ceață a capacului.

Rotiți butonul temporizatorului la timpul dorit și apăsați comutatorul de alimentare pentru a porni instrumentul. În același timp, indicatorul luminos se aprinde. Reglați volumul de ceață rotind butonul în sensul acelor de ceasornic până când debitul satisface cerințele pacienților. De asemenea, volumul debitului de aer poate fi ajustat pentru a face pacienții să se simtă mai confortabil cu gura.

5. După utilizare, apăsați întrerupătorul de alimentare în poziția „oprit”. Deconectați ștecherul de la priză. Puneți tubul de drenaj și scurgeți apa din rezervor de apă. Desfaceți unitatea de pahare pentru medicamente pentru a scoate capacul și paharul așa cum precum și celelalte părți pentru curățare După curățare, instalați piesele în poziția corectă a instrumentului și fiți pregătiți pentru următoarea utilizare.

PRECAUȚII

1. Indicatorul de apă din rezervor de apă nu trebuie pierdut. Dacă indicator de apă este demontat, instalați-l înapoi conform orientării inițiale, altfel instrumentul nu poate funcționa normal.
2. Când schimbați cristalul, rotiți piulița doar pentru a slăbi sau a strânge un șurub de pe suportul de cristal, în loc să rotiți capul șurubului. Asigurați-vă că suportul de cristal se conectează strâns la motor, pentru a evita scurgerea apei prin garniturile de cauciuc, care vor deteriora instrumentul.
3. Vă rugăm să sterilizați piesele cu alcool 75%. Nu sterilizați în mediu cu temperatură ridicată.
4. În timpul utilizării, palele ventilatorului se murdăresc ușor cu praf, care trebuie curățate în mod regulat.
5. Vă rugăm să depozitați instrumentul într-un loc uscat și ventilat atunci când nu este utilizat pentru o perioadă lungă de timp.
6. Pentru a evita riscul de infecție și pentru a menține un volum normal de ceață, vă rugăm să curățați jgheabul de apă și să ștergeți cristalul la timp după fiecare utilizare.

★★ Vă rugăm să urmați sfaturile unui medic atunci când setați un volum adecvat de ceață de medicament pentru dvs. Corpul uman absoarbe ceața de medicamente cu aproximativ 1 ml pe minut. Deși un volum mai mare de ceață de medicamente poate scurta timpul de întărire, orice volum de ceață de medicamente care depășește ceea ce absorbiți va cauza doar risipă de medicamente.

Dimpotrivă, absorbția inadecvată a medicamentelor va reduce efectele de vindecare.

Din aceste motive, nu este adevărat că cu cât volumul de ceață a medicamentului este mai mare, cu atât efectele vor fi mai bune. Volumul de ceață a medicamentului trebuie ajustat în funcție de efectele de vindecare.


PAȘII DE DEPANARE:

Simptome	Analiza	Soluție
Lumina de atomizare se aprinde, fără ceață	Placa transductoare cade sau conectorul amfenol este liber	Schimbați placa transductoare sau reinstalați amfenolul conector
Lumina de marcare a nivelului se aprinde, lumina de atomizare nu se aprinde și nu există ceață	Nu există apă în apă sau pârgăia de apă este prea scăzută	Adăugați apă distilată în apă până ajunge la marcajul nivelului apei
Lumina de atomizare și indicatorul de nivel nu se aprind, motorul nu funcționează	Temporizatorul indică „0” sau panoul de control principal al transformatorului de putere se strică	Reglați butonul cronometrului, apoi „continuare” sau timpul solicitat sau schimbați panoul de control principal
Coloana de apă se formează cu ceață mică la atomizare	Există substanțe alcaline sau uleioase în apă	Curățați apa și paharul cu oțet comestibil
Siguranță ruptă	Placa transductoare nu poate funcționa sau tranzistorul este defect	Schimbați piesele rupte

SPECIFICAȚII TEHNICE

Voltaaj	AC220V 50/60Hz	Zgomot	<50dB
Consumul puterii	80VA	Siguranța	T1A L250V
Frecvența ultrasunetelor	1.7 MHz	Volumul de ceață	>2 ml/min

SCHEMA DE CIRCUIT

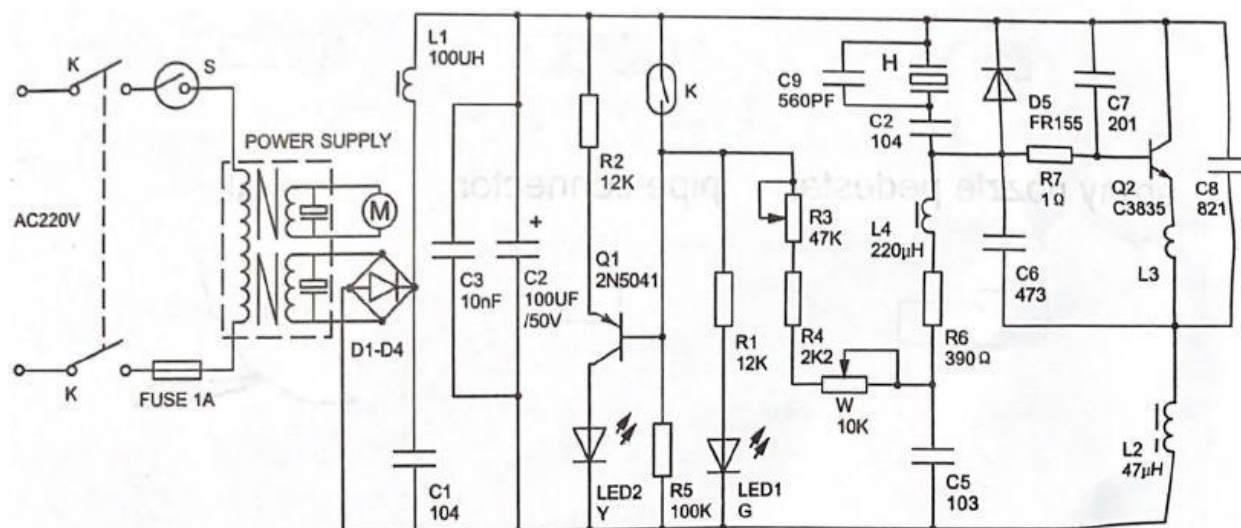

COMPLECTAȚIE

