





## СТИЛЕТ ДЛЯ УСТАНОВКИ ЭНДОТРАХЕАЛЬНОЙ ТРУБКИ

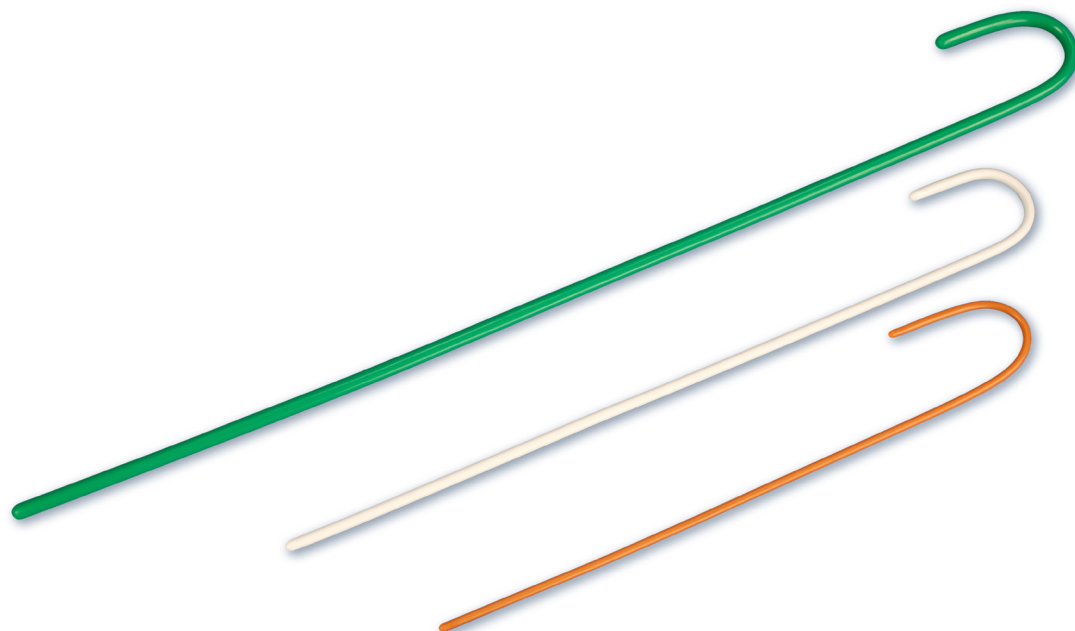

Этот металлический стилет в полимерном чехле специально разработан для удобного и безопасного введения эндотрахеальной трубки. Благодаря оптимальному балансу гибкости и жесткости стилет легко направляет эндотрахеальную трубку при прохождении верхних дыхательных путей, повторяя их анатомическую форму.

### УДОБНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ ЭНДОТРАХЕАЛЬНОЙ ТРУБКИ

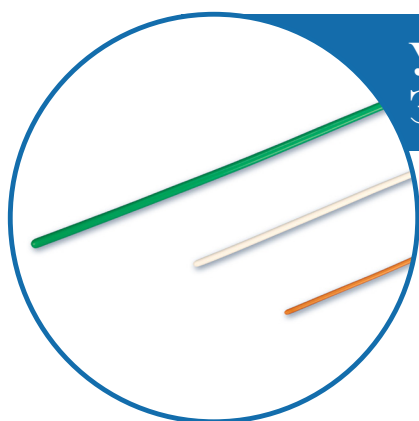

- Гибкий металлический стилет в полимерном чехле
- Атравматичные закругленные концы
- Три варианта размера
- Цветовая кодировка размера стилета

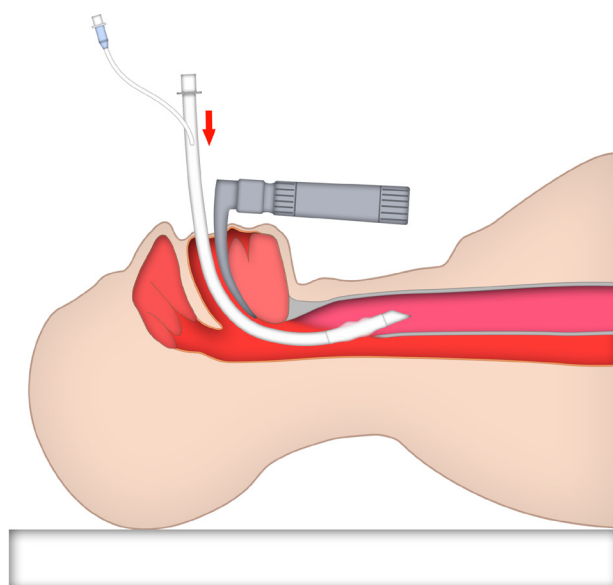


Рис. 1. Введение эндотрахеальной трубки.

Гладкое полимерное покрытие и закругленные концы стилета предотвращают травмирование слизистой во время установки эндотрахеальной трубки.

Изогнутый проксимальный конец стилета препятствует его случайному ускользанию сквозь просвет эндотрахеальной трубки.

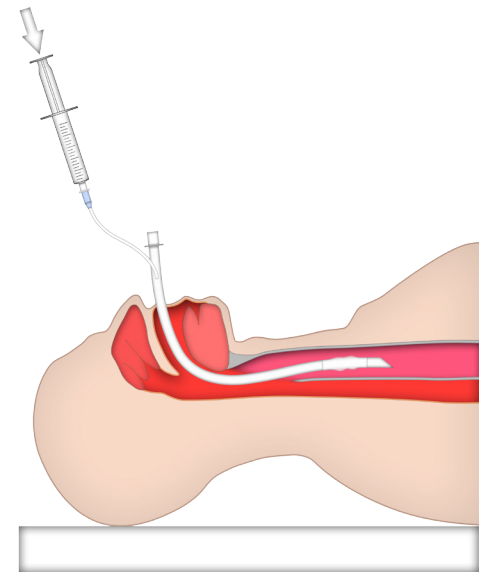


Рис. 2. Раздувание манжетки низкого давления.

## БЕЗОПАСНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

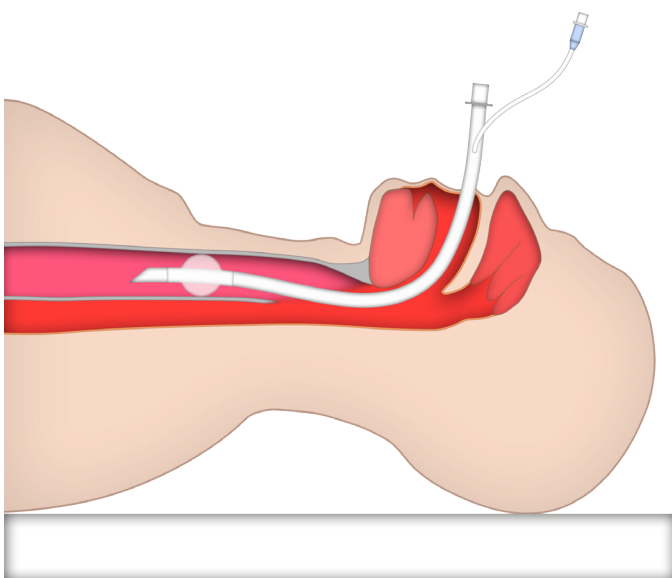
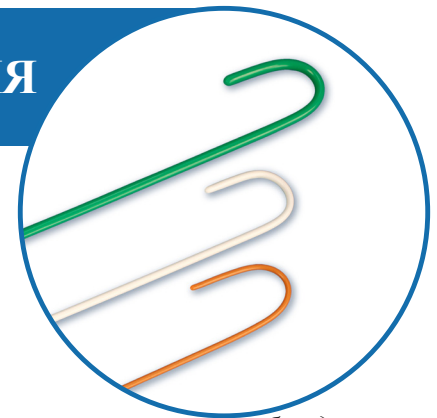




Рис. 2. Положение эндотрахеальной трубки с манжеткой в дыхательных путях.

Гибкий стилет повторяет все изгибы дыхательных путей во время продвижения трубки.

Стилет исполнен в трех вариантах, соответствующих размерам эндотрахеальных трубок производства «Каммед».

Код товара	Диаметр, мм	Fr	Длина, мм	Цветовой код
0221.03045307	2.3	7	180	
0221.03045410	3.3	10	230	
0221.03045514	4.6	14	330	