



# PHAGO'SURF ND

Dezinfectant detergent  
pentru igiena podelelor, suprafețelor  
și echipamente în medii potențial periculoase



## Beneficii

- ✓ Spectru mare dezinfectant
- ✓ Se usucă rapid, fără a lăsa urme
- ✓ Miros de pădure chinezească
- ✓ Produsul „Contact cu produsele alimentare” (respectă Decretul oficial francez din 8 septembrie 1999)

## Ambalaj

Presentation	Code No.	Number of units/pack
20 ml dose	60405	250 unități
1000 ml butelie cu dozator	60406	6 unități
5 L canistra	60407	2 unități

Distribuitor exclusiv în Moldova



Tel. 060006226



**CHRISTEYNS**

MEDICAL HYGIENE

Christeyns France – Life Sciences  
31, rue de la Maladrie - 44120 VERTOU - France  
Tel : +33 (0)2 40 80 27 27 / Fax : +33 (0)2 40 03 09 73  
www.phagogene.fr



# PHAGO'SURF ND

## Aplicarea

- ✓ **PHAGO'SURF ND** este un biocid TP02, TP04.
- ✓ **PHAGO'SURF ND** este un lichid concentrat destinat curățării și dezinfectării podelelor, suprafețelor și echipamentelor în medii potențial periculoase
- ✓ **PHAGO'SURF ND** este un agent de curățare eficient, cu un spectru dezinfectant mare (bactericid, micobactericid, fungicid și virucid).
- ✓ **PHAGO'SURF ND** poate fi utilizat, dacă este urmat de clătirea ulterioară, pentru suprafețe care pot intra în contact direct cu produsele alimentare. (conform Decretului oficial francez din 8 septembrie 1999).
- ✓ Parfumul său este proaspăt și plăcut.

## Components

- ✓ Substanțe active:
  - Didecildimetilamoniu chorid. (CAS No. 7173-51-5): 3.5% m/m
  - [N-(3-aminopropil)-N dodecilpropan-1.3 diamin] (CAS No. 2372-82-9): 5.5% m/m
- ✓ Surfactanți neionici
- ✓ EDTA și săruri
- ✓ Miros lipsit de alergeni restrânși

## Caracteristici organoleptice și fizico-chimice

- ✓ Aspect: lichid limpede
- ✓ Culoare: incolor până la galben pal
- ✓ Parfum: pădure chinezească
- ✓ pH la 20°C: 9.1 ± 0.3
- ✓ pH ( dilut la 0.25% ) la 20°C: 8.0 approx.

- ✓ Densitatea la 20°C (g/ml): 1.052 ± 0.005

## Profilul de siguranță pentru produs diluat până la 0,25%:

- ✓ Test de toleranță a pielii: foarte bine tolerat
- ✓ Test de toleranță a pielii: foarte bine tolerat
- ✓ Studiu de siguranță: ≥ 2 ml / kg la șobolani

## Utilizarea: Uz profesional.

- ✓ Mătură sau șterge cu ceva umed.
- ✓ Diluează o doză de 20 ml de PHAGO'SURF în 8L de apă de la robinet rece sau călduță, dând o diluție de 0,25%.
- ✓ Puneți apa mai întâi, apoi adăugați PHAGO'SURF ND. Nu clătiți. \*
- ✓ Se usucă rapid, fără a lăsa urme.

\* În cazurile în care suprafețele dezinfectate pot intra în contact direct cu produsele alimentare, clătirea cu apă potabilă este necesară.

**Vă rugăm să consultați fișierul științific pentru informații și rapoarte mai detaliate**

## Recomandări

- ✓ Aveți precauție atunci când utilizați biocide.
- ✓ Înainte de a utiliza produsul, asigurați-vă că ați citit eticheta și alte informații furnizate.
- ✓ Soluția, dacă este păstrată la temperatura ambiantă într-un recipient închis, este stabilă timp de 5 zile.
- ✓ Data de expirare: 36 de luni de la data fabricației
- ✓ Fișa cu date de securitate este disponibilă pe site-ul [www.quickfds.com](http://www.quickfds.com)

## Compatibilitatea

- ✓ Polietilenă de înaltă densitate, polipropilenă, linoleum, dale, oțel inoxidabil, instalații sanitare.
- ✓ Geluri sanitare (Altor Industrie), termometre digitale COOPER, bureți și acoperiri ASKLE.

## Antimicrobial activity

STANDART	CONCENTRAȚII	TIMP
<b><u>BACTERICIDAL</u></b>		
<b>EN 1040</b> <i>(P.aeruginosa and S.aureus)</i>	0,25%	5 min.
<b>EN 1276</b> condiții murdare <i>(P.aeruginosa and S.aureus)</i>	0,25%	5 min.
<b>EN 13727 + A1</b> condiții murdare <i>P.aeruginosa, S.aureus and E. hirae)</i>	0,25%	5 min.
<b>EN 13697</b> condiții murdare <i>(E.coli, P.aeruginosa, S.aureus et E.hirae)</i>	0,25%	15 min.
<b><u>TUBERCULOCIDAL</u></b>		
<b>EN 14348</b> ( <i>M. terrae</i> )	0,25%	30 min.
<b><u>FUNGICIDAL</u></b>		
<b>EN 1275</b> ( <i>C.albicans</i> )	0,125%	5 min.
<b>EN 13624</b> condiții murdare <i>(C.albicans)</i>	0,25%	15 min.
<b>EN 13697</b> condiții murdare <i>(C.albicans)</i>	0,25%	15 min.
<b>EN 16615</b> condiții murdare <i>(C.albicans, A. brasiliensis)</i>	0,25%	15 min.
<b><u>VIRUCIDAL</u></b>		
<b>EN 14476 + A1</b> condiții murdare ( <i>BVDV</i> ) Active on VIH	0,1%	15 min.
	0,25%	15 min.
Activ la VBH	0,25%	1 min.



**CHRISTEYNS**


MEDICAL HYGIENE

Christeyns France – Life Sciences

31, rue de la Maladrerie - 44120 VERTOU - France

Tel : +33 (0)2 40 80 27 27 / Fax : +33 (0)2 40 03 09 73

[www.phagogene.fr](http://www.phagogene.fr)

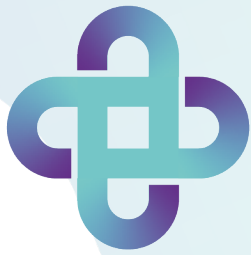


# PHAGO

## PHAGO'SURF ND



Disinfecting detergent for the hygiene of floors, surfaces and equipment in potentially hazardous environments

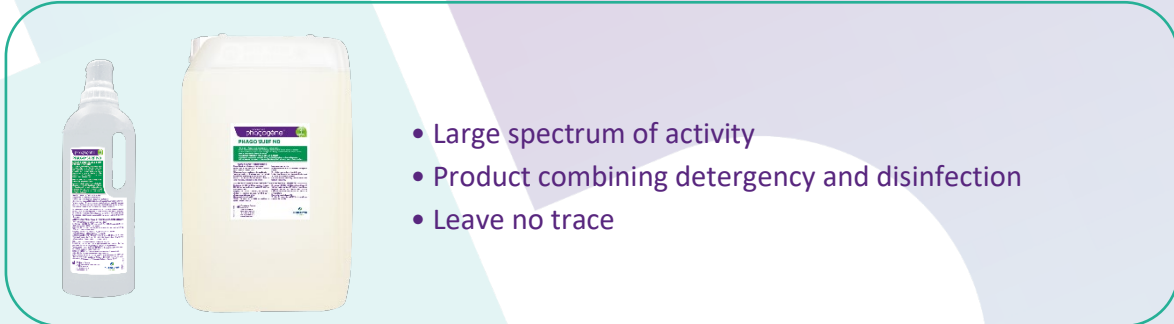

- Large spectrum of activity
- Product combining detergency and disinfection
- Leave no trace

### USE

PHAGO'SURF ND is a concentrated liquid intended for cleaning and disinfecting floors, surfaces and materials in potentially hazardous environments. It is an effective cleaner and a broad-spectrum disinfectant (bactericide, mycobactericide, fungicide and virucide). PHAGO'SURF ND can be used, with rinsing, on surfaces likely to come into direct contact with foodstuffs (in accordance with the decree of September 8, 1999). Its fragrance is fresh and pleasant.

### COMPOSITION

Didecyldimethylammonium chloride  
(CAS No: 7173-51-5): 3.5% w/w  
N- (3-aminopropyl) -N-dodecylpropane-1,3-diamine  
(CAS No: 2372-82-9): 5.5% w/w  
Nonionic surfactants  
EDTA and salts  
Labeled allergen-free fragrance

### CHARACTERISTICS

Color: colorless to pale yellow  
pH at 20 ° C (pure product): 9.1 +/- 0.3  
pH at 20 ° C (product diluted to 0.25% tap water): approximately 8.0  
Density at 20 ° C (g / mL): 1.052 +/- 0.005

### INSTRUCTIONS FOR USE

Sweep or wipe with something damp. Dilute a 20mL dose of PHAGO'SURF ND in 8 liters of cold or lukewarm tap water, i.e., a 0.25% dilution. Put in the water first, then PHAGO'SURF ND. Do not rinse\*. Dries rapidly, leaving no traces.

\*In the case of disinfection of surfaces that may come into direct contact with food, rinsing with potable water is necessary (decree of September 8, 1999)

### PRECAUTIONS FOR USE

Dangerous. Product reserved for professional use. Gloves recommended. The safety data sheet is available on the site [www.quickfds.com](http://www.quickfds.com). Observe the precautions for use. Use biocides carefully. Before use, read the label and product information.

PLEASE REFER TO THE SCIENTIFIC DOSSIER FOR MORE DETAILED INFORMATION AND REPORTS.

Before any use, make sure that it is essential, especially in places frequented by the general public. Whenever possible, give preference to

alternative methods and products presenting the lowest risk to human and animal health and to the environment.

### MICROBIOLOGICAL ACTIVITY

CONTACT TIME

EFFICIENCY TESTS CARRIED OUT ON THE PRODUCT DILUTED AT 0.25%

		CONTACT TIME
<u>Bactéricidal</u>	EN 1040 <i>P.aeruginosa</i> , <i>S.aureus</i>	5 min
	EN 1276 <i>P.aeruginosa</i> et <i>S.aureus</i>	5 min*
	EN 13727 + A1 <i>P.aeruginosa</i> , <i>S.aureus</i> et <i>E. hirae</i>	5 min*
	EN 13727 + A2 SARM, <i>A.baumannii</i>	5 min*
	EN 13697 <i>E.coli</i> , <i>P.aeruginosa</i> , <i>S.aureus</i> et <i>E. hirae</i>	15 min*
	EN 16615	15 min*
<u>Fungicidal</u>	EN 1275 <i>C.albicans</i>	5 min
	EN 13624 <i>C.albicans</i>	15 min*
	EN 13697 <i>C.albicans</i>	15 min*
	EN 16615 <i>C.albicans</i> , <i>A. brasiliensis</i>	15 min*
<u>Tuberculocidal</u>	EN 14348 <i>M.terrae</i>	30 min
<u>Active on virus</u>	EN 14476 + A1 BVDV	15 min*
	EN 16777 Vaccinia virus	15 min*
	Actif on flu virus	15 min
	Actif on VHB	
	Actif on VIH	
	Actif on VHC	
	Actif on Herpes Virus	

\*Dirty conditions

### REFERENCES

250x20mL doses  
6x1L Dosey  
4x1L One2Dose  
2x5L

