

Product data sheet

GENERAL INFORMATION

Product: SPE – Solid phase extraction cartridges

Description: 4 types of traditional SPE de adsorbents for most of commonly used applications in column of 3 or 6 ml and luer connection.

C18: End-capped silica-based octadecyl. Suitable for non-polar compounds. Surface area 300 m²/g, particle size 40-60 µm, pore size 120 Å.

SILICA: Silica unbounded silica gel. Suitable for polar compounds. Surface area 480 m²/g, particle size 40-75 µm, pore size 70 Å.

FLORISIL: Florisil pesticide grade. Suitable for halogenated and polar compounds such as multiresidual pesticides. Particle size 150-250 µm.

NH₂: Silica-based aminopropyl. Suitable for moderately polar and acidic compounds. Surface area 200 m²/g, particle size 40-75 µm, pore size 100 Å

SPECIFICATIONS

Reference	pcs/ box	quantity (mg)	volume (ml)	phase
SPHE-C35-050	50	500	3	C18
SPHE-C65-030	30	500	6	C18
SPHE-S35-050	50	300	3	SILICA
SPHE-S61-030	30	1000	6	SILICA
SPHE-F35-050	50	500	3	FLORISIL
SPHE-F61-030	30	1000	6	FLORISIL
SPHE-N35-050	50	500	3	NH ₂
SPHE-N65-030	30	500	6	NH ₂

PACKING

Type: Carboard box

Label:


SPHE-C35-050

SPE – Solid phase extraction cartridges, 50 pcs

SPE - Cartuchos de extracción en fase sólida, 50 uds

SPE - Cartouche d'extraction en phase solide, 50 unit.

Batch n°.: xxxxx

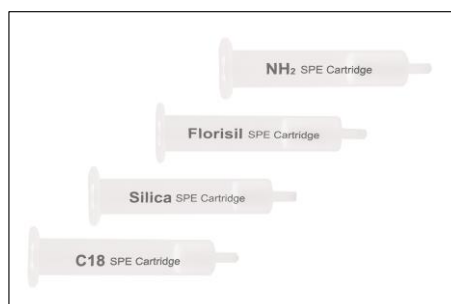

Ficha técnica de producto

INFORMACIÓN GENERAL

Producto: SPE - Cartuchos de extracción en fase sólida

Descripción: 4 tipos de absorbentes de SPE tradicional para cubrir el mayor número de aplicaciones en columna de 3 o 6 ml con conexión lúer.

C18: Octadecilo 'end-capped' (desactivación de grupos libres) en base sílice. Adecuado para compuestos no polares. Área superficial 300 m²/g, Tamaño de partícula 40-60 µm, Tamaño de poro 120 Å.

SILICA: Gel de sílice. Adecuado para compuestos polares. Área superficial 480 m²/g, Tamaño de partícula 40-75 µm, Tamaño de poro 70 Å.

FLORISIL: Florisil grado pesticida. Adecuado para compuestos polares y halogenados como los pesticidas multiresiduales. Tamaño de partícula 150-250 µm.

NH2: Aminopropilo en base sílice. Adecuado para compuestos ácidos y moderadamente polares. Área superficial 200 m²/g, Tamaño de partícula 40-75 µm, Tamaño de poro 100 Å.

ESPECIFICACIONES

Referencia	uds/ caja	Cantidad (mg)	volumen (ml)	fase
SPHE-C35-050	50	500	3	C18
SPHE-C65-030	30	500	6	C18
SPHE-S35-050	50	300	3	SILICA
SPHE-S61-030	30	1000	6	SILICA
SPHE-F35-050	50	500	3	FLORISIL
SPHE-F61-030	30	1000	6	FLORISIL
SPHE-N35-050	50	500	3	NH2
SPHE-N65-030	30	500	6	NH2

EMBALAJE

Tipo: Caja de cartón o plástico
Etiqueta:


SPHE-C35-050

SPE – Solid phase extraction cartridges, 50 pcs

SPE - Cartuchos de extracción en fase sólida, 50 uds

SPE - Cartouche d'extraction en phase solide, 50 unit.

Batch nº.: xxxx

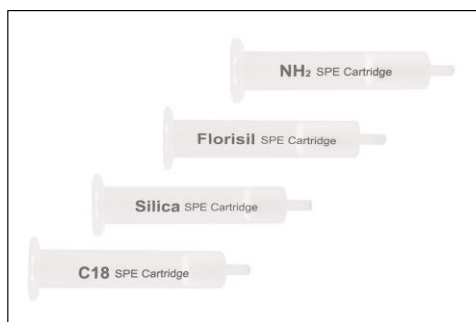

Fiche technique de produit

INFORMATION GENERALE

Produit: SPE - Cartouche d'extraction en phase solide

Description: 4 types d'absorbants SPE traditionnels pour couvrir le plus grand nombre d'applications en colonnes de 3 ou 6 ml avec connexion Luer.

- C18** : Octadécyle 'end-capped' (désactivation des groupes libres) à base de silice. Convient aux composés non polaires. Surface spécifique 300 m² / g, taille des particules 40-60 µm, taille des pores 120 Å.
- SILICE** : Gel de silice. Convient pour les composés polaires. Surface spécifique 480 m² / g, taille des particules 40-75 µm, taille des pores 70 Å.
- FLORISIL** : Florisil de qualité pesticide. Convient aux composés polaires et halogénés tels que les pesticides multirésiduels. Taille des particules 150-250 µm.
- NH2** : Aminopropyle à base de silice. Convient aux composés acides et modérément polaires. Surface spécifique 200 m² / g, taille des particules 40-75 µm, taille des pores 100 Å.

CARACTERISTIQUES

Référence	unit./lot	quantité (mg)	volume (ml)	phase
SPHE-C35-050	50	500	3	C18
SPHE-C65-030	30	500	6	C18
SPHE-S35-050	50	300	3	SILICA
SPHE-S61-030	30	1000	6	SILICA
SPHE-F35-050	50	500	3	FLORISIL
SPHE-F61-030	30	1000	6	FLORISIL
SPHE-N35-050	50	500	3	NH2
SPHE-N65-030	30	500	6	NH2

EMBALLAGE

Type: Boîte de carton ou plastique

Etiquette:

SPHE-C35-050

SPE – Solid phase extraction cartridges, 50 pcs

SPE - Cartuchos de extracción en fase sólida, 50 uds

SPE - Cartouche d'extraction en phase solide, 50 unit.

Batch n°: xxxxx

