

Надгортанный воздуховод i-gel®

i-gel®

Для использования в анестезиологии и реанимации

i-gel® является, поистине, уникальным, одноразовым, не содержащим латекса и поливинилхлорида надгортанным воздуховодом 2-го поколения, который представляет собой кульминацию многолетних интенсивных исследований и разработок. Нераздувная манжета i-gel®, форма которой зеркально повторяет анатомические структуры гортаноглотки, изготовлена из медицинского термопластичного эластомера. Она обеспечивает максимальную герметичность, при этом практически исключена аспирация, нет давления на слизистую и ее травмирования. I-gel® представлен в семи размерах (см. стр. 147), поставляется в инновационном упаковочном футляре, размещается и фиксируется в ложементе, который, в зависимости от размера, имеет различный цвет.

www.i-gel.com

📺 Видеоматериалы можно просмотреть на сайте www.intersurgical.ru



15-миллиметровый коннектор

Надежное соединение с любым контуром, соединителем, ДФ и ДФ/ТВО или другим соединением


Проксимальный конец желудочного канала (отсутствует в размере 1)

Легко читаемая информация

Размер воздуховода, весовая категория пациента – точный и уверенный выбор

Метка положения относительно зубов (только для взрослых размеров)

Удобное подтверждение оптимальной глубины введения

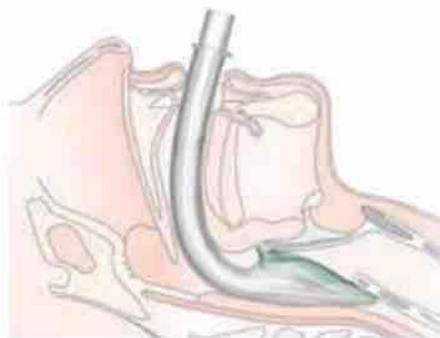

Желудочный канал

(отсутствует в размере 1)

Служит для проведения желудочного зонда, обеспечивает эвакуацию жидкого и газообразного содержимого желудка и раннее предупреждение о регургитации

Встроенный антизакусывающий блок

Уменьшает возможность прикусывания канала воздуховода

Ротовой стабилизатор

Облегчает введение и исключает возможность вращения


Блокатор надгортанника

Уменьшает возможность "складывания" надгортанника и блокировки дыхательных путей

Мягкая гелеподобная нераздувная атравматичная манжета

Изготовлена из медицинского термопластичного эластомера, обеспечивает высокую герметичность и легкое атравматичное введение

Дистальный конец желудочного канала

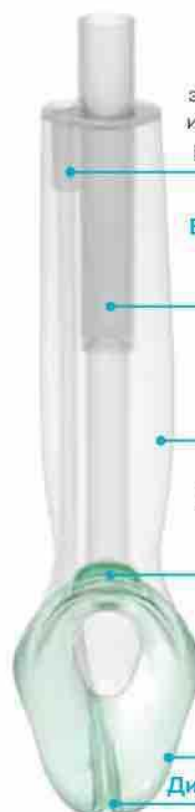

Код	Описание	Размер	Вес пациента	Количество в коробке
8205000	Надгортанный воздуховод i-gel®, большой для взрослых	5	90+ кг	25
8204000	Надгортанный воздуховод i-gel®, средний для взрослых	4	50–90 кг	25
8203000	Надгортанный воздуховод i-gel®, малый для взрослых	3	30–60 кг	25
8225000	Надгортанный воздуховод i-gel®, большой детский	2.5	25–35 кг	10
8202000	Надгортанный воздуховод i-gel®, малый детский	2	10–25 кг	10
8215000	Надгортанный воздуховод i-gel®, для младенцев	1.5	5–12 кг	10
8201000	Надгортанный воздуховод i-gel®, для новорожденных	1	2–5 кг	10

📄 Стерильно