


3 Descrierea produsului

e|1 Analyzer

Panou posterior

Pe panoul posterior al instrumentului sunt instalate imprimanta încorporată, butonul de pornire/oprire, mufa de alimentare electrică și porturile USB și Ethernet.

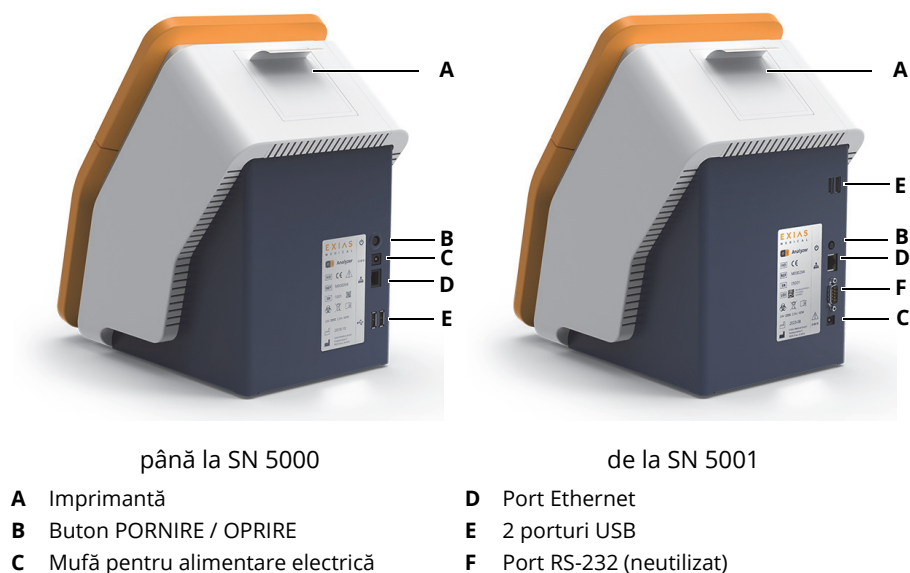

Figură 3-3



Notă:

Apăsarea butonului de Pornire/Oprire nu deconectează instrumentul de la alimentarea cu energie. Pentru o deconectare totală de la alimentarea cu energie, cablul electric al aparatului trebuie să fie scos din priză.

Imprimantă

Imprimanta termică silențioasă integrată, utilizată pentru imprimarea rezultatelor de măsurare și QC, este dotată cu un mecanism pentru încărcare ușoară, care permite o schimbare rapidă și simplă a rolei de hârtie de 2".



Figură 3-4 Imprimantă