



Technical Data Sheet

Infusion Set for Single Use

Revision : 5


Date : 2023-07-03

Page 1 of 3

Manufacturer:
Shandong Yiguang Medical
Instruments Co., Ltd

Infusion set for single use
* with needle

Ref code: IV-1 NLB

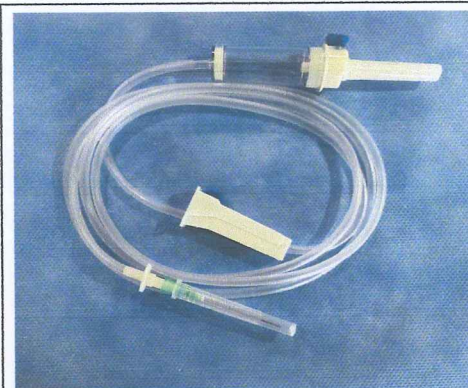

Components	Name	Material	Index
	Spike cap	Polyethylene (PE)	Length: 40mm
	Spike	Acrylonitrile Butadiene Styrene (ABS)	Length: 28mm
	Air filter	PTFE	
	Air inlet cap	Polyvinyl chloride (PVC)	
	Drip chamber	Polyvinyl chloride (PVC)	Length: 46.5mm+/-0.5mm; Volume: 6ml
	Filter	Nylon	Ø12.8 , Micron: 15um
	Tube	Polyvinyl chloride (PVC), Semi-rigid, Kink Resistant	ID/OD:2.9mm/3.8mm Length: 150cm
	Roller clamp	Polyethylene (PE)	Clamp shell Length: 48.6mm Roller diameter: 13.3+/-0.1mm
	Connector	Acrylonitrile Butadiene Styrene (ABS)	Luer slip
	In vein needle	304 Stainless steel, Non-pyrogenic, Non-toxic	21G * 1 1/2"
	Glue	Cyclohexanone	

Intended use	Used for vein solution giving. Works with gravity only.
Drops	20drops=1ml+/-0.1ml of distilled water (at 20°C+/-2°C)
Sterilization	Ethylene oxide (E.O)
Shelf life	60months
Product standards	BS EN ISO8536-4:2013
Classification	MDD 93/42/EEC, Class IIa
Certificates	CE, ISO13485, CFDA, GMP, FSC
Packaging	* Single PE bag, 25pcs per middle bag, 20middle bags per carton

	Technical Data Sheet Infusion Set for Single Use	Revision : 5
		Date : 2023-07-03
		Page 2 of 3

Operation Instruction	1. Open the individual packing and take out the infusion set 2. Firmly close roller clamp 3. Insert plastic spike into container 4. Press drip chamber to fill half of it 5. Open roller clamp and expel air bubbles 6. Close roller clamp again 7. Apply needle into patients vein 8. Adjust flow rate by roller clamp 9. Open air inlet if use glass container and close the air inlet if use soft container 10.Dispose properly as medical waste after use												
Storage	Store in relative humidity less than 80%, no corrosive gas, cool, dry, well ventilated, clean environment.												
Cautions	Check the batch number and validity before use. Tighten the needle before use. It is strictly prohibited to use if the single packing damaged or needle cap drop off. For single use only, use immediately after unsealed, destroy after use. It is strictly prohibited to reuse.												
Marks	STERILEEO CE0197 												
Packing pictures	* INDIVIDUAL LABEL PRINT(CUSTOMIZED) <table><tr><td>产品名称</td><td>医光输液器小包</td><td>产品袋形</td><td>筒料</td></tr><tr><td>印刷方式</td><td>表印 规格 10x20cm</td><td>印刷色数</td><td>1色</td></tr><tr><td>印刷颜色</td><td>蓝</td><td>蓝</td><td></td></tr></table> 尊敬的客户：请您认真核对文字、排版及内容色彩，确认通知设计人员制版，如有错误应及时通知做修改，否则本厂及设计人员概不负任何责任。 做稿日期：G20220112 定版日期： DESCHIDE AICI  SET PENTRU PERFUZII Steril, non-toxic, apirogen Model 21G*1 1/2", tub 150 cm fără manșon Atenționări și precauții - A se arunca după utilizare - A nu se utiliza dacă ambalajul este deschis sau deteriorat - După utilizare, a se considera ca deșeu medical contaminat - Perioada de valabilitate: 5 ani Condiții de păstrare A se păstra în încăperi curate, uscate și lipsite de insecte. Pentru mai multe informații, consultați instrucțiunea pentru utilizare. CE0197 ISO13485:2016 20 picături = 1 ml+/-0,1 ml REF: IV-1NLB STERILEEO  Producător: Shandong Yiguang Medical Instruments Co.,Ltd Add: Sanjin Science-Technology Industrial Park, Chiling County 252100, Shandong, China Reprezentant autorizat în Republica Moldova: SRL Dita EstFarm Add:23, Burebista str.,MD-2032, Chisinau, Republica Moldova Telefon: +373 22 405 444; Fax: +373 22 63 77 62 Nr.LOT:20220421 Data P.ARB:20220421 Data EXP:20270421 20cm 10cm	产品名称	医光输液器小包	产品袋形	筒料	印刷方式	表印 规格 10x20cm	印刷色数	1色	印刷颜色	蓝	蓝	
产品名称	医光输液器小包	产品袋形	筒料										
印刷方式	表印 规格 10x20cm	印刷色数	1色										
印刷颜色	蓝	蓝											



Technical Data Sheet


Revision : 5

Infusion Set for Single Use

Date : 2023-07-03

Page 3 of 3

Drawing

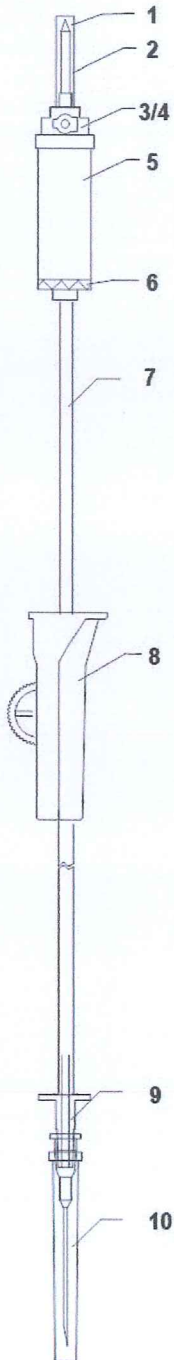

Description:

1. Spike cap
2. Spike
3. Air filter
4. Air inlet cap
5. Drip chamber
6. Solution filter
7. Tube 150cm
8. Roller clamp
9. Luer slip connector
10. In vein needle

