


# Быстрое раскапывание

жидкостей  
различных объемов

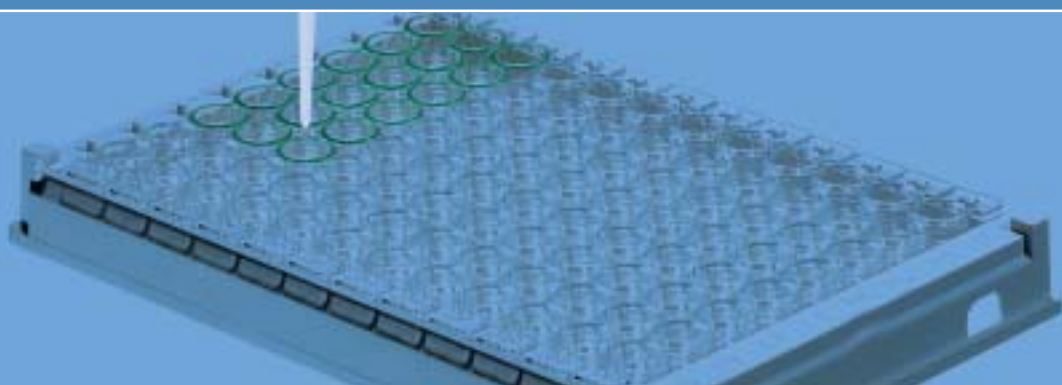

## Шаговая пипетка Ленпипет Степпер

Ленпипет Степпер - легкая и удобная в использовании пипетка для повторного дозирования, разработанная для более эффективной работы в лаборатории. Степпер позволяет быстро откапывать жидкость до 44 раз в серии без повторного заполнения наконечника. Универсальная рукоятка Степпера может работать с семью типами наконечников различного размера, что позволяет дозировать объемы от 10 до 5000 мкл.

С любым типом наконечника можно дозировать пять различных объемов. Работать со Степпером очень просто. Нужно просто надеть соответствующий наконечник, заполнить его жидкостью и установить требуемый объем. Ленпипет Степпер работает по принципу позитивного вытеснения, таким образом он идеально подходит для работы с агрессивными и вязкими жидкостями.

- Легкая и комфортная работа одной рукой
- 7 наконечников для дозирования объемов от 10 до 5000 мкл
- Пять установок объема; удобное колесо для установки дозирования

## Таблица соответствия объема дозирования и наконечника Степпера

Положение колеса	1	2	3	4	5	
Количество доз	44	22	15	11	9	
	<b>Дозируемый объем, мкл</b>					<b>Наименование наконечника</b>
	10	20	30	40	50	Наконечник Степпера 0.5 мл
	25	50	75	100	125	Наконечник Степпера 1.25 мл
	50	100	150	200	250	Наконечник Степпера 2.5 мл
	100	200	300	400	500	Наконечник Степпера 5.0 мл
	250	500	750	1000	1250	Наконечник Степпера 12.5 мл
	500	1000	1500	2000	2500	Наконечник Степпера 25.0 мл
	1000	2000	3000	4000	5000	Наконечник Степпера 50.0 мл

## Шаговая пипетка Ленпипет Степпер

Кат. №	Наименование	Диапазон дозирования
<b>4540002</b>	Ленпипет Степпер	10-5000 мкл
	(адаптер и 7 различных наконечников входят в комплект поставки)	

## Наконечники Степпера и адаптеры

### Нестерильные наконечники Степпера

Кат. №	Наименование	Дозируемый объем	Объем мкл	Точность %	Воспроизводимость, %	Количество в упаковке
9404170	Наконечник Степпера 0.5 мл	10,20,30,40,50 мкл	10 50	±2.5 ±2.0	3.0 2.5	100 шт.
9404180	Наконечник Степпера 1.25 мл	25,50,75,100,125 мкл	25 125	±2.0 ±1.5	3.0 2.0	100 шт.
9404190	Наконечник Степпера 2.5 мл	50,100,150,200,250 мкл	50 250	±2.0 ±1.5	2.5 2.0	100 шт.
9404200	Наконечник Степпера 5 мл	100,200,300,400,500 мкл	100 500	±1.5 ±1.0	2.0 1.0	50 шт.
9404210	Наконечник Степпера 12.5 мл	250,500,750,1000,1250 мкл	250 1250	±1.5 ±1.0	2.0 1.0	50 шт.
9404220	Наконечник Степпера 25 мл	500,1000,1500,2000,2500 мкл	500 2500	±1.0 ±1.0	1.0 1.0	20 шт.
9404230	Наконечник Степпера 50 мл	1000,2000,3000,4000,5000 мкл	1000 5000	±1.0 ±1.0	1.0 1.0	10 шт.

### Стерильные наконечники Степпера

9404173	Наконечник Степпера 0.5 мл	10,20,30,40,50 мкл	10 50	±2.5 ±2.0	3.0 2.5	50 шт.
9404183	Наконечник Степпера 1.25 мл	25,50,75,100,125 мкл	25 125	±2.0 ±1.5	3.0 2.0	50 шт.
9404193	Наконечник Степпера 2.5 мл	50,100,150,200,250 мкл	50 250	±2.0 ±1.5	2.5 2.0	50 шт.
9404203	Наконечник Степпера 5 мл	100,200,300,400,500 мкл	100 500	±1.5 ±1.0	2.0 1.0	25 шт.
9404213	Наконечник Степпера 12.5 мл	250,500,750,1000,1250 мкл	250 1250	±1.5 ±1.0	2.0 1.0	25 шт.
9404223	Наконечник Степпера 25 мл	500,1000,1500,2000,2500 мкл	500 2500	±1.0 ±1.0	1.0 1.0	10 шт.
9404233	Наконечник Степпера 50 мл	1000,2000,3000,4000,5000 мкл	1000 5000	±1.0 ±1.0	1.0 1.0	10 шт.

### Адаптеры (требуется для использования наконечников Степпера 25 мл и 50 мл)

9420300	Адаптер					10 шт.
9420310	Адаптер стерильный					5 шт.

#### Санкт-Петербург

Тел.: (812) 703 4215  
 Факс: (812) 703 4216  
 196240, г. Санкт-Петербург  
 ул. Кубинская, 73А  
 E-mail: info.lcp.spb@thermofisher.com  
<http://www.thermo.com.ru>

#### Москва

Тел.: (495) 788 5096  
 Факс: (495) 788 5097  
 117105, г. Москва  
 Варшавское шоссе, д. 9, стр. 1, офис 317  
 E-mail: info.btd.moscow@thermofisher.com