



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 04 декабря 2015 года № ФСР 2009/05559

На медицинское изделие

Набор реагентов «Масло иммерсионное» по ТУ 9398-011- 29508133-2009

Настоящее регистрационное удостоверение выдано

Общество с ограниченной ответственностью "МиниМед"

(ООО "МиниМед"), Россия,

241520, Брянская область, Брянский район, с. Супонево, ул. Шоссейная, д. 17А

Производитель

Общество с ограниченной ответственностью "МиниМед"

(ООО "МиниМед"), Россия,

241520, Брянская область, Брянский район, с. Супонево, ул. Шоссейная, д. 17А

Место производства медицинского изделия

241520, Брянская область, Брянский район, с. Супонево, ул. Шоссейная, д. 17а/1

Номер регистрационного досье № РД-9304/51845 от 19.11.2015

Вид медицинского изделия -

Класс потенциального риска применения медицинского изделия 1

Код Общероссийского классификатора продукции для медицинского изделия 93 9816

приказом Росздравнадзора от 04 декабря 2015 года № 8988
допущено к обращению на территории Российской Федерации.

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**



М.А. Мурашко

0015737



241520, г. Брянск, Супонево, пер. Комсомольский, 4
 Т/ф (4832) 41-63-56, 41-67-02, 92-96-94, 92-97-03,
 E.m.: info@minimed.debryansk.ru www.minimed.ru

Р/с 40702810308000100320 Брянское ОСБ № 8605 г. Брянск
 К/с 30101810400000000601 ИНН 3234007127 БИК 041501601
 КПП 320701001 ОКПО 29508133

Паспорт

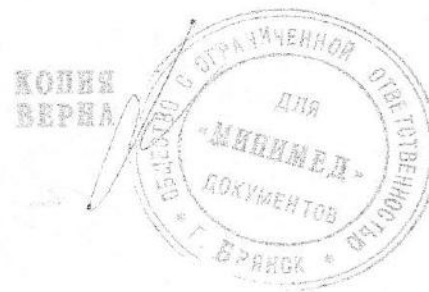
МАСЛО ИММЕРСИОННОЕ ГОСТ-13739-78

Наименование показателей	Нормы по ГОСТ	Результаты анализа
1. Внешний вид	Прозрачная жидкость желтоватого цвета со слабым характерным запахом.	Соответствует
2. Удельный вес		0,93
3. Показатель преломления при температуре 20 С	1,5150-1,5180	1,5152
3. Величина светопропускания р-ра масла, % не менее	70	90
4. Вязкость при 20 С	220-400	385

Срок хранения 1,5 года

Заключение ОТК: продукт соответствует ГОСТу 13739-78.

Начальник ОТК
Анализ произвел



АНАЛИТИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

Набор контрольных растворов белков мочи + глюкозы и рН «БМ-контроль-ССК + глюкоза и рН с калибратором»

Код ОКП 93 9816

Регистрационное удостоверение № ФСР 2010/08997

ТУ 9398-269-52208224-2010

Кат № 04.01.05

Номер серии К 07 -23

Срок годности до: 14.06.2024 г.

НАЗНАЧЕНИЕ

Набор «БМ-контроль-ССК + глюкоза и рН с калибратором» предназначен для контроля правильности и воспроизводимости результатов определения в моче

- белков** - по их реакции с сульфосалициловой кислотой
- с помощью диагностических полосок
- глюкозы** - ферментативным методом (глюкозооксидазным)
- качественным по реакции Бенедикта
- с помощью диагностических полосок
- рН** - с помощью диагностических полосок

СОСТАВ НАБОРА

Набор «БМ-контроль-ССК + глюкоза и рН с калибратором» содержит 8 флаконов контрольных растворов:

- 1 флакон калибратора с концентрацией белка 0,1 г/л - 10 мл
- 1 флакон калибратора с концентрацией белка 0,2 г/л - 10 мл
- 1 флакон калибратора с концентрацией белка 0,4 г/л - 10 мл
- 1 флакон калибратора с концентрацией белка 0,8 г/л - 10 мл
- 2 флакона уровень №1 по 10 мл
- 2 флакона уровень №2 по 10 мл

В паспорте набора указывается среднее значение концентрации белка мочи и глюкозы с контрольными пределами ($X \pm 2S$).

Технические характеристики набора:

- | | | |
|---|---------|---------------|
| - коэффициент вариации результатов измерения концентрации белков, %, не более | 10 | Соответствует |
| - коэффициент вариации результатов измерения концентрации глюкозы, %, не более | 5 | Соответствует |
| - межфлаконная вариация, %, не более | 5 | Соответствует |
| - допустимый разброс результатов определения концентрации белков в разных наборах одной серии, %, не более | 10 | Соответствует |
| - допустимый разброс результатов определения концентрации глюкозы в разных наборах одной серии, %, не более | 5 | Соответствует |
| - срок хранения набора, мес | 12 | |
| - температура хранения, °С | 2 - 8°С | |
| - после вскрытия флакона раствор можно хранить, дней, не более | 14 | |

Начальник отдела
Технического контроля



Краснопольская Е.В.

« 14 » июня 2023г

АНАЛИТИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

Набор контрольных растворов белков мочи «БМ-контроль-ССК + глюкоза и рН»

Код ОКП 93 9816

Регистрационное удостоверение № ФСР 2010/08997

ТУ 9398-269-52208224-2010

Кат № 04.01.04

Номер серии ПВ 07 -23

Срок годности до: 14.06.2024 г.

НАЗНАЧЕНИЕ

Набор «БМ-контроль-ССК + глюкоза и рН» предназначен для контроля правильности и воспроизводимости результатов определения в моче

- | | |
|----------------|--|
| белков | - по их реакции с сульфосалициловой кислотой |
| | - с помощью диагностических полосок |
| глюкозы | - ферментативным методом (глюкозооксидазным) |
| | - качественным по реакции Бенедикта |
| | - с помощью диагностических полосок |
| рН | - с помощью диагностических полосок |

СОСТАВ НАБОРА

Набор «БМ-контроль-ССК + глюкоза и рН» содержит 8 флаконов контрольных растворов:

- 4 флакона уровень №1 по 10 мл
- 4 флакона уровень №2 по 10 мл

В паспорте набора указывается среднее значение концентрации белка мочи и глюкозы с контрольными пределами ($X \pm 2S$).

Технические характеристики набора:

- | | | |
|---|---------|---------------|
| - коэффициент вариации результатов измерения концентрации белков, %, не более | 10 | Соответствует |
| - коэффициент вариации результатов измерения концентрации глюкозы, %, не более | 5 | Соответствует |
| - межфлаконная вариация, %, не более | 5 | Соответствует |
| - допустимый разброс результатов определения концентрации белков в разных наборах одной серии, %, не более | 10 | Соответствует |
| - допустимый разброс результатов определения концентрации глюкозы в разных наборах одной серии, %, не более | 5 | Соответствует |
| - срок хранения набора, мес | 12 | |
| - температура хранения, °С | 2 - 8°С | |
| - после вскрытия флакона раствор можно хранить, дней, не более | 14 | |

Начальник отдела
Технического контроля



Краснопольская Е.В.

« 14 » июня 2023г



ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО
ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ
СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р
«ЕАС AUDIT»

РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР РОСС RU.32028.04EAC1
ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ООО «ГОРТЕСТ»
РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР РОСС RU.32028
ИНН 7717616798 ОГРН 1087746489060

Юридический адрес: 109028, Россия, г. Москва, Серебряническая набережная, д. 27,
этаж 4, пом. 1, ком. 17
Телефон: 8 (800) 1000-730, e-mail: info@cacaudit.ru



№ 005032

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

Регистрационный номер № 04EAC1.CM.03842

Общество с ограниченной ответственностью «Агат-Мед»

(наименование лица)

105173, Россия, г. Москва, ул. Главная, д. 6, кв. 12

(юридический адрес лица)

143906, Россия, Московская область, г. Балашиха, квартал Щитниково, д. 88А

(фактический адрес лица)

ИНН: 7719187311

ОГРН: 1037739078970

НАСТОЯЩИЙ СЕРТИФИКАТ УДОСТОВЕРЯЕТ СООТВЕТСТВИЕ

системы менеджмента качества изделий медицинских Общества с ограниченной ответственностью «Агат-Мед» требованиям ГОСТ ISO 13485-2017 (ISO 13485:2016) «Изделия медицинские. Системы менеджмента качества. Системные требования для целей регулирования» применительно к разработке, производству и продаже медицинских изделий для in vitro диагностики: реагентов и наборов реагентов для клинической биохимии, а также калибраторов и контрольных материалов

Дата регистрации: 08-09-2021

Срок действия до: 07-09-2024

Руководитель органа
по сертификации:



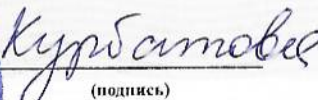
(подпись)

В. И. Погодин

Председатель
экспертной комиссии:

М.П.





(подпись)

Е. Д. Курбатова

НАСТОЯЩИЙ СЕРТИФИКАТ ОБЯЗЫВАЕТ ОРГАНИЗАЦИЮ ПОДДЕРЖИВАТЬ СОСТОЯНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ В СООТВЕТСТВИИ С ВЫШЕУКАЗАННЫМИ СТАНДАРТАМИ, ЧТО БУДЕТ НАХОДИТЬСЯ ПОД КОНТРОЛЕМ ОРГАНА ПО СЕРТИФИКАЦИИ СИСТЕМЫ ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ "ЕАС AUDIT" И ПОДТВЕРЖДАТЬСЯ ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ ЕЖЕГОДНОГО ИНСПЕКЦИОННОГО КОНТРОЛЯ



ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО
ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ
СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р
«EAC AUDIT»

РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР РОСС RU.32028.04EAC1

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ООО «ГОРТЕСТ»

РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР РОСС RU.32028

ИНН 7717616798 ОГРН 1087746489060

Юридический адрес: 109028, Россия, г. Москва, Серебряническая набережная, д. 27,
этаж 4, пом. 1, ком. 17

Телефон: 8 (800) 1000-730, e-mail: info@eacaudit.ru



РАЗРЕШЕНИЕ на применение знака соответствия системы добровольной сертификации ГОСТ Р «EAC AUDIT»

Регистрационный номер № 04EAC1.CM.03842

ВЫДАНО НА ОСНОВАНИИ РЕШЕНИЯ О ВЫДАЧЕ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ
СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА ИЗДЕЛИЙ МЕДИЦИНСКИХ

Общество с ограниченной ответственностью «Агат-Мед»

(наименование лица)

105173, Россия, г. Москва, ул. Главная, д. 6, кв. 12

(юридический адрес лица)

143906, Россия, Московская область, г. Балашиха, квартал Щигниково, д. 88А

(фактический адрес лица)

ИНН: 7719187311

ОГРН: 1037739078970

РАЗРЕШАЕТ

Применять знак соответствия системы добровольной сертификации «EAC AUDIT» на период действия сертификата соответствия № 04EAC1.CM.03842 в любой форме, исключаяющей возможность толкования его как знака соответствия качества продукции. Допускается использовать знак соответствия в рекламных буклетах, проспектах, брошюрах, плакатах, бланках организационно-распорядительной документации организации – держателя сертификата.

Руководитель органа
по сертификации:

(подпись)

В. И. Погдин

Председатель
экспертной комиссии:

М.П.



(подпись)

Е. Д. Курбатова

НАСТОЯЩИЙ СЕРТИФИКАТ ОБЯЗЫВАЕТ ОРГАНИЗАЦИЮ ПОДДЕРЖИВАТЬ СОСТОЯНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ В СООТВЕТСТВИИ С
ВЫШЕУКАЗАННЫМИ СТАНДАРТАМИ, ЧТО БУДЕТ НАХОДИТЬСЯ ПОД КОНТРОЛЕМ ОРГАНА ПО СЕРТИФИКАЦИИ СИСТЕМЫ
ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ "EAC AUDIT" И ПОДТВЕРЖДАТЬСЯ ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ ЕЖЕГОДНОГО ИНСПЕКЦИОННОГО КОНТРОЛЯ



ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО
ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ
СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р
«EAC AUDIT»

РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР РОСС RU.32028.04EAC1

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ООО «ГОРТЕСТ»

РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР РОСС RU.32028

ИНН 7717616798 ОГРН 1087746489060

Юридический адрес: 109028, Россия, г. Москва, Серебряническая набережная, д. 27,
этаж 4, пом. 1, ком. 17

Телефон: 8 (800) 1000-730, e-mail: info@cacaudit.ru



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ АУДИТОРА

Регистрационный номер № 04EAC1.СМ.03842-02

НАСТОЯЩИЙ СЕРТИФИКАТ УДОСТОВЕРЯЕТ, ЧТО

Гладун Виталий Викторович

соответствует требованиям системы добровольной сертификации «EAC AUDIT», предъявляемым к аудиторам внутренних проверок системы менеджмента качества изделий медицинских на соответствие стандарту ГОСТ ISO 13485-2017 (ISO 13485:2016) «Изделия медицинские. Системы менеджмента качества. Системные требования для целей регулирования»

Дата регистрации: 08-09-2021

Срок действия до: 07-09-2024

Руководитель органа
по сертификации:



(подпись)

В. И. Погодин

Председатель
экспертной комиссии:

М.П.





(подпись)

Е. Д. Курбатова

НАСТОЯЩИЙ СЕРТИФИКАТ ОБЯЗЫВАЕТ ОРГАНИЗАЦИЮ ПОДДЕРЖИВАТЬ СОСТОЯНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ В СООТВЕТСТВИИ С ВЫШЕУКАЗАННЫМИ СТАНДАРТАМИ, ЧТО БУДЕТ НАХОДИТЬСЯ ПОД КОНТРОЛЕМ ОРГАНА ПО СЕРТИФИКАЦИИ СИСТЕМЫ ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ "EAC AUDIT" И ПОДТВЕРЖДАТЬСЯ ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ ЕЖЕГОДНОГО ИНСПЕКЦИОННОГО КОНТРОЛЯ



ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО
ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ
СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р
«ЕАС AUDIT»

РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР РОСС RU.32028.04ЕАС1

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ООО «ГОРТЕСТ»

РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР РОСС RU.32028

ИНН 7717616798 ОГРН 1087746489060

Юридический адрес: 109028, Россия, г. Москва, Серебрянская набережная, д. 27,
этаж 4, пом. 1, ком. 17

Телефон: 8 (800) 1000-730, e-mail: info@eacaudit.ru



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ АУДИТОРА

Регистрационный номер № 04ЕАС1.СМ.03842-03

НАСТОЯЩИЙ СЕРТИФИКАТ УДОСТОВЕРЯЕТ, ЧТО

Нефуков Юрий Николаевич

соответствует требованиям системы добровольной сертификации «ЕАС AUDIT», предъявляемым к аудиторам внутренних проверок системы менеджмента качества изделий медицинских на соответствие стандарту ГОСТ ISO 13485-2017 (ISO 13485:2016) «Изделия медицинские. Системы менеджмента качества. Системные требования для целей регулирования»

Дата регистрации: 08-09-2021

Срок действия до: 07-09-2024

Руководитель органа
по сертификации:



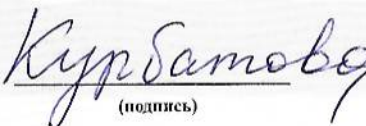
(подпись)

В. И. Погодин

Председатель
экспертной комиссии:

М.П.





(подпись)

Е. Д. Курбатова

НАСТОЯЩИЙ СЕРТИФИКАТ ОБЯЗЫВАЕТ ОРГАНИЗАЦИЮ ПОДДЕРЖИВАТЬ СОСТОЯНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ В СООТВЕТСТВИИ С ВЫШЕУКАЗАННЫМИ СТАНДАРТАМИ, ЧТО БУДЕТ НАХОДИТЬСЯ ПОД КОНТРОЛЕМ ОРГАНА ПО СЕРТИФИКАЦИИ СИСТЕМЫ ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ "ЕАС AUDIT" И ПОДТВЕРЖДАТЬСЯ ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ ЕЖЕГОДНОГО ИНСПЕКЦИОННОГО КОНТРОЛЯ

CERTIFICATE OF REGISTRATION

Lorne Laboratories Ltd

Unit 1 Cutbush Park Industrial Estate
Danehill
Lower Earley
Berkshire RG6 4UT UNITED KINGDOM

UL LLC® (UL Solutions) issues this certificate to the Firm named above, after assessing the Firm's quality system and finding it in compliance with:

ISO 13485:2016
EN ISO 13485:2016

The design and manufacture of in vitro diagnostic blood grouping reagents. The purchase for resale of in vitro diagnostic serology test kits.



Authorized by



Paul Hilgeman
Senior Business Manager - Medical
CMIT – Medical Regulatory



Check Certificate Status:
[here](#)

File Number	A12241	Cycle Start	May 23, 2023
Certificate Number	1458.230523	Effective Date	May 23, 2023
Initial Issue Date	June 26, 2018	Expiry Date	May 22, 2026

This quality system registration is included in UL's Directory of Registered Firms and applies to the provision of goods and/or services as specified in the scope of registration from the address(es) shown above. By issuance of this certificate the firm represents that it will maintain its registration in accordance with the applicable requirements. This certificate is not transferable and remains the property of UL LLC® (UL Solutions).



UL Solutions
333 Pfingsten Road
Northbrook, IL 60062-2096 USA



CERTIFICATE

EC Certificate No. 1434-IVDD-075/2022
Full Quality Assurance System
Directive 98/79/EC concerning
***in vitro* diagnostic medical devices**

Polish Centre for Testing and Certification certifies
that the quality assurance system in the organization:

Lorne Laboratories Ltd
Unit 1 Cutbush Park Industrial Estate
Danehill
Lower Earley
Berkshire RG6 4UT, UNITED KINGDOM

for the design, manufacture and final inspection of *in vitro* diagnostic medical device
List A

*The list of medical devices covered by this certificate is provided
in the Annex 1 to EC Design-examination Certificate No. 1434-IVDD-074/2022*

complies with requirements
of Annex IV (excluding Section 4, 6) to Directive 98/79/EC (as amended)
implemented into Polish law,
as evidenced by the audit conducted by the PCBC

Validity of the Certificate: from 28.04.2022 to 27.05.2025

The date of issue of the Certificate: 28.04.2022

The date of the first issue of the Certificate: 10.04.2019



Issued under the Contract No. MD-004/2022
Application No: 505/2022
Certificate bears the qualified signature.
Warsaw, 28/04/2022
Module H7

President



Blood Reagents and Diagnostic Kits

Quality blood reagents and diagnostic kits delivered worldwide

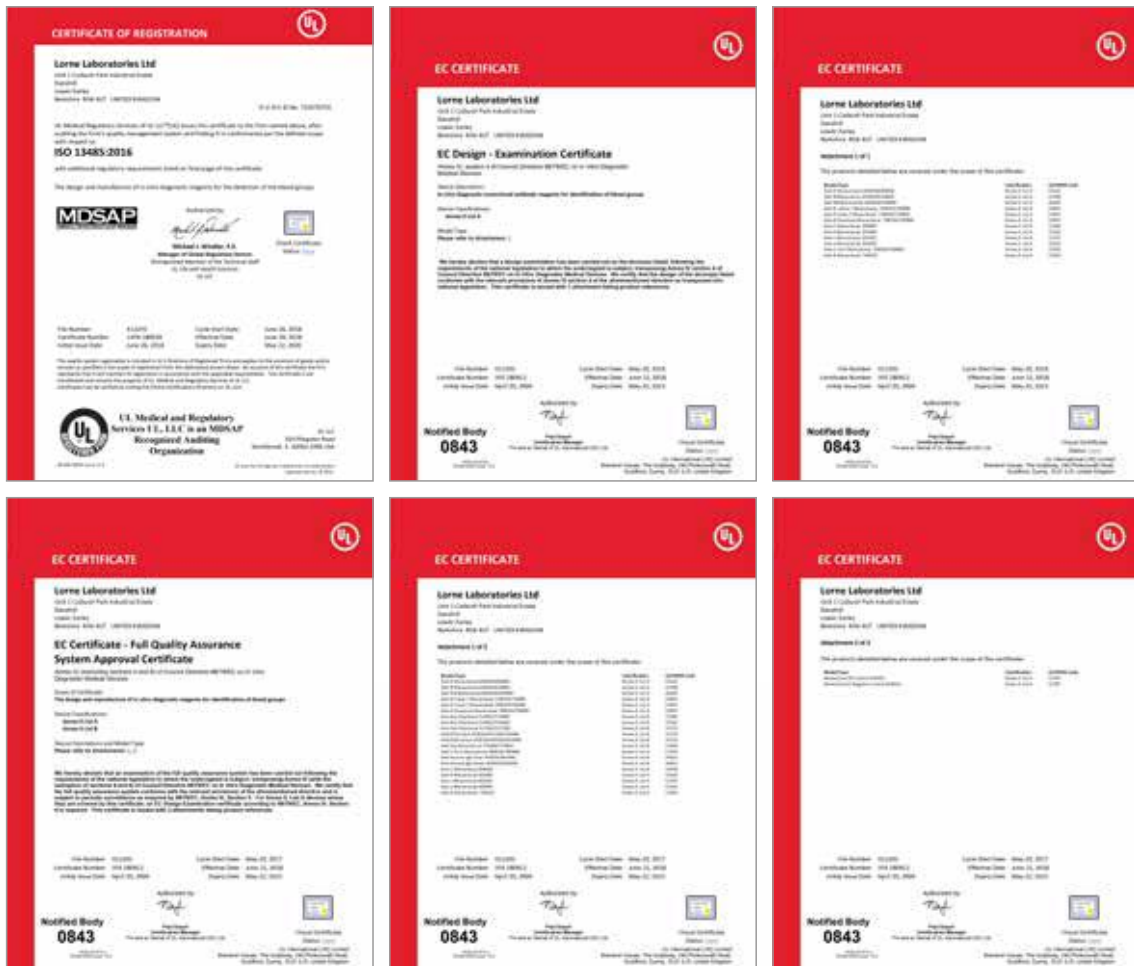




Lorne Laboratories provides high quality blood-grouping reagents and diagnostic kits. We do so at affordable prices and back this up with excellent customer service.

For over forty four years, Lorne has seen that philosophy transform the company from a small UK operation to one that spans the globe. The Lorne name is known and respected in over 110 countries around the world and it has come to mean 'quality' to the many blood transfusion professionals who use the products, both in the UK and across the five continents in which we operate.

Lorne has achieved ISO 13485 and MDSAP accreditation and our reagents and diagnostic kits are all CE marked. A significant number of our blood-grouping reagents are also registered with Health Canada.



Contents

BLOOD GROUPING REAGENTS Page

ABO system – Monoclonal Reagents.....	4
Rhesus System – Monoclonal Reagents.....	4
Grouping Reagents for M, N and S Blood Group Systems	5
Grouping Reagents for Kell Blood Group System.....	5
Grouping Reagents for Rare Blood Groups.....	6
Control Reagents.....	7
Anti-Human IgG Reagent.....	7
Anti-Human Globulin Reagent	7
Monoclonal Anti-C3d Reagent.....	7

ENZYMES AND POTENTIATORS Page

Buffered Saline Tablets	8
Papenzyme-plus.....	8
Bromelite	8
LISS Concentrate.....	8
LISS Ready for use.....	8
LISS-ADD	8
PEG-ADD.....	8
Serological Albumin	8
Accessories	9

RED CELLS Page

Red Cells – Reverse Grouping Cells	10
Red Cells – Antibody Screening Cells.....	10
Red Cells – Identicells.....	10
Red Cells – Coombs Control Cells.....	10
Red Cells Preservative – Preservacell.....	11
Red Cells Preservative – ABO Preservacell.....	11
Alsevers Solution.....	11
Red Cell Elute.....	11

DIAGNOSTIC KITS Page

Syphilis Kits	12
Latex Kits.....	13
Febrile Antigens	14
Rose Waaler.....	14

NON CE MARKED BLOOD GROUPING REAGENTS Page

ABO System - Monoclonal Reagents.....	15
Rhesus System - Monoclonal Reagents.....	15



www.lornelabs.com

Blood Grouping Reagents

Enzymes and Potentiators

Red Cells

Diagnostic Kits

Non CE Marked Blood Grouping Reagents

ABO SYSTEM – MONOCLONAL REAGENTS

Lorne Monoclonal IgM ABO blood grouping reagents contain mouse monoclonal antibodies diluted in a phosphate buffer containing sodium chloride, EDTA and bovine albumin. Each reagent is supplied at optimal dilution for use by slide, tube, gel card and microplate techniques.

Item	Product Code	Size	Maximum Shelf Life
Anti-A Monoclonal	600010	10ml	36 Months
Anti-B Monoclonal	610010	10ml	36 Months
Anti-A,B Monoclonal	620010	10ml	36 Months

Lorne Anti-A₁ Lectin blood grouping reagent is prepared from an extract of *Dolichos biflorus* seeds, diluted with a sodium chloride solution containing bovine albumin. The reagent is supplied at optimal dilution for use by tube technique.

Lorne Anti-H Lectin blood grouping reagent is prepared from an extract of *Ulex europaeus* seeds, diluted with a sodium chloride solution containing bovine albumin. The reagent is supplied at optimal dilution for use by tube technique.

Anti-A ₁ Lectin	116005	5ml	24 Months
Anti-H Lectin	115002	2ml	24 Months

RHESUS SYSTEM – MONOCLONAL REAGENTS

Lorne Monoclonal IgM Anti-D Clone 1 and Clone 2 blood grouping reagents are low protein reagents containing a human monoclonal IgM antibody diluted with sodium chloride, bovine albumin and macromolecular potentiators. When typing patient samples, each reagent will directly agglutinate Rh D positive cells, including the majority of variants (but not D^v) and a high proportion of weak D (D^w) phenotypes when using the slide, tube, gel card and microplate techniques.

Item	Product Code	Size	Maximum Shelf Life
Anti-D Clone 1 Monoclonal	730010	10ml	30 Months
Anti-D Clone 2 Monoclonal	710010	10ml	30 Months

Lorne Monoclonal Anti-D Duoclone blood grouping reagent is a low protein, blended reagent containing human monoclonal IgM and IgG Anti-D, diluted in a phosphate buffer containing sodium chloride, bovine albumin and macromolecular potentiators. When typing patient samples, this reagent will directly agglutinate Rh D positive cells, including the majority of variants (but not D^v) and a high proportion of weak D (D^w) phenotypes when using the slide, tube, gel card and microplate techniques. It will agglutinate D^v cells in the IAT phase of testing.

Anti-D Duoclone Monoclonal	740010	10ml	30 Months
----------------------------	--------	------	-----------

Lorne Monoclonal IgM Anti-Rh blood grouping reagents are low protein reagents containing human monoclonal antibodies diluted with sodium chloride, bovine albumin and macromolecular potentiators. Each reagent is supplied at optimal dilution for use by slide, tube, gel card and microplate techniques.

Anti-C Monoclonal	690005	5ml	24 Months
Anti-C ^w Monoclonal	750002	2ml	24 Months
Anti-E Monoclonal	691005	5ml	24 Months
Anti-c Monoclonal	692005	5ml	24 Months
Anti-e Monoclonal	693005	5ml	24 Months
Anti-C+D+E Monoclonal	700010	10ml	24 Months



All pack inserts are available on www.lornelabs.com

GROUPING REAGENTS FOR M, N AND S BLOOD GROUP SYSTEMS

Lorne Human Anti-M blood grouping reagent is prepared from human serum diluted in a sodium chloride solution containing bovine albumin. The reagent is supplied at optimal dilution for use by tube and gel card techniques.

Item	Product Code	Size	Maximum Shelf Life
Anti-M Polyclonal	311002	2ml	24 Months

Lorne Anti-N Lectin blood grouping reagent is prepared from an extract of *Vicia*, diluted with a sodium chloride solution containing bovine albumin. The reagent is supplied at optimal dilution for use by tube and gel card techniques.

Anti-N Lectin	312002	2ml	24 Months
---------------	--------	-----	-----------

Lorne Monoclonal Anti-S and Anti-s blood grouping reagents contain human monoclonal antibodies diluted in a phosphate buffer containing sodium chloride and bovine albumin. They are supplied at optimal dilution for use by indirect Coombs tube test and gel card techniques.

Anti-S Monoclonal	770002	2ml	24 Months
Anti-s Monoclonal	771002	2ml	24 Months

GROUPING REAGENTS FOR KELL BLOOD GROUP SYSTEM

Lorne Monoclonal Anti-K blood grouping reagent is a low protein reagent containing the monoclonal IgM antibody, diluted in a phosphate buffer containing sodium chloride, bovine albumin and macromolecular potentiators. The reagent is supplied at optimal dilution for use by slide, tube, gel card and microplate techniques.

Item	Product Code	Size	Maximum Shelf Life
Anti-K Monoclonal	760010	10ml	24 Months

Lorne Monoclonal Anti-k (Cellano) blood grouping reagent contains monoclonal IgG antibody diluted in sodium chloride containing macromolecular potentiators and bovine albumin. Each reagent is supplied at optimal dilution for use by indirect Coombs tube and gel card techniques without the need for further dilution or addition.

Anti-k (Cellano) Monoclonal	325002	2ml	24 Months
-----------------------------	--------	-----	-----------

Lorne Human Anti-Kp^a and Anti-Kp^b blood grouping reagents are prepared from human serum diluted in sodium chloride containing macromolecular potentiators and bovine albumin. Each reagent is supplied at optimal dilution for use by indirect Coombs tube and gel card techniques without the need for further dilution or addition.

Anti-Kp ^a Polyclonal	321002	2ml	24 Months
Anti-Kp ^b Polyclonal	322002	2ml	24 Months



All products available in bulk quantities

GROUPING REAGENTS FOR RARE BLOOD GROUPS

Lorne Monoclonal Fy^a blood grouping reagent contains human monoclonal antibodies diluted in a phosphate buffer containing sodium chloride and bovine albumin.

Lorne Human Anti-Fy^b blood grouping reagent is prepared from human serum diluted in a sodium chloride solution containing macromolecular potentiators and bovine albumin. Each reagent is supplied at optimal dilution for use by indirect Coombs tube test and gel card techniques.

Item	Product Code	Size	Maximum Shelf Life
Anti-Fy ^a Monoclonal	774002	2ml	24 Months
Anti-Fy ^b Polyclonal	317002	2ml	24 Months

Lorne Anti-Jk^a and Anti-Jk^b Monoclonal reagents contain human monoclonal IgM antibodies, sodium chloride, phosphate buffer and bovine albumin. When typing red cells in accordance with the instructions for use, the reagents will directly agglutinate either Jk^a positive cells or Jk^b positive cells. Both reagents are supplied at optimal dilution for use by the test tube technique.

Anti-Jk ^a Monoclonal	775002	2ml	24 Months
Anti-Jk ^b Monoclonal	776002	2ml	24 Months

Lorne Human Anti-Lu^a and Anti-Lu^b blood grouping reagents are prepared from human serum diluted in a sodium chloride solution containing macromolecular potentiators and bovine albumin. Each reagent is supplied at optimal dilution for use by indirect Coombs tube test and gel card techniques.

Anti-Lu ^a Polyclonal	330002	2ml	24 Months
Anti-Lu ^b Polyclonal	331002	2ml	24 Months

Lorne Monoclonal IgM Anti-P₁ blood grouping reagent contains mouse monoclonal IgM antibodies, diluted in a solution containing sodium chloride and bovine albumin. The reagent is supplied at optimal dilution for use by tube and gel card techniques.

Anti-P ₁ Monoclonal	315002	2ml	24 Months
--------------------------------	--------	-----	-----------

Lorne Monoclonal Anti-Le^a contains human monoclonal IgM and Anti-Le^b contains mouse monoclonal IgM antibodies, diluted in a phosphate buffer containing sodium chloride, EDTA, bovine albumin and macromolecular potentiators. Each reagent is supplied at optimal dilution for use by the tube technique. The Anti-Le^a reagent can also be used for gel card techniques.

Anti-Le ^a Monoclonal	632002	2ml	24 Months
Anti-Le ^b Monoclonal	631002	2ml	24 Months

Lorne Human Anti-Di^a blood grouping reagent is prepared from human serum diluted in a sodium chloride solution containing macromolecular potentiators and bovine albumin. The reagent is supplied at optimal dilution for use by indirect Coombs tube test and gel card techniques.

Anti-Di ^a Polyclonal	328002	2ml	24 Months
---------------------------------	--------	-----	-----------



All pack inserts are available on www.lornelabs.com

CONTROL REAGENTS

Lorne Monoclonal Rh Control is formulated with the same levels of potentiators and protein as Lorne Monoclonal Rh Grouping Reagents with the blood group antibodies omitted. The reagent is supplied at optimal dilution for use by slide, tube, gel card and microplate techniques.

Item	Product Code	Size	Maximum Shelf Life
Monoclonal Rh Control	640010	10ml	24 Months

Lorne Monoclonal D Negative Control is for the control of Monoclonal Anti-D reagents and is formulated with the same concentrations of phosphate buffer, sodium chloride, bovine albumin and macromolecular potentiators as Lorne Monoclonal Anti-D reagents with the antibodies omitted. The reagent is supplied at optimal dilution for use by slide, tube, gel card and microplate techniques.

Monoclonal D Negative Control	650010	10ml	30 Months
-------------------------------	--------	------	-----------

Lorne Inert AB Serum is prepared from pooled human serum. No potentiators or any other chemicals have been added to the reagent. This reagent is supplied at optimal dilution for use by the techniques recommended for the reagent to be controlled.

Inert AB Serum	110010	10ml	24 Months
----------------	--------	------	-----------

Lorne Precise Weak Anti-D Control Reagent is prepared from pools of human serum containing low activity Anti-D. The pool is diluted in inert serum to give a final concentration of 0.09 IU/ml Anti-D. ABO antibodies are not absorbed. This polyclonal reagent is supplied at the optimal dilution, for use by the techniques recommended for the reagent to be controlled.

Precise Weak Anti-D	209005	5ml	24 Months
---------------------	--------	-----	-----------

ANTI-HUMAN IgG REAGENT

Lorne Monospecific Anti-Human IgG Clear and Anti-Human IgG Green reagents contain anti-human IgG derived from rabbits. All non-specific activity is removed by absorption. These monospecific reagents are supplied at optimal dilution, for use by spin tube technique.

Item	Product Code	Size	Maximum Shelf Life
Anti-Human IgG (Clear)	401010	10ml	24 Months
Anti-Human IgG (Green)	402010	10ml	24 Months

ANTI-HUMAN GLOBULIN REAGENT

Lorne Polyspecific Anti-Human Globulin Elite Clear and Anti-Human Globulin Elite Green reagents contain anti-human IgG derived from rabbits with non-specific activity removed by absorption and mouse monoclonal IgM Anti-C3d, Clone BRIC-8. The antibodies are diluted in a buffered solution containing bovine albumin. These polyspecific reagents are supplied at optimal dilution, for use by spin tube technique.

Item	Product Code	Size	Maximum Shelf Life
A.H.G Elite (Clear)	415010	10ml	24 Months
A.H.G Elite (Green)	435010	10ml	24 Months

MONOCLONAL ANTI-C3d REAGENT

Lorne Monoclonal IgM Anti-C3d blood grouping reagent contains mouse monoclonal Anti-C3d, Clone BRIC-8. The reagent is supplied at optimal dilution, for use by direct tube technique.

Item	Product Code	Size	Maximum Shelf Life
Anti-C3d Monoclonal	427002	2ml	24 Months

All products available in bulk quantities

ENZYMES AND POTENTIATORS

Lorne Phosphate Buffered Saline Tablets provide a safe, standardised saline solution for transfusion serology. Each tablet makes 1 litre of solution.

Item	Product Code	Size	Maximum Shelf Life
Buffered Saline Tablets	490025	25	24 Months
	490250	250	24 Months

Lorne Papanzyme-plus reagent is a ready to use liquid preparation of stabilised papain. The reagent is standardised by serological methods for use in blood group antibody investigations. The reagent is supplied at optimal dilution for use by tube technique.

Papanzyme-plus	441010	10ml	12 Months
----------------	--------	------	-----------

Lorne Bromelite reagent is a ready to use liquid preparation of stabilised bromelin. The reagent is standardised by serological methods for use in blood group antibody investigations. The reagent is supplied at optimal dilution for use by tube technique.

Bromelite	443010	10ml	12 Months
-----------	--------	------	-----------

Lorne LISS Concentrate is a solution of glycine, phosphate buffer and 0.3 M sodium chloride. The solution is supplied at a stronger concentration than needed for serological use. It must be diluted 10 times in de-ionised water before being used by all recommended techniques in the pack insert.

LISS Concentrate	460500	500ml	24 Months
	460025	2500ml	24 Months

Lorne LISS ready for use is a low ionic strength solution containing glycine, sodium chloride and phosphate buffer. The reagent is supplied at the optimal dilution ready for use by all recommended techniques in the pack insert.

LISS Ready for use	470020	20 x 250ml	12 Months
	470250	4 x 250ml	12 Months
	470025	2500ml	12 Months

Lorne LISS-ADD is a low ionic strength solution containing glycine, sodium chloride, phosphate buffer and bovine albumin. The reagent is supplied at the optimal dilution, for use by all the recommended techniques in the pack insert.

LISS-ADD	480010	10ml	24 Months
----------	--------	------	-----------

Lorne PEG-ADD is a low ionic strength solution contains glycine, a phosphate buffer and polyethylene glycol. The reagent is supplied at optimal dilution for use by all the recommended techniques stated in the pack insert without the need for further dilution or addition.









PEG-ADD	485010	10ml	24 Months
---------	--------	------	-----------

Lorne 22% and 30% Serological Albumin is prepared from a mixture of bovine serum albumin and buffered saline. No artificial avidity enhancers or high molecular weight agglutination potentiators are added to any BSA preparation. None of the BSA reagents contain sodium caprylate. Each BSA reagent is supplied at optimal dilution for use by all recommended techniques in the pack insert.

Serological Albumin 22%	451010	10ml	24 Months
Serological Albumin 30%	452010	10ml	24 Months

All products available in bulk quantities

ACCESSORIES

Item	Product Code	Size
 <p>The Essex Blockfile is a sturdy box for the storage of up to 200 cassette type histology blocks in each box. Delivered flat in packs of 25, they are easily assembled when needed and provide convenient and economical long-term storage for tissue samples. Dimensions – (L) 390mm x (D) 200mm x (H) 45mm</p>	882025	25 Boxes
 <p>The Brighton Slidestak is a sturdy box for the storage of over 1000 microscope slides upright in each box. Delivered flat in packs of 25, they are easily assembled and provide convenient and economical long-term storage. Dimensions – (L) 310mm x (D) 170mm x (H) 80mm</p>	881025	25 Boxes
 <p>The Cardtiles are suitable for a wide range of haemagglutination tests. Each card has twenty 30mm square white test sites.</p>	880100	100 Cards
 <p>The Mini-Cardtiles are specially laminated cards suitable for VDRL and similar agglutination tests requiring a white background. Each card has ten 20mm diameter white test sites that are slightly compressed to form shallow wells.</p>	880120	25 Cards
 <p>The Latex Cardtiles are suitable for all latex agglutination tests. Each card has six 30mm diameter black reaction sites.</p>	880130	25 Cards
 <p>The mini pipettes are 11.5cm in length with one sealed end. The diameter of the tube is 4mm.</p>	044000	500
 <p>We use these products in our own production. The 5ml vials are glass and the 10ml vials are plastic. Each vial is supplied with its own dropper. The 10ml vials are supplied in a sterile format in multiples of 1224 while all the other products are supplied individually and require autoclaving.</p>	LAB00002	5ml
Vials and Droppers	LAB00036	10ml
 <p>We use these products in our own production. They are not branded. We supply flatpacks that hold 5 or 10 vials</p>	LAB00027	5 Vial
Flatpacks	LAB00007	10 Vial

RED CELLS - REVERSE GROUPING CELLS

These Grouping Cells are made from red cells that have been washed to remove all traces of blood group antibodies and then resuspended in a preservative solution of buffered saline containing adenine, inosine, chloramphenicol and neomycin sulphate. The preservative solution does not interfere with complement-mediated haemolysis. Each group A₁, A₂ and B vial contains a 2.5-3.0% red cell suspension derived from the blood of a single donor, whereas the group O vial contains a 2.5-3.0% suspension of pooled group O red cells from two donors in equal proportions. Antigens for which the O cells have been typed are noted on the antigen profile accompanying each lot. NB: Some antigens are present on only 50% of the cells in each lot.

Item	Product Code	Size	Minimum Shelf Life
Reverse Grouping A ₁ + B Cells	910020	2 x 10ml	30 Days
Reverse Grouping A ₁ + A ₂ + B Cells	910030	3 x 10ml	30 Days
Reverse Grouping A ₁ + A ₂ + B + O Cells	910040	4 X 10ml	30 Days
Reverse Grouping A ₂ Cells	920002	1 x 10ml	30 Days

RED CELLS - ANTIBODY SCREENING CELLS

Maxi-Screen 3 red cells are for antibody screening. Each reagent vial contains a 2.5-3.0% suspension of red cells derived from the blood of a single group O donor. The donor red cells have been washed to remove blood group antibodies and then resuspended in a preservative solution containing adenine and inosine to help preserve carbohydrate metabolism and chloramphenicol and neomycin sulphate as preservatives.

Item	Product Code	Size	Minimum Shelf Life
Maxi-Screen 3	950030	3 x 10ml	30 Days

RED CELLS - IDENTICELLS

Identicells are made up of 10 vials which each contain a 2.5-3.0% suspension of red cells derived from the blood of a single group O donor. The donor cells have been washed to remove blood group antibodies and then resuspended in a preservative solution containing adenine, inosine, chloramphenicol and neomycin sulphate as preservatives.

Item	Product Code	Size	Minimum Shelf Life
Identicells	960050	10 x 5ml	30 Days

RED CELLS - COOMBS CONTROL CELLS

Coombs Control Cells are made up of a 3.8-4.2% suspension of single donor group O red cells washed to remove all blood group antibodies and then resuspended in a preservative solution. The preservative solution contains neomycin sulphate and chloramphenicol as preservatives. The cells are then sensitised with IgG.

Item	Product Code	Size	Minimum Shelf Life
Coombs Control Cells	970010	10ml	30 Days

Deliveries take place every 28 days.

As well as the standard Red Cell products above, we can also supply other products for special standing orders only. These include 0.8% panels and screening cells for use with column agglutination systems and Papainised red cell panels. Contact us with full details of your requirements for a quotation.

All the above Red Cell products are CE marked and comply with the Red Book.

All pack inserts are available on www.lornelabs.com

They are not Lorne labelled products.

RED CELLS PRESERVATIVE – PRESERVACELL

Lorne Preservacell is a phosphate buffered solution containing glucose, calcium chloride and purine bases, with chloramphenicol, gentamycin sulphate and neomycin sulphate as antibiotics. The reagent is supplied at optimal dilution.

Item	Product Code	Size	Maximum Shelf Life
Preservacell	980500	500ml	12 Months

RED CELLS PRESERVATIVE – ABO PRESERVACELL

Lorne ABO Preservacell is a phosphate buffered solution containing glucose, calcium chloride and purine bases, with chloramphenicol, gentamycin sulphate and neomycin sulphate as antibiotics. EDTA is added to stop complement binding so that potent ABO haemolysins act as simple agglutinins. The reagent is supplied at optimal dilution.

Item	Product Code	Size	Maximum Shelf Life
ABO Preservacell	981500	500ml	12 Months

ALSEVERS SOLUTION

Alsevers Solution is an isotonic, balanced salt solution that is routinely used as an anticoagulant/blood preservative, which permits the storage of whole blood at refrigerator temperatures for approximately 10 weeks. The solution contains antibiotics and other chemicals that ensure maximum viability of stored red cells.

Item	Product Code	Size	Maximum Shelf Life
Alsevers Solution	983000	1000ml	12 Months

RED CELL ELUTE

Lorne Red Cell Elute is an acid elution kit. The kit consists of Concentrated Wash Solution, which is used to minimise antibody dissociation during washing, Acid Eluting Solution, which is a low pH glycine buffer containing a colouring agent and a Base Buffering Solution, Tris solution containing bovine albumin. The Concentrated Wash Solution requires dilution and all the other solutions are supplied at optimal dilution for use by all recommended techniques in the pack insert.

Item	Product Code	Size	Maximum Shelf Life
Red Cell Elute	930110	Kit	30 Months



All products available in bulk quantities

SYPHILIS KITS

Lorne TPHA Kit detects antibodies to *T. pallidum*. Test Cells are preserved avian erythrocytes coated with antigenic components of pathogenic *T. pallidum* (Nichol's strain). Any non-specific reactions are detected using the Control Cells; avian erythrocytes not coated with *T. pallidum* antigens. Non-specific reactions can also be absorbed out using Control Cells. Antibodies to non-pathogenic treponemes are absorbed by an extract of Reiter's treponemes in the cell suspension. Reagents are supplied at optimal dilution for use by the recommended techniques in the pack insert.

Item	Product Code	Size	Maximum Shelf Life
TPHA Microtitre Plate Kit	043100A	100 Tests	18 Months

The VDRL test is a non-treponemal slide agglutination test for the qualitative and semi-quantitative detection of plasma reagins. The antigen suspension, a lipid complex, is agglutinated when mixed with samples containing reagins of patients affected by syphilis. The reagent is supplied ready to use.

VDRL Stabilised Reagent Kit	046511A	250 Tests	30 Months
-----------------------------	---------	-----------	-----------

RPR Carbon Antigen contains micro particulate carbon, which aids in the microscopic reading of results. Lorne provides reagents, controls and kits. All the reagents are supplied at optimum dilution for use by all recommended techniques without the need for further dilution or addition.

RPR Carbon Antigen	045005A	100 Tests	30 Months
RPR Carbon Positive Control	047001A	1ml	30 Months
RPR Carbon Kit	044150A	150 Tests	30 Months
	044500A	500 Tests	30 Months



RPR Carbon Kit



TPHA Microtitre Plate Kit



Strep Test Kit

All pack inserts are available on www.lornelabs.com

LATEX KITS

Lorne ASO Latex Kit is a serologic test for the detection of ASO antibodies. All the reagents are supplied at optimal dilution for use by all recommended techniques in the pack insert.

Item	Product Code	Size	Maximum Shelf Life
ASO Latex Kit	031100A	100 Tests	30 Months

Lorne RF Latex Kit is for the detection of Rheumatoid Factor. The latex reagent is a suspension of latex particles coated with human gamma globulins, which agglutinate in the presence of Rheumatoid Factor. All latex reagents are supplied at optimal dilution for use by all recommended techniques in the pack insert.

RF Latex Kit	830100A	100 Tests	30 Months
--------------	---------	-----------	-----------

Lorne CRP Latex Test Kit is for the detection of CRP. The test reagent consists of latex particles coated with either goat or rabbit Anti-CRP (IgG). All the latex reagents are supplied at optimal dilution for use by all recommended techniques in the pack insert.

CRP Latex Kit	850100A	100 Tests	30 Months
---------------	---------	-----------	-----------

Lorne IM Latex Test Kit is for detection of the heterophile antibody associated with Infectious Mononucleosis. The test reagent consists of latex particles coated with partially purified glycoprotein from bovine red cells. All reagents are supplied at optimal dilution for use by all recommended techniques in the pack insert.

IM Latex Kit	041050A	50 Tests	30 Months
--------------	---------	----------	-----------

Lorne LE Latex Kit is for the detection of nuclear proteins in Systemic Lupus Erythematosus (SLE or LE). The test reagent consists of DNP coated latex particles. All the reagents are supplied at optimal dilution for use by recommended techniques in the pack insert.

LE Latex Test Kit	840050	50 Tests	24 Months
-------------------	--------	----------	-----------

Lorne Strep Kit is a Latex agglutination grouping kit for the identification of Streptococci of Lancefield groups A, B, C, D, F and G by agglutination of specific antibody coated latex particles in the presence of enzymatically-extracted antigen. All the reagents are supplied at optimal dilution for use by all recommended techniques in the pack insert.

Strep Test Kit	860050	6 x 50 Tests	18 Months
----------------	--------	--------------	-----------

Lorne Staph Kit is a Latex agglutination kit for the identification of *Staph. aureus*. Includes latex reagent, control reagent and agglutination slides. All the reagents are supplied at optimal dilution for use by all recommended techniques in the pack insert.

Staph Test Kit	870050	50 Tests	18 Months
	870100	100 Tests	18 Months



All products available in bulk quantities

FEBRILE ANTIGENS

Lorne Stained Febrile Antigens are for the detection of certain Salmonellae, Rickettsiae and Brucellae pathogens. The antigens are suspensions of killed bacteria, stained to enhance the reading of agglutination tests. The blue stained antigens are specific to the somatic “O” antigens and the red stained antigens are specific to the flagellar “H” antigens. Suspensions of Proteus OX2, OX19 and OXK are used to detect rickettsial antibodies.

Rose Bengal is a slide agglutination test for the qualitative and semi-quantitative detection of anti-Brucella antibodies in human and animal serum. The stained bacterial suspension agglutinates when mixed with samples containing specific IgG or IgM antibodies present in the patient sample.

Item	Product Code	Size	Maximum Shelf Life
Salmonella Typhi H	502005A	100 Tests	30 Months
Salmonella Paratyphi AH	504005A	100 Tests	30 Months
Salmonella Paratyphi BH	506005A	100 Tests	30 Months
Salmonella Paratyphi CH	508005A	100 Tests	30 Months
Salmonella Typhi O	510005A	100 Tests	30 Months
Salmonella Paratyphi AO	512005A	100 Tests	30 Months
Salmonella Paratyphi BO	514005A	100 Tests	30 Months
Salmonella Paratyphi CO	516005A	100 Tests	30 Months
Brucella Abortus	518005A	100 Tests	30 Months
Brucella Melitensis	520005A	100 Tests	30 Months
Proteus OX2	522005A	100 Tests	30 Months
Proteus OX19	524005A	100 Tests	30 Months
Proteus OXK	526005A	100 Tests	30 Months
Febrile Antigen Kit + Controls	532042A	8x100 Tests and 2x1ml	30 Months
Febrile Positive Control	536001A	1ml	30 Months
Febrile Negative Control	537001A	1ml	30 Months
Rose Bengal	155050A	50 Tests	30 Months

ROSE WAALER

Rose Waaler is a technique of passive haemagglutination for qualitative and semi-quantitative detection of human serum Rheumatoid Factor. Sheep red blood cells are coated with a concentration of antiserum to sheep red blood cells that is too low to cause agglutination. The addition of serum from a patient with Rheumatoid Factor will cause agglutination.

Item	Product Code	Size	Maximum Shelf Life
Rose Waaler	156050A	50 Tests	30 Months



Febrile Antigen Kit + Controls

All pack inserts are available on www.lornelabs.com

ABO SYSTEM – MONOCLONAL REAGENTS

Lorne Monoclonal IgM ABO Standard Grade blood grouping reagents contain mouse monoclonal antibodies diluted in a phosphate buffer containing sodium chloride, EDTA and bovine albumin. Each reagent is supplied at optimal dilution for use by slide, tube, gel card and microplate techniques.

Item	Product Code	Size	Maximum Shelf Life
Anti-A Monoclonal - Standard Grade	600010E	10ml	36 Months
Anti-B Monoclonal - Standard Grade	610010E	10ml	36 Months
Anti-A,B Monoclonal - Standard Grade	620010E	10ml	36 Months

RHESUS SYSTEM – MONOCLONAL REAGENTS

Lorne Monoclonal IgM Anti-D Clone 1 Standard Grade blood grouping reagent is a low protein reagent containing a human monoclonal IgM antibody diluted with sodium chloride, bovine albumin and macromolecular potentiators. When typing patient samples, the reagent will directly agglutinate Rh D positive cells, including the majority of variants (but not D^{vi}) and a high proportion of weak D (D^u) phenotypes when using the slide, tube, gel card and microplate techniques.

Item	Product Code	Size	Maximum Shelf Life
Anti-D IgM Monoclonal - Standard Grade	730010E	10ml	30 Months

Lorne Monoclonal Anti-D Duoclone Standard Grade blood grouping reagent is a low protein, blended reagent containing human monoclonal IgM and IgG Anti-D, diluted in a phosphate buffer containing sodium chloride, bovine albumin and macromolecular potentiators. When typing patient samples, this reagent will directly agglutinate Rh D positive cells, including the majority of variants (but not D^{vi}) and a high proportion of weak D (D^u) phenotypes when using the slide, tube, gel card and microplate techniques. It will agglutinate D^{vi} cells in the IAT phase of testing.

Anti-D Duoclone Monoclonal - Standard Grade	740010E	10ml	30 Months
---	---------	------	-----------



All products available in bulk quantities



Lorne Laboratories Limited
Unit 1 Cutbush Park Industrial Estate
Danehill, Lower Earley
Berkshire RG6 4UT United Kingdom

Tel: +44 (0) 118 921 2264

Email: info@lornelabs.com www.lornelabs.com



Published October 2018



ORGENTEC Diagnostika GmbH

Carl-Zeiss-Straße 49-51


55129 Mainz - Germany

Phone: +49 (0) 61 31 / 92 58-0

Fax: +49 (0) 61 31 / 92 58-58

Internet: www.orgentec.com



 **601_3**

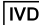




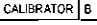


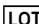












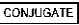


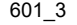

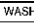

ORG 601 Anti-CCP hs® (high sensitive)

INTENDED PURPOSE

Anti-CCP hs® (high sensitive) is an ELISA test system for the quantitative measurement of IgG class autoantibodies against cyclic citrullinated peptides (CCP) in human serum or plasma. This product is intended for professional in vitro diagnostic use only.

Measurement of anti-CCP antibodies may aid in the diagnosis of rheumatoid arthritis (RA), where anti-CCP antibody levels represent one parameter of a multi-criterion diagnostic process, encompassing both clinical and laboratory-based assessments.

SYMBOLS USED ON LABELS

	In vitro diagnostic medical device		Microplate
	Manufacturer		Calibrator
	Catalogue number		Calibrator
	Sufficient for 96 determinations		Calibrator
	Batch code		Calibrator
	Use by		Calibrator
	Temperature limitation		Calibrator
	Keep away from sunlight		Control positive
	Do not reuse		Control negative
	Date of manufacture		Sample Buffer P
	CE marked according to 98/79/EC		Enzyme Conjugate
	Consult instructions for use		TMB Substrate
	Electronic Instruction For Use: version		Stop solution
			Wash Buffer
			Ready to use

PRINCIPLE OF THE TEST

Highly purified cyclic citrullinated vimentin peptides (CCP) is bound to microwells.

The determination is based on an indirect enzyme linked immune reaction with the following steps:

Specific antibodies in the patient sample bind to the antigen coated on the surface of the reaction wells. After incubation, a washing step removes unbound and unspecifically bound serum or plasma components. Subsequently added enzyme conjugate binds to the immobilized antibody-antigen-complexes. After incubation, a second washing step removes unbound enzyme conjugate. After addition of substrate solution the bound enzyme conjugate hydrolyses the substrate forming a blue coloured product. Addition of an acid stops the reaction generating a yellow end-product. The intensity of the yellow color correlates with the concentration of the antibody-antigen-complex and can be measured photometrically at 450 nm.

WARNINGS AND PRECAUTIONS

- All reagents of this kit are intended for professional in vitro diagnostic use only.
- Components containing human serum were tested and found negative for HBsAg, HCV, HIV1 and HIV2 by FDA approved methods. No test can guarantee the absence of HBsAg, HCV, HIV1 or HIV2, and so all human serum based reagents in this kit must be handled as though capable of transmitting infection.
- Bovine serum albumin (BSA) used in components has been tested for BSE and found negative.
- Avoid contact with the substrate TMB (3,3',5,5'-Tetramethyl-benzidine).
- Stop solution contains acid, classification is non-hazardous. Avoid contact with skin.
- Control, sample buffer and wash buffer contain sodium azide 0.09% as preservative. This concentration is classified as non-hazardous.
- Enzyme conjugate contains ProClin 300 0.05% as preservative. This concentration is classified as non-hazardous.

During handling of all reagents, controls and serum samples observe the existing regulations for laboratory safety regulations and good laboratory practice:

- First aid measures: In case of skin contact, immediately wash thoroughly with water and soap. Remove contaminated clothing and shoes and wash before reuse. If system fluid comes into contact with skin, wash thoroughly with water. After contact with the eyes carefully rinse the opened eye with running water for at least 10 minutes. Get medical attention if necessary.
- Personal precautions, protective equipment and emergency procedures:
Observe laboratory safety regulations. Avoid contact with skin and eyes. Do not swallow. Do not pipette by mouth. Do not eat, drink, smoke or apply makeup in areas where specimens or kit reagents are handled. When spilled, absorb with an inert material and put the spilled material in an appropriate waste disposal.
- Exposure controls / personal protection: Wear protective gloves of nitril rubber or natural latex. Wear protective glasses. Used according to intended use no dangerous reactions known.
- Conditions to avoid: Since substrate solution is light-sensitive. Store in the dark.
- For disposal of laboratory waste the national or regional legislation has to be observed.

Observe the guidelines for performing quality control in medical laboratories by assaying control sera.

CONTENTS OF THE KIT

ORG 601	▽ 96	Sufficient for 96 determinations
MICROPLATE	1	One divisible microplate consisting of 12 modules of 8 wells each. Ready to use. Product code on module: CCP
CALIBRATOR A	1x 1.5 ml	Calibrator A 0 U/ml, containing serum/buffer matrix (PBS, BSA, detergent, NaN3 0.09%), yellow. Ready to use.
CALIBRATOR B	1x 1.5 ml	Calibrator B 20 U/ml, containing CCP antibodies in a serum/buffer matrix (PBS, BSA, detergent, NaN3 0.09%), yellow. Ready to use.
CALIBRATOR C	1x 1.5 ml	Calibrator C 40 U/ml, containing CCP antibodies in a serum/buffer matrix (PBS, BSA, detergent, NaN3 0.09%), yellow. Ready to use.
CALIBRATOR D	1x 1.5 ml	Calibrator D 100 U/ml, containing CCP antibodies in a serum/buffer matrix (PBS, BSA, detergent, NaN3 0.09%), yellow. Ready to use.
CALIBRATOR E	1x 1.5 ml	Calibrator E 300 U/ml, containing CCP antibodies in a serum/buffer matrix (PBS, BSA, NaN3 0.09%), yellow. Ready to use.
CALIBRATOR F	1x 1.5 ml	Calibrator F 1000 U/ml, containing CCP antibodies in a serum/buffer matrix (PBS, BSA, detergent, NaN3 0.09%), yellow. Ready to use.
CONTROL +	1x 1.5 ml	Control positive, containing CCP antibodies in a serum/buffer matrix (PBS, BSA, detergent, NaN3 0.09%), yellow. Ready to use. The concentration is specified on the certificate of analysis.
CONTROL -	1x 1.5 ml	Control negative, containing CCP antibodies in a serum/buffer matrix (PBS, BSA, detergent, NaN3 0.09%), yellow. Ready to use. The concentration is specified on the certificate of analysis.
DILUENT	20 ml	Sample Buffer P, containing PBS, BSA, detergent, preservative sodium azide 0.09%, yellow, concentrate (5 x).
CONJUGATE	15 ml	Enzyme Conjugate containing anti-human IgG antibodies, HRP labelled; PBS, BSA, detergent, preservative PROCLIN 0.05%, light red. Ready to use.
TMB	15 ml	TMB Substrate; containing 3,3', 5,5'- Tetramethylbenzidin, colorless. Ready to use.
STOP	15 ml	Stop solution; contains acid. Ready to use.
WASH	20 ml	Wash Buffer, containing Tris, detergent, preservative sodium azide 0.09%; 50 x conc.
i	1	Certificate of Analysis

MATERIALS REQUIRED

- Microplate reader capable of endpoint measurements at 450 nm; optional: reference filter at 620 nm
- Data reduction software
- Multi-channel dispenser or repeatable pipette for 100 µl
- Vortex mixer
- Pipettes for 10 µl, 100 µl and 1000 µl
- Laboratory timing device
- Distilled or deionised water
- Measuring cylinder for 1000 ml and 100 ml
- Plastic container for storage of the wash solution

This ELISA assay is suitable for use on open automated ELISA processors. Each assay has to be validated on the respective automated system. Detailed information is provided upon request.

SPECIMEN COLLECTION, STORAGE AND HANDLING

- Collect whole blood specimens using acceptable medical techniques to avoid hemolysis.
- Allow blood to clot and separate the serum or plasma by centrifugation.
- Test serum should be clear and non-hemolyzed. Contamination by hemolysis or lipemia should be avoided, but does not interfere with this assay.
- Specimens may be refrigerated at 2-8°C for up to five days or stored at -20°C up to six months.
- Avoid repetitive freezing and thawing of serum or plasma samples. This may result in variable loss of antibody activity.
- Testing of heat-inactivated sera is not recommended.

STORAGE AND STABILITY

- Store test kit at 2-8°C in the dark.
- Do not expose reagents to heat, sun, or strong light during storage and usage.
- Store microplate sealed and dessicated in the clip bag provided.
- Shelf life of the unopened test kit is 18 months from day of production.
Unopened reagents are stable until expiration of the kit. See labels for individual batch.
- Diluted Wash Buffer and Sample Buffer are stable for at least 30 days when stored at 2-8°C.
We recommend consumption on the same day.

PROCEDURAL NOTES

- Do not use kit components beyond their expiration dates.
- Do not interchange kit components from different lots and products.
- All materials must be at room temperature (20-28°C) prior to use.
- Prepare all reagents and samples. Once started, perform the test without interruption.
- Double determinations may be done. By this means pipetting errors may become obvious.
- Perform the assay steps only in the order indicated.
- Always use fresh sample dilutions.
- Pipette all reagents and samples into the bottom of the wells.
- To avoid carryover or contamination, change the pipette tip between samples and different kit controls.
- Wash microwells thoroughly and remove the last droplets of wash buffer.
- All incubation steps must be accurately timed.
- Do not re-use microplate wells.

PREPARATION OF REAGENTS

WASH

Dilute the contents of one vial of the buffered wash solution concentrate (50x) with distilled or deionised water to a final volume of 1000 ml prior to use.

DILUENT

Sample Buffer P: Prior to use dilute the contents (20 ml) of one vial of sample buffer 5x concentrate with distilled or deionised water to a final volume of 100 ml.

Preparation of samples

Dilute patient samples 1:100 before the assay: Put 990 µl of prediluted sample buffer in a polystyrene tube and add 10 µl of sample. Mix well. Note: Calibrators / Controls are ready to use and need not be diluted.

TEST PROCEDURE

Prepare enough microplate modules for all calibrators / controls and patient samples.

- Pipette **100 µl** of calibrators, controls and prediluted patient samples into the wells.
Incubate for **30 minutes** at room temperature (20-28 °C).
Discard the contents of the microwells and **wash 3 times** with **300 µl** of wash solution.
- Dispense **100 µl** of enzyme conjugate into each well.
Incubate for **15 minutes** at room temperature.
Discard the contents of the microwells and **wash 3 times** with **300 µl** of wash solution.
- Dispense **100 µl** of TMB substrate solution into each well.
Incubate for **15 minutes** at room temperature.
- Add 100 µl** of stop solution to each well of the modules
Incubate for **5 minutes** at room temperature.
Read the optical density at 450 nm (reference 600-690nm) and calculate the results.
The developed colour is stable for at least 30 minutes. Read during this time.

Example for a pipetting scheme:

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
A	A	P1										
B	B	P2										
C	C	P3										
D	D											
E	E											
F	F											
G	C+											
H	C-											

P1, ... patient sample A-F calibrators C+, C- controls

VALIDATION

Test results are valid if the optical densities at 450 nm for calibrators / controls and the results for controls comply with the reference ranges indicated on the Certificate of Analysis enclosed in each test kit.

If these quality control criteria are not met the assay run is invalid and should be repeated.

CALCULATION OF RESULTS

For quantitative results plot the optical density of each calibrator versus the calibrator concentration to create a calibration curve. The concentration of patient samples may then be estimated from the calibration curve by interpolation.

Using data reduction software a 4-Parameter-Fit with lin-log coordinates for optical density and concentration is the data reduction method of choice.

PERFORMANCE CHARACTERISTICS

Calibration

This assay system is calibrated in relative arbitrary units. It is calibrated against an external anti-CCP Assay, since no international reference sera for RA diagnostic are available so far.

Measuring range

The calculation range of this ELISA assay is 0 - 1000 U/ml

Expected values

In a normal range study with samples from healthy blood donors the following ranges have been established with this ELISA assay: Cut-off 20 U/ml

Interpretation of results

Negative: < 20 U/ml
Positive: ≥ 20 U/ml

Linearity

Patient samples containing high levels of specific antibody were serially diluted in sample buffer to demonstrate the dynamic range of the assay and the upper / lower end of linearity. Activity for each dilution was calculated from the calibration curve using a 4-Parameter-Fit with lin-log coordinates.

Sample	Dilution	Observed U/ml	Expected U/ml	O/E [%]
1	1:100	950.2	950.2	100
	1:200	467.3	475.1	98
	1:400	245.4	237.6	103
	1:800	115.6	118.8	97
2	1:100	120.0	120.0	100
	1:200	60.5	60.0	101
	1:400	31.4	30.0	105
	1:800	14.2	15.0	95
3	1:1600	7.3	7.5	97
	1:100	321.3	321.3	100
	1:200	157.9	160.7	98
	1:400	96.4	80.3	120
	1:800	48.2	40.2	120

Limit of detection

Functional sensitivity was determined to be: 1 U/ml

Reproducibility

Intra-assay precision: Coefficient of variation (CV) was calculated for each of three samples from the results of 24 determinations in a single run. Results for precision-within-assay are shown in the table below.

Inter-assay precision: Coefficient of variation (CV) was calculated for each of three samples from the results of 6 determinations in 5 different runs. Results for run-to-run precision are shown in the table below.

Intra-Assay		
Sample	Mean U/ml	CV %
1	13.0	7.8
2	144.5	9.9
3	250.6	13.6

Inter-Assay		
Sample	Mean U/ml	CV %
1	12.3	6.1
2	134.9	7.1
3	262.2	9.3

Interfering substances

No interference has been observed with haemolytic (up to 1000 mg/dl) or lipemic (up to 3 g/dl triglycerides) sera or plasma, or bilirubin (up to 40 mg/dl) containing sera or plasma. Nor have any interfering effects been observed with the use of anticoagulants (Citrate, EDTA, Heparine). However for practical reasons it is recommended that grossly hemolyzed or lipemic samples should be avoided.

Study results

Study population	n	n Pos	%
Rheumatoid arthritis	259	237	91.5
Other arthritis	22	6	27.3
Other rheumatic disease	37	1	2.7
Healthy controls	118	1	0.8

		Clinical Diagnosis		
		POS	NEG	
ORG 601	POS	237	8	436
	NEG	22	169	
		259	177	
Sensitivity:		91.5 %		
Specificity:		95.5 %		
Overall agreement:		93.1 %		

LIMITATIONS OF THE PROCEDURE

This assay is a diagnostic aid. A definite clinical diagnosis should not be based on the results of a single test, but should be made by the physician after all clinical and laboratory findings have been evaluated concerning the entire clinical picture of the patient. Also every decision for therapy should be taken individually.

The above pathological and normal reference ranges for antibodies in patient samples should be regarded as recommendations only. Each laboratory should establish its own ranges according to ISO 15189 or other applicable laboratory guidelines.

REFERENCES

- Bang H, Egerer K, Gaudiard A, et al. Mutation and citrullination modifies vimentin to a novel autoantigen for rheumatoid arthritis. *Arthritis Rheum.* 56(8):2503, 2007.
- Aletaha D, et al. Rheumatoid arthritis classification criteria: An American College of Rheumatology/European League Against Rheumatism collaborative initiative. *Arthritis & Rheumatism* 62 (9):2569-2581, 2010.
- Prujin GJ, Wiik A, van Venrooij WJ. The use of citrullinated peptides and proteins for the diagnosis of rheumatoid arthritis. *Arthritis Res Ther* 12 (1):203, 2010.
- Snir O, Widhe M, Hermansson M, von Spee C, Lindberg J, Hensen S, Lundberg K, Engstrom A, Venables PJ, Toes RE, Holmdahl R, Klareskog L, Malmstrom V. Antibodies to several citrullinated antigens are enriched in the joints of rheumatoid arthritis patients. *Arthritis Rheum* 62 (1):44-52, 2009.
- Van Steendam K, Tillemans K, Deforce D. The relevance of citrullinated vimentin in the production of antibodies against citrullinated proteins and the pathogenesis of rheumatoid arthritis. *Rheumatology (Oxford)*, 2011.
- Van Steendam K, Tillemans K, De Ceuleneer M, De Keyser F, Elewaut D, Deforce D. Citrullinated vimentin as an important antigen in immune complexes from synovial fluid of rheumatoid arthritis patients with antibodies against citrullinated proteins. *Arthritis Res Ther* 12 (4):R132, 2010.
- Syversen SW, Goll GL, van der Heijde D, Landewe R, Lie BA, Odegard S, Uhlig T, Gaarder PI, Kvien TK. Prediction of radiographic progression in rheumatoid arthritis and the role of antibodies against mutated citrullinated vimentin: results from a ten-year prospective study. *Ann.Rheum.Dis.* 69 (2):345-351, 2009.
- Innala L, Kokkonen H, Eriksson C, Jidell E, Berglin E, Dahlqvist SR. Antibodies against mutated citrullinated vimentin are a better predictor of disease activity at 24 months in early rheumatoid arthritis than antibodies against cyclic citrullinated peptides. *J Rheumatol.* 35(6):1002, 2008.
- Mathsson L, Mullazehi M, Wick MC, et al. Antibodies against citrullinated vimentin in rheumatoid arthritis: higher sensitivity and extended prognostic value concerning future radiographic progression as compared with antibodies against cyclic citrullinated peptides. *Arthritis Rheum.* 58(1):36, 2008.
- Soós L, Szekanecz Z, Szabó Z, et al. Clinical evaluation of anti-mutated citrullinated vimentin by ELISA in rheumatoid arthritis. *J Rheumatol.* 34(8):1658, 2007.
- Bizzaro N, Tonutti E, Tozzoli R, Villalta D. Analytical and diagnostic characteristics of 11 2nd- and 3rd-generation immunoenzymatic methods for the detection of antibodies to citrullinated proteins. *Clin Chem.* 53 (8):1527, 2007.
- Coenen D, Verschuere P, Westhovens R, Bossuyt X. Technical and diagnostic performance of 6 assays for the measurement of citrullinated protein/peptide antibodies in the diagnosis of rheumatoid arthritis. *Clin Chem.* 53(3):498, 2007.
- Dejaco C, Klotz W, Larcher H, Duftner C, Schirmer M, Herold M. Diagnostic value of antibodies against a modified citrullinated vimentin in rheumatoid arthritis. *Arthritis Res Ther.* 8(4):R119, 2006.
- Keskin G, Inal A, Keskin D, et al. Diagnostic utility of anti-cyclic citrullinated peptide and anti-modified citrullinated vimentin antibodies in rheumatoid arthritis. *Protein Pept Lett.* 15(3):314 2008.
- Poulsom H, Charles PJ. Antibodies to citrullinated vimentin are a specific and sensitive marker for the diagnosis of rheumatoid arthritis. *Clin Rev Allergy Immunol.* 34(1):4 2008.
- Song JS, Park GB, Park AJ. Comparison of anti-mutated citrullinated vimentin with anti-cyclic citrullinated peptide and rheumatoid factors for the diagnostic value of rheumatoid arthritis [in Korean]. *J Korean Rheum Assoc.* 14(3):235 2007.

- Ursum J, Nielsen MM, van Schaardenburg D, et al. Antibodies to mutated citrullinated vimentin and disease activity score in early arthritis: a cohort study. *Arthritis Res Ther.* 10(1):R12, 2008.
- Besada E, Nikolaisen C, Nossent H. Diagnostic value of antibodies against mutated citrullinated vimentin for rheumatoid arthritis. *Clin Exp Rheumatol.* 29(1):85 2011.

Notice to the user (European Union):

Any serious incident that has occurred in relation to the device shall be reported to the manufacturer and the competent authority of the EU Member State in which the user and/or the patient is established .

Change Control

Former version: *ORG 601_IFU_EN_QM113201_2016-04-18_2*

Reason for revision: *Introduction electronic IFU on homepage*

- 1** Pipet **100 µl** calibrator, control or patient sample
→ Incubate for **30 minutes** at room temperature
→ Discard the contents of the wells and wash 3 times with **300 µl** wash solution
- 2** Pipet **100 µl** enzyme conjugate
→ Incubate for **15 minutes** at room temperature
→ Discard the contents of the wells and wash 3 times with **300 µl** wash solution
- 3** Pipet **100 µl** substrate solution
→ Incubate for **15 minutes** at room temperature
- 4** Add **100 µl** stop solution
→ Leave untouched for **5 minutes**
→ Read at **450 nm**

SCHAEDLER BROTH

Basal medium for aerobic and anaerobic bacteria isolation.

TYPICAL FORMULA (g/l)

Tryptic Soy Broth	10.0
Tryptone	5.0
Yeast Extract	5.0
Glucose	5.0
Hemin	0.01
L-Cystine	0.4

Final pH = 7.6 ± 0.2 at 25 °C.

DIRECTIONS

Suspend 25.4 g of powder in 1 liter of distilled or deionized water. Heat to boiling until completely dissolved. Dispense into final containers. Sterilize in the autoclave at 121 °C for 15 minutes.

DESCRIPTION

SCHAEDLER BROTH is a nonselective medium used for fastidious aerobic and anaerobic bacteria, such as lactobacilli, streptococci, clostridia and *Bacteroides*. The medium is highly nutritious due to its content of peptones, glucose and yeast extract. Hemin supplies the X factor required by many fastidious microorganisms.

TECHNIQUE

Cool the medium at 25°C. If the medium is not used immediately after its preparation, it must be regenerated at 100°C for 20 minutes in order to restore conditions of anaerobiosis. Do not repeat this operation more than once. Inoculate the material to examine into the tube using a sterile bent glass rod. Incubate at 36±/-1°C for 18-48 hours in aero/anaerobic conditions required by the species being studied.

QUALITY CONTROL

Dehydrated medium

Appearance: free-flowing, homogeneous.

Color: light tan.

Prepared medium

Appearance: clear to slightly opalescent, may have a slight precipitate.

Color: light to medium amber.

Incubation conditions: 36 ± 1 °C for 18-48 hours.

Microorganism	ATCC	Growth
<i>Clostridium perfringens</i>	13124	good
<i>Streptococcus pyogenes</i>	19615	good
<i>Escherichia coli</i>	25922	good
<i>Staphylococcus aureus</i>	25923	good

PERFORMANCE AND LIMITATIONS

Since the nutritional requirements of organisms are different, some strains may be encountered that fail to grow or grow poorly on this medium.

STORAGE

The powder is very hygroscopic: store the powder at 10-30 °C, in a dry environment, in its original container tightly closed and use it before the expiry date on the label or until signs of deterioration or contamination are evident.

Store prepared tubes at 2-8 °C.





REFERENCES

- MacFaddin, J.D. (1985). Media for isolation-cultivation-identification-maintenance of medical bacteria, p. 695-699, vol. 1. Williams & Wilkins, Baltimore, MD.
- Schaedler, R.W., R. Dubos, and R. Costello. (1965). The development of bacterial flora in the gastrointestinal tract of mice. J. Exp. Med. **122**: 59.

PRESENTATION

Product	REF	Σ
SCHAEDLER BROTH (19.6 l)	610137	500 g
SCHAEDLER BROTH (3.9 l)	620137	100 g

TABLE OF SYMBOLS

LOT Batch code	 Caution, consult accompanying documents	 Manufacturer	 Contains sufficient for <n> tests	IVD <i>In Vitro</i> Diagnostic Medical Device
REF Catalogue number	 Fragile, handle with care	 Use by	 Temperature limitation	 Keep away from heat source



LIOFILCHEM s.r.l.

Via Scozia, Zona Ind.le - 64026, Roseto D.A. (TE) - ITALY

Phone +390858930745 Fax +390858930330

Website: www.liofilchem.net E-mail: liofilchem@liofilchem.net



DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ CE / EC DECLARATION OF CONFORMITY

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ CE

La società Liofilchem® S.r.l., con Sede Legale in Via Scozia, 64026 Roseto degli Abruzzi (TE) Italia, in qualità di fabbricante del dispositivo medico-diagnostico *in vitro* elencato nella tabella allegata Revisione 31.0 del 08.01.2016

dichiara sotto la propria responsabilità

1. che il dispositivo sopra indicato soddisfa tutte le disposizioni applicabili della Direttiva 98/79/CE (Allegato III) recepita nella Legislazione Italiana dal Decreto Legislativo n° 332 del 8 settembre 2000;
2. che il dispositivo in oggetto non è incluso nell'Allegato II, lista A e B della Direttiva 98/79/CE
3. che la documentazione tecnica di cui all'allegato III della direttiva Direttiva 98/79/CE è a disposizione delle autorità nazionali presso la sua sede e sarà conservata per 5 anni dall'ultima data di fabbricazione del prodotto;
4. che il processo di fabbricazione segue adeguati principi di assicurazione della qualità;
5. di aver attivato e di mantenere aggiornato, un sistema di sorveglianza post-produzione per il monitoraggio dei prodotti;
6. che il dispositivo in oggetto è stato messo in commercio munito di marcatura CE.

EC DECLARATION OF CONFORMITY

The company Liofilchem® S.r.l., registered office in Via Scozia, 64026 Roseto degli Abruzzi (TE) Italy, as a manufacturer of the *in vitro* medical-diagnostic device listed in the attached table, Revision 31.0 of 08.01.2016

hereby certifies under its own responsibility

1. that the above mentioned device complies with all the applicable provisions of Directive 98/79/EC (Annex III) and its relevant transposition into national law;
2. the above mentioned is not included in Annex II, List A and B of Directive 98/79/EC;
3. that the technical documentation referred to at Annex III of the Directive 98/79/EC is available for the national authorities in its facility and that this documentation shall be kept for 5 years after the last product has been manufactured;
4. that the manufacturing process follows suitable principles of quality assurance;
5. that, has implemented and keep up to date, a post-production surveillance system for monitoring the products;
6. that the device in question, was introduced into the market provided with CE mark.

Roseto, 08.01.2016

Direttore Tecnico/ Technical Director
Dott. Silvio Brocco



PRODOTTI CE DI LIBERA VENDITA / FREE SALE CE PRODUCTS

Rev. 31.0 del 08.01.2016

10002	DNA AGAR + BLU DI TOLUIDINA
10004	CLED ANDRADE AGAR
10004*	CLED ANDRADE AGAR
10005	MAC CONKEY SORBITOL AGAR
10005*	MAC CONKEY SORBITOL AGAR
10006	TRYPTIC SOY AGAR + 0,6% YEAST EXTRACT
10007	BACILLUS CEREUS AGAR (PEMBA)
10007*	BACILLUS CEREUS AGAR (PEMBA)
10011	YEAST GLUCOSE CHLORAMPHENICOL AGAR
10011*	YEAST GLUCOSE CHLORAMPHENICOL AGAR
10013	DNase TEST AGAR
10013*	DNase TEST AGAR
10014	Purple Lactose Agar
10014*	Purple Lactose Agar
10017	CZAPEK DOX AGAR
10018	DRIGALSKY LACTOSE AGAR
10021	BIGGY (NICKERSON) AGAR
10021*	BIGGY (NICKERSON) AGAR
10022	BRILLIANT GREEN AGAR
10022*	BRILLIANT GREEN AGAR
10023	Chocolate Agar
10023*	Chocolate Agar
10024	TRYPTOSE AGAR
10024*	TRYPTOSE AGAR
10025	COLUMBIA AGAR (Horse Blood 5%)
10025*	COLUMBIA AGAR (Horse Blood 5%)
10026	CLED AGAR
10026*	CLED AGAR
10027	BACILLUS CEREUS AGAR (Mossel)
10027*	BACILLUS CEREUS AGAR (Mossel)
10028	ISOSENSITEST AGAR
10028*	ISOSENSITEST AGAR
10029	MAC CONKEY AGAR
10029*	MAC CONKEY AGAR
10030	MANNITOL SALT AGAR
10030*	MANNITOL SALT AGAR
10031	MUELLER HINTON II AGAR
10031*	MUELLER HINTON II AGAR
10033	PSEUDOMONAS (CETRIMIDE) AGAR
10033*	PSEUDOMONAS (CETRIMIDE) AGAR
10035	SABOURAUD AGAR
10035*	SABOURAUD AGAR
10035S	SABOURAUD AGAR Irradiated
10036	S.S. AGAR
10036*	S.S. AGAR
10037	TRYPTIC SOY AGAR
10037*	TRYPTIC SOY AGAR
10037S	TRYPTIC SOY AGAR Irradiated
10039	ROGOSA AGAR
10039*	ROGOSA AGAR
10040	NEW YORK CITY AGAR
10040*	NEW YORK CITY AGAR
10041	LISTERIA PALCAM AGAR
10041*	LISTERIA PALCAM AGAR
10042	CRYSTAL VIOLET AGAR (Sheep Blood 5%)
10042*	CRYSTAL VIOLET AGAR (Sheep 5%)
10043	HEKTOEN ENTERIC AGAR
10043*	HEKTOEN ENTERIC AGAR
10044	NUTRIENT AGAR
10044*	NUTRIENT AGAR

10046	SERUM TELLURITE AGAR
10047	BISMUTH SULFITE AGAR
10047*	BISMUTH SULFITE AGAR
10048	E.M.B. LEVINE AGAR
10048*	E.M.B. LEVINE AGAR
10050	CAMPYLOBACTER AGAR (Sheep Blood 5%)
10050*	CAMPYLOBACTER AGAR (Sheep Blood 5%)
10051	Legionella BCYE Agar
10051*	Legionella BCYE Agar
10052	YERSINIA SELECTIVE AGAR
10052*	YERSINIA SELECTIVE AGAR
10053	WILKINS CHALGREEN AGAR
10053*	WILKINS CHALGREEN AGAR
10054	WURTZ LACTOSE AGAR
10054*	WURTZ LACTOSE AGAR
10056	X.L.D. AGAR
10056*	X.L.D. AGAR
10057	BILE AESCULIN AGAR
10057*	BILE AESCULIN AGAR
10058S	TRYPTIC SOY AGAR Irradiated -30 mL-
10060	BRAIN HEART INFUSION AGAR
10060*	BRAIN HEART INFUSION AGAR
10064	CHRISTENSEN UREA AGAR
10065	SCHAEDLER KKV AGAR(Sheep Blood 5%)
10065*	SCHAEDLER KKV AGAR(Sheep Blood 5%)
10067	SCHAEDLER KVN AGAR (Sheep Blood 5%)
10069	X.L.T. 4 AGAR
10069*	X.L.T. 4 AGAR
10074S	TRYPTIC SOY AGAR+NEUTRALIZING Irradiated
10078	MUELLER HINTON II MOD. AGAR
10078*	MUELLER HINTON II MOD. AGAR
10079	CASITONE AGAR
10079*	CASITONE AGAR
10080	HAEMOPHYLUS TEST AGAR
10080*	HAEMOPHYLUS TEST AGAR
10082	HELICOBACTER PYLORI AGAR
10082*	HELICOBACTER PYLORI AGAR
10090	M.R.S. Agar
10090*	M.R.S. Agar
10095	BRAIN HEART AGAR FOR HAEMOPHILUS
10129	MAC CONKEY AGAR MMG
10129*	MAC CONKEY AGAR MMG
10131	Mueller Hinton II Agar (Sheep Blood 5%)
10131*	Mueller Hinton II Agar (Sheep Blood 5%)
10132	MUELLER HINTON FASTIDIOUS AGAR 90 mm
10134	Legionella BMPA Agar
10141	SALMONELLA TEST AGAR
10141*	SALMONELLA TEST AGAR
10142	BLOOD AGAR (Sheep Blood 7%)(ISO 10560)
10142*	BLOOD AGAR (Sheep Blood 7%)(ISO 10560)
10143	Mueller Hinton Agar + 5 % Horse Blood Lysed
10145	CAMPYLOBACTER KARMALI AGAR
10146	CAMPYLOBACTER PRESTON AGAR
10148	CAMPYLOBACTER AGAR (Sheep Blood 10%)
10225	LISTERIA PALCAM AGAR 140 mm
10231	MUELLER HINTON II AGAR 140 mm
10233	R.P.M.I. AGAR
10235	SABOURAUD CAF AGAR + GENTAMICIN
10235*	SABOURAUD CAF AGAR + GENTAMICIN
10236	CLED AGAR 140 mm

PRODOTTI CE DI LIBERA VENDITA / FREE SALE CE PRODUCTS

Rev. 31.0 del 08.01.2016

10240	SCHAEDLER K AGAR (Sheep Blood 5%) 140mm
10241	SCHAEDLER KKV AGAR(Sheep blood 5%) 140mm
10242	SABOURAUD CAF AGAR 140 mm
10243	SABOURAUD CAF AGAR + GENTAMICIN 140mm
10244	DERMATOPHYTE (D.T.M.) AGAR 140 mm
10245	BRUCELLA BLOOD AGAR w HEMIN AND VITAMIN K1
10246	Chromatic™ MH
10247	Brucella Blood Agar with Hemin and Vitamin K1
10249	Purple Lactose Agar 140 mm
10334	NEOMYCIN BLOOD AGAR (Sheep Blood 5%)
10334*	NEOMYCIN BLOOD AGAR (Sheep Blood 5%)
10335	MUELLER HINTON CHOCOLATE AGAR
10353	BORDET GENGOU AGAR (Sheep Blood 15%)
10353*	BORDET GENGOU AGAR (Sheep Blood 15%)
10405	SCHAEDLER CNA AGAR (Sheep Blood 5%)
10407	VANCOMYCIN SCREEN AGAR
10408	WILKINS CHALGREN AGAR +5% SHEEP BLOOD
10409	CAMPYLOBACTER CCDA AGAR
10410	MUELLER HINTON AGAR w VITALEX
10411	BILE ESCULIN AZIDE AGAR w VANCOMYCIN
10412	Legionella BCYE Agar w/o Cysteine
10413	XLD Agar EP, USP, JP Formulation
10416	MIDDLEBROOK 7H11 AGAR
10424	Legionella BCYE Agar w Vancomycin + Colistin
10425	SCEDOSPORIUM SELECTIVE AGAR
10438	MacConkey Agar No.2
10438*	MacConkey Agar No.2
10439	Group A Selective Strep Agar w/ 5% Sheep Blood
10599	CHROMATIC™ MRSA
10600	OXACILLIN RESISTANCE STAPHYLOCOCCUS AGAR
10601	CHOCOLATE AGAR w/o VITOX
10602	CAMPYLOBACTER SKIRROW AGAR
10605	HELICOBACTER PYLORI EGG YOLK EMULSION AGAR
10620	O.A.LISTERIA
11023	CHOCOLATE BACITRACIN AGAR
11023*	CHOCOLATE BACITRACIN AGAR
11024	COLUMBIA CNA AGAR (Sheep Blood 5%)
11024*	COLUMBIA CNA AGAR (Sheep Blood 5%)
11025	COLUMBIA AGAR (Sheep Blood 5%)
11025*	COLUMBIA AGAR (Sheep Blood 5%)
11027	DESOXYCHOLATE AGAR
11027*	DESOXYCHOLATE AGAR
11030	ANAEROBIC AGAR
11033	PSEUDOMONAS ISOLATION AGAR
11033*	PSEUDOMONAS ISOLATION AGAR
11035	SABOURAUD CAF AGAR
11035*	SABOURAUD CAF AGAR
11035S	SABOURAUD CAF AGAR Irradiated
11037	TRYPTIC SOY AGAR (Sheep Blood 5%)
11037*	TRYPTIC SOY AGAR (Sheep Blood 5%)
11038	TRYPTIC SOY AGAR (Horse Blood 5%)
11038*	TRYPTIC SOY AGAR (Horse Blood 5%)
11040	THAYER MARTIN AGAR
11040*	THAYER MARTIN AGAR
11041	AZIDE AGAR (Sheep Blood 5%)
11041*	AZIDE AGAR (Sheep Blood 5%)
11052	DERMATOPHYTE (D.T.M.) AGAR
11052*	DERMATOPHYTE (D.T.M.) AGAR
11054	GARDNERELLA AGAR (Sheep Blood 5%)
11054*	GARDNERELLA AGAR (Sheep Blood 5%)

11057	ENTEROCOCCO AGAR
11057*	ENTEROCOCCO AGAR
11058	SLANETZ BARTLEY AGAR(m-ENTEROCOCCUS)
11058*	SLANETZ BARTLEY AGAR(m-ENTEROCOCCUS)
11060	CLOSTRIDIUM AGAR (Sheep Blood 5%)
11060*	CLOSTRIDIUM AGAR (Sheep Blood 5%)
11065	SCHAEDLER K AGAR (Sheep Blood 5%)
11065*	SCHAEDLER K AGAR (Sheep Blood 5%)
11070	MYCOSEL AGAR
11070*	MYCOSEL AGAR
11132	MUELLER HINTON FASTIDIOUS AGAR (140mm)
11124	COLUMBIA CNA MOD. AGAR (Sheep blood 5%)
11124*	COLUMBIA CNA MOD. AGAR (Sheep blood 5%)
11135	SABOURAUD AGAR MODIFIED
11135*	SABOURAUD AGAR MODIFIED
11143	HERELLEA AGAR
11143*	HERELLEA AGAR
11185	VOGEL JOHNSON AGAR
11185*	VOGEL JOHNSON AGAR
11195	T.C.B.S. AGAR
11195*	T.C.B.S. AGAR
11196	SPS AGAR
11196*	SPS AGAR
11200	PAR TEST AGAR
11200*	PAR TEST AGAR
11205	MYCOPLASMA AGAR
11206	Mueller Hinton II Agar + 2% NaCl
11231	Mueller Hinton II Agar (Sheep Blood 5%) 140mm
11235	SABOURAUD CAF AGAR + TTC
11235*	SABOURAUD CAF AGAR + TTC
11236	Sabouraud CAF Agar + Actidione
11250	TINSDALE AGAR
11250*	TINSDALE AGAR
11335	SABOURAUD AGAR + GENTAMICIN
11335*	SABOURAUD AGAR + GENTAMICIN
11501	ENTEROCOCCUS AGAR + VANCOMYCIN
11506	BURKHOLDERIA CEPACIA SELECTIVE AGAR
11509	R.P.M.I. AGAR
11510	M.HINTON+GLUCOSE+METHYLEN BLUE
11511	NEISSERIA-MORAXELLA MEDIUM
11512	NUTRIENT AGAR acc.to ISO 21528
11513	NUTRIENT AGAR acc.to ISO 6579
11517	COLUMBIA AGAR(Sheep Blood 5%)+VANCOMYCIN
11518	Mueller Hinton Agar + Cloxacillin
11610	Chromatic™ E.coli O157
11611	CHROMATIC™ DETECTION
11612	CHROMATIC™ CANDIDA
11614	CHROMATIC™ SALMONELLA
11616	CHROMATIC™ STAPH AUREUS
11617	CHROMATIC™ STREPTO B
11618	CHROMATIC™ MH
11619	CHROMATIC™ CRE
11621	CHROMATIC™ VRE
11622	CHROMATIC™ ESBL
11627	Chromatic™ Enterococcus
11629	CHROMATIC™ ESBL + AmpC
11629*	CHROMATIC™ ESBL + AmpC
11631	Chromatic™ OXA-48
11632	Chromatic™ Clostridium difficile
11634	Chromatic™ Detection opaque

PRODOTTI CE DI LIBERA VENDITA / FREE SALE CE PRODUCTS

Rev. 31.0 del 08.01.2016

12031	MUELLER HINTON II AGAR (120X120 mm)
12032	Mueller Hinton II Agar (Sheep Blood 5%) (120 mm x 120 mm)
12033	Mueller Hinton Fastidious Agar (Horse blood 5% + 20 mg/L β-NAD) (120 mm x 120 mm)
13012	CLED/MACCONKEY/TSA BLOOD AGAR
13012*	CLED/MACCONKEY/TSA BLOOD AGAR
13013	BAIRD PARKER/BIGGY/MACCONKEY
13013*	BAIRD PARKER/BIGGY/MACCONKEY
13014	COLUMBIA CNA/CIOCCOLATO/THAYER MARTIN
13014*	COLUMBIA CNA/CIOCCOLATO/THAYER MARTIN
13017	CLED/MACCONKEY MMG/MALTO
13017*	CLED/MACCONKEY MMG/MALTO
13018	BROM CRESOL PURPLE/COLUMBIA CNA/M.CONKEY
13018*	BROM CRESOL PURPLE/COLUMBIA CNA/M.CONKEY
13019	CLED/MACCONKEY/CETRIMIDE
13019*	CLED/MACCONKEY/CETRIMIDE
13020	MAC CONKEY/B.PARKER/TSA BLOOD
13345	GARDNERELLA V./ROGOSA/THAYER MARTIN
13345*	GARDNERELLA V./ROGOSA/THAYER MARTIN
13356	Gard.V. / Chocolate / Thayer Martin
13371	BAIRD PARKER/MACCONKEY/SABOURAUD CAF
13371*	BAIRD PARKER/MACCONKEY/SABOURAUD CAF
13480	MACCONKEY/VOGEL JOHNSON/SABOURAUD
13480*	MACCONKEY/VOGEL JOHNSON/SABOURAUD
13602	SABOURAUD CAF/BAIRD PARKER/BILE ESCULINE
13602*	SABOURAUD CAF/BAIRD PARKER/BILE ESCULINE
13607	CHOC. BAC./COLUMBIA/MAC CONKEY
13607*	CHOC. BAC./COLUMBIA/MAC CONKEY
13614	CLED/MACCONKEY/ENTEROCOCCO
13614*	CLED/MACCONKEY/ENTEROCOCCO
165312	MYCOPLASMA AGAR
18007	CHROMATIC™ STAPH AUREUS/ MRSA
18008	TSA BLOOD/CROMagar ORIENTATION
18008*	TSA BLOOD/CROMagar ORIENTATION
18009	Chromatic™ Salmonella/Hektoen Enteric
18011	CHROMATIC™ DETECTION/ESBL
18012	BRILLIANT GREEN / SS AGAR
18012*	BRILLIANT GREEN / SS AGAR
18015	BIGGY (NICKERSON) / MALT AGAR
18015*	BIGGY (NICKERSON) / MALT AGAR
18017	COLUMBIA CNA BLOOD/CHROMAGAR
18017*	COLUMBIA CNA BLOOD/CHROMAGAR
18018	MAC CONKEY/ SABOURAUD CAF
18020	EMB LEVINE / TSA BLOOD
18020*	EMB LEVINE / TSA BLOOD
18021	Chromatic™ CRE / Chromatic™ ESBL
18021*	Chromatic™ CRE / Chromatic™ ESBL
18022	TSA Blood/Columbia CNA
18327	COLUMBIA CNA / MAC CONKEY
18327*	COLUMBIA CNA / MAC CONKEY
18379	GARDNERELLA V. / THAYER MARTIN
18379*	GARDNERELLA V. / THAYER MARTIN
18380	MAC CONKEY / TSA BLOOD
18380*	MAC CONKEY / TSA BLOOD
18390	BAIRD PARKER / SABOURAUD CAF
18390*	BAIRD PARKER / SABOURAUD CAF
18391	HEKTOEN ENTERIC / YERSINIA
18391*	HEKTOEN ENTERIC / YERSINIA
18422	COLUMBIA CNA / GARDNERELLA
18422*	COLUMBIA CNA / GARDNERELLA

18500	BAIRD PARKER / MAC CONKEY
18500*	BAIRD PARKER / MAC CONKEY
18502	CLED / MAC CONKEY
18502*	CLED / MAC CONKEY
18503	HEKTOEN ENTERIC / SS
18503*	HEKTOEN ENTERIC / SS
18505	MAC CONKEY / S.S.AGAR
18505*	MAC CONKEY / S.S.AGAR
18507	COLUMBIA CNA / CHOCOLATE
18507*	COLUMBIA CNA / CHOCOLATE
18595	D.T.M. / SABOURAUD
18595*	D.T.M. / SABOURAUD
18700	Group A Selective/TSA II + Sheep Blood 5%
18703	CHOCOLATE AGAR /THAYER MARTIN
20075	MAC CONKEY BROTH(7516MC2) 20x5ml
20077	PHYSIOLOGICAL SOLUTION 2.5 ml
20079	PHYSIOLOGICAL SOLUTION 4.5 ML
20081	INOCULUM SOLUTION 5 ML
20089	SUSPENSION BROTH
20090	HELICOBACTER PYLORI TEST
20095	PHYSIOLOGICAL SOLUTION
20098	PEPTONE WATER
20105	Glucose Broth
20121	INOCULUM BROTH 7 ML
20129	TRYPTIC SOY BROTH 15 ml
20136	TRYPTONE WATER
20140	PURPLE LACTOSE BROTH
20156	SUSPENSION MEDIUM 7 ML
20158	MYCOPLASMA TRANSPORT BROTH
20159	TRICHOMONAS BROTH w/o CLORAMPHENICOL
20171	Thioglycollate Medium w Vit.K1 & Hemin
20340	VAGITUBE
21104	TRYPTIC SOY BROTH
21110	SELENITE BROTH
21241	Fluid Thioglycollate Medium
22130	SCHAEDLER BROTH
23001	F.B. FASTIDIOUS BROTH
23002	MUELLER HINTON BROTH w HORSE BLOOD (11ml)
23003	MUELLER HINTON BROTH
24070	MYCOSEL BROTH 20PV
24071	Cooked Meat Medium
24091	HAEMOPHILUS TEST BROTH 20 PV
24098	PEPTONE WATER 20PV
24100	ALKALINE PEPTONE WATER 20PV
24103	NUTRIENT BROTH 20PV
24104	BRAIN HEART INFUSION BROTH 20PV
20105	Glucose Broth
24107	MUELLER HINTON II BROTH 20 PV
24108	MULLER KAUFFMANN BROTH 20PV
24109	SABOURAUD BROTH (Harm.EP) 20PV
24110	SELENITE BROTH 20PV
24111	TODD HEWITT BROTH 20PV
24112	TRYPTOSE BROTH 20PV
24115	TRICHOMONAS BROTH 20PV
24117	Pergola Broth
24119	GN HAJNA BROTH 20PV
24120	BILE AESCULIN BROTH 20PV
24124	Fluid Thioglycollate Medium
24125	SERUM BROTH 20PV
24127	Fluid Thioglycollate Medium + 1% Tween 80

PRODOTTI CE DI LIBERA VENDITA / FREE SALE CE PRODUCTS

Rev. 31.0 del 08.01.2016

24128	TRYPTIC SOY BROTH + TWEEN 80 1% 20PV
24135	SALMONELLA DIFFERENTIAL BROTH 20PV
24136	TRYPTONE WATER 20PV
24137	MALONATE BROTH 20PV
24139	LYSINE DECARBOXYLASE BROTH 20PV
24141	BRAIN HEART INFUSION BROTH 2 ml 20PV
24142	PHYSIOLOGICAL SOLUTION 3ml 20PV
24144	TODD HEWITT w Gentam/Nalidixic acid 20PV
24145	TODD HEWITT B. w Colistin/Nalid.a. 20PV
24146	THIOGLYCOLLATE M w/o INDICATOR acc.USP 20PV
24147	Thioglycollate Bile
24149	MR-VP MEDIUM 20PV
24161	Sabouraud Dextrose Broth + CAF
24241	Fluid Thioglycollate Medium
24342	MOTILITY TEST MEDIUM 20PV
24345	O.F. Medium with Glucose
24400	RAPPAPORT VASSILIADIS SOY (RSV) BROTH 20PV
24403	BIOTONE BROTH 20PV
24404	CAMPYLOBACTER BROTH 20PV
24411	S.F. BROTH 20PV
24412	STREPTOCOCCUS BROTH 20PV
24413	MOSEL AND MARTIN w MANNITOL 20PV
24416	UREA BROTH 20PV
24417	Wilkins Chalgren Broth
24430	SCHAEDLER BROTH 20PV
24432	YERSINIA BROTH 20PV
24433	EUGON BROTH 20PV
24436	MIDDLEBROOK 7H9 BROTH 20PV
24446	PHENOL RED BROTH 20PV
24450	Rappaport Broth w/o Soy
24451	Tetrathionate Broth
24459	CASO BROTH (Double Concentration) CE 20PV
24461	RPMI Broth
24462	RPMI Broth (double strength)
24513	TRYPTIC SOY BROTH (Harm.EP)
24514	TRYPTIC SOY BROTH
24516	UREA BROTH
26105	Glucose Broth
26124	Fluid Thioglycollate Medium 100 x 10 ml
26400	RAPPAPORT VASSILIADIS SOY (RSV) BROTH
26513	Tryptic Soy Broth
27001	GESA MEDIUM
27500	Triptic Soy Broth
27501	Todd Hewitt Broth
27502	Brain Heart Infusion Broth
27503	Nutrient Broth
29000	CHECK-SET BROTH Irradiated 20 Tests
30007	CAMPYLOBACTER SELECTIVE THIOGLYCOLLATE MEDIUM
30008	CLOSTRIDIUM AGAR (Sheep Blood 5%)
30009	HELICOBACTER PYLORI AGAR
30010	STREPTOCOCCAL KF + TTC AGAR
30011	SIMMONS CITRATE AGAR
30013	NITRATI AGAR
30014	MOSEL AGAR
30022	T.C.B.S. AGAR
30023	SABOURAUD CAF AGAR
30024	SABOURAUD CAF + ACTIDIONE AGAR
30030	M.R.S. AGAR
30080	BORDET GENGOU AGAR (Sheep Blood 15%)
30081	CHRISTENSEN UREA AGAR

30082	TRYPTIC SOY AGAR
30083	NUTRIENT AGAR
30084	BRAIN HEART INFUSION AGAR
30085	PHENYLALANINE AGAR
30087	KLIGLER IRON AGAR
30088	KLIGLER IRON AGAR + NaCl 2%
30090	Mueller Hinton II Agar
30091	BIGGY (NICKERSON) AGAR
30093	SABOURAUD AGAR
30095	SIM MEDIUM
30096	T.S.I. AGAR
30097	Tryptose Agar
30098	LYSINE IRON AGAR
30099	Chocolate Agar
30116	LOEFFLER MEDIUM
30117	PERGOLA MEDIUM
30118	Lowenstein Jensen Medium
30119	LOWENSTEIN JENSEN MEDIUM w/o GLYCEROL
30121	Stonebrink Medium
30125	DORSET EGG MEDIUM
30368	MIDDLEBROOK 7H10 AGAR
31065	SPS Agar
31075	Mueller Hinton II Agar
31090	Mueller Hinton II Agar
31097	Tryptose Agar
31099	Chocolate Agar
31121	Stonebrink Medium
33040	THAYER MARTIN AGAR
33055	MYCOSEL AGAR
33060	SERUM TELLURITE AGAR
33066	O.N.P.G. AGAR
33085	BILE AESCULIN AGAR
33086	DERMATHOPHYTE (D.T.M.) AGAR
33118	I.U.T.M. MEDIUM
33120	PETRAGNANI MEDIUM
34070	CAMPYLOBACTER AGAR
34071	CYSTINE TRYPTIC AGAR (CTA)
34075	Mueller Hinton II Agar
34121	LOWENSTEIN JENSEN + RIFAMPICIN 15 µg/mL
34121/1	LOWENSTEIN JENSEN + RIFAMPICIN 5 µg/mL
34121/2	LOWENSTEIN JENSEN + RIFAMPICIN 10 µg/mL
34121/3	LOWENSTEIN JENSEN + RIFAMPICIN 25 µg/mL
34121/4	LOWENSTEIN JENSEN + RIFAMPICIN 50 µg/mL
34121/5	LOWENSTEIN JENSEN + RIFAMPICIN 40 µg/mL
34121/6	LOWENSTEIN JENSEN + RIFAMPICIN 20 µg/mL
34122	LOWENSTEIN JENSEN + RIFAPENTIN 9 µg/mL
34123	LOWENSTEIN JENSEN + ISONIAZID 0.1 µg/mL
34123/1	LOWENSTEIN JENSEN + ISONIAZID 0.2 µg/mL I
34123/2	LOWENSTEIN JENSEN + ISONIAZID 1 µg/mL
34123/3	LOWENSTEIN JENSEN + ISONIAZID 5 µg/mL
34123/4	LOWENSTEIN JENSEN + ISONIAZID 10 µg/mL
34124/1	LOWENSTEIN JENSEN + PYRAZINAMIDE 5 µg/mL
34124/2	LOWENSTEIN JENSEN + PYRAZINAMIDE 15 µg/mL
34124/3	LOWENSTEIN JENSEN + PYRAZINAMIDE 20 µg/mL
34124/4	LOWENSTEIN JENSEN+PYRAZINAMIDE 200 µg/mL
34125/1	LOWENSTEIN JENSEN + STREPTOMYCIN 4 µg/mL
34125/2	LOWENSTEIN JENSEN + STREPTOMYCIN 10 µg/mL
34125/3	LOWENSTEIN JENSEN + STREPTOMYCIN 25 µg/mL
34125/4	LOWENSTEIN JENSEN + STREPTOMYCIN 2 µg/mL
34125/5	LOWENSTEIN JENSEN + STREPTOMYCIN 50 µg/mL

PRODOTTI CE DI LIBERA VENDITA / FREE SALE CE PRODUCTS

Rev. 31.0 del 08.01.2016

34126/1	LOWENSTEIN JENSEN + ETHAMBUTOL 2 µg/mL
34126/2	LOWENSTEIN JENSEN + ETHAMBUTOL 4 µg/mL
34126/3	LOWENSTEIN JENSEN + ETHAMBUTOL 5 µg/mL
34126/4	LOWENSTEIN JENSEN + ETHAMBUTOL 1 µg/mL
34126/5	LOWENSTEIN JENSEN + ETHAMBUTOL 3 µg/mL
34126/6	LOWENSTEIN JENSEN + ETHAMBUTOL 10 µg/mL
34127	LOWENSTEIN JENSEN + AMIKACIN 5 µg/mL
34127/1	LOWENSTEIN JENSEN + AMIKACIN 40 µg/mL
34128/1	LOWENSTEIN JENSEN + OFLOXACIN 5 µg/mL
34128/2	LOWENSTEIN JENSEN + OFLOXACIN 10 µg/mL
34128/3	LOWENSTEIN JENSEN + OFLOXACIN 25 µg/mL
34128/4	LOWENSTEIN JENSEN + OFLOXACIN 2 µg/mL
34128/5	LOWENSTEIN JENSEN + OFLOXACIN 20 µg/mL
34129/1	LOWENSTEIN JENSEN + PAS 1 µg/mL
34129/2	LOWENSTEIN JENSEN + PAS 10 µg/mL
34129/3	LOWENSTEIN JENSEN + PAS 0.5 µg/mL
34129/4	LOWENSTEIN JENSEN + PAS 0.1 µg/mL
34129/5	LOWENSTEIN JENSEN + PAS 5 µg/mL
34130/1	LOWENSTEIN JENSEN + RIFABUTIN 10 µg/mL
34130/2	LOWENSTEIN JENSEN + RIFABUTIN 30 µg/mL
34130/3	LOWENSTEIN JENSEN + RIFABUTIN 50 µg/mL
34131/1	LOWENSTEIN JENSEN+CLARITHROMICIN 4 µg/mL
34131/2	LOWENSTEIN JENSEN+CLARITHROMYCIN 32 µg/mL
34132/1	LOWENSTEIN JENSEN + ETHIONAMIDE 10 µg/mL
34132/2	LOWENSTEIN JENSEN + ETHIONAMIDE 20 µg/mL
34132/3	LOWENSTEIN JENSEN + ETHIONAMIDE 30 µg/mL
34132/4	LOWENSTEIN JENSEN + ETHIONAMIDE 40 µg/mL
34135/1	LOWENSTEIN JENSEN + NICOTINAMIDE 10 µg/mL
34135/2	LOWENSTEIN JENSEN + NICOTINAMIDE 20 µg/mL
34135/3	LOWENSTEIN JENSEN + NICOTINAMIDE 30 µg/mL
34136	LOWENSTEIN JENSEN + PEFLOXACIN 2 µg/mL
34137/1	LOWENSTEIN JENSEN + CYCLOSERINE 30 µg/mL
34137/2	LOWENSTEIN JENSEN + CYCLOSERINE 10 µg/mL
34137/3	LOWENSTEIN JENSEN + CYCLOSERINE 20 µg/mL
34137/4	LOWENSTEIN JENSEN + CYCLOSERINE 40 µg/mL
34137/5	LOWENSTEIN JENSEN + CYCLOSERINE 50 µg/mL
34138/1	LOWENSTEIN JENSEN + CAPREOMYCIN 10 µg/mL
34138/2	LOWENSTEIN JENSEN + CAPREOMYCIN 40 µg/mL
34138/3	LOWENSTEIN JENSEN + CAPREOMYCIN 20 µg/mL
34138/4	LOWENSTEIN JENSEN + CAPREOMYCIN 30 µg/mL
34139/1	LOWENSTEIN JENSEN + CLOFAZIMINE 5 µg/mL
34139/2	LOWENSTEIN JENSEN + CLOFAZIMINE 10 µg/mL
34143/1	LOWENSTEIN JENSEN + KANAMYCIN 10 µg/mL
34143/2	LOWENSTEIN JENSEN + KANAMYCIN 20 µg/mL
34143/3	LOWENSTEIN JENSEN + KANAMYCIN 30 µg/mL
34144	LOWENSTEIN JENSEN + PYRUVATE 0.2%
34145	LOWENSTEIN JENSEN + PACT
34146/1	Lowenstein Jensen + Levofloxacin 2 µg/ml
35000	LOWENSTEIN JENSEN MEDIUM
35001	LOWENSTEIN JENSEN + ISONIAZID 0.20 µg/mL
35002	LOWENSTEIN JENSEN + ISONIAZID 1 µg/ml
35010	LOWENSTEIN JENSEN + RIFAMPICIN 40 µg/mL
35011	LOWENSTEIN JENSEN + RIFAMPICIN 20 µg/mL
35020	LOWENSTEIN JENSEN + STREPTOMYCIN 4 µg/mL
35021	LOWENSTEIN JENSEN + STREPTOMYCIN 10µg/ml
35030	LOWENSTEIN JENSEN + ETHAMBUTOL 2 µg/mL
35040	LOWENSTEIN JENSEN + ETHIONAMIDE 20 µg/mL
35041	LOWENSTEIN JENSEN + ETHIONAMIDE 30µg/ml
35050	LOWENSTEIN JENSEN + PYRAZINAMIDE 1 µg/mL
35060	LOWENSTEIN JENSEN + KANAMYCIN 20 µg/mL

35061	LOWENSTEIN JENSEN + KANAMYCIN 30µg/ml
35070	LOWENSTEIN JENSEN + PAS 1 µg/mL
35071	LOWENSTEIN JENSEN + PAS 0.5 µg/mL
35080	LOWENSTEIN JENSEN + OFLOXACIN 2 µg/ml
35081	LOWENSTEIN JENSEN + OFLOXACIN 10 µg/ml
35082	LOWENSTEIN JENSEN + OFLOXACIN 40 µg/ml
35090	LOWENSTEIN JENSEN + CAPREOMYCIN 30 µg/ml
35091	LOWENSTEIN JENSEN + CAPREOMYCIN 20 µg/ml
35147	LOWENSTEIN JENSEN + PNB 500 µg/ml
35148	LOWENSTEIN JENSEN + TCH 2 µg/ml
36001/1	IUTM + STREPTOMYCIN 2 µg/mL
36001/2	IUTM + STREPTOMYCIN 4 µg/mL
36001/3	IUTM + STREPTOMYCIN 10 µg/mL
36001/4	IUTM + STREPTOMYCIN 25 µg/mL
36001/5	IUTM + STREPTOMYCIN 50 µg/mL
36002/1	IUTM + ISONIAZID 0.1 µg/mL
36002/2	IUTM + ISONIAZID 0.2 µg/mL
36002/3	IUTM + ISONIAZID 1 µg/mL
36002/4	IUTM + ISONIAZID 5 µg/mL
36002/5	IUTM + ISONIAZID 10 µg/mL
36003/1	IUTM + ETHAMBUTOL 1 µg/mL
36003/2	IUTM + ETHAMBUTOL 2 µg/mL
36003/3	IUTM + ETHAMBUTOL 3 µg/mL
36003/4	IUTM + ETHAMBUTOL 5 µg/mL
36003/5	IUTM + ETHAMBUTOL 10 µg/mL
36004/1	IUTM + RIFAMPICIN 5 µg/mL
36004/2	IUTM + RIFAMPICIN 10 µg/mL
36004/3	IUTM + RIFAMPICIN 20 µg/mL
36004/4	IUTM + RIFAMPICIN 40 µg/mL
36004/5	IUTM + RIFAMPICIN 50 µg/mL
36005/1	IUTM + RIFABUTIN 10 µg/mL
36005/2	IUTM + RIFABUTIN 20 µg/mL
36005/3	IUTM + RIFABUTIN 30 µg/mL
36005/4	IUTM + RIFABUTIN 40 µg/mL
36005/5	IUTM + RIFABUTIN 50 µg/mL
36006/1	IUTM + CYCLOSERINE 10 µg/mL
36006/2	IUTM + CYCLOSERINE 20 µg/mL
36006/3	IUTM + CYCLOSERINE 30 µg/mL
36006/4	IUTM + CYCLOSERINE 40 µg/mL
36006/5	IUTM + CYCLOSERINE 50 µg/mL
36007/1	IUTM + OFLOXACIN 1.25 µg/mL
36007/2	IUTM + OFLOXACIN 2.5 µg/mL
36007/3	IUTM + OFLOXACIN 10 µg/mL
36007/4	IUTM + OFLOXACIN 25 µg/mL
36007/5	IUTM + OFLOXACIN 50 µg/mL
36008/1	IUTM + PAS 0.1 µg/mL
36008/2	IUTM + PAS 0.5 µg/mL
36008/3	IUTM + PAS 1 µg/mL
36008/4	IUTM + PAS 5 µg/mL
36008/5	IUTM + PAS 10 µg/mL
36009/1	IUTM + PYRAZINAMIDE 10 µg/mL
36009/2	IUTM + PYRAZINAMIDE 30 µg/mL
36009/3	IUTM + PYRAZINAMIDE 50 µg/mL
36009/4	IUTM + PYRAZINAMIDE 70 µg/mL
36009/5	IUTM + PYRAZINAMIDE 90 µg/mL
37000	MIDDLEBROOK 7H11
37001	MIDDLEBROOK 7H11 + AMIKACIN 2 µg/mL
37002	MIDDLEBROOK 7H11 + AMIKACIN 4 µg/mL
37006	MIDDLEBROOK 7H11 + ETHAMBUTOL 7.5 µg/mL
37011	MIDDLEBROOK 7H11 + ETHIONAMIDE 10 µg/mL

PRODOTTI CE DI LIBERA VENDITA / FREE SALE CE PRODUCTS

Rev. 31.0 del 08.01.2016

37016	MIDDLEBROOK 7H11 + ISONIAZIDE 0.2 µg/mL
37017	MIDDLEBROOK 7H11 + ISONIAZIDE 1 µg/mL
37021	MIDDLEBROOK 7H11 + KANAMYCIN 6 µg/mL
37026	MIDDLEBROOK 7H11 + PAS 8 µg/mL
37031	MIDDLEBROOK 7H11 + PYRAZINAMIDE 25 µg/mL
37036	MIDDLEBROOK 7H11 + RIFABUTIN 1 µg/mL
37037	MIDDLEBROOK 7H11 + RIFABUTIN 0.5 µg/mL
37041	MIDDLEBROOK 7H11 + RIFAMPICIN 1 µg/mL
37046	MIDDLEBROOK 7H11 + STREPTOMYCIN 2 µg/mL
37051	MIDDLEBROOK 7H11 + OFLOXACIN 2 µg/mL
37056	MIDDLEBROOK 7H11 + CYCLOSERINE 30 µg/mL
400020	Fluid Thioglycollate Medium 6 x 100 ml
400120	Fluid Thioglycollate Medium 6 x 300 ml
400220	Fluid Thioglycollate Medium 6 x 1000 ml
401890	BUFFER SOLUTION pH 7 6X100 ml
401930	SPS Agar 6X150 ml
401980	TRYPTONE WATER 6X100 ml
401990	ALKALINE PEPTONE WATER 6X100 ml
402000	NUTRIENT BROTH 6X100 ml
402020	MUELLER HINTON II BROTH 6X100 ml
402030	MULLER KAUFFMANN BROTH 6X100 ml
402040	SABOURAUD BROTH 6X100 ml
402050	Selenite Broth 6X100 ml
402060	SALMONELLA DIFF.BROTH 6X90 ml
402070	TRYPTOSE BROTH 6X100 ml
402120	MRS AGAR 6X100 ml
402130	PEPTONE WATER 6X100 ml
402140	BLOOD AGAR BASE 6X100 ml
402170	AZIDE BLOOD AGAR BASE 6X100 ml
402180	CLED AGAR 6X100 ml
402190	NUTRIENT AGAR 6X100 ml
402200	DERMATHOPHYTE (D.T.M.) AGAR 6X100 ml
402210	COLUMBIA CNA AGAR BASE 6X100 ml
402220	DRIGALSKI LACTOSE AGAR 6X100 ml
402230	HEKTOEN ENTERIC AGAR 6X100 ml
402240	MAC CONKEY AGAR 6X100 ml
402250	MUELLER HINTON II AGAR 6X100 ml
402270	PSEUDOMONAS CETRIMIDE AGAR 6X100 ml
402280	SABOURAUD AGAR 6X100 ml
402290	MANNITOL SALT AGAR 6X100 ml
402300	S.S. AGAR 6X100 ml
402320	TRYPTOSE AGAR 6X100 ml
402330	BRILLIANT GREEN AGAR 6X100 ml
402340	DESOXYCHOLATE AGAR 6X100 ml
402350	E.M.B. LEVINE AGAR 6X100 ml
402360	SALMONELLA RAPID TEST 6X100 ml
402370	SABOURAUD CAF AGAR 6X100 ml
402380	BRAIN HEART INFUSION AGAR 6X100 ml
402430	PEPTONE DILUTIONS 6X100 ml
402450	MAC CONKEY SORBITOL AGAR 6X100 ml
402500	Fluid Thioglycollate Medium + 1% Tween 80
402570	X.L.D. AGAR 6X100 ml
403030	BIOTONE BROTH 6X100 ml
403050	S.I.M. MEDIUM 6X100 ml
403060	UREA INDOLE BROTH 6X100 ml
412010	BRAIN HEART INFUSION BROTH 6X200 ml
412030	SIMMONS CITRATE AGAR 6X200 ml
412040	LYSINE IRON AGAR 6X200 ml
412050	Selenite Broth 6X200 ml
412060	TODD HEWITT BROTH 6X200 ml

412080	TRICHOMONAS BROTH 6X200 ml
412100	CHRISTENSEN UREA AGAR 5X200 ml
412110	TRYPTIC SOY BROTH + TWEEN80 1% 6x200ml
412130	PSEUDOMONAS AGAR BASE 6x200ml
412150	AZIDE BLOOD AGAR BASE 6X200 ml
412170	PHENILALANINE AGAR 6X200 ml
412180	CLED AGAR 6X200 ml
412190	NUTRIENT AGAR 6X200 ml
412210	COLUMBIA CNA AGAR BASE 6X200 ml
412230	HEKTOEN ENTERIC AGAR 6X200 ml
412240	MAC CONKEY AGAR 6X200 ml
412250	MUELLER HINTON II AGAR 6X200 ml
412270	PSEUDOMONAS CETRIMIDE AGAR 6X200 ml
412280	SABOURAUD AGAR 6X200 ml
412290	MANNITOL SALT AGAR 6X200 ml
412300	S.S. AGAR 6X200 ml
412370	SABOURAUD CAF AGAR 6X200 ml
413010	ISOSENSITEST AGAR 6X200 ml
413030	CAMPYLOBACTER AGAR 6X200 ml
413040	CLOSTRIDIUM AGAR BASE 6X200 ml
413080	NUTRIENT AGAR acc. to ISO 6579
414010	PEPTONE WATER pH 8.4 + NaCl 1% 6X225 ml
432050	SELENITE BROTH (DOUBLE CONCENT.) 6X200ml
432080	TRYPTIC SOY BROTH 6X225 ml
432250	D-Nase TEST AGAR 6X200 ml
432290	TRYPTIC SOY AGAR 6X200 ml
442080	TRYPTIC SOY BROTH 6X200 ml
442220	Chocolate Agar 6x 100 ml
442280	SABOURAUD MODIFIED AGAR 6X100 ml
442290	TRYPTIC SOY AGAR 6X100 ml
442300	WURTZ LACTOSE AGAR 6X100 ml
442320	BILE AESCULIN AGAR 6X100 ml
442350	BIGGY (NICKERSON) AGAR 6X100 ml
442490	SPS AGAR 6X100 ml
452060	Fluid Thioglycollate Medium 6 x 100 ml
452080	TRYPTIC SOY BROTH 6X100 ml
452210	COLUMBIA AGAR BASE 6X200 ml
452500	Fluid Thioglycollate Medium + 1% Tween 80 25 x 100 ml
453060	Fluid Thioglycollate Medium 25 x 100 ml
463100	Fluid Thioglycollate Medium 6 x 900 ml
463130	Selenite Broth 6X1000 ml
470010	TRYPTIC SOY AGAR 6X500 ml
470020	Selenite Broth 6X500 ml
470030	DESOXYCHOLATE AGAR 6X500 ml
470040	SABOURAUD AGAR 6X500 ml
470050	NUTRIENT BROTH 6X500 ml
470060	NUTRIENT AGAR 6X500 ml
470070	Mueller Hinton II Agar 6X500 ml
470080	MANNITOL SALT AGAR 6X500 ml
470090	MAC CONKEY AGAR 6X500 ml
470100	COLUMBIA AGAR BASE 6X500 ml
470110	CLED AGAR 6X500 ml
470120	Chocolate Agar 6 x 500 ml
470130	BLOOD AGAR BASE 6X500 ml
470140	BILE AESCULIN AGAR 6X500 ml
470150	TRICHOMONAS BROTH 6X500 ml
470160	DESOXYCHOLATE CITRATE AGAR 6X500 ml
470210	ALKALINE PEPTONE WATER 6X500 ml
470220	CZAPEK DOX AGAR 6X500 ml
470280	DRIGALSKI LACTOSE AGAR 6X500 ml

PRODOTTI CE DI LIBERA VENDITA / FREE SALE CE PRODUCTS

Rev. 31.0 del 08.01.2016

470290	CARY BLAIR TRANSPORT MEDIUM 6X500 ml
470300	Fluid Thioglycollate Medium 6 x 500 ml
470320	PEPTONE WATER 6X500 ml
470370	TRYPTIC SOY BROTH 6 x 500 ml
471070	SABOURAUD BROTH 6X500 ml
471120	PHYSIOLOGICAL SOLUTION 6X240 ml
473000	PHYSIOLOGICAL SOLUTION 6X500 ml
481110	CHROMATIC™ CANDIDA 6X100 ml
481130	CHROMATIC™ DETECTION 6X100 ml
481140	CHROMATIC™ SALMONELLA 6X100 ml
481160	CHROMATIC™ STAPH AUREUS 6X100 ml
481180	CHROMATIC™ STREP B 6X100ml
482190	Chromatic™ E.coli O157 6 x 200 ml
490010	HEMO-AEROBIC culturing 6X80 ml
490020	HEMO-ANAEROBIC culturing 6X80 ml
490030	HEMO-AEROBIC culturing-Pediatric 6X40 ml
490040	HEMO-ANAEROBIC culturing-Pediatric 6X40ml
490050	HEMO-AEROBIC culturing NEONATAL 6x9 ml
490060	HEMO-ANAEROBIC culturing NEONATAL 6x9 ml
493000	Fluid Thioglycollate Medium 6 x 100 ml
495010	TRYPTIC SOY BROTH 6x100 ml
495020	Fluid Thioglycollate Medium 6 x 100 ml
500142	URITEST PENTA
500152	URITEST
500182	URITEST M
500702	URITEST EF
50020	VAGITEST
50021	DERMATEST
500232	URITEST N
500302	URITEST 2
500402	URITEST MALTO
500412	URITEST EC
51014	URITEST PENTA
51015	URITEST
51018	URITEST M
51020	VAGITEST 120 slide
51021	DERMATEST
51023	URITEST N
51024	URITEST C
51030	URITEST 2
51040	URITEST MALTO
51041	URITEST EC
51070	URITEST EF
51118	URITEST M
51123	URITEST N 500 slide
51130	URITEST 2 500 slide
51140	URITEST MALTO
51170	CLED/MAC CONKEY/ BILE AESCULIN
52115	CLED/MAC CONKEY/SLANETZ 120 slide
52119	URITEST SF 500 slide
610001	BILE AESCULIN AZIDE AGAR
610002	DEXTROSE AGAR
610005	BLOOD AGAR BASE
610006	BORDET GENGOU AGAR BASE
610007	BRAIN HEART INFUSION AGAR
610008	BRAIN HEART INFUSION BROTH
6100085	BRAIN HEART INFUSION BROTH
610009	BRILLIANT GREEN AGAR
610012	CLED AGAR
6100125	CLED AGAR

610013	COLUMBIA AGAR BASE
6100135	COLUMBIA AGAR BASE
610014	DESOXYCHOLATE AGAR
6100145	DESOXYCHOLATE AGAR
610015	DESOXYCHOLATE CITRATE AGAR
610016	DRIGALSKI LACTOSE AGAR
610019	E.M.B. LEVINE AGAR
610021	HEKTOEN ENTERIC AGAR
6100215	HEKTOEN ENTERIC AGAR
610022	G.C. MEDIUM
610023	KLIGLER IRON AGAR
610024	M.R.S. AGAR (ISO/FDIS 15214)
610025	M.R.S. BROTH (ISO/FDIS 15214)
610026	LOWENSTEIN JENSEN MEDIUM
6100265	LOWENSTEIN JENSEN MEDIUM
610027	LYSINE IRON AGAR
610028	MAC CONKEY AGAR
6100285	MAC CONKEY AGAR
610029	MANNITOL SALT AGAR
6100295	MANNITOL SALT AGAR
610032	MR-VP BROTH
610033	MUELLER HINTON AGAR
6100335	MUELLER HINTON AGAR
610034	MUELLER HINTON BROTH
610035	MULLER KAUFFMANN BROTH
610036	NUTRIENT AGAR
610037	NUTRIENT BROTH
6100375	NUTRIENT BROTH
610038	PEPTONE WATER
610039	PHENYLALANINE AGAR
610041	PSEUDOMONAS CETRIMIDE AGAR (ISO 8360-1)
6100415	PSEUDOMONAS CETRIMIDE AGAR
610042	SS AGAR (MODIFIED)
6100425	SS AGAR (MODIFIED)
610043	SCHAEDLER AGAR BASE
610044	PURPLE LACTOSE AGAR
610046	SIMMONS CITRATE AGAR
610047	MONSUR AGAR
610048	AEROMONAS AGAR BASE
610049	LEGIONELLA BCYE AGAR BASE (ISO 11731)
610050	Fluid Thioglycollate Medium
6100505	Fluid Thioglycollate Medium
610051	TODD HEWITT BROTH
6100515	TODD HEWITT BROTH
610052	TRYPTIC SOY AGAR
6100525	TRYPTIC SOY AGAR (Harm.EP) 5 KG
610053	TRYPTIC SOY BROTH
6100535	TRYPTIC SOY BROTH
610055	T.S.I. AGAR USP
610056	CLOSTRIDIUM BROTH
6100565	CLOSTRIDIUM BROTH
610057	MAC CONKEY AGAR No.2
6100575	MAC CONKEY AGAR No.2 5 KG
610060	X.L.D. AGAR (ISO 6579)
6100605	X.L.D. AGAR
610061	TRICHOMONAS BROTH
610065	GSB AGAR BASE (ISLAM)
610070	YEAST GLUCOSE CHLORAMPHENICOL AGAR
6100705	YEAST GLUCOSE CHLORAMPHENICOL AGAR 5 Kg
610071	PSEUDOMONAS AGAR BASE

PRODOTTI CE DI LIBERA VENDITA / FREE SALE CE PRODUCTS

Rev. 31.0 del 08.01.2016

610072	CZAPEK DOX BROTH
610074	TRYPTONE SULFITE NEOMYCIN AGAR
610075	PHENYLALANINE MALONATE BROTH
610079	BRUCELLA AGAR BASE
610080	WORT BROTH W/O NaCl
610092	XLT 4 AGAR
610095	CZAPEK DOX AGAR
610096	REINFORCED CLOSTRIDIAL AGAR
610097	STAPHYLOCOCCUS BROTH
610098	ALKALINE PEPTONE WATER
610101	MALT AGAR
610103	SABOURAUD AGAR
6101035	SABOURAUD AGAR
610104	SABOURAUD BROTH
610107	UREA AGAR BASE (ISO 6785)
610108	MAC CONKEY SORBITOL AGAR
610109	P.P.L.O. BROTH
610110	MUELLER HINTON AGAR MODIFIED
610111	YERSINIA SELECTIVE AGAR BASE
610112	CLED ANDRADE AGAR
610113	COLUMBIA CNA AGAR BASE
610114	BACILLUS CEREUS AGAR BASE (MOSSEL) ISO 7932
610115	CLOSTRIDIUM DIFFICILE AGAR BASE
610117	TRYPTONE YEAST AGAR
610118	ANDRADE LACTOSE PEPTONE WATER
610123	CORN MEAL AGAR
610125	LEGIONELLA CYE AGAR BASE
610128	MAC CONKEY AGAR w/o BILE SALT
610130	CAMPYLOBACTER BLOOD FREE MEDIUM BASE
610131	CAMPYLOBACTER ENRICHMENT BROTH BASE
610132	MOTILITY TEST AGAR
610134	SLANETZ BARTLEY AGAR BASE ISO 7899-2
610135	BIGGY (NICKERSON) AGAR
610136	BACILLUS CEREUS AGAR BASE (PEMBA)
610137	SCHAEDLER BROTH
610140	E.M.B. AGAR w LACTOSE + SUCROSE
610143	LIVER BROTH
610144	MRS BROTH w/o GLUCOSE
610145	SELENITE BROTH
6101455	SELENITE BROTH
610146	SABOURAUD MALTOSE AGAR
610147	SLANETZ AND BARTLEY AGAR + TTC
6101475	SLANETZ AND BARTLEY AGAR + TTC
610148	SPS AGAR
610151	BILE AESCULIN BROTH
610152	AMIES TRANSPORT MEDIUM + CHARC.
6101525	AMIES TRANSPORT MEDIUM + CHARC.
610153	AZIDE BLOOD AGAR BASE
610155	AZIDE VIOLET BLOOD AGAR BASE
610157	BIOTONE AGAR
610158	BIOTONE BROTH
610159	CPLM SELECTIVE WITH CAF
610160	DERMATOPHYTE (D.T.M.) AGAR
610161	DEXTROSE BROTH
610163	G.N. HAJNA BROTH
610164	HERELLEA AGAR
6101645	HERELLEA AGAR
610165	KOSER CITRATE MEDIUM
610168	LISTERIA PALCAM AGAR
610169	I.U.T.M. MEDIUM

610170	MAC CONKEY MMG AGAR
6101705	MAC CONKEY MMG AGAR
610172	MALONATE BROTH
610174	PHENOL RED BROTH BASE
610175	RAPPAPORT VASSILIADIS BROTH (ISO 6785-6579)
610176	ROGOSA AGAR
610177	ROGOSA BROTH
610179	SABOURAUD CAF AGAR + ACTIDIONE
610180	S.F. BROTH
610181	S.I.M. MEDIUM
610182	STUART TRANSPORT MEDIUM
610183	TETRATHIONATE BROTH BASE
610185	TRYPTIC (CTA) MEDIUM
610186	VOGEL JOHNSON AGAR
610188	BLOOD AGAR BASE N. 2
610191	AMIES TRANSPORT MEDIUM (w/o CHARCOAL)
6101915	AMIES TRANSPORT MEDIUM (w/o CHARCOAL)
610193	TRYPTOSE AGAR
610195	MAC CONKEY AGAR w/o CRYSTAL VIOLET
610196	TRYPTIC BILE AGAR
610197	TRYPTOFAN BROTH
610200	CAMPYLOBACTER KARMALI AGAR BASE
610203	SABOURAUD CAF AGAR
6102035	SABOURAUD CAF AGAR 5 KG
610205	DNase TEST AGAR
610206	TRYPTONE WATER (ISO/DIS 3811)
610207	CLOSTRIDIUM PERFRINGENS AGAR BASE
610210	BILE AESCULIN AGAR
610211	KLIGLER IRON AGAR MOD.
610214	MIDDLEBROOK 7H9 BROTH BASE
610217	NUTRIENT BROTH N.2
610218	Mueller Hinton II Broth
610221	ANTIBIOTIC TEST MEDIUM
610222	CLOSTRIDIUM BROTH w/o AGAR
6102225	CLOSTRIDIUM BROTH w/o AGAR
610223	MAC CONKEY AGAR w/o Salt
610227	PHENOL RED AGAR BASE
610229	ANTIBIOTIC MEDIUM E
610230	OXIDATIVE/FERMENTATIVE MEDIUM
610233	TRYPTOSE BROTH
610235	MANNITOL MOTILITY TEST MEDIUM
610236	MOTILITY INDOLE UREA AGAR (M.I.U.)
610241	TRYPTONE SOYA YEAST EXTRACT BROTH
610245	LB AGAR
610301	BISMUTH SULPHITE AGAR
610303	Lysine Decarboxylase Broth
610304	OF BASAL MEDIUM
610305	ORNITHINE DECARBOXYLASE BROTH
610306	ARGININE DECARBOXYLASE BROTH
610308	PHENOL RED AGAR BASE
610309	PSEUDOMONAS AGAR F
610310	PSEUDOMONAS AGAR P
610311	UREA BROTH
610315	ANTIBIOTIC AGAR N.11
610319	PFIZER SELECTIVE ENTEROCOCCUS AGAR
610322	NITRATE BROTH
610331	DIAGNOSTIC SENSITIVITY TEST AGAR (D.S.T.)
610339	T.S.I. AGAR acc.EP
610341	EMGON BROTH
610343	MANNITOL SALT BROTH

PRODOTTI CE DI LIBERA VENDITA / FREE SALE CE PRODUCTS

Rev. 31.0 del 08.01.2016

610363	Yeast Extract Sodium Lactate medium
610364	Tryptose Phosphate Broth
6103645	Tryptose Phosphate Broth
610372	Cooked Meat Medium
610492	POLYPEPTONE
610495	BRAIN HEART INFUSION
6104955	BRAIN HEART INFUSION
610496	ACID HYDROLISATE OF CASEIN
610497	BEEF EXTRACT
6104975	BEEF EXTRACT
610498	LACTOSE
6104985	LACTOSE
610506	CYSTINE HEART AGAR
610611	CHROMATIC™ SALMONELLA
610612	CHROMATIC™ DETECTION
6106125	CHROMATIC™ DETECTION
610613	CHROMATIC™ CANDIDA
610614	Chromatic™ E.coli O157
610615	CHROMATIC™ MRSA
610616	CHROMATIC™ STAPH AUREUS
610617	CHROMATIC™ STREP B
610625	SABOURAUD CAF (50 mg/L) AGAR
610627	MUELLER HINTON II AGAR
6106275	MUELLER HINTON II AGAR
610629	CHROMATIC™ ESBL
611000	SODIUM CHLORIDE
611001	AGAR
6110015	AGAR
611002	GELATIN BACTERIOLOGICAL
6110025	GELATIN BACTERIOLOGICAL
611003	SODIUM SELENITE
6110035	SODIUM SELENITE
611004	TRYPTONE
6110045	TRYPTONE
611005	YEAST EXTRACT
6110055	YEAST EXTRACT
611006	MALT EXTRACT
6110065	MALT EXTRACT
611007	CAMPYLOBACTER AGAR BASE
611008	TRYPTOSE
6110085	TRYPTOSE
611009	GLUCOSIO
611010	T.C.B.S. AGAR
611015	SIERRA LIPOLYTIC AGAR
611016	YEAST EXTRACT AGAR (ISO 6222)
611021	HEART INFUSION BROTH
6110215	HEART INFUSION BROTH
611022	MIDDLEBROOK 7H10 AGAR BASE
611203	SABOURAUD CAF (1g/l) AGAR
611210	WURTZ LACTOSE AGAR
611265	ISOSENSITEST AGAR
611366	STAPHYLOCOCCUS 110 AGAR
611367	BILE BACTERIOLOGICAL
611401	IRON SULPHITE AGAR
611402	CARY BLAIR TRANSPORT MEDIUM
611502	CASEIN PEPTONE
611601	GLUCOSE
6116015	GLUCOSE
611618	CHROMATIC™ MH
611619	CHROMATIC™ CRE AGAR BASE

611701	PEPTONE BACTERIOLOGICAL
6117015	PEPTONE BACTERIOLOGICAL
611801	SUCROSE
6118015	SUCROSE
611901	BILE SALT N.3
6119015	BILE SALT N.3
612001	LIVER EXTRACT
6120015	LIVER EXTRACT
612101	PEPTONE MYCOLOGICAL
6121015	PEPTONE MYCOLOGICAL
612201	PROTEOSE PEPTONE
6122015	PROTEOSE PEPTONE
612202	STREPTOCOCCUS SELECTIVE AGAR
612203	STREPTOCOCCUS BROTH
612501	SOY PEPTONE
6125015	SOY PEPTONE
620001	BILE AESCULIN AZIDE AGAR
620002	DEXTROSE AGAR
620005	BLOOD AGAR BASE
620006	BORDET GENGOU AGAR BASE
620007	BRAIN HEART INFUSION AGAR
620008	BRAIN HEART INFUSION BROTH
620009	BRIILLIANT GREEN AGAR
620012	CLED AGAR
620013	COLUMBIA AGAR BASE
620014	DESOXYCHOLATE AGAR
620015	DESOXYCHOLATE CITRATE AGAR
620016	DRIGALSKY LACTOSE AGAR
620019	E.M.B. LEVINE AGAR
620021	HEKTOEN ENTERIC AGAR
620022	G.C. MEDIUM
620023	KLIGLER IRON AGAR
620024	M.R.S. AGAR (ISO/FDIS 15214)
620025	M.R.S. BROTH (ISO/FDIS 15214)
620026	LOWENSTEIN JENSEN MEDIUM
620027	LYSINE IRON AGAR
620028	MAC CONKEY AGAR
620029	MANNITOL SALT AGAR
620032	MR-VP BROTH
620033	MUELLER HINTON AGAR
620034	MUELLER HINTON BROTH
620035	MULLER KAUFFMANN BROTH
620036	NUTRIENT AGAR
620037	NUTRIENT BROTH
620038	PEPTONE WATER
620039	PHENYLALANINE AGAR
620041	PSEUDOMONAS CETRIMIDE AGAR (ISO 8360-1)
620042	SS AGAR (MODIFIED)
620043	SCHAEDLER AGAR BASE
620044	PURPLE LACTOSE AGAR
620046	SIMMONS CITRATE AGAR
620047	MONSUR AGAR
620048	AEROMONAS AGAR BASE
620049	LEGIONELLA BCYE AGAR BASE (ISO 11731)
620050	Fluid Thioglycollate Medium
620051	TODD HEWITT BROTH
620052	TRYPTIC SOY AGAR
620053	TRYPTIC SOY BROTH
620055	T.S.I. AGAR USP
620056	CLOSTRIDIUM BROTH

PRODOTTI CE DI LIBERA VENDITA / FREE SALE CE PRODUCTS

Rev. 31.0 del 08.01.2016

620057	MAC CONKEY AGAR No.2
620060	X.L.D. AGAR (ISO 6579)
620061	TRICHOMONAS BROTH
620065	GSB AGAR BASE (ISLAM)
620070	YEAST GLUCOSE CHLORAMPHENICOL AGAR
620071	PSEUDOMONAS AGAR BASE
620072	CZAPEK DOX BROTH
620074	TRYPTONE SULFITE NEOMYCIN AGAR
620075	PHENYLALANINE MALONATE BROTH
620079	BRUCELLA AGAR BASE
620092	XLT 4 AGAR
620095	CZAPEK DOX AGAR
620096	REINFORCED CLOSTRIDIAL AGAR
620097	STAPHYLOCOCCUS BROTH
620098	ALKALINE PEPTONE WATER
620101	MALT AGAR
620103	SABOURAUD AGAR
620104	SABOURAUD BROTH
620107	UREA AGAR BASE (ISO 6785)
620108	MAC CONKEY SORBITOL AGAR
620109	P.P.L.O. BROTH
620110	MUELLER HINTON AGAR MODIFIED
620111	YERSINIA SELECTIVE AGAR BASE
620112	CLED ANDRADE AGAR
620113	COLUMBIA CNA AGAR BASE
620114	BACILLUS CEREUS AGAR BASE (MOSSEL) ISO 7932
620115	CLOSTRIDIUM DIFFICILE AGAR BASE
620117	TRYPTONE YEAST AGAR
620118	ANDRADE LACTOSE PEPTONE WATER
620122	MIDDLEBROOK 7H10 AGAR BASE
620123	CORN MEAL AGAR
620125	LEGIONELLA CYE AGAR BASE
620130	CAMPYLOBACTER BLOOD FREE MEDIUM BASE
620131	CAMPYLOBACTER ENRICHMENT BROTH BASE
620132	MOTILITY TEST AGAR
620134	SLANETZ BARTLEY AGAR BASE ISO 7899-2
620135	BIGGY (NICKERSON) AGAR
620136	BACILLUS CEREUS AGAR BASE (PEMBA)
620137	SCHAEDLER BROTH
620140	E.M.B. AGAR w LACTOSE + SUCROSE
620143	LIVER BROTH
620144	MRS BROTH w/o GLUCOSE
620145	SELENITE BROTH
620146	SABOURAUD MALTOSE AGAR
620147	SLANETZ AND BARTLEY AGAR + TTC
620148	SPS AGAR
620151	BILE AESCULIN BROTH
620152	AMIES TRANSPORT MEDIUM + CHARC.
620153	AZIDE BLOOD AGAR BASE
620155	AZIDE VIOLET BLOOD AGAR BASE
620157	BIOTONE AGAR
620158	BIOTONE BROTH
620159	CPLM SELECTIVE WITHCAF
620160	DERMATOPHYTE (D.T.M.) AGAR
620161	DEXTROSE BROTH
620163	G.N. HAJNA BROTH
620164	HERELLEA AGAR
620165	KOSER CITRATE BROTH
620168	LISTERIA PALCAM AGAR
620169	I.U.T.M. MEDIUM

620170	MAC CONKEY MMG AGAR
620172	MALONATE BROTH
620174	PHENOL RED BROTH BASE
620175	RAPPAPORT VASSILIADIS BROTH
620176	ROGOSA AGAR
620177	ROGOSA BROTH
620179	SABOURAUD CAF AGAR + ACTIDIONE
620180	S.F. BROTH
620181	S.I.M. MEDIUM
620182	STUART TRANSPORT MEDIUM
620183	TETRATHIONATE BROTH BASE
620185	TRYPTIC (CTA) MEDIUM
620186	VOGEL JOHNSON AGAR
620188	BLOOD AGAR BASE N. 2
620191	AMIES TRANSPORT MEDIUM (w/o CHARCOAL)
620193	TRYPTOSE AGAR
620195	MAC CONKEY AGSAR w/o CRYSTAL VIOLET
620196	TRYPTIC BILE AGAR
620197	TRYPTOFAN BROTH
620200	CAMPYLOBACTER KARMALI AGAR BASE
620203	SABOURAUD CAF AGAR
620205	DNase TEST AGAR
620206	TRYPTONE WATER (ISO/DIS 3811)
620207	CLOSTRIDIUM PERFRIGENS AGAR BASE
620210	BILE AESCULIN AGAR
620211	KLIGLER IRON AGAR MOD.
620214	MIDDLEBROOK 7H9 BROTH BASE
620217	NUTRIENT BROTH N.2
620218	Mueller Hinton II Broth
620227	PHENOL RED AGAR BASE
620229	ANTIBIOTIC MEDIUM E
620233	TRYPTOSE BROTH
620235	MANNITOL MOTILITY TEST MEDIUM
620241	TRYPTONE SOYA YEAST EXTRACT BROTH
620303	Lysine Decarboxylase Broth
620309	PSEUDOMONAS AGAR F
620311	UREA BROTH
620495	BRAIN HEART INFUSION
620496	ACID HYDROLISATE OF CASEIN
620497	BEEF EXTRACT
620498	LACTOSE
620611	CHROMATIC™ SALMONELLA
620612	CHROMATIC™ DETECTION
620613	CHROMATIC™ CANDIDA
620614	Chromatic™ E.coli O157
620615	CHROMATIC™ MRSA
620616	CHROMATIC™ STAPH AUREUS
620617	CHROMATIC™ STREP B
620627	MUELLER HINTON II AGAR
620629	CHROMATIC™ ESBL
621000	SODIUM CHLORIDE
621001	AGAR
621003	SODIUM SELENITE
621004	TRYPTONE
621005	YEAST EXTRACT
621006	MALT EXTRACT
621007	CAMPYLOBACTER AGAR BASE
621010	TCBS AGAR
621015	SIERRA LIPOLYTIC AGAR
621016	YEAST EXTRACT AGAR (ISO 6222)

PRODOTTI CE DI LIBERA VENDITA / FREE SALE CE PRODUCTS

Rev. 31.0 del 08.01.2016

621021	HEART INFUSION BROTH
621022	MIDDLEBROOK 7H10 AGAR BASE
621210	WURTZ LACTOSE AGAR
621265	ISOSENSITEST AGAR
621367	BILE BACTERIOLOGICAL
621401	IRON SULPHITE AGAR
621402	CARY BLAIR TRANSPORT MEDIUM
621601	GLUCOSE
621618	CHROMATIC™ MH
621619	CHROMATIC™ CRE AGAR BASE
621701	PEPTONE BACTERIOLOGICAL
622202	STREPTOCOCCUS SELECTIVE AGAR
630026	LOWENSTEIN JENSEN MEDIUM w GLYCEROL 1 litre
71618	ENTEROSYSTEM 18R 20 Tests
71630	STAF SYSTEM 18 R 20 Tests
71670	COPRO SYSTEM 40 Tests
71675	COPRO SYSTEM Plus 20 Tests
71678	PATHOGENIC SYSTEM DOUBLE 40 Tests
71679	PATHOGENIC SYSTEM 20 Tests
71681	PATHOGENIC SYSTEM AST
71714	INTEGRAL SYSTEM ENTEROBATTERI 20 Tests
71718	INTEGRAL SYSTEM STAFILOCOCCI 20 Tests
71720	INTEGRAL SYSTEM STREPTOCOCCI 20 Tests
71724	INTEGRAL SYSTEM GARDNERELLA 20 TESTS
71822	INTEGRAL SYSTEM YEASTS Plus 20 Tests
72560	STREPTO SYSTEM 12 R 40 Tests
72592	MYCOPLASMA SYSTEM Plus 20 Tests
74156	A.F. GENITAL SYSTEM 20 Tests
74160	URIN SYSTEM Plus 20 Tests
74161	URIN SYSTEM Chrom 20 Tests
76010	Sensi Test gram-negative 20 Tests
76020	Sensi Test gram-positive 20 Tests
76031	SensiQuattro Gram-negative 20 Tests
76032	SensiQuattro Gram-positive 20 Tests
76033	SensiQuattro Candida EU 20 Tests
78618	ENTERO PLURI TEST 10 Tests
78619	ENTERO PLURI TEST 25 Tests
78620	OXI/FERM PLURI TEST 10 Tests
78621	OXI/FERM PLURI TEST 25 Tests
79010	Sensi Test gram-negative 4 Tests
79020	Sensi Test gram-positive 4 Tests
79031	SensiQuattro Gram-negative 4 Tests
79032	SensiQuattro Gram-positive 4 Tests
79033	SensiQuattro Candida EU 4 Tests
79156	A.F. GENITAL SYSTEM 4 Tests
79160	URIN SYSTEM Plus 4 Tests
79161	URIN SYSTEM Chrom 4 Tests
79560	STREPTO SYSTEM 12 R 8 Tests
79592	MYCOPLASMA SYSTEM Plus 4 Tests
79618	ENTEROSYSTEM 18R 4 Tests
79630	STAF SYSTEM 18 R 4 Tests
79670	COPRO SYSTEM 8 Tests
79675	COPRO SYSTEM Plus 4 Tests
79678	PATHOGENIC SYSTEM DOUBLE 8 Tests
79679	PATHOGENIC SYSTEM 4 Tests
79681	PATHOGENIC SYSTEM AST
79714	INTEGRAL SYSTEM ENTEROBATTERI 4 Tests
79718	INTEGRAL SYSTEM STAFILOCOCCI 4 Tests
79720	INTEGRAL SYSTEM STREPTOCOCCI 4 Tests
79724	INTEGRAL SYSTEM GARDNERELLA 4 Tests

79822	INTEGRAL SYSTEM YEASTS Plus 4 Tests
80009	IODINE MKTT SOLUTION 10 x 10 ml
80010	XLT 4 supplement 2 x 50 ml
80021	GLYCEROL supplement 4 x 50 ml
80022	POTASSIUM TELLURITE 1% suppl. 5 x 10 ml
80031	TWEEN 80 supplement 2 x 50 ml
80040	CHROMATIC™ SALMONELLA Supplement 2x50 ml
80047	MULLER KAUFFMANN 3X50 ml (Iodio/B.G.O.1%)
80053	VITAMIN K 1% supplement 5 x 5 ml
80056	LEGIONELLA growth supplement 10 vials
80057	H2O2 REAGENT 1 x 10 ml
80060	DECONTAM-KIT
80110	UREA 40% 6X100 ml
80219	EGG YOLK emulsion 4 x 50 ml
80252	ENTEROSYSTEM 18R REAGENT 100/200 Tests
80253	COPRO SYSTEM REAGENTS (antisera)
80257	LISTERIA SYSTEM 18R -REAG 100/200 Tests
80258	AF GENITAL SYSTEM REAGENT
80260	IDENTIF. SYSTEM-REAGENT 100/200 Tests
80271	KOVAC'S REAGENT 4x25 ml
80272	FERRIC CHLORIDE 10% 2x 25 ml
80273	NINHYDRIN 7% 10 ml
80275	MIF COLOR KIT 50 Tests
80276	ZIEHL-NEELEN 3 x 250 ml
80277	METHYLENE BLUE Solution 250 ml
80279	VASELINE OIL 4 x 50 ml
80280	V.P. TEST-Reagent 10x10ml
80281	V.P. TEST EP 10 x 10 mL
80282	Kit May-Grünwald Giemsa
80290	SAFRANIN SOLUTION 1000 ml
80291	POTASSIUM TELLURITE 3.5% suppl.5x10 ml
80292	UREA 40 % supplement 10 x 5 ml
80293	GRAM COLOR KIT 4 x 250 ml
80294	KIT COLOR ALBERT 2 x 250 ml
80295	DECOLOURIZING SOLUTION 1000 ml
80296	LUGOL PVP SOLUTION 1000 ML
80297	SAFRANIN SOLUTION 500 ml
80298	LUGOL PVP SOLUTION 250 ml
80299	CRYSTAL VIOLET SOLUTION 1000 ml
80300	TTC 1% supplement 5 x 10 ml
80350	ANTIBIOTIC TEST
80351	RAPID ANTIBIOTIC TEST 50 Tests
80380	KINYOUN COLOR KIT 2 x 250 ml
80390	FIXUR 1
80409	IODINE SOLUTION 10 x 10 ml
80410	XLT 4 SUPPLEMENT 4 x 50 ml
80422	POTASSIUM TELLURITE 1% Supplement 10 x 10 ml
80430	TTC 1% supplement 10 x 10 ml
80431	TWEEN 80 Supplement 4 x 50 ml
80453	VITAMIN K 1% SUPPLEMENT 10 x 5 ml
80491	POTASSIUM TELLURITE 3.5% Supplement 10 x 10
81001	AMPICILLIN supplement 10 vials
81002	LEGIONELLA (BMPA) supplement 10 vials
81003	BRUCELLA supplement 10 vials
81004	CAMPYLOBACTER Preston supplem 10 vials
81006	CN (Pseudomonas) supplement 10 vials
81007	CLOSTRIDIUM difficile suppleme 10 vials
81008	LEGIONELLA (GVPC) supplement 10 vials
81009	IODINE solution 5 x 10 ml
81011	CLOSTRIDIUM perfringens (T.S.C.) sup.10 v.

PRODOTTI CE DI LIBERA VENDITA / FREE SALE CE PRODUCTS

Rev. 31.0 del 08.01.2016

81012	LCAT supplement 10 vials
81013	BORDETELLA supplement 10 vials
81014	HAEMOPHILUS supplement 10 vials
81015	CAMPYLOBACTER Butzler supplement 10 vials
81016	BACILLUS Cereus Supplement 10 Vials
81017	CHLORAMPHENICOL supplement 10 vials
81019	LEGIONELLA (MWY) supplement 10 vials
81020	MMG Supplement 10 vials
81022	V.C.N. supplement 10 vials
81023	VITALEX growth supplement 10 vials
81024	V.C.N.T. supplement 10 vials
81025	DERMATOPHYTE supplement 10 vials
81026	LISTERIA PALCAM supplement 10 vials
81032	ONPG 1.5% Supplement 10 vials
81033	GENTAMYCIN supplement 10 vials
81035	MIDDLEBROOK 7H 10 supplement 4 x 50 ml
81036	CAMPYLOBACTER KARMALI Supplement 10 vials
81037	CAMPYLOBACTER CGDA supplement 10 vials
81038	CAMPYLOBACTER C.T.V.N. Supplement 10 vials
81039	YERSINIA supplement 10 vials
81040	GARDNERELLA vaginalis Supplement 10vials
81041	V.C.A.T. supplement 10 vials
81042	LISTERIA FRASER supplement (1125mg)10 vials
81048	CNA (Staf/Strep) supplement 10 vials
81050	CAMPYLOBACTER growth supplement 10 vials
81051	CAMPYLOBACTER Blaser Wang supp 10 vials
81054	SCHAEDLER supplement 10 vials
81055	CAMPYLOBACTER Skirrow suppl 10 vials
81056	LEGIONELLA (BCYE) growth suppl.10 vials
81062	VANCOMYCIN Supplement for VRE 10 vials
81077	CAMPYLOBACTER C.T.V.A. Supplement 10 vials
81078	CHROMATIC™ MRSA Supplement
81079	UREA-ARGININE SCREEN
81082	CEFIXIME TELLURITE Supplement
81083	MEROPENEM Supplement
81084	NEOMYCIN Solution
81085	CHROMATIC™ STAPH AUREUS Supplement
81086	VCC MOD SELECTIVE Supplement
81088	CHROMATIC™ CRE Supplement
81089	Chromatic™ ESBL Supplement
81090	CHROMATIC™ ESBL+AmpC Supplement
81091	Legionella BCYE Growth Supplement w/o L-Cysteine
83810	HORSE SERUM 1 x 100 ml
85501	COPRO KIT (SELENITE BROTH)
85502	COPRO KIT 2 (SALMONELLA BROTH)
87001	KOVAC'S Reagent
87002	VP (NaOH) Reagent
87003	CATALASE Reagent
87004	PHENYLALANINE Reagent
87005	OXIDASE Reagent
87006	Vaseline Oil
87007	VP (KOH) Reagent
87008	Lactophenol Cotton Blue Droppers
87101	GRAM COLOR KIT
88001	BETA LACTAMASE TEST 30 Tests
88003	OXIDASE TEST SWABS 30 Tests
88004	OXIDASE TEST DISCS 30 Discs
88005	O.N.P.G. TEST 30 Tests
88006	E. COLI TEST 30 Tests
88007	HIPPURATE TEST 30 Tests

88008	AESCULIN BILE TEST 30 Tests
88009	NITRATI TEST 30 Tests 30 Tests
88010	LISTERIA MONO TEST 20 Tests
88011	UREA RAPID TEST 30 Tests
88013	H2S RAPID TEST 30 Tests
88014	LYSINE DECARBOXYLASE TEST 30 Tests
88015	ORNITHINE DECARBOXYLASE TEST 30 Tests
88016	ARGININE DECARBOXYLASE TEST 30 Tests
88017	INDOLE TEST 30 Tests
88020	S F RAPID TEST 30 Tests
88021	CAMP TEST-S 30 Tests
88023	CATALASI/OXY TEST 30 Tests
88024	UREA / INDOLO TEST 30 Tests
88027	CAMP TEST-R 30 Tests
88028	PEPTIDASE A TEST 30 Tests
88029	OXIDASE TEST STICKS 50 Tests
88030	COAGULASE TEST 40 Tests
88031	GRAM TEST STICK 30 Tests
88032	INDOLO TEST STICK 30 Tests
88033	BETA LACTAMASE STICKS 30 Tests
88034	PEPTIDASE A STICKS 30 Tests
88035	VP TEST KIT
88040	C 390 50 Discs
88041	Brilliant Green 100 µg
88042	CITRATE TEST
88043	O129 Disc 150 µg
88044	O129 Disc 10 µg
88105	O.N.P.G. TEST
88201	GALACTOSE TEST 30 Tests
88202	GLUCOSE TEST 30 Tests
88203	LACTOSE TEST 30 Tests
88204	MALTOSE TEST 30 Tests
88205	RAFFINOSE TEST 30 Tests
88206	SUCROSE TEST 30 Tests
88207	ARABITOL TEST 30 Tests
88208	ADONITOL TEST 30 Tests
88209	ARABINOSE TEST 30 Tests
88210	DULCITOL TEST 30 Tests
88211	INOSITOL TEST 30 Tests
88212	INULIN TEST 30 Tests
88213	LEVULOSE TEST 30 Tests
88214	MANNITOL TEST 30 Tests
88215	MANNOSE TEST 30 Tests
88216	RHAMNOSE TEST 30 Tests
88217	SALICIN TEST 30 Tests
88218	SORBITOL TEST 30 Tests
88219	TREHALOSE TEST 30 Tests
88220	XYLOSE TEST 30 Tests
89021	CultiControl™ Aspergillus brasiliensis ATCC® 16404™
89022	CultiControl™ Bacillus Cereus ATCC® 11778™
89023	CultiControl™ Bacillus subtilis ATCC® 6633™
89024	CultiControl™ Candida albicans ATCC® 10231™
89025	CultiControl™ Enterococcus faecalis ATCC® 19433™
89026	CultiControl™ Enterococcus faecalis ATCC® 29212™
89027	CultiControl™ Escherichia coli ATCC® 25922™
89028	CultiControl™ Escherichia coli ATCC® 8739™
89029	CultiControl™ Listeria innocua ATCC® 33090™
89030	CultiControl™ Listeria ivanovii ATCC® 19119™
89031	CultiControl™ Listeria monocytogenes ATCC® 19111™
89032	CultiControl™ Proteus mirabilis ATCC® 25933™

PRODOTTI CE DI LIBERA VENDITA / FREE SALE CE PRODUCTS

Rev. 31.0 del 08.01.2016

89033	CultiControl™ <i>Pseudomonas aeruginosa</i> ATCC® 27853™
89034	CultiControl™ <i>Pseudomonas aeruginosa</i> ATCC® 9027™
89035	CultiControl™ <i>Rhodococcus equi</i> ATCC® 6939™
89036	CultiControl™ <i>Saccharomyces cerevisiae</i> ATCC® 9763™
89037	CultiControl™ <i>Salmonella typhimurium</i> ATCC® 14028™
89038	CultiControl™ <i>Shigella flexneri</i> ATCC® 12022™
89039	CultiControl™ <i>Staphylococcus aureus</i> NCTC 12493
89040	CultiControl™ <i>Staphylococcus aureus</i> ATCC® 25923™
89041	CultiControl™ <i>Staphylococcus aureus</i> ATCC® 29213™
89042	CultiControl™ <i>Staphylococcus aureus</i> ATCC® 33862™
89043	CultiControl™ <i>Staphylococcus aureus</i> ATCC® 43300™
89044	CultiControl™ <i>Staphylococcus aureus</i> ATCC® 6538™
89045	CultiControl™ <i>Staphylococcus epidermidis</i> ATCC® 12228™
89046	CultiControl™ <i>Streptococcus agalactiae</i> ATCC® 13813™
89047	CultiControl™ <i>Streptococcus pneumoniae</i> ATCC® 49619™
89048	CultiControl™ <i>Streptococcus pyogenes</i> ATCC® 19615™
89049	CultiControl™ <i>Proteus mirabilis</i> ATCC® 12453™
89050	CultiControl™ <i>Yersinia enterocolitica</i> ATCC® 9610™
89051	CultiControl™ <i>Listeria monocytogenes</i> ATCC® 19115™
89052	CultiControl™ <i>Legionella pneumophila</i> subsp. <i>pneumophila</i> ATCC® 33152™
89053	CultiControl™ <i>Clostridium perfringens</i> ATCC® 13124™
89054	CultiControl™ <i>Salmonella enterica</i> subsp. <i>enterica</i> serovar <i>Typhimurium</i> ATCC® 13311™
89055	CultiControl™ <i>Lactobacillus paracasei</i> subsp. <i>paracasei</i> ATCC ® BAA-52™
89056	CultiControl™ <i>Vibrio parahaemolyticus</i> ATCC ® 17802™
89057	CultiControl™ <i>Aspergillus fumigatus</i> ATCC ® 204305™
89058	CultiControl™ <i>Shigella sonnei</i> ATCC ® 25931™
89059	CultiControl™ <i>Clostridium sordellii</i> ATCC ® 9714™
89060	CultiControl™ <i>Listeria monocytogenes</i> ATCC ® 7644™
89061	CultiControl™ <i>Streptococcus bovis</i> ATCC ® 33317™
89062	CultiControl™ <i>Streptococcus mutans</i> ATCC ® 25175™
89063	CultiControl™ <i>Streptococcus pneumoniae</i> ATCC ® 27336™
89064	CultiControl™ <i>Streptococcus sanguinis</i> ATCC ® 10556™
89065	CultiControl™ <i>Enterobacter cloacae</i> subsp. <i>cloacae</i> ATCC ® BAA-1143™
89066	CultiControl™ <i>Enterococcus faecalis</i> ATCC ® 49532™
89067	CultiControl™ <i>Enterococcus faecalis</i> ATCC ® 49533™
89068	CultiControl™ <i>Escherichia coli</i> NCTC 11954™
89069	CultiControl™ <i>Klebsiella pneumoniae</i> ATCC ® BAA-2146™
89070	CultiControl™ <i>Klebsiella pneumoniae</i> subsp. <i>pneumoniae</i> ATCC ® 700603™
89071	CultiControl™ <i>Candida parapsilosis</i> ATCC ® 22019™
89072	CultiControl™ <i>Candida albicans</i> ATCC ® 90028™
89073	CultiControl™ <i>Issatchenkia orientalis</i> ATCC ® 6258™
89074	CultiControl™ <i>Neisseria gonorrhoeae</i> ATCC ® 19424™
89075	CultiControl™ <i>Neisseria gonorrhoeae</i> ATCC ® 31426™
89076	CultiControl™ <i>Haemophilus influenzae</i> ATCC® 49766™
89077	CultiControl™ <i>Haemophilus influenzae</i> ATCC® 49247™
89078	CultiControl™ <i>Bacteroides fragilis</i> ATCC® 25285™
89079	CultiControl™ <i>Bacteroides thetaiotaomicron</i> ATCC® 29741™
89080	CultiControl™ <i>Lactobacillus acidophilus</i> ATCC ® 4356™
89081	CultiControl™ <i>Lactobacillus leichmannii</i> ATCC ® 4797™
89082	CultiControl™ <i>Lactococcus lactis</i> ATCC ® 19435™
89083	CultiControl™ <i>Proteus mirabilis</i> ATCC ® 29906™
89084	CultiControl™ <i>Salmonella enterica</i> subsp. <i>enterica</i> serovar <i>Enteritidis</i> ATCC ® 13076™
89085	CultiControl™ <i>Listeria monocytogenes</i> ATCC ® 13932™
89086	CultiControl™ <i>Campylobacter jejuni</i> ATCC ® 33291™
89087	CultiControl™ <i>Klebsiella pneumoniae</i> ATCC ® BAA-1706™

89088	CultiControl™ <i>Klebsiella pneumoniae</i> ATCC ® BAA-1705™
89089	CultiControl™ <i>Klebsiella pneumoniae</i> subsp. <i>pneumoniae</i> ATCC ® 13883™
89090	CultiControl™ <i>Clostridium difficile</i> ATCC ® 9689™
89091	CultiControl™ <i>Aggregatibacter aphrophilus</i> ATCC ® 7901™
89092	CultiControl™ <i>Staphylococcus aureus</i> subsp. <i>aureus</i> ATCC® 700698™
89093	CultiControl™ <i>Staphylococcus aureus</i> subsp. <i>aureus</i> ATCC ® 700699™
89094	CultiControl™ <i>Plesiomonas shigelloides</i> ATCC ® 14029™
89095	CultiControl™ <i>Clostridium sporogenes</i> ATCC ® 19404™
89096	CultiControl™ <i>Micrococcus luteus</i> ATCC ® 10240™
89097	CultiControl™ <i>Candida tropicalis</i> ATCC ® 750™
89098	CultiControl™ <i>Candida krusei</i> ATCC ® 14243™
89099	CultiControl™ <i>Gardnerella vaginalis</i> ATCC ® 14018™
89100	CultiControl™ <i>Lactobacillus fermentum</i> ATCC ® 9338™
89101	CultiControl™ <i>Listeria grayi</i> ATCC ® 25401™
89102	CultiControl™ <i>Micrococcus luteus</i> ATCC ® 4698™
89103	CultiControl™ <i>Moraxella (Branhamella) catarrhalis</i> ATCC ® 25238™
89104	CultiControl™ <i>Neisseria gonorrhoeae</i> ATCC ® 49226™
89105	CultiControl™ <i>Proteus mirabilis</i> ATCC ® 35659™
89106	CultiControl™ <i>Proteus mirabilis</i> ATCC ® 43071™
89107	CultiControl™ <i>Proteus vulgaris</i> ATCC ® 6380™
89108	CultiControl™ <i>Pseudomonas aeruginosa</i> ATCC ® 10145™
89109	CultiControl™ <i>Pseudomonas aeruginosa</i> ATCC ® 15442™
89110	CultiControl™ <i>Pseudomonas fluorescens</i> ATCC ® 13525™
89111	CultiControl™ <i>Bacteroides ovatus</i> ATCC ® 8483™
89112	CultiControl™ <i>Clostridium histolyticum</i> ATCC ® 19401™
89113	CultiControl™ <i>Bacteroides fragilis</i> ATCC ® 23745™
89114	CultiControl™ <i>Actinomyces odontolyticus</i> ATCC ® 17929™
89115	CultiControl™ <i>Enterococcus faecalis</i> ATCC ® 33186™
89116	CultiControl™ <i>Staphylococcus aureus</i> subsp. <i>aureus</i> ATCC ® 33591™
89117	CultiControl™ <i>Enterococcus faecium</i> ATCC ® 51559™
89118	CultiControl™ <i>Fusobacterium nucleatum</i> ATCC ® 25586™
89119	CultiControl™ <i>Aeromonas hydrophila</i> ATCC ® 7966™
89120	CultiControl™ <i>Haemophilus influenzae</i> ATCC ® 10211™
89121	CultiControl™ <i>Serratia marcescens</i> ATCC ® 8100™
89122	CultiControl™ <i>Neisseria gonorrhoeae</i> ATCC ® 49981™
89123	CultiControl™ <i>Haemophilus haemolyticus</i> ATCC ® 33390™
89124	CultiControl™ <i>Haemophilus influenzae</i> ATCC ® 33533™
89125	CultiControl™ <i>Providencia stuartii</i> ATCC ® 33672™
89126	CultiControl™ <i>Staphylococcus haemolyticus</i> ATCC ® 29970™
89127	CultiControl™ <i>Streptococcus anginosus</i> ATCC ® 33397™
89128	CultiControl™ <i>Streptococcus dysgalactiae</i> subsp. <i>equisimilis</i> ATCC ® 12388™
89129	CultiControl™ <i>Streptococcus mitis</i> ATCC ® 6249™
89130	CultiControl™ <i>Streptococcus pyogenes</i> ATCC ® 49399™
89131	CultiControl™ <i>Streptococcus salivarius</i> ATCC® 13419™
89132	CultiControl™ <i>Salmonella enterica</i> subsp. <i>enterica</i> serovar <i>Abony</i> NCTC 6017
89133	CultiControl™ <i>Staphylococcus xylosus</i> ATCC ® 29971™
89135	CultiControl™ <i>Propionibacterium acnes</i> ATCC® 11827™
89136	CultiControl™ <i>Haemophilus influenzae</i> NCTC 8468
89137	CultiControl™ <i>Staphylococcus aureus</i> subsp. <i>aureus</i> ATCC ® 19095™
89138	CultiControl™ <i>Cronobacter sakazakii</i> ATCC ® 29544™
89139	CultiControl™ <i>Bordetella bronchiseptica</i> ATCC ® 4617™
89140	CultiControl™ <i>Trichophyton mentagrophytes</i> ATCC ® 9533™

PRODOTTI CE DI LIBERA VENDITA / FREE SALE CE PRODUCTS

Rev. 31.0 del 08.01.2016

89141	CultiControl™ Acinetobacter baumannii ATCC ® BAA-747™
89144	CultiControl™ Vibrio alginolyticus ATCC ® 17749™
89145	CultiControl™ Campylobacter jejuni subsp. jejuni ATCC ® 33560™
89146	CultiControl™ Citrobacter freundii ATCC ® 43864™
89147	CultiControl™ Burkholderia cepacia ATCC ® 25416™
89148	CultiControl™ Listeria monocytogenes ATCC ® 35152™
89149	CultiControl™ Stenotrophomonas maltophilia ATCC® 13637™
89151	CultiControl™ Legionella pneumophila subsp. fraseri ATCC ® 33156™
89152	CultiControl™ Enterococcus faecium ATCC ® 6057™
89154	CultiControl™ Salmonella enterica subsp. arizonae ATCC ® 13314™
89156	CultiControl™ Enterobacter aerogenes ATCC ® 13048™
89160	CultiControl™ Haemophilus influenzae ATCC ® 19418™
89163	CultiControl™ Escherichia coli ATCC ® 35218™
89164	CultiControl™ Neisseria meningitidis ATCC ® 13090™
89165	CultiControl™ Peptostreptococcus anaerobius ATCC ® 27337™
89170	CultiControl™ Staphylococcus aureus subsp. aureus ATCC ® BAA-44™
89171	CultiControl™ Enterococcus faecium ATCC ® 19434™
89172	CultiControl™ Enterococcus faecium ATCC ® BAA-2319™
89173	CultiControl™ Enterococcus faecalis ATCC ® 51299™
89174	CultiControl™ Acinetobacter baumannii ATCC ® 19606™
89175	CultiControl™ Streptococcus pneumoniae ATCC ® 700671™
89176	CultiControl™ Haemophilus influenzae ATCC ® 33391™
89177	CultiControl™ Candida albicans ATCC ® 18804™
89178	CultiControl™ Candida albicans ATCC ® 64124™
9001	NALIDIXIC ACID NA 30 µg 250 Discs
9001/1	NALIDIXIC ACID NA 30 µg 50 Discs
9002	Oxolinic acid OA 2 µg 250 Discs
9002/1	Oxolinic acid OA 2 µg 50 Discs
9003	PIPEMIDIC ACID PI 20 µg 250 Discs
9003/1	PIPEMIDIC ACID PI 20 µg 50 Discs
9004	AMIKACIN AK 30 µg 250 Discs
9004/1	AMIKACIN AK 30 µg 50 Discs
9005	AMOXICILLIN AML 30 µg 250 Discs
9005/1	AMOXICILLIN AML 30 µg 50 Discs
9006	AMPICILLIN AMP 10 µg 250 Discs
9006/1	AMPICILLIN AMP 10 µg 50 Discs
9007	AZLOCILLIN AZL 75 µg 250 Discs
9007/1	AZLOCILLIN AZL 75 µg 50 Discs
9008	AZTREONAM ATM 30 µg 250 Discs
9008/1	AZTREONAM ATM 30 µg 50 Discs
9009	CARBENICILLIN CAR 100 µg 250 Discs
9009/1	CARBENICILLIN CAR 100 µg 50 Discs
9010	CEFACLOR CEC 30 µg 250 Discs
9010/1	CEFACLOR CEC 30 µg 50 Discs
9011	CEPHALEXIN CL 30 µg 250 Discs
9011/1	CEPHALEXIN CL 30 µg 50 Discs
9013	CEPHALOTHIN KF 30 µg 250 Discs
9013/1	CEPHALOTHIN KF 30 µg 50 Discs
9014	CEFAMANDOLE MA 30 µg 250 Discs
9014/1	CEFAMANDOLE MA 30 µg 50 Discs
9015	CEFAZOLIN KZ 30 µg 250 Discs
9015/1	CEFAZOLIN KZ 30 µg 50 Discs
9016	CEFOPERAZONE CFP 30 µg 250 Discs
9016/1	CEFOPERAZONE CFP 30 µg 50 Discs
9017	CEFOTAXIME CTX 30 µg 250 Discs
9017/1	CEFOTAXIME CTX 30 µg 50 Discs
9018	CEFOXITIN FOX 30 µg 250 Discs

9018/1	CEFOXITIN FOX 30 µg 50 Discs
9019	CEFTAZIDIME CAZ 30 µg 250 Discs
9019/1	CEFTAZIDIME CAZ 30 µg 50 Discs
9020	CEFTRIAZONE CRO 30 µg 250 Discs
9020/1	CEFTRIAZONE CRO 30 µg 50 Discs
9021	CEFUROXIME CXM 30 µg 250 Discs
9021/1	CEFUROXIME CXM 30 µg 50 Discs
9022	CHLORAMPHENICOL C 30 µg 250 Discs
9022/1	CHLORAMPHENICOL C 30 µg 50 Discs
9023	COLISTIN SULFATE CS 10 µg 250 Discs
9023/1	COLISTIN SULFATE CS 10 µg 50 Discs
9024	ERYTHROMYCIN E 15 µg 250 Discs
9024/1	ERYTHROMYCIN E 15 µg 50 Discs
9025	FOSFOMYCIN FOS 50 µg 250 Discs
9025/1	FOSFOMYCIN FOS 50 µg 50 Discs
9026	GENTAMICIN CN 10 µg 250 Discs
9026/1	GENTAMICIN CN 10 µg 50 Discs
9027	KANAMYCIN K 30 µg 250 Discs
9027/1	KANAMYCIN K 30 µg 50 Discs
9028	LINCOMYCIN MY 2 µg 250 Discs
9028/1	LINCOMYCIN MY 2 µg 50 Discs
9029	METHICILLIN MET 5 µg 250 Discs
9029/1	METHICILLIN MET 5 µg 50 Discs
9030	MINOCYCLINE MN 30 µg 250 Discs
9030/1	MINOCYCLINE MN 30 µg 50 Discs
9031	AMPICILLIN-SULBACTAM AMS 20 µg 250 Discs
9031/1	AMPICILLIN-SULBACTAM AMS 20µg 50 DISCS
9032	NEOMYCIN N 30 µg 250 Discs
9032/1	NEOMYCIN N 30 µg 50 Discs
9033	NETILMICIN NET 30 µg 250 Discs
9033/1	NETILMICIN NET 30 µg 50 Discs
9034	NITROFURANTOIN F 300 µg 250 Discs
9034/1	NITROFURANTOIN F 300 µg 50 Discs
9035	NORFLOXACIN NOR 10µg 250 Discs
9035/1	NORFLOXACIN NOR 10 µg 50 Discs
9036	OXACILLIN OX 1µg 250 Discs
9036/1	OXACILLIN OX 1 µg 50 Discs
9037	PENICILLIN G P 10 IU 250 Discs
9037/1	PENICILLIN G P 10 IU 50 Discs
9038	PIPERACILLIN PRL 100 µg 250 Discs
9038/1	PIPERACILLIN PRL 100 µg 50 Discs
9039	RIFAMPICIN RD 30 µg 250 Discs
9039/1	RIFAMPICIN RD 30 µg 50 Discs
9040	STREPTOMYCIN S 10 µg 250 Discs
9040/1	STREPTOMYCIN S 10 µg 50 Discs
9041	SULFAPURAZOLE SF 300 µg 250 Discs
9041/1	SULFAPURAZOLE SF 300 µg 50 Discs
9042	TRIMETHOPRIM-SULFAMETHOXAZOLE SXT 25 µg 250 Discs
9042/1	TRIMETHOPRIM-SULFAMETHOXAZOLE SXT 25 µg 50 Discs
9043	TETRACYCLINE TE 30 µg 250 Discs
9043/1	TETRACYCLINE TE 30 µg 50 Discs
9044	TOBRAMYCIN TOB 10 µg 250 Discs
9044/1	TOBRAMYCIN TOB 10 µg 50 Discs
9045	VANCOMYCIN VA 30 µg 250 Discs
9045/1	VANCOMYCIN VA 30 µg 50 Discs
9046	SISOMYCIN SIS 30µg 250 Discs
9046/1	SISOMYCIN SIS 30 µg 50 Discs
9047	CLINDAMYCIN CD 2 µg 250 Discs
9047/1	CLINDAMYCIN CD 2 µg 50 Discs

PRODOTTI CE DI LIBERA VENDITA / FREE SALE CE PRODUCTS

Rev. 31.0 del 08.01.2016

9048	AMOXICILLIN-CLAVULANIC ACID AUG 30 µg 250 Discs
9048/1	AMOXICILLIN-CLAVULANIC ACID AUG 30 µg 50 Discs
9049	FUSIDIC ACID FC 10 µg 250 Discs
9049/1	FUSIDIC ACID FC 10 µg 50 Discs
9050	TEICOPLANIN TEC 30 µg 250 Discs
9050/1	TEICOPLANIN TEC 30 µg 50 Discs
9051	BACITRACIN BA 10 IU 250 Discs
9051/1	BACITRACIN BA 10 IU 50 Discs
9052	CEFADROXIL CDX 30 µg 250 Discs
9052/1	CEFADROXIL CDX 30 µg 50 Discs
9053	CEFSULODIN CSD 30 µg 250 Discs
9053/1	CEFSULODIN CSD 30 µg 50 Discs
9054	CEFTIZOXIME CZX 30 µg 250 Discs
9054/1	CEFTIZOXIME CZX 30 µg 50 Discs
9055	CEPHRADINE CE 30 µg 250 Discs
9055/1	CEPHRADINE CE 30 µg 50 Discs
9056	CIPROFLOXACIN CIP 5 µg 250 Discs
9056/1	CIPROFLOXACIN CIP 5 µg 50 Discs
9057	CINOXACIN CIN 100 µg 250 Discs
9057/1	CINOXACIN CIN 100 µg 50 Discs
9058	CLOXACILLIN CX 5 µg 250 Discs
9058/1	CLOXACILLIN CX 5 µg 50 Discs
9059	DOXYCYCLINE DXT 30 µg 250 Discs
9059/1	DOXYCYCLINE DXT 30 µg 50 Discs
9060	ROXITROMYCIN RXT 15 µg 250 Discs
9060/1	ROXITROMYCIN RXT 15 µg 50 Discs
9061	ERTAPENEM ETP 10 µg 250 Discs
9061/1	ERTAPENEM ETP 10 µg 50 Discs
9062	MEZLOCILLIN MEZ 75 µg 250 Discs
9062/1	MEZLOCILLIN MEZ 75 µg 50 Discs
9063	NOVOBIOCIN NO 30 µg 250 Discs
9063/1	NOVOBIOCIN NO 30 µg 50 Discs
9064	CEFPODOXIME PX 10 µg 250 Discs
9064/1	CEFPODOXIME PX 10 µg 50 Discs
9065	OXYTETRACYCLINE OT 30 µg 250 Discs
9065/1	OXYTETRACYCLINE OT 30 µg 50 Discs
9066	POLYMYXIN B PB 100 IU 250 Discs
9066/1	POLYMYXIN B PB 100 IU 50 Discs
9067	SPECTINOMYCIN SPC 100 µg 250 Discs
9067/1	SPECTINOMYCIN SPC 100 µg 50 Discs
9068	MEROPENEM MRP 10 µg 250 Discs
9068/1	MEROPENEM MRP 10 µg 50 Discs
9069	FLUCONAZOLE FLU 100 µg 250 Discs
9069/1	FLUCONAZOLE FLU 100 µg 50 Discs
9070	TICARCILLIN TC 75 µg 250 Discs
9070/1	TICARCILLIN TC 75 µg 50 Discs
9071	AMPHOTERICIN B AMB 20 µg 250 Discs
9071/1	AMPHOTERICIN B AMB 20 µg 50 Discs
9072	ECONAZOLE ECN 10 µg 250 Discs
9072/1	ECONAZOLE ECN 10 µg 50 Discs
9073	FLUCYTOSINE AFY 1 µg 250 Discs
9073/1	FLUCYTOSINE AFY 1 µg 50 Discs
9074	GRISEOFULVIN AGF 10 µg 250 Discs
9074/1	GRISEOFULVIN AGF 10 µg 50 Discs
9075	KETOCONAZOLE KCA 10 µg 250 Discs
9075/1	KETOCONAZOLE KCA 10 µg 50 Discs
9076	METRONIDAZOLE MTZ 5 µg 250 Discs
9076/1	METRONIDAZOLE MTZ 5 µg 50 Discs
9077	MICONAZOLE MCL 10 µg 250 Discs
9077/1	MICONAZOLE MCL 10 µg 50 Discs

9078	NYSTATIN NY 100 IU 250 Discs
9078/1	NYSTATIN NY 100 IU 50 Discs
9079	IMIPENEM IMI 10 µg 250 Discs
9079/1	IMIPENEM IMI 10 µg 50 Discs
9080	OFLOXACIN OFX 5 µg 250 Discs
9080/1	OFLOXACIN OFX 5 µg 50 Discs
9081	CEFOTETAN CTT 30 µg 250 Discs
9081/1	CEFOTETAN CTT 30 µg 50 Discs
9082	TYLOSIN TY 30 µg 250 Discs
9082/1	TYLOSIN TY 30 µg 50 Discs
9083	TRIMETHOPRIM TM 2.5 µg 250 Discs
9083/1	TRIMETHOPRIM TM 2.5 µg 50 Discs
9084	SULFAMETHOXAZOLE SMX 50 µg 250 Discs
9084/1	SULFAMETHOXAZOLE SMX 50 µg 50 Discs
9085	Imipenem + Phenylboronic acid IMI + BO 250 Discs
9085/1	Imipenem + Phenylboronic acid IMI + BO 50 Discs
9086	Imipenem + Cloxacillin IMI + CL 250 Discs
9086/1	Imipenem + Cloxacillin IMI + CL 50 Discs
9087	EDTA ED 250 Discs
9087/1	EDTA ED 50 Discs
9088	SPIRAMYCIN SP 100 µg 250 Discs
9088/1	SPIRAMYCIN SP 100 µg 50 Discs
9089	CEFIXIME CFM 5 µg 250 Discs
9089/1	CEFIXIME CFM 5 µg 50 Discs
9090	Daptomycin DAP 30 µg 250 Discs
9090/1	Daptomycin DAP 30 µg 50 Discs
9091	PEFLOXACIN PEF 5 µg 250 Discs
9091/1	PEFLOXACIN PEF 5 µg 50 Discs
9093	DICLOXACILLIN DCX 1 µg 250 Discs
9093/1	DICLOXACILLIN DCX 1 µg 50 Discs
9094	TIAMULIN T 30 µg 250 Discs
9094/1	TIAMULIN T 30 µg 50 Discs
9095	IMIPENEM/CILASTATIN IMC 20 µg 250 Discs
9095/1	IMIPENEM/CILASTATIN IMC 20 µg 50 Discs
9096	TICARCILLIN-CLAVULINIC ACID TTC 85 µg 250 Discs
9096/1	TICARCILLIN-CLAVULINIC ACID TTC 85 µg 50 Discs
9097	CLOTRIMAZOLE CLO 50 µg 250 Discs
9097/1	CLOTRIMAZOLE CLO 50 µg 50 Discs
9098	CLARITHROMYCIN CLR 15 µg 250 Discs
9098/1	CLARITHROMYCIN CLR 15 µg 50 Discs
9099	FURAZOLIDON FR 50 µg 250 Discs
9099/1	FURAZOLIDON FR 50 µg 50 Discs
9100	PIPERACILLIN-TAZOBACTAM TZP 110 µg 250 Discs
9100/1	PIPERACILLIN-TAZOBACTAM TZP 110 µg 50 Discs
9101	CEFTIBUTEN CTB 30 µg 250 Discs
9101/1	CEFTIBUTEN CTB 30 µg 50 Discs
9102	LEVOFLOXACIN LEV 5 µg 250 Discs
9102/1	LEVOFLOXACIN LEV 5 µg 50 Discs
9103	MOXIFLOXACIN MOX 5 µg 250 Discs
9103/1	MOXIFLOXACIN MOX 5 µg 50 Discs
9104	CEFEPIME FEP 30 µg 250 Discs
9104/1	CEFEPIME FEP 30 µg 50 Discs
9105	AZITHROMYCIN AZM 15 µg 250 Discs
9105/1	AZITHROMYCIN AZM 15 µg 50 Discs
9106	MYOKAMYCIN MK 15 µg 250 Discs
9106/1	MYOKAMYCIN MK 15 µg 50 Discs
9107	ITRACONAZOLE ITC 50 µg 250 Discs
9107/1	ITRACONAZOLE ITC 50 µg 50 Discs
9108	CEFOPERAZONE CFP 75 µg 250 Discs
9108/1	CEFOPERAZONE CFP 75 µg 50 Discs

PRODOTTI CE DI LIBERA VENDITA / FREE SALE CE PRODUCTS

Rev. 31.0 del 08.01.2016

9109	FOSFOMYCIN (includes G-6-p) FOS 200 µg 250 Discs
9109/1	FOSFOMYCIN (includes G-6-p) FOS 200 µg 50 Discs
9110	TRIMETHOPRIM TM 5 µg 250 Discs
9110/1	TRIMETHOPRIM TM 5 µg 50 Discs
9111	FUSIDIC ACID FC 30 µg 250 Discs
9111/1	FUSIDIC ACID FC 30 µg 50 Discs
9112	CEFPROZIL CPR 30 µg 250 Discs
9112/1	CEFPROZIL CPR 30 µg 50 Discs
9113	LOMEFLOXACIN LOM 10 µg 250 Discs
9113/1	LOMEFLOXACIN LOM 10 µg 50 Discs
9115	AMPICILLIN AMP 2 µg 250 Discs
9115/1	AMPICILLIN AMP 2 µg 50 Discs
9116	LINCOMYCIN MY 15 µg 250 Discs
9116/1	LINCOMYCIN MY 15 µg 50 Discs
9117	NOVOBIOCIN NO 5 µg 250 Discs
9117/1	NOVOBIOCIN NO 5 µg 50 Discs
9118	RIFAMPICIN RD 5 µg 250 Discs
9118/1	RIFAMPICIN RD 5µg 50 Discs
9119	METRONIDAZOLE MTZ 50 µg 250 Discs
9119/1	METRONIDAZOLE MTZ 50 µg 50 Discs
9120	POLYMYXIN B PB 300 UI 250 Discs
9120/1	POLYMYXIN B PB 300 UI 50 Discs
9121	FOSFOMYCIN (includes G-6-p) FOS 100 µg 250 Discs
9121/1	FOSFOMYCIN (includes G-6-p) FOS 100 µg 50 Discs
9122	AMPLICLOX (Ampicillin-Cloxacillin) ACL 30 µg 250 Discs
9122/1	AMPLICLOX (Ampicillin-Cloxacillin) ACL 30 µg 50 Discs
9124	GENTAMICIN CN 120 µg 250 Discs
9124/1	GENTAMICIN CN 120 µg 50 Discs
9125	GENTAMICIN CN 30 µg 250 Discs
9125/1	GENTAMICIN CN 30 µg 50 Discs
9126	SULFONAMIDE S3 300 µg 250 Discs
9126/1	SULFONAMIDE S3 300 µg 50 Discs
9127	PENICILLIN G P 2 IU 250 Discs
9127/1	PENICILLIN G P 2 IU 50 Discs
9128	CHLORAMPHENICOL C 10 µg 250 Discs
9128/1	CHLORAMPHENICOL C 10 µg 50 Discs
9129	SULBACTAM SU 20µg 250 Discs
9129/1	SULBACTAM SU 20µg 50 Discs
9130	PENICILLIN G P 1 IU 250 Discs
9130/1	PENICILLIN G P 1 IU 50 Discs
9131	SODIUM FUSIDATE FC 30 250 Discs
9132	SULFAPRIM SXT 50 µg 250 Discs
9132/1	SULFAPRIM SXT 50 µg 50 Discs
9133	AMOXICILLIN AML 10 µg 250 Discs
9133/1	AMOXICILLIN AML 10 µg 50 Discs
9134	CEFOTAXIME CTX 75 µg 250 Discs
9134/1	CEFOTAXIME CTX 75 µg 50 Discs
9135	OXACILLIN OX 5µg 250 Discs
9135/1	OXACILLIN OX 5µg 50 Discs
9136	LINEZOLID LNZ 30µg 250 Discs
9136/1	LINEZOLID LNZ 30µg 50 Discs
9137	AMPHOTERICIN B AMB 10 µg 250 Discs
9137/1	AMPHOTERICIN B AMB 10 µg 50 Discs
9139	ITRACONAZOLE ITC 8 µg 250 Discs
9139/1	ITRACONAZOLE ITC 8 µg 50 Discs
9140	KETOCONAZOLE KCA 15 µg 250 Discs
9140/1	KETOCONAZOLE KCA 15 µg 50 Discs
9141	COLISTIN SULFATE CS 30 UI 250 Discs
9141/1	COLISTIN SULFATE CS 30 UI 50 Discs
9142	STREPTOMYCIN S 300 µg 250 Discs

9142/1	STREPTOMYCIN S 300 µg 50 Discs
9143	CEFEPIME+CLAVULANIC ACID FEL 40 µg 250 Discs
9144	Cefoxitin+Cloxacillin FOC 230 µg 250 Discs
9144/1	Cefoxitin+Cloxacillin FOC 230 µg 50 Discs
9145	CEFTAZIDIME+CLAVULANIC ACID CAL 40 µg 250 Discs
9145/1	CEFTAZIDIME+CLAVULANIC ACID CAL 40 µg 50 Discs
9146	CLINDAMYCIN CD 10 µg 250 Discs
9146/1	CLINDAMYCIN CD 10 µg 50 Discs
9147	TIGECYCLIN TGC 15 µg 250 Discs
9147/1	TIGECYCLIN TGC 15 µg 50 Discs
9148	FLUCYTOSINE AFY 10 µg 250 Discs
9148/1	FLUCYTOSINE AFY 10 µg 50 Discs
9150	SULFADIAZINE SUZ 300 ug 250 Discs
9150/1	SULFADIAZINE SUZ 300 ug 50 Discs
9151	AMOXICILLIN AML 2 µg 250 Discs
9151/1	AMOXICILLIN AML 2 µg 50 Discs
9152	CEFOTAXIME CTX 5 µg 250 Discs
9152/1	CEFOTAXIME CTX 5 µg 50 Discs
9153	CEFTAZIDIME CAZ 10 µg 250 Discs
9153/1	CEFTAZIDIME CAZ 10 µg 50 Discs
9154	DORIPENEM DOR 10 µg 250 Discs
9154/1	DORIPENEM DOR 10 µg 50 Discs
9155	LINEZOLID LNZ 10 µg 250 Discs
9155/1	LINEZOLID LNZ 10 µg 50 Discs
9156	MECILLINAM MEC 10 µg 250 Discs
9156/1	MECILLINAM MEC 10 µg 50 Discs
9157	MUPIROCIN MUP 200 µg 250 Discs
9157/1	MUPIROCIN MUP 200 µg 50 Discs
9158	NITROFURANTOIN F 100 µg 250 Discs
9158/1	NITROFURANTOIN F 100 µg 50 Discs
9159	PIPERACILLIN PRL 30 µg 250 Discs
9159/1	PIPERACILLIN PRL 30 µg 50 Discs
9160	PIPERACILLIN-TAZOBACTAM TZP 36 µg 250 Discs
9160/1	PIPERACILLIN-TAZOBACTAM TZP 36 µg 50 Discs
9161	QUINUPRISTIN-DALFOPRISTIN QDA 15 µg 250 Discs
9161/1	QUINUPRISTIN-DALFOPRISTIN QDA 15 µg 50 Discs
9162	STREPTOMYCIN S 300 µg 250 Discs
9162/1	STREPTOMYCIN S 300 µg 50 Discs
9163	TOBRAMYCIN TOB 30 ug 250 Discs
9163/1	TOBRAMYCIN TOB 30 ug 50 Discs
9164	VANCOMYCIN VA 5 µg 250 Discs
9164/1	VANCOMYCIN VA 5 µg 50 Discs
9165	CASPOFUNGIN CAS 5 µg 250 Discs
9165/1	CASPOFUNGIN CAS 5 µg 50 Discs
9166	FLUCONAZOLE FLU 25 µg 250 Discs
9166/1	FLUCONAZOLE FLU 25 µg 50 Discs
9167	POSACONAZOLE POS 5 µg 250 Discs
9167/1	POSACONAZOLE POS 5 µg 50 Discs
9168	VORICONAZOLE VO 1 µg 250 Discs
9168/1	VORICONAZOLE VO 1 µg 50 Discs
9169	GATIFLOXACIN GAT 5 µg 250 Discs
9169/1	GATIFLOXACIN GAT 5 µg 50 Discs
9170	NETILMICIN NET 10 µg 250 Discs
9170/1	NETILMICIN NET 10 µg 50 Discs
9171	PHENOXYMETHYLPENICILLIN PV 10 µg 250 Discs
9171/1	PHENOXYMETHYLPENICILLIN PV 10 µg 50 Discs
9172	TELITHROMYCIN TEL 15 µg 250 Discs
9172/1	TELITHROMYCIN TEL 15 µg 50 Discs
9173	LORACARBEF LOR 30 µg 250 Discs
9173/1	LORACARBEF LOR 30 µg 50 Discs

PRODOTTI CE DI LIBERA VENDITA / FREE SALE CE PRODUCTS

Rev. 31.0 del 08.01.2016

9174	NAFCILLIN NAF 1 µg 250 Discs
9174/1	NAFCILLIN NAF 1 µg 50 Discs
9175	MEROPENEM+CLOXACILLIN MR+CL 250 Discs
9175/1	MEROPENEM+CLOXACILLIN MR+CL 50 Discs
9176	Meropenem + Phenylboronic acid MR + BO 250 Discs
9176/1	Meropenem + Phenylboronic acid MR + BO 50 Discs
9177	MEROPENEM+DIPICOLINIC ACID MR+DP 250 Discs
9177/1	MEROPENEM+DIPICOLINIC ACID MR+DP 50 Discs
9178	Meropenem + EDTA MR + ED 250 Discs
9178/1	Meropenem + EDTA MR + ED 50 Discs
9179	AMOXICILLIN AML 25 µg 250 Discs
9179/1	AMOXICILLIN AML 25 µg 50 Discs
9181	NITROFURANTOIN F 50 µg 250 Discs
9181/1	NITROFURANTOIN F 50 µg 50 Discs
9182	CEFOTAXIME+CLAVULANIC ACID CTL 40 µg 250 Discs
9182/1	CEFOTAXIME+CLAVULANIC ACID CTL 40 µg 50 Discs
9183	Imipenem + EDTA IMI + ED 250 Discs
9183/1	Imipenem + EDTA IMI + ED 50 Discs
9184	COLISTIN SULFATE CS 25 µg 250 Discs
9184/1	COLISTIN SULFATE CS 25 µg 50 Discs
9185	CEFPIROME CR 30 µg 250 Discs
9185/1	CEFPIROME CR 30 µg 50 Discs
9186	TEMOCILLIN TMO 30 µg 250 Discs
9186/1	TEMOCILLIN TMO 30 µg 50 Discs
9187	Sulfamethoxazole SMX 100 µg 250 Discs
9187/1	Sulfamethoxazole SMX 100 µg 50 Discs
9188	Metronidazole MTZ 10 µg 250 Discs
9188/1	Metronidazole MTZ 10 µg 50 Discs
9189	MUPIROCIN MUP 5 µg 250 Discs
9190	CEFPODOXIME+CLAVULANIC ACID PXL 11 µg 250 Discs
9190/1	CEFPODOXIME+CLAVULANIC ACID PXL 11 µg 50 Discs
9191	AMOXICILLIN-CLAVULANIC ACID AUG 3 µg 250 Discs
9191/1	AMOXICILLIN-CLAVULANIC ACID AUG 3 µg 50 Discs
9192	ROKITAMYCIN ROK 30 µg 250 Discs
9192/1	ROKITAMYCIN ROK 30 µg 50 Discs
9193	Phenylboronic acid BO 250 Discs
9193/1	Phenylboronic acid BO 50 Discs
9194	DIPICOLINIC ACID DP 250 Discs
9194/1	DIPICOLINIC ACID DP 50 Discs
9195	CEFTAROLINE CPT 5 µg 250 Discs
9195/1	CEFTAROLINE CPT 5 µg 50 Discs
9198	CEFTAROLINE CPT 30 µg 250 Discs
9198/1	CEFTAROLINE CPT 30 µg 50 Discs
9199	ERTAPENEM+CLOXACILLIN ET+CL 250 Discs
9199/1	ERTAPENEM+CLOXACILLIN ET+CL 50 Discs
9201	ORITAVANCIN ORI 25 µg 250 Discs
9201/1	ORITAVANCIN ORI 25 µg 50 Discs
9202	Ertapenem+Phenylboronic acid ET+BO 250 Discs
9202/1	Ertapenem+Phenylboronic acid ET+BO 50 Discs
9203	Cefotaxime+Clavulanic acid+Cloxacillin CTLC 250 Discs
9203/1	Cefotaxime+Clavulanic acid+Cloxacillin CTLC 50 Discs
9204	Ceftazidime+Clavulanic acid+Cloxacillin CALC 250 Discs
9204/1	Ceftazidime+Clavulanic acid+Cloxacillin CALC 50 Discs
9205	Ceftazime-avibactam CZA 50 µg 250 Discs
9205/1	Ceftazime-avibactam CZA 50 µg 50 Discs
9206	Ceftazime-avibactam CZA 14 µg 250 Discs
9206/1	Ceftazime-avibactam CZA 14 µg 50 Discs
9207	Ulifloxacin ULI 5 µg 250 Discs
9207/1	Ulifloxacin ULI 5 µg 50 Discs

91200	DISC DISPENSER 8 CARTRIDGES
91203	DISC DISPENSER 6 CARTRIDGES
92000	AMOX*/SULB 2/1 AXS 0.016-256* 30 MIC Tests
920000	AMOX*/SULB 2/1 AXS 0.016-256* 100 MIC Tests
92001	RIFAMPICIN RD 0.002-32 30 MIC Tests
920010	RIFAMPICIN RD 0.002-32 100 MIC Tests
920011	RIFAMPICIN RD 0.002-32 10 MIC Tests
92002	FUSIDIC ACID FU 0.016-256 30 MIC Tests
920020	FUSIDIC ACID FU 0.016-256 100 MIC Tests
920021	FUSIDIC ACID FU 0.016-256 10 MIC Tests
92003	AMPICILLIN AMP 0.016-256 30 MIC Tests
920030	AMPICILLIN AMP 0.016-256 100 MIC Tests
920031	AMPICILLIN AMP 0.016-256 10 MIC Tests
92004	POLYMYXIN B PB 0.064-1024 30 MIC Tests
920040	POLYMYXIN B PB 0.064-1024 100 MIC Tests
920041	POLYMYXIN B PB 0.064-1024 10 MIC Tests
92005	CEFPODOXIME PX 0.016-256 30 MIC Tests
920050	CEFPODOXIME PX 0.016-256 100 MIC Tests
920051	CEFPODOXIME PX 0.016-256 10 MIC Tests
92006	CEFOTAXIME CTX 0.016-256 30 MIC Tests
920060	CEFOTAXIME CTX 0.016-256 100 MIC Tests
920061	CEFOTAXIME CTX 0.016-256 10 MIC Tests
92007	CEFOTAXIME CTX 0.002-32 30 MIC Tests
920070	CEFOTAXIME CTX 0.002-32 100 MIC Tests
920071	CEFOTAXIME CTX 0.002-32 10 MIC Tests
92008	CEFPIROME CR 0.016-256 30 MIC Tests
920080	CEFPIROME CR 0.016-256 100 MIC Tests
920081	CEFPIROME CR 0.016-256 10 MIC Tests
92009	GENTAMICIN CN 0.016-256 30 MIC Tests
920090	GENTAMICIN CN 0.016-256 100 MIC Tests
920091	GENTAMICIN CN 0.016-256 10 MIC Tests
92010	GENTAMICIN CN 0.064-1024 30 MIC Tests
920100	GENTAMICIN CN 0.064-1024 100 MIC Tests
920101	GENTAMICIN CN 0.064-1024 10 MIC Tests
92011	GATIFLOXACIN GAT 0.002-32 30 MIC Tests
920110	GATIFLOXACIN GAT 0.002-32 100 MIC Tests
920111	GATIFLOXACIN GAT 0.002-32 10 MIC Tests
92012	TEICOPLANIN TEC 0.016-256 30 MIC Tests
920120	TEICOPLANIN TEC 0.016-256 100 MIC Tests
920121	TEICOPLANIN TEC 0.016-256 10 MIC Tests
92013	ENROFLOXACIN ENR 0.002-32 30 MIC Tests
920130	ENROFLOXACIN ENR 0.002-32 100 MIC Tests
920131	ENROFLOXACIN ENR 0.002-32 10 MIC Tests
92014	SPECTINOMYCIN SPC 0.064-1024 30 MIC Tests
920140	SPECTINOMYCIN SPC 0.064-1024 100 MIC Tests
920141	SPECTINOMYCIN SPC 0.064-1024 10 MIC Tests
92015	OXACILLIN OX 0.016-256 30 MIC Tests
920150	OXACILLIN OX 0.016-256 100 MIC Tests
920151	OXACILLIN OX 0.016-256 10 MIC Tests
92016	CEFTIZOXIME CZX 0.016-256 30 MIC Tests
920160	CEFTIZOXIME CZX 0.016-256 100 MIC Tests
920161	CEFTIZOXIME CZX 0.016-256 10 MIC Tests
92017	MECILLINAM MEC 0.002-32 30 MIC Tests
920170	MECILLINAM MEC 0.002-32 100 MIC Tests
920171	MECILLINAM MEC 0.002-32 10 MIC Tests
92018	AMIKACIN AK 0.016-256 30 MIC Tests
920180	AMIKACIN AK 0.016-256 100 MIC Tests
920181	AMIKACIN AK 0.016-256 10 MIC Tests
92019	BACITRACIN BA 0.016-256 30 MIC Tests
920190	BACITRACIN BA 0.016-256 100 MIC Tests

PRODOTTI CE DI LIBERA VENDITA / FREE SALE CE PRODUCTS

Rev. 31.0 del 08.01.2016

920191	BACITRACIN BA 0.016-256 10 MIC Tests
92020	CEFOTETAN CTT 0.016-256 30 MIC Tests
920200	CEFOTETAN CTT 0.016-256 100 MIC Tests
920201	CEFOTETAN CTT 0.016-256 10 MIC Tests
92021	AMOXICILLIN AML 0.016-256 30 Tests
920210	AMOXICILLIN AML 0.016-256 100 MIC Tests
920211	AMOXICILLIN AML 0.016-256 10 MIC Tests
92022	NITROFURANTOIN F 0.032-512 30 MIC Tests
920220	NITROFURANTOIN F 0.032-512 100 MIC Tests
920221	NITROFURANTOIN F 0.032-512 10 MIC Tests
92023	CEFOB*/SULB 2/1 CPS 0.016-256* 30 MIC Tests
920230	CEFOB*/SULB 2/1 CPS 0.016-256* 100 MIC Tests
920231	CEFOB*/SULB 2/1 CPS 0.016-256* 10 MIC Tests
92024	AMOX*/CLAV 2/1 AMG 0.016-256* 30 MIC Tests
920240	AMOX*/CLAV 2/1 AMG 0.016-256* 100 MIC Tests
920241	AMOX*/CLAV 2/1 AMG 0.016-256* 10 MIC Tests
92025	RIFAMPICIN RD 0.016-256 30 MIC Tests
920250	RIFAMPICIN RD 0.016-256 100 MIC Tests
920251	RIFAMPICIN RD 0.016-256 10 MIC Tests
92026	QUIN-DALFOPRIST QDA 0.002-32 30 MIC Tests
920260	QUIN-DALFOPRIST QDA 0.002-32 100 MIC Tests
920261	QUIN-DALFOPRIST QDA 0.002-32 10 MIC Tests
92027	AMPIC*/SULB 2/1 AMS 0.016-256* 30 MIC Tests
920270	AMPIC*/SULB 2/1 AMS 0.016-256* 100 MIC Tests
920271	AMPIC*/SULB 2/1 AMS 0.016-256* 10 MIC Tests
92028	SULBACTAM SUL 0.016-256 30 MIC Tests
920280	SULBACTAM SUL 0.016-256 100 MIC Tests
920281	SULBACTAM SUL 0.016-256 10 MIC Tests
92029	TEMOCILLIN TMO 0.064-1024 30 MIC Tests
920290	TEMOCILLIN TMO 0.064-1024 100 MIC Tests
920291	TEMOCILLIN TMO 0.064-1024 10 MIC Tests
92030	AZITHROMYCIN AZM 0.016-256 30 MIC Tests
920300	AZITHROMYCIN AZM 0.016-256 100 MIC Tests
920301	AZITHROMYCIN AZM 0.016-256 10 MIC Tests
92031	SULFAMETOXAZOLE SMX 0.064-1024 30 MIC Tests
920310	SULFAMETOXAZOLE SMX 0.064-1024 100 MIC Tests
920311	SULFAMETOXAZOLE SMX 0.064-1024 10 MIC Tests
92032	MINOCYCLINE MN 0.016-256 30 MIC Tests
920320	MINOCYCLINE MN 0.016-256 100 MIC Tests
920321	MINOCYCLINE MN 0.016-256 10 MIC Tests
92033	AZTREONAM ATM 0.016-256 30 MIC Tests
920330	AZTREONAM ATM 0.016-256 100 MIC Tests
920331	AZTREONAM ATM 0.016-256 10 MIC Tests
92034	KANAMYCIN K 0.016-256 30 MIC Tests
920340	KANAMYCIN K 0.016-256 100 MIC Tests
920341	KANAMYCIN K 0.016-256 10 MIC Tests
92035	GEMIFLOXACIN GEM 0.002-32 30 MIC Tests
920350	GEMIFLOXACIN GEM 0.002-32 100 MIC Tests
920351	GEMIFLOXACIN GEM 0.002-32 10 MIC Tests
92036	CEFACLOR CEC 0,016-256 30 MIC Tests
920360	CEFACLOR CEC 0,016-256 100 MIC Tests
920361	CEFACLOR CEC 0,016-256 10 MIC Tests
92037	TRIMETHOPRIM TM 0.002-32 30 MIC Tests
920370	TRIMETHOPRIM TM 0.002-32 100 MIC Tests
920371	TRIMETHOPRIM TM 0.002-32 10 MIC Tests
92038	MUPIROCIN MUP 0.064-1024 30 MIC Tests
920380	MUPIROCIN MUP 0.064-1024 100 MIC Tests
920381	MUPIROCIN MUP 0.064-1024 10 MIC Tests
92039	CEPHALOTHIN KF 0.016-256 30 MIC Tests
920390	CEPHALOTHIN KF 0.016-256 100 MIC Tests

920391	CEPHALOTHIN KF 0.016-256 10 MIC Tests
92040	DORIPENEM DOR 0.002-32 30 MIC Tests
920400	DORIPENEM DOR 0.002-32 100 MIC Tests
920401	DORIPENEM DOR 0.002-32 10 MIC Tests
92041	Pefloxacin PEF 0.016-256 mg/L 30 MIC Tests
920410	Pefloxacin PEF 0.016-256 mg/L 100 MIC Tests
920411	Pefloxacin PEF 0.016-256 mg/L 10 MIC Tests
92042	CEFTRIAZONE CRO 0.016-256 30 MIC Tests
920420	CEFTRIAZONE CRO 0.016-256 100 MIC Tests
920421	CEFTRIAZONE CRO 0.016-256 10 MIC Tests
92043	CEFTRIAZONE CRO 0.002-32 30 MIC Tests
920430	CEFTRIAZONE CRO 0.002-32 100 MIC Tests
920431	CEFTRIAZONE CRO 0.002-32 10 MIC Tests
92044	CLOXACILLIN CX 0.016-256 30 MIC Tests
920440	CLOXACILLIN CX 0.016-256 100 MIC Tests
920441	CLOXACILLIN CX 0.016-256 10 MIC Tests
92045	CIPROFLOXACIN CIP 0.002-32 30 MIC Tests
920450	CIPROFLOXACIN CIP 0.002-32 100 MIC Tests
920451	CIPROFLOXACIN CIP 0.002-32 10 MIC Tests
92046	SPIRAMYCIN SP 0.002-32 30 MIC Tests
920460	SPIRAMYCIN SP 0.002-32 100 MIC Tests
920461	SPIRAMYCIN SP 0.002-32 10 MIC Tests
92048	CLARITHROMYCIN CLR 0.016-256 30 MIC Tests
920480	CLARITHROMYCIN CLR 0.016-256 100 MIC Tests
920481	CLARITHROMYCIN CLR 0.016-256 10 MIC Tests
92049	CEFTAROLINE CPT 0.016-256 30 MIC Test
920490	CEFTAROLINE CPT 0.016-256 100 MIC Test
920491	CEFTAROLINE CPT 0.016-256 10 MIC Test
92050	FOSMIDOMYCIN FOM 0.016-256 30 MIC Tests
920500	FOSMIDOMYCIN FOM 0.016-256 100 MIC Tests
920501	FOSMIDOMYCIN FOM 0.016-256 10 MIC Tests
92051	ERYTHROMYCIN E 0.016-256 30 MIC Tests
920510	ERYTHROMYCIN E 0.016-256 100 MIC Tests
920511	ERYTHROMYCIN E 0.016-256 10 MIC Tests
92052	TELAVANCIN TLV 0.002-32 30 MIC Tests
920520	TELAVANCIN TLV 0.002-32 100 MIC Tests
920521	TELAVANCIN TLV 0.002-32 10 MIC Tests
92053	TELAVANCIN TLV 0.016-256 30 MIC Tests
920530	TELAVANCIN TLV 0.016-256 100 MIC Tests
920531	TELAVANCIN TLV 0.016-256 10 MIC Tests
92054	IMIPENEM IMI 0.002-32 30 MIC Tests
920540	IMIPENEM IMI 0.002-32 100 MIC Tests
920541	IMIPENEM IMI 0.002-32 10 MIC Tests
92056	Ceftaroline CPT 0.002-32 30 MIC Tests
920560	Ceftaroline CPT 0.002-32 100 MIC Tests
920561	Ceftaroline CPT 0.002-32 10 MIC Tests
92057	VANCOMYCIN VA 0.016-256 30 MIC Tests
920570	VANCOMYCIN VA 0.016-256 100 MIC Tests
920571	VANCOMYCIN VA 0.016-256 10 MIC Tests
92058	CEFTIBUTEN CTB 0.002-32 30 MIC Tests
920580	CEFTIBUTEN CTB 0.002-32 100 MIC Tests
920581	CEFTIBUTEN CTB 0.002-32 10 MIC Tests
92060	CEFIXIME CFM 0,016-256 30 MIC Tests
920600	CEFIXIME CFM 0,016-256 100 MIC Tests
920601	CEFIXIME CFM 0,016-256 10 MIC Tests
92066	CEFOXITIN FOX 0.016-256 30 MIC Tests
920660	CEFOXITIN FOX 0.016-256 100 MIC Tests
920661	CEFOXITIN FOX 0.016-256 10 MIC Tests
92072	CLINDAMYCIN CD 0.016-256 30 MIC Tests
920720	CLINDAMYCIN CD 0.016-256 100 MIC Tests

PRODOTTI CE DI LIBERA VENDITA / FREE SALE CE PRODUCTS

Rev. 31.0 del 08.01.2016

920721	CLINDAMYCIN CD 0,016-256 10 MIC Tests
92075	CHLORAMPHENICOL C 0,016-256 30 MIC Tests
920750	CHLORAMPHENICOL C 0,016-256 100 MIC Tests
920751	CHLORAMPHENICOL C 0,016-256 10 MIC Tests
92078	FOSFOMYCIN FOS 0,016-256 30 MIC Tests
920780	FOSFOMYCIN FOS 0,016-256 100 MIC Tests
920781	FOSFOMYCIN FOS 0,016-256 10 MIC Tests
92079	FOSFOMYCIN FOS 0,064-1024 30 MIC Tests
920790	FOSFOMYCIN FOS 0,064-1024 100 MIC Tests
920791	FOSFOMYCIN FOS 0,064-1024 10 MIC Tests
92081	LEVOFLOXACIN LEV 0.002-32 30 MIC Tests
920810	LEVOFLOXACIN LEV 0.002-32 100 MIC Tests
920811	LEVOFLOXACIN LEV 0.002-32 10 MIC Tests
92084	MEROPENEM MRP 0.002-32 30 MIC Tests
920840	MEROPENEM MRP 0.002-32 100 MIC Tests
920841	MEROPENEM MRP 0.002-32 10 MIC Tests
92087	METRONIDAZOLE MTZ 0.016-256 30 MIC Tests
920870	METRONIDAZOLE MTZ 0.016-256 100 MIC Tests
920871	METRONIDAZOLE MTZ 0.016-256 10 MIC Tests
92090	MOXIFLOXACIN MXF 0,002-32 30 MIC Tests
920900	MOXIFLOXACIN MXF 0,002-32 100 MIC Tests
920901	MOXIFLOXACIN MXF 0,002-32 10 MIC Tests
92093	NETILMICIN NET 0.016-256 30 MIC Tests
920930	NETILMICIN NET 0.016-256 100 MIC Tests
920931	NETILMICIN NET 0.016-256 10 MIC Tests
92096	NORFLOXACIN NOR 0.016-256 30 MIC Tests
920960	NORFLOXACIN NOR 0.016-256 100 MIC Tests
920961	NORFLOXACIN NOR 0.016-256 10 MIC Tests
92099	OFLOXACIN OFX 0.002-32 30 MIC Tests
920990	OFLOXACIN OFX 0.002-32 100 MIC Tests
920991	OFLOXACIN OFX 0.002-32 10 MIC Tests
92102	PENICILLIN G P 0.016-256 30 MIC Tests
921020	PENICILLIN G P 0.016-256 100 MIC Tests
921021	PENICILLIN G P 0.016-256 10 MIC Tests
92103	PENICILLIN G P 0.002-32 30 MIC Tests
921030	PENICILLIN G P 0.002-32 100 MIC Tests
921031	PENICILLIN G P 0.002-32 10 MIC Tests
92105	PIPERACILLIN PIP 0.016-256 30 MIC Tests
921050	PIPERACILLIN PIP 0.016-256 100 MIC Tests
921051	PIPERACILLIN PIP 0.016-256 10 MIC Tests
92108	PIPERAC*/TAZOB TZP 0.016-256* 30 MIC Tests
921080	PIPERAC*/TAZOB TZP 0.016-256* 100 MIC Tests
921081	PIPERAC*/TAZOB TZP 0.016-256* 10 MIC Tests
92111	STREPTOMYCIN S 0.064-1024 30 Tests
921110	STREPTOMYCIN S 0.064-1024 100 MIC Tests
921111	STREPTOMYCIN S 0.064-1024 10 MIC Tests
92112	Streptomycin S 0.016-256 mg/L 30 Tests
921120	Streptomycin S 0.016-256 mg/L 100 MIC Tests
921121	Streptomycin S 0.016-256 mg/L 10 MIC Tests
92114	TETRACYCLINE TE 0.016-25 30 MIC Tests
921140	TETRACYCLINE TE 0.016-25 100 MIC Tests
921141	TETRACYCLINE TE 0.016-25 10 MIC Tests
92117	TICARC*/CLAV TTC 0,016-256* 30MICTests
921170	TICARC*/CLAV TTC 0,016-256* 100 MIC Test
921171	TICARC*/CLAV TTC 0,016-256* 10 MIC Test
92120	TOBRAMYCIN TOB 0,064-1024 30 MIC Tests
921200	TOBRAMYCIN TOB 0,064-1024 100 MIC Tests
921201	TOBRAMYCIN TOB 0,064-1024 10 MIC Tests
92121	TOBRAMYCIN TOB 0,016-256 30 Tests
921210	TOBRAMYCIN TOB 0,016-256 100 Tests

921211	TOBRAMYCIN TOB 0,016-256 10 Tests
92123	TRIM*/SULFAM SXT 0,002-32 30 MIC Tests
921230	TRIM*/SULFAM SXT 0,002-32 100 MIC Tests
921231	TRIM*/SULFAM SXT 0,002-32 10 MIC Tests
92126	CEFEPIME FEP 0.016-256 30 MIC Tests
921260	CEFEPIME FEP 0.016-256 100 MIC Tests
921261	CEFEPIME FEP 0.016-256 10 MIC Tests
92127	CEFEPIME FEP 0.002-32 µg/ml 30 MIC Tests
921270	CEFEPIME FEP 0.002-32 µg/ml 100 MIC Tests
921271	CEFEPIME FEP 0.002-32 µg/ml 10 MIC Tests
92129	CEFUROXIME CXM 0.016-256 30 MIC Tests
921290	CEFUROXIME CXM 0.016-256 100 MIC Tests
921291	CEFUROXIME CXM 0.016-256 10 MIC Tests
92132	NALIDIXIC ACID NA 0,016-256 30 MIC Tests
921320	NALIDIXIC ACID NA 0,016-256 100 MIC Tests
921321	NALIDIXIC ACID NA 0,016-256 10 MIC Tests
92135	LINEZOLID LNZ 0.016-256 30 MIC Tests
921350	LINEZOLID LNZ 0.016-256 100 MIC Tests
921351	LINEZOLID LNZ 0.016-256 10 MIC Tests
92136	TEDIZOLID TZD 0.002-32 30 MIC Tests
921360	TEDIZOLID TZD 0.002-32 100 MIC Tests
921361	TEDIZOLID TZD 0.002-32 10 MIC Tests
92137	Dalbavancin DAL 0.002-32 30 MIC Tests
921370	Dalbavancin DAL 0.002-32 100 MIC Tests
921371	Dalbavancin DAL 0.002-32 10 MIC Tests
92138	CEFTAZIDIME CAZ 0.016-256 30 MIC Tests
921380	CEFTAZIDIME CAZ 0.016-256 100 MIC Tests
921381	CEFTAZIDIME CAZ 0.016-256 10 MIC Tests
92140	Ceftobiprole BPR 0.002-32 mg/L 30 MIC Tests
921400	Ceftobiprole BPR 0.002-32 mg/L 100 MIC Tests
921401	Ceftobiprole BPR 0.002-32 mg/L 10 MIC Tests
92141	COLISTIN CS 0.016-256 30 MIC Tests
921410	COLISTIN CS 0.016-256 100 MIC Tests
921411	COLISTIN CS 0.016-256 10 MIC Tests
92142	COLISTIN CS 0.064-1024 30 MIC Tests
921420	COLISTIN CS 0.064-1024 100 MIC Tests
921421	COLISTIN CS 0.064-1024 10 MIC Tests
92144	TIGECYCLIN TGC 0.016-256 30 MIC Tests
921440	TIGECYCLIN TGC 0.016-256 100 MIC Tests
921441	TIGECYCLIN TGC 0.016-256 10 MIC Tests
92145	DAPTOMYCIN DAP 0.016-256 30 MIC Tests
921450	DAPTOMYCIN DAP 0.016-256 100 MIC Tests
921451	DAPTOMYCIN DAP 0.016-256 10 MIC Tests
92146	Ceftolozane*-tazobactam C/T 0.016-256* mg/L 30 MIC Tests
921460	Ceftolozane*-tazobactam C/T 0.016-256* mg/L 100 MIC Tests
921461	Ceftolozane*-tazobactam C/T 0.016-256* mg/L 10 MIC Tests
92147	FLUCONAZOLE FLU 0.016-256 30 MIC Tests
921470	FLUCONAZOLE FLU 0.016-256 100 MIC Tests
921471	FLUCONAZOLE FLU 0.016-256 10 MIC Tests
92148	ITRACONAZOLE ITC 0.002-32 30 MIC Tests
921480	ITRACONAZOLE ITC 0.002-32 100 MIC Tests
921481	ITRACONAZOLE ITC 0.002-32 10 MIC Tests
92149	FLUCYTOSIN FC 0.002-32 30 MIC Tests
921490	FLUCYTOSIN FC 0.002-32 100 MIC Tests
921491	FLUCYTOSIN FC 0.002-32 10 MIC Tests
92150	VORICONAZOLE VO 0.002-32 30 MIC Tests
921500	VORICONAZOLE VO 0.002-32 100 MIC Tests
921501	VORICONAZOLE VO 0.002-32 10 MIC Tests
92151	KETOCONAZOLE KE 0.002-32 30 MIC Tests

PRODOTTI CE DI LIBERA VENDITA / FREE SALE CE PRODUCTS

Rev. 31.0 del 08.01.2016

921510	KETOCONAZOLE KE 0.002-32 100 MIC Tests
921511	KETOCONAZOLE KE 0.002-32 10 MIC Tests
92152	POSACONAZOLE POS 0,002-32 30 MIC Tests
921520	POSACONAZOLE POS 0,002-32 100 MIC Tests
921521	POSACONAZOLE POS 0,002-32 10 MIC Tests
92153	AMPHOTERICIN B AMB 0,002-32 30 MIC Tests
921530	AMPHOTERICIN B AMB 0,002-32 100 MIC Tests
921531	AMPHOTERICIN B AMB 0,002-32 10 MIC Tests
92154	CASPOFUNGIN CAS 0,002-32 30 MIC Tests
921540	CASPOFUNGIN CAS 0,002-32 100 MIC Tests
921541	CASPOFUNGIN CAS 0,002-32 10 MIC Tests
92155	ANIDULAFUNGIN AND 0.002-32 30 MIC Tests
921550	ANIDULAFUNGIN AND 0.002-32 100 MIC Tests
921551	ANIDULAFUNGIN AND 0.002-32 10 MIC Tests
92156	DOXYCYCLINE DXT 0,016-256 30 MIC Tests
921560	DOXYCYCLINE DXT 0,016-256 100 MIC Tests
921561	DOXYCYCLINE DXT 0,016-256 10 MIC Tests
92157	ERTAPENEM ETP 0,002-32 30 MIC Tests
921570	ERTAPENEM ETP 0,002-32 100 MIC Tests
921571	ERTAPENEM ETP 0,002-32 10 MIC Tests
92159	CEFTAZ/CEFTAZ+CLAV. CAZ/CAL MIC 30 Tests
921590	CEFTAZ/CEFTAZ+CLAV. CAZ/CAL MIC 100 Tests
921591	CEFTAZ/CEFTAZ+CLAV. CAZ/CAL MIC 10 Tests
92160	CEFOT./CEFOT.+ CLAV. CTX/CTL 30 MIC Tests
921600	CEFOT./CEFOT.+ CLAV. CTX/CTL 100 MIC Tests
921601	CEFOT./CEFOT.+ CLAV. CTX/CTL 10 MIC Tests
92161	CEFEP./CEFEP.+CLAV. FEP/FEL 30 MIC Tests
921610	CEFEP./CEFEP.+CLAV. FEP/FEL 100 MIC Tests
921611	CEFEP./CEFEP.+CLAV. FEP/FEL 10 MIC Tests
92162	IMIPEN./IMIP.+ EDTA IMI/IMD 30 MIC Tests
921620	IMIPEN./IMIP.+ EDTA IMI/IMD 100 MIC Tests
921621	IMIPEN./IMIP.+ EDTA IMI/IMD 10 MIC Tests
92163	VANCOM/TEICOPLANINA VA/TEC 30 MIC Tests
921630	VANCOM/TEICOPLANINA VA/TEC 100 MIC Tests
921631	VANCOM/TEICOPLANINA VA/TEC 10 MIC Tests
92164	CEFOT/CEFOT+CLOX CTT/CXT0,5-32/0,5-32 30 MIC Tests
921640	CEFOT/CEFOT+CLOX CTT/CXT 0,5-32/0,5-32 100 MIC Tests
921641	CEFOT/CEFOT+CLOX CTT/CXT 0,5-32/0,5-32 10 MIC Tests
92165	MEROPENEM/MEROPENEM + EDTA MRP/MRD 0.125-8/0.032-2 µg/ml 30 MIC Tests
921650	MEROPENEM/MEROPENEM + EDTA MRP/MRD 0.125-8/0.032-2 µg/ml 100 MIC Tests
921651	MEROPENEM/MEROPENEM + EDTA MRP/MRD 0.125-8/0.032-2 µg/ml 10 MIC Tests
92166	IMIPEN/IMIP+EDTA IMI/IMD 0.125-8/0.032-2 30 MIC Tests
921660	IMIPEN/IMIP+EDTA IMI/IMD 0.125-8/0.032-2 100 MIC Tests
921661	IMIPEN/IMIP+EDTA IMI/IMD 0.125-8/0.032-2 10 MIC Tests
92167	MEROPENEM / MEROPENEM + PHENYLBORONIC ACID MRP/MBO 0.125-8 / 0.032-2 30 MIC Tests
921670	MEROPENEM / MEROPENEM + PHENYLBORONIC ACID MRP/MBO 0.125-8 / 0.032-2 100 MIC Tests
921671	MEROPENEM / MEROPENEM + PHENYLBORONIC ACID MRP/MBO 0.125-8 / 0.032-2 10 MIC Tests
92168	ERTAPENEM / ERTAPENEM + PHENYLBORONIC ACID ETP/EBO 0.125-8 / 0.032-2 30 MIC Tests
921680	ERTAPENEM / ERTAPENEM + PHENYLBORONIC ACID ETP/EBO 0.125-8 / 0.032-2 100 MIC Tests
921681	ERTAPENEM / ERTAPENEM + PHENYLBORONIC ACID ETP/EBO 0.125-8 / 0.032-2 10 MIC Tests
92169	ERTAP/ERTAP+CLOXACILLIN ETP/ECX 0.125-8/0.032-2 30 MIC Tests
921690	ERTAP/ERTAP+CLOXACILLIN ETP/ECX 0.125-8/0.032-2 100 MIC Tests
921691	ERTAP/ERTAP+CLOXACILLIN ETP/ECX 0.125-8/0.032-2 10 MIC Tests

92170	ETHAMBUTOL EB 0.016-256 30 MIC Tests
921700	ETHAMBUTOL EB 0.016-256 100 MIC Tests
921701	ETHAMBUTOL EB 0.016-256 10 MIC Tests
92171	ISONIAZIDE IZ 0.016-256 30 MIC Tests
921710	ISONIAZIDE IZ 0.016-256 100 MIC Tests
921711	ISONIAZIDE IZ 0.016-256 10 MIC Tests
92172	ETHIONAMIDE ET 0.016-256 30 MIC Tests
921720	ETHIONAMIDE ET 0.016-256 100 MIC Tests
921721	ETHIONAMIDE ET 0.016-256 10 MIC Tests
92173	AZTREONAM ATM 0.064-1024 30 MIC Tests
921730	AZTREONAM ATM 0.064-1024 100 MIC Tests
921731	AZTREONAM ATM 0.064-1024 10 MIC Tests
92174	CEFAZOLIN KZ 0.016-256 30 MIC Tests
921740	CEFAZOLIN KZ 0.016-256 100 MIC Tests
921741	CEFAZOLIN KZ 0.016-256 10 MIC Tests
92180	AMOX*/CLAV 2 µg/mL AMC 0.016-256* 30 MIC Tests
921800	AMOX*/CLAV 2 µg/mL AMC 0.016-256* 100 MIC Tests
921801	AMOX*/CLAV 2 µg/mL AMC 0.016-256* 10 MIC Tests
92181	AMPIC*/SULB 4 µg/mL SAM 0.016-256* 30 MIC Tests
921810	AMPIC*/SULB 4 µg/mL SAM 0.016-256* 100 MIC Tests
921811	AMPIC*/SULB 4 µg/mL SAM 0.016-256* 10 MIC Tests
92182	MICAFUNGIN MYC 0,002-32 30 MIC Tests
921820	MICAFUNGIN MYC 0,002-32 100 MIC Tests
921821	MICAFUNGIN MYC 0,002-32 10 MIC Tests
92183	Ticarcillin TC 0.016-256 mg/L 30 MIC Tests
921830	Ticarcillin TC 0.016-256 mg/L 100 MIC Tests
921831	Ticarcillin TC 0.016-256 mg/L 10 MIC Tests
92184	Isavuconazole IVU 0.002-32 mg/L 30 MIC Tests
921840	Isavuconazole IVU 0.002-32 mg/L 100 MIC Tests
921841	Isavuconazole IVU 0.002-32 mg/L 10 MIC Tests
92200	Tiamulin TIA 0.002-32 30 MIC Tests
922000	Tiamulin TIA 0.002-32 100 MIC Tests
922001	Tiamulin TIA 0.002-32 10 MIC Tests
92201	TILMICOSIN TIL 0.002-32 30 MIC Tests
922010	TILMICOSIN TIL 0.002-32 100 MIC Tests
922011	TILMICOSIN TIL 0.002-32 10 MIC Tests
93001	EASY RID h-IgG
93002	EASY RID h-IgA
93003	EASY RID h-IgM
93004	EASY RID h-C3c
93005	EASY RID h-C4
93006	EASY RID h-Transferrin
93007	EASY RID h-Albumin
93008	EASY RID h-Apolipoprotein A1
93009	EASY RID h-Apolipoprotein B
93010	EASY RID h-Alfa 1 Acid Glicoprotein
93011	EASY RID h-Fibrinogen
93012	EASY RID h-Antitrombin III
93013	EASY RID h-Ig Light Chain K
93014	EASY RID h-Ig Light Chain Lambda
93015	Anti h-alfa 1 Antitrypsin
93016	Anti h-Ceruloplasmin
93018	Anti h-Haptoglobin
93104	Multiplate h-IgG/IgA/IgM
93106	MULTIPLATE h-C3c/C4
93110	MULTIPLATE h-Apo A1/Apo B
93115	MULTIPLATE h-Kappa Chain/Lambda Chain
93201	BENCE JONES TEST
940010	RID CONTROL SERUM
9501	OPTOCHINE OPT 100 Discs

PRODOTTI CE DI LIBERA VENDITA / FREE SALE CE PRODUCTS

Rev. 31.0 del 08.01.2016

9502	Bacitracin Test 100 Discs
9503	X FACTOR TEST 100 Discs
9504	V FACTOR TEST 100 Discs
9505	V+X FACTOR TEST 100 Discs
9508	METRONIDAZOLE TEST 100 Discs
9511	SULPHONAMIDE TEST 100 Discs
95200	ANAEROBES
95210	ENTEROCOCCI
95220	ENTEROBACTERIA 1
95230	ENTEROBACTERIA URINE
95240	ENTEROBACTERIA 2
95250	PSEUDOMONAS
95260	STAPH
95270	ACINETOBACTER
95280	YEASTS
95290	Strepto
95380	ENTEROBACTERIA
95390	PSEUDOMONAS ACINETOBACTER
95400	ENTEROCOCCI
95410	ANAEROBES
95420	STAPH/STREP
95430	ENTEROBACTERIA URINE
95440	ENTEROBACTERIA FROM URINE AND OTHER SAMPLE
95500	YEASTS
9555	MT-HAEMOPHILUS
9562	URIN-2
9563	MICE
9564	KGL I (Gram + ve) 1 x 100 Test
9565	KGL II (Gram - ve) 1 x 100 Test
9566	KGL III 100 Test
9567	MULTODISC A
9568	MULTODISC B
9569	MULTODISC C
9570	MULTODISC D
9571	MULTODISC A (100 Pz) (Tender106/2003)
9573	MULTODISC C (100 Pz) (Tender106/2003)
9574	MULTODISC D (100 Pz) (Tender106/2003)
9575	URINE RING (Tender238/2006)
9576	PSEUDOMONAS RING (Tender238/2006)
9577	GRAM NEGATIVE RING (Tender238/2006)
9578	GRAM POSITIVE RING (Tender238/2006)
96001	SALMONELLA TYPHI H 20 ml
96002	SALMONELLA TYPHI O 20 ml
96003	SALMONELLA PARATYPHI AH 20 ml
96004	SALMONELLA PARATYPHI AO 20 ml
96005	SALMONELLA PARATYPHI BH 20 ml
96006	SALMONELLA PARATYPHI BO 20 ml
96007	BRUCELLA TOTALE 20 ml
96008	BRUCELLA ABORTUS 20 ml
96009	SALMONELLA TYPHI TOTALE 20 ml CE
96010	SALMONELLA PARATYPHI A TOTALE 20 ml
96011	PROTEUS OX2 20 ml
96012	PROTEUS OXK 20 ml
96013	PROTEUS OX19 20 ml
96015	FEBRILE MULTITEST KIT
96016	STREP-CHECK KIT
96017	STAPH LATEX KIT
96018	SALMONELLA PARATYPHI B TOTALE 20 ml
96019	SALMONELLA PARATYPHI CH 20 ml
96020	SALMONELLA PARATYPHI CO 20 ml

96021	SALMONELLA PARATYPHI C TOTALE 20 ml
96022	BRUCELLA MELITENSIS 20 ml
96023	BRUCELLA SUIS 20 ml
96031	SALMONELLA TYPHI H SLIDE 5 ml
96032	SALMONELLA TYPHI O SLIDE 5 ml
96033	SALMONELLA TYPHI TOTALE 5 ml SLIDE
96034	SALMONELLA PARATYPHI AH SLIDE 5 ml
96035	SALMONELLA PARATYPHI AO 5 ml SLIDE
96036	SALMONELLA PARATYPHI A TOTALE 5ml SLIDE
96037	SALMONELLA PARATYPHI BH 5 ml SLIDE
96038	SALMONELLA PARATYPHI BO 5 ml SLIDE
96039	SALMONELLA PARATYPHI B TOTALE 5ml SLIDE
96040	SALMONELLA PARATYPHI CH 5 ml SLIDE
96041	SALMONELLA PARATYPHI CO 5 ml SLIDE
96042	SALMONELLA PARATYPHI C TOTALE 5 ml SLIDE
96043	BRUCELLA TOTALE SLIDE 5 ml SLIDE
96044	BRUCELLA ABORTUS 5 ml SLIDE
96045	BRUCELLA MELITENSIS SLIDE 5 ml
96046	BRUCELLA BENGAL ROSE SLIDE 5 ml
96047	PROTEUS OX2 5 ml SLIDE
96048	PROTEUS OX19 5 ml SLIDE
96049	PROTEUS OXK 5 ml SLIDE
96093	CONTROLLO NEGATIVO/NEGATIVE CONTROL 0.5ml
96096	POSITIVE CONTROL FOR SALMONELLA 0.5ml
96097	POSITIVE CONTROL FOR PROTEUS 0.5ml
96098	POSITIVE CONTROL FOR BRUCELLA 0.5ml
96142	Legionella Latex Kit
96143	CAMPYLOBACTER LATEX KIT
96144	CLOSTRIDIUM DIFFICILE LATEX KIT
96148	SHIGELLA ANTISERUM
96150	E. COLI O157 LATEX KIT
96151	SALMONELLA LATEX KIT
96153	STREPTO B LATEX KIT
96154	STREPTO A LATEX KIT
96155	BENCE JONES LATEX TEST
96316	Clostridium difficile GDH Card
96317	Clostridium Difficile Toxin A+B Card
96318	Giardia Card
96319	Listeria Monocytogenes Card
96320	Salmonella Ag Card
96321	O157 E.coli Card
96401	ONE STEP AMP DRMG SCREEN 20 CARDS
96404	ONE STEP COC DRMG SCREEN
96405	ONE STEP THC DRMG SCREEN
96406	ONE STEP M-AMP DRMG SCREEN 20 CARDS ONE STEP BRUPRENORPHINE DRMG SCREEN 20 CARDS
96411	
96415/20	FECAL OCCULT BLOOD CARD
96418	STREPTO A CARD 30 CARDS
96441	Gonorrhea Ag Card
96442	Gardnerella Vaginalis Card
96443	Trichomonas Vaginalis Card
96444	B.J. Free Kappa/Lambda Dipstick
96455	H.PYLORI CARD 20 CARD
96460	HCG URINE/SERUM CARD 50 CARD
96461	HCG URINE/SERUM CARD 100 CARD
96462	MICROALBUMIN CARD URINE 20 Cards
96465	AFP -ALFA FETO CARD 20 CARDS
96468	TUBERCOLOSI CARD 20 CARDS
96480	IgE TOTAL CARD
96485	CEA CARD 20 Cards

PRODOTTI CE DI LIBERA VENDITA / FREE SALE CE PRODUCTS

Rev. 31.0 del 08.01.2016

96487	MYOGLOBIN
96488	TROPONIN 20 CARDS
96490	FERRITIN CARD
96495	SIFILIDE CARD 20 CARDS
96498	IM MONONUCLEOSIS INFECTION 20 CARDS
96590	URINE STRIP
96900	GIOTTO READER
96909	BIOMIC V3
96914	BIOMIC V3 AST
96915	BIOMIC V3 ID
96916	BIOMIC V3 CC
96919	AST Software
96931	ID Software
96932	CC Software
96933	Micropiastre 96 pozzetti Software

97800	ROTASTICK ONE STEP KIT 20 Tests
97801	RSV STICK ONE STEP 20 Tests
97802	ROTA/ADENO COMBI STICK ONE STEP 20 Tests
97803	H.PYLORI FECAL Ag ONE STEP 20 Tests
97805	STREP B STICK ONE STEP ASSAY 20 Tests
97807	ADENOSTICK ONE STEP ASSAY 20 Tests
9999	Blank Discs
99003	KPC&MBL disc kit (acc. to EUCAST)
99004	ESBL disc kit (acc. to EUCAST)
99005	ESBL disc kit (acc. to CLSI)
99006	ESBL (Chromos. Ind. AmpC) disc kit (acc. to EUCAST)
99007	KPC&MBL&OXA-48 disc kit (acc. to EUCAST)
99008	ESBL+AmpC screen disc kit
99009	AmpC disc kit

Direttore Tecnico/ Technical Director
Dr.Silvio Brocco



CERTIFICAT

CERTIFICADO

СЕРТИФИКАТ

認證證書

CERTIFICATE

ZERTIFIKAT



Italia

CERTIFICATO

Nr. 50 100 11497 Rev.005

SI ATTESTA CHE / THIS IS TO CERTIFY THAT

IL SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITÀ DI
THE QUALITY MANAGEMENT SYSTEM OF

LIOFILCHEM S.r.l.

SEDE LEGALE:
REGISTERED OFFICE:

**VIA SCOZIA - ZONA INDUSTRIALE
IT - 64026 ROSETO DEGLI ABRUZZI (TE)**

SEDI OPERATIVE: VEDI ALLEGATO 1 / OPERATIONAL SITES: *SEE ANNEX 1*

È CONFORME AI REQUISITI DELLA NORMA
HAS BEEN FOUND TO COMPLY WITH THE REQUIREMENTS OF

UNI EN ISO 9001:2015

QUESTO CERTIFICATO È VALIDO PER IL SEGUENTE CAMPO DI APPLICAZIONE
THIS CERTIFICATE IS VALID FOR THE FOLLOWING SCOPE OF APPLICATION

Progettazione e sviluppo, produzione e vendita di dispositivi medico diagnostici in-vitro: terreni di coltura per microbiologia, sistemi di identificazione e antibiogramma, strip per determinazione della Minima Concentrazione Inibente, dischetti antibiotici, kit per la determinazione di plasmaproteine. Distribuzione di altri dispositivi medico diagnostici in-vitro (IAF 12, 29)

Design and development, production and sales of in-vitro diagnostic medical devices: culture media for microbiology, identification and susceptibility testing systems, Minimum Inhibitory Concentration test strips, antibiotic discs, kits for plasma protein determination. Distribution of other in-vitro diagnostic medical devices (IAF 12, 29)

Per l'Organismo di Certificazione
For the Certification Body
TÜV Italia S.r.l.

Validità / Validity

Dal / From: **2022-02-11**

Al / To: **2025-02-10**



SGQ N° 049A

Membro degli Accordi di Mutuo Riconoscimento
EA, IAF e ILAC
Signatory of EA, IAF and ILAC Mutual
Recognition Agreements

Francesco Scarlata

Francesco Scarlata

Direttore Divisione Business Assurance
Business Assurance Division Manager

Data emissione /
Issuing Date

2022-01-26

PRIMA CERTIFICAZIONE / FIRST CERTIFICATION: 2012-09-25

DATA DI SCADENZA DELL'ULTIMO CICLO DI CERTIFICAZIONE: 2022-02-10
EXPIRATION DATE OF THE LAST CERTIFICATION CYCLE: 2022-02-10

"LA VALIDITÀ DEL PRESENTE CERTIFICATO È SUBORDINATA A SORVEGLIANZA PERIODICA A 12 MESI E AL RIESAME COMPLETO DEL SISTEMA DI GESTIONE AZIENDALE CON PERIODICITÀ TRIENNALE"
"THE VALIDITY OF THE PRESENT CERTIFICATE DEPENDS ON THE ANNUAL SURVEILLANCE EVERY 12 MONTHS AND ON THE COMPLETE REVIEW OF COMPANY'S MANAGEMENT SYSTEM AFTER THREE-YEARS"



Italia

ALLEGATO 1 AL CERTIFICATO NR 50 100 11497 Rev.005
ANNEX 1 TO CERTIFICATE NO 50 100 11497 Rev.005
 pagina 1 di 1 / page 1 of 1

IL CERTIFICATO NR 50 100 11497 Rev.005 COPRE ANCHE LE SEGUENTI SEDI OPERATIVE:
 THE CERTIFICATE N 50 100 11497 Rev.005 COVERS ALSO THE FOLLOWING OFFICES:

LIOFILCHEM S.r.l.

VIA SCOZIA - ZONA INDUSTRIALE IT - 64026 ROSETO DEGLI ABRUZZI (TE)

Progettazione e sviluppo, produzione e commercializzazione di dispositivi medico diagnostici in-vitro: terreni di coltura per batteriologia, sistemi di identificazione e antibiogramma, kit per la determinazione di plasmaproteine

Production and sales of in-vitro diagnostic medical devices: dehydrated and ready-to-use culture media for microbiology

VIA URUGUAY IT - 64026 ROSETO DEGLI ABRUZZI (TE)

Progettazione e sviluppo, produzione e vendita di dispositivi medico diagnostici in-vitro: terreni di coltura pronti per microbiologia, reagenti e supplementi, sistemi di identificazione e antibiogramma, strip per determinazione della Minima Concentrazione Inibente, dischetti antibiotici, kit per la determinazione di plasmaproteine. Distribuzione di altri dispositivi medico diagnostici in-vitro. Progettazione e sviluppo e commercializzazione di terreni di coltura disidratati per microbiologia

Design and development, production and sales of in-vitro: diagnostic medical devices: ready-to-use culture media for microbiology, reagents and supplements, microbial identification and antimicrobial susceptibility testing systems, Minimum Inhibitory Concentration test strips, antibiotic discs, plasma protein determination kits. Distribution of other in-vitro diagnostic medical devices. Design and development and distribution of dehydrated culture media for microbiology



SGQ N° 049A

Membro degli Accordi di Mutuo Riconoscimento
 EA, IAF e ILAC
 Signatory of EA, IAF and ILAC Mutual
 Recognition Agreements

Per l'Organismo di Certificazione
 For the Certification Body
TÜV Italia S.r.l.

Validità / Validity
 Dal / From: **2022-02-11**
 Al / To: **2025-02-10**

Francesco Scarlata

Direttore Divisione Business Assurance
 Business Assurance Division Manager

Data emissione /
 Issuing Date
2022-01-26

PRIMA CERTIFICAZIONE / FIRST CERTIFICATION: 2012-09-25

DATA DI SCADENZA DELL'ULTIMO CICLO DI CERTIFICAZIONE: 2022-02-10
 EXPIRATION DATE OF THE LAST CERTIFICATION CYCLE: 2022-02-10

"LA VALIDITÀ DEL PRESENTE CERTIFICATO È SUBORDINATA A SORVEGLIANZA PERIODICA A 12 MESI E AL RIESAME COMPLETO DEL SISTEMA DI GESTIONE AZIENDALE CON PERIODICITÀ TRIENNALE"
 "THE VALIDITY OF THE PRESENT CERTIFICATE DEPENDS ON THE ANNUAL SURVEILLANCE EVERY 12 MONTHS AND ON THE COMPLETE REVIEW OF COMPANY'S MANAGEMENT SYSTEM AFTER THREE-YEARS"



Certificate

No. Q5 071067 0006 Rev. 02

Holder of Certificate: **Liofilchem S.r.l.**
Via Scozia
64026 Roseto degli Abruzzi (TE)
ITALY

Certification Mark:



Scope of Certificate: **Design and development, production and sales of in-vitro diagnostic medical devices: culture media for microbiology, identification and susceptibility testing systems, Minimum Inhibitory Concentration test strips, antibiotic discs, kits for plasma protein determination. Distribution of other in-vitro diagnostic medical devices.**

The Certification Body of TÜV SÜD Product Service GmbH certifies that the company mentioned above has established and is maintaining a quality management system, which meets the requirements of the listed standard(s). All applicable requirements of the testing and certification regulation of TÜV SÜD Group have to be complied with. For details and certificate validity see: www.tuvsud.com/ps-cert?q=cert:Q5 071067 0006 Rev. 02

Report No.: ITA 1775694

Valid from: 2021-12-19

Valid until: 2024-12-18

Date, 2021-12-10



Christoph Dicks
Head of Certification/Notified Body

Certificate

No. Q5 071067 0006 Rev. 02

Applied Standard(s): EN ISO 13485:2016
Medical devices - Quality management systems -
Requirements for regulatory purposes
(ISO 13485:2016)
DIN EN ISO 13485:2016

Facility(ies): Liofilchem S.r.l.
Via Scozia, 64026 Roseto degli Abruzzi (TE), ITALY

Production and sales of in-vitro diagnostic medical devices:
dehydrated and ready-to-use culture media for microbiology.

Liofilchem S.r.l.
Via Uruguay, 64026 Roseto degli Abruzzi (TE), ITALY

Design and development, production and sales of in-
vitro:diagnostic medical devices: ready-to-use culture media for
microbiology, reagents and supplements, microbial identification
and antimicrobial susceptibility testing systems, Minimum Inhibitory
Concentration test strips, antibiotic discs, plasma protein
determination kits. Distribution of other in-vitro diagnostic medical
devices. Design and development and distribution of dehydrated
culture media for microbiology.

/