



**Medisec Tıbbi Cihaz ve Ürünleri
İthalat İhracat San. ve Tic. Ltd. Şti.**
Başpınar (Organize) OSB Mahallesi O.S.B. 2. Bölge
Celal Doğan Blv. No:40 Şehitkâmil/Gaziantep/Türkiye
TEL: 0 342 337 88 75 FAX: 0 342 337 88 76



دليل استخدام حقن أقلام الأنسولين

INSULIN PEN NEEDLE POINT USER'S GUIDE

المحتويات:

100 عدد حقنة للاستخدام مرة واحدة تحت الجلد.

التوضيحات:

حقنة معقمة من أجل أقلام الأنسولين.

ضمن عبوة شخصية واقية لا تحتوي على مسببات الحمي وغير سامة.

المميزات العامة:

يحتوي المنتج على 100 عدد حقنة للاستخدام مرة واحدة تحت الجلد.

معقم باستخدام أوكسيد الأثيلان. غير سام ولا يسبب ارتفاع الحرارة.

الحقنة مغلفة بغطاء شفاف وسليكوني، سهولة وراحة في الاستخدام.

الغاية من الاستخدام:

هذا المنتج هو عبارة عن حقن للاستخدام مرة واحدة على رأس قلم الأنسولين

لحقن الأنسولين تحت الجلد في الجسم.

Instruction manual / الغاية من الاستخدام:




الرجاء فتح الطبقة الواقية الموجودة على الحقنة وتقريبها من القلم.
Stylus pen needle closer to the opening of the covered paper.



يتم وضع الحقنة على الخرطوشة بشكل تام بحيث يتم مراعاة ثقب الحقنة الداخلية مع الخرطوشة.
Position the needle cartridge to be drilled exactly on the cartridge chamber with the inner needle



يتم تدوير الحقنة باتجاه حركة الساعة لتثبيتها على القلم جيدا.
Put the needle fully into the pen by turning it clockwise

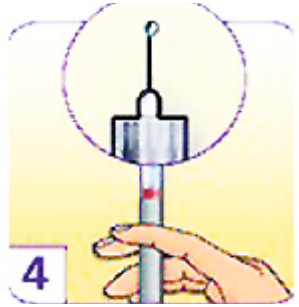

لا بد من فحص مرور الأنسولين في القلم عند كل استخدام.
The flow from the pen needle insulin should be checked before each injection



يتم الاستعانة بالأرقام الموجودة في القسم الخلفي للقلم من أجل معايرة جرعة التي سيتم حقنها.
Asjust dose to apply the advantage of number located on the back of the pen

INDEX

100 pcs disposable sterile, includes hypodermic needle.

DESCRIPTION:

Sterile needles for insulin pens.

Disposable, pyrogen-free, non-toxic. In individual protective packaging.

GENERAL CHARACTERISTICS:

Sterile single-use 100 pieces, includes hypodermic needle were sterilized with ethylene oxide. Non-toxic, arirojendir entire needle is covered with a transparent silicone provides ease of use and convenience

sterility is guaranteed if the protective sheath is damaged.

PURPOSE OF USE :

Hipodermic needle use for injection the body of diabetic patients which is attached insulin pen.



بعد غرز الحقنة بشكل عمودي يتم الضغط على الحقنة باستخدام إصبع.
السبابة لحقن الأنسولين في الجسم.
After Pen needle immersed upright inject insulin head-pushing finger pressing a button.



بعد حقن كامل كمية الأنسولين الرجاء عدم نزع الحقنة فورا
Just pull the needle after the injection done by pressing the end button.



يتم نزع الحقنة من تحت الجلد بعد الانتظار لفترة كافية والتأكد من معايرة الجرعة بشكل تام.
Remove needle under skin enough to wait, then be sure to set the full dose



الرجاء وضع غطاء الواقية الخارجي على الحقنة. الرجاء مراعاة عدم السعي لوضع الغطاء الداخلي الملون لتلافي

Plug the large protective outer cover of the pen needle. Attempt to insert a small innercover, because this cover to insert your hand while the needle sting.



1. يتم نزع الحقنة المستخدمة من خلال تدويرها ورميها في وعاء ذو غطاء أو قارورة ماء بلاستيكية. يمكنكم تسليم الحقن المستخدمة التي قمتم بجمعها مسبقا للمؤسسات الصحية من أجل التخلص منها. الرجاء عدم رمي الحقن في النفايات المنزلية.

Unscrew the lid of your use needles and into a separate container or accumulate throwing their plastic water bottles. It can be delivered healt facilities for diposel of use needles you've accumulated. Please dipose of your needles you take your household waste.

التحذيرات

قبل استخدام الحقنة الرجاء التأكد من عدم وجود أي خلل في الغلاف

الرجاء عدم استخدام الحقنة في حال وجود أي خلل في الحقنة أو الغلاف.

غير مناسب للأشخاص الذين يعانون من انخفاض مستوى السكر في الدم أو الذين يعانون من الحساسية بدرجة



مكونات المنتج.

WARNINGS:

if there is and damage to the packaging before using the needle check

Any tip of the needle and the needle is bent or damaged, do not use the protective labe.

Hypoglycemia is contraindicated in those who are hypersensitivite to one of the materials use.

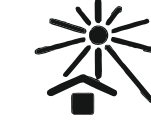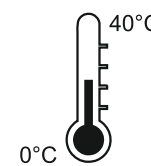

إشارة المطابقة للمعايير الأوروبية ورقم المؤسسة المصادق عليها
CE Mark and Notified Body Number

رقم الكتالوج أو الموديل
Catalogue or Model Number

تاريخ الإنتاج

Üretim Tarihi

تاريخ انتهاء الصلاحية / Expiration Date

رقم الدفعة / Lot Number

للاستخدام مرة واحدة / For Single Use

معقم باستخدام أوكسيد الأثيلان

Sterilized Using Ethylene Oxide

الرجاء عدم استخدام المنتج في حال كانت الغلاف ممزق أو متقوب

Do nat use if the package is Damaged !

الرجاء قراءة دليل الاستخدام

Consult the instruction for use.

عنوان الشركة المنتجة

Adress of Manufacturer

حدود درجة حرارة التخزين

Tempreture Limitation

تحفظ بعيدا عن أشعة الشمس

Keep away from sunlight

تحفظ بعيدا عن الماء والرطوبة

Keep away from raind and dry

