

FAZ LUXE	Спецификация	СП-МО-003	Версия 01
	Готовый продукт		Страница 1 из 3
Марля медицинская хлопчатобумажная отбеленная в рулонах, размер 1000 м х 90 см, ТИП 24 а			Экземпляр № <u>7</u>
Дата введения:	« 14 » 06.2024 г.	Действителен до:	« 14 » 06.2027 г.

1. Название:

1.1. Марля медицинская хлопчатобумажная отбеленная в рулонах, размер 1000 м х 90 см (далее по тексту – марля медицинская отбеленная), идентификационный номер – МО-003.

2. Описание:

2.1. Марля медицинская хлопчатобумажная отбеленная предназначена для предохранения ран от загрязнений, для изготовления операционно-перевязочных средств и наложения, гипсовых лангет.

2.2. Марлю медицинскую хлопчатобумажную отбеленную изготавливают из пряжи хлопчатобумажной, отбеленной соответствующей ГОСТ 9092-81 – Пряжа хлопчатобумажная для трикотажного производства. Технические условия.

2.3. Марлю медицинскую хлопчатобумажную отбеленную изготавливают нестерильной в виде рулона или куска, упакованную в пакет полиэтиленовую.

2.4. В зависимости от необходимости марли изготавливают разной ширины и длины.

3. Согласно:

3.1. EN 14079:2003 Неактивные медицинские изделия – Требования и методы испытаний гигроскопической хлопковой марли и гигроскопической хлопковой и вискозной марли.

4. Производитель:

4.1. Общество с ограниченной ответственностью «FAZO-LUXE», Республика Узбекистан, 111103, Ташкентская область, Ташкентский район, ССГ Гулистан, улица Оханграбо, дом 21.

5. Упаковка:

5.1. Марлевые рулоны упаковывают в бумагу, далее в полиэтиленовую пленку с нанесением маркировки.

5.1.1. На каждый упакованный рулон несмываемой краской должна быть нанесена маркировка типографическим способом, офсетной печатью или наклеен ярлык (этикетка).

5.2. Оригинал макет первичной упаковки приведен на рисунке 5.1.

Разработано:

Заместитель директора по производству

Азизов Н.

17.06.2024 г.

Согласовано:

Начальник ОКК

Онарбоев И.С.

17.06.2024 г.

Утверждено:

Директор

Исаков А.

17.06.2024 г.

(должность)

(Ф.И.О.)

(подпись)

(дата)

FAZ  LUXE	Спецификация	СП-МО-003
	Готовый продукт	Версия 01
Марля медицинская хлопчатобумажная отбеленная в рулонах, размер 1000 м x 90 см, ТИП 24 а		Экземпляр № <u>7</u>
Дата введения:	« 14 » 06.2024 г.	Действителен до: « 14 » 06.2027 г.

	Производитель: ООО «FAZO-LUXE» Республика Узбекистан, 111103, Ташкентская область, Ташкентский район, улица Оханграбо, 21 Тел.: (0371) 223-41-99, (99895) 146-41-99 e-mail: fazo-luxe@inbox.ru Произведено в Узбекистане	Ishlab chiqaruvchi: «FAZO-LUXE» MChJ O‘zbekiston Respublikasi, 111103, Toshkent viloyati, Toshkent tumani, Ohangrabo kòchasi, 21 uy. Tel.: (0371) 223-41-99, (99895) 146-41-99 e-mail: fazo-luxe@inbox.ru O‘zbekistonda ishlab chiqarilgan	Размер O‘lchami
	1000 м x 90 см		
Количество (шт) Soni (dona)	Условия хранения: В сухом, проветриваемом помещении, в условиях, предотвращающих действие солнечных лучей, не допуская высокой (более 25 °С) и низкой (менее 0 °С) температуры воздуха, при относительной влажности воздуха не более 70%		
1	EN 14079:2003		
МАРЛЯ МЕДИЦИНСКАЯ ХЛОПЧАТОБУМАЖНАЯ ОТБЕЛЕННАЯ В РУЛОНАХ OQARTIRILGAN PAXTA TOLALI TIBBIYOT DOKA RULONI			
Номер партии/ Partiya raqami	Дата изготовления/ Ishlab chiqarilgan sana	Срок годности/ Saqlash muddati	
xxx	xx.xxxx	5 лет/yil	
Товар сертифицирован		Mahsulot sertifikatlangan	

Рисунок 5.1

5.3. Маркировка производится в соответствии с нанесением самоклеющегося стикера или бумажного вкладыша со следующей информацией:

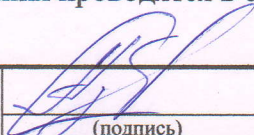
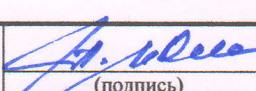
- наименование предприятия-изготовителя, адрес (юридический и фактический), e-mail, телефон, факс и его товарный знак;
- наименование и размеры (м x см) марли;
- обозначение настоящего стандарта организации;
- номер партии;
- дата изготовления;
- количество марли;
- информация о сертификации;
- гарантийный срок хранения;
- условия хранения;
- надпись «Made in Uzbekistan» для внешнего рынка;
- надпись «O'zbekistonda ishlab chiqarilgan» для внутреннего рынка.

6. Отбор проб и проведение испытаний:

6.1. По окончании формирования партии марли медицинской отбеленной, контролеры отдела контроля качества осуществляют отбор проб для проведения испытаний.

6.2. Для проведения испытаний марли медицинской отбеленной от партии из разных рулонов отбирают 3 выреза образца.

6.3. Испытания проводятся в соответствии с утвержденными методиками испытаний.

Разработано:	 (подпись)	Утверждено:	 (подпись)	Страница 2 из 3
--------------	--	-------------	---	-----------------

FAZ  LUXE	Спецификация		СП-МО-003
	Готовый продукт		Версия 01
Марля медицинская хлопчатобумажная отбеленная в рулонах, размер 1000 м x 90 см, ТИП 24 а			Экземпляр № <u>7</u>
Дата введения:	« 14 » 06.2024 г.	Действителен до:	« 14 » 06.2027 г.

6.4. При получении неудовлетворительных результатов испытаний хотя бы по одному показателю проводят повторные испытания удвоенного количества марли, отобранных от той же партии.

6.5. Результаты повторных испытаний распространяют на всю партию.

7. Качественные, количественные и технологические показатели:

№ п/п	Показатель	Норма	Методика контроля
1	2	3	4
1.	Длина, м	1000,0	
2.	Ширина, см	90,0	
3.	Минимальная плотность г/м ²	32	
4.	Соединение ткани	= ткань	
5.	Гидрофильность, сек., не более	10	
6.	Плотность: по основе, нити/10 см по утку, нити/10 см	мин 116 мин 116	
7.	Разрывная нагрузка полотна 50 x 200 мм по основе, Н по утку, Н	мин 60,0 мин 50,0	
8.	Состав	100 % хлопок	

8. Условия хранения:

8.1. Упакованные рулоны должны храниться в сухом, проветриваемом помещении в соответствии с правилами пожарной безопасности в условиях, предотвращающих загрязнение, механические повреждения и действие солнечных лучей, не допуская высокой (более 25 °С) и низкой (менее 0 °С) температуры воздуха, при относительной влажности воздуха не более 70%. Не рекомендуется подвергать изделия длительному воздействию отрицательных температур, прямых солнечных лучей и чрезмерному физическому давлению.

9. Меры осторожности при обращении:

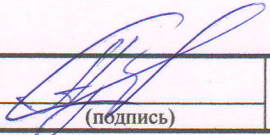
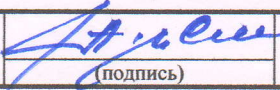
9.1. Не использовать на открытые раны.

10. Срок хранения:

10.1. Срок хранения марли медицинской хлопчатобумажной отбеленной – 5 лет с момента его изготовления.

11. Список изменений:

№ версии / действует с	Перечень изменений
01 / 14.06.2024	Введено впервые

Разработано:	 (подпись)	Утверждено:	 (подпись)	Страница 3 из 3
--------------	--	-------------	---	-----------------