



AMPLATZER™ TORQVUE™ ȘI AMPLATZER™ TREVISIO™ SISTEME DE LIVRARE INTRAVASCULARĂ



Informațiile conținute aici pentru DISTRIBUȚIE NUMAI în afara S.U.A.
Verificați întotdeauna starea de reglementare a dispozitivului din regiunea dvs.



A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'L. Dimitriu'.



SISTEME DE LIVRARE
CONFEȚIONATE DIN POLIMERI
ARMAȚI OFERIND O
**LIVRAE VERSATILĂ,
CONTROLATĂ A DISPOZITIVELOR**



Handwritten signature

CONTROL

Sistemele de Livrare intravasculară Amplatzer™ TorqVue™ și Amplatzer™ Trevisio™ sunt concepute pentru a oferi o cale controlată către locul de ocluzie.

Teacă de livrare din polimer armat

- Proiectat pentru a oferi rezistență suplimentară la îndoire printr-o împletitură internă din oțel inoxidabil¹

Materialul din care este confecționată teaca trece de la o secțiune proximală mai rigidă la o secțiune distală mai moale

- Construită pentru a ușura împingerea și manevrabilitatea în anatomia sinuoasă

Vârf moale, radioopac

- Proiectat pentru a minimiza riscul de deteriorare a vasului și pentru a îmbunătăți vizualizarea poziției

CONFIDENCE

Performanța tecii este critică. Sistemele de livrare intravasculară Amplatzer TorqVue și Amplatzer Trevisio sunt proiectate pentru a ușura poziționarea și deschiderea ocluderilor Amplatzer™

Radiopaque Distal Tip

- Facilitează poziționarea și plasarea precisă a dispozitivului

Teacă din PTFE cu frecare redusă

- Permite o livrare lină, controlată

Încărcător transparent


- Ajută la confirmarea încărcării dispozitivului, spălarea și eliminarea aerului

Cabluri și fire de livrare în diferite calibre și flexibilitate

- Sunt concepute special pentru a ajuta la livrarea fiecărui Amplatzer Occluder



1. Teste efectuate de și date în dosar la Abbott.

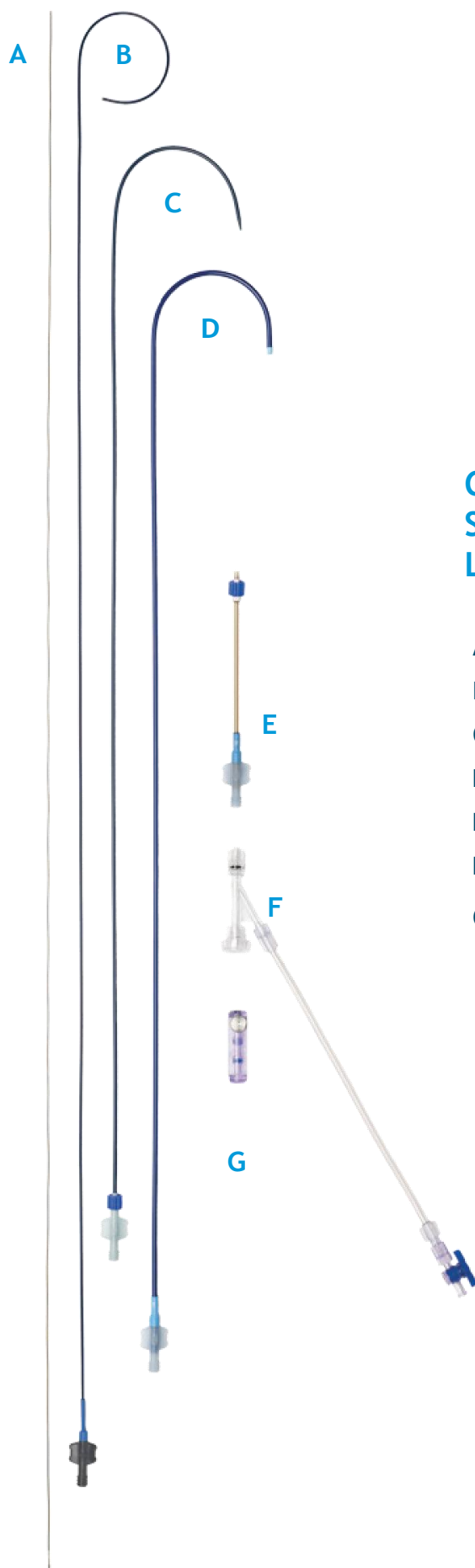

COMPONENTE SISTEM DE LIVRARE*

- A. Cablu de livrare
- B. Cateter de împingere
- C. Dilator
- D. Teacă de livrare
- E. Încărcător
- F. Valvă hemostatică
- G. Mâner din plastic



Handwritten signature

*Componentele variază în funcție de sistemul de livrare. Pentru o listă a componentelor care alcătuiesc fiecare sistem de administrare intravascular Amplatzer™ TorqVue™ Amplatzer™ Trevisio™, vă rugăm să consultați informațiile de comandă din paginile următoare.

AMPLATZER™ TORQVUE™
45° AND 180° DELIVERY SYSTEMS

MODEL/REORDER NUMBER	SHEATH SIZE (F)	TIP ANGLE	USEABLE LENGTH (CM)	RECOMMENDED FOR USE WITH
9-ITV06F45/60	6	45°	60	Amplatzer™ Septal Occluder and Muscular VSD Occluder
9-ITV07F45/60	7	45°	60	Amplatzer™ Septal Occluder and Muscular VSD Occluder
9-ITV07F45/80	7	45°	80	Amplatzer™ Septal Occluder and Muscular VSD Occluder
9-ITV08F45/60	8	45°	60	Amplatzer™ Septal Occluder, Cribriform Occluder, PFO Occluder and Muscular VSD Occluder
9-ITV08F45/80	8	45°	80	Amplatzer™ Septal Occluder, Cribriform Occluder, PFO Occluder and Muscular VSD Occluder
9-ITV09F45/80	9	45°	80	Amplatzer™ Septal Occluder, Cribriform Occluder, PFO Occluder, Muscular VSD Occluder and P.I. Muscular VSD Occluder
9-ITV10F45/80	10	45°	80	Amplatzer™ Septal Occluder and P.I. Muscular VSD Occluder
9-ITV12F45/80	12	45°	80	Amplatzer™ Septal Occluder
9-ITV13F45/80a	13	45°	80	Amplatzer™ Septal Occluder
9-ITV05F180/60	5	180°	60	Amplatzer™ Duct Occluder and Muscular VSD Occluder
9-ITV06F180/60	6	180°	60	Amplatzer™ Duct Occluder and Muscular VSD Occluder
9-ITV06F180/80	6	180°	80	Amplatzer™ Duct Occluder and Muscular VSD Occluder
9-ITV07F180/80	7	180°	80	Amplatzer™ Duct Occluder and Muscular VSD Occluder
9-ITV08F180/80	8	180°	80	Amplatzer™ Muscular VSD Occluder
9-ITV09F180/80	9	180°	80	Amplatzer™ Muscular VSD Occluder and P.I. Muscular VSD Occluder

Sistemele de livrare Amplatzer™ TorqVue™ 45° și 180° includ un cablu de livrare, tecă de livrare, dilatator, valvă hemostatică, încărcător și mâner din plastic.



AMPLATZER™ TREVISIO™ 45° DELIVERY SYSTEM

MODEL/REORDER NUMBER	SHEATH SIZE (F)	TIP ANGLE	USEABLE LENGTH (CM)	RECOMMENDED FOR USE WITH
9-ATV06F45/60	6	45°	60	Amplatzer™ Septal Occluder, PFO Occluder, Muscular VSD Occluder
9-ATV07F45/60	7	45°	60	Amplatzer™ Septal Occluder, PFO Occluder, Muscular VSD Occluder
9-ATV07F45/80	7	45°	80	Amplatzer™ Septal Occluder, PFO Occluder, Muscular VSD Occluder
9-ATV08F45/60	8	45°	60	Amplatzer™ Septal Occluder, PFO Occluder, Muscular VSD Occluder
9-ATV08F45/80	8	45°	80	Amplatzer™ Septal Occluder, PFO Occluder, Muscular VSD Occluder
9-ATV09F45/80	9	45°	80	Amplatzer™ Septal Occluder, PFO Occluder, Muscular VSD Occluder
9-ATV10F45/80	10	45°	80	Amplatzer™ Septal Occluder, PFO Occluder, Muscular VSD Occluder
9-ATV12F45/80	12	45°	80	Amplatzer™ Septal Occluder
9-ATV13F45/80	13	45°	80	Amplatzer™ Septal Occluder



AMPLATZER™ TORQVUE™ EXCHANGE SYSTEMS

MODEL/REORDER NUMBER	SHEATH SIZE (F)	TIP ANGLE	USEABLE LENGTH (CM)	RECOMMENDED FOR USE WITH
9-EITV09F45/80	9	45°	80	Amplatzer™ Septal Occluder, Cribiform Occluder, PFO Occluder and Muscular VSD Occluder
9-EITV12F45/80	12	45°	80	Amplatzer™ Septal Occluder, Cribiform Occluder, PFO Occluder and Muscular VSD Occluder
9-EITV06F180/80	6	180°	80	Amplatzer™ Duct Occluder and Muscular VSD Occluder
9-EITV08F180/80	8	180°	80	Amplatzer™ Duct Occluder and Muscular VSD Occluder

Notă: Sistemele de schimb Amplatzer™ TorqVue™ includ o teacă de livrare, dilatator, sârmă de schimb, valvă hemostatică, încărcător și mâner din plastic.



AMPLATZER™ TORQVUE™ LP DELIVERY SYSTEM^A

MODEL/REORDER NUMBER	SHEATH SIZE (F)	TIP ANGLE	USEABLE LENGTH (CM)	DELIVERY CABLE LENGTH (CM)	RECOMMENDED FOR USE WITH
9-TVLP4F90/060	4	90°	60	160	Amplatzer™ Duct Occluder II
9-TVLP4F90/080	4	90°	80	195	Amplatzer™ Duct Occluder II
9-TVLP5F90/060	5	90°	60	160	Amplatzer™ Duct Occluder II
9-TVLP5F90/080	5	90°	80	195	Amplatzer™ Duct Occluder II

Notă: Sistemul de livrare Amplatzer™ TorqVue™ LP include un cablu de livrare, tecă de livrare, valvă hemostatică, încărcător și mâner din plastic.



AMPLATZER™ TORQVUE™ LP CATHETER^A

MODEL/REORDER NUMBER	SHEATH SIZE (F)	TIP ANGLE	USEABLE LENGTH (CM)	DELIVERY CABLE LENGTH (CM)	RECOMMENDED FOR USE WITH
9-TVLPC4F90/080	4	90°	80	190	Amplatzer Piccolo™ Occluder

Notă: Cateterul Amplatzer™ TorqVue™ Exchange LP include un cateter de livrare, o valvă hemostatică, un încărcător și o valvă hemostatică cu auto-etanșare.



AMPLATZER™ TORQVUE™ DELIVERY SYSTEM WITH PUSHER CATHETER

MODEL/REORDER NUMBER	SHEATH SIZE (F)	TIP ANGLE	USEABLE LENGTH (CM)	RECOMMENDED FOR USE WITH
9-ITVP07F180/80	7	180°	80	Amplatzer™ Membranous VSD Occluder
9-ITVP08F180/80	8	180°	80	Amplatzer™ Membranous VSD Occluder
9-ITVP09F180/80	9	180°	80	Amplatzer™ Membranous VSD Occluder

Notă: Sistemul de eliberare Amplatzer™ TorqVue™ cu cateter împingător include un cablu de livrare, teacă de livrare, dilatator, valvă hemostatică, încărcător, mâner din plastic și cateter de împingere.



AMPLATZER™ TORQVUE™ 2 DELIVERY SHEATH

MODEL/REORDER NUMBER	SHEATH SIZE (F)	TIP ANGLE	USEABLE LENGTH (CM)	RECOMMENDED USE
9-TV2-05F120	5	Straight	120	Intended to provide a pathway through which devices are introduced within the chambers and coronary vasculature of the heart or in the peripheral vasculature.
9-TV2-06F120	6	Straight	120	
9-TV2-07F120	7	Straight	120	

Notă: Teaca de livrare Amplatzer™ TorqVue™ 2 include o teacă de livrare și un dilatator.



AMPLATZER™ AMULET™ DELIVERY SHEATH

MODEL/REORDER NUMBER	SHEATH SIZE (F)	TIP ANGLE	USEABLE LENGTH (CM)	RECOMMENDED FOR USE WITH
DS-TV45X45-12F-080	12	45° x 45°	80	Amplatzer™ Left Atrial Appendage Occluder
DS-TV45X45-14F-080	14	45° x 45°	80	Amplatzer™ Left Atrial Appendage Occluder

Notă: Teaca de livrare Amplatzer™ Amulet™ include o teacă de livrare și un dilatator. Tecile de livrare 12 și 14 F includ un adaptor de închidere pentru a facilita atașarea componentelor suplimentare ale dispozitivului.

ATENȚIE: Acest produs este destinat utilizării de către sau sub îndrumarea unui medic. Înainte de utilizare, consultați Instrucțiunile de utilizare, în interiorul cutiei produsului (dacă este disponibil) sau la eifu.abbottvascular.com sau la edical.abbott/manuals pentru informații mai detaliate despre indicații, contraindicații, avertismente, precauții și evenimente adverse.

Informațiile conținute aici pentru DISTRIBUȚIE NUMAI în afara S.U.A. Verificați întotdeauna starea de reglementare a dispozitivului din regiunea dvs.

Ilustrațiile sunt doar reprezentări ale artiștilor și nu trebuie considerate desene sau fotografii de inginerie.

Abbott

3200 Lakeside Dr., Santa Clara, CA 95054, USA Tel: 1 800 227 9902
www.cardiovascular.abbott

™ Indicates a trademark of the Abbott group of companies.

* Indicates a third party trademark, which is property of its respective owner.

© 2020 Abbott. All Rights Reserved.

MAT-2002247 v2.0 | Item approved for Global OUS use only.



Dimiter



Abbott

OBTURATOARE DE DUCT AMPLATZER™

INDICAȚII

Obturatorul de duct Amplatzer™ și Obturatorul de duct Amplatzer™ II sunt dispozitive de ocluzie percutanată, transcater, destinate închiderii nechirurgicale a unui canal arterial permeabil (PDA) la pacienții cu o greutate de 6 kg sau mai mult.


Ocluderul Amplatzer Piccolo™ este un dispozitiv de ocluzie percutanată, transcater, destinat închiderii nechirurgicale a unui canal arterial permeabil (PDA) la pacienții cu o greutate de 700 de grame și mai mult la momentul procedurii.



INFORMAȚII DE SIGURANȚĂ IRM

Prin teste non-clinice, s-a dovedit că dispozitivele AMPLATZER™ sunt condiționate RM. Consultați Instrucțiunile de utilizare respective pentru a obține informații de scanare IRM mai detaliate.

Calitatea imaginii RM poate fi compromisă dacă zona de interes se află exact în aceeași zonă sau relativ aproape de poziția dispozitivului. Prin urmare, poate fi necesară optimizarea parametrilor de imagistică RM pentru a compensa prezența acestui implant.

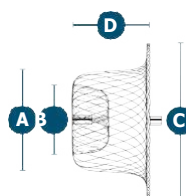


SPECIFICAȚII DISPOZITIV ȘI COMPATIBILITATEA SISTEMULUI DE LIVRARE

Obturatorul de duct Amplatzer™

Sistemul de livrare Amplatzer™ TorqVue™ 180°

Număr model/ de comandă	Diametru dispozitiv la aorta descendentă (mm) A	Diametru dispozitiv la artera pulmonară (mm) B	Diametru cămașă de retenție (mm) C	Lungime dispozitiv (mm) D	Număr model/ de comandă	Dimensiune minimă recomandată teacă	Diametru interior teacă (mm [inch])	Diametru exterior teacă (mm [inch])
9-PDA-003	5	4	9	5	9-ITV05F180/60	5 F	1.83 [0.072]	2.51 [0.099]
9-PDA-004	6	4	10	7				
9-PDA-005	8	6	12	7				
9-PDA-006	10	8	16	8				
9-PDA-007	12	10	18	8	9-ITV06F180/80	6 F	2.11 [0.083]	2.79 [0.110]
9-PDA-008	14	12	20	8				
9-PDA-009	16	14	22	8				
					9-ITV07F180/80	7 F	2.44 [0.096]	3.18 [0.125]

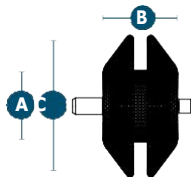


SPECIFICAȚII DISPOZITIV ȘI COMPATIBILITATEA SISTEMULUI DE LIVRARE

Obturatorul de duct Amplatzer™ II

Sistemul de livrare Amplatzer™ TorqVue™ LP

Număr model/ de comandă	Diametru zonă mediană (mm) A	Lungime dispozitiv (mm) B	Diametru disc (mm) C	Număr model/ de comandă	Dimensiune minimă recomandată cateter	Diametru interior cateter (mm [inch])	Diametru exterior cateter (mm [inch])
9-PDA2-03-04	3	4	9	9-TVLP4F90/060 sau 9-TVLP4F90/080	4 F	1.17 [0.046]	1.40 [0.055]
9-PDA2-03-06	3	6	9				
9-PDA2-04-04	4	4	10				
9-PDA2-04-06	4	6	10	9-TVLP5F90/060 sau 9-TVLP5F90/080	5 F	1.50 [0.059]	1.73 [0.068]
9-PDA2-05-04	5	4	11				
9-PDA2-05-06	5	6	11				
9-PDA2-06-04	6	4	12				
9-PDA2-06-06	6	6	12				

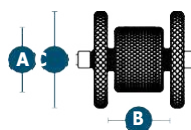

SPECIFICAȚII DISPOZITIV ȘI COMPATIBILITATEA SISTEMULUI DE LIVRARE

Ocluderul Amplatzer™ Piccolo™

Cateterul Amplatzer™ TorqVue™ LP

Număr model/ de comandă	Diametru zonă mediană (mm) A	Lungime între discurile de retenție (mm) B	Diametru disc (mm) C	Număr model/ de comandă	Dimensiune minimă recomandată cateter	Diametru interior cateter (mm [inch])	Diametru exterior cateter (mm [inch])
9-PDAP-03-02-L	4.00(0.157)	3.00(0.118)	2.00(0.079)	9-TVLPC4F90/080	4 F	1.17 [0.046]	1.4 [0.055]
9-PDAP-03-04-L	4.00(0.157)	3.00(0.118)	4.00(0.157)				
9-PDAP-03-06-L	4.00(0.157)	3.00(0.118)	6.00(0.236)				
9-PDAP-04-02-L	5.25(0.207)	4.00(0.157)	2.00(0.079)				
9-PDAP-04-04-L	5.25(0.207)	4.00(0.157)	4.00(0.157)				
9-PDAP-04-06-L	5.25(0.207)	4.00(0.157)	6.00(0.236)				
9-PDAP-05-02-L	6.50(0.256)	5.00(0.197)	2.00(0.079)				
9-PDAP-05-04-L	6.50(0.256)	5.00(0.197)	4.00(0.157)				
9-PDAP-05-06-L	6.50(0.256)	5.00(0.197)	6.00(0.236)				

SPECIFICAȚII PRODUSE AUXILIARE

Firul de ghidare Amplatzer™

Număr model/de comandă	Diametru (inch)	Corp	Descriere vârf	Lungime utilă (cm)
9-GW-001	0.035	Super rigid	7.5 mm, vârf J modificat	260

INFORMAȚII PRODUSE FĂRĂ LATEX

Aceste produse Amplatzer™ nu conțin latex.

ATENȚIE: Acest produs este destinat utilizării de către sau sub îndrumarea unui medic. Înainte de utilizare, consultați Instrucțiunile de utilizare din interiorul cutiei produsului (dacă sunt disponibile) sau la eifu.abbottvascular.com sau la medical.abbott/manuals pentru informații mai detaliate despre indicații, contraindicații, avertismente, precauții și evenimente adverse.

Informațiile conținute aici sunt destinate **NUMAI DISTRIBUȚIEI în afara S.U.A.** Verificați întotdeauna starea de reglementare a dispozitivului din regiunea dvs.

Ilustrațiile sunt doar reprezentări artistice și nu trebuie considerate ca fiind fotografii sau desene tehnice.

Abbott
3200 Lakeside Dr, Santa Clara, CA 95054, SUA Tel: 1.800.227.9902
www.cardiovascular.abbott

™ Indică o marcă comercială a grupului de companii Abbott.

‡ Indică o marcă comercială de terță parte, care aparține proprietarului respectiv.

© 2020 Abbott. Toate drepturile rezervate.

37971 MAT-2002324 v2.0 | Articol aprobat numai pentru Global OUS.



[Signature]





AMPLATZER™ DUCT OCCLUDERS

INDICATIONS

The Amplatzer™ Duct Occluder and Amplatzer™ Duct Occluder II are percutaneous, transcatheter occlusion devices intended for the nonsurgical closure of a patent ductus arteriosus (PDA) in patients with a weight of 6 kg or larger.


The Amplatzer Piccolo™ Occluder is a percutaneous, transcatheter occlusion device intended for the nonsurgical closure of a patent ductus arteriosus (PDA) in patients with a weight 700 grams and up at time of the procedure.



MRI SAFETY INFORMATION

Through nonclinical testing, Amplatzer™ devices have been shown to be MR Conditional. Refer to the appropriate Instructions for Use to obtain more detailed MRI scanning information.

MR image quality may be compromised if the area of interest is in the same area as or relatively close to the position of the device. Therefore, it may be necessary to optimize MR imaging parameters for the presence of this implant.

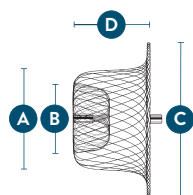


DEVICE SPECIFICATIONS AND DELIVERY SYSTEM COMPATIBILITY

Amplatzer™ Duct Occluder

Model/ Reorder Number	Device Diameter at Descending Aorta (mm) A	Device Diameter at Pulmonary Artery (mm) B	Retention Skirt Diameter (mm) C	Device Length (mm) D
9-PDA-003	5	4	9	5
9-PDA-004	6	4	10	7
9-PDA-005	8	6	12	7
9-PDA-006	10	8	16	8
9-PDA-007	12	10	18	8
9-PDA-008	14	12	20	8
9-PDA-009	16	14	22	8

Amplatzer™ TorqVue™ 180° Delivery System

Model/Reorder Number	Minimum Recommended Sheath Size	Sheath Inner Diameter (mm [inch])	Sheath Outer Diameter (mm [inch])
9-ITV05F180/60	5 F	1.83 [0.072]	2.51 [0.099]
9-ITV06F180/80	6 F	2.11 [0.083]	2.79 [0.110]
9-ITV07F180/80	7 F	2.44 [0.096]	3.18 [0.125]

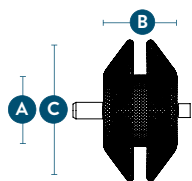


DEVICE SPECIFICATIONS AND DELIVERY SYSTEM COMPATIBILITY

Amplatzer™ Duct Occluder II

Amplatzer™ TorqVue™ LP Delivery System

Model/Reorder Number	Waist Diameter (mm) A	Device Length (mm) B	Disc Diameter (mm) C	Model/Reorder Number	Minimum Recommended Catheter Size	Catheter Inner Diameter (mm [inch])	Catheter Outer Diameter (mm [inch])
9-PDA2-03-04	3	4	9	9-TVLP4F90/060 or 9-TVLP4F90/080	4 F	1.17 [0.046]	1.40 [0.055]
9-PDA2-03-06	3	6	9				
9-PDA2-04-04	4	4	10				
9-PDA2-04-06	4	6	10				
9-PDA2-05-04	5	4	11	9-TVLP5F90/060 or 9-TVLP5F90/080	5 F	1.50 [0.059]	1.73 [0.068]
9-PDA2-05-06	5	6	11				
9-PDA2-06-04	6	4	12				
9-PDA2-06-06	6	6	12				

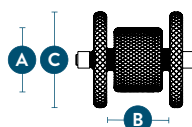

DEVICE SPECIFICATIONS AND DELIVERY SYSTEM COMPATIBILITY

Amplatzer™ Piccolo™ Occluder

Amplatzer™ TorqVue™ LP Catheter

Model/Reorder Number	Waist Diameter (mm) A	Length Between Retention Discs (mm) B	Disc Diameter (mm) C	Model/Reorder Number	Minimum Recommended Catheter Size	Catheter Inner Diameter (mm [inch])	Catheter Outer Diameter (mm [inch])
9-PDAP-03-02-L	4.00(0.157)	3.00(0.118)	2.00(0.079)	9-TVLPC4F90/080	4 F	1.17 [0.046]	1.4 [0.055]
9-PDAP-03-04-L	4.00(0.157)	3.00(0.118)	4.00(0.157)				
9-PDAP-03-06-L	4.00(0.157)	3.00(0.118)	6.00(0.236)				
9-PDAP-04-02-L	5.25(0.207)	4.00(0.157)	2.00(0.079)				
9-PDAP-04-04-L	5.25(0.207)	4.00(0.157)	4.00(0.157)				
9-PDAP-04-06-L	5.25(0.207)	4.00(0.157)	6.00(0.236)				
9-PDAP-05-02-L	6.50(0.256)	5.00(0.197)	2.00(0.079)				
9-PDAP-05-04-L	6.50(0.256)	5.00(0.197)	4.00(0.157)				
9-PDAP-05-06-L	6.50(0.256)	5.00(0.197)	6.00(0.236)				

ANCILLARY PRODUCT SPECIFICATIONS

Amplatzer™ Guidewire

Model/Reorder Number	Diameter (inch)	Body	Tip Description	Useable Length (cm)
9-GW-001	0.035	Super Stiff	7.5 mm, Modified J-tip	260

LATEX-FREE INFORMATION

These Amplatzer™ products do not contain latex.

CAUTION: This product is intended for use by or under the direction of a physician. Prior to use, reference the Instructions for Use, inside the product carton (when available) or at eifu.abbottvascular.com or at medical.abbott/manuals for more detailed information on Indications, Contraindications, Warnings, Precautions and Adverse Events.

Information contained herein for **DISTRIBUTION outside of the U.S. ONLY**. Always check the regulatory status of the device in your region.

Illustrations are artist's representations only and should not be considered as engineering drawings or photographs.

Abbott

3200 Lakeside Dr, Santa Clara, CA 95054, USA Tel: 1.800.227.9902
www.cardiovascular.abbott

™ Indicates a trademark of the Abbott group of companies.

‡ Indicates a third party trademark, which is property of its respective owner.

© 2020 Abbott. All Rights Reserved.

37971 MAT-2002324 v2.0 | Item approved for Global OUS only.






AMPLATZER™ TORQVUE™ AND AMPLATZER™ TREVISIO™ INTRAVASCULAR DELIVERY SYSTEMS



Information contained herein for **DISTRIBUTION outside of the U.S. ONLY.**
Always check the regulatory status of the device in your region.

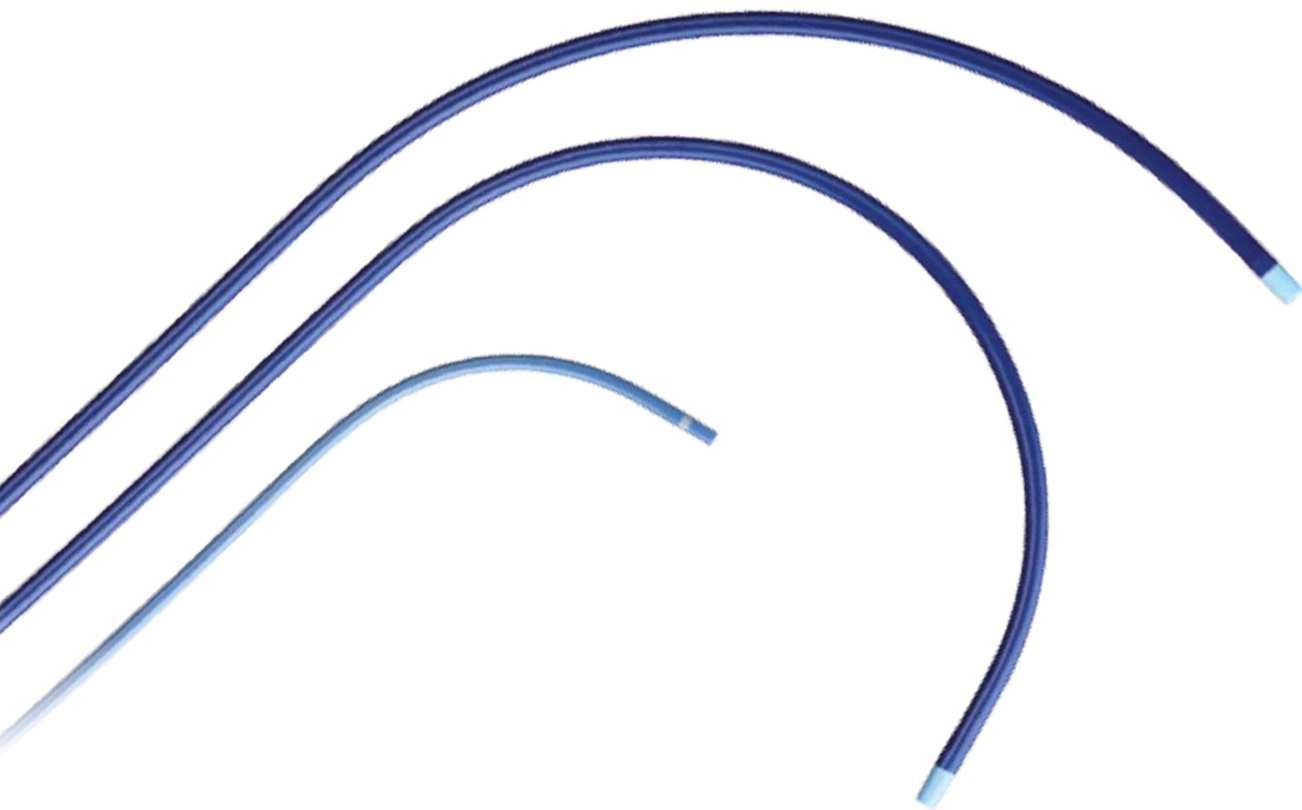

REINFORCED
POLYMER DELIVERY
SYSTEMS PROVIDING
**VERSATILE, CONTROLLED
DEVICE DELIVERY**

CONTROL

Amplatzer™ TorqVue™ and Amplatzer™ Trevisio™ Intravascular Delivery Systems are designed to provide a controlled pathway to the occlusion site.

Reinforced Polymer Delivery Sheath

- Engineered to provide added kink resistance through an internal stainless steel braid¹

Shaft Material Transitions From a Stiffer Proximal Section to a Softer Distal Section

- Built to ease pushability and maneuverability in tortuous anatomy

Soft, Radiopaque Tip

- Designed to minimize the risk of vessel damage and improve visualization of position

CONFIDENCE

Sheath performance is critical. Amplatzer TorqVue and Amplatzer Trevisio Intravascular Delivery Systems are designed to ease positioning and deployment of Amplatzer™ Occluders.

Radiopaque Distal Tip

- Facilitates precise positioning and accurate device placement

Low-friction PTFE Sheath Lining

- Allows for smooth, controlled delivery

Semi-clear Loader


- Assists in the confirmation of device collapse, flushing and air removal

Delivery Cables and Wires in Varying Gages and Flexibility

- Are specifically designed to aid in the delivery of each Amplatzer Occluder

1. Test(s) performed by and data on file at Abbott.

Information contained herein for **DISTRIBUTION outside of the U.S. ONLY**. Always check the regulatory status of the device in your region.

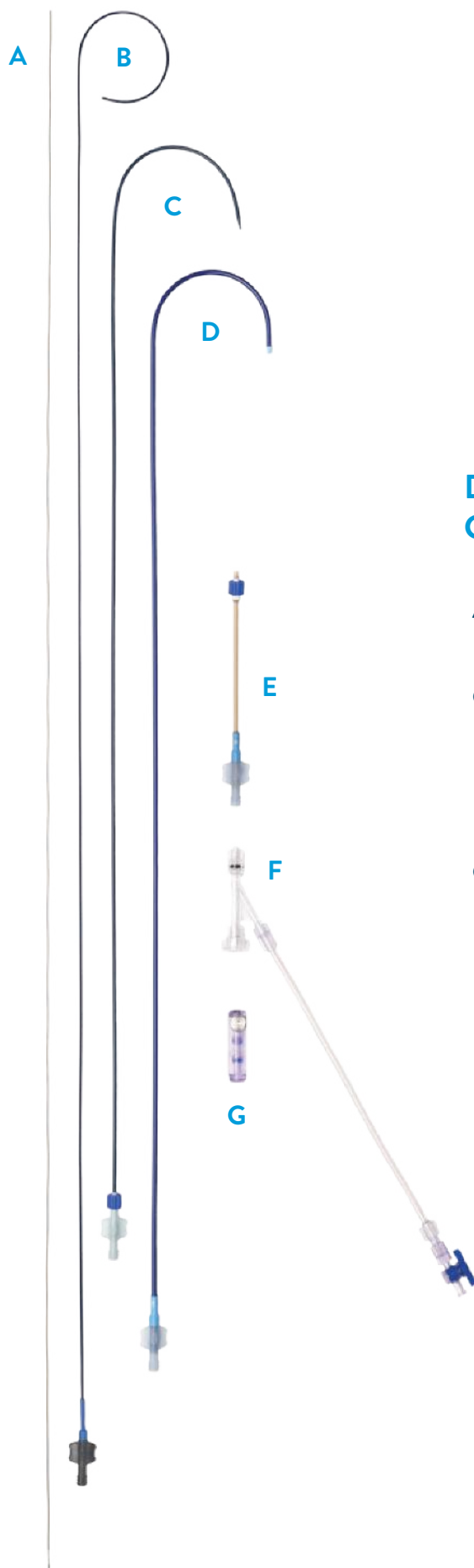

DELIVERY SYSTEM COMPONENTS*

- A. Delivery Cable
- B. Pusher Catheter
- C. Dilator
- D. Delivery Sheath
- E. Loader
- F. Hemostasis Valve
- G. Plastic Vise

*Components vary by delivery system. For a list of components that make up each Amplatzer™ TorqVue™ Amplatzer™ Trevisio™ Intravascular Delivery System, please see the ordering information on the following pages.



AMPLATZER™ TORQVUE™ 45° AND 180° DELIVERY SYSTEMS

MODEL/REORDER NUMBER	SHEATH SIZE (F)	TIP ANGLE	USEABLE LENGTH (CM)	RECOMMENDED FOR USE WITH
9-ITV06F45/60	6	45°	60	Amplatzer™ Septal Occluder and Muscular VSD Occluder
9-ITV07F45/60	7	45°	60	Amplatzer™ Septal Occluder and Muscular VSD Occluder
9-ITV07F45/80	7	45°	80	Amplatzer™ Septal Occluder and Muscular VSD Occluder
9-ITV08F45/60	8	45°	60	Amplatzer™ Septal Occluder, Cribiform Occluder, PFO Occluder and Muscular VSD Occluder
9-ITV08F45/80	8	45°	80	Amplatzer™ Septal Occluder, Cribiform Occluder, PFO Occluder and Muscular VSD Occluder
9-ITV09F45/80	9	45°	80	Amplatzer™ Septal Occluder, Cribiform Occluder, PFO Occluder, Muscular VSD Occluder and P.I. Muscular VSD Occluder
9-ITV10F45/80	10	45°	80	Amplatzer™ Septal Occluder and P.I. Muscular VSD Occluder
9-ITV12F45/80	12	45°	80	Amplatzer™ Septal Occluder
9-ITV13F45/80a	13	45°	80	Amplatzer™ Septal Occluder
9-ITV05F180/60	5	180°	60	Amplatzer™ Duct Occluder and Muscular VSD Occluder
9-ITV06F180/60	6	180°	60	Amplatzer™ Duct Occluder and Muscular VSD Occluder
9-ITV06F180/80	6	180°	80	Amplatzer™ Duct Occluder and Muscular VSD Occluder
9-ITV07F180/80	7	180°	80	Amplatzer™ Duct Occluder and Muscular VSD Occluder
9-ITV08F180/80	8	180°	80	Amplatzer™ Muscular VSD Occluder
9-ITV09F180/80	9	180°	80	Amplatzer™ Muscular VSD Occluder and P.I. Muscular VSD Occluder

Note: Amplatzer™ TorqVue™ 45° and 180° Delivery Systems include a delivery cable, delivery sheath, dilator, hemostasis valve, loader and plastic vise.



AMPLATZER™ TREVISIO™ 45° DELIVERY SYSTEM

MODEL/REORDER NUMBER	SHEATH SIZE (F)	TIP ANGLE	USEABLE LENGTH (CM)	RECOMMENDED FOR USE WITH
9-ATV06F45/60	6	45°	60	Amplatzer™ Septal Occluder, PFO Occluder, Muscular VSD Occluder
9-ATV07F45/60	7	45°	60	Amplatzer™ Septal Occluder, PFO Occluder, Muscular VSD Occluder
9-ATV07F45/80	7	45°	80	Amplatzer™ Septal Occluder, PFO Occluder, Muscular VSD Occluder
9-ATV08F45/60	8	45°	60	Amplatzer™ Septal Occluder, PFO Occluder, Muscular VSD Occluder
9-ATV08F45/80	8	45°	80	Amplatzer™ Septal Occluder, PFO Occluder, Muscular VSD Occluder
9-ATV09F45/80	9	45°	80	Amplatzer™ Septal Occluder, PFO Occluder, Muscular VSD Occluder
9-ATV10F45/80	10	45°	80	Amplatzer™ Septal Occluder, PFO Occluder, Muscular VSD Occluder
9-ATV12F45/80	12	45°	80	Amplatzer™ Septal Occluder
9-ATV13F45/80	13	45°	80	Amplatzer™ Septal Occluder

ORDERING INFORMATION



AMPLATZER™ TORQVUE™ EXCHANGE SYSTEMS

MODEL/REORDER NUMBER	SHEATH SIZE (F)	TIP ANGLE	USEABLE LENGTH (CM)	RECOMMENDED FOR USE WITH
9-EITV09F45/80	9	45°	80	Amplatzer™ Septal Occluder, Cribriform Occluder, PFO Occluder and Muscular VSD Occluder
9-EITV12F45/80	12	45°	80	Amplatzer™ Septal Occluder, Cribriform Occluder, PFO Occluder and Muscular VSD Occluder
9-EITV06F180/80	6	180°	80	Amplatzer™ Duct Occluder and Muscular VSD Occluder
9-EITV08F180/80	8	180°	80	Amplatzer™ Duct Occluder and Muscular VSD Occluder

Note: Amplatzer™ TorqVue™ Exchange Systems include a delivery sheath, dilator, exchange wire, hemostasis valve, loader and plastic vise.



AMPLATZER™ TORQVUE™ LP DELIVERY SYSTEM^A

MODEL/REORDER NUMBER	SHEATH SIZE (F)	TIP ANGLE	USEABLE LENGTH (CM)	DELIVERY CABLE LENGTH (CM)	RECOMMENDED FOR USE WITH
9-TVLP4F90/060	4	90°	60	160	Amplatzer™ Duct Occluder II
9-TVLP4F90/080	4	90°	80	195	Amplatzer™ Duct Occluder II
9-TVLP5F90/060	5	90°	60	160	Amplatzer™ Duct Occluder II
9-TVLP5F90/080	5	90°	80	195	Amplatzer™ Duct Occluder II

Note: Amplatzer™ TorqVue™ LP Delivery System includes a delivery cable, delivery catheter, hemostasis valve, loader and plastic vise.



AMPLATZER™ TORQVUE™ LP CATHETER^A

MODEL/REORDER NUMBER	SHEATH SIZE (F)	TIP ANGLE	USEABLE LENGTH (CM)	DELIVERY CABLE LENGTH (CM)	RECOMMENDED FOR USE WITH
9-TVLP4F90/080	4	90°	80	190	Amplatzer Piccolo™ Occluder

Note: Amplatzer™ TorqVue™ Exchange LP Catheter includes a delivery catheter, hemostasis valve, loader and self-sealing hemostasis valve.



AMPLATZER™ TORQVUE™ DELIVERY SYSTEM WITH PUSHER CATHETER

MODEL/REORDER NUMBER	SHEATH SIZE (F)	TIP ANGLE	USEABLE LENGTH (CM)	RECOMMENDED FOR USE WITH
9-ITVP07F180/80	7	180°	80	Amplatzer™ Membranous VSD Occluder
9-ITVP08F180/80	8	180°	80	Amplatzer™ Membranous VSD Occluder
9-ITVP09F180/80	9	180°	80	Amplatzer™ Membranous VSD Occluder

Note: Amplatzer™ TorqVue™ Delivery System with Pusher Catheter includes a delivery cable, delivery sheath, dilator, hemostasis valve, loader, plastic vise and pusher catheter.



AMPLATZER™ TORQVUE™ 2 DELIVERY SHEATH

MODEL/REORDER NUMBER	SHEATH SIZE (F)	TIP ANGLE	USEABLE LENGTH (CM)	RECOMMENDED USE
9-TV2-05F120	5	Straight	120	Intended to provide a pathway through which devices are introduced within the chambers and coronary vasculature of the heart or in the peripheral vasculature.
9-TV2-06F120	6	Straight	120	
9-TV2-07F120	7	Straight	120	

Note: The Amplatzer™ TorqVue™ 2 Delivery Sheath includes a delivery sheath and dilator.



AMPLATZER™ AMULET™ DELIVERY SHEATH

MODEL/REORDER NUMBER	SHEATH SIZE (F)	TIP ANGLE	USEABLE LENGTH (CM)	RECOMMENDED FOR USE WITH
DS-TV45X45-12F-080	12	45° x 45°	80	Amplatzer™ Left Atrial Appendage Occluder
DS-TV45X45-14F-080	14	45° x 45°	80	Amplatzer™ Left Atrial Appendage Occluder

Note: The Amplatzer™ Amulet™ Delivery Sheath includes a delivery sheath and dilator. The 12 and 14 F delivery sheaths include a flush adapter to facilitate attachment of additional device components.

CAUTION: This product is intended for use by or under the direction of a physician. Prior to use, reference the Instructions for Use, inside the product carton (when available) or at eifu.abbottvascular.com or at medical.abbott/manuals for more detailed information on Indications, Contraindications, Warnings, Precautions and Adverse Events.

Information contained herein for **DISTRIBUTION outside of the U.S. ONLY**. Always check the regulatory status of the device in your region.

Illustrations are artist's representations only and should not be considered as engineering drawings or photographs.

Abbott

3200 Lakeside Dr., Santa Clara, CA 95054, USA Tel: 1 800 227 9902
www.cardiovascular.abbott

™ Indicates a trademark of the Abbott group of companies.

‡ Indicates a third party trademark, which is property of its respective owner.

© 2020 Abbott. All Rights Reserved.

MAT-2002247 v2.0 | Item approved for Global OUS use only.



AMPLATZER™

GUIDEWIRES



CONCEPUT INTUITIV PENTRU O GAMĂ LARGĂ DE ANATOMII VASCULARE

Amplatzer Guidewires oferă suport pentru cateter și au capacitate de urmărire pentru o gamă largă de anatomii vasculare. Ele sunt proiectate și testate pentru a funcționa împreună cu dispozitivele de închidere Amplatzer.

Informațiile conținute aici pentru DISTRIBUȚIE NUMAI în afara S.U.A. Verificați întotdeauna starea de reglementare a dispozitivului din regiunea dvs.



Signature



GUIDEWIRES AMPLATZER OFERĂ LUBRIFIERE ȘI POZIȚIONARE EXCELENTĂ **CAPACITĂȚI CU MINIME INTERFERENȚE CU SISTEMUL VASCULAR.**

DESIGN INTUITIV

Oțel inoxidabil

- Permite o capacitate de poziționare îmbunătățită *

Acoperire cu PTFE

- Oferă lubrifiere pentru o navigare lină prin anatomie sinuoasă *

Design cu vârf J

- Reduce riscul de deteriorare a peretelui intern pentru poziționarea atraumatică *

Lungime de schimb până la 300 cm

- Asigură o lungime adecvată pentru schimbul unei game largi de dispozitive peste fir *

Proprietăți Patru curbe

- Proiectat pentru a atinge anatomia vizată *

Tipul corpului

- Super Stiff
 - Oferă suport pentru urmărirea sistemului de livrare Amplatzer TorqVue™ la locul de tratament*



Amplatzer

* Teste efectuate de și date în dosar la Abbott

Informațiile conținute aici pentru DISTRIBUȚIE NUMAI în afara S.U.A. Verificați întotdeauna starea de reglementare a dispozitivului din regiunea dvs..

INFORMATII PENTRU COMANDA

CARACTERISTICI AMPLATZER GUIDEWIRE

Model / Număr comană	Diametru (inch)	Corp	Descriere Vârf	Lungime utilizabilă (cm)
9-GW-001	0.035	Super Stiff	7.5 mm, Modified J-tip	260
9-GW-002	0.035	Super Stiff	1.5 mm, Modified J-tip	260
9-GW-003	0.035	Super Stiff	6 mm, J-tip	300

GHIDURILE AMPLATZER SUNT PROIECTE PENTRU A FI UTILIZATE CU URȘĂMĂTOARELE AMPLATZER OCCLUDERE

Model	Use with the following Amplatzer™ Occluders
9-GW-001	Amplatzer™ Duct Occluder Amplatzer™ Duct Occluder II Amplatzer Piccolo™ Occluder
9-GW-002	Amplatzer™ Septal Occluder Amplatzer™ Cribriform Occluder Multi-Fenestrated Septal Occluder Amplatzer™ Talisman™ PFO Occluder Amplatzer™ Amulet™ Left Atrial Appendage Occluder
9-GW-003	Amplatzer™ Muscular VSD Occluder Amplatzer™ P.I. Muscular VSD Occluder



Abbott se concentrează pe reducerea
riscului prin găsirea continuă a
**modalităților de a pune mai
mult control în mâinile celor
care salvează și îmbunătățesc
vieți.**

ATENȚIE: Acest produs este destinat utilizării de către sau sub îndrumarea unui medic. Înainte de utilizare, consultați Instrucțiunile de utilizare, în cutia produsului (dacă este disponibil) sau la eifu. abbottvascular.com sau la medical.abbott/manuals pentru informații mai detaliate despre indicații, contraindicații, avertismente, precauții și evenimente adverse

Informațiile conținute aici pentru DISTRIBUȚIE NUMAI în afara S.U.A. Verificați întotdeauna starea de reglementare a dispozitivului din regiunea dvs.

Ilustrațiile sunt doar reprezentări ale artiștilor și nu trebuie considerate desene sau fotografii de inginerie. Fotografii din dosar la Abbott.

Abbott

3200 Lakeside Dr, Santa Clara, CA 95054, USA

™ Indicates a trademark of the Abbott group of companies.

www.structuralheart.abbott

© 2023 Abbott. All Rights Reserved. MAT-2004323 v2.0

Item approved for OUS use only.



Abbott

AMPLATZER™ GUIDEWIRES



INTUITIVELY DESIGNED FOR A WIDE RANGE OF VASCULAR ANATOMY

Amplatzer Guidewires offer catheter support and tracking capabilities for a wide range of vascular anatomy. They are designed and tested to perform in conjunction with Amplatzer occluders.

Information contained herein for
DISTRIBUTION outside of the U.S. ONLY.
Always check the regulatory status of the device
in your region.



AMPLATZER GUIDEWIRES OFFER EXCELLENT LUBRICITY AND POSITIONING CAPABILITIES WITH MINIMAL INTERFERENCE TO VASCULATURE.

INTUITIVELY DESIGNED

Stainless Steel

- Allows for enhanced positing capability*

PTFE-coating

- Provides lubricity for smooth navigation through tortuous anatomy*

J-tip Design

- Reduces the risk of internal wall damage for atraumatic positioning*

Exchange Length up to 300 cm

- Assures adequate length for exchange of a wide variety of devices over the wire*

Four Curve Properties

- Designed to reach targeted anatomy*

Body Type

- Super Stiff
 - Provides support to track the Amplatzer TorqVue™ Delivery System to the treatment site*

* Test(s) performed by and data on file at Abbott.

ORDERING INFORMATION

AMPLATZER GUIDEWIRE SPECIFICATIONS

Model / Reorder Number	Diameter (inch)	Body	Tip Description	Usable Length (cm)
9-GW-001	0.035	Super Stiff	7.5 mm, Modified J-tip	260
9-GW-002	0.035	Super Stiff	1.5 mm, Modified J-tip	260
9-GW-003	0.035	Super Stiff	6 mm, J-tip	300

AMPLATZER GUIDEWIRES ARE DESIGNED TO BE USED WITH THE FOLLOWING AMPLATZER OCCLUDERS.

Model	Use with the following Amplatzer™ Occluders
9-GW-001	Amplatzer™ Duct Occluder Amplatzer™ Duct Occluder II Amplatzer Piccolo™ Occluder
9-GW-002	Amplatzer™ Septal Occluder Amplatzer™ Cribriform Occluder Multi-Fenestrated Septal Occluder Amplatzer™ Talisman™ PFO Occluder Amplatzer™ Amulet™ Left Atrial Appendage Occluder
9-GW-003	Amplatzer™ Muscular VSD Occluder Amplatzer™ P.I. Muscular VSD Occluder

Abbott is focused
on reducing risk by continuously
finding ways to put more control
into the hands of those who
save and enhance lives.

CAUTION: This product is intended for use by or under the direction of a physician. Prior to use, reference the Instructions for Use, inside the product carton (when available) or at eifu.abbottvascular.com or at medical.abbott/manuals for more detailed information on Indications, Contraindications, Warnings, Precautions and Adverse Events.

Information contained herein for **DISTRIBUTION outside of the U.S. ONLY**. Always check the regulatory status of the device in your region.

Illustrations are artist's representations only and should not be considered as engineering drawings or photographs. Photo(s) on file at Abbott.

Abbott

3200 Lakeside Dr, Santa Clara, CA 95054, USA

TM Indicates a trademark of the Abbott group of companies.

www.structuralheart.abbott

© 2023 Abbott. All Rights Reserved. MAT-2004323 v2.0

Item approved for OUS use only.

