

>> Low Flux High Performance Series

Серия высокоэффективных половолоконных диализаторов



Штаб-квартира корпорации

WEIHAI WEIGAO BLOOD PURIFICATION PRODUCTS CO., LTD.

No.20 Xingshan Road, Weihai Torch Hi-tech Science Park, 264210 Weihai,
Shandong Province, PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA.

Tel: +86 631 5660598 Fax: +86 631 5660598

Международная штаб-квартира по деловым операциям

WEGO HEALTHCARE (SHENZHEN) CO., LTD.

25/F, East Technology Mansion, No.16, Keyuan Road, Nanshan District,
Shenzhen, China

Tel: +86 755 33892500 Fax: +86 755 33892508

E-mail: info@wego-healthcare.com

www.wego-healthcare.com

PN:LFHP20190517



WEGO
THE BLOOD PURIFICATION EXPERT


Минеральные и костные нарушения при хронической болезни почек (МКН-ХБП) стали ключевой темой заболеваний почек во всем мире.

Уровень заболеваемости ХБП продолжает расти по всему миру. Мы начинаем понимать, что МКН-ХБП оказывают влияние на ХБП и результаты лечения пациентов на диализе. Таким образом, МКН-ХБП стали ключевой темой во всем мире. По Инициативе Национального почечного фонда, на основе изучения заболеваний почек, опубликованы рекомендации по улучшению качества лечения МКН-ХБП




01 Гиперфосфатаземия является независимой причиной смерти пациентов с хронической болезнью почек (ХБП)

Исследование Международного центра исследований результатов диализа и практики (DOPPS) показывает, что риск гибели пациентов возрастает при повышении концентрации кальция и фосфора в крови.

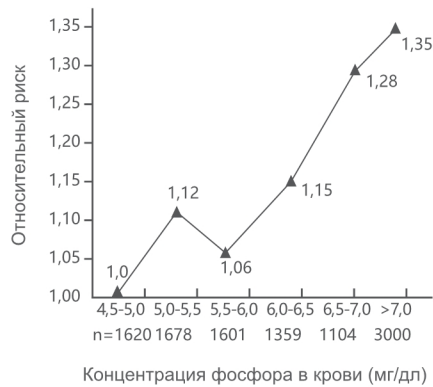


03 Более качественное удаление низкомолекулярных токсинов

Более качественное удаление низкомолекулярных токсинов улучшает качество и прогноз жизни клиента.

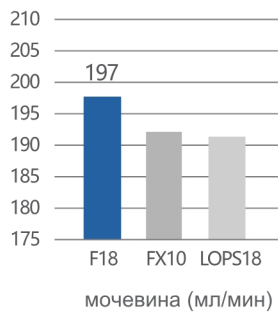


02 Очевидный эффект фосфатного клиренса

Снижение уровня фосфора в крови пациента и уменьшение коэффициента развития осложнений у пациентов.

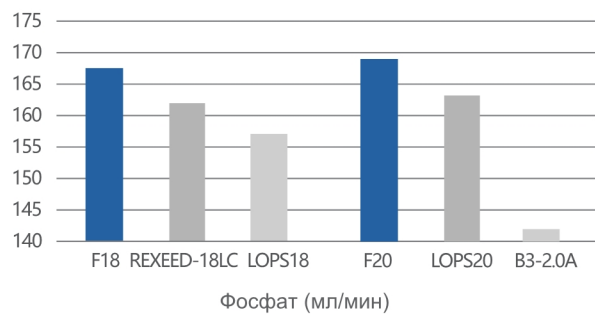

04 Великолепная биосовместимость

Мембранное волокно из полисульфона демонстрирует великолепную биосовместимость и имеет высокую способность удержания эндотоксина.

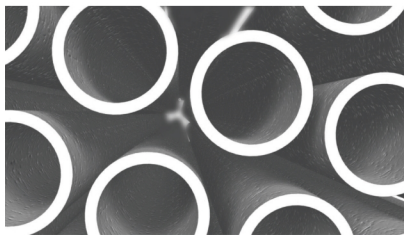

05 Уменьшенный объём первичного заполнения

Использование одного пакета физиологического раствора на один сеанс потенциально снижает стоимость диализной терапии.



Технические характеристики

Показатели in vitro	F15	F18	F20
Коэффициент ультраfiltrации (мл/ч/мм/ рт.ст)	19	23	25
Q _D =200 мл/мин	Мочевина (мл/мин)	193	197
	Креатинин (мл/мин)	177	182
	Фосфат (мл/мин)	159	167
	Витамин В12 (мл/мин)	109	121
Q _D =300 мл/мин	Мочевина (мл/мин)	251	263
	Креатинин (мл/мин)	228	238
	Фосфат (мл/мин)	196	208
	Витамин В12 (мл/мин)	116	128
Q _D =400 мл/мин	Мочевина (мл/мин)	284	302
	Креатинин (мл/мин)	252	267
	Фосфат (мл/мин)	219	235
	Витамин В12 (мл/мин)	124	138
КоА мочевина (мл/мин)	836	1010	1123
Эффективная поверхность (м²)	1,5	1,8	2,0
Объем заполнения (мл)	78	100	110

Условия испытания

Клиренс : Q_D=500 мл/мин, Q_F=0 мл/мин

КоА: Q_B=300 мл/мин, Q_D=500 мл/мин

UF-коэффициент: бычья кровь, содержание белка: 60±5 г/л, TMP: 100 ммHg

TMP=трансмембранное давление

Толщина стенки/просвет(μм)	40μм/200μм	Материал мембраны	Полисульфон
Макс. TMP	500 ммHg	Материал корпуса	Поликарбонат
Метод стерилизации	Радиационная	Материал заливки	Полиуретан
Единиц в коробке	12 шт	Манжета	Мед. резина с кремнием

Примечание. Продукция этой серии характеризуется высокой эффективностью ультраfiltrации и проницаемости. Используется с оборудованием для диализа с функцией контроля ультраfiltrации.