




1.7.2 Panou inferior

1. **Orificiu de răcire** – Asigură circulația aerului.

MĂSURĂ DE PRECAUȚIE: Nu împiedicați fluxul de aer la orificiile de răcire. Nu înveliți și nu acoperiți.

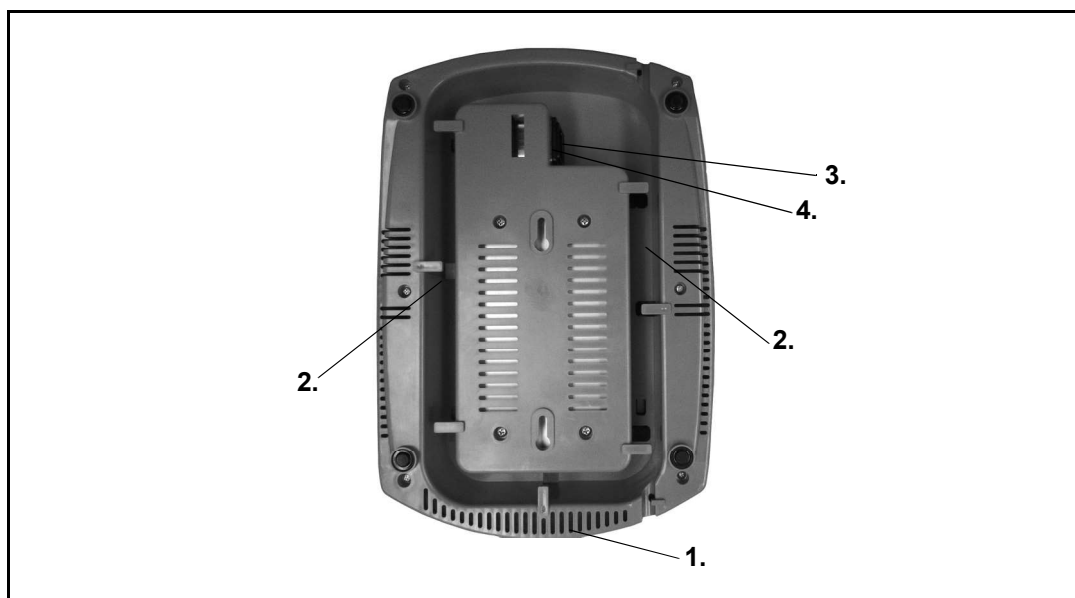

2. **Pachet de cablu** – Utilizat pentru depozitarea cablului în exces.

3. **Port pentru rețeaua de alimentare electrică** – Acceptă cablul de alimentare furnizat (de calitate necesară utilizării în spital) și asigură alimentarea cu curent alternativ.

4. **Suport pentru siguranță** – Conține două siguranțe. Pentru înlocuirea siguranțelor, a se vedea secțiunea „3.3 Înlocuirea siguranțelor fuzibile”.