


КАТЕТЕР ДЛЯ ТОРАКАЛЬНОГО ДРЕНАЖА с троакаром

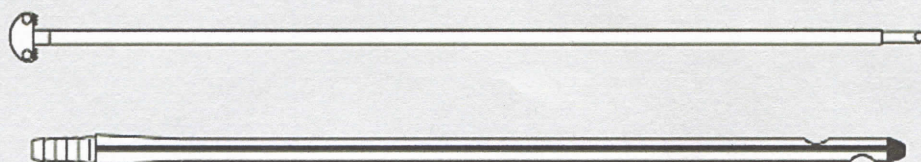

Номер по каталогу:	Размер катетера	Троакар размер / длина
KDKPT10F	10F	10F / 25 см
KDKPT16F	16F	16F / 25 см
KDKPT24F	24F	24F / 40 см
KDKPT28F	28F	28F / 40 см
KDKPT32F	32F	32F / 40 см

Используется для аспирации газа или жидкости из грудной полости. Рентгеноконтрастная полоса позволяет контролировать положение катетера. Боковые отверстия способствуют эффективному дренированию.

Катетер изготовлен из высококачественного медицинского PVC, имеет необходимую мягкость и эластичность.

Пример номера по каталогу: KDKPT24F

КАТЕТЕРЫ ДЛЯ ЭМБОЛЕКТОМИИ

Тип Fogarty, одноканальные



Номер по каталогу:	Катетер размер / длина	Цветовая маркировка коннектора	Наружный диаметр баллона	Объём баллона
EFB2F40	2F / 40 см	прозрачный	5 мм	0.15 мл
EFB2F60	2F / 60 см	прозрачный	5 мм	0.15 мл
EFB3F40	3F / 40 см	зелёный	6 мм	0.20 мл
EFB3F80	3F / 80 см	зелёный	6 мм	0.20 мл
EFB4F40	4F / 40 см	красный	8 мм	0.70 мл
EFB4F80	4F / 80 см	красный	8 мм	0.70 мл
EFB5F40	5F / 40 см	белый	10 мм	1.50 мл
EFB5F80	5F / 80 см	белый	10 мм	1.50 мл
EFB6F40	6F / 40 см	голубой	12 мм	2.0 мл
EFB6F80	6F / 80 см	голубой	12 мм	2.0 мл
EFB7F40	7F / 40 см	жёлтый	14 мм	2.50 мл
EFB7F80	7F / 80 см	жёлтый	14 мм	2.50 мл
EFB8F40	8F / 40 см	коричневый	16 мм	3.50 мл
EFB8F80	8F / 80 см	коричневый	16 мм	3.50 мл
EFB10F40	10F / 40 см	серый	20 мм	4.50 мл
EFB10F80	10F / 80 см	серый	20 мм	4.50 мл

Эмболектомические катетеры предназначены для безопасного удаления тромбоэмболических масс из артерий и вен. Катетеры изготовлены из биологически нейтрального материала. Эластичность катетеров адекватна их размеру. Баллон выполнен из латекса. Это позволяет выдерживать необходимое давление. Гладкая шелковистая поверхность баллона способствует быстрому введению катетера. Катетеры имеют цветовую кодировку размеров, она соответствует международному цветовому коду. Цветовые метки нанесены с интервалом 10 см. Мандрен изготовлен из нержавеющей стали, он облегчает введение катетера в сосуд. Мягкий закруглённый кончик сводит к минимуму риск перфорации стенки сосуда. Другой конец катетера имеет разъём типа Luer-lock. На каждом катетере указаны диаметр катетера и размер баллона. Стерилизация катетеров проводится гамма-облучением. Одноканальные катетеры Fogarty могут быть также использованы для удаления конкрементов из желчных протоков.

Пример номера по каталогу: EMB 5F40