


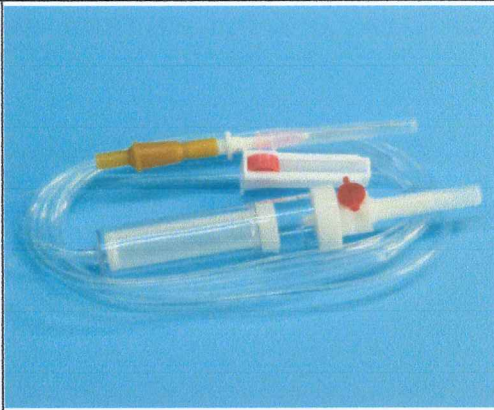


	Technical Data Sheet	Revision : 5
	Blood Transfusion Set for Single Use	Date : 2023-07-03
		Page 1 of 3

Manufacturer: Shandong Yiguang Medical Instruments Co., Ltd	Blood transfusion set for single use * with needle Ref code : BT-1	
---	---	--

Components	Name	Material	Index
	Spike cap	Polyethylene (PE)	Length: 40mm
	Spike	Acrylonitrile Butadiene Styrene (ABS)	Length: 28mm
	Air filter	PTFE	
	Air inlet cap	Polyvinyl chloride (PVC)	
	Drip chamber	Polyvinyl chloride (PVC)	Length: 87mm+/-0.5mm
	Filter	ABS & Nylon	Micron: 200um
	Tube	Polyvinyl chloride (PVC), Semi-rigid, Kink Resistant	ID/OD:3.0mm/4.0mm Length: 155cm
	Roller clamp	Polyethylene (PE)	Clamp shell Length: 48.6mm Roller diameter: 13.3+/-0.1mm
	Injection site	Natural rubber (NR)	Length: 49mm
	Luer connector	Polypropylene (PP)	Luer slip
	In vein needle	304 Stainless steel, Non-pyrogenic, Non-toxic	18G*1 1/2"
	Glue	Cyclohexanone	
Intended use		Used for vein blood giving. Works with gravity only.	
Drops		20drops=1ml+/-0.1ml of distilled water (at 20°C+/-2°C)	
Sterilization		Ethylene oxide (E.O)	
Shelf life		60months	
Product standards		ISO 1135-4: 2015	
Classification		MDD 93/42/EEC, Class IIa	
Certificates		CE, ISO13485	
Packaging		* Single PE bag, 25pcs per middle bag, 16middle bags per carton	

	Technical Data Sheet Blood Transfusion Set for Single Use	Revision : 5
		Date : 2023-07-03
		Page 2 of 3

Operation Instruction	<div><div>1. Open the individual packing and take out the transfusion set</div><div>2. Firmly close roller clamp</div><div>3. Insert plastic spike into container</div><div>4. Press drip chamber to fill half of it</div><div>5. Open roller clamp and expel air bubbles</div><div>6. Close roller clamp again</div><div>7. Apply needle into patients vein</div><div>8. Adjust flow rate by roller clamp</div><div>9. Open air inlet if use glass container and close the air inlet if use soft container</div><div>10.Dispose properly as medical waste after use</div></div>												
Storage	Store in relative humidity less than 80%, no corrosive gas, cool, dry, well ventilated, clean environment.												
Cautions	<div>Check the batch number and validity before use.</div> <div>Tighten the needle before use.</div> <div>It is strictly prohibited to use if the single packing damaged or needle cap drop off.</div> <div>For single use only, use immediately after unsealed, destroy after use. It is strictly prohibited to reuse.</div>												
Marks	<div><div>STERILEEO</div><div>CE0197</div><div></div></div>												
Packing pictures	<div><div>* INDIVIDUAL LABEL PRINT</div><div><table><tr><td>产品名称</td><td>医光输血器小包装</td><td>产品袋形</td><td>筒料</td></tr><tr><td>印刷方式</td><td>表印 规格 10x23cm</td><td>印刷色数</td><td>1</td></tr><tr><td>印刷颜色</td><td>白 红</td><td></td><td></td></tr></table></div><div><div>尊敬的客户：请您认真核对文字、排版及内容色彩，确认通知设计人员制版，如有错误应及时通知做修改，否则本厂及设计人员概不负任何责任。</div><div>做稿日期：G20220112 定版日期：</div></div><div><div><div><div>DESCHIDE AICI</div><div></div></div><div><div><div><div>SET PENTRU TRANSFUZII</div><div>Steril, non-toxic, apirogen</div><div>Model 18G * 1 1/2", tub 155 cm</div><div>Atenționări și precauții</div><div><ul style="list-style-type: none">A se arunca după utilizareA se evita contactul direct al ambalajului cu deschis sau deterioratA se utiliza pentru transfuzii de sânge sau de componente ale sângeluiDupă utilizare, a se considera ca deșeu medical contaminatPerioada de valabilitate: 5 ani</div><div>Condiții de păstrare</div><div>A se păstra în locurile curate, uscate și lipsite de insecte.</div><div>Pentru mai multe informații, consultați instrucțiunile pentru utilizare.</div><div>Număr de înregistrare:DM000017110</div></div><div><div>ISO13485:2016</div><div>20 picături = 1 ml +/- 0.1 ml</div><div>REF: BT-1</div><div>STERILEEO</div><div></div><div>Produs în:</div><div>Shandong Yiguang Medical Instruments Co.,Ltd</div><div>Add:Sejia Science-Technology Industrial Park, Chiqing County 251700, Shandong, China</div><div>Reprezentant autorizat în Republica Moldova:</div><div>SRL Dita EstFarm</div><div>Add: 25, Burehista str., MD-2032, Chisinau, Republica Moldova</div><div>Telephone: +373 22 405 444; Fax: +373 22 63 77 62</div><div>Nr.LAT/20220404/1 Datas EXP:20270101</div></div></div><div><div>10cm</div><div>23cm</div></div></div></div></div></div>	产品名称	医光输血器小包装	产品袋形	筒料	印刷方式	表印 规格 10x23cm	印刷色数	1	印刷颜色	白 红		
产品名称	医光输血器小包装	产品袋形	筒料										
印刷方式	表印 规格 10x23cm	印刷色数	1										
印刷颜色	白 红												



Technical Data Sheet


Blood Transfusion Set for Single Use

Revision : 5

Date : 2023-07-03

Page 3 of 3

Drawing

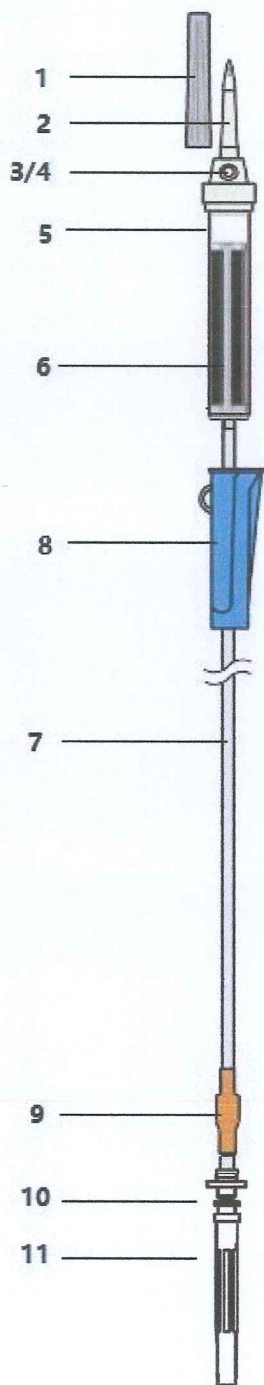

Description:

1. Spike cap
2. Spike
3. Air filter
4. Air inlet cap
5. Drip chamber
6. Blood filter
7. Tube 155cm
8. Roller clamp
9. Injection site
10. Luer slip connector
11. Needle

