


Таймер

Еженедельный таймер используется для того чтобы бактерицидный рециркулятор периодически включался и выключался в предварительно запрограммированные ежедневные или еженедельные периоды времени. Затем запрограммированные интервалы повторяются в течение следующих периодов соответственно. Таким образом бактерицидный рециркулятор воздуха может автономно эксплуатироваться в любых помещениях.

Цикл программирования: на неделю (7 дней), далее автоматическое повторение недельной программы.

Цифровой электронный таймерный переключатель с ежедневной программой, работающий по астрономическому времени. Ежедневное исполнение программы до 18-ти действиями включения/отключения и возможностью принудительного ручного управления. сохранение настроек таймера при пропадании питающего напряжения: до 60 дней (встроенный литиевый аккумулятор).

Автоматическая еженедельная коррекция времени: в допуске ± 30 сек.

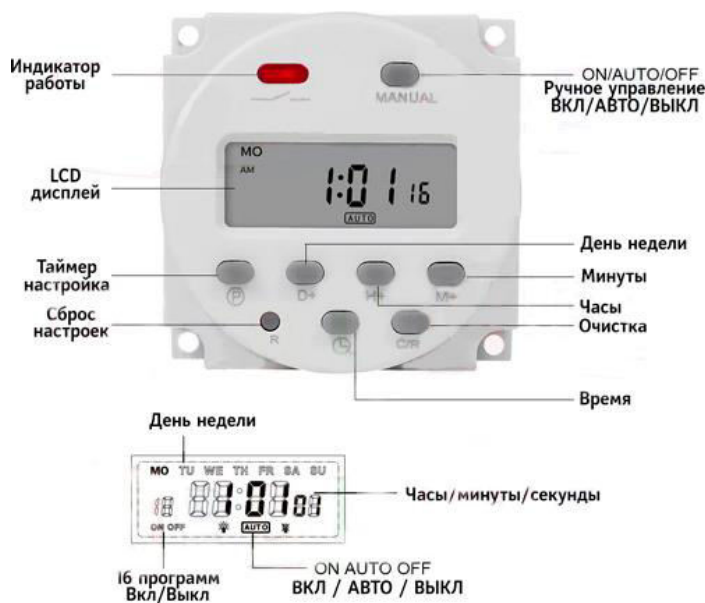

можно установить опции «включения» и «выключения» таймера следующим образом:

- 1=>: воскресенье.
- 2=>: с понедельника по пятницу.
- 3=>: суббота и воскресенье (выходные).
- 4=>: с понедельника по пятницу (рабочие дни).
- 5=>: понедельник, среда, пятница.
- 6=>: вторник, четверг, суббота.
- 7=>: с понедельника по среду.
- 8=>: со среды по субботу.

МО–понедельник TU–вторник, WE–среда, TH–четверг,FR–пятница, SA–суббота, SU–воскресенье.

Для входа в режим программирования реле нужно нажать кнопку «P». После её нажатия на экране появится надпись 1 ON. Она означает, что сейчас мы будем настраивать время включения первой программы.

Кнопкой «D+» настраиваем дни когда действует программа, а кнопками «H+» и «M+» время. Затем снова нажимаем снова на кнопку «P». После её нажатия на экране появится надпись 1 OFF. Мы перешли в настройки выключения первой программы.

Аналогично настраиваем время отключения программы. При следующем нажатии на кнопку «P», мы увидим на дисплее надпись 2 ON.

Так будет продолжаться до 17, а затем Вы выйдете из режима программирования. При необходимости настраиваем нужные программы. Для быстрого выхода из режима программирования нужно нажать на кнопку с часами. Для того, чтобы удалить отдельную программу, нужно зайти в режим программирования, выбрать программу и нажать на кнопку «C/R»