


Dezinfectant pe baza de alcool, pentru instrumente, dispozitive medicale și suprafețe

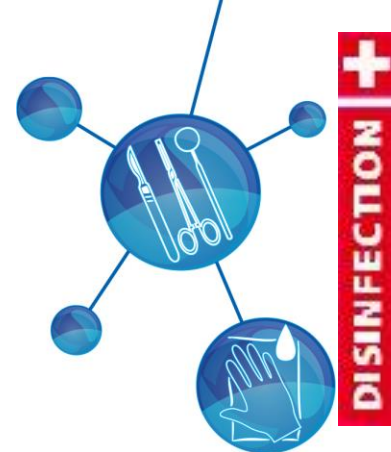

1. Date generale:

1.1 Chemidez - dezinfectant cu acțiune rapidă, pe bază de alcool cu un spectru larg de dezinfectare. Destinat dezinfecției instrumentarului, dispozitivelor medicale și a suprafețelor.

1.2 Ingrediente: alcool, săruri cuaternare de amoniu și altele.

1.3 Corespunde cerințelor standardului SM EN 14885:2019 și SM EN 14885:2022 “Aplicarea standardelor europene la antiseptice și dezinfectante chimice” (în vigoare prin Hotărârile Institutului de Standardizare din Moldova nr. 79 din 11.04.2019 și nr. 155 din 19.09.2022).

1.4 Testat conform standardului pentru evaluarea activității bactericide și fungicide în zonele alimentare, industriale, casnice și instituționale.

1.5 Înregistrat la Agenția Națională pentru Sănătatea Publică, Certificat de înregistrare de stat/avizare sanitară al produsului biocid Nr. 00087 din 20.11.2020 valabil până la 20.11.2030. *Grupa principală 1, tip de produs 2, 3.*

1.6 Înregistrat la Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale sub Nr. DM000185534, CL IIa.

1.7 Asigurarea clasificării, eficacității, ambalării și etichetării conform: HG Nr. 344/2020 din 10.06.2020 “Regulamentul sanitar privind punerea la dispoziție pe piață și utilizarea produselor biocide”; “Directive for Medical Devices 93/42 EEC”.

1.8 Dezinfectant se referă la clasă IV de pericol (substanța nepericuloasă) conform GOST 12.1.007-76.

Produsul nu irită pielea și mucoasele ochilor, conform rapoartelor privind evaluarea testării toxicologice a produsului efectuate de Agenția Națională de Sănătate Publică.

2. Eficacitatea microbiologică:

2.1 Chemidez asigură spectru bactericid, fungicid / levuricid, virulicid, tuberculocid / micobactericid în condiții curate și murdare, confirmate prin testări.

3. Instrucțiuni și domenii de utilizare:

3.1 Chemidez nu se diluează!!! Se aplică prin pulverizare sau ștergere pe instrumente, dispozitive medicale și suprafețe vizate. Se lasă să acționeze între 30 - 60 secunde, dacă este necesar, ștergeți după timpul de expunere.

3.2 Nu se potrivește pentru dezinfectarea sticlei de acril (sticlei organice), a suprafețelor lăcuite solubile în alcool. Suprafețele trebuie acoperite complet cu soluție.

Tabel 1

Domeniul de aplicare	Microorganisme	Obiectul dezinfectării	Timpul de acțiune	Metoda de dezinfectare
1. Institutii medicale 2. Industria farmaceutică 3. Industria cosmetică (centre fitness, SPA, saloane de frumusețe s.a) 4. Industria alimentară 5. Instituții de învățământ (preșcolar, școlar, universitar, case-internat s.a.) 6. Mediu casnic	Bacterii, Fungi/Levuri, Virusi	- instrumente - dispozitive medicale - suprafețe	15 - 30sec	Pulverizare / Ștergere
	Mycobacterium terrae Mycobacterium avium		30 - 60 sec	

4. Măsurile de precauție:

4.1 Inflamabil!!!

4.2 În cazul contactului cu ochii clătiți imediat cu multă apă și consultați medicul.

4.3 A se respecta regulile de igienă personală în timpul utilizării. Toate lucrările cu dezinfectantul trebuie să fie efectuate în încăperi bine ventilate sau aerisite, deoarece inhalarea a vaporilor pe parcursul unei perioade îndelungate poate provoca o stare generală de rău.

4.4 Persoanele care au contraindicații sau care sunt sensibile la interacțiunea cu substanțele chimice nu sunt admise la operarea cu dezinfectant.

4.5 A se evita contactul cu ochii în timpul utilizării.

4.6 În încăperile unde se folosește dezinfectantul este interzisă utilizarea focului deschis, inclusiv fumatul. A se evita formarea electricității statice în încăperile de păstrare a dezinfectantului.

4.7 A se păstra în ambalajul original închis, în încăperi uscate, departe de lumina directă, separat de acizii puternici, oxidanți, alimente și alte substanțe ușor inflamabile, la temperatura sub +50°C.

4.8 Termen de valabilitate: 2 ani

5. Măsurile de prim ajutor în caz de intoxicație:

5.1 În cazul contactului cu pielea este inofensiv.

5.2 În cazul contactului cu ochii se spală bine cu o cantitate mare de apă timp de cel puțin 15 minute. Dacă apar iritații consultați medicul.

5.3 În cazul înghițirii este necesar de a clăti cavitatea bucală cu o cantitate mare de apă. Nu se recomandă provocarea vomitării. Consultați medicul.

6. Metode fizico-chimice și analitice de control

Tabel 2

Indicii	Norma
Aspect exterior, culoare, miros	Lichid omogen transparent de culoare albastră fără incluziuni străine cu miros de alcool
Densitatea, g/cm ³	0,80 – 0,95
pH	6,5 - 9,0

6.1 Aspectul exterior se determina vizual conform GOST 14618.0-78.

6.2 Determinarea densității se realizează prin metoda gravimetrică în conformitate cu GOST 18995.1-73.

6.3 Determinarea activității ionilor de hidrogen (pH) se efectuează în conformitate cu GOST R 50550:2005.