

SCHEDA TECNICA PRODOTTO TECHNICAL DATA SHEET

DATA EMISSIONE / DATE OF ISSUE
22.11.2021

ARTICOLO: **PIPETTE STERILI PER SIEROLOGIA**
ITEM: **STERILE SEROLOGICAL PIPETTES**



DESCRIZIONE / DESCRIPTION



PIPETTE MONOUSO IN PLASTICA PER SIEROLOGIA AD ESPULSIONE TOTALE


Pipette sierologiche sterili, graduate, prodotte in polistirolo vergine. Punta antigoccia per una massima precisione. La scala graduata stampata in nero è particolarmente visibile e di facile lettura e garantisce una accuratezza del $\pm 2\%$. La scala graduata discendente & ascendente agevola l'utilizzo e la gradazione negativa consente una capacità extra. Pipette cotonate per la protezione del dispositivo di pipettaggio dal liquido aspirato. Le pipette e il confezionamento sono dotate di codice colore per una facile identificazione. Confezionate singolarmente in peel-pack carta/plastica pelabile per una apertura agevolata. Sterili per irraggiamento. Dispositivi latex free, certificati non pirogenici (UNI EN ISO 10993-5), non emolitici (UNI EN ISO 10993-4)

DISPOSABLE PLASTIC SEROLOGY PIPETTES TOTAL EXPULSIONS TYPE


Sterile serological pipettes manufactured in virgin polystyrene, graduated. Non-dripping tip for pipette precision. Clear black graduations with easy-to-read scale markings guarantee maximum an accuracy of $\pm 2\%$. Descending & ascending graduations to help pipetting and negative graduations for extra capacity. Supplied with a cotton plug for protection against the suction of liquid into the pipetting device. Pipettes and packaging are colour coded to simplify identification. Individually wrapped in paper/plastic peel-pack: peel for easy opening.

Sterile by irradiation. Latex free, certified non-pyrogenic, not cytotoxic devices (UNI EN ISO 10993-5), non-hemolytic (UNI EN ISO 10993-4)


CARATTERISTICHE PRINCIPALI		TECHNICAL FEATURES
Stato microbiologico	STERILE / STERILE	<i>Microbiological status</i>
Materiale impiegato	POLISTIROLO / POLYSTYRENE	<i>Raw material</i>
Temperature tollerate	MIN -10°C MAX +70°C	<i>Temperature range</i>
Accuratezza volume nominale	$\pm 2\%$ (A/AT 20°C)	<i>Accuracy for nominal volume</i>
Apirogene	0,25 EU/ML (FDA)	<i>Pyrogen free</i>
Validità del prodotto	5 ANNI / YEARS	<i>Shelf life</i>

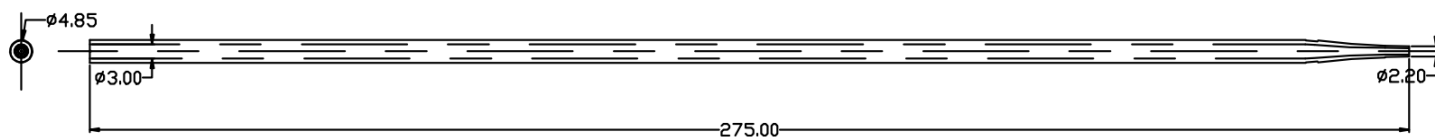


CODICE CODE	VOLUME (ML)	DIV. ML	GRAD. NEGATIVA NEGATIVE GRAD.	LUNGHEZZA LENGHT	COLORE COLOUR	SCATOLA Box
31014	1 ml	1/100	- 0,3 ml	275 mm	Giallo / Yellow	500 pcs 40 x 30 x 14 cm (0,017 m ³) – 2,3 Kg.

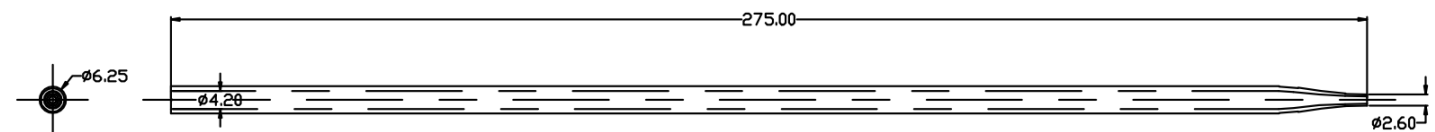


CODICE CODE	VOLUME (ML)	DIV. ML	GRAD. NEGATIVA NEGATIVE GRAD.	LUNGHEZZA LENGHT	COLORE COLOUR	SCATOLA Box
31024	2 ml	1/100	- 0,4 ml	275 mm	Green / Verde	500 pcs 40 x 30 x 14 cm (0,017 m ³) – 3,3 Kg.

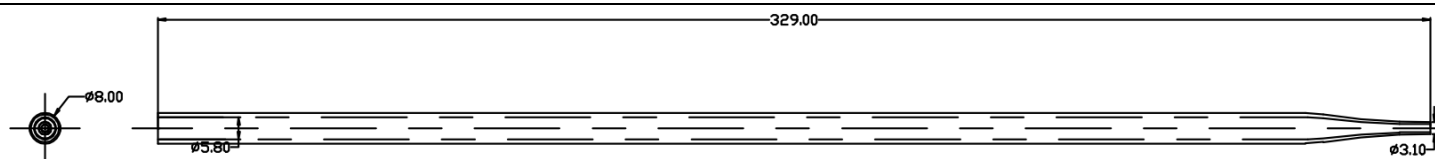

CODICE CODE	VOLUME (ML)	DIV. ML	GRAD. NEGATIVA NEGATIVE GRAD.	LUNGHEZZA LENGHT	COLORE COLOUR	SCATOLA Box
31054	5 ml	1/10	- 1,5 ml	329 mm	Blu / Blue	200 pcs 40 x 30 x 14 cm (0,017 m ³) – 2,3 Kg.

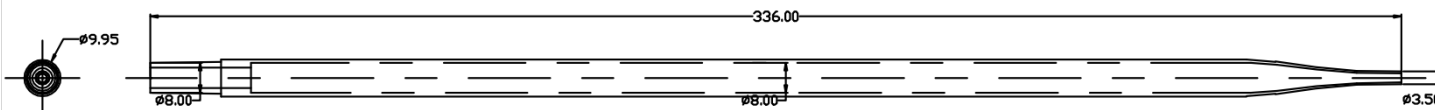

CODICE CODE	VOLUME (ML)	DIV. ML	GRAD. NEGATIVA NEGATIVE GRAD.	LUNGHEZZA LENGHT	COLORE COLOUR	SCATOLA Box
31104	10 ml	1/10	- 3 ml	336 mm	Viola / Violet	200 pcs 40 x 30 x 14 cm (0,017 m ³) – 2,8 Kg.

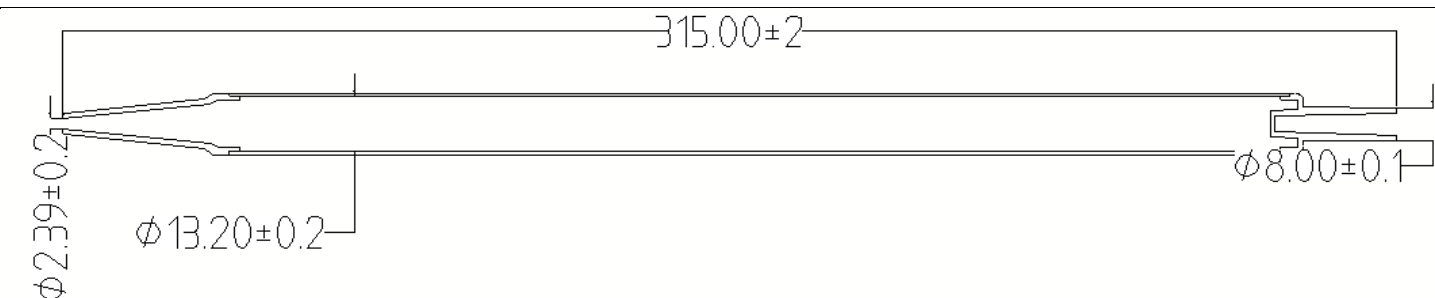

CODICE CODE	VOLUME (ML)	DIV. ML	GRAD. NEGATIVA NEGATIVE GRAD.	LUNGHEZZA LENGHT	COLORE COLOUR	SCATOLA Box
31254	25 ml	1/5	- 7 ml	315 mm	Rosso / Red	150 pcs 40 x 30 x 14 cm (0,017 m ³) – 2,8 Kg.



Aptaca S.p.A. Regione Monforte, 30 - 14053 Canelli (Asti) Italy

Tel. (+39) 0141/83.50.75 – Fax (+39) 0141/83.52.92

E-Mail: info@aptaca.com – Website: www.aptaca.com

CODICE CODE	VOLUME (ML)	DIV. ML	GRAD. NEGATIVA NEGATIVE GRAD.	LUNGHEZZA LENGTH	COLORE COLOUR	SCATOLA BOX
31504	50 ml	1/2	- 6 ml	350 mm	Nero / Black	150 pcs 43.5 x 24 x 31 cm (0,032 m³) – 4,2 Kg.

DESTINAZIONE D'USO / INTENDED PURPOSE

Le pipette sierologiche non sono soggette a marcatura CE (per usi generici di laboratorio per applicazioni in ricerca)
Il dispositivo in oggetto è destinato esclusivamente ad uso professionale in laboratori di analisi

Pipettes are not CE Marked (For general laboratory use for research applications)
For use in professional test laboratory only

AVVERTENZE PER L'USO / OPERATING INSTRUCTIONS

Non avvicinare il dispositivo alla fiamma o a fonti di calore che lo potrebbero danneggiare.
Keep out of flame or heat sources which might damage the product

Non utilizzare il prodotto scaduto o con la confezione aperta
Do not use after expiry date or if packing is opened

Non riutilizzare: Dispositivo monouso
Do not re-use: Disposable device

Non variare la destinazione d'uso
Do not vary the intended purpose of the product

Prodotto non adatto ai bambini
Keep out of reach of children

Conservare in luogo asciutto, Temperatura min -10°C max +50°C
Store in dry place, Temperature range: min -10°C max +50°C

Smaltimento: utilizzare gli appositi D.P.I. e smaltire secondo le normative vigenti
Disposal: use appropriate personal protective equipment and act according to applicable regulations

Prima dell'utilizzo con sostanze particolari consultare sul catalogo le tabelle di resistenza/compatibilità dei materiali.
Before use with particular substance check the resistance / compatibility chart on our catalogue

SIMBOLI UTILIZZATI SULL'IMBALLO / PACKING SYMBOLS



Data di fabbricazione
Manufacturing date



Data di scadenza
Expiry date



Consultare i documenti accompagnatori
Please consult accompanying documents



Numero di lotto
Lot number



Monouso
Disposable



Sterilizzazione con radiazioni ionizzanti
Sterilization by ionizer rays