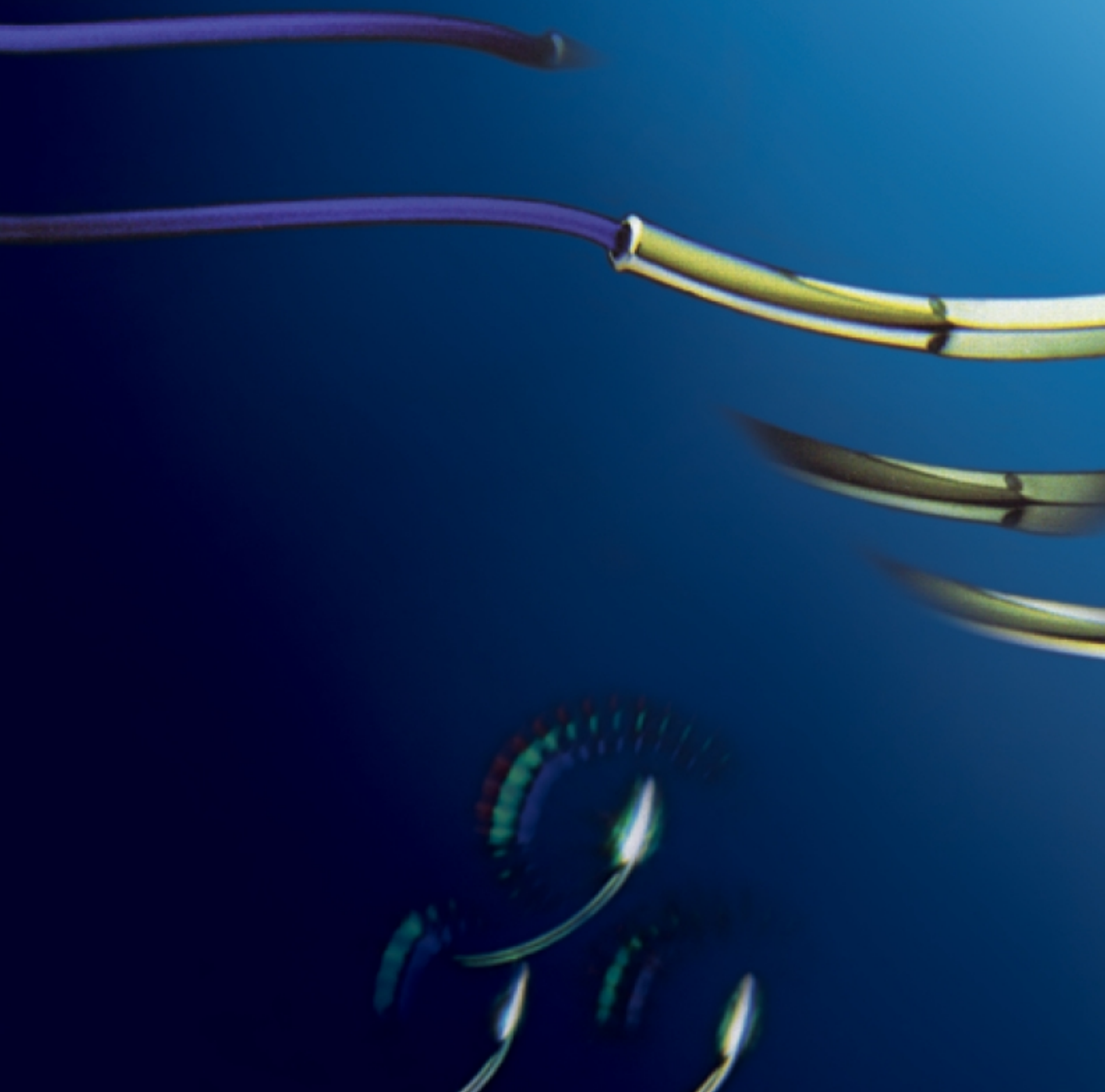


# *ФИАТОС*

*шовные  
хирургические  
материалы*



УП «ФИАТОС» выпускает хирургический шовный материал условных номеров (USP) от 11/0 до 7 и сетки хирургические.

### **Основные преимущества работы нашей компании:**

- использование комплектующих и материалов лучших мировых производителей из Японии, стран Европейского Союза, Южной Кореи, США;
- постоянное увеличение ассортимента выпускаемой продукции;
- изготовление продукции по индивидуальному заказу;
- контроль качества на всех этапах производства;
- контроль качества в аккредитованных лабораториях Министерства Здравоохранения РБ, РФ, лабораториях Госстандарта, а так же в аккредитованных центрах Европейского Союза.

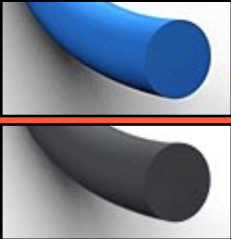
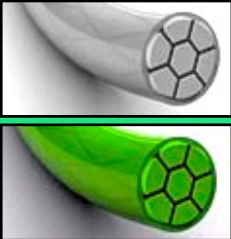
Производство УП «ФИАТОС» соответствует требованиям стандартов: СТБ ISO 9001-2015 и EN ISO 13485: 2016.

Шовный хирургический материал изготавливается по технологии и на оборудовании компании «FSSB CHIRURGISCHE NADELN GMBH», Германия.

Нити комплектуются иглами различных типов, форм острия и изогнутости, изготовленными из нержавеющей антикоррозийной высокопрочной аустенитной стали марки AISI 302 и AISI 304 с силиконовым покрытием.

# ФИАТОС

## ШОВНЫЕ хирургические материалы

| Нерассасывающиеся нити                                                                                                                                   |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Наименование нити                                                                                                                                        | Состав нити                                                                                                                                 | Характеристики                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Область применения                                                                                                                                                                                                                                          | Аналоги                                                         |
| <b>Нить «Шёлк Вирджинский»</b><br>крученая голубая<br>                  | Натуральный фиброин волокон шёлка-сырца получаемого из специально выведенной породы шелкопрядов <i>Bombyx mori</i> из семейства Bombycidae. | Обладает прекрасными манипуляционными свойствами, прочностью, исключительной надежностью узла. При вступлении в контакт с тканями организма практически вся прочность на растяжение теряется в течение 1 года.                                                                                                                 | Применяется в офтальмологии и пластической хирургии.                                                                                                                                                                                                        | Sofsilk, Virgin Silk.                                           |
| <b>Мононить полипропиленовая</b><br>голубая<br>                         | Изотактический стереоизомер полипропилена.                                                                                                  | Нить биоинертна, прочна, атравматична, некапиллярна, нефитильна, гидрофобна, устойчива к ферментационному воздействию тканей, а также к контакту с инфицированными тканями, не подвергается деструкции и гидролизу. Обладает эффектом тактильности. Для безузлового кожного шва нить с иглой может поставляться с фиксаторами. | Применяется в общей хирургии, офтальмологии, косметологии, нейрохирургии, гинекологии, сердечно-сосудистой хирургии, при различных хирургических оперативных вмешательствах, требующих использования нерассасывающихся нитей.                               | Селен, Пролен, Даклон мононить, Surgilene, Premilene, Surgipro. |
| <b>Мононить нейлоновая</b><br>синяя, черная<br>                       | Полиамид.                                                                                                                                   | Отличается особой мягкостью и удобством в манипуляциях. При длительном пребывании в тканях подвержена биодеструкции, которая происходит в организме в течение 2-5 лет. Для безузлового кожного шва нить с иглой может поставляться с фиксаторами                                                                               | Шовный хирургический материал применяется в общей хирургии, офтальмологии, косметологии, нейрохирургии, гинекологии, сердечно-сосудистой хирургии, при различных хирургических оперативных вмешательствах, требующих использования нерассасывающихся нитей. | Ethilon, Monosof, Resolon, Dafilon, Полиамид мононить, SUTRON.  |
| <b>Нить «Полиэстер»</b><br>плетеная белая (неокрашенная), зеленая<br> | Полиэфир из полиэтилентерэфалата с силиконовым покрытием.                                                                                   | Покрытие увеличивает биосовместимость, полностью устраняет капиллярность и фитильность нити, повышает надежность хирургического узла, обеспечивает атравматичность при проведении через ткани. Гибка и удобна в манипуляциях. Плетение нити состоит из 16 волокон с центральным кордом.                                        | Применяется в общей хирургии, офтальмологии, косметологии, нейрохирургии, гинекологии, сердечно-сосудистой хирургии, при различных хирургических оперативных вмешательствах, требующих использования нерассасывающихся нитей.                               | Ethibond, Synthofil, Supolene, PremiCron, Терилен.              |

### Мононить нейлоновая

| Шпательная трапецеидальная игла, 3/8 окружности                                                    |                 |                     |          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------|----------|
| Описание иглы                                                                                      | Длина нити (см) | Условный номер нити |          |
|                                                                                                    |                 | 10/0                | 9/0      |
| 2xDLZ-6-150<br>   | 30              | ● PA001S            | ● PA002S |
|                                                                                                    | 45              | ● PA008S            | ● PA009S |
| 2xDLZ-6,2-150<br> | 30              | ● PA015S            | ● PA016S |
|                                                                                                    | 45              | ● PA024S            | ● PA025S |
| 2xDLZ-6,4-200<br> | 30              | ● PA031S            | ● PA032S |
|                                                                                                    | 45              | ● PA038S            | ● PA039S |

● — цвет нити - черный

### Нить «Полиэстер»

| Шпательная трапецеидальная игла, 1/4 окружности                                                    |                 |                     |                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------|---------------------|
| Описание иглы                                                                                      | Длина нити (см) | Условный номер нити |                     |
|                                                                                                    |                 | 6/0                 | 5/0                 |
| 2xVLZ-8-350<br> | 45              | ● E001S<br>○ EW001S | ● E002S<br>○ EW002S |
|                                                                                                    |                 | ● E008S<br>○ EW008S | ● E009S<br>○ EW009S |

● — цвет нити- зеленый

○ — цвет нити - белый (неокрашенный)