


**CATETERELE
PHENOM™***
**GHID DE
LUCRU**

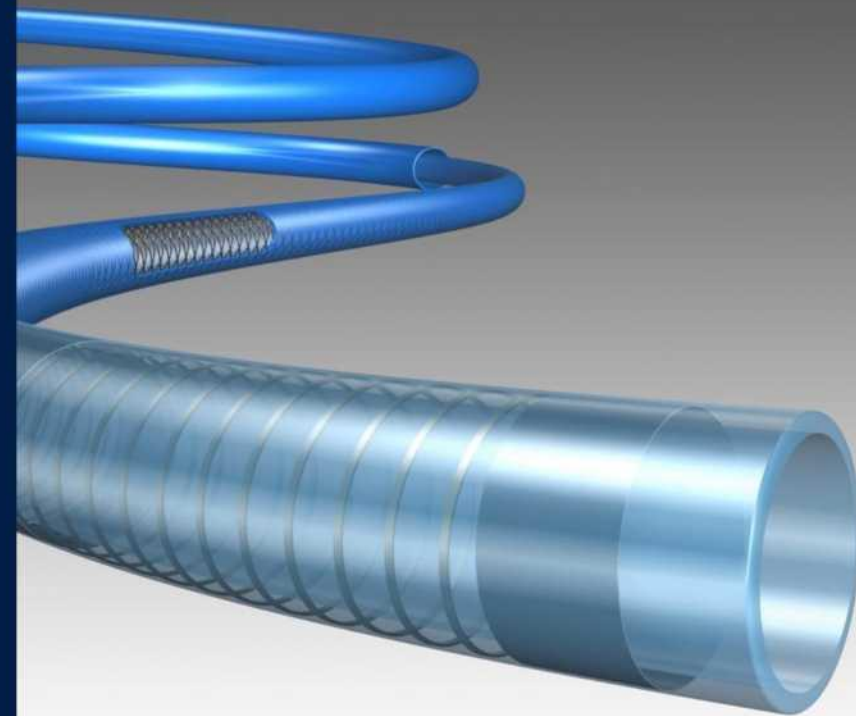

Medtronic
Further, Together

CATETERELE

PHENOM^{TM*}

PREZENTARE


GENERALĂ A

MATERIALELOR


Medtronic

Further, Together

CUM SUNT PROIECTATE¹

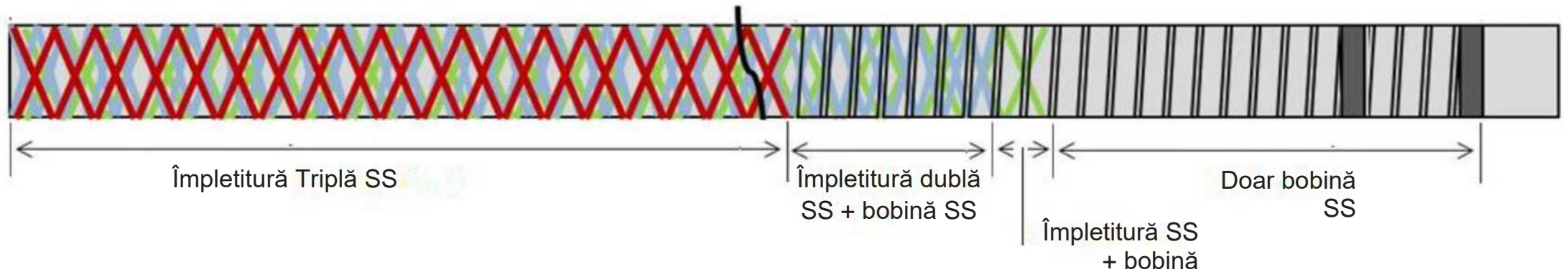


- 4 zone de tranziție
 - Proximal - împletitură triplă SS
 - Ax medial - împletitură dublă SS și bobină
 - Ax medial - împletitură SS și bobină unică
 - Segment distal – bobină SS
- Materiale corp cateter
 - Straturi exterioare din Pebax™* (strat interior din oțel inoxidabil împletit/bobinat, PTFE și elastomer poliolefinic)
- Vârf distal rotunjit
- Căptușeală interioară lubrifiantă
- Marker radioopac
 - Platină/Iridiu
- Tub suport
 - Nailon

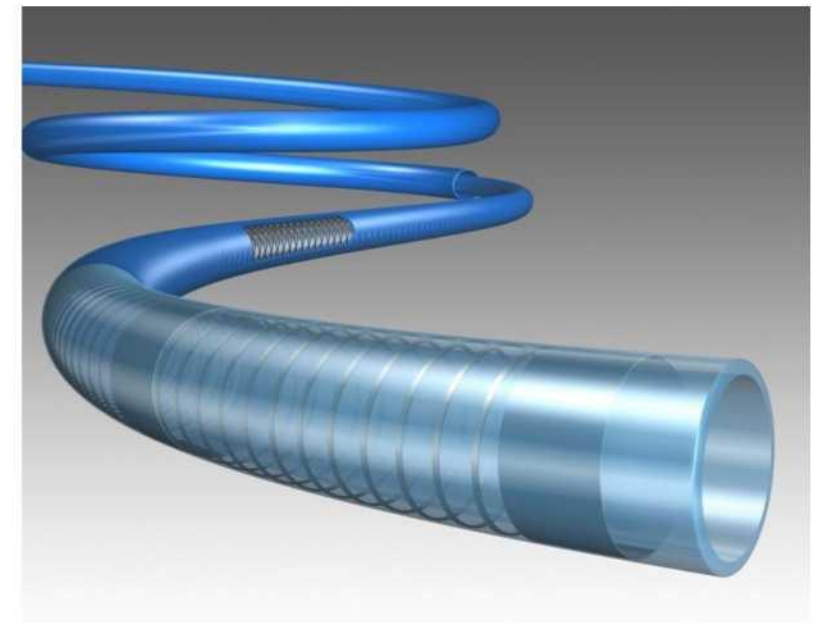

CONFIGURAREA VÂRFULUI DISTAL² CE REPREZINTĂ?

EXPLICAȚII NUMĂR PIESĂ

	Cateter Phenom™*	FG	Mărime	A	-	B	C	-	Marker vârf	Formă vârf
Exemplu	Cateter Phenom™* 017	FG	11	150	-	16	15	-	2	S

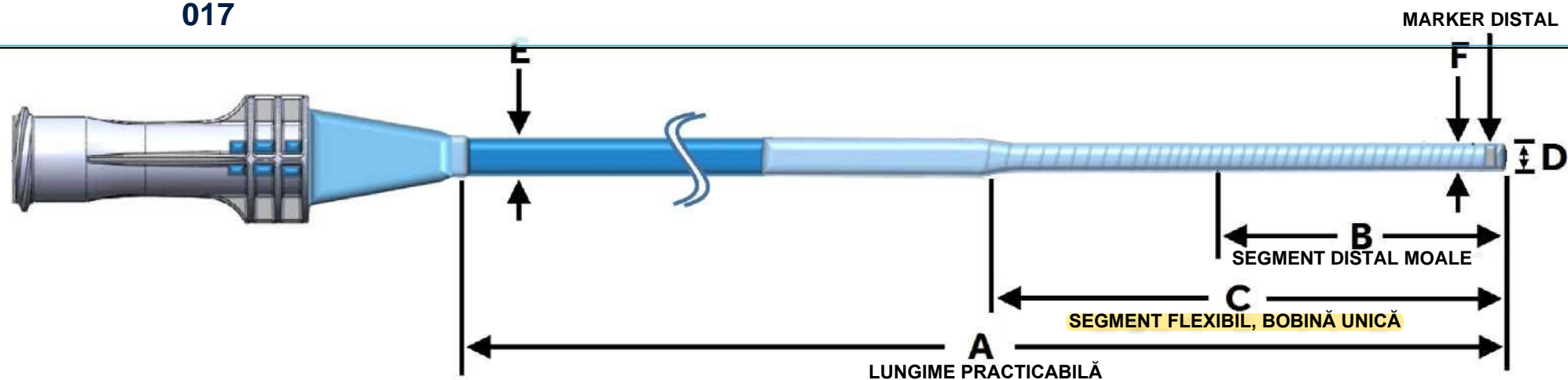

B: Lungimea segmentului moale distal, în centimetri, măsurată de la vârful distal.

C: Lungimea segmentului ranforsat cu bobină unică, în centimetri, măsurată de la vârful distal.

SPECIFICAȚII PENTRU COMENZI³

CATETERUL PHENOM™* 027: SELECTAȚI LUNGIMEA PORȚIUNII FLEXIBILE CU BOBINĂ UNICĂ

	D: DI Cateter	E: DE Proximal	F: DE Distal	C: Lungimea flexibilă cu bobină unică	Număr piesă
Cateterul Phenom™* 027	0.027" (0.69 mm)	0.040" (3.1F)	0.036" (2.8F)	15 cm 30 cm	FG15150-0615-1S FG15150-0630-1S

CATETERELE

PHENOM^{TM*}

BENEFICIILE

PRODUSULUI


Medtronic

Further, Together

CATETER PHENOM™* 027

AVANTAJE

Phenom™* 027 – comparație pentru forța de flambaj măsurată a vârfului distal (g)¹

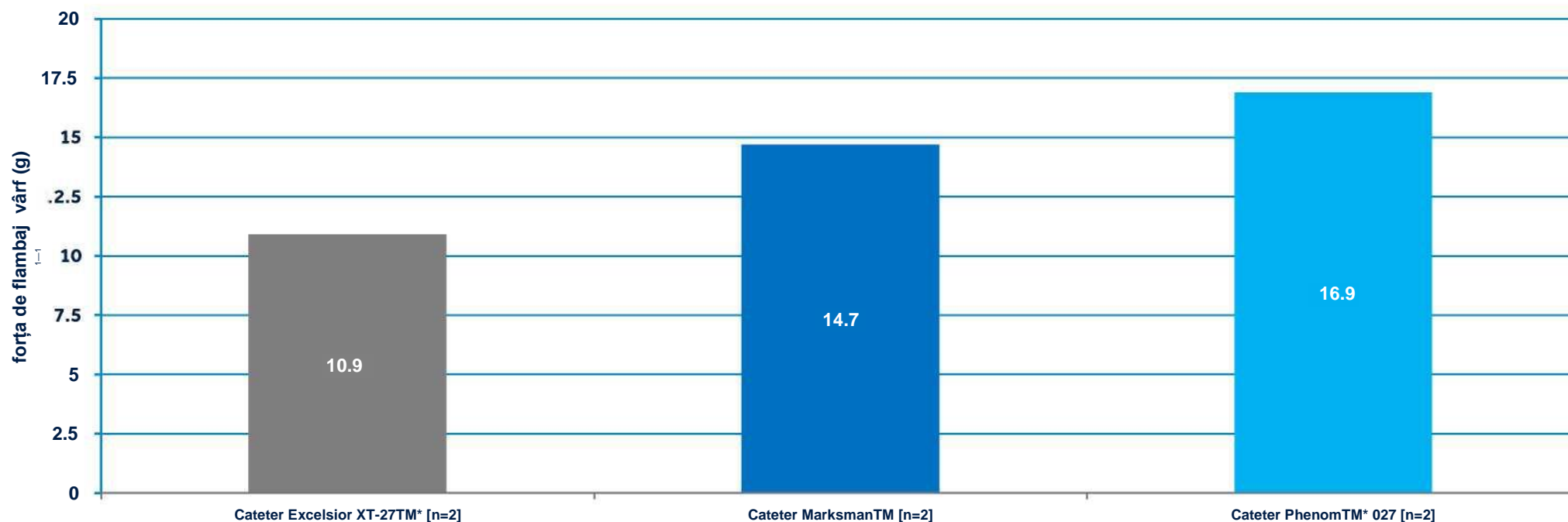

Avantajele esențiale²

- Lumenul cateterului este proiectat strategic, pentru a preveni ovalizarea și pentru durabilitate, cu scopul plantării de dispozitive terapeutice avansate, cu fricțiune minimă.
- Vârful distal rotunjit este conceput pentru a spori trasabilitatea acestuia peste fir, și pentru a ajuta la recaptarea dispozitivului.
- Modelele optimizate ale axului distal al cateterului Phenom™* sunt flexibile, dar stabile

Medtronic

Europa

Medtronic International Trading Sarl.

Route du Molliau 31

Case postale

CH-1131 Tolochenaz

Tel: +41 (0)21 802 70 00

Fax: +41 (0)21 802 79 00

2016

www.medtronic.eu

UC201704796 EE © Medtronic

Toate drepturile rezervate.

REFERINȚE

TR-NV12653A1 2. Document Cathera ML-0001.A 3. DC00039504B

COMPLICAȚII POTENȚIALE: pentru lista completă de avertismente, precauții și contraindicații consultați instrucțiunile de utilizare.

Indicațiile, contraindicațiile, avertismentele și instrucțiunile de utilizare se găsesc pe eticheta produsului existentă pe fiecare dispozitiv.

Cateterele Phenom™ sunt destinate plasării dispozitivelor de intervenție și a celor pentru perfuzia de agenți de diagnostic sau terapeutici în vasculatura neurologică, periferică și coronară.

™* Phenom este marcă comercială a Cathera, Inc. Mărcile terțe sunt mărci comerciale ale proprietarilor respectivi.