

EURODEFIPADS®

Elettrodi multifunzione monouso, per defibrillazione esterna, cardioversione sincronizzata transtoracica, elettrostimolazione cardiaca transcutanea e monitoraggio ECG. Progettati per la connessione diretta a cavi e defibrillatori, sono caratterizzati da una bassa impedenza ed una ridotta soglia di stimolazione, con un'ottima adattabilità alla cute del paziente. Sono disponibili modelli per pazienti adulti, pediatrici ed anche adulti/pediatrici, in varianti radiotrasparenti e preconnettibili. Alcuni modelli pediatrici da utilizzare con defibrillatori automatici (AED) prevedono un sistema di riduzione dell'energia. I prodotti non contengono lattice né ftalati.

Disposable multifunction electrodes for external defibrillation, transthoracic synchronized cardioversion, transcutaneous cardiac stimulation and ECG monitoring. Designed for direct connection to cables and defibrillators, they are characterized by a low impedance and a reduced stimulation threshold, with an excellent adaptability to the patient's skin. Models are available for adult, pediatric and even adult/pediatric patients, in radiotransparent and preconnectable variants. Some paediatric models to be used with automatic external defibrillator (AED) are available with energy reduction system. The products are latex-free and phthalates-free.

CARATTERISTICHE TECNICHE - TECHNICAL FEATURES

Serie Series	ADULTI - ADULT			PEDIATRICHE - PAEDIATRIC		ADULTI/PEDIATRICHE ADULT/PAEDIATRIC
	STANDARD	CAVO FUORI BUSTA LEAD OUT	RADIOTRASARENTI standard/cavo fuori busta RADIOTRASPARENT standard/lead out	STANDARD/CAVO FUORI BUSTA STANDARD/LEAD OUT	RADIOTRASARENTI standard/cavo fuori busta RADIOTRASPARENT standard/lead out	STANDARD/CAVO FUORI BUSTA STANDARD/LEAD OUT
Indicazioni d'uso (età del paziente) ^a Indications for use (patient age) ^a	>8 anni/years (> 25 kg)	>8 anni/years (> 25 kg)	>8 anni/years (> 25 kg)	<8 anni/years (< 25 kg)	<8 anni/years (< 25 kg)	> 1 anno/year (> 10 kg)
Materiale di supporto Support material	FOAM medicale, spessore 1 mm Medical FOAM, thickness 1 mm					
Larghezza dell'anello adesivo Width adhesive ring	1,3 cm	0,7cm	1,3 cm	1,6 cm	1,6 cm	0,8 mm
Superficie totale (per ogni elettrodo) ^b Total surface (for each electrode) ^b	148 cm ²	136 cm ²	148 cm ²	75 cm ²	75 cm ²	119 cm ²
Area attiva (per ogni elettrodo) ^b Active area (for each electrode) ^b	95 cm ²	100 cm ²	95 cm ²	40 cm ²	40 cm ²	79 cm ²
Materiale conduttivo Conductive material	Lamina di metallo Metal sheet					
Gel elettroconduttore Electro-conductive gel	Gel adesivo conduttivo a bassa impedenza Low impedance conductive adhesive gel					
Lunghezza del cavo ^c Cable length ^c	120 cm ^d	120 cm	100 cm	120 cm ^e	100 cm	120 cm
Connessione Connection	Connettore antishock di sicurezza o a clip, a seconda dei modelli Safety antishock or clip connection, according to the model					
Compatibilità Compatibility	Vedi lista di compatibilità See compatibility list					
N. di scariche sopportate dall'elettrodo Nr. of discharges that the electrode can withstand	50 @ 360 J	50 @ 360 J	50 @ 360 J	50 @ 100 J	50 @ 100 J	50 @ 300 J
Conformità alle normative Compliance to regulations	Direttiva 93/42/CEE (D.L. 46/97) e succ. modifiche. Dispositivo medico in classe IIb. Directive 93/42/EEC and amendments. Class IIb medical device. ANSI/AAMI: DF-80; IEC/EN: 60601-1, 60601-2-4; ISO: 10993-10.					

CONFEZIONAMENTO - PACKAGING

Confezionamento primario Primary packaging	1 coppia in busta di polietilene e alluminio termosaldata con preincisione laser e tacca di apertura facilitata 1 pair in polyethylene and aluminum sealed pouch, with laser pre-cut and notch for easy opening
Confezione di vendita Sale packaging	10 coppie in scatola di cartone (5 coppie per la serie "Pediatriche") 10 pairs in carton box (5 pairs for "Paediatric" Series)
Temperatura operativa Operating temperature	Compresa tra 0°C e +50°C Between 0°C and +50°C
Immagazzinamento Storage	Conservare in luogo asciutto, con temperatura compresa tra +5°C e +35°C. Resistenti per brevi periodi (24h) anche a temperature di -30°C o +65°C. Una conservazione prolungata a temperature estreme può ridurre la vita del prodotto To be stored in a dry place, with temperature between +5°C and +35°C. Frost-resistant to -30°C and heat-resistant to +65°C for short period (24h). A prolonged storage at extreme temperatures can reduce shelf-life
Vita utile Shelf life	30 mesi dalla data di produzione 30 months from manufacturing date
Scadenza Expiry date	Riportata sulla confezione Indicated on the packaging

^a Limiti di età secondo le Linee Guida internazionali per la RCP (limiti di peso corrispondenti ricavati dalle curve di accrescimento standard)–Age limits according to International RCP Guidelines (corresponding weight limits derived from standard growth curves)

^b Per il modello F7965/PLUS: Superficie totale 119cm², Area attiva 79cm²–For F7965/PLUS model: Total surface 119cm², Active area 79cm²

^c Applicabile solo ai modelli con cavo–Applicable only for models with cable

^d Ad eccezione dei modelli F7965, F7965/PLUS, che hanno il cavo da 100cm, e dei modelli F7956, F7967 e F7981 che hanno il cavo da 200cm. Except F7965, F7965/PLUS, which is equipped with a 100cm cable, and models F7956, F7967 and F7981, which are equipped with a 200cm cable.

^e Ad eccezione del modello F7965P, che ha il cavo da 100cm, e dei modelli F7956P e F7967P che hanno il cavo da 200cm – Except for F7965P model, which is equipped with a 100cm cable, and models F7956P and F7967P which are equipped with a 200cm cable.

COMPOSIZIONE DEL REF / REFERENCE KEY

REF

F

7

9

50

W

9 : Standard

7 : elettrodo e cavo radiotrasparenti
radiotransparent electrode and cable

50→98 : serie/series

- : adulti-adult

W : adulti preconnettibili-adult preconnectable

P : pediatriche-paediatric

PW : pediatriche preconnettibili
paediatric preconnectable

PL : pediatriche ad energia ridotta
paediatric, reduced energy

WPL : preconnettibili, pediatriche, ad energia ridotta
pre-connectable, paediatric, reduced energy

U : adulti/pediatriche-adult/paediatric

UW : adulti/pediatriche preconnettibili
adult/paediatric preconnectable


Non tutte le combinazioni sono disponibili. Verificare l'effettiva disponibilità nelle pagine seguenti.
Not all combinations are available. Verify actual availability on the following pages.

ESEMPI DI ALCUNI MODELLI - EXAMPLE OF SOME MODELS



F7956

Serie ADULTI STANDARD
ADULT STANDARD series

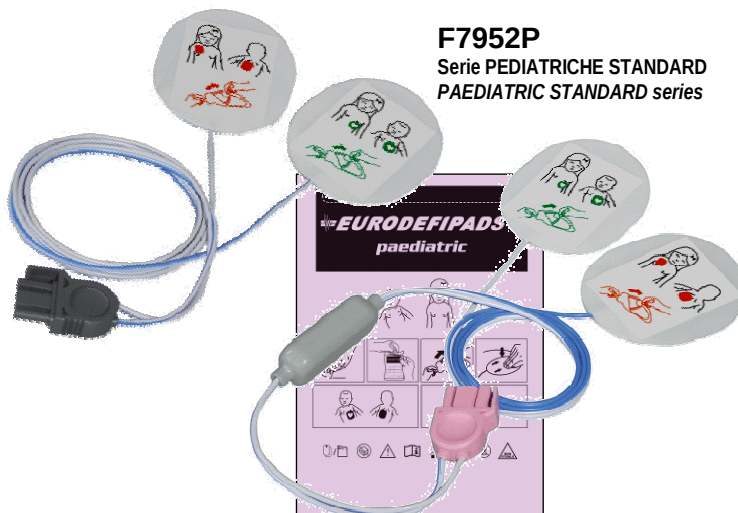

F7952P

Serie PEDIATRICHE STANDARD
PAEDIATRIC STANDARD series

F7952PL

Serie PEDIATRICHE CON RIDUTTORE DI ENERGIA
PAEDIATRIC REDUCED ENERGY series



F7750

Serie ADULTI RADIOTRASPARENTE
ADULT RADIOTRASPARENT series



F7955W

Serie ADULTI CAVO FUORI BUSTA
ADULT LEAD OUT series

LISTA DI COMPATIBILITA' - COMPATIBILITY LIST

Casa Costruttrice Brand	Modello - Model	Serie - Series									Connettore Connector
		F7950	F7950W	F7750	F7750W	F7950P ⁽¹⁾	F7950PW ⁽¹⁾	F7950PL	F7950WPL	F7750P ⁽¹⁾	
PHILIPS	Heartstream ForeRunner AED (E, S, EM)	●	●	●	●	-	-	-	-	-	  F7950 F7950W F7750
	HeartStart FR AED (940010XX, 940020XX, 940030XX)	●	●	●	●	-	-	-	-	-	
	Heartstream/HeartStart FR2 AED (M3840A, M3841A), FR2+ AED (M3860A, M3861A)	●	●	●	●	-	-	●	●	-	 
	HeartStart FR3 AED (ECG 861389, Text 861388) *	●	-	●	-	-	-	-	-	-	
	CodeMaster 100 (M2475B), XE (M1724A), XL (M1723A/B), XL+ (M1722A/B) **	●	●	●	●	●	●	-	-	●	  F7950P F7750P F7950PW
	HeartStart 4000 (M5500B) ***	●	●	●	●	●	●	-	-	●	
	Heartstream/HeartStart XL (M4735A), XLT (M3500B) ***	●	●	●	●	●	●	-	-	●	
	HeartStart MRx (M3535A, M3536A) ***	●	●	●	●	●	●	-	-	●	
	HeartStart XL+ (861290) ***	●	●	●	●	●	●	-	-	●	
	Efficia DFM100 (866199) ***	●	●	●	●	●	●	-	-	●	

F7950PL, F7950WPL: riduzione di energia erogata al paziente: 150J sul defibrillatore diventano 50J sul paziente / reduced energy: defibrillator output of 150J is reduced to 50J

* Gli elettrodi sono compatibili con l'apparecchio per la terapia, ma non possono essere lasciati connessi all'FR3 in modalità standby o spento a causa dell'attività di autodiagnostica dell'apparecchio / Electrodes will operate with device for therapy, but cannot be left attached while FR3 is in standby mode or while turned off due to self-test activity of the device

** con cavo elettrodi a mani libere M1750A/B o M2472A e adattatore 05-10200 / with hands-free pad cables M1750A/B or M2472A and adapter 05-10200

*** con cavo elettrodi a mani libere M3508A / with hands-free pad cables M3508A

		F7951	F7951W	F7751	F7751W	F7951P	F7951PW	F7751P	F7751PW	
Zoll Medical Corp	PD 1200	●	●	●	●	●	●	●	●	 
	PD 1400	●	●	●	●	●	●	●	●	
	PD 1600	●	●	●	●	●	●	●	●	
	PD 1700	●	●	●	●	●	●	●	●	
	PD 2000	●	●	●	●	●	●	●	●	
	E Series	●	●	●	●	●	●	●	●	
	M Series	●	●	●	●	●	●	●	●	
	R Series	●	●	●	●	●	●	●	●	
	X Series	●	●	●	●	●	●	●	●	
	Propaq MD	●	●	●	●	●	●	●	●	
M&B	AED 7000	●	●	●	●	-	-	-	-	

		F7952	F7952W	F7752	F7752W	F7952P(1)	F7952PW(1)	F7952PL	F7952WPL	F7752P(1)	F7752PW(1)	
Physio-Control	LIFEPAK 9 con/with QUICK-COMBO ADAPTER	●	●	●	●	●	●	-	-	●	●	 F7952 F7952W F7752 F7752W F7952P F7952PW F7752P F7752PW
	LIFEPAK 10	●	●	●	●	●	●	-	-	●	●	
	LIFEPAK 12	●	●	●	●	●	●	-	-	●	●	
	LIFEPAK 15	●	●	●	●	●	●	-	-	●	●	
	LIFEPAK 20	●	●	●	●	●	●	-	-	●	●	
	LIFEPAK 20E	●	●	●	●	●	●	-	-	●	●	
	LIFEPAK 500 AED con presa grigia-with grey socket	●	●	●	●	-	-	-	-	-	-	
	LIFEPAK 500 AED Biphasic con presa rosa-with pink socket	●	●	●	●	-	-	●	●	-	-	
	LIFEPAK 1000 AED	●	●	●	●	-	-	●	●	-	-	
	LIFEPAK CR PLUS AED	-	●	-	●	-	-	●	●	-	-	
	LIFEPAK EXPRESS AED	-	●	-	●	-	-	●	●	-	-	
Bexen Cardio	REANIBEX-200	●	●	(*)	(*)	-	-	-	-	-	-	 F7952PL F7952WPL
	REANIBEX-300	●	●	(*)	(*)	-	-	-	-	-	-	
	REANIBEX-500	●	●	(*)	(*)	-	-	-	-	-	-	
	REANIBEX-700	●	●	(*)	(*)	●	●	-	-	(*)	(*)	
	REANIBEX-800	●	●	(*)	(*)	●	●	-	-	(*)	(*)	
Cardioline	ELIFE 700	●	●	●	●	●	●	-	-	●	●	
Mindray	BENEHEART D1 (Public / Pro)	●	●	●	●	●	●	-	-	●	●	
	BENEHEART D3	●	●	●	●	●	●	-	-	●	●	
	BENEHEART D6	●	●	●	●	●	●	-	-	●	●	

F7952PL, F7952WPL: riduzione di energia erogata al paziente: 200J sul defibrillatore diventano 50J sul paziente - reduced energy: defibrillator output of 200J is reduced to 50J

(*) Non per stimolazione – Not suitable for pace

		F7953	F7953W	F7753	F7953P	F7953PW	F7753P	
Agilent Hewlett Packard Laerdal Medical	CodeMaster 100 (M2475B), XE (M1724A), XL (M1723A/B), XL+ (M1722A/B) *	●	●	●	●	●	●	
	HeartStart 4000 (M5500B) **	●	●	●	●	●	●	
	Heartstream/HeartStart XL (M4735A), XLT (M3500B) **	●	●	●	●	●	●	

* con cavo elettrodi a mani libere M1750A/B o M2472A / with hands-free pad cables M1750A/B or M2472A

** con cavo elettrodi a mani libere M3507A / with hands-free pad cables M3507A

		F7954	F7954W	F7754	F7954P	F7754P	
Schiller	FRED	●	●	●	●	●	 
	FRED TELE	●	●	●	●	●	
	DEFIGARD DG 1002	●	●	●	●	●	
	DEFIGARD DG 3002	●	●	●	●	●	
	DEFIGARD DG 2000 EDOS	●	●	●	●	●	
Esaote	MDF SAED	●	●	●	●	●	
	MDF II	●	●	●	●	●	


		F7955	F7955W	F7755	F7755W	F7955P	F7955PW	F7755P	
Nihon Kohden	Cardiolife TEC-5500 series con cavo-with cable JC-755V	●	●	●	●	●	●	●	 
	Cardiolife TEC-5600 series con cavo-with cable K342A (JC-855V)	●	●	●	●	●	●	●	
	Cardiolife TEC-7600 series con cavo-with cable JC-755V	●	●	●	●	●	●	●	
	Cardiolife TEC-7700 series con cavo-with cable JC-755V	●	●	●	●	●	●	●	
	Cardiolife TEC-2202 con cavo-with cable JC-755V	●	●	●	●	●	●	●	
	Cardiolife TEC-2203 con cavo-with cable JC-755V	●	●	●	●	●	●	●	
	Cardiolife TEC-7531 con cavo-with cable JC-755V	●	●	●	●	●	●	●	
	Cardiolife TEC-8251 con cavo-with cable JC-755V	●	●	●	●	●	●	●	
Welch Allyn	Cardiolife TEC-8300 series con cavo-with cable K342A (JC-855V)	●	●	●	●	●	●	●	
	AED-10 (Adattatore pediatrico-paediatric adapter Welch Allyn 002173-U (°))	●	●	●	●	●	●	●	
	AED-20 (Adattatore pediatrico-paediatric adapter Welch Allyn 002174-U (°))	●	●	●	●	●	●	●	
	PIC-30, PIC-40, PIC-50	●	●	●	●	●	●	●	
Artema Innomed	CARDIOAID 360B	●	●	●	●	●	●	●	 
	CARDIOAID 200B	●	●	●	●	●	●	●	
	CARDIOAID 200	●	●	●	●	●	●	●	
	CARDIOAID 100	●	●	●	●	●	●	●	
	CARDIOAID XL+	●	●	●	●	●	●	●	
	CARDIOAID XL	●	●	●	●	●	●	●	
Artema S&W	CARDIO AID LS	●	●	●	●	●	●	●	
	CARDIO AID MC	●	●	●	●	●	●	●	
	CARDIO AID MC+	●	●	●	●	●	●	●	
Dräger	CARDIOLOG 2000	●	●	●	●	●	●	●	
MRL	LITE	●	●	●	●	●	●	●	
	LIFEQUEST	●	●	●	●	-	-	-	

		F7956	F7956W	F7756	F7956P	F7956PW	F7756P	
Schiller	FRED EASY	●	●	●	●	●	●	 F7956 F7956W F7756 F7956P F7956PW F7756P
	FRED EASY 2G	●	●	●	●	●	●	
	DEFIGARD DG 4000	●	●	●	●	●	●	
	DEFIGARD DG 5000	●	●	●	●	●	●	
	DEFIGARD DG 6002	●	●	●	●	●	●	

						F7957W	F7957PL	
Cardiac Science	POWERHEART AED - 9200 series					●	●	
	POWERHEART AED G3 - 9300 series (G3 / G3 PLUS / G3 PRO)					●	●	
Ge	RESPONDER AED					●	●	
	RESPONDER AED PRO					●	●	

		F7958	F7958W	F7958P ⁽¹⁾	F7958PW	F7958PL	
CU Medical Systems, inc	PARAMEDIC CU-ER1	●	●	-	-	●	
	PARAMEDIC CU-ER2, CU-ER3	●	●	●	●	-	
	PARAMEDIC CU-ER5 con cavo-with cable ER-5 OA03	●	●	●	●	-	
	LIFEGAIN CU-HD1	●	●	●	●	-	

F7958PL: riduzione di energia erogata al paziente: 150J sul defibrillatore diventano 50J sul paziente-reduced energy: defibrillator output of 150J is reduced to 50J

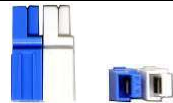		F7959	F7959W	F7759	F7959P ⁽¹⁾	F7959PL	F7959WPL	
CU Medical Systems, inc	I – PAD NF1200	●	●	●	-	●	●	
Cmos Drake	FUTURA	●	●	●	●	-	-	

F7959PL, F7959WPL: riduzione di energia erogata al paziente: 200J sul defibrillatore diventano 50J sul paziente-reduced energy: defibrillator output of 200J is reduced to 50J

		F7960W	F7760W	
Metrax Primedic	HEARTSAVE AED (fino a-up to s/n 73944xxxxxx)	●	●	
	HEARTSAVE AED-M (fino a-up to s/n 73945xxxxxx)	●	●	
	HEARTSAVE 6 (fino a-up to s/n 73946xxxxxx)	●	●	
	HEARTSAVE 6S (fino a-up to s/n 73947xxxxxx)	●	●	
	DEFIMONITOR XD	●	●	

		F7961	F7961W	F7761	F7961P	F7961PW	
Nihon Kohden	Cardiolife TEC-2200 series con cavo-with cable JC-765V	●	●	●	●	●	
	Cardiolife TEC-2300 series con cavo-with cable JC-765V	●	●	●	●	●	
	Cardiolife TEC-5500 series con cavo-with cable JC-765V	●	●	●	●	●	
	Cardiolife TEC-5600 series con cavo-with cable K342B (JC-865V)	●	●	●	●	●	
	Cardiolife TEC-7600 series con cavo-with cable JC-765V	●	●	●	●	●	
	Cardiolife TEC-7700 series con cavo-with cable JC-765V	●	●	●	●	●	
	Cardiolife TEC-7531 con cavo-with cable JC-765V	●	●	●	●	●	
	Cardiolife TEC-8300 series con cavo-with cable K342B (JC-865V)	●	●	●	●	●	

		F7962	F7762	F7962P	
Marquette GE	MARQUETTE 1250 FIRST RESPONDER	●	●	●	
	MARQUETTE 1500 FIRST RESPONDER	●	●	●	
	MARQUETTE RESPONDER 2000 (con cavo adattatore-with adapter cable)	●	●	●	
	MARQUETTE RESPONDER 3000 (con cavo adattatore-with adapter cable)	●	●	●	
Esaote	MDF	●	●	●	
	MDF PLUS	●	●	●	

		F7963	
Nihon Kohden	TEC-8250 con cavo-with cable L200	•	
	TEC-8251 con cavo-with cable L200	•	

		F7964W	F7964PW ⁽¹⁾	
Weinmann	MEDUCORE EASY	•	-	
	MEDUCORE STANDARD	•	•	
Cardiaid	CARDIAID CT0207	•	-	

		F7965/PLUS	F7965	F7965P	
Corpuls	CORPULS 3		•	•	

Gli elettrodi non sono compatibili nel caso CORPULS 3 dotato del modular system Defibrillator-/Pacerunit **SLIM**-Electrodes not compatible if CORPULS 3 is equipped with modular system Defibrillator-/Pacerunit **SLIM**
F7965/PLUS: Per questo modello la vita del prodotto è 24 mesi dalla data di produzione - **F7965/PLUS:** For this model the shelf life is 24 months from manufacturing date.

		F7966W	F7966WPL	
Defibtech	DDU – 100 Lifeline AED	•	•	
	DDU – 120 Lifeline AUTO AED	•	•	 

F7966WPL: riduzione di energia erogata al paziente: 150J sul defibrillatore diventano 50J sul paziente-reduced energy: defibrillator output of 150J is reduced to 50J

		F7967	F7967W	F7967P	F7967PW	
Schiller	FRED EasyPort	●	●	●	●	 F7967 F7967W F7967P F7967PW
	FRED PA-1	●	●	●	●	
	ARGUS PRO LifeCare	●	●	●	●	
	ARGUS PRO LifeCare 2	●	●	●	●	
	CARDIOVIT AT-101 Easy	●	●	●	●	
	DEFIGARD TOUCH 7	●	●	●	●	

Gli elettrodi sono senza RFID per il riconoscimento automatico della scadenza (funzionalità presente su FRED PA-1 e DEFIGARD TOUCH 7)
Electrodes are provided without the RFID system for automatic recognition of the expiry date (features available on FRED PA-1 and DEFIGARD TOUCH 7)

		F7969W	F7969PW	
Mediana	HeartOn AED A10	●	●	 F7969W F7969PW

		F7981	F7981P	
GE	RESPONDER 3000 (attacco diretto-direct connection)	●	●	
	RESPONDER 2000 (attacco diretto-direct connection)	●	●	
	RESPONDER 1100 (attacco diretto-direct connection)	●	●	
	CARDIOSERV (attacco diretto-direct connection)	●	●	
	DASH RESPONDER (attacco diretto-direct connection)	●	●	

		F7984W	F7984PW	
Instramed	INSTRAMED AED	●	●	

		F7985	F7985P	
Instramed	INSTRAMED CARDIOMAX	●	●	

		F7986	F7986W	F7986P	F7986PW	F7986UW	
Mediana	D500	●	●	●	●	-	
	HEARTON AED A15	-	-	-	-	●	
Tecno-Gaz	TECNOHEART PLUS	-	-	-	-	●	

F7986-F7986W-F7986P-F7986PW : Non commercializzabili in Italia - Not for sale in Italy

F7986UW: Adatte a pazienti di peso >10kg. Per questo modello la vita del prodotto è 24 mesi dalla data di produzione - **F7986UW:** Suitable for patients weighing >10kg. For this model the shelf life is 24 months from manufacturing date.

		F7987W	F7987PW	
Zoll Medical Corp	AED PLUS	●	●	
	AED PRO	●	●	
	ZOLL AED 3	●	●	

F7987W-F7987PW: senza funzione CPR (risposta alle compressioni e metronomo) - *without CPR function (feedback on compression and pace metronome)*

		F7948UW	F7989UW	
Nihon Kohden	Cardiolife AED 2100K	●	●	
	Cardiolife AED 2150K	●	●	
	Cardiolife AED 2151K	●	●	
	Cardiolife AED 2152K	●	●	
	Cardiolife AED 3100	●	-	
Non commercializzabile in Francia, Germania, Gran Bretagna - <i>Not for sale in France, Germany, United Kingdom.</i> F7948UW, F7989UW: Adatte a pazienti di peso >10kg. Per questo modello la vita del prodotto è 24 mesi dalla data di produzione - <i>Suitable for patients weighing>10kg. For this model the shelf life is 24 months from manufacturing date.</i>				
		F7970	F7970P	
Laerdal Medical	CAVI-CABLES LAERDAL MEDICAL REF. 945004 (fornito, ad esempio, con i seguenti defibrillatori–supplied, e.g., with the following defibrillators: MRx, FR (serie-series), XL) REF. 920601 – REF. 920602 (fornito, ad esempio, con i seguenti defibrillatori–supplied, e.g., with the following defibrillators: HeartStart3000) REF. 920620 (fornito, ad esempio, con i seguenti defibrillatori–supplied, e.g., with the following defibrillators: HeartStart911)	●	●	
		F7971		
Physio-Control	CAVI-CABLES Physio-Control REF 3011030-00 (11110-000052) e-and REF 3011030-01 (11110-000053) (fornito, ad esempio, con i seguenti defibrillatori–supplied, e.g., with the following defibrillators: LIFEPAK 12)	●		
		F7972	F7972P	
Marquette GE	CAVO-CABLE GE MEDICAL SYSTEMS REF. 22338301 (fornito, ad esempio, con i seguenti defibrillatori–supplied, e.g., with the following defibrillators: GE CARDIOSERV, ESAOTE MDF)	●	●	
Esaote				

- ⁽¹⁾ Non utilizzare con i defibrillatori totalmente automatici (AED); la funzione pediatrica e/o l'energia erogata devono essere impostate manualmente, secondo le modalità del defibrillatore specifico.
Do not use with fully automatic defibrillators (AED); the pediatric function and/or the energy delivered must be set manually according to the instructions of the specific defibrillator.
- ⁽²⁾ Nelle applicazioni pediatriche, l'utilizzo degli elettrodi senza l'adattatore riduttore di energia indicato può risultare pericoloso.
In paediatric applications the use of electrodes without the indicated energy reducer adapter can be dangerous.

OLTRE AI MODELLI EURODEFIPADS DI CUI SOPRA, SONO DISPONIBILI ALTRI MODELLI DI ELETTRODI DESTINATI ALLA SOLA STIMOLAZIONE CARDIACA
BESIDES EURODEFIPADS MODELS, ADDITIONAL ELECTRODES HAVE BEEN INTENDED FOR EXTERNAL CARDIAC STIMULATION

		F7951/STIM	F7951P/STIM	
Zoll Medical Corp	ZOLL serie M (solo versioni con stimolatore) M SERIES (pacer versions only)	•	•	
		F7955/STIM		
Nihon Kohden	TEC-7731 con cavo-with cable JC-755V	•		
	TEC-5531 con cavo-with cable JC-755V	•		
Innomed	CARDIOAID 200B	•		
		F7973		
Physio-Control	CAVO-CABLE Physio-Control REF. 802905-03	•		

FIAB garantisce la compatibilità degli elettrodi con i modelli di defibrillatori sopra indicati; si raccomanda comunque di verificare preventivamente la compatibilità con il dispositivo in uso, controllando almeno il corretto inserimento del connettore nella presa dell'apparecchio, del cavo paziente o di adattatori eventualmente utilizzati. Ove non specificato diversamente, l'utilizzo di adattatori o cavi di estensione potrebbe compromettere la funzionalità degli elettrodi. Seguire le indicazioni dei produttori dei defibrillatori per quanto riguarda il posizionamento e la terapia, specialmente su pazienti pediatrici. I marchi e i nomi commerciali presenti nel documento sono proprietà dei rispettivi produttori.

FIAB guarantees the compatibility of the electrodes with the above mentioned defibrillator models; in any case it is recommended to check beforehand the compatibility with the device in use, checking at least the correct insertion of the connector in the socket of the device, of the patient cable or of any adapters used. Unless otherwise specified, the use of adapters or extension cables could compromise the functionality of the electrodes. Follow the defibrillators manufacturer's instructions regarding the placement and therapy, especially on pediatric patients. The brands and commercial names in this document are property of their corresponding manufacturers.