

Pletismografie corporală confortabilă



Bodystik™



- › Intrare ușoară în cabină
- › Îngrijirea optimă a pacientului
- › Control rapid al calității



Geratherm®
Respiratory

Spirometry

CPET

PFT

Intrare ușoară în cabină

Scaunul pacientului baleiabil și treapta extrem de mică a ușilor permit accesul ușor al pacienților cu deficiențe fizice.



*60 grade
baleiere*



Software de ultimă generație pentru diagnosticarea funcției pulmonare

Blue Cherry TM folosește o bază de date SQL puternică pentru stocarea datelor. Acest lucru permite ca Bodystik TM să fie integrat optim într-o rețea sau să fie folosit bodypletismograf de sine stătător..

*Instalare usoara
Prezentarea ecranului clar și bine conturat
Interfețe GDT și HL7 ușor și flexibile
conectabile în rețea
Bază de date SQL puternică pentru
gestionarea securizată a datelor și
evaluări statistice
Generator de raporturi WYSIWYG*



Construcție modernă

Construcția robustă din aluminiu și cele cinci ferestre mari din sticlă securizată calită creează un interior plăcut, cu stabilitate maximă, cu toți senzorii din interior.



Închidere electromagnetică a ușii

Ușa poate fi întotdeauna deschisă din interior și din exterior, prin simpla apăsare a unui buton.

Un LED indică dacă ușa este complet închisă.

Îngrijirea optimă a pacientului


Procedurile automate de măsurare, instrucțiunile bazate pe software și un sistem intercom oferă un management optim al pacientului.

Stand reglabil electric pe înălțime

Prin apăsarea unui buton, aparatul de măsurare poate fi reglat electric la înălțimea optimă a pacientului, chiar și atunci când ușa este închisă.

Control rapid al calității

Reproductibilitatea și cooperarea pacientului pot fi evaluate rapid după criteriile ATS / ERS și prin suprapunerea curbelor.

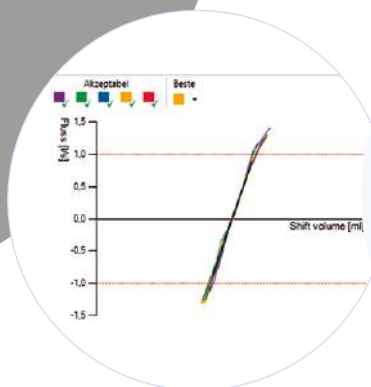


Date tehnice

Teste	
Programe de testare	Spirometrie, Flux-volum (FVV), TGV, Rezistanta, MVV
Proceduri de testare	Test individual, Pre/Post, Bronho provocare Difuzie CO, MIP/MEP, Complianta, Rocc/Rint
Interpretare	
Diagnostic	(Semi-)automat conform ATS/ERS 2005 Grafic de interpretare propriu
Control de calitate	Acceptabilitate si Repetabilitate conform ATS/ERS 2005
Seturi predictive	GLI 2012, ECCS 1993, NHANES III, Zapletal etc.
Prezentari predictive	Predicted, LLN, ULN, % Predicted, Z Score
Test electronic	
PC interface	USB 2.0
Alimentare	100 - 240 V / 50 - 60 Hz / max. 100 VA
Software	Blue Cherry
Cabina	
Principiu	Volum constant; Pompa interna 100ml/1Hz
Dimensiuni	950 x 850 x 1730 mm (W x L x H cu usa inchisa)
Senzori	
Flux	Presiune diferentiala (Ergoflow) ± 16 L/s, Precizia indeplineste specificatiile ATS/ERS Rezistenta circuit <0,5 cmH ₂ O/L/s; rezolutie <0,5ml/s
Presiune cabina	Măsurarea debitului de masă ± 0,25 KPa, Precizie ± (1,5 % la citire + 1,5 % FS)
Presiune bucala	Semiconductor ± 25 KPa, Precizie ± 0,25 % FS

*Geratherm Respiratory GmbH este o subsidiară a Geratherm Medical AG.
Toate produsele Geratherm Respiratory GmbH îndeplinesc criteriile ATS/ERS
și alte standarde și linii directoare internaționale aplicabile. Geratherm
Respiratory GmbH este certificată conform DIN EN ISO 13485*

Accesorii

CO-Difuzie
automata cu
valva
electro-
magnetica

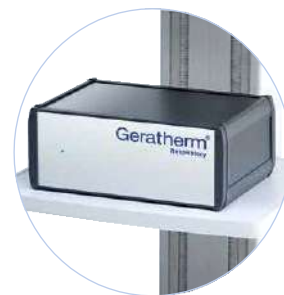

Neumofilt



Seringa 3l



Partenerul dvs. Geratherm Respiratory:

CE
0494

Informații
suplimentare:

