




Universa® Firm Ureteral Stent Set

Used for temporary internal drainage from the ureteropelvic junction to the bladder. Ureteral stents have been employed to relieve obstruction in a variety of benign, malignant, and post-traumatic conditions. The stents may be placed using endoscopic, percutaneous, or open surgical techniques. The multi-length stents will accommodate ureters from approximately 22 to 32 cm in length. The set includes a stent, a wire guide, and a positioner. Caution: We advise you to evaluate the stent periodically; the stent must not remain indwelling for more than **12 months**.

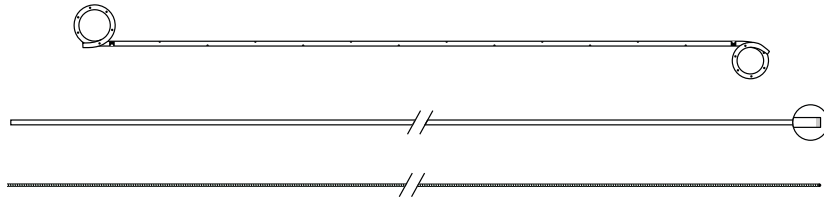

Order Number	Reference Part Number	Fr	Length cm
Set			
G54378	UFI-522	5.0	22
G54377	UFI-524	5.0	24
G54376	UFI-526	5.0	26
G54447	UFI-528	5.0	28
G54444	UFI-530	5.0	30
G54442	UFI-622	6.0	22
G54449	UFI-624	6.0	24
G54448	UFI-626	6.0	26
G54446	UFI-628	6.0	28
G54445	UFI-630	6.0	30
G54443	UFI-722	7.0	22
G54441	UFI-724	7.0	24
G54379	UFI-726	7.0	26
G54440	UFI-728	7.0	28
G54438	UFI-822	8.0	22
G54436	UFI-824	8.0	24
G54434	UFI-826	8.0	26
G54433	UFI-828	8.0	28
Stent Set with Roadrunner® Wire Guide and Lockable Pusher			
G54439	UFI-522-RPC-LP	5.0	22
G54437	UFI-524-RPC-LP	5.0	24
G54435	UFI-526-RPC-LP	5.0	26
G54432	UFI-528-RPC-LP	5.0	28
G54431	UFI-622-RPC-LP	6.0	22
G54430	UFI-624-RPC-LP	6.0	24
G54429	UFI-626-RPC-LP	6.0	26
G54428	UFI-628-RPC-LP	6.0	28
G54427	UFI-722-RPC-LP	7.0	22


Some products or part numbers may not be available in all markets. Contact your local Cook representative or Customer Support & Delivery for details.

Please see product risk information in the IFU at cookmedical.eu.

Order Number	Reference Part Number	Fr	Length cm
G54426	UFI-724-RPC-LP	7.0	24
G54425	UFI-726-RPC-LP	7.0	26
G54424	UFI-728-RPC-LP	7.0	28
Stent Set with Lockable Pusher			
G54423	UFI-626-LP	6.0	26
G53919	UFI-724-LP	7.0	24
Stent and Positioner			
G54418	UFI-522-R	5.0	22
G54416	UFI-524-R	5.0	24
G54414	UFI-526-R	5.0	26
G54412	UFI-528-R	5.0	28
G54410	UFI-622-R	6.0	22
G54408	UFI-624-R	6.0	24
G54407	UFI-626-R	6.0	26
G54404	UFI-628-R	6.0	28
G54402	UFI-722-R	7.0	22
G54400	UFI-724-R	7.0	24
G54398	UFI-726-R	7.0	26
G54396	UFI-728-R	7.0	28
G54395	UFI-822-R	8.0	22
G54394	UFI-824-R	8.0	24
G54391	UFI-826-R	8.0	26
G54392	UFI-828-R	8.0	28
Stent Only			
G53920	UFI-622-B	6.0	22
G54383	UFI-624-B	6.0	24
G54382	UFI-626-B	6.0	26
G54381	UFI-726-B	7.0	26
Stent with Pigtail Sideports Only			
G54420	UFI-626-P	6.0	26
G54452	UFI-628-P	6.0	28
G54422	UFI-726-P	7.0	26
G54421	UFI-728-P	7.0	28

Some products or part numbers may not be available in all markets. Contact your local Cook representative or Customer Support & Delivery for details.

Please see product risk information in the IFU at cookmedical.eu.

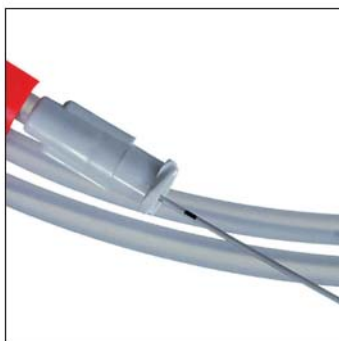

Roadrunner® PC Wire Guide

Used for catheter positioning and exchange in a tortuous or kinked ureter, or traversing a large stone en route to the kidney. The nitinol core allows for maximum deflection without kinking. The platinum tip ensures high visualization during fluoroscopy. One-to-one torque control allows for precise navigation throughout the most challenging anatomy. The Roadrunner is available in standard and stiff shaft. The AQ® coating is a microthin layer of hydrophilic polymer that, when activated, attracts and holds water and other liquids to the wire guide, creating a low-friction surface. Not intended for PTCA use.

Global Product Number	Order Number	Diameter inch	Length cm	Tip Configuration	Tip Length cm	Coating
-----------------------	--------------	---------------	-----------	-------------------	---------------	---------

Standard Body Wire Guides

G18142	RFPC-035145-0	.035	145	straight	7	Slip-Coat®
G17542	RFSPC-035145-0	.035	145	straight	3	Slip-Coat
G17539	RFSPC-038145-0	.038	145	straight	3	Slip-Coat

Ink Marks and AQ Coating

G18629	RFSPC-035145-0-I-AQ	.035	145	straight	3	AQ
G17866	RFSPC-038145-0-I-AQ	.038	145	straight	3	AQ

Stiff Body Wire Guides

G34132	RPC-035145-5*	.035	145	angled	8	Slip-Coat
G34130	RPC-038145-5*	.038	145	angled	8	Slip-Coat
G34131	RPC-035145-0-5*	.035	145	straight	8	Slip-Coat
G34129	RPC-038145-0-5*	.038	145	straight	8	Slip-Coat

* Sold in boxes of 5.

Slip-Coat is a registered trademark of Angiotech Biocoatings Corp.

Français



Guide PC Roadrunner®

Utilisé pour le positionnement et l'échange d'un cathéter dans un uretère tortueux ou coudé ou pour franchir un gros calcul situé dans la voie d'accès au rein. L'âme en nitinol permet une déflexion maximale sans coudure. L'extrémité en platine garantit un niveau élevé de visualisation au cours de la radioscopie. Un contrôle de couple dans un rapport de un à un permet une navigation précise dans les anatomies les plus difficiles. Le Roadrunner est disponible en tige standard ou rigide. Le revêtement AQ® est une couche micro-fine de polymère hydrophile qui, lorsqu'elle est activée, attire l'eau et d'autres liquides sur le guide et les retient, créant ainsi une surface à faible coefficient de friction. Ne pas les utiliser pour une ATCP.

Deutsch



Roadrunner® PC Führungsdraht

Zur Anwendung bei der Platzierung bzw. dem Austausch eines Katheters in einem stark gewundenen oder geknickten Harnleiter oder bei der Umgehung eines großen Harnsteins auf dem Weg zur Niere. Die Nitinolseele lässt größtmögliche Biegung ohne Knicken zu. Die Platinspitze sorgt für eine deutliche Darstellung unter Durchleuchtung. Die Drehstabilität (im Verhältnis 1:1) ermöglicht genaues Navigieren selbst bei schwierigsten anatomischen Verhältnissen. Der Roadrunner ist mit Standard- oder versteiftem Schaft erhältlich. Die AQ®-Beschichtung ist eine mikrodünne Schicht aus einem hydrophilen Polymer, die nach ihrer Aktivierung Wasser und andere Flüssigkeiten zum Führungsdraht zieht und festhält und so die Reibung an der Oberfläche stark herabsetzt. Nicht geeignet für PTCA-Interventionen.

Italiano



Guida Roadrunner® PC

Utilizzata per il posizionamento e lo scambio dei cateteri in ureteri tortuosi o attorcigliati, oppure per l'aggiramento di un grosso calcolo nel percorso verso il rene. L'anima in nitinolo consente la deflessione massima senza il rischio di piegamenti. La punta in platino garantisce la netta visualizzazione in fluoroscopia. Il preciso controllo direzionale consente una navigazione precisa all'interno delle anatomie più complesse. La guida Roadrunner è disponibile con corpo standard e con corpo rigido. Il rivestimento AQ® è costituito da uno strato microsoffile di polimero idrofilo che, quando attivato, attira e trattiene acqua e altri liquidi sulla guida, creando una superficie ad attrito ridotto. Non indicato per angioplastica coronarica transluminale percutanea (PTCA).

Español 

Guía PC Roadrunner®

Se utiliza para colocar e intercambiar catéteres en uréteres tortuosos o acodados, o para sortear cálculos de gran tamaño en la trayectoria hacia el riñón. El alma de nitinol permite una deflexión máxima sin plicatura. La punta de platino garantiza una gran visibilidad durante la fluoroscopia. El control de torque 1:1 permite el desplazamiento preciso por las zonas anatómicas más difíciles. La guía Roadrunner se ofrece con eje estándar o rígido. El revestimiento AQ® es una capa microfina de polímero hidrofílico que, al activarse, atrae y retiene el agua y otros líquidos en la guía, creando una superficie de baja fricción. No está indicada para uso en ACP.

Русский 

Проводник Roadrunner® PC

Применяется для позиционирования и замены катетера в извитом или изогнутом мочеточнике, либо для обхода крупного камня по пути в почку. Нитиновая струна допускает максимальный изгиб без излома. Платиновый кончик обеспечивает надежную рентгеноскопическую визуализацию. Управление вращением в отношении 1:1 обеспечивает точное введение в самых сложных анатомических условиях. Roadrunner выпускается со стандартной или жесткой струной. Покров AQ® представляет из себя сверхтонкий слой гидрофильного полимера, который после активации притягивает к проводнику воду и другие жидкости и удерживает их, создавая поверхность с низким коэффициентом трения. Не предназначен для применения при ЧТКА.

Polski 

Prowadnik Roadrunner® PC

Stosowany do umiejscawiania i wymiany cewnika w krętym lub zapętłonym moczowodzie lub pokonywania dużych kamieni w drodze do nerki. Rdzeń nitinolowy umożliwia maksymalne zgięcie bez zapętlenia. Platynowa końcówka zapewnia dobrą wizualizację w trakcie fluoroskopii. Kontrola obrotu w stosunku jeden do jednego umożliwia precyzyjne sterowanie w najtrudniejszych obszarach anatomicznych. Prowadnik Roadrunner dostępny jest w wersji ze standardowym lub sztywnym trzonem. Powłoka AQ® to mikroskopijnie cienka warstwa hydrofilnego polimeru, który po aktywacji przyciąga do prowadnika i zatrzymuje na nim wodę i inne ciecze, tworząc powierzchnię o niskim współczynniku tarcia. Nie przeznaczony do zabiegów PTCA.