




ROTAREX[®] S
ASPIREX[®] S



Эндоваскулярная система Straub

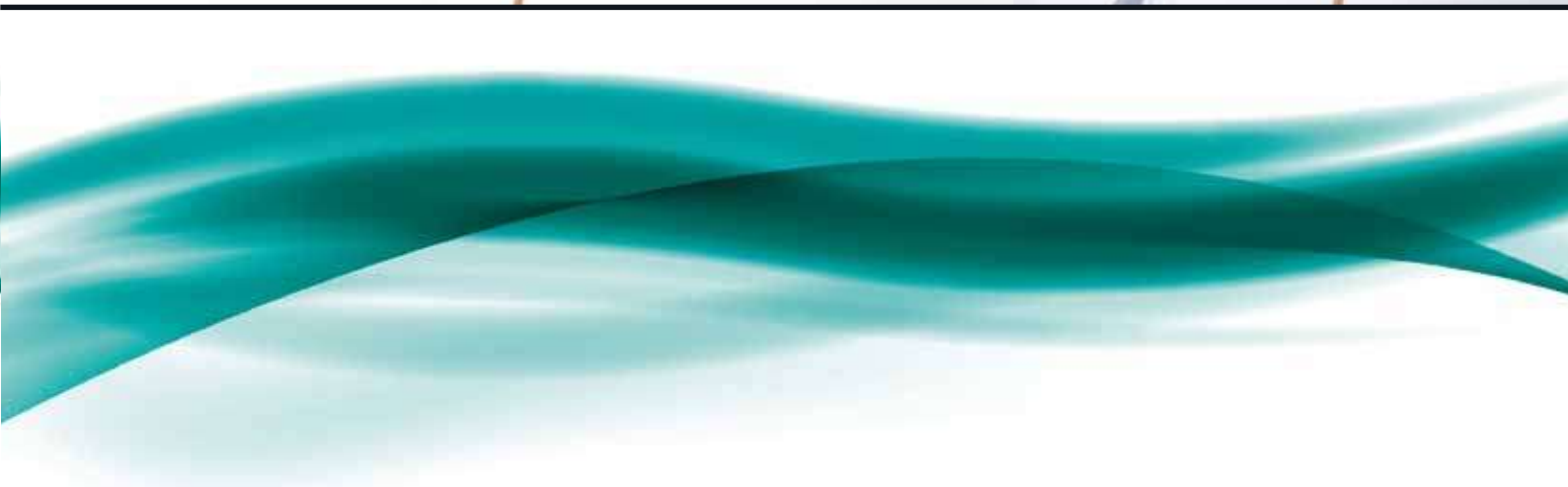

www.straubmedical.com

straub[®]
MEDICAL

Rotarex[®]S Система тромбэктомии, которая действительно работает

Многоцелевое использование одного прибора

Высокоэффективное средство при
острых и хронических окклюзиях

- Нативные сосуды
- Стент (рестеноз внутри стента)
- Шунты
- Диализный доступ (фистула, графт)

Четыре функции одного прибора

- **Разрушение** окклюзионного материала в сосуде (до 1 см/сек)
- **Аспирация** материала внутрь катетера
- **Фрагментация** аспирированного материала
- **Удаление** из сосуда



Aspirex® S **Безопасный, эффективный и нетравматичный**

Многоцелевое использование одного прибора

**Высокоэффективен при
острой окклюзии**

- Вены
- Артерии
- Диализный доступ (фистулы, графт)

Три функции одного прибора

- **Аспирация** свежих тромбов и эмболов
- **Фрагментация** аспирированного материала
- **Удаление** из сосуда



Почувствуйте разницу

- Прекрасная передача усилия на дистальный конец катетера
- Безопасная гибкость
- Высокая управляемость катетером
- Превосходная проходимость



Преимущества Уникальная технология – быстро и эффективно

Rotarex® S:

Выявляет реальную картину сосудистого поражения


Rotarex® S удаляет весь окклюзирующий материал – как в острых, так и хронических случаях – и открывает проблемное место

- (длинные) стенты не нужны
- Предотвращает дистальную эмболию
- Не требуется применение тромболитиков
- Не вызывает гемолиза
- Снижает риск для пациента
- Снижает расходы на процедуру


Aspirex® S:

Возможность использования при венозных тромбозах

- Быстрое и эффективное удаление свежих тромбов и эмболов
- Обладает высокой аспирационной способностью

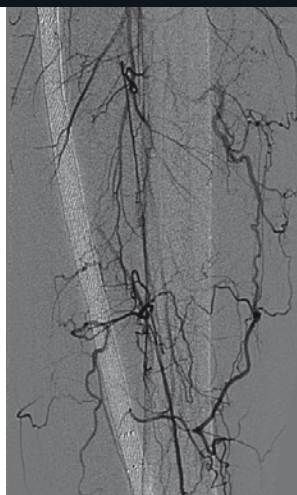

До

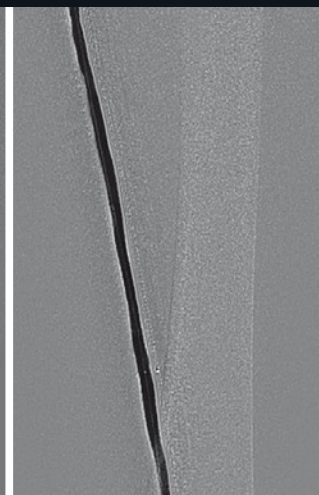

После

Rotarex® S: Решение при внутривенном рестенозе*

Позволяет провести деструкцию неоинтимы и снижает риск необходимости дополнительных мер

- Высокий уровень проходимости при использовании совместно с ЧТА (чрескожная транслюминальная ангиопластика)
- Процедуру тромбэктомии с использованием Rotarex® S можно повторять неоднократно, не ограничивая использование других методов лечения

* Р. СИЛИНГАРДИ, Дж. КОППИ: „Механическая тромбэктомия при внутривенном рестенозе: Предварительный опыт операций на подвздошных и бедренно-подколенных артериях с помощью Системы Rotarex® S“; The Journal of Cardiovascular Surgery, 2010 (Журнал по сердечнососудистой хирургии, 2010)



ROTAREX® S
ASPIREX® S

Механический привод Безопасность и простота в эксплуатации

Один для всех

Все катетеры Штрауб Медикал управляются одним приводом

- Простая сборка
- В процессе работы нет необходимости в физиологическом растворе
- Магнитное соединение с катетером
- Управление с помощью ручного или ножного переключателя
- Полностью электронный
- Надежный и безопасный



Rotarex® S - набор

REF 80219 SET Rotarex®S 6F 110 см
REF 80202 SET Rotarex®S 6F 135 см
REF 80223 SET Rotarex®S 8F 85 см
REF 80224 SET Rotarex®S 8F 110 см

Aspirex® S - набор

REF 80226 SET Aspirex®S 6F 110 см
REF 80227 SET Aspirex®S 6F 135 см
REF 80229 SET Aspirex®S 8F 85 см
REF 80230 SET Aspirex®S 8F 110 см
REF 80232 SET Aspirex®S 10F 110 см

Механический привод

REF SRS-Set Штрауб Медикал
 Состоит из мотора, блока управления, ножного переключателя, транспортной упаковки

В НАБОР помимо катетера входит проводник, стерильные салфетки и дренажный мешок



Доступен не во всех странах

Rotarex®, Aspirex® и Straub® являются зарегистрированными торговыми марками Штрауб Медикал АГ

Straub Medical AG
 Straubstrasse 12
 CH-7323 Wangs
 Switzerland

Phone: +41 81 720 04 60
 Fax: +41 81 720 04 61
 E-Mail: info@straubmedical.com
 Internet: www.straubmedical.com

