

RAPORT
a încercărilor de laborator
ОТЧЕТ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

Nr. _____ din 14 12 2020

2090

1. Denumirea întreprinderii, organizația (beneficiar) codul 7886.3.1.1.2020
Наименование предприятия, организации (заявитель)
2. Adresa juridică -
Юридический адрес
1. Denumirea mostrei, data producerii Dezinfectant Alco-Prof pentru mâini și suprafețe „DEMO”, 500 ml
Наименование образца (пробы), дата изготовления d.f. 27.08.2020, t.v. 27.08.2023, flacon polimeric cu eticheta
2. Producătorul (firma, organizația, instituția) -
Изготовитель (фирма, предприятие, организация)
țara Moldova
страна
3. Data și ora prelevării ora _____ min _____
Время и дата отбора час мин
Livrat în LÎA ora _____ min _____ 18.11.2020
Доставлен в ИЛЦ час мин
- N.P.P. funcția medic igienist Ștefan Constantinovici, secția expertiză ANSP
Ф.И.О., должность
4. Condițiile de transportare -
Условия доставки
5. Date suplimentare: proces-verbal de prelevare din 18.11.2020
Дополнительные сведения
6. D.N. la producție: -
НД на продукцию
3. D.N. privind. Reglementarea volumului cercetărilor de laborator și aprecierea lor -
НД регламентирующие объем лабораторных исследований и их оценку

Cercetările microbiologice:

Микробиологические исследования

Mostra a sosit ora - min - 18.11.2020
Образец поступил час минMostra a investigat ora - min - 24.11-11.12.2020
Образец исследован час минNr. de înregistrare 90 în registru: Nr.-
Регистрационный № в журналеNr. - procesului – verbal
протокола испытаний

Obiectul de cercetare și substanța activă	- Dezinfectant Alco-Prof pentru mâini și suprafețe „DEMO” - substanța activă - alcool etilic 72%
Condiții de stocare	- Temperatura camerei
Concentrațiile testate a dezinfectantului:	- nediluat
Timp de contact de test:	- 30 sec - 5 min
Microorganisme de testare:	- Staphylococcus aureus ATCC 6538 - Enterococcus hirae ATCC 10541 - Candida albicans ATCC 10231 - Pseudomonas aeruginosa ATCC 15442
Neutralizant:	- Soluție de Tween 80 (30g/l), lecitină (3g/l), tiosulfat de sodiu (5g/l)
Diluant:	- Soluție de clorură de sodiu cu triptonă 0,1%
Substanță de interferență (stimul organic):	- Albumină de bovină 0,3g/l (condiții de curățenie) - Albumină de bovină 3,0g/l plus eritrocite 3,0 ml/l (condiții de murdărie)
Mediile de cultură:	- Mediu Agar triptonă soia (pentru bacterii) - Mediu Sabouraud agar cu dextroză (pentru drojdii)
Temperature de incubare	- $(36 \pm 1) ^\circ\text{C}$ pentru bacterii - $(30 \pm 1) ^\circ\text{C}$ pentru drojdii
Metoda de control utilizată:	- Metoda de diluție-neutralizare
Documentul de referință*:	SM SR EN 13727+A1:2014 Antiseptice și dezinfectante chimice. Încercarea cantitativă a suspensie pentru evaluarea activității bactericide în domeniul medical. Metoda de Încercare și cerințe (fază 2, etapă 1)
	SM SR EN 13624:2014 Antiseptice și dezinfectante chimice. Încercarea cantitativă a suspensiei pentru evaluarea activității fungicide sau levuricide în domeniul medical. Metodă de încercare și cerințe (fază 2, etapă 1)

Rezultatele de încercare

Microorganismul de testare: *Staphylococcus aureus* ATCC 6538

I. Condiții de curățenie- 30 sec., 5 min.

Validare și controale

Suspensie de validare (N _{vo})			Controlul condițiilor experimentale (A)			Controlul neutralizării (B)			Validarea metodei (C) Concentrația produsului - nediluat		
V _{C1}	36	x= 36	5 min V _{C1}	88	x=81	30 s V _{C1} /V _{C2}	40/42	x=41	30 s V _{C1} /V _{C2}	40/61	x= 51
V _{C2}	36		5 min V _{C2}	74		5 min V _{C1} /V _{C2}	40/37	x=39	5 min V _{C1} /V _{C2}	51/59	x=55
30 ≤ 36 (N _v /10) ≤ 160 ? Da Nu			81 ≥ 18 (0,5x N _{vo}) ? Da Nu			39/41 ≥ 18 (0,5x N _{vo}) ? Da Nu			51/55 ≥ 18 (0,5x N _{vo}) ? Da Nu		
Suspensia de validare (N _{VB})			V _{C1} =38 V _{C2} = 32			35			30 ≤ 35 (N _{VB} /1000) ≤ 160 ? Da Nu		

Suspensia de încercare și încercarea

Suspensia de încercare (N și N ₀)	N	V _{C1}	V _{C2}	N=401 x 10 ⁶ =lg 860 8,17 ≤ 8,60 ≤ 8,70 ? N ₀ = N/10 = 401 x 10 ⁵ =lg 7,60 7,17 ≤ 7,60 ≤ 7,70 ? Da Nu
	10 ⁻⁶	395	396	
	10 ⁻⁷	45	43	

Concentrația produsului testat, %	Timp de contact	N _A			N _{A(media)} = (V _{C1} + V _{C2} /2) x 10	lg N _A	lg R (N ₀ =7,60)
		etapa de diluție	V _{C1}	V _{C2}			
nediluat	30 sec	10 ⁻⁰	0	0	<140	<2,15	>5,45
		10 ⁻¹	0	0			
	5 min	10 ⁻⁰	0	0	<140	<2,15	>5,45
		10 ⁻¹	0	0			

II. Condiții de murdărie – 5 min.

Validare și controale

Suspensie de validare (N _{vo})			Controlul condițiilor experimentale (A)			Controlul neutralizării (B)			Validarea metodei (C) Concentrația produsului - nediluat		
V _{C1}	36	x= 36	V _{C1}	61	x=68	V _{C1}	40	x=39	V _{C1}	60	x= 48
V _{C2}	36		V _{C2}	75		V _{C2}	37		V _{C2}	35	
30 ≤ 36 (N _v /10) ≤ 160 ? Da Nu			68 ≥ 18 (0,5x N _{vo}) ? Da Nu			39 ≥ 18 (0,5x N _{vo}) ? Da Nu			48 ≥ 18 (0,5x N _{vo}) ? Da Nu		
Suspensia de validare (N _{VB})			V _{C1} =38 V _{C2} = 32			35			30 ≤ 35 (N _{VB} /1000) ≤ 160 ? Da Nu		

Suspensia de încercare și încercarea

Suspensia de încercare (N și N ₀)	N	V _{C1}	V _{C2}	N=401 x 10 ⁶ =lg 860 8,17 ≤ 8,60 ≤ 8,70 ? N ₀ = N/10 = 401 x 10 ⁵ =lg 7,60 7,17 ≤ 7,60 ≤ 7,70 ? Da Nu
	10 ⁻⁶	395	396	
	10 ⁻⁷	45	43	

Concentrația produsului testat, %	Timp de contact	N _A			N _{A(media)} = (V _{C1} + V _{C2} /2) x 10	lg N _A	lg R (N ₀ =7,60)
		etapa de diluție	V _{C1}	V _{C2}			
nediluat	5 min	10 ⁻⁰	0	0	<140	<2,15	>5,45
		10 ⁻¹	0	0			

Microorganismul de testare: *Enterococcus hirae* ATCC 10541

I. Condiții de curățenie – 30 sec., 5 min.

Validare și controale

Suspensie de validare (N _{vo})			Controlul condițiilor experimentale (A)			Controlul neutralizării (B)			Validarea metodei (C) Concentrația produsului - nediluat		
V _{C1}	41	x=40	30 s V _{C1} /V _{C2}	37/49	x=43	30 s V _{C1} /V _{C2}	46/51	x=49	30 s V _{C1} /V _{C2}	47/42	x=45
V _{C2}	39		5 min V _{C1} /V _{C2}	34/49	x=42	5 min V _{C1} /V _{C2}	38/52	x=45	5 min V _{C1} /V _{C2}	48/50	x=49
30 ≤ 40 (N _v /10) ≤ 160 ? Da Nu			42/43 ≥ 20 (0,5x N _{vo}) ? Da Nu			45/49 ≥ 20 (0,5x N _{vo}) ? Da Nu			45/49 ≥ 20 (0,5x N _{vo}) ? Da Nu		
Suspensia de validare (N _{VB})			V _{C1} =72 V _{C2} =54			63			30 ≤ 63 (N _{VB} /1000) ≤ 160 ? Da Nu		

Suspensia de încercare și încercarea

Suspensia de încercare (N și N _o)	N	V _{C1}	V _{C2}	N=393 x 10 ⁶ =lg 8,59 8,17 ≤ 8,59 ≤ 8,70 ? N _o = N/10 = 393 x 10 ⁵ =lg 7,59 7,17 ≤ 7,59 ≤ 7,70 ? Da Nu
	10 ⁻⁶	395	400	
	10 ⁻⁷	34	36	

Concentrația produsului testat, %	Timp de contact	N _A			N _{A(media)} = (V _{C1} + V _{C2} /2) x 10	lg N _A	lg R (N _o =7,59)
		etapa de diluție	V _{C1}	V _{C2}			
nediluat	30 sec	10 ⁻⁰	0	0	<140	<2,15	>5,44
		10 ⁻¹	0	0			
	5 min	10 ⁻⁰	0	0	<140	<2,15	>5,44
		10 ⁻¹	0	0			

II. Condiții de murdărie – 5 min.

Validare și controale

Suspensie de validare (N _{vo})			Controlul condițiilor experimentale (A)			Controlul neutralizării (B)			Validarea metodei (C) Concentrația produsului - nediluat		
V _{C1}	41	x=40	V _{C1}	58	x=54	V _{C1}	38	x=45	V _{C1}	41	x=43
V _{C2}	39		V _{C2}	49		V _{C2}	52		V _{C2}	45	
30 ≤ 40 (N _v /10) ≤ 160 ? Da Nu			54 ≥ 20 (0,5x N _{vo}) ? Da Nu			45 ≥ 20 (0,5x N _{vo}) ? Da Nu			43 ≥ 20 (0,5x N _{vo}) ? Da Nu		
Suspensia de validare (N _{VB})			V _{C1} =72 V _{C2} =54			63			30 ≤ 63 (N _{VB} /1000) ≤ 160 ? Da Nu		

Suspensia de încercare și încercarea

Suspensia de încercare (N și N _o)	N	V _{C1}	V _{C2}	N=393 x 10 ⁶ =lg 8,59 8,17 ≤ 8,59 ≤ 8,70 ? N _o = N/10 = 393 x 10 ⁵ =lg 7,59 7,17 ≤ 7,59 ≤ 7,70 ? Da Nu
	10 ⁻⁶	395	400	
	10 ⁻⁷	34	36	

Concentrația produsului testat, %	Timp de contact	N _A			N _{A(media)} = (V _{C1} + V _{C2} /2) x 10	lg N _A	lg R (N _o =7,59)
		etapa de diluție	V _{C1}	V _{C2}			
nediluat	5 min	10 ⁻⁰	0	0	<140	<2,15	>5,44
		10 ⁻¹	0	0			

Organismul de testare: *Pseudomonas aeruginosa* ATCC 15442

I. Condiții de curățenie – 30 sec., 5 min.

Validare și controale

Suspensie de validare (N _{vo})			Controlul condițiilor experimentale (A)			Controlul neutralizării (B)			Validarea metodei (C) Concentrația produsului - nediluat		
V _{C1}	67	x= 64	5 min V _{C1}	51	x= 50	30 s V _{C1} /V _{C2}	38/27	x= 33	30 s V _{C1} /V _{C2}	35/41	x=38
V _{C2}	60		5 min V _{C2}	48		5 min V _{C1} /V _{C2}	38/46		x= 42	5 min V _{C1} /V _{C2}	
30 ≤ 64 (N _v /10) ≤160 ? Da Nu			50 ≥ 32 (0,5x N _{vo}) ? Da Nu			33/42 ≥ 32 (0,5x N _{vo}) ? Da Nu				38/45 ≥ 32 (0,5x N _{vo}) ? Da Nu	
Suspensia de validare (N _{VB})			V _{C1} =46 V _{C2} = 48			47			30 ≤ 47 (N _{VB} /1000) ≤ 160 ? Da Nu		

Suspensia de încercare și încercarea

Suspensia de încercare (N și N_0)	N	V_{C1}	V_{C2}	$N=502 \times 10^6 = \lg 8,68$ $8,17 \leq 8,70 \leq 8,70$? $N_0 = N/10 = 502 \times 10^5 = \lg 7,70$ $7,17 \leq 7,70 \leq 7,70$? Da Nu
10^{-6}	522	512		
10^{-7}	40	31		

Concentrația produsului testat, %	Timp de contact	N_A			$N_{A(media)} = (V_{C1} + V_{C2}/2) \times 10$	$\lg N_A$	$\lg R$ ($N_0=7,70$)
		etapa de diluție	V_{C1}	V_{C2}			
nediluat	30 sec	10^{-0}	0	0	<140	<2,15	>5,55
		10^{-1}	0	0			
	5 min	10^{-0}	0	0	<140	<2,15	>5,55
		10^{-1}	0	0			

II. Condiții de murdărie – 5 min.

Validare și controale

Suspensie de validare (N _{v0})			Controlul condițiilor experimentale (A)			Controlul neutralizării (B)			Validarea metodei (C) Concentrația produsului - nediluat		
V _{C1}	67	x= 64	V _{C1}	29	x= 36	V _{C1}	46	x= 42	V _{C1}	39	x=46
V _{C2}	60		V _{C2}	42		V _{C2}	38		V _{C2}	52	
30 ≤ 64 (N _v /10) ≤ 160 ? <u>Da</u> Nu			36 ≥ 32 (0,5x N _{v0}) ? <u>Da</u> Nu			42 ≥ 32 (0,5x N _{v0}) ? <u>Da</u> Nu			46 ≥ 32 (0,5x N _{v0}) ? <u>Da</u> Nu		
Suspensia de validare (N _{VB})			V _{C1} =46 V _{C2} = 48			47			30 ≤ 47 (N _{VB} /1000) ≤ 160 ? <u>Da</u> Nu		

Suspensia de încercare și încercarea

Suspensia de încercare (N și N_0)	N	V_{C1}	V_{C2}	$N=502 \times 10^6 = \lg 8,68$ $8,17 \leq 8,70 \leq 8,70$? $N_0 = N/10 = 502 \times 10^5 = \lg 7,70$ $7,17 \leq 7,70 \leq 7,70$? Da Nu
10^{-6}	522	512		
10^{-7}	40	31		

Concentrația produsului testat, %	Timp de contact	N_A			$N_{A(media)} = (V_{C1} + V_{C2}/2) \times 10$	$\lg N_A$	$\lg R$ ($N_0=7,70$)
		etapa de diluție	V_{C1}	V_{C2}			
nediluat	5 min	10^{-0}	0	0	<140	<2,15	>5,55
		10^{-1}	0	0			

Microorganismul de testare: *Candida albicans* ATCC 10231

I. Condiții de curățenie – 30 sec., 5 min.

Validare și controale

Suspensie de validare (N _{vo})			Controlul condițiilor experimentale (A)			Controlul neutralizării (B)			Validarea metodei (C) Concentrația produsului - nediluat		
V _{C1}	49	x= 48	5 min V _{C1}	41	x= 39	30 s V _{C1} /V _{C2}	34/37	x= 36	30 s V _{C1} /V _{C2}	46/50	x=48
V _{C2}	47		5 min V _{C2}	36		5 min V _{C1} /V _{C2}	43/35	x=39	5 min V _{C1} /V _{C2}	40/30	x=35
30 ≤ 48 (N _v /10) ≤ 160 ? Da Nu			39 ≥ 24 (0,5x N _{vo}) ? Da Nu			36/39 ≥ 24 (0,5x N _{vo}) ? Da Nu			35/48 ≥ 24 (0,5x N _{vo}) ? Da Nu		
Suspensia de validare (N _{VB})			V _{C1} =53 V _{C2} = 60			57			30 ≤ 57 (N _{VB} /1000) ≤ 160 ? Da Nu		

Suspensia de încercare
și încercarea

Suspensia de încercare (N și N_0)	N	V_{C1}	V_{C2}	$N=504 \times 10^5 = \lg 7,70$ $7,17 \leq 7,70 \leq 7,70$? $N_0 = N/10 = 504 \times 10^4 = \lg 6,70$ $6,17 \leq 6,70 \leq 6,70$? Da Nu
	10^{-5}	506	501	
	10^{-6}	50	51	

Concentrația produsului testat, %	Timp de contact	N_A			$N_{A(media)} = (V_{C1} + V_{C2}/2) \times 10$	$\lg N_A$	$\lg R$ ($N_0=6,70$)
		etapa de diluție	V_{C1}	V_{C2}			
nediluat	30 sec.	10^{-0}	0	0	<140	<2,15	>4,55
		10^{-1}	0	0			
	5 min.	10^{-0}	0	0	<140	<2,15	>4,55
		10^{-1}	0	0			

II. Condiții de murdărie- 5 min.

Validare și controale

Suspensie de validare (N _{v0})			Controlul condițiilor experimentale (A)			Controlul neutralizării (B)			Validarea metodei (C) Concentrația produsului - nediluat		
V _{C1}	49	x = 48	V _{C1}	31	x = 35	V _{C1}	43	x=39	V _{C1}	39	x=46
V _{C2}	47		V _{C2}	38		V _{C2}	35		V _{C2}	53	
30 ≤ 48 (N _v /10) ≤ 160 ? <u>Da</u> Nu			35 ≥ 24 (0,5x N _{v0}) ? <u>Da</u> Nu			39 ≥ 24 (0,5x N _{v0}) ? <u>Da</u> Nu			46 ≥ 24 (0,5x N _{v0}) ? <u>Da</u> Nu		
Suspensia de validare (N _{vB})			V _{C1} =53 V _{C2} = 60			57			30 ≤ 57 (N _{vB} /1000) ≤ 160 ? <u>Da</u> Nu		

Suspensia de încercare
și încercarea

Suspensia de încercare (N și N_0)	N	V_{C1}	V_{C2}	$N=504 \times 10^5 = \lg 7,70$ $7,17 \leq 7,70 \leq 7,70$? $N_0 = N/10 = 504 \times 10^4 = \lg 6,70$ $6,17 \leq 6,70 \leq 6,70$? Da Nu
	10^{-5}	506	501	
	10^{-6}	50	51	

Concentrația produsului testat, %	Timp de contact	N_A			$N_{A(media)} = (V_{C1} + V_{C2}/2) \times 10$	$\lg N_A$	$\lg R$ ($N_0=6,70$)
		etapa de diluție	V_{C1}	V_{C2}			
nediluat	5 min	10^{-0}	0	0	<140	<2,15	>4,55
		10^{-1}	0	0			

cații:

- număr pe ml (o placă sau mai multe)
- media lui V_{C1} și V_{C2}
- reducția ($\lg R$) = $\lg N_0 - \lg N_A$

Concluzie:

*Dezinfectant Alco-Prof pentru mâini și suprafețe „DEMO” pe baza de alcool etilic 72% posedă o reducere a microorganismelor de referință *S. aureus*, *P. aeruginosa* și *E. hirae* mai mare de lg 5. și o reducere a microorganismului de referință *C. albicans* mai mare lg 4 în condițiile de curățenie și în condițiile de murdărie.*

Conform SM SR EN 13727+A1:2014 și SM SR EN 13624: Dezinfectant Alco-Prof pentru mâini și suprafețe „DEMO” pe baza de alcool etilic 72% a demonstrat o activitate bactericidă și levuricidă în privința microorganismelor utilizate pentru dezinfecția igienică a mâinilor prin frecare în timp de contact 30 secunde în condițiile de curățenie și pentru dezinfecția suprafețelor în timp de contract 5 minute în condițiile de curățenie și în condițiile de murdărie.

N.P., funcția persoanei responsabile de оформarea raportului
Ф.И.О. должность лица ответственного за оформление данного протокола


Medic-microbiolog - Svetlana Prudnicionoc

semnătura _____

Șef de laborator microbiologie sanitară - Svetlana Prudnicionoc
Ф.И.О. и подпись заведующего лабораторией

semnătura _____

Șef direcției diagnostic de laborator – Ala Halacu
Ф.И.О., должность

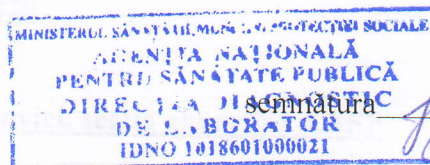

Amendamente:

Rezultatul se referă numai la proba analizată. Este strict interzisă reproducerea parțială a rezultatului.

Примечание: Результат распространяется только на анализируемую пробу. Частичное воспроизведение результата строго запрещено.