


Pungă de recoltare pentru sânge de unică folosință
(Cu pungă superioară și inferioară)
TRIPLĂ

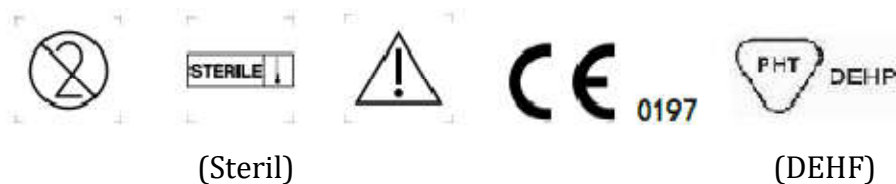


Destinația produsului:


Produsul este destinat pentru recoltarea și procesarea sângelui uman donat și deleucocitarea componentelor sanguine cu separarea stratului leucotrombocitar și resuspendarea concentratului eritrocitar în soluție aditivă TS-450W.

Parametri tehnici:


- PUNGĂ TRIPLĂ DE RECOLTARE PENTRU SÂNGE 450/400/400
- STERIL, NON-TOXIC, FĂRĂ PIROGENI
- Pentru colectarea a 450 ml de sânge
- Mărimea acului: 16G
- Lungimea tubului donator ≥ 108 cm
- Produs din polivinilclorid și dietilftalat, direcție unică, sterilizat prin autoclavare
- Container pentru colectarea sângelui cu un volum de 450 ml asigurat cu soluție anticoagulantă.
- Container pentru transferul componentului sanguin (plasmă) cu un volum de 400 ml
- Container pentru transferul concentratului eritrocitar asigurat cu:
 - a) un volum de 400 ml;
 - b) soluție aditivă în volum de 100 ml

Desenul 1: Sistem convențional al unei pungi de recoltare pentru sânge

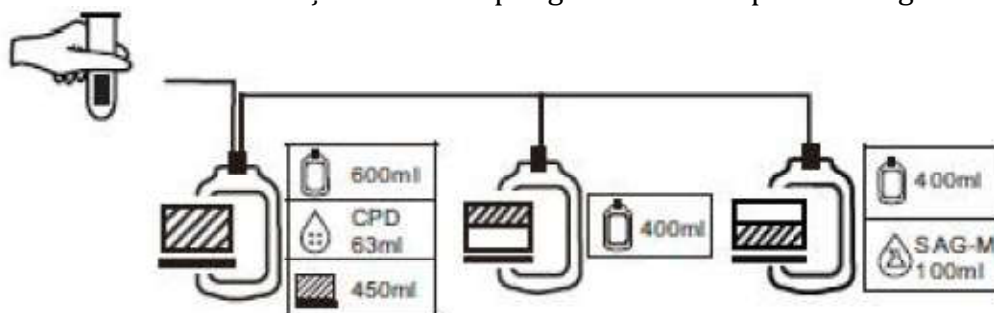

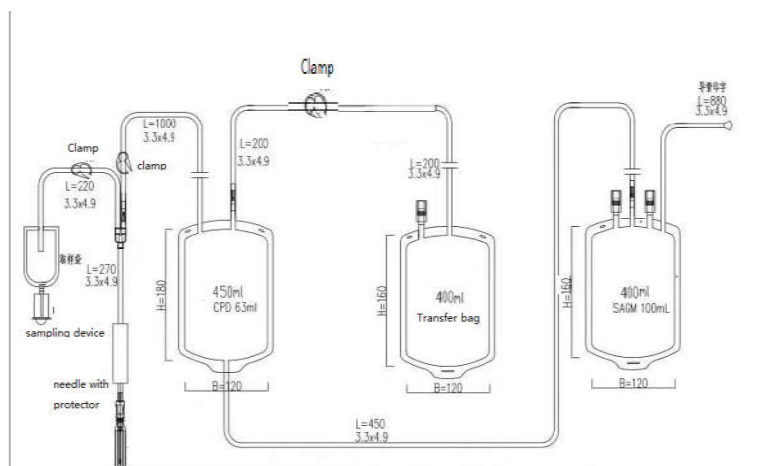


Desenul 2: Sistem de recoltare pentru sânge cu pungă superioară și inferioară

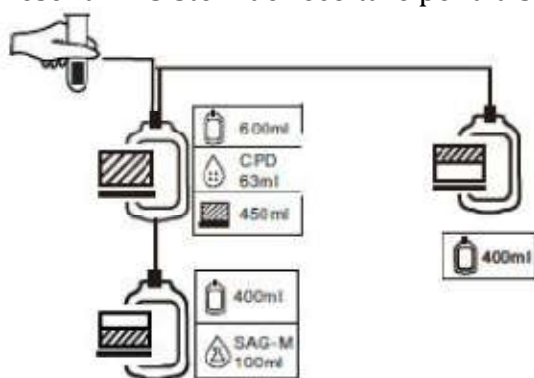

INSTRUCȚIUNI PENTRU RECOLTAREA SÂNGELUI:

1. Verificați integritatea pungii de recoltare pentru sânge și a ambalajului individual, cele compromise sau distruse trebuie respinse. **SOLUȚIA ANTICOAGULANTĂ TREBUIE SĂ FIE TRANSPARENTĂ.**
2. Puneți punga de recoltare pe un cântar mai jos de brațul donatorului sau monitorizați cantitatea de sânge recoltat în alt mod (de exemplu, cântar cu arc).
3. Aplicați manșeta de tensiune arterială, faceți vena vizibilă și dezinfecțați regiunea de venopuncție.
4. Eliminați capacul de protecție al acului prin răsucire (vezi Fig.1), eliberați manșeta de tensiune arterială și inițiați imediat procedura de recoltare a sângelui.
5. Imediat ce începe procedura de recoltare a sângelui, amestecați sângele cu soluția anticoagulantă prin agitarea ușoară a pungii de recoltare.
6. Colectați până la 450 ml de sânge.
7. După recoltare, tensionați manșeta de tensiune arterială și extrageți acul. Colectați mostre de sânge pentru analize de laborator.
8. Agitați încă o dată ușor sângele cu soluția anticoagulantă (întoarceți punga de recoltare de sus în jos de cel puțin 10 ori).

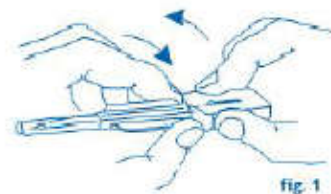

9. Stoarceți sângele din tubul donator în punga de recoltare, amestecați și permiteți sângelui amestecat cu soluție anticoagulantă să curgă înapoi în tubul donator.
10. Verificați încă o dată integritatea pungii de recoltare, verificați numerele mostrelor pentru analize de laborator.
11. Sigilați tubul donator cu inele de aluminiu sau cu un sigiliu termic de tip HF reglat anterior.
12. Păstrați punga de recoltare la temperatura potrivită de păstrare până la momentul posibilei preparări a sângelui.
13. Pungile - satelit goale pot fi deja utilizate drept punge de transfer pentru procesarea ulterioară conform tehnicilor standart de procesare a componentelor.

INSTRUCȚIUNI PENTRU TRANSFUZAREA SÂNGELUI

1. Păstrați sângele sau componentele sângelui la temperatura specificată.
2. Verificați compatibilitatea înainte de transfuzie.
3. Nu adăugați medicamente în acest sânge.
4. Agitați și amestecați bine sângele înainte de transfuzie.
5. Îndepărtați mecanismul de protecție și inserați setul de transfuzie.
6. Transfuzati tot sângele - setul de transfuzie trebuie să fie dotat cu filtru.
7. Nu aerisiți.

INSTRUCȚIUNI PENTRU PĂSTRARE

1. Păstrați containerele neutilizate la temperatura camerei (mai mică de 30°C) într-un mediu curat, uscat (umiditatea aerului <60%), bine aerisit.
2. Pungile de recoltare pentru sânge trebuie păstrate în cutiile din carton originale.
3. Este interzisă păstrarea pungilor de recoltare pentru sânge direct pe podea.
4. Utilizarea paleților sub cutii este recomandată.

PRECAUȚII

1. Doar personalul medical calificat, echipat cu măsuri de protecție (mănuși, etc.) poate utiliza acest produs.
2. Extrageți produsul din ambalajul original individual strict înainte de utilizare.
3. Nu utilizați decât dacă soluția anticoagulantă este transparentă.
4. Nu utilizați în caz de scurgeri.
5. Nu utilizați dacă ambalajul individual este deteriorat.
6. Pungile de recoltare pentru sânge utilizate sau cele cu termenul de valabilitate expirat trebuie eliminate conform regulamentului pentru materiale medicale după contact cu sânge.
7. Acest produs conține Di (2-etilhexil)ftalat (DEHF). Nou-născuții ce primesc exsangvinotransfuzie și adulții ce primesc transfuzie de substituție cu ECMO trebuie supravegheați de către un medic.
8. Doar de unică folosință. Reutilizarea va cauza infectare.
9. După utilizare, eliminați conform instrucțiunilor de eliminare a deșeurilor medicale.

	Producător		Păstrați în locuri ferite de lumina solară
	De unică folosință		Păstrați în locuri uscate
	Utilizați până la AA/LL/ZZ		Nu resterilizați
	Codul lotului		Poziție verticală în sus
	Numărul de catalog		Se aplică limite de umiditate (de la 8% până la 80%)
	Sterilizat prin autoclavare		Nu utilizați dacă ambalajul este deteriorat
	Conține ftalați		Număr maxim de 6 niveluri de cutii la aranjare
	Limite de temperatură (de la 2°C până la 30°C)		