


MICROCATETER PHENOM™ 17

SPECIFICAȚII PENTRU COMENZI

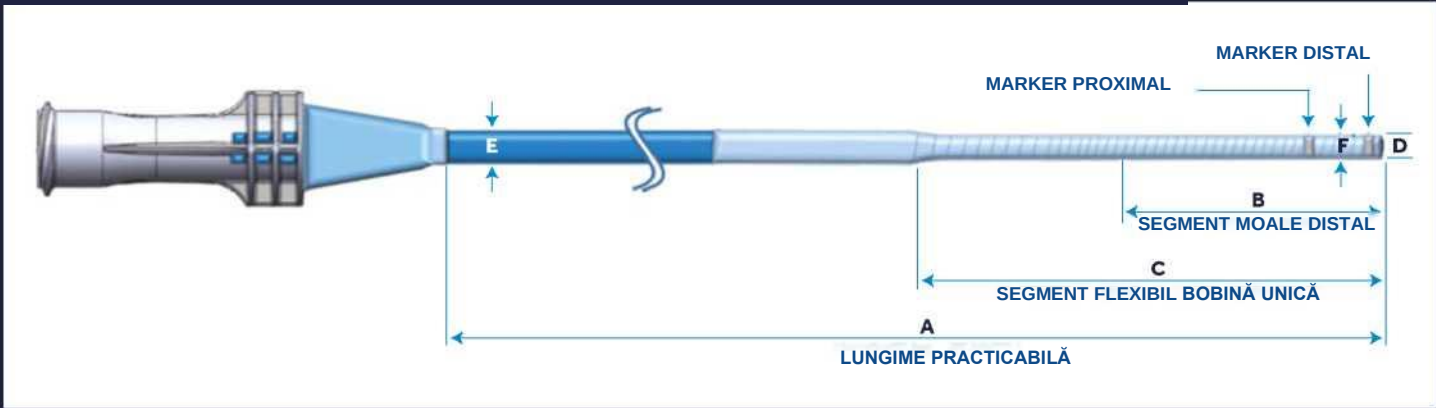

	EXPLICAȚIE Nr. CODURI PIESE									
	Microcateter Phenom™*	FG	MĂRIME	A	-	B	C	-	MARKERI VÂRF	FORMĂ VÂRF
Exemplu	Microcateter Phenom™* 17	FG	11	150	-	06	15	-	2	S

Diversele scenarii clinice au cerințe specifice de suport și de navigație. Pentru microcatetere Phenom™*, vă oferim specificații diversificate, pentru a vă satisface nevoile. Pentru a vă asigura dispozitivul adecvat, selectați cateterul:

MICROCATETERUL PHENOM™* 17: SELECTAȚI FORMA VÂRFULUI					
	D: DI CATETER	E: DE PROXIMAL	F: DE DISTAL	FORMA VÂRF	NUMĂR PIESĂ
Microcateter Phenom™* 17	0.017" (0.43mm)	0.029" (2.2F)	0.024" (1.8F)	DREPT	FG11150-0615-2S
				CURBAT, în "J"	FG11150-0615-2J
				CURBAT,, la 45°	FG11150-0615-2X
				CURBAT la 90°	FG11150-0615-2R

REFERINȚE:
1. Document Cathera ML-0001.B
2. Document Cathera ML-0001.A
3. ENR-0029.A

Microcateterele Phenom™ sunt destinate introducerii dispozitivelor de intervenție și perfuziei de agenți de diagnostic sau terapeutici în vasculaturile neurologice, periferice și coronare.

Bobinele detașabile The Axiom™ și Axiom™ Prime nu sunt indicate pentru toți pacienții, și este posibil să nu reprezinte tratamentul adecvat pentru toate scenariile clinice.

Bobinele detașabile Axiom™ și Axiom™ Prime sunt destinate embolizării endovasculare a anevrismelor intracraniene. Bobinele detașabile Axiom™ și Axiom™ Prime sunt, de asemenea, destinate embolizării altor anomalii neurovasculare, cum ar fi malformațiile arteriovenoase și fistulele arteriovenoase.

Indicațiile, contraindicațiile, avertismentele și instrucțiunile de utilizare se găsesc pe eticheta existentă pe fiecare dispozitiv.


UC201902266EE © 2018 Medtronic. Toate drepturile rezervate. Medtronic, sigla Medtronic, Further și Together, sunt mărci comerciale ale Medtronic. Phenom este o marcă comercială a Cathera, Inc.™* Mărcile terțe sunt mărci comerciale ale proprietarilor respectivi. Toate celelalte mărci sunt mărci comerciale ale unei companii Medtronic.

Medtronic

Europa
Medtronic International Trading Sàrl.
Route du Molliou 31
Case postale
CH-1131 Tolochenaz
Tel: +41 (0)21802 7000
Fax: +41 (0)21 802 79 00

www.medtronic.eu

SOLUȚII PENTRU
TRATAREA
ANEVRISMULUI
MICROCATETERUL
PHENOM™ 17
ACȚIONEAZĂ CU
ÎNCREDERE

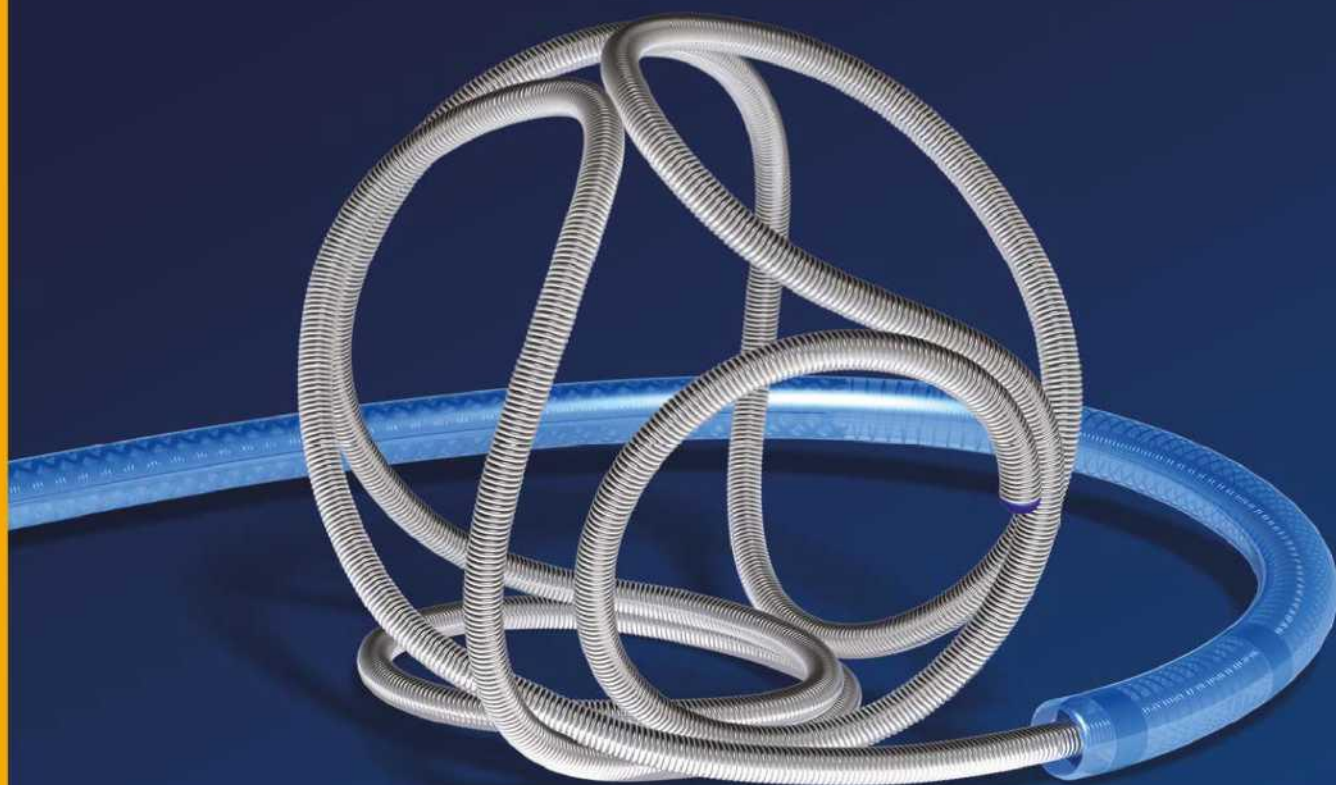

Platformă de plantare
pentru bobine și stenturi¹

Microcateterul
Phenom™ 17

3 ZONE DE ACȚIUNE CU FLEXIBILITATE PROGRESIVĂ¹



MICROCATETERUL PHENOM™ 17

Zonă distală bobinată:

- Asigură flexibilitatea și stabilitatea vârfului, ceea ce permite schimbarea tecii dispozitivului¹

Zonă medială bobinată/împletită:

- Permite transferul constant al forței de împingere proximal → distal¹

Zonă proximală împletită:


- Oferă profil proximal redus și împingere optimă

Avantaje suplimentare:


- Vârful cu profil redus permite accesarea vasculaturii distale și traversarea cu ușurință prin interstițiile stentului²
- Vârf distal atraumatic moale și totunjit²
- Lumenul interior, proiectat pentru a preveni ovalizarea și a planta dispozitivele cu frecare minimă²

Platformă de plantare pentru bobine și stenturi¹


RIGIDITATE VÂRF³

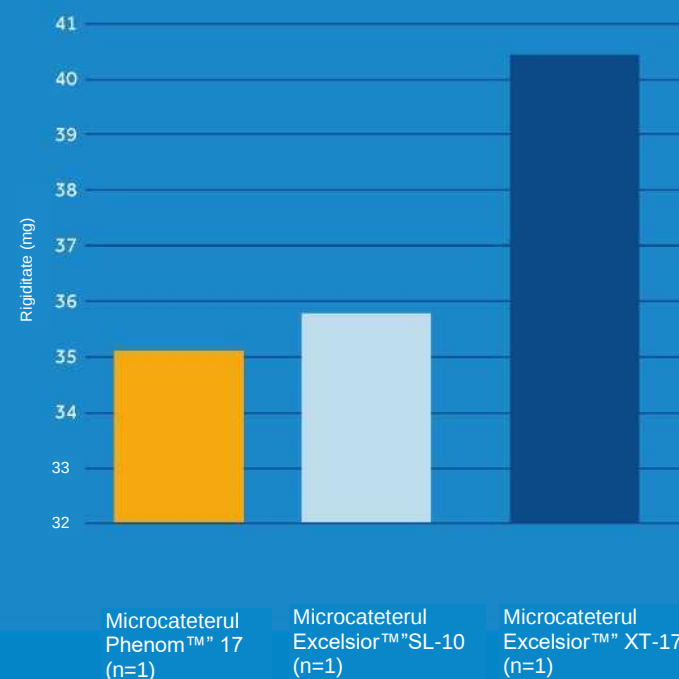

RIGIDITATE AX CATETER³

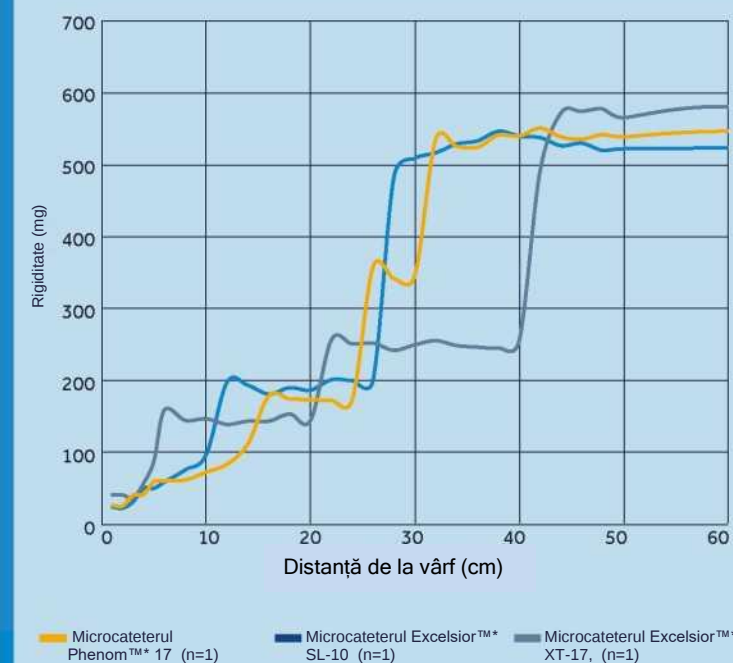

FORȚĂ URMĂRIRE CATETER³

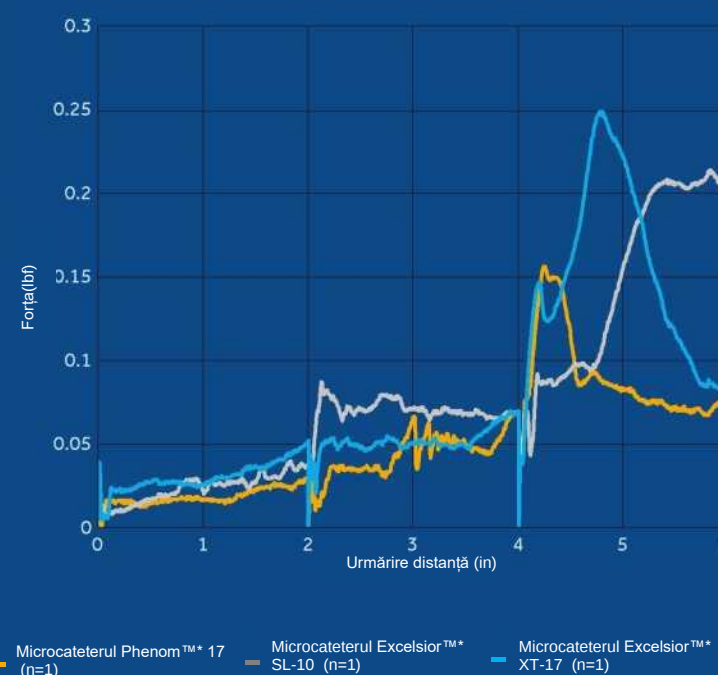

FORȚA DE ÎMPINGERE LA PLANTAREA BOBINEI³ (BOBINA AXIUM™ 3D, 20X50)

