


2.1.2 Panoul din spate al consolei

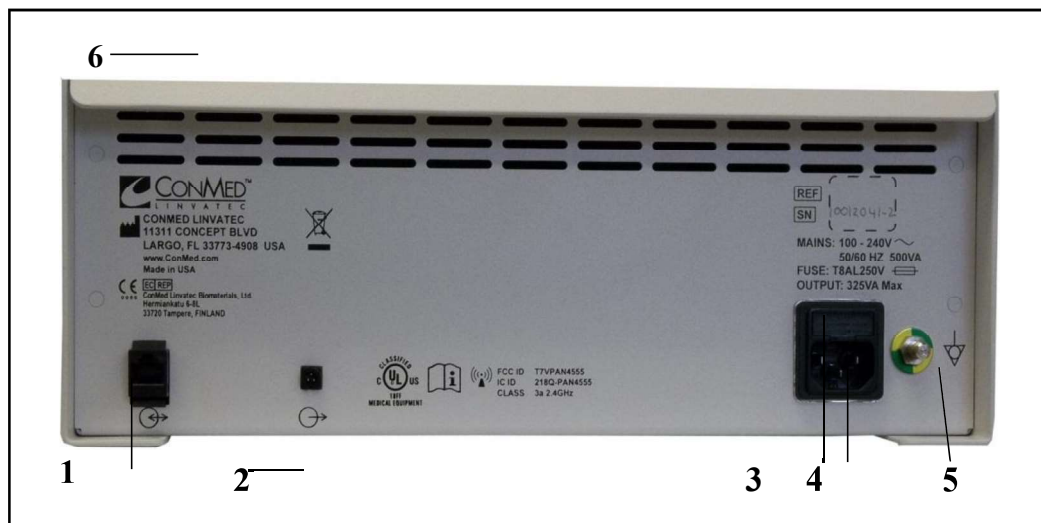

1. **Port de comunicații ConMed**— Intrare/ieșire. 
2. **Conector 24k**— Cablul de interfață al pompei 24k (D4024) se conectează între acest loc și conectorul de pe sistemul de irigare 24k. D4000/D4000A comunică utilizarea unei piese de mână a shaver-ului. D4000/D4000A nu va comunica prin ecran tactil cu sistemul de irigare 24k fără conectarea acestui cablu. 
3. **Modulul siguranței** — Conține două siguranțe T8AL 250V. Pentru a înlocui, Consultați secțiunea „3.5 Înlocuirea siguranței” 
4. **Bucșa de intrare pentru alimentare** — Acceptă cablul de alimentare pentru spital (100 - 240 V ~, 50/60 Hz).
5. **Conector de egalizare a potențialului** — Conector de egalizare a potențialului conform DIN 42801.
6. **Bucșă pentru suportul pungii de irigare** — Această bucșă este concepută pentru a accepta o tijă de suport pentru pungile de lichid opționale (număr cat. 5040-180).