



FACTURA FISCALA
НАЛОГОВАЯ КАСИДНАЯ

Seria, Nr.
Сери, №



AAR9607588

Data eliberarii
Дата выписки

12.09.2023

8. Foia de parcurs seria numar/data: DAA 4435020-4435023 01.09.23

9. Transportator: IGIENA COMPANY SRL

c.f./nr TVA / 1008600047749/ 0207375

1. Furnizor: SA "M-INTER-FARMA" MD-2026, str. Grenoble 23, mun. Chisinau IBAN: MD37EN000000022246246845 BC-ENERGBANK SA Chisinau ENEGMD22 tel: 904005

c.f./nr TVA 1003600005263 / 0207334

2. Cumparator: IGIENA COMPANY SRL Chisinau str. Acad. Natalia Gheorghiu, 30 of. 261 IBAN: MD65MO22244SV7639067100 BC-MOBIA SBANCA-OTP GROUP SA

c.f./nr TVA 1008600047749 / 0207375

3. Delegatie: data delegati: Contract: 4. Documente anexe: Certificat, Instructiune, Fisa tehnica de securitate

5. Punct încarcare				Grenoble_23		6. Punct descarcare		str. Acad. Natalia Gheorghiu, 30 str.281		7. Redfinen		—											
Nr. ord	Cod cu bare	Cod clasificator	Denumirea marfurilor/activelor, serviciilor si codul pozitiei tarifare al marfii/activului	10.1	Seria Valabil	Analiza	10.2	10.3	Pret de achizitie	A.C. dep- ozi %	10.4	10.5	10.6	10.7	10.8	10.9	10.10	10.11	10.12	A.C. far m	Prel cu aman	Suma	
1	38099490		JACLOP N250 tablete		51 01.12.25	30306 07.11.22	buc		12	202.1580	15.00	232.48167	2789.78	8	223.18	3012.96	218.33	251.0800					
2	38099490		LYSOFORMIN 3000 TL		30 09.25	00054 20.11.20	flac		6	235.3377	15.00	270.63833	1623.83	8	129.91	1753.74	254.16	292.2900					
3	38099490		LYSOFORMIN 3000 SL		— 01.09.24	00054 20.11.20	canist		1	1219.1391	15.00	1402.01000	1402.01	8	112.16	1514.17	1316.67	1514.1700					
4	38099410		QUATRODES FORTE 11		10 01.26	145048 03.08.16	cutie		6	146.6029	15.00	168.59333	1011.56	8	80.92	1092.48	158.33	182.0800					

Proces verbal de formare a preturilor cu amanuntul

APROB

11. Total pe (pagina)	6827.18	X	546.17	7373.35	X	X																			
12. Total pe (factura fiscala)	6827.18	X	546.17	7373.35	X	X																			
		Inclusiv la TVA 8%:		546.17	7373.35																				
		TVA 20%:		0.00	0.00																				

13. Permis eliberare: Farmacist Crashtov Ludmila

14. Preda marfurile/activelor (serviciile): Set depozit A BUZUGAN

L.S. M.N. Functia, numele, prenumele si semnatura

15. Printat marfurile/activelor intermediarului (transportatorului):

L.S. M.N.

6



S.A. M-INTER-FARMA

MD 2025 Mun. Chisinau, str. Grenoble 21
Tel: (022) 904 - 006, 904 - 005; Fax: 904 - 007, 079768549, 068773434
www.minterfarma.md, e-mail: sales@minterfarma.md



LYSOFORMIN 3000

- concentrat pentru dezinfectare si spalare (instrumentar medical, instrumentar stomatologic, suprafete, inventar). In special este disponibil pentru endoscoape flexibile.

COMPOZITIA: 100 gr. solutie contine: 7,5 g. glioxal, 9,5 g. glutaraldehida, 9,6 g. didecildimetilamoniu clorurat.

PROPRIETATI:

- Actiune bactericida, virulicida (incl. Hepatita B si SIDA), fungicida
- Preparatul este inagresiv pentru instrumente, endoscoape si utilaj de laborator
- Este un remediu eficient de curatare
- Nu contine formaldehida, fenoli, fosfati si agenti oxidanti
- Preparatul este stabil in apa de var, se descompune biologic
- Miros placut si proaspat

PREPARAREA:

- Din concentratul **Lysoformin 3000** se prepara solutii de lucru prin diluare cu apa (temperatura nu mai mare ca cea a incaperii)
- Se toarna intai apa, apoi concentratul
- Se recomanda folosirea solutiilor proaspete
- Solutiile necontaminate cu produse organice (dezinfectarea si curatarea presterilizatorie a instrumentarului) se pot pastra active timp de 14 zile

DEZINFECTAREA INSTRUMENTELOR (INCL. ENDOSCOAPE)

Dezinfectarea bacteriilor (incl. tuberculoza), ciupercilor si a virusurilor

1% - 1 ora	1,5% - 30 min.	2,0% - 15 min.
10 ml. concentrat - 1 L. apa	15 ml. - 1 L. apa	20ml. - 1 L. apa

Dezinfectarea virusurilor Hepatitei B si HIV

1,5% - 30 min.	2,0% - 15 min.
15ml - 1 L. apa	20 ml. - 1 L. apa

Dezinfectarea suprafetelor

0,25% - 4 ore	0,5% - 1 ora	1,0% - 15 min.
2,5 ml. - 1 L.	5,0 ml - 1 L.	10 ml. - 1 L

Dezinfectarea tesaturilor: 0,25% - 4 ore

PRECAUTII:

- Amestecurile cu alte solutii detergente sau resturile acestora pe instrumentele expuse pot reduce sau anula efectul dezinfectant al preparatului
- În caz de contact accidental (ochi, cavitate bucală, ingestie) cu **Lysoformin 3000** este necesara asistenta medicala. Primul pas este diluarea concentratiei agresive prin spalaturi abundente cu apa (extern si intern)
- Se folosesc doar solutii si nu concentratul
- A se folosi manusi de protectie

PASTRAREA:

- A se feri de copii
- Temperatura de pastrare + 5°C - + 30°C

Lysoform
Dr. Hans Rüdiger GmbH
Kaiser-Wilhelm-Str. 123
12217 Berlin



Agencia Națională pentru Sănătatea Publică



CERTIFICAT
DE ÎNREGISTRARE DE STAT/AVIZARE SANITARĂ
AL PRODUSULUI BIOCID

Nr. 00054 data/luna/anul 20.11.2020

Solicitant: For titular S.A. „M-INTER-FARMA”.

Adresa juridică: str. Grenoble, 23, mun. Chișinău, Republica Moldova

Nr. de identificare de stat – codul fiscal 1003600005263

În conformitate cu HG nr. 564 din 10.09.09 și în baza ordinului ANSP nr.157 din 17.11.2020
(nr., data/luna/anul)

emis în baza documentației înaintate, s-a decis că următorul produs biocid poate fi fabricat sau comercializat și utilizat în Republica Moldova, conform prevederilor legislației în vigoare.

Denumirea comercială a produsului: *LYSOFORMIN 3000*

1. Date de identificare ale produsului:

1.1 Categoria de produs: biocid

- Grupa principală: 1

- Tip de produs: 2

1.2 Utilizare: *Dezinsecția suprafețelor, instrumentelor și echipamentului.*

1.3 Forma de condiționare și ambalare: lichid, ambalaj – 200x20 ml dosing bags = 4 litri în cutie de carton, 12x1000ml flacoane, 2x5 lit. canistre, 1x20 lit. canistră.

1.4 Conținut în substanțe active: Glyoxal – 7,5gr.

Glutaraldehydă - 9,5 gr.

Didecildimetilamoniu Clorid -9,6 gr.

1.5 Categoriile de utilizatori: profesionali, industrial, populație

1.6 Informații privind reglementările aplicabile: HG nr. 564 din 10.09.2009, Ordinul MS nr.299 din 06.05.2010 cu modificările ulterioare.

2. Date de identificare ale producătorului:

2.1 Firma: Lysoform Dr.Hans Rosemann GmbH

2.2 Adresa: 12247, str.KAISER-Wilhelm-str.133, or. Berlin, Germania

Valabilitatea certificatului de înregistrare data/luna/anul 20/11/2025


Compoziția, parametrii de calitate ai produsului și domeniul de utilizare sunt cei prevăzuți în documentația tehnică, care a stat la baza eliberării prezentului certificat, conform Raportului de evaluare nr. 41 din 16.10.2020

Orice modificare a datelor de identificare a produsului biocid, duce în mod automat la anularea certificatului de înregistrare.

Director interimar



Vasile GUȘTIUC

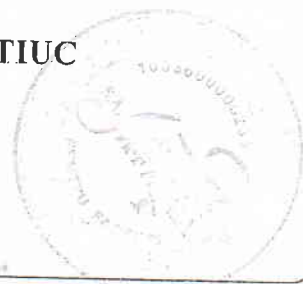

Utilizat pentru :

Dezinfectia in domeniul medical (avizat TP 2 si TP 4): suprafete (pereti lavabili, obiecte sanitare, toalete, bai, zone comune), pardoseli (gresie, linoleum, parchet, etc.), vesela si tacamuri (bucatarii si oficii alimentare), sticlaria de laborator (ustensile, pipete, etc.), biberoane, tetine, lenjerie (dezinfectie, albire), suprafete care vin in contact cu alimentele (inclusiv cele care se proceseaza alimentele), echipamente, recipiente, veselă și tacamuri din cadrul bucătărilor și oficiilor alimentare din spitale.

Dezinfectia in colectivități și cabinete de infrumusetare (avizat TP2 pentru suprafete altele decât cele din unitățile sanitare) : sali de sport si fitness, hoteluri și restaurante (pardoseli, obiecte sanitare, veselă, tacamuri, lenjerie albă), unitati militare, penitenciare, cabinete de infrumusetare, coafura, frizerii (ustensile, suprafete) etc

Dezinfectia in industria alimentară și industria zootehnică (avizat TP 4) : echipamente, recipiente, ustensile, suprafete sau conducte aferente producției, transportului, depozitării sau consumului de produse alimentare, furaje, băuturi (inclusiv apă potabilă) pentru oameni și animale.

Dezinfectia suprafetelor bazinelor cu apă (avizat TP 4) : piscine și ștranduri, canalizari si conducte pentru apă.

MOD DE UTILIZARE

Jaclor® se utilizează numai dizolvat în apă la concentrațiile specificate de producător: Deșurbați capacul recipientului si dizolvați în apă la temperatura de 20°C cantitatea de tablete recomandată pentru utilizarea propusă. Așteptați până la dizolvarea completă a tabletelor. Puteți amesteca pentru a grăbi procesul de dizolvare. Dezinfectia se poate realiza prin stergere cu ajutorul mopului, prin frecare cu laveta sau prin imersie. Efectuați un test înainte de a utiliza pe materiale sensibile prin aplicarea pe o zona mai greu de remarcat și de mici dimensiuni.

CONFORM AVIZ TP 2: PENTRU DEZINFECTIA SUPRAFETELOR IN UNITĂȚI SANITARE:

Bactericid - condiții curățenie: 1 tb. la 8 L - 15 min și 1 tb. la 10 L - 30 min;
Levuricid - C. albicans: 1 tb. la 5 L - 15 min și 1 tb. la 10 L - 30 min;
Fungicid - C.albicans, A.brasiliensis: 1 tb. la 10 L - 30 și 60 min;
Virucid - Inactiveaza virusul Murine Norovirus: 1 tb. la 5 L - 15, 30 și 60 min;
Sporicid - B.subtilis 3tb. la 10L-30 min. B.cereus și C.sporogenes: 1 tb. la 5L - 30 min

TP 2: DEZINFECTIA SUPRAFETELOR ALTELE DECÂT IN UNITĂȚI SANITARE

Bactericid - condiții curățenie: 1 tb. la 8 L - 15 min și 1 tb. la 10 L - 30 min;
Bactericid - condiții murdărie: 2 tb. la 10 L - 60 min;
MRSA (Stafilococul auriu rezistent la antibiotice) - 3 tb. la 10 L - 60 min;
Fungicid - 1 tb. la 5 L - 15 min., 1 tb. la 10 L - 60 min;
Micobactericid - condiții curățenie: 1 tb. la 2 L - 30 min și 1 tb. la 3 L - 60 min;
Micobactericid - condiții murdărie: 1 tb. la 2 L - 60 min;
Virucid - Adenovirus condiții curățenie: 1 tb. la 5 L - 15 min;
Adenovirus - condiții murdărie: 1 tb. la 5 L - 60 min;
Virucid - Poliovirus: 1 tb. la 1 L - 5 min și 1 tb. la 5 L - 15 min;
Virusurile - BVDV+ HBV + HCV + HIV - 500 ppm - 1 min; Vaccinia 500 ppm - 1 min. (adică 3,25 tb la 10 L apă - 1 min.) și 125 ppm - 5 min (adică 1 tb la 10 L apă);
Sporicid - B.subtilis: 3 tb. la 10 L - 30 min; B.cereus și C.sporogenes: 1 tb. la 5 L - 30 min ;

CONFORM AVIZ TP 4:

Bactericid - S.aureus, P.aeruginosa, E.coli, E.hirae: 150 ppm - 5 min. adică 1 tb. la 10 L apă;
Bactericid - Salmonella: 2 tb. la 10 L - 15 min.;
Levuricid EN 13697 - C. albicans: 1 tb. la 5 L - 15 min și 1 tb. la 10 L - 30 min.;
Fungicid EN 13697: C.albicans, A. brasiliensis: 1 tb. la 10 L - 30/60 min.;
Fungicid EN 13624: 1 tb. la 5 L - 15 min., 1 tb. la 10 L - 60 min;
Micobactericid - condiții curățenie: 1 tb. la 1 L - 15 min., 1 tb. la 2 L - 30 min., 1 tb. la 3 L - 60 min.;
Micobactericid - condiții murdărie: 1 tb. la 2 L - 60 min.;
Conform SR EN 14476 inactiveaza virusul Murine Norovirus: 1 tb. la 5 L - 15, 30 și 60 min;
Virusurile - BVDV+ HBV + HCV + HIV - 500 ppm - 1 min; Vaccinia 500 ppm - 1 min. (adică 3,25 tb la 10 L apă - 1 min.) și 125 ppm - 5 min (adică 1 tb la 10 L apă);
Bactericid, fungicid și tuberculocid - dezinfectie generală: 1 tb. la 10 L - 10 min.;

- Dezinfectia bazinelor de înot și piscinelor acoperite: - între 10 tb. la 3 m³ apă / 20 tb. la 3 m³ apă - timp de acțiune 30 min.
- Dezinfectia bazinelor de înot și piscinelor descoperite: - între 10 tb. la 3 m³ apă / 30 tb. la 3 m³ apă - timp de acțiune 30 min.
- Dezinfectia veselei si tacamurilor: spalare cu detergent,clătire, apoi imersie in solutie 1tb. la 5 L cel puțin 15 min care este urmată de a doua clătire cu apă.
- Dezinfectia ouălor: 1 tb. la 5 L apă sau 2 tb. la 10 L apă - 15 min.;
- Dezinfectia sticlăriei de laborator: 1 tb. la 3 L - timp de acțiune 30 min (imersie urmată de clătire cu apă).
- Dezinfectia lenjeriei: 1 tb la 10 L - timp de acțiune minim 15 min. (imersie urmată de clătire cu apă).
- Dezinfectia în colectivități: 1 tb la 10 L - timp de acțiune 10 - 15 min. (ștergere cu lavete sau mop).
- Dezinfectia în cabinete de infrumusetare: suprafete: 1 tb la 10 L - timp de acțiune 10 - 15 min (ștergere cu lavete sau mop).
- Dezinfectia în industria alimentară și zootehnică: 1 tb la 10 L - timp de acțiune 15-60 min.
- Dezinfectia suprafetelor și conductelor aferente producției, transportului, depozitării sau consumului de produse alimentare (inclusiv apă potabilă): 1 tb la 5 L - timp de acțiune 60 min.

CONSIDERAȚII PRIVIND ELIMINAREA AMBALAJULUI: Recipientele goale pot fi încadrate în categoria gunoierului menajer sau reciclate după curățarea cu apă. Recipientele se vor manipula în aceleași condiții impuse la manipularea produsului. Este necesar a se lua toate măsurile pentru a colecta ambalajele în conformitate cu reglementările în vigoare privind gestionarea ambalajelor și deșeurilor de ambalaje. Eliminarea ambalajului contaminat se va face în conformitate cu Legea 249 din 28.10.2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje. Utilizatorul este unic responsabil pentru luarea la cunoștință și respectarea acestor reglementări. Se vor respecta prevederile L 211/2011 privind regimul deșeurilor. /Depozitare: Păstrați preparatul în recipiente bine închise, în loc uscat și bine ventilat, departe de sursele de căldură (se va evita o temperatură mai mare de 40°C). A nu se depăși data de expirare de pe ambalaj.

SE INTERZICE AMESTECUL SOLUȚIEI CU ALTE PRODUSE !

Importator și reprezentant autorizat în REPUBLICA MOLDOVA:

S.A. "M-INTER-FARMA", Mun. Chișinău, str. Grenoble 23,21

Tel. (022) 904-006, 904-005, Fax: (022) 904-007, 079768549, 068773434

www.minterfarma.md, e-mail: sales@minterfarma



**CERTIFICAT
DE ÎNREGISTRARE DE STAT/AUTORIZARE SANITARĂ
AL PRODUSULUI BIOCID**

Nr. 00306 data/luna/anul 07. 11. 2022

Solicitant: For titular "M-INTER-FARMA" S.A.

Adresa juridică: str. Grenoble 21, 23, mun. Chisinau, Republica Moldova

Nr. de identificare de stat – codul fiscal 100300005263

În conformitate cu HG nr. 344 din 10.06.20 și în baza ordinului ANSP nr. 234 din 19.10.2022
(nr. data/luna/anul)

emis în baza documentației înaintate, s-a decis că următorul produs biocid poate fi fabricat sau comercializat și utilizat în Republica Moldova, conform prevederilor legislației în vigoare.

Denumirea comercială a produsului: JACLO®

1. Date de identificare ale produsului:

1.1 Categoria de produs: biocid

- Grupa principală: 1

- Tip de produs: 2, 4

1.2 Utilizare: Dezinfecția în unitățile sanitare: suprafețe (pereți lavabili, obiecte sanitare, toalete, bai, zone comune), pardoseli (gresle, linoleum, parchet), sticlărie de laborator (ustensile, pipete), lenjerie (dezinfecție, albire). Dezinfecția în colectivități și cabinet de înfrumusețare: Sali de sport și fitness, hoteluri și restaurant (pardoseli, obiecte sanitare, lenjerie albă), unități militare, penitenciare, cabinet de înfrumusețare, coafura, frizerie (ustensile, suprafețe). Dezinfecția suprafețelor mari (inclusiv pardoseli, pereți din plăci faianță, etc.), a ustensilelor, recipientelor, echipamentelor – prin imersie sau ștergere din domeniul instituțional, colectivități, industria producătoare de băuturi alcoolice și non alcoolice), a veselei și tacâmurilor din bucătărie, oficii alimentare. Produs are activitate: Bactericidă conform EN 1276; EN 13727; EN 13697; Levuricidă conform EN 1650; EN 13697; EN 13624; Fungicidă conform EN 13624; EN 13697; Micobactericidă/Tuberculocidă conform EN 14348; Sporocidă conform EN 13704; EN 17126; Virucidă conform EN 14476; Bactericid suprafețe neporoase conform EN 16615; Levuricid suprafețe neporoase conform EN 16615.

1.3 Forma de condiționare și ambalare: Tablete efervescente. Ambalaj – cutii cu 100 tablete, 150 tablete, 200 tablete, 250 tablete, 300 tablete.

1.4 Conținut în substanțe active: Sodium dichloroisocyanurate dihidrate - 78%

1.5 Categoriile de utilizatori: industriali, profesionali, populația

1.6 Informații privind reglementările aplicabile: HG nr. 344 din 10.06.2020,

2. Date de identificare ale producătorului:

2.1 Firma: S.C. ROMDEZIMED PRODUCTION SRL

2.2 Adresa: Sector 5, Șos. Pandurilor nr. 29, bl. P2a, sc. I, et. 7, ap. 31, cam. 2 România, București

Valabilitatea certificatului de înregistrare data/luna/anul 07. 11. 2027

Compoziția, parametrii de calitate ai produsului și domeniul de utilizare sunt cei prevăzuți în documentația tehnică, care a stat la baza eliberării prezentului certificat, conform Raportului de evaluare nr. 293 din 07.10.2022.

Orice modificare a datelor de identificare a produsului biocid, duce în mod automat la anularea certificatului de înregistrare.

Director



Nicolae JELAMSCHI
Nicolae JELAMSCHI

Importator în REPUBLICA MOLDOVA:

S.A. "M-INTER-FARMA", Mun. Chișinău, str. Grenoble 23,21

Tel. (022) 904-006, 904-005, Fax: (022) 904-007. www.minterfarma.md

Număr de înregistrare de stat a dispozitivelor medicale Nr. DM000145052

Quatrades® Forte

Produs concentrat pentru curățarea și dezinfectarea suprafețelor echipamentului medical

Spectru larg microbiocid deja de la 0,5%

Proprietăți excelente de curățare

Delicat, parfum de proaspăt

Concentrație economă%

Concentrat cu eficiență mare pentru curățarea și dezinfectarea simultană a echipamentului medical și suprafețe lavabile mari, cum ar fi secțiile medicale, paturile de spital, podele, suprafețele meselor și a pereților. De asemenea potrivit pentru curățarea și dezinfectarea dispozitivelor medicale prin metoda imersiei, dezinfectarea suprafețelor în grădinițe, școli, sanatorii, saloane de frumusețe și tatuaj, săli de forță și fitness, frizerii, cabinete de masaj și solariu.



CE 2274

Caracteristicile produsului:

- Testat în conformitate cu standardele noi pentru produsele dezinfectante (EN 14885)
- Spectru larg de acțiune antimicrobiană incl. bacterii, mycobacterii, fungi, virusuri.
- Proprietăți excepționale de curățare
- Toleranță înaltă față de materiale (fără aldehide și fenoli).
- Delicat, miros proaspăt.

Beneficii:

- Eficiență garantată și siguranță în utilizare.
- Reducerea înaltă a riscului de infectare.
- Efect rapid pe suprafețele supuse dezinfectării.
- Abilitatea de a fi aplicat pe un numeros tip de materiale sensibile.
- Efect de înprospătare.
- Econom.

Quatrodex® Forte Concentrat pentru curățarea și dezinfectarea suprafețelor echipamentelor medicale

Aplicarea:

Quatrodex Forte este un produs de eficiență înaltă pentru curățarea și dezinfectarea echipamentului medical și a suprafețelor lavabile mari cum ar fi uniturile, paturile medicale, podele și pereți. Este deasemeni indicat pentru dezinfectarea materialelor tapitate și a bunurilor fabricate din termoplastice (ABS), sticlă, porțelan, cauciuc, oțel inoxidabil, aluminiu, nichel sau crom. Este recomandat pentru dezinfectarea prin imersie și pentru produsele fabricate din sticlă acrilică. Poate fi aplicat pe suprafețele care vin în contact cu produse alimentare. Nu conține aldehide sau fenoli, prin urmare nu cauzează reacții alergice și nu decolorează suprafețele. Nu necesită clătire cu apă și posedă aromă plăcută de flori. Testat, aprobat și recomandat de Famed – producător lider European de echipament de calitate de top pentru spitale. Quatrodex® Forte are un spectru letal larg și proprietăți excepționale de curățare datorită formulei inovative bazată pe sinergia surfactanților și tehnologiei nano-micelle.

Eficacitatea:	EN 14885	15 min.	30 min.
Bacteria (including MRSA)	EN 13727	0,5%*, 1%	
	EN 14561	1%	0,5%
	EN 13697	1%*	
Fungi (C.albicans)	EN 13624	0,5%	
	EN 14562	1%	0,5%
	EN 13697	1%*	
Mycobacteria (M. terrae, M. avium)	EN 14348	4%	1%
	EN 14563	4%	1%
Enveloped viruses (HBV, HIV, HCV, Vaccinia, BVDV, Ebola)	EN 14476	0,5%	
Adeno virus	EN 14476	1%	
Polio virus	EN 14476	4%	

* Condiții de curățenie Evidența documentară a eficacității biocide a produsului este disponibilă la producător

Instrucțiuni de utilizare: Se prepară soluția prin dizolvarea produsului în apă. Nivelul concentrației depinde de spectrul și timpul de acțiune. Pentru a obține o concentrație de 1% se diluează 10 ml de concentrat în 990 ml apă. Suprafețele dezinfectate nu necesită clătire cu apă. Nu se combină cu alte produse dezinfectante sau detergenți. Produsul este destinat pentru uz profesional.

Compoziție: 100 gr. conțin:

3,76 gr – N-(3-aminopropyl)-N-dodecylpropane-1,3-diamină (CAS: 2372-82-9),

3,39 gr – Poly(oxy-1,2-eteranodilo), alfa.-[2-(didecylmethyloamino)ethyl]-.omega.-hydroxy-.propanoate (sare) (CAS:94667-33-1)

0,75 gr – 2-aminoetanol (CAS: 141-43-5)

Ambalaj: Flacon 1 L cu dozator, canistră 5 L.

Precauții:



Pericol

Fraze de pericol:

H314 – cauzează arsuri severe pielii și dăunează ochilor

Fraze pentru condiții de utilizare sigură:

P260 – nu inhalați praf/fum/gaz/aerosol/vapori/spray

P280 – purtați mănuși/haine de protecție/protecția ochilor și feței

P301+P330+P331 – LA ÎNGHIȚIRE: clătiți gura. NU SE Induce voma

P302+P352 – PE PIELE: spălați cu jet de apă cu săpun

P305+P351+P338 – ÎN OCHI: clătiți atent cu apă timp de câteva minute.

Îndepărtați lentilele de contact dacă sunt și este posibil. Continuați clătirea

P310 – Sunați imediat un CENTRU de INTOXICARE/medic

P405 – păstrați închis P501 – conținutul/ambalajul se elimină în conformitate cu reglementările locale/regionale/naționale/internaționale

Revăzut: 02.2017

Informație despre proprietățile fizice și chimice de bază

Forma fizică	Lichid
Culoarea	Conform specificației
Miros	Foarte caracteristic
Valoarea limitei de miros	Nu se specifică
pH	10,8-11,2
Punct/interval de fierbere	100°C
Punct de aprindere	>100°C
Presiunea vaporilor la 20°C	23hPa
Densitatea la 20°C	0,99-1,01 g/cm ³
Solubilitatea în solvenți	Complet solubil în apă
Temperatura de autoaprindere	Nu este autoinflamabil
Limitele de explozie	Produsul nu este exploziv

Producător:

Medi-Sept Sp. z o.o., Kiszpirtica 159 c

21-030 Motycz, Polska, tel.: +48 81 535 22 22

info@medi-sept.com.pl, www.mediasept.pl



Profesjonalne systemy
utrzymywania higieny



AGENCIA MEDICAMENTOSHA
SI DISPOSITIVOS MEDICALE

REGISTRUL DE STAT AL DISPOZITIVELOR MEDICALE

Căutare după API, număr...											
Nr.	Denumire	Denumire	Model	Nr. autoriz.	Tara	Productiv	Reprezentant	Orade	Data	Clasific	
DM00014504	DEZINFECTANT PENTRU SUPRAFETILE DISPOZITIVELOR MEDICALE	QUATRODES® FORTE	51		Polonia	MEDISEPT SP. Z.O.O.	M-INTER- FARMA S.A.	ABTAS 01.Rg04-212	03-08-2018		
DM000145048	DEZINFECTANT PENTRU SUPRAFETILE DISPOZITIVELOR MEDICALE	QUATRODES® FORTE	1 L		Polonia	MEDISEPT SP. Z.O.O.	M-INTER- FARMA S.A.	A07.P5- 01.Rg04-212	03-08-2018		

✓ Căutare după (Tara), (Polonia) și Căutare după (Productiv), (Medisept) și Căutare după (Orade)

