

KAF GRUP

Products



**WE CARE
ABOUT
YOUR HEALTH**

WANCARE

OneGel

ONECARE





ABOUT KAF GRUP

KAF GRUP HAKKINDA

KAF GRUP SAĐ. HİZM. İNŞ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. as, our headquarters is in Istanbul, and it has a closed area of 15,000 m2 in Van and Istanbul; There are GMP certified Medical Device Sterilization units in Class 1000, 10,000, 100,000 production areas; Disinfectant Group, Antibacterial Wipes used in hospitals are produced and exported to more than 75 countries. More than 30 ork for Technical Support, Sales and Marketing with our strong network across Turkey and more than 60 teammates. With the product variety we have, we offer to many countries of the world; We export from France to Switzerland, from the Philippines to Korea, from Saudi Arabia to Jordan, from Brazil to Singapore.

KAF GRUP SAĐ. HİZM. İNŞ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. olarak, merkezimiz İstanbul olmak ile beraber Van ve İstanbul'da 15.000 m2 kapalı alana sahip; Class 1000, 10.000, 100.000 üretim alanlarında GMP belgeli Tıbbi Cihaz Sterilizasyon üniteleri mevcut olup; hastanelerde kullanılan Dezenfektan Grubu, Antibakteriyel Mendiller üretimi yapılmakta ve 75'den fazla ülkeye ihracatı gerçekleştirilmektedir. Yönetim kurulu üyelerimizin medikal sektörde sahip oldukları 30 yılı aşkın tecrübesi de yerli ve uluslararası pazarlarda bizlere güç katmaktadır. Türkiye genelindeki güçlü ağıımız, 60'tan fazla ekip arkadaşımızla Teknik Destek, Satış ve Pazarlama için çalışmaktayız. Sahip olduğumuz ürün çeşitliliği ile dünyanın pek çok ülkesine; Fransa'dan İsviçre'ye, Filipinler'den Kore'ye, Suudi Arabistan'dan Ürdün'e, Brezilya'dan Singapur'a ihracat gerçekleştirmekteyiz.

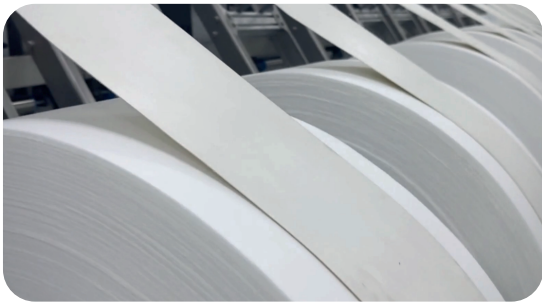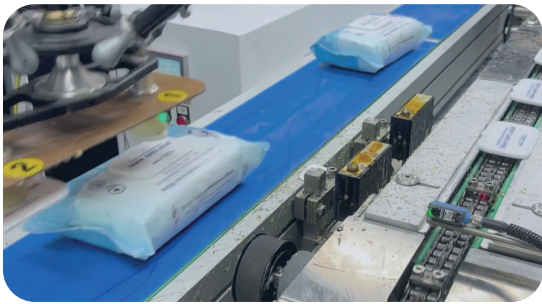

CONTENTS

İÇİNDEKİLER

LUBRICANT GEL WITH LIDOCAINE (STERILE) LİDOKAİN İÇERİKLİ KAYDIRICI JEL (STERİL)	3
ULTRASOUND ECG GEL & IPL GEL ULTRASON EKG JEL & IPL JEL	4
ANTIBACTERIAL,ANTIFUNGUCIDAL AND VIRUCIDAL BODY CLEANING WIPES ANTİBAKTERİYEL, ANTİFUNGUCİDAL VE VİRÜSİDAL BAKIM ÜRÜNLERİ	5
INCONTINENCE BODY CARE PRODUCTS İNKONTİNANS VÜCUT BAKIM ÜRÜNLERİ	6
ONESPRAY / ONESPRAY WIPES	7
ONESURFACE / ONESURFACE WIPES	8
ONESEPT PA / ONESEPT GA	9
ONESEPT OPA / ONESEPT PA POWDER	10
ONESEPT A / ONESEPT FN	11
ONESEPT ENZYM	12
SURFACE DISINFECTANT / ALCOHOL-BASED HAND AND SKIN ANTISEPTIC/ DISINFECTANT GEL YER VE YÜZEY DEZENFEKTANI / ALKOL BAZLI EL VE CİLT ANTİSEPTİĞİ & DEZENFEKTAN JELİ	13
WET WIPES & WET BABY TOWEL / ADHESIVE REMOVER SPRAY AND WIPES ISLAK MENDİL & ISLAK BEBEK HAVLUSU / YAPIŞKAN SÖKÜCÜ SPREY VE MENDİL	14
ANTISEPTIC SOLUTION / ANTIBACTERIAL MEDICAL SOAP ANTİSEPTİK SOLÜSYON / ANTİBAKTERİYEL MEDİKAL SABUN	15

LUBRICANT GEL WITH LIDOCAINE (STERILE)

LİDOKAİN İÇERİKLİ KAYDIRICI JEL (STERİL)

OneGel STERILE



It is a Class III Medical Device within the scope of 93 / 42 / EEC Medical Device Regulation



USAGE AREA: ONEGEL is a sterile, lubricating gel used to lubricate catheters and other medical devices during urethral, colon and rectal applications such as urethral catheterization, endoscopy and cystoscopy. It can be also used for rectal and colonic applications as a lubricant gel. The slider effect of the gel; Helps prevent trauma between urethral, colon and rectal mucosa and catheter/other medical devices. In this way, the patient is relieved and minimizes spasticity or discomfort caused by iatrogenic injury.

PRODUCT PROPERTIES:

- Disposable.
- Soluble in water.
- Easy to use thanks to the syringe and accordion tube.
- Eliminates the risk of damage to tissue.
- Contains antiseptic Chlorhexidine Gluconate to eliminate the risk of infection.
- Lidocaine Hydrochloride is a local anesthetic agent used to prevent pain.
- It provides a painless catheterization with its anesthetic effect.
- Thanks to the lubricating feature provided by hydroxyethylcellulose, the patient relaxes and minimizes the spasticity and discomfort caused by iatrogenic injury.

USAGE:

- Remove the syringe/accordion tube (6ml/11ml/12.5g) by tearing off the sterile packaging.
- Remove the stopper at the end of the syringe/accordion tube.
- Pour a drop of gel to facilitate application.
- After placing the syringe tip on the area to be lubricated, gently squeeze some ONEGEL LUBRICANT GEL WITH LIDOCAINE by pressing the plunger of the syringe/accordion tube.

COMPOSITION:

- Pure Water
- Propylene Glycol, Hydroxyethylcellulose (Lubricant)
- Lidocaine Hydrochloride (Local Anesthetic)
- Chlorhexidine Gluconate - 20% Concentration (Antiseptic)
- Methyl Hydroxybenzoate (Preservative)
- Propyl Hydroxybenzoate (Preservative)



Contains 2% Lidocaine



Anesthetic



Antiseptic

	ONEGEL 6ML	ONEGEL 11ML	ONEGEL 12,5 G
Product Reference Code	KAF G27-6	KAF G27-11	KAF G27-12,5
Packaging Type	Syringe	Syringe	Accordion Tube
GMDN	37717	37717	37717
Packaging	25 x 6ml / Box	25 x 11ml / Box	25 x 12,5g / Box

ULTRASOUND ECG GEL & IPL GEL

ULTRASON EKG JEL & IPL JEL

WANCARE



USAGE AREA: In all kinds of Ultrasonography, Dropller, ECG, Stress Test applications, it cuts the air between the skin and the probe and ensures that ultrasonography waves come to the device screen more clearly and uninterruptedly. Thanks to its vacuum technology, it does not damage the probe and provides a comfortable ultrasonography that is not affected by the salt in the body during use. It is recommended to be used by a specialist physician.



KULLANIM ALANI: Her türlü Ultrasonografi, Dropller, EKG, Efor Testi uygulamasında cilt ile prob arasındaki havayı keserek ultrasonografidalgalarının cihaz ekranına daha net ve kesintisiz gelmesini sağlar. İçerdiği aktif maddeler yüksek viskozite ve üretiminde kullanılan vakum teknolojisi sayesinde proba zarar vermez, kullanım esnasında vücuttaki tuzdan etkilenmez rahat bir ultrasonografi sağlar. Uzman hekim tarafından kullanılması tavsiye edilir.



Hypoallergenic
Hipoalerjenik



Oderless
Kokusuz



Easy to Clean
Kolay Temizlik

Ultrasound Ecg Gel/ Ultrason Ekg Jel Blue

KAF G31-4	250ml	KAF G31-6	1lt.	KAF G31-5	500ml	KAF G31-7	5lt.
-----------	-------	-----------	------	-----------	-------	-----------	------

Transparent

KAFG31-2	250ml	KAF G31	1lt.	KAF G31-1	500ml	KAF G31-3	5lt.
----------	-------	---------	------	-----------	-------	-----------	------

Ipl Gel/ Ipl Jel

Transparent

K03	250ml	K03-02	1lt.	K03-01	500ml	K03-03	5lt.
-----	-------	--------	------	--------	-------	--------	------

ANTIBACTERIAL, ANTIFUNGUCIDAL AND VIRUCIDAL BODY CLEANING WIPES

ANTİBAKTERİYEL, ANTİFUNGÜSİDAL VE VİRÜSİDAL VÜCUT BAKIM ÜRÜNLERİ

WANCARE



USAGE AREA: Biocidal Product. Anti-bacterial cleaning for the whole body in 10 minutes.

PROPERTIES: E nourishes and moisturizes the skin with vitamin E. It protects against microorganisms with Sodium Benzoate and Potassium Sorbate. It prevents the formation of bacteria with Chlorhexidine Digluconate.

CHEMICAL COMPOSITION: 20 Con. (%) Chlorhexidine Digluconate 2%, Emulsifier, Protective, Moisturiser, Surfactant, Perfume, Water.



KULLANIM ALANI: Biyosidal Ürün. 10 dakikada tüm vücut için antibakteriyel temizlik.

ÖZELLİKLER: E vitamini ile cildi besler ve nemlendirir. Mikroorganizmalara karşı korur. Sodyum Benzoat ve Potasyum sorbat. Klorheksidin Diglukonat ile bakteri oluşumunu engeller.

KİMYASAL BİLEŞİMİ: 20 Con. (%) Chlorhexidine Digluconate 2%, Emülgatör, Koruyucu, Nemlendirici, Yüzey Aktif Madde, Parfüm, Su



Suitable for microwave use

Mikrodalga Kullanımına Uygundur



Nonwoven fabric

Nonwoven Kumaş



Contains 2% Chlorhexidine (Net Ratio 0,4%)

Chlorhexidine %2 (Net oran %0,4) İçerir



Bactericidal and fungicidal in 1 minute

1 Dakikada Bakterisidal ve Fungusidal Etkinlik



Cleans, softens and soothes

Temizler, Yumuşatır ve Rahatlatır



Latex, lanolin, alcohol, Paraben free

Latex, Lanolin, Alkol ve Paraben İçermez



Does not require extra rinsing and drying after use

Durulama ve Kurulama Gerektirmez



It prevents the formation of fungus and irritation.

Tahriş ve Mantar Oluşumunu Engeller

Wash Gloves / Islak Kese

KAFG71	8pcs
KAFG71-1	10pcs
KAFG71-2	12pcs

Body Wipes / Vücut Mendilli

KAFG69	12pcs
KAFG69-1	25pcs
KAFG69-2	50pcs

Perineal Cloths / Perine Mendilli

KAFG68	12pcs
KAFG68-1	25pcs
KAFG68-2	50pcs

Shampoo Cap / Saç Yıkama Banesi

KAFG70	1pcs
--------	------

INCONTINENCE BODY CARE PRODUCTS

İNKONTİNANS VÜCUT BAKIM ÜRÜNLERİ

ONECARE



USAGE AREA: Barrier Cream Incontinence Wipes makes a barrier layer in order to protect the skin of patients with special needs, such as those with limited mobility, bedridden and intensive care patients, from external factors.

CHEMICAL COMPOSITION: Aqua, Phospholipid, Dimethicone, Glycerin, EDTA, Citric Acid, Polysorbate 20, Phenoxyethanol, Caprylyl Glycol, Perfume.



KULLANIM ALANI: Bariyer Kremli İnkontinans Mendilleri, hareket kabiliyeti kısıtlı, yatalak ve yoğun bakım hastaları gibi özel ihtiyaçları olan hastaların cildini dış etkenlerden korumak için bariyer bir tabaka oluşturur.

KİMYASAL BİLEŞİM: Su, Fosfolipit, Dimetikon, Gliserin, EDTA, SitrikAsit, Polysorbate 20, Phenoxyethanol, Caprylyl Glycol, Parfüm.

3%

Contains Dimethicone

Dimethicone içerir



Barrier effect

Bariyer Etkilidir



Cleans, softens and soothes

Temizler, Yumuşatır ve Rahatlatır



Suitable for microwave use

Mikrodalga Kullanımına Uygundur



Latex, lanolin, alcohol, Paraben free

Latex, Lanolin, Alkol ve Paraben İçermez



Nonwoven fabric

Nonwoven Kumaş



No rinsing or drying required

Durulama ve Kurulama Gerektirmez

Body Wipes / Vücut Mendili

KAF G49	8pcs
KAF G01	12pcs
KAF G08	25pcs
KAF G07	50pcs
KAF G50	100pcs

Perineal Cloths / Perine Mendili

KAF G51	8pcs
KAF G06	12pcs
KAF G02	25pcs
KAF G05	50pcs
KAF G52	100pcs

Wash Gloves / Islak Kесе

KAF G16	10pcs
---------	-------

Shampoo Cap / Saç Yıkama Banesi

KAF G15	1pcs
---------	------

ALCOHOL-BASED FAST ACTING DISINFECTANT/WIPES FOR MEDICAL DEVICES

TIBBİ EKİPMANLAR İÇİN ALKOL BAZLI HIZLI ETKİLİ DEZENFEKTAN/MENDİL

ONESPRAY / ONESPRAY WIPES

WANCARE



PROPERTIES: Ethanol, propanol and quaternary ammonium based. Wide spectrum of effects.

CHEMICAL COMPOSITION: 30% Ethanol, 10% 2-Propanol, 0,25% Didecylmethylpoly(oxethyl) Ammonium Propionate, Auxiliary Substances, Essences.

USAGE AREA AND PURPOSE: The product is used in the disinfection of non-invasive medical devices, incubators, aerators used in dentistry and medical devices that require disinfection used in ENT examinations. Compatible with glass, ceramic, silicone, plastic, PVC, acrylic, polymer, polycarbonate, polystyrene, HDPE, stainless steel and porcelain materials.



ÖZELLİKLER: Etanol, propanol ve kuarterner amonyum bazlı. Geniş mikrobiyolojik etki spektrumuna sahip.

KİMYASAL BİLEŞİMİ: %30 Etanol, %10 2-Propanol, %0,25 Didecylmethylpoly (oxethyl) Ammonium Propionate, Yardımcı Maddeler, Esans,

KULLANIM ALANI VE AMACI: Ürün invaziv olmayan tıbbi cihazlar, küvözler, diş hekimliğinde kullanılan aeratörler ve KBB muayenelerinde kullanılan dezenfeksiyonu zorunlu tıbbi cihazların hızlı dezenfeksiyonunda kullanılır. Cam, seramik, silikon, plastik, PVC, akrilik, polimer, polikarbon, polistiren, HDPE, paslanmaz çelik ve porselen malzemelerle uyumludur.



Alcohol Based

Alkol Bazlı



Ready to use

Kullanım Hazır

Ürün



Aldehyde and phenol free

Aldehit ve Fenol İçermez



Pleasant-smelling

Hoş Kokulu



Fast and effective disinfection

Hızlı ve Etkili Dezenfeksiyon

OneSpray Wipes

KAF G35 - 1 100pcs KAF G35 - 2 150pcs KAF G35 - 3 200pcs

OneSpray

KAF G20 - 1 750ml KAF G20 - 2 1lt. KAF G20 - 3 5lt.

Microbiological Activity			
	Test Method	Microorganism	Effect Duration
Bactericidal	EN 13727	Staphylococcus aureus	30 sec
		Pseudomonas aeruginosa	
		Enterococcus hirae	
Fungicidal / Yeast-cidal	EN 13624	Candida albicans	30 sec
		Aspergillus niger	
Tuberculocidal / Mycobactericidal	EN 14348	Mycobacterium avium	5 min
		Mycobacterium terrae	
Virucidal	EN 14476	Poliovirus Type 1	1 min
		Human Adenovirus Type 5	
		Murine Norovirus	
Bactericidal/ Yeast-cidal	EN 16615	Pseudomonas aeruginosa	1 min
		Staphylococcus aureus	
		Enterococcus hirae	

ALCOHOL-FREE FAST ACTING DISINFECTANT/WIPES FOR MEDICAL DEVICES

TIBBİ CİHAZLAR İÇİN ALKOLSÜZ HIZLI ETKİLİ DEZENFEKTAN/MENDİL
ONESURFACE / ONESURFACE WIPES

WANCARE



PROPERTIES: It does not contain aldehyde and phenol. It is based on hydrogen peroxide and quaternary ammonium combination and does not fade or dye the material used.

CHEMICAL COMPOSITION: Hydrogen Peroxide, Alkyldimethylbenzylammonium Chloride, Didecylmethyl Ammonium Chloride, Corrosion inhibitor, Stabilizer, Auxiliary Substances.

USAGE AREA AND PURPOSE: The product is used in the rapid disinfection of non-invasive medical devices, incubators, aerators used in dentistry and medical devices that require disinfection used in ENT examinations. Compatible with glass, ceramic, silicone, plastic, PVC, acrylic, polymer, polycarbonate, polystyrene, HDPE, stainless steel and porcelain materials.



ÖZELLİKLER: Aldehit ve fenol içermez. Hidrojen peroksit ve kuarterner amonyum kombinasyonu bazlı olup kullanılan malzeme üzerinde renk solması veya boyaması yapmaz.

KİMYASAL BİLEŞİMİ: Hidrojen Peroksit, Alkildimetilbenzilamonyum Klorür, Didesildimetil Amonyum Klorür, Korozyon önleyici, Stabilizatör, Yardımcı Maddeler.

KULLANIM ALANI VE AMACI: Ürün invaziv olmayan tıbbi cihazlar, küvözler, diş hekimliğinde kullanılan aeratörlerin ve KBB muayenelerinde kullanılan dezenfeksiyonu zorunlu tıbbi cihazların ve alkole karşı dayanıksız metaryallerin hızlı dezenfeksiyonunda kullanılır. Cam, seramik, silikon, plastik, PVC, akrilik, polimer, polikarbon, polistrien, HDPE, paslanmaz çelik ve porselen malzemelerle uyumludur.



Ready to use
Kullanım Hazır
Ürün



Sporicidal activity
in 1 minute
1 Dakikada
Sporisidal Etkinlik



Alcohol,
aldehyde
Alkol, Aldehit ve
Fenol İçermez



Fast and effective
disinfection
Hızlı ve Etkili
Dezenfeksiyon

OneSurface

KAF G21 - 1 750ml KAF G21 - 2 1lt. KAF G21 - 3 5lt.

OneSurface Wipes

KAF G36 - 1 100pcs KAF G36 - 2 150pcs KAF G36 - 3 200pcs

	Microbiological Activity		
	Test Method	Microorganism	Effect Duration
Bakterisidal	EN 16615/ EN 13727	Pseudomonas aeruginosa	1 min
		Staphylococcus aureus	
		Enterococcus hirae	
Fungicidal / Yeasticidal	EN 13624	Candida albicans	
		Aspergillus niger	
Tuberculocidal / Mycobactericidal	EN 14348	Mycobacterium avium	
		Mycobacterium terrae	
Virucidal	EN 14476	Poliovirus Type 1	
		Human Adenovirus Type 5	
		Murine Norovirus	
Sporicidal	EN 17126	Bacillus subtilis	
	EN 13704	Bacillus subtilis	

HIGH-LEVEL DISINFECTANT FOR MEDICAL INSTRUMENTS AND ENDOSCOPES

YÜKSEK DÜZEY TIBBİ CİHAZ VE ENDOSKOP DEZENFEKTANI

ONESEPT GA



Solution can be used for up to 28 days
Solüsyon Etkinlik Süresi 28 Gün



2%
Glutaraldehyde
Gluteraldehit



Ready to use after activation
Aktivasyon Sonrasında Kullanıma Hazır

KAF G23 5lt.



	Microbiological Activity		
	Test Method	Microorganism	Effect Duration
Bactericidal	EN 13727	Staphylococcus	5 min
		Pseudomonas aeruginosa	
		Enterococcus hirae	
	EN 14651	Staphylococcus	
		Pseudomonas aeruginosa	
Tuberculocidal / Mycobactericidal	EN 14563	Mycobacterium avium	
	EN 14348	Mycobacterium terrae	
		Mycobacterium terrae	
Fungicidal / Yeasticidal	EN 14562	Candida albicans	
		Aspergillus niger	
	EN 13624	Candida albicans	
		Aspergillus niger	
Virucidal	EN 14476	Poliovirus Type 1	
		Human Adenovirus Type 5	
		Murine Norovirus	
Sporicidal	EN 17126	Bacillus subtilis	15 min
	EN 13704	Bacillus subtilis	

PROPERTIES: Anticorrosive effective. Suitable for manual usage and endoscope washing machines. Wide spectrum of effects

CHEMICAL COMPOSITION: 2% Glutaraldehyde, Corrosion inhibitors and auxiliary substances.

USAGE AREA: Used to provide high-level disinfection of all kinds of surgical instruments, surgical laparoscopy instruments, flexible and rigid endoscopes.

ÖZELLİKLER: Antikorozyf etkili. Endoskop yıkama makinelerinde ve manuel kullanıma uygun. Geniş materyal uyumluluğu.

KİMYASAL BİLEŞİMİ: %2 Gluteraldehit, Korozyon İnhibitörleri ve Yardımcı Maddeler.

KULLANIM ALANLARI: Her türlü cerrahi aletler, cerrahi laparoskopi aletleri, flexible ve rijid endoskopların yüksek düzey dezenfeksiyonunu sağlamak amacıyla kullanılır.

HIGH-LEVEL DISINFECTANT FOR MEDICAL INSTRUMENTS AND ENDOSCOPES

YÜKSEK DÜZEY TIBBİ CİHAZ VE ENDOSKOP DEZENFEKTANI

ONESEPT PA



2250 ppm
Peracetic Acid
Paresetik Asit



Ready to use after activation
Aktivasyon Sonrasında Kullanıma Hazır



Solution can be used for up to 14 days
Solüsyon etkinlik süresi 14 gün

KAF G24 5lt.



	Microbiological Activity		
	Test Method	Microorganism	Effect Duration
Bactericidal	EN 13727	Staphylococcus	5 min
		Pseudomonas aeruginosa	
		Enterococcus hirae	
	EN 14651	Staphylococcus	
		Pseudomonas aeruginosa	
Tuberculocidal / Mycobactericidal	EN 14563	Mycobacterium avium	
	EN 14348	Mycobacterium terrae	
		Mycobacterium terrae	
Fungicidal / Yeasticidal	EN 14562	Candida albicans	
		Aspergillus niger	
	EN 13624	Candida albicans	
		Aspergillus niger	
Virucidal	EN 14476	Poliovirus Type 1	
		Human Adenovirus Type 5	
		Murine Norovirus	
Sporicidal	EN 17126	Bacillus subtilis	15 min
	EN 13704	Bacillus subtilis	

PROPERTIES: Anticorrosive effective. Suitable for manual usage and endoscope washing machines. Wide spectrum of effects

CHEMICAL COMPOSITION: 2250 ppm Peracetic Acid and hydrogen peroxide combination, corrosion inhibitor, stabilizer.

USAGE AREA: Used to provide high level disinfection of interventional surgical instruments, dental surgical instruments, surgical laparoscopy instruments, endoscopes and heat sensitive instruments.

ÖZELLİKLER: Antikorozyf etkili. Endoskop yıkama makinelerinde ve manuel kullanıma uygun. Geniş materyal uyumluluğu.

KİMYASAL BİLEŞİMİ: 2250 ppm Paresetik Asit ve Hidrojen Peroksit Kombinasyonu, Korozyon Önleyici, Stabilizatör.

KULLANIM ALANLARI: Girişimsel cerrahi aletler, dental cerrahi aletler, cerrahi laparoskopi aletleri, endoskoplar ve ısıya duyarlı aletlerin yüksek düzey dezenfeksiyonunu sağlamak amacıyla kullanılır.

HIGH-LEVEL DISINFECTANT FOR MEDICAL INSTRUMENTS AND ENDOSCOPES

YÜKSEK DÜZEY TIBBİ CİHAZ VE ENDOSKOP DEZENFEKTANI ONESEPT OPA



KAF G25 5lt.


0,55%

Ortho-phthalaldehyde
Ortoftalaldehit

14

Solution can be used for up
to 14 days
Solüsyon etkinlik süresi
14 gün

Ready to use
Kullanıma Hazır Ürün

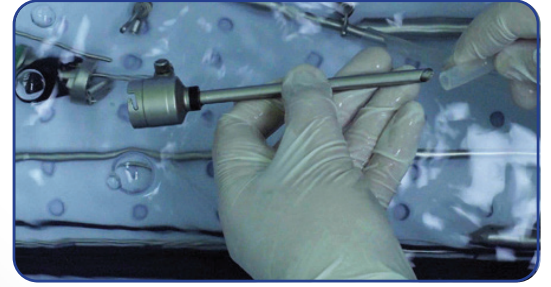

PROPERTIES: Anticorrosive effective. Suitable for manual usage and endoscope washing machines. Wide spectrum of effects

CHEMICAL COMPOSITION: 0.55% orthophthalaldehyde (OPA), corrosion inhibitors and auxiliary substances.

USAGE AREA: Used to provide high-level disinfection of all kinds of surgical instruments, surgical laparoscopy instruments, flexible and rigid endoscopes.

ÖZELLİKLER: Antikorozyf etkili. Endoskop yıkama makinelerinde ve manuel kullanıma uygun. Geniş materyal uyumluluğu.

KİMYASAL BİLEŞİMİ: %0.55 Ortoftalaldehit (OPA), Korozyon İnhibitörleri ve Yardımcı Maddeler.

KULLANIM ALANLARI: Isıya duyarlı ekipmanların, cerrahi aletlerin, flexible ve rijid endoskopların yüksek düzey dezenfeksiyonunu sağlamak amacıyla kullanılır.

Microbiological Activity

Test Method	Microorganism	Effect Duration		
Bactericidal	EN 13727	Staphylococcus Pseudomonas aeruginosa Enterococcus hirae	5 min	
	EN 14651	Staphylococcus Pseudomonas aeruginosa Enterococcus hirae		
		EN 14563		Mycobacterium avium Mycobacterium terrae
				EN 14348
	EN 14562			
Fungicidal / Yeasticidal		EN 13624		Candida albicans Aspergillus niger
	Virucidal	EN 14476		Poliovirus Type 1 Human Adenovirus Type 5 Murine Norovirus
Sporicidal		EN 17126		Bacillus subtilis
		EN 13704		Bacillus subtilis

HIGH-LEVEL DISINFECTANT FOR MEDICAL INSTRUMENTS AND ENDOSCOPES

YÜKSEK DÜZEY TIBBİ CİHAZ VE ENDOSKOP DEZENFEKTANI ONESEPT PA POWDER



KAF G26 - 1 2kg KAF G26 - 2 2,5kg KAF G26 - 3 5kg

2250
ppm

Peracetic Acid
Paresetik Asit

1

It is a concentrated powder
for professional use
Profesyonel kullanım için
konsantré toz

1

Solution can be used
during 1 working day
Solüsyon kullanım süresi
1 iş günü



Microbiological Activity

Test Method	Microorganism	Effect Duration		
Bactericidal	EN 13727	Staphylococcus Pseudomonas aeruginosa Enterococcus hirae	10 min	
	EN 14651	Staphylococcus Pseudomonas aeruginosa Enterococcus hirae		
		EN 14563		Mycobacterium avium Mycobacterium terrae
				EN 14348
	EN 14562			
Fungicidal / Yeasticidal		EN 13624		Candida albicans Aspergillus niger
	Virucidal	EN 14476		Poliovirus Type 1 Human Adenovirus Type 5 Murine Norovirus
Sporicidal		EN 17126		Bacillus subtilis
		EN 13704		Bacillus subtilis

PROPERTIES: Anticorrosive effective. Suitable for manual usage and endoscope washing machines. It performs cleaning and disinfection at the same time.

CHEMICAL COMPOSITION: Peracetic Acid (solution diluted with 2% water) 2250 ppm, Sodium Percarbonate, TAED, corrosion inhibitor, stabilizer and auxiliary substances.

USAGE AREA: Used to provide high-level disinfection of endoscopes, arthroscopes, surgical and dental instruments.

ÖZELLİKLER: Antikorozyf etkili. Endoskop yıkama makinelerinde ve manuel kullanıma uygun. Geniş materyal uyumluluğu.

KİMYASAL BİLEŞİMİ: Perasetik Asit (%2'lik su ile seyreltilmiş solüsyon) 2250 ppm, Sodyum Perkarbonat, TAED, Korozyon Önleyici, Stabilizatör, Yardımcı Maddeler.

KULLANIM ALANLARI: Endoskoplar, artroskoplar, cerrahi ve diş aletlerinin yüksek düzey dezenfeksiyonunu sağlamak amacıyla kullanılır.

ALKALINE SOLUTION FOR WASHER AND DISINFECTORS

YIKAYICI VE DEZENFEKTÖRLER İÇİN ALKALİ SOLÜSYON

ONESEPT A



KAF G34 5lt.

PROPERTIES: It is an alkaline cleaner for cleaning and disinfection of medical devices with washers thermal disinfectors. Provides in depth cleaning without any residues. Suitable for use in different degrees of water hardness.

USAGE AREA: Used in washing and thermal disinfection machines for cleaning and thermal disinfection of heat resistant medical instruments and materials including laboratory equipments at 93°C and cleaning of non-heat resistant medical instruments and materials at 50-60°C.

USAGE: %0.1 - %0.5 (1-5 ml/l) is recommended for cleaning and thermal disinfection devices in the medical field. Follow the machine manufacturer's recommendations for dosing information.

CHEMICAL COMPOSITION: Potassium hydroxide, complexing agents, corrosion inhibitors.

ÖZELLİKLER: Yıkayıcı dezenfektörler ile tıbbi alet temizliği ve termal dezenfeksiyonuna yönelik alkali temizleyici. Derinlemesine ve artık bırakmayan temizlik sağlar. Farklı su sertlik derecelerinde kullanıma uygundur.

KULLANIM ALANLARI: Isıya dayanıklı tıbbi alet ve laboratuvar malzemeleri dahil olmak üzere tüm malzemelerin 93°C'de temizliği ve termal dezenfeksiyonu, ısıya dayanıklı olmayan tıbbi alet ve malzemelerin 50-60°C'de temizliği için yıkama ve termal dezenfeksiyon makinelerinde kullanılır.

KULLANIM ŞEKLİ: Tıbbi alanda temizleme ve dezenfeksiyon cihazlarında %0,1- %0,5 (1-5 ml/l) önerilir. Dozajlama bilgisi için makine üreticisinin tavsiyelerine uyunuz.

KİMYASAL BİLEŞİMİ: Potasyum Hidroksit, Kompleks Yapıcı Ajanlar, Korozyon Önleyici Maddeler.

NEUTRALIZER SOLUTION FOR WASHER AND DISINFECTORS

YIKAYICI VE DEZENFEKTÖRLER İÇİN NÖTRALİZAN SOLÜSYON

ONESEPT FN



KAF G33 5lt.

PROPERTIES: Liquid, organic acid-containing neutralization solution for washer-disinfectors. Neutralization of alkaline residues from the main washing process. Prevents limescale formation. Dissolves albumins, organic bases, carbonates and hydroxides during cleaning. Suitable for use in all washers and disinfectors.

USAGE AREA: Used for the removal of lime residues in the machine and for the neutralization of alkali residues resulting from the main washing process. (40-60 °C).

USAGE: For cleaning and disinfection devices in the medical field, 0.05%-0.3% (0.5-3 ml/l) is recommended. Follow the machine manufacturer's recommendations for dosing information.

CHEMICAL COMPOSITION: Phosphoric acid, corrosion inhibitors and auxiliary substances.

ÖZELLİKLER: Yıkayıcı-dezenfektörler için sıvı, organik asit içeren nötralizasyon solüsyonudur. Ana yıkama işleminden geriye kalan alkali artıkların nötralizasyonunu yapar. Oluşan kirecin giderilmesini sağlar. Temizlik sırasında albüminleri, organik bazları, karbonatları ve hidroksitleri çözer. Tüm yıkayıcı ve dezenfektörlerde kullanıma uygundur.

KULLANIM ALANI: Makine içindeki kireç kalıntılarının uzaklaştırılması ve ana yıkama işleminden kaynaklanan alkali kalıntıların nötralizasyonu için kullanılır. (40-60 °C).

KULLANIM ŞEKLİ: Tıbbi alanda temizleme ve dezenfeksiyon cihazlarında %0,05-%0,3 (0,5-3 ml/l) önerilir. Dozajlama bilgisi için makine üreticisinin tavsiyelerine uyunuz.

KİMYASAL BİLEŞİMİ: Fosforik asit, korozyon önleyiciler ve yardımcı maddeler.

ENZYMATIC SOLUTION FOR MEDICAL INSTRUMENTS AND ENDOSCOPES

TIBBİ CİHAZ VE ENDOSKOPLAR İÇİN ENZİM İÇEREN SOLÜSYON

ONESEPT ENZYM



KAF G40 5lt.



PROPERTIES: It is compatible with glass, ceramic, silicone, plastic, PVC, acrylic, polymer, polycarbonate, polystyrene, HDPE, porcelain and stainless steel materials. Anticorrosive effective use. It provides the cleaning and pre-disinfection of all kinds of invasive surgical instruments, dental surgical instruments, surgical laparoscopy instruments, flexible and rigid endoscopes. Provides a more effective disinfection process by cleaning organic wastes on the surfaces such as blood, fat, protein and starch. Compatible with glass, rubber, wood, ceramic, silicone, plastic and stainless steel.

USAGE: It is used by diluting in % 0,5 concentration. All instruments are immersed into the solution. Shows maximum activity at 20- 45 °C. It is effective in 5 minutes in manual and ultrasonic usage. The instruments, have been removed from the solution at the end of the process, are rinsed thoroughly.

CHEMICAL COMPOSITION: %1-%5 (protease, amylase, lipase) glycerin, monopropylene glycol, nonionic surfactants, complexing agents anticorrosive substances.

ÖZELLİKLER: Cam, seramik, silikon, plastik, PVC, akrilik, polimer, polikarbonat, polistiren, HDPE, porselen ve paslanmaz çelik malzemeler ile uyumludur. Antikorozif etkilidir.

KULLANIM ALANI: Endoskop yıkama makinelerinde, ultrasonik yıkama makinelerinde ve manuel kullanım için uygundur. Her türlü girişimsel cerrahi aletler, dental cerrahi aletler, cerrahi laparoskopik aletleri, flexible ve rijit endoskoplara temizliği ve ön dezenfeksiyonunu sağlar. Yüzeylerdeki kan, yağ, protein ve nişasta gibi organik atıkları temizleyerek daha etkin bir dezenfeksiyon işlemi sağlar. Cam, kauçuk, ahşap, seramik, silikon, plastik ve paslanmaz çelik ile uyumludur.

KULLANIM ŞEKLİ: % 0,5 konsantrasyonda seyreltilerek kullanılır. Tüm aletler solüsyona daldırılır. 20- 45 °C'de maksimum etkinlik gösterir. Manuel ve ultrasonik kullanımda 5 dakikada etkilidir. İşlem sonunda solüsyondan çıkarılan aletler iyice durulanır.

KİMYASAL BİLEŞİMİ: %1-%5 (proteaz, amilaz, lipaz) gliserin, monopropilen glikol, noniyonik surfaktanlar, kompleks yapıcı ajanlar antikorozif maddeler.

ENZYMATIC SOLUTION FOR MEDICAL INSTRUMENT WASHERS

TIBBİ ALET YIKAMA MAKİNELERİ İÇİN ENZİMATİK SOLÜSYON

ONESEPT ENZYM



KAF G32 5lt.



PROPERTIES: Concentrate tool cleaning detergent solution containing developed triple enzyme complex for use in automatic washing machines.

USAGE AREA: Suitable for cleaning of dirt surgical and medical instruments at sterilization unit with instrument washing machines.

USAGE: 0.2%-0.8% (2-8 ml/lit) is recommended for cleaning and disinfection devices in the medical field. Follow the machine manufacturer's recommendations for dosing information.

CHEMICAL COMPOSITION: 1%-5% (protease, amylase, lipase) glycerin, monopropylene glycol, nonionic surfactants, complexing agents anticorrosive substances.

ÖZELLİKLER: Otomatik yıkama makinelerinde kullanılmak üzere geliştirilmiş üçlü enzim kompleksi içeren konsantre alet temizleme deterjan solüsyonudur.

KULLANIM ALANI: Sterilizasyon ünitesinde kirli cerrahi ve tıbbi aletlerin alet yıkama makineleri ile temizliği için uygundur.

KULLANIM ŞEKLİ: Tıbbi alanda temizleme ve dezenfeksiyon cihazlarında %0,2-%0,8 (2-8 ml/lit) önerilir. Dozajlama bilgisi için makine üreticisinin tavsiyelerine uyunuz.

KİMYASAL BİLEŞİMİ: %1-%5 (proteaz, amilaz, lipaz) gliserin, monopropilen glikol, noniyonik surfaktanlar, kompleks yapıcı ajanlar, antikorozif maddeler.

ALCOHOL-BASED/FREE RAPID SURFACE DISINFECTANT WIPES AND CONCENTRATED FLOOR - SURFACE DISINFECTANT

ALKOLLÜ VE ALKOLSÜZ HIZLI YÜZEY DEZENFEKTAN MENDİL VE KONSANTRE YER VE YÜZEY DEZENFEKTANI



USAGE AREA: It is a fast surface disinfectant used on floors and surfaces.

KULLANIM ALANI: Zemin ve yüzeylerde kullanılan hızlı yüzey dezenfektanıdır.

*OneSurface C Concentrated Floor and Surface Disinfectant/
OneSurface C Konsantre Yer ve Yüzey Dezenfektanı*

KAF G22	5lt.	KAF G22-11	750ml	KAF G22-5	1lt.
---------	------	------------	-------	-----------	------

*OneSpray Alcohol Based Rapid Surface Disinfectant/
OneSpray Alkol Bazlı Hızlı Yüzey Dezenfektanı*

KAF G41-1	750ml	KAF G41-2	1lt.	KAF G41-3	5lt.
-----------	-------	-----------	------	-----------	------

99.9%

Kills 99,99% of tested bacteria fungi and viruses

Test edilen bakteri, mantar ve virüsleri %99,9 oranında öldürür



Antivirus
Antivirüs

ALCOHOL-BASED HAND AND SKIN ANTISEPTIC/ DISINFECTANT GEL

ALKOL BAZLI EL VE CİLT ANTİSEPTİĞİ & DEZENFEKTAN JELİ



PROPERTIES: OneHand is an alcohol-based hand and skin antiseptic. Used for hygienic and surgical hand disinfection. Does not cause any allergic reaction.

ÖZELLİKLER: OneHand alkol bazlı el ve vücut antiseptiğidir. Hijyen ve cerrahi el dezenfeksiyonu için kullanılır. Herhangi bir alerjik reaksiyon göstermez.

Alcohol-Based Hand and Skin Antiseptic/ Alkol Bazlı El ve Cilt Antiseptiği

KAF G59-2	50ml	KAF G59-3	100ml	KAF G59-5	250ml	KAF G59-8	500ml
-----------	------	-----------	-------	-----------	-------	-----------	-------

KAF G59-12	1lt.	KAF G59-13	4lt.	KAF G59-14	5lt.	KAF G59-15	10lt.
------------	------	------------	------	------------	------	------------	-------

Disinfectant Gel/ Dezenfektan Jeli

KAF G50	50ml	KAF G100	100ml	KAF G250	250ml	KAF G500	500ml
---------	------	----------	-------	----------	-------	----------	-------

99.9%

Kills 99,99% of tested bacteria fungi and viruses

Test edilen bakteri, mantar ve virüsleri %99,9 oranında öldürür



Antivirus
Antivirüs

73%

Ethanol
Etil Alkol

WET WIPES & WET BABY TOWEL

ISLAK MENDİL & ISLAK BEBEK HAVLUSU



Wet Wipes

KAF G48-1	40pcs
KAF G48	50pcs
KAF G48-2	60pcs
KAF G48-3	72pcs
KAF G48-4	90pcs
KAF G48-5	100pcs
KAF G48-6	120pcs

Wet Baby Towel

KAF G62-1	40pcs
KAF G62	50pcs
KAF G62-2	60pcs
KAF G62-3	72pcs
KAF G62-4	90pcs
KAF G62-5	100pcs
KAF G62-6	120pcs

PROPERTIES: Thanks to its special formula, it cleans the skin. It is formulated compatible with the skin. Dermatologist approved. It cleans, soothes and moisturizes the skin.

ÖZELLİKLER: Özel formülü sayesinde ciltte temizlik sağlar. Cilt ile uyumlu formüle edilmiştir. Dermatolog onaylıdır. Cildi temizler, rahatlatır ve nemlendirir.



ADHESIVE REMOVER SPRAY AND WIPES

YAPIŞKAN SÖKÜCÜ SPREY VE MENDİL



PROPERTIES: Provides atraumatic application. It is effective in instantly removing the strongest adhesive and adhesive residues. It eliminates the side effects of medical adhesives on the skin.

USAGE AREA: It is used to facilitate the painless and trauma-free removal of adhesive dressings, plasters and other adhesive products from the skin in a few seconds. It can be used safely on the skin of children, adults and the elderly. The remover is squeezed all over the product, waited for a few seconds and the adhesive is gently pulled from the skin.

ÖZELLİKLER: Atravmatik uygulama sağlar. En kuvvetli yapıştırıcı ve yapıştırıcı kalıntılarınin anında giderilmesini sağlar. Medikal yapıştırıcılarınin cilt üzerindeki yan etkilerini ortadan kaldırır.

KULLANIM ALANI: Yapışkanlı örtülerin, flasterlerin ve diğer yapışkan ürünlerin ciltten bir kaç saniye içerisinde ağrısız ve travmasız çıkarılmasını kolaylaştırmak için kullanılır. Çocuk, yetişkin ve yaşlılar ciltlerinde güvenle kullanabilirler. Sökücü ürünün tüm etrafına sürülür, birkaç saniye beklenir ve yapışkan yerinden nazikçe sökülür.



Adhesive Remover Spray / Yapışkan Sökücü Sprey

ONCR 002	50ml		
D4	100ml	D4-1	250ml

Yapışkan Sökücü Sprey (Aerosol) / Adhesive Remover Spray (Aerosol)

D5	50ml	D5-1	100ml
D5-2	150ml	D5-3	200ml

Yapışkan Sökücü Mendil / Adhesive Remover Wipes

D6	1pcs
----	------

ANTISEPTIC SOLUTION

ANTİSEPTİK SOLÜSYON



10%

Povidone Iodine
Povidyon İyot



USAGE AREA: It is used in hygienic and surgical hand disinfection, in the disinfection and preparation of the surgical site before the operation, in the disinfection of the skin and around the wound, in antiseptic washings.

KULLANIM ALANLARI: Hijyenik ve cerrahi el dezenfeksiyonunda, ameliyat öncesi ameliyat bölgesinin dezenfeksiyonunda ve hazırlanmasında, antiseptik yıkamalarda kullanılır.

PI1	50ml	PI2	100ml	PI3	250ml	PI4	1lt.	PI5	5lt.		
PI6	10lt.	PI7	30lt.	PI8	500ml	PI9	30ml	PI10	20lt.	PI11	1000lt.

ANTIBACTERIAL MEDICAL SOAP

ANTİBAKTERİYEL MEDİKAL SABUN



4%

Chlorhexidine
Klorheksidin




USAGE AREA: Antibacterial medical soap is an antiseptic, antimicrobial skin cleanser used by medical professionals before surgical procedures and by patients before a surgical procedure. This special soap cleans the surgeon's own skin as well as their patients. It is essential that all germs are eradicated on the skin surfaces of surgeons, operating room attendants, and the patient in order to help prevent postoperative infections.

KULLANIM ALANLARI: Antibakteriyel medikal sabun, cerrahi işlemlerden önce tıp uzmanları ve cerrahi bir işlemden önce hastalar tarafından kullanılan antiseptik, antimikrobiyal bir cilt temizleyicidir. Bu özel sabun, cerrahın kendi cildinin yanı sıra hastalarını da temizler. Ameliyat sonrası enfeksiyonların önlenmesine yardımcı olmak için cerrahların, ameliyathane görevlilerinin ve hastanın cilt yüzeylerindeki tüm mikropların yok edilmesi esastır.


SS-01	50ml	SS-02	100ml	SS-03	250ml	SS-04	300ml	SS-05	500ml	SS-06	1lt.
SS-07	5lt.	SS-08	10lt.	SS-09	20lt.	SS-10	30lt.	SS-11	50lt.	SS-12	1000lt. (1bc)

KAF GRUP

More Information;

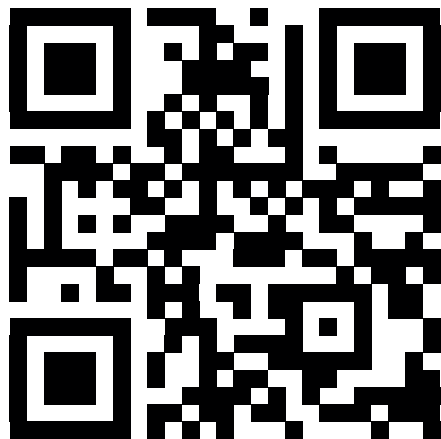

YOUR PRIVATE LABEL!

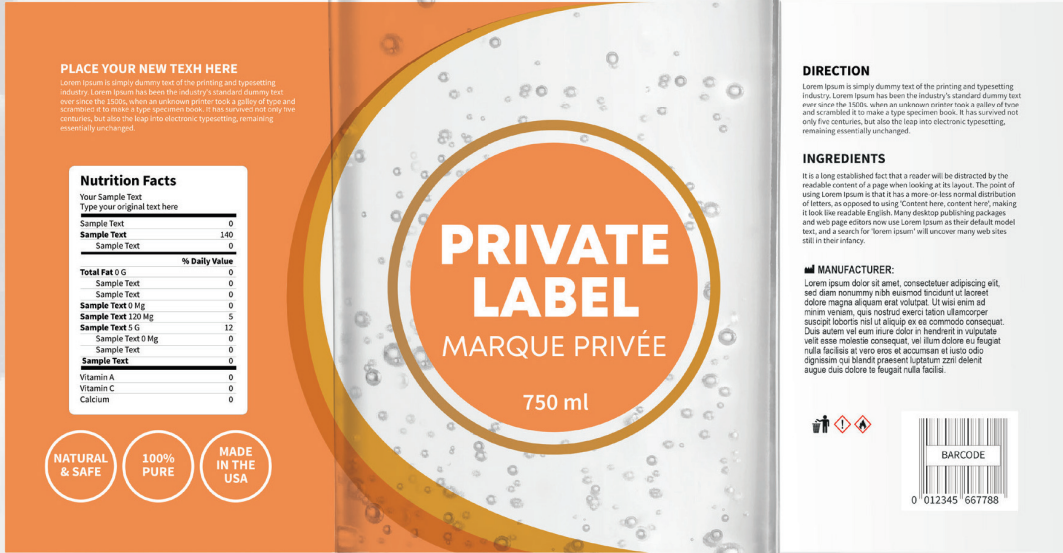

PLACE YOUR NEW TEXT HERE

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged.

Nutrition Facts

Your Sample Text	
Type your original text here	
Sample Text	0
Sample Text	140
Sample Text	0
	% Daily Value
Total Fat 0 G	0
Sample Text	0
Sample Text	0
Sample Text 0 Mg	0
Sample Text 120 Mg	5
Sample Text 5 G	12
Sample Text 0 Mg	0
Sample Text	0
Sample Text	0
Vitamin A	0
Vitamin C	0
Calcium	0

NATURAL
& SAFE

100%
PURE

MADE
IN THE
USA

PRIVATE
LABEL
MARQUE PRIVÉE

750 ml

DIRECTION

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged.

INGREDIENTS

It is a long established fact that a reader will be distracted by the readable content of a page when looking at its layout. The point of using Lorem Ipsum is that it has a more or less normal distribution of letters, as opposed to using 'Content here, content here', making it look like readable English. Many desktop publishing packages and web page editors now use Lorem Ipsum as their default model text, and a search for 'Lorem Ipsum' will uncover many web sites still in their infancy.

MANUFACTURER:

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut vel elit ut congue, nulla feugiat nullam auctoritate, quam blandit libero volutpat sed accumsan sit amet magna. Duis auteem vel eum irure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue dui dolore feugiat nulla facilis.



You may Introduce the Wancare Products with Your Own Brand...

You may offer Wancare products in your own shops with your own brand. We also produce our products without a logo with the aim of bringing Wancare brand to large masses. You can create a good option for your customers and move your brand to better points with the high quality Wancare products.

Kendi Markanızı WanCare Ürünleri ile Tanıtabilirsiniz...

WanCare ürünlerini, kendi mağazanızda kendi markanız ile tanıtabilirsiniz. Ürünlerimizi geniş kitlelere ulaştırmak için logosuz da üretim yapıyoruz. WanCare ürünleri ile müşterileriniz için iyi bir seçenek oluşturabilir ve markanızı iyi noktalara ulaştırabilirsiniz.

KAF GRUP

KAF GRUP SAĞLIK HİZMETLERİ İNŞ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

T +90 212 471 4 200 (pbx) / F + 90 212 471 4 201

Atakent Mah. 221. Sk. No:3A Rota Office A Blok Kat:14 D:83 K.ÇEKMECE / İSTANBUL

www.kafgrup.com info@kafgrup.com @wan.care & kafgrup