

ADASPOR[®] PLUS

ISAZONE[®] ed Acido Peracetico

Soluzione sterilizzante chimica a freddo

I prodotti della famiglia ADASPOR[®] Plus sono disponibili nelle seguenti formulazioni:

Codice	Descrizione	Durata	Repertorio Dispositivo Medico
550009	ADASPOR [®] PLUS M	14 gg. in bacinelle coperte	1287789
550002	ADASPOR [®] PLUS Concentrato	12 gg. in bacinelle coperte	1287775
550034	ADASPOR [®] PLUS Pronto 5L	12 gg. in bacinelle coperte	1293572
550033	ADASPOR [®] PLUS Pronto 1L		1293561
550042	ADASPOR [®] PLUS Pentadie	5 gg. in bacinelle coperte	1253700
550035	ADASPOR [®] PLUS Monodie	1 gg. in bacinelle coperte	1293919
550036	ADASPOR [®] Plus Single Shot	Da utilizzare in lavaendoscopi MEDIVATORS [®]	1293936

CND D050102

Codice	Descrizione	
520017	ADASPOR [®] Plus Test Strip	Strisce per la determinazione della MCR dell'acido peracetico in ADASPOR [®] Plus



Publicazione Riservata agli Operatori Sanitari - DEP 0096 - Ed 04/2015

CE 0546

CANTEL MEDICAL

CANTEL MEDICAL (Italy) S.r.l.

Via Laurentina,169

00071 POMEZIA (RM) Italia

Tel.: +39.06.9145399 - Fax: +39.06.9146099

www.cantelmedical.it

ADASPOR[®] PLUS

ISAZONE[®] ed Acido Peracetico


Soluzione sterilizzante chimica a freddo



CANTEL MEDICAL

ADASPOR[®] PLUS

Soluzione sterilizzante formulata con Acido Peracetico tal quale al 5% e Diazaadamantani (ISAZONE[®]) conforme allo standard UNI EN ISO 14937 par. 5.3.1 in 10 minuti, testata in condizioni di sporco e pulito come previsto dallo standard UNI EN 14885.

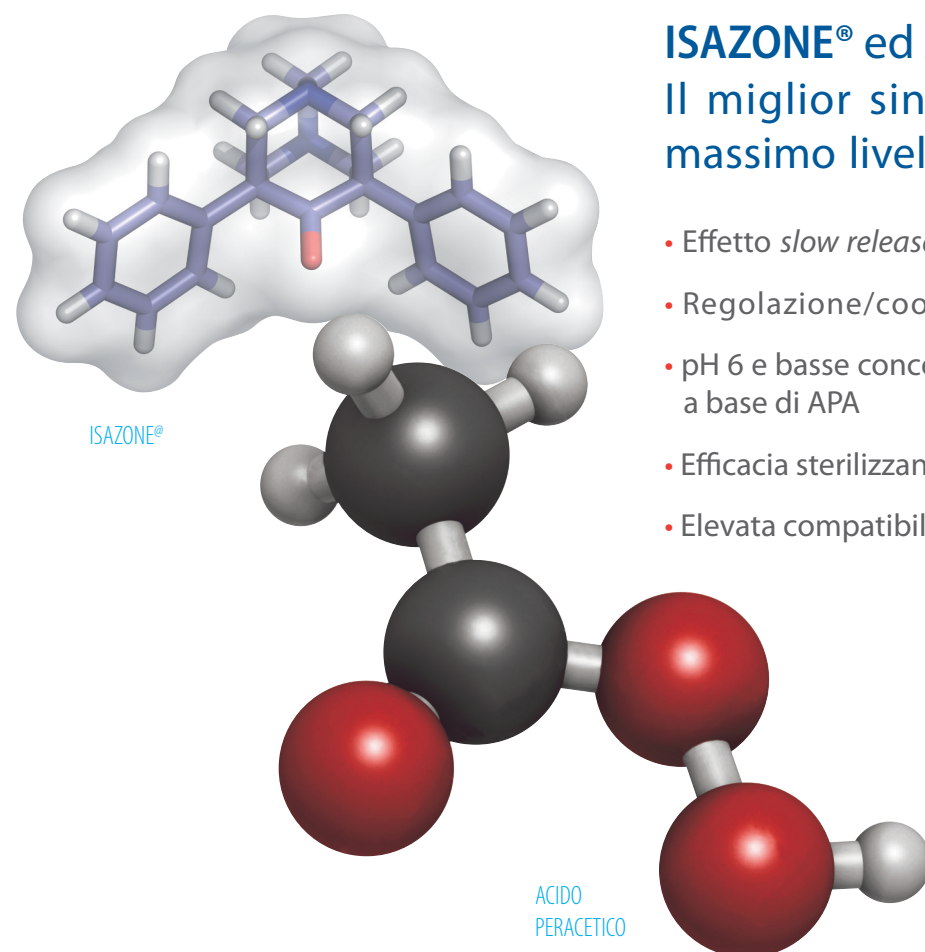


ISAZONE[®] ed ACIDO PERACETICO: Il miglior sinergismo d'azione per il massimo livello di efficacia e sicurezza

- Effetto *slow release* (lento rilascio) dell'ossigeno attivo
- Regolazione/coordinazione dell' Acido Peracetico
- pH 6 e basse concentrazioni di APA rispetto ai generici a base di APA
- Efficacia sterilizzante a temperatura ambiente
- Elevata compatibilità con i dispositivi medici

Rapidità d'azione

- Sterilizzante chimico a freddo ufc/ml = 0 in 10 min
- Sporicida e disinfettante di alto livello in 5 min

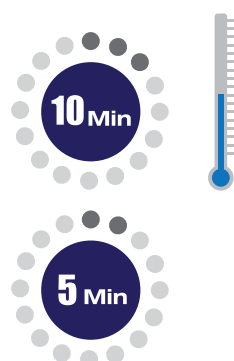

Efficacia

- Azione sinergica di ISAZONE[®] ed Acido Peracetico che consente di ottenere l'eliminazione di ogni forma microbica (ufc/ml=0), in conformità con le attuali definizioni internazionali di sterilizzazione chimica a freddo (UNI EN ISO 14937- par. 5.3.1)
- Elevata efficacia microbiologica con ampio spettro d'azione (sporicida, tubercolicida, virucida, micobattericida, battericida) testata e confermata da studi effettuati presso centri di riferimento nazionali ed internazionali, secondo le normative Ufficiali Europee (EN)

La certezza di un reprocessing efficace per la prevenzione delle infezioni



Massimo livello di sicurezza

- Testato clinicamente e tossicologicamente
- Test microbiologici eseguiti in condizioni di pulito e sporco garantiscono elevati standard di sicurezza per i pazienti e gli operatori

Compatibilità con i dispositivi medici

- ADASPOR[®] Plus garantisce assoluta compatibilità con i materiali che costituiscono i dispositivi medici e gli endoscopi delle diverse marche, confermata da oltre due milioni di cicli di sterilizzazione già eseguiti in Italia e all'estero
- Riduzione dei costi di manutenzione dei dispositivi medici riutilizzabili

Massima durata

- Per effetto del lento rilascio di ISAZONE[®]
- ADASPOR[®] Plus Pronto ed ADASPOR[®] Plus Concentrato durano 12 giorni



ADASPOR[®] PLUS TEST STRIPS

- Attività confermata attraverso l'utilizzo degli strip ADASPOR[®] Plus Test Strip
- Strisce per la determinazione della MCR (Minima Concentrazione Raccomandata) 0,05% di acido peracetico che, in associazione all'ISAZONE[®], assicura l'attività sterilizzante di ADASPOR[®] Plus.



 CANTEL MEDICAL