



Company: CHONGQING NEW WORLD TRADING CO., LTD
Address: Suite 25-12, Block C, Hongding World Garden,
No.32 Yubei 3 Cun, Jiangbei District, Chongqing, China

Workshop: NANTONG TIANYE LABWARE CO., LTD
Address: Sanhe Town, Haimen City, Jiangsu Province, China

Website: www.cnwtc.com
cnwtc.en.alibaba.com
Tel: +86-23-67728212, +86-23-67728441
Mobile: +86-15922705587
Fax: +86-23-67728109
Email: export@cnwtc.com, Kathy@cnwtc.com



CHONGQING NEW WORLD TRADING CO.,LTD
重庆纽沃贸易有限公司

[NANTONGTIANYE LABWARE CO.,LTD
南通天业实验器材有限公司]

公司简介

重庆纽沃贸易有限公司创建于2009年，是一家集生产和贸易于一体的实验室耗材和医疗耗材制造商。工厂位于江苏省海门市，与上海隔江相望，地理位置十分优越，交通便利。

公司主要生产微生物实验室耗材，医学检验耗材和临床病理诊断耗材等3大系列200多个产品，产品主要销往欧盟、中东、东南亚、非洲、美洲等多个国家。长期以来，我们的各种产品深受国外客户的赞赏和信赖。

公司始终把产品质量放在第一位，这也使我们的产品顺利通过ISO13485和CE认证。我们承诺始终提供质量可靠，高性价比的产品和服务。

Company Profile

Chongqing New World Trading Co., Ltd was established in 2009, which is a professional manufacturer and exporter in the area of laboratory consumables and medical consumables. Factory is located in Haimen City, Jiangsu Province, just to the north of Shanghai, the transportation is very convenient.

Our main products include microbiology laboratory consumables, medical consumables and clinical pathological consumables. We have more than 200 kinds of products which are selling to European, Middle East, Southeast Asia, Africa, America and other countries. All the products have been highly praised by our clients.

We always put the product quality first so that we get the ISO13485 and CE certificate smoothly. We promise to offer reliable quality and professional service.



● TYA Centrifuge Tube Series
离心管系列

● TYB Cryovial Tube Series
冷冻管系列

● TYC Pipette Series
吸头、吸管系列

● TYD Test Tube Series
试管系列

● TYE Petri Dish Series
培养皿系列

● TYF Specimen Cup Series
样品杯系列

● TYG Glassware Series
玻璃制品系列

● TYH Embedding Cassette
包埋盒系列

● TYI Microscope Slide & Cover Glass Series
载玻片、盖玻片系列

● TYJ Medical Disposables Series
医疗耗材系列

● TYK Blood Collection Tube & ESR Pipette
采血管、ESR管

01/03

04/05

06/08

09/11

12/13

14/16

17/18

19/19

20/23

24/26

27/32



Plain Tube 普通管

Usage: Applying to blood specimen collection and storage for biochemical, immunological and serum clinical examination. Whether it is glass or plastic tube, the wall is extremely smooth, and can effectively prevent blood cells attaching to the wall, which can minimize the specimens in vitro hemolysis.

用途：用于生化、免疫、血清等临床医学检验中血液样本的采集和贮放。无论是玻璃管还是塑料管，其内壁都极其光滑，能有效避免血细胞附壁，最大限度减少标本体外溶血。



Pro-Coagulation Tube 促凝管

Usage: Applying to fast collection of blood specimen for biochemical and immunological clinical examination. A kind of coagulant, which is different from other chemical coagulants having effects on the test results, was sprayed evenly on the inner wall of the tube to speed the blood solidification without any heating devices (such as water container). After blood collection, let the tube stand for 15 minutes(make sure the ambient temperature over 16℃), and then you can get the ideal and high purity serum.

用途：用于生化、免疫等临床医学检验中要求快速血液样本的采集。该储血管内添加的促凝剂，有别于其他化学促凝法对检测结果的影响。促凝剂均匀喷涂在储血管内壁，无需借助于任何加温设施（如水温箱等），完全采用纯物理化，致使血液快速凝固。采血完毕后，静置立放15分钟（离心环境温度保证在16℃），即可得到理想、高纯净度的血清。

Code 编号	Material 材质	Size(mm) 规格	Vol 采血量	Packing 包装	Ctn size(cm) 箱子尺寸	Gw (kg) 毛重
TYK01	PET	13*75	3-5ml	100pcs/rack 1800pcs/ctn	52*38*31	13.5
TYK01-1	Glass					18.2
TYK02	PET	13*100	5-7ml	100pcs/rack 1800pcs/ctn	52*38*38	15.8
TYK02-1	Glass					22
TYK03	PET	16*100	8-10ml	100pcs/rack 1200pcs/ctn	51*41*25	14
TYK03-1	Glass					17.5

Code 编号	Material 材质	Additive 添加剂	Size(mm) 规格	Vol 采血量	Packing 包装	Ctn size(cm) 箱子尺寸	Gw (kg) 毛重
TYK07	PET	pro-coagulation	13*75	3-5ml	100pcs/rack 1800pcs/ctn	52*38*31	13.5
TYK07-1	Glass						18.2
TYK08	PET	pro-coagulation	13*100	5-7ml	100pcs/rack 1800pcs/ctn	52*38*38	15.8
TYK08-1	Glass						22
TYK09	PET	pro-coagulation	16*100	8-10ml	100pcs/rack 1200pcs/ctn	51*41*25	14
TYK09-1	Glass						17.5



Gel and Clot Activator Tube 分离胶管

Usage: Applying to the acquisition of high-quality serum, specimen for biochemical, immunological and serum clinical examination. Serum separation gel is a kind of semi-solid inert gel, composed of several compounds and synthesized by medical polymeric material. After blood centrifugal, the specimen can be separated into serum top, separation gel middle and blood corpuscle lower. In the middle of the tube, a thick layer of separation gel can completely isolate serum from blood corpuscle, so as to ensure the purity of serum.

用途：用于生化、免疫、血清等临床医学检验中获得高品质血清样本。血清分离胶是一种由数种化合物所组成之半固体惰性胶，该分离胶全部采用医用高分子材料合成，采用离心后，将分离成血清（上层）、血清分离胶（中层）及血球（下层）。试管中间厚厚一层血清分离胶能完全隔离血清及血球，让血球无法接触到血清，从而保证了血清的纯净度。



PT Tube 血凝管

Usage: Applying to blood clotting (PT, APTT, coagulation factor) test for clinical examination. The concentration of sodium citrate is 109mol/L and the accurate ratio of blood and anticoagulant is 9:1.

用途：用于临床医学检验中凝血机制（PT、APTT、血凝因子）检验。柠檬酸钠浓度109mol/L，采集血液与抗凝剂的精确比为9：1。

Code 编号	Material 材质	Additive 添加剂	Size(mm) 规格	Vol 采血量	Packing 包装	Ctn size(cm) 箱子尺寸	Gw (kg) 毛重
TYK04	PET	Gel & Clot Activator	13*75	3-5ml	100pcs/rack 1800pcs/ctn	52*38*31	16
TYK04-1	Glass						24.2
TYK05	PET	Gel & Clot Activator	13*100	5-7ml	100pcs/rack 1800pcs/ctn	52*38*38	17.2
TYK05-1	Glass						26
TYK06	PET	Gel & Clot Activator	16*100	8-10ml	100pcs/rack 1200pcs/ctn	51*41*25	18
TYK06-1	Glass						22.5

Code 编号	Material 材质	Additive 添加剂	Size(mm) 规格	Vol 采血量	Packing 包装	Ctn size(cm) 箱子尺寸	Gw (kg) 毛重
TYK10	PET	Sodium Citrate1:9	13*75	1.8-4.5ml	100pcs/rack 1800pcs/ctn	52*38*38	14.2
TYK10-1	Glass						18.2





Edta Tube
血常规管

Usage: applying to clinical haematology test, such as blood routine examination, all kinds of blood cells analysis (such as blood cell morphology examination, blood cell count, hematocrit, hemoglobin, sickling test, etc.)

用途：用于临床血液学检验，如血常规等。适用各种血细胞分析（如血细胞形态镜检、血细胞计数、红细胞比积、血红蛋白、镰变实验等）。

Code 编号	Material 材质	Additive 添加剂	Size(mm) 规格	Vol 采血量	Packing 包装	Ctn size(cm) 箱子尺寸	Gw (kg) 毛重
TYK11	PET	EDTA K2/K3	13*75	1-5ml	100pcs/rack 1800pcs/ctn	52*38*31	13.5
TYK11-1	Glass						18.2
TYK12	PET	EDTA K2/K3	13*100	5-7ml	100pcs/rack 1800pcs/ctn	52*38*38	15.8
TYK12-1	Glass						22
TYK13	PET	EDTA K2/K3	16*100	8-10ml	100pcs/rack 1200pcs/ctn	51*41*25	14
TYK13-1	Glass						17.5



Heparin Tube
肝素管

Usage: applying to clinical biochemistry, blood specimen collection for emergency biochemical tests and anticoagulation(blood rheology measurement, biochemical test, genetic diagnosis, enzymology, enzyme immunoassay, etc.)

用途：用于临床生化、急诊生化检验中血液样本的采集和抗凝（血变学测定、生化、基因诊断、酶学、酶免法等检验）。

Code 编号	Material 材质	Additive 添加剂	Size(mm) 规格	Vol 采血量	Packing 包装	Ctn size(cm) 箱子尺寸	Gw (kg) 毛重
TYK14	PET	Heparin lithium	13*75	3-5ml	100pcs/rack 1800pcs/ctn	52*38*31	13.5
TYK14-1	Glass						18.2
TYK15	PET	Heparin lithium	13*100	5-7ml	100pcs/rack 1800pcs/ctn	52*38*38	15.8
TYK15-1	Glass						22
TYK16	PET	Heparin lithium	16*100	8-10ml	100pcs/rack 1200pcs/ctn	51*41*25	14
TYK16-1	Glass						17.5




Glucose Tube
血糖管

Usage: Applying to clinical determination of blood glucose. The original characters of blood specimen can be maintained for a long time.

用途：用于临床血糖值的测定，能较长时间保持血液样本的原始性状。

Code 编号	Material 材质	Additive 添加剂	Size(mm) 规格	Vol 采血量	Packing 包装	Ctn size(cm) 箱子尺寸	Gw (kg) 毛重
TYK17	PET	Sodium fluoride /potassium oxalate	13*75	2-5ml	100pcs/rack 1800pcs/ctn	52*38*31	13.5
TYK17-1	Glass						18.2
TYK18	PET	Sodium fluoride /potassium oxalate	13*100	5-7ml	100pcs/rack 1800pcs/ctn	52*38*38	15.8
TYK18-1	Glass						22
TYK19	PET	Sodium fluoride /potassium oxalate	16*100	8-10ml	100pcs/rack 1200pcs/ctn	51*41*25	14
TYK19-1	Glass						17.5

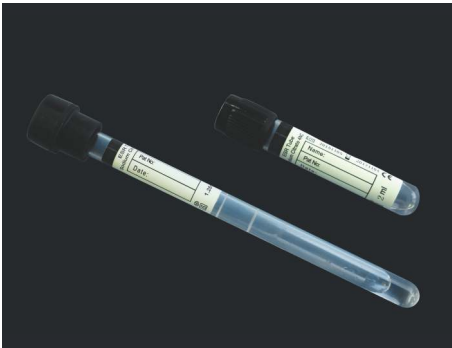

ESR Vacuum Tube
血沉管

Usage: 1.28ml tube with a total capacity of 1.6ml, is equipped with 0.129mol/L sodium citrate 0.32ml. Collect blood 1.28ml to the central scale and after blood collection, we immediately invert the tube gently for 4-5 times so as to mix blood completely with anticoagulant, then put the tube into a D2010 automatic ESR analyzer and after 30 minutes read the data. This product can save time and effort and at the same time prevent cross infection.

用途：1.28ml管装有0.129mol/L柠檬酸钠0.32ml，采血1.28ml，至中央刻度处，总容量为1.6ml。采血后，立即轻轻反复颠倒4-5次，使抗凝剂充分与血液混匀。然后放入D2010型自动血沉分析仪内，30分钟后即可读数。该产品省时、省力，从源头杜绝了交叉感染。

Code 编号	Material 材质	Additive 添加剂	Size(mm) 规格	Vol 采血量	Packing 包装	Ctn size(cm) 箱子尺寸	Gw (kg) 毛重
TYK20	PET	Sodium citrate1:4	13*75	1.6-2.4ml	100pcs/rack 1800pcs/ctn	52*38*31	13.5
TYK20-1	Glass						18.2

Code 编号	Material 材质	Additive 添加剂	Size(mm) 规格	Vol 采血量	Packing 包装	Ctn size(cm) 箱子尺寸	Gw (kg) 毛重
TYK21	Glass	Sodium citrate1:4	9*120	1.28ml	100pcs/rack 1800pcs/ctn	48*37*45	18.2