

RONDO 3


Incredibil de simplu. Pur și simplu incredibil.



hearLIFE

RONDO 3

Procesor audio pentru implant cohlear

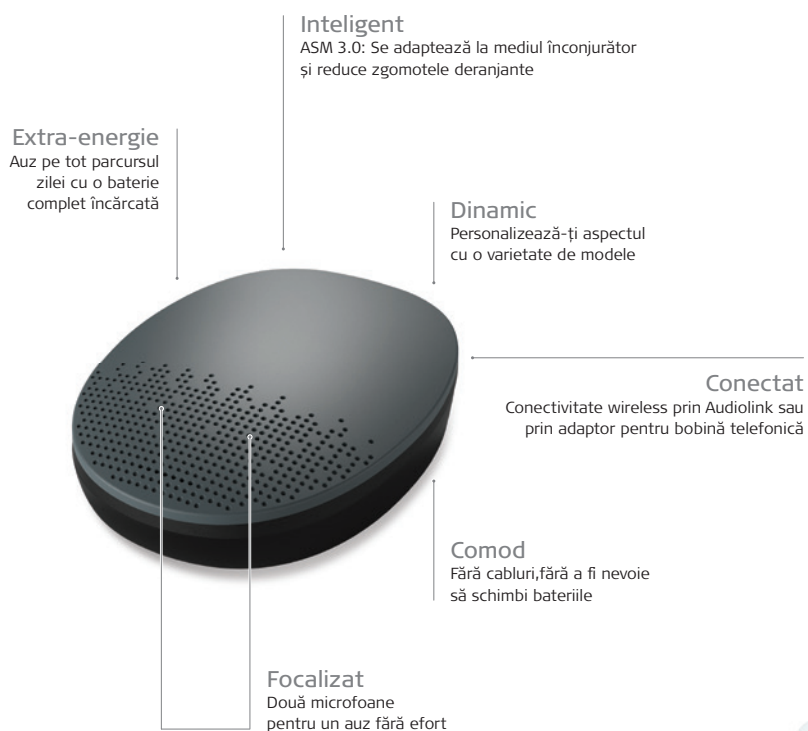

Auz simplu

Indiferent că este vorba de conversații purtate în mașină sau într-un restaurant, peste tot zgomotul poate perturba înțelegerea vorbirii. Dar nu și cu RONDO 3. Două microfoane direcționale, trei tipuri de reducere sporită a zgomotului și inteligență adaptivă asigură performanțe auditive superioare în orice mediu.

Utilizare simplă

Fără cabluri, fără a fi nevoie să schimbi bateriile, fără bățai de cap. RONDO 3 este preîncărcat și gata de utilizare imediat ce a fost scos din cutie. Este ușor, foarte subțire și abia vizibil pe cap. Bateria este încorporată complet, asigură energie pentru toată ziua și poate fi încărcată fără fir. Nu ar putea fi mai comod de atât.

Conectivitate simplă

Accesoriiul AudioLink permite transmiterea de flux audio wireless și are un microfon integrat ce poate fi folosit pentru apeluri telefonice sau întâlniri. Setările procesorului RONDO 3 pot fi ajustate prin telecomanda FineTuner Echo sau prin aplicația AudioKey 2. Cu ajutorul aplicației, părinții pot monitoriza procesorul audio al copiilor în mod regulat și, dacă este nevoie, îl pot chiar localiza.



Gestionați de pe smartphone
Noua aplicație AudioKey 2 permite utilizatorilor să verifice starea și nivelul bateriei procesorului RONDO 3, precum și să regleze setările direct de pe smartphone.



Integrați-vă sau ieșiți în evidență
Cu o varietate de capace decorative, RONDO 3 poate să devină aproape insesizabil sau se poate transforma într-un element care atrage instantaneu privirile.



Compatibilitate ușoară
RONDO 3 este compatibil cu toate implanturile cohleare multicanal de la MED-EL și cu toate mărcile și tipurile de aparate auditive.



Înotați și stropiți-vă
O stropire accidentală sau o picătură de apă nu va afecta procesorul RONDO 3. Iar cu accesoriul WaterWear el poate fi folosit chiar și în timpul înotului.



Reduceți costurile
Deoarece bateria este încorporată și reîncărcabilă, utilizatorii economisesc timp și bani, evitând astfel bățiile de cap inutile.



Confort complet
Urechile purtătorului procesorului RONDO 3 sunt complet libere. Rezultatul este un confort remarcabil, în special pentru cei care poartă ochelari.


Energie pentru întreaga zi



Încărcare inductivă
Bateria încorporată poate fi încărcată complet în 3 ore și oferă suficientă energie pentru audiere de dimineață până seara.


Date tehnice

Procesor audio cu o singură unitate RONDO 3 (Me1550)

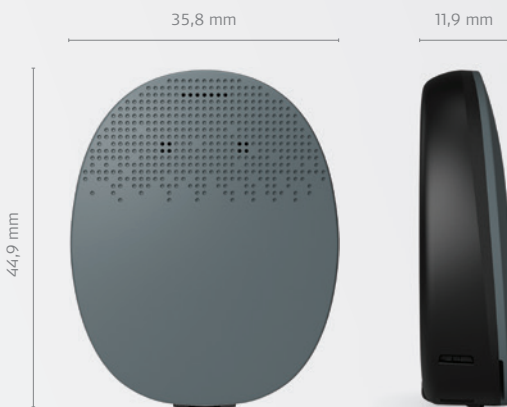

Mărimrea reală

Capace

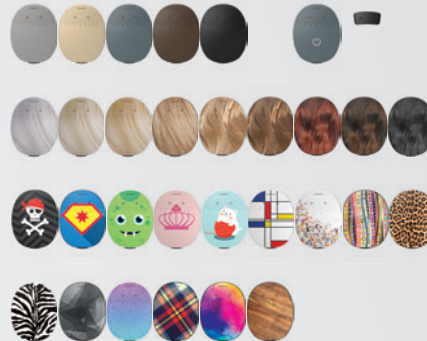

Procesor audio RONDO 3 (Me1550)

Caracteristici produs

- Model integrat
- 14,7 g cu capac mini și magnet M1; 15,9 g cu capac standard și magnet M1
- Rezistent la apă conform standardului IP68: RONDO 3 este rezistent la stropi de apă și scufundări (până la o adâncime maximă de 1 m timp de 60 de minute).
- Gama de frecvență 70-9300 Hz
- Microfoane duale
- Automatic Sound Management 3.0
- Înregistrare extinsă a datelor de utilizare
- Indicare stare baterie prin LED
- Indicator cu LED pentru funcția de verificare a conexiunii cu implantul
- Volum continuu și controlul sensibilității via FineTuner Echo or AudioKey 2
- Poziții disponibile pentru patru programe
- Opțiuni de fixare suplimentare
- Magnet diametral disponibil în 5 variante de putere, magnet axial disponibil în 5 variante
- Carcasă: Amestec de policarbonat și polimer acilonitril-butadien-stirol
- Biocompatibil conform ISO 10993-1
- Fără latex*

Baterie reîncărcabilă

- Baterie litiu-ion încorporată
- Până la 24 de ore de utilizare per încărcare**
- Încărcare wireless
- Sursă de alimentare și încărcare simultană posibilă prin cablul de încărcare (de exemplu, conectare la baterie externă)
- Durata de viață a bateriei este de obicei de peste 5 ani

Capace

- 5 capace Standard (mate)
- 5 capace Simplitate
- 24 capace Decorative
- 1 capac Mini (negru)

Conectivitate

- Dispozitiv wireless 2,4 GHz
- Ascultare muzică prin AudioLink
- Adaptor Telecoil
- Conectivitate directă la dispozitive de ascultare asistată prin compartimentul de baterie Mini

Compatibilitate

- Compatibil cu toate implanturile cohleare multi-canal de la MED-EL.
- Interfață de programare MAX
- Sistem software MAESTRO 9.0 sau o versiune ulterioară
- Utilizare bimodală: compatibil cu toate aparatele auditive

Caracteristici procesare sunet

Procesare frontală

- Direcționalitatea microfonului (Omni, Natural, Adaptiv)
- Inteligență adaptativă
- Control automat al volumului cu Dual-Loop AGC
- Reducerea zgomotului produs de vânt
- Reducerea zgomotului ambiental
- Reducerea zgomotului tranzitoriu
- Interval dinamic de intrare (IDR) de 78 dB

Strategii de codificare a sunetului

- FS4 (Procesare structură fină până la 1 kHz pe 4 canale apicale)
- FS4-p (Procesare structură fină până la 1 kHz pe 4 canale apicale cu Stimulare paralelă inteligentă pentru o și mai mare acuratețe temporală)
- FSP (Procesare structură fină în mod tipic până la 350 kHz pe 2 canale apicale)
- HD-CIS (CIS înaltă definiție)
- Impulsuri de stimulare bifazice sau trifazice
- Acceptă 250 de benzi spectrale

Accesorii

AudioLink

- Dimensiuni: 68 x 38 x 17,5 mm
- Greutate: 35 g
- Comunicare wireless de 2,4 GHz
- Microfon la distanță
- Apeluri telefonice hands-free
- Transmisii TV
- Ascultare muzică (wireless cu aplicația Audio2Ear)
- Intrare audio directă (DAI)

Aplicația AudioKey 2

- Telecomandă
- Funcția de tutore
- Înregistrarea datelor
- Găsește-mi procesorul
- Stare baterie

Telecomandă FineTuner Echo

- Dimensiuni: 104 x 38 x 11 mm
- Greutate: 32 g (cu baterie inclusă)
- Comunicare bidirecțională
- Ecran
- Depanare
- Stare baterie

Husă WaterWear

- Impermeabil până la 4 m adâncime timp de 2 ore (conform standardului IP68)
- Poate fi folosit în apă dulce, sărată sau clorinată

Stație de încărcare

- Port USB: 5 V c.c., 1 A
- Alimentare USB: 100-240 V c.a. (~50/60 Hz)
- Protocol de încărcare Qi wireless

Fiecare produs vine însoțit cu manualul de utilizare care conține instrucțiuni specifice.

Este posibil ca toate funcțiile și caracteristicile să nu fie disponibile pentru toate piețele.

* Unde "fără" înseamnă "nu este fabricat cu latex", în conformitate cu recomandările actuale ale FDA: "Recomandări pentru etichetarea produselor medicale în vederea informării utilizatorilor că produsul sau recipientul produsului nu este realizat cu latex din cauciuc natural", 2014.

** Durata de viață a bateriei depinde de utilizarea individuală.

CABINET BUCUREȘTI

Str. Henri Coanda, nr. 15, ap. 5,
București, Sector 1
+40 723 164 124 | +40 765 533 875

CABINET ORADEA

Str. Tudor Vladimirescu, Nr. 8, Etaj 3, Cabinetul 28
din incinta Policlinicii Tudor Vladimirescu, Oradea
+40 743 733 324 | +40 359 44 65 56

CABINET BRAȘOV

Str. Nicopole, nr. 45, cabinet 40,
în incinta Policlinicii Spitalului de Copii Brașov
+40 745 465 931

medel.com

